

THERAGUN Wave Duo

User Manual

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.


THERAGUN
by Therabody



Wave Duo™

Pametni vibracijski valj proizvajalcev Theragun.

- A** LED svetilka baterije
- B** LED indikator hitrosti
- C** Polnilna vrata USB-C

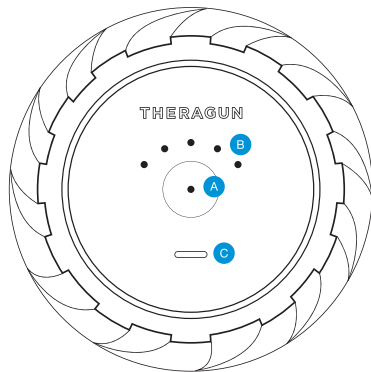

Uvoznik:

Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika

Pomembna varnostna navodila so navedena v navodilih za uporabo.

Uporaba opreme Wave Duo

- Če želite vklopiti napravo Wave Duo, močno pritisnite gumb za vklop in ga držite 1-2 sekundi.
- Če želite povečati hitrost, pritisnite glavni gumb. Ko dosežete najvišjo hitrost, se s ponovnim pritiskom na gumb Wave Duo vrnete na najnižjo hitrost.
- Napravo postopoma namestite pod področje, ki ga želite obdelati, in po potrebi rahlo do zmerno pritiskajte.
- Če želite izklopiti napravo Wave Duo, močno pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se naprava ne izklopi.

Pametne funkcije

Wave Duo je pametna naprava, ki podpira Bluetooth in je zasnovana za nemoteno povezovanje z aplikacijo Therabody. Po prenosu aplikacije boste po korakih vodeni skozi nastavitve in seznanjeni s tem, kako seznaniti napravo.



Skenirajte kodo QR
in začnite.



Polnjenje naprave Wave Duo

- Wave Duo je opremljen s priključkom USB-C. Če želite polniti, kabel priključite na izbrani adapter USB. Wave Duo podpira hitro polnjenje in ga lahko za hitrejše polnjenje polnite neposredno prek polnilnika USB-C (naprodaj ločeno).
- Svetlobna dioda na gumbu za vklop bo utripala, dokler naprava ne bo popolnoma napolnjena.
- Polnjenje je končano, ko je lučka LED na gumbu za vklop zelena.
- Ko je naprava vklopljena, se stanje baterije stalno prikazuje na LED diodi gumba za vklop. Če želite prikazati raven napolnjenosti baterije, ko je naprava izklopljena, na kratko pritisnite gumb za vklop in LED dioda baterije bo utripala, da se prikaže raven napolnjenosti baterije.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi alkohola.

Garancija ne krije mehanskih poškodb. Garancija ne obsega poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne uporabe.