

THERAGUN Wave Solo

User Manual



Born in Los Angeles, CA.
Designed for every**body**.

THERAGUN
by Therabody



Uvoznik:
Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika


Garancija ne krije mehaniških poškodb.

Wave Solo™

Pomembna varnostna navodila so
navedena v navodilih za uporabo.u

Intelligentni vibracijski valj s
tehnologijo QuietRoll™.

- A** LED svetilka baterije
- B** LED indikator hitrosti
- C** Polnilna vrata USB-C

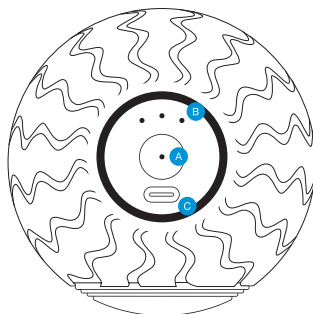

Uporaba opreme Wave Solo

1. Če želite vklopiti napravo Wave Solo, močno pritisnite gumb za vklop in ga držite 1-2 sekundi.
2. Če želite povečati hitrost, pritisnite glavni gumb. Ko dosežete najvišjo hitrost, se s ponovnim pritiskom na gumb Wave Solo vrnete na najnižjo hitrost.
3. Napravo postopoma namestite pod področje, ki ga želite obdelati, in po potrebi rahlo do zmerno pritiskajte.
4. Če želite izklopiti napravo Wave Solo, močno pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se naprava ne izklopi.

Pametne funkcije

Wave Solo je pametna naprava, ki podpira Bluetooth in je zasnovana za nemoteno povezovanje z aplikacijo Therabody. Ko prenesete aplikacijo, boste po korakih vođeni skozi nastavitvev in seznanjeni s tem, kako seznaniti napravo.



Skenirajte kodo
QR in začnite.



Polnjenje naprave Wave Solo

1. Wave Solo je opremljen z USB-C. Če želite polniti, kabel priključite na izbrani adapter USB.
2. Svetlobna dioda na gumbu za vklop bo utripala, dokler naprava ne bo popolnoma napolnjena.
3. Polnjenje je končano, ko je lučka LED na gumbu za vklop zelena.
4. Ko je naprava vklopljena, se stanje baterije stalno prikazuje na LED diodi gumba za vklop. Če želite prikazati raven napolnjenosti baterije, ko je naprava izklopljena, na kratko pritisnite gumb za vklop in LED dioda baterije bo utripala, da se prikaže raven napolnjenosti baterije.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi alkohola.