

NÁVOD NA OBSLUHU

Kozmetický prístroj
BeautyRelax BR-1380

MULTICARE



OBSAH:

ÚČEL POUŽITIA	4
UPOZORNENIE	5
KONTRAINDIKÁCIE	6
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
OBSAH BALENIA	6
POUŽÍVANIE SONOGELU	6
KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ O VAŠU POKOŽKU	7
HLAVNÉ VÝHODY	8
ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ	8
ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA	9
PREDSTAVENIE TECHNOLOGIE ZARIADENIA	9
RÁDIOFREKVENCIA	9
GALVANICKÝ PRÚD	10
EMS	11
VIBRACE	12
FOTONOVÁ TERAPIA	13
TEPELNÁ TERAPIA	14
OPIS NÁSTROJA	15
OVLÁDANIE ZARIADENIA	16
NASADENIE HANDRIČKY NA APLIKÁTOR	17
OKAMŽITÁ HYDRATÁCIA POKOŽKY	18
SCHÉMA TLAČIDLA REŽIMU	19
SYSTÉM NASTAVENIA INTENZITY	19
POPIS AUTOMATICKÝCH PROGRAMOV	20
SCHÉMA POUŽÍVANIA AUTOMATICKÝCH PROGRAMOV	22
MOŽNÉ OBLASTI PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA	23
METÓDA OŠETRENIA TVÁRE A KRKU	24
DÔLEŽITÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA	25
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE	26
NABÍJANIE BATÉRIE	27
ČISTENIE A ÚDRŽBA	27
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	28
CERTIFIKÁCIA	28
DOPRAVA	28
VYHLÁSENIE O ZHODE	29

Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru pri kúpe nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky podrobné informácie v návode na použitie. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Zariadenie používajte presne podľa pokynov. Všetky tieto kroky pomôžu maximálne využiť všetky funkcie prístroja. V tejto príručke sa vám pokúsime poskytnúť čo najlepšiu predstavu o použitej technológii a o tom, ako prístroj čo najlepšie používať.

Ak pri čítaní pokynov narazíte na akékoľvek nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: mh@santadria.cz

Návod na použitie si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie.

ÚČEL POUŽITIA

Séria BeautyRelax Multicare iLift patrí k absolútnej špičke v oblasti kozmetických prístrojov na starostlivosť o pleť. Ponúka pokročilé technológie, ktoré sú najrozšírenejšie v dermatologickom a kozmetickom priemysle. 6 rôznych typov ošetrení vám bude k dispozícii po celý čas. Môžete si tak vybrať presne podľa svojich individuálnych potrieb. Začnite sa o svoju pleť starať na profesionálnej úrovni!



UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím si prečítajte tento návod, prečítajte si všetky ilustrácie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Ak je vaša pokožka postihnutá vážnym kožným ochorením, zariadenie nepoužívajte. Pri prvom použití sa poraďte so svojim praktickým lekárom.
- Zariadenie je primárne určené na osobné použitie. Nezdieľajte ho s rodinnými príslušníkmi ani priateľmi. Ak zariadenie používa viac ako jedna osoba, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hygiene.
- Ak je zariadenie poškodené, nefunguje správne alebo spadlo do vody, nikdy ho neuvádzajte do prevádzky.
- Ak je jednotka poškodená, nedotýkajte sa vnútorných častí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie spadne na zem, môže sa poškodiť. V takom prípade prístroj ďalej nepoužívajte a obráťte sa na servisné oddelenie predajcu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody alebo na miestach so zvýšenou vlhkosťou (vaňa, sprcha, bazén atď.).
- Zariadenie nie je možné umývať. Nesmie byť ponorený do vody ani pod prúdom tečúcej vody.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Po každom použití spotrebič vždy dôkladne vypnite.
- Ak bolo zariadenie premiestnené z veľmi chladného do veľmi teplého prostredia, pred použitím počkajte aspoň 3 hodiny.
- Spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami, ktorých fyzický alebo duševný stav neumožňuje bezpečné používanie spotrebiča.
- Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte na horúcich zdrojoch tepla (radiátor, sporák, oheň atď.).
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať alebo opravovať.
- Zariadenie skladujte v suchom prostredí. Snažte sa ho chrániť pred prachom.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke. Nezodpovedá za následky spôsobené nedodržaním bezpečnostných upozornení.
- Distribútor nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným použitím.



KONTRAINDIKÁCIE

Prístroj **by za žiadnych okolností nemali** používať osoby postihnuté niektorým z týchto stavov:

- Rakovina, epilepsia, vírusové ochorenia
- V stave vysokej horúčky
- Závažné ochorenie obličiek alebo pečene
- Ochorenie srdca, kardiostimulátor, hypertenzia
- Kovové implantáty v tele
- Cievne poruchy alebo arteoskleróza
- Tehotenstvo
- Menštruácia
- Akneiformná keratóza, bazaliómy, melanómy, spinaliómy, atopický ekzém, kontaktný ekzém, solárna dermatitída, psoriáza
- Osoby užívajúce lieky proti zrážaniu krvi
- Osoby, ktoré vyžadujú stály dohľad, môžu zariadenie používať len po konzultácii s lekárom
- Nikdy nepohybujte zariadením na očných viečkach, v oblasti spánkov alebo štítnej žľazy



TECHNICKÉ PARAMETRE

- Prevádzkové napätie: 3,6 V.
- Prevádzkový výkon: 7,2 W.
- Tepelná terapia: 15 °C.
- Napájanie: 750mAh lítium-iónová batéria.
- Nabíjanie batérie: cez kábel USB (je súčasťou balenia).
- Približný čas nabíjania batérie: 2,5 hodiny
- Prevádzkový čas: 60 minút (v závislosti od najčastejšie používanej technológie).
- Rozmery: 18,5x4,5x6cm
- Hmotnosť: 175 g.

OBSAH BALENIA

- BeautyRelax Multicare.
- Napájací kábel USB + adaptér 220 V.
- Návod na použitie.

POUŽÍVANIE SONOGELU

Pred použitím by sa na pokožku mala naniesť tenká vrstva číreho vodivého gélu (nie je súčasťou balenia). Aplikčný gél s názvom SONOGEL je možné zakúpiť v každom obchode so zdravotníckymi potrebami (možno ho kúpiť aj v lekárni). Gél je pre používanie prístroja veľmi dôležitý. Vytvára potrebnú spojovaciu vrstvu medzi aplikátorom a pokožkou. Je na báze vody. Nemôže poškodiť hlavu aplikátora. Použitie aplikačného gélu je nevyhnutné. Rádiofrekvenčné vlny a impulzy EMS môžu lepšie preniknúť do kože. Môžete použiť akýkoľvek kozmetický prípravok na báze vody (kozmetický krém, sérum, ...).

KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ O VAŠU POKOŽKU

a) Zlepšenie textúry pokožky

Rádiofrekvencia, galvanický prúd a mikropulzy EMS pôsobia priamo na vrstvu dermy, kde sa nachádzajú kolagénové a elastické vlákna zodpovedné za pružnosť a štruktúru pokožky.

b) Hydratácia a výživa pokožky

Galvanický prúd so záporným nábojom preniká živiny z kozmetických sér hlboko do pokožky. Zabráni sa tak vysychaniu na povrchu.

c) Liečba pleti náchylnej na akné

Fotónová terapia modrým svetlom aktivuje porfyríny. Chemická reakcia, ktorá ničí škodlivé baktérie.

d) Konečné upokojenie pokožky

Termoterapia pri optimálnej teplote upokojuje pokožku. Zmenšuje póry. Podporuje prirodzenú detoxikáciu pokožky.

e) Zlepšenie kvality a vypnutie pokožky

Elektrické mikropulzy EMS spôsobujú kontrakciu svalov, a tým ich posilnenie. V oblasti tváre dosiahnete zlepšenie štruktúry pleti, jej tónu a zvýšenie elasticity.

f) Obnova vlastného kolagénu

Fotónová terapia červeným svetlom podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu.

g) Neinvazívny lifting tváre

Rádiofrekvenčné vlny sú optimalizované tak, aby spôsobili tepelný gradient, ktorý výrazne ovplyvňuje procesy vo vrstve dermis.

h) Hĺbkové čistenie pleti

Galvanický prúd s kladným nábojom priťahuje záporne nabitú nečistotu ako magnet. Zažite skutočne čistú pleť ako nikdy predtým.



HLAVNÉ VÝHODY

- Neinvazívna liečba (zariadenie nepreniká priamo cez pokožku).
- Liečba bez nepríjemných pocitov.
- Žiadne nežiaduce trvalé zmeny pigmentácie kože.
- Bezprostredne po zákroku sa môžu používať kozmetické prípravky.
- Pokračovať vo všetkých aktivitách (napr. pred sociálnym programom) bez obmedzení.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ

- Postupné zlepšovanie pružnosti pokožky.
- Vaša pleť bude vyzeráť sviežejšie.
- Odstránenie hlbokých a jemných vrások na tvári.
- Zvýraznenie charakteristických kontúr tváre.
- Stimulácia tvárových svalov.
- Krvný obeh a okysličovanie podkožného tkaniva.
- Jemná lymfatická masáž na zníženie opuchov tváre.
- Účinná podpora bunkového metabolizmu a vstrebávania živín.



ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA

- 5 automatických programov s prednastavenými režimami ošetrovania pleti.
- Vhodné na komerčné aj súkromné použitie.
- Aplikačná hlavica je vhodná pre všetky typy pleti.
- Ergonomický dizajn - pohodlne sa drží v ruke počas ošetrovania pokožky.
- Bezdrôtové používanie vďaka zabudovanej dobíjateľnej lítium-iónovej batérii.
- Nabíjanie pomocou kábla USB (je súčasťou balenia).

PREDSTAVENIE TECHNOLOGIE ZARIADENIA

BeautyRelax Multicare je certifikovaný revolučný nástroj, ktorý vám pomôže ošetriť vašu tvár ako v štúdiu krásy v pohodlí vášho domova! Kombináciou niekoľkých technológií získate silný nástroj v boji proti vráskam alebo ochabnutej pleti. Za ošetrovanie v salóne zaplatíte desiatky tisíc. Teraz môžete získať technológiu, ktorú používajú profesionáli, za zlomok ceny!

RÁDIOFREKVENCIA


Aplikačná hlava generuje energiu prostredníctvom rádiových vln s veľmi špecifickým výkonom a frekvenciou. Rádiové vlny sú optimalizované tak, aby spôsobili tepelný gradient, ktorý výrazne ovplyvňuje procesy v dermis vrstve. Dodaná energia aktivuje remodeláciu kolagénových vlákien a elastínu. Maximálne možné zacielenie energie aj do oblastí s výraznejšou tukovou vrstvou a následné nabudenie metabolických procesov má významný vplyv na veľmi účinné vyhladenie ovisnutých a deformovaných kontúr.



1. Redukcia jemných vrások na tvári 2. Potlačenie tmavých kruhov pod očami 3. Zvýšenie pružnosti kontúr tváre 4. Spevnenie a vypnutie pokožky 5. Remodelácia kolagénových vlákien 6. Potlačenie prejavov celulitídy 7. Potlačenie strií a jaziev


GALVANICKÝ PRÚD

Aplikačná hlava vytvára na svojom povrchu prúd s možnosťou variabilného nabíjania. Riadiaca jednotka kozmetického prístroja umožňuje nastaviť galvanický prúd tak, aby vytváral kladný alebo záporný náboj. Pozitívna a negatívna ionizácia majú na pokožku rôzne účinky.

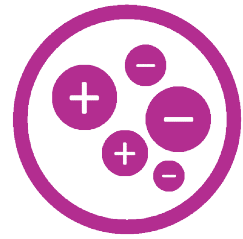


Pozitívna ionizácia - dôkladne čistí pokožku


Nečistota je nabitá záporným nábojom. Aplikačná hlava na druhej strane generuje pozitívne ióny, ktoré priťahujú nečistoty ako magnet a vyťahujú ich na povrch, kde sa dajú ľahko odstrániť. Nečistoty sa zachytávajú nielen na povrchu pokožky, ale aj hlboko v póroch.

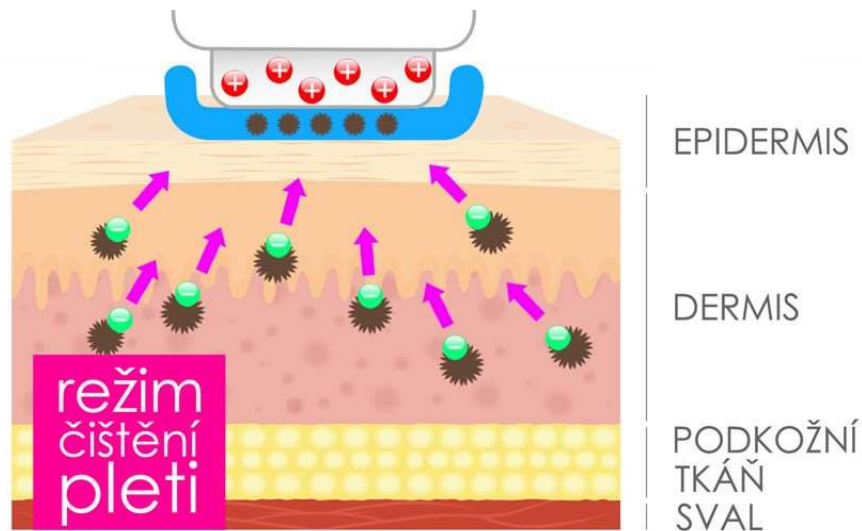

Negatívna ionizácia - hĺbková výživa pokožky


Aplikačná hlavica generuje veľké množstvo záporných iónov, ktoré sa viažu na kladné ióny v kožných bunkách. Tým sa vytvorí optimálna cesta, aby sa živiny z krémov dostali do pokožky čo najhlbšie. Pri bežnej aplikácii krému absorbuje jeho väčšinu vrchná vrstva kože (epidermis). Zvyšok sa vysuší bez ďalšieho použitia.

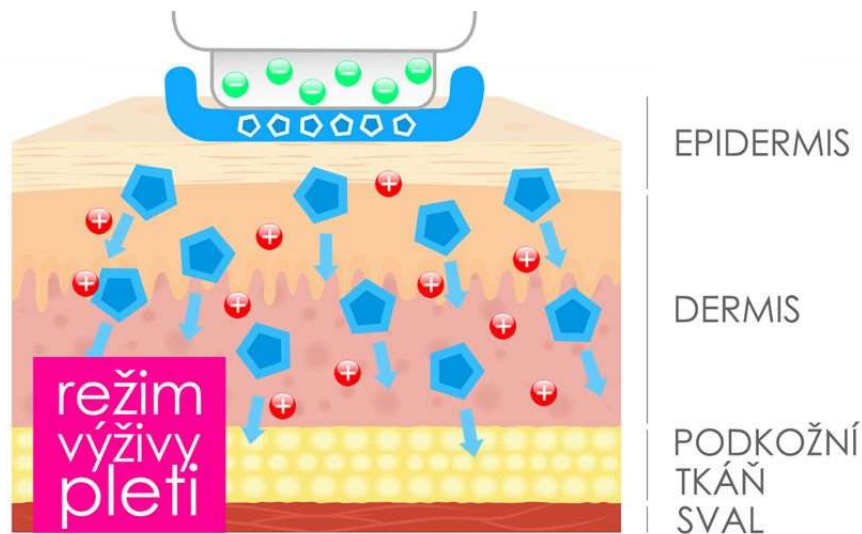

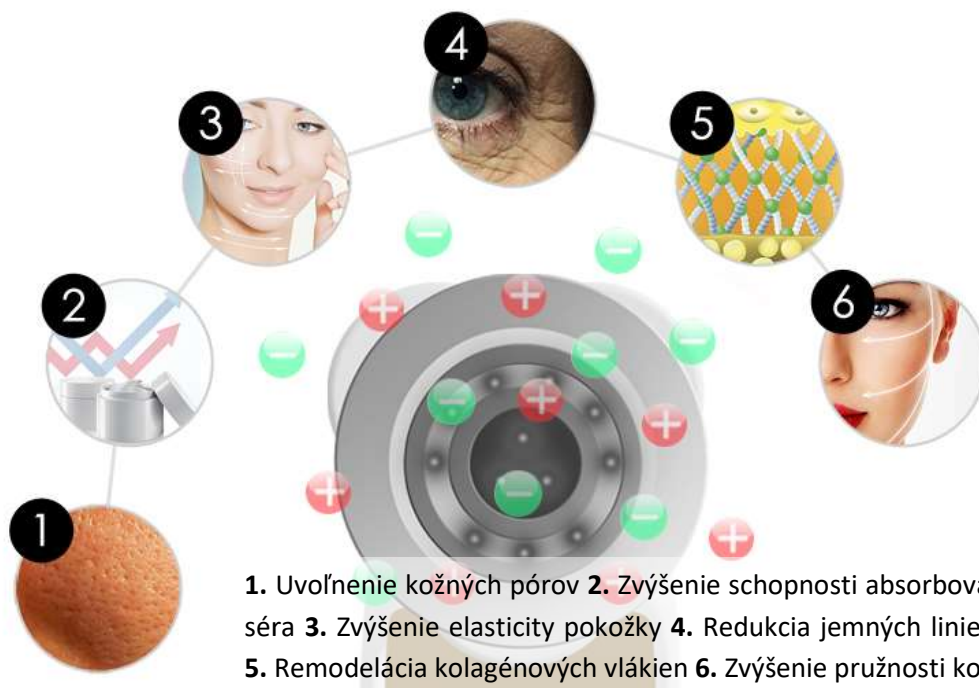



EMS

Naša tvár je pretkaná štruktúrou svalov. Svaly tváre sú zodpovedné za výraz a mimiku. Svaly časom strácajú svoju prirodzenú pružnosť a ohybnosť. Plet pôsobí matným a unaveným dojmom. Aplikátorová hlava BeautyRelax Multicare vysiela pri kontakte s pokožkou jemné elektrické mikropulzy, ktoré prenikajú cez hornú časť pokožky priamo do tvárových svalov. Sila a frekvencia elektrických impulzov sú špeciálne nastavené tak, aby umožnili účinné a zároveň bezbolestné ošetrovanie tváre. Svaly sa stiahnu a tým sa posilnia. Kolagénové a elastické vlákna sú mechanicky stimulované. V oblasti tváre dosiahnete zlepšenie štruktúry pleti, jej tónu a zvýšenie elasticity. Plet má omladený a žiarivý vzhľad. To všetko neinvazívne a bez nepríjemných pocitov.

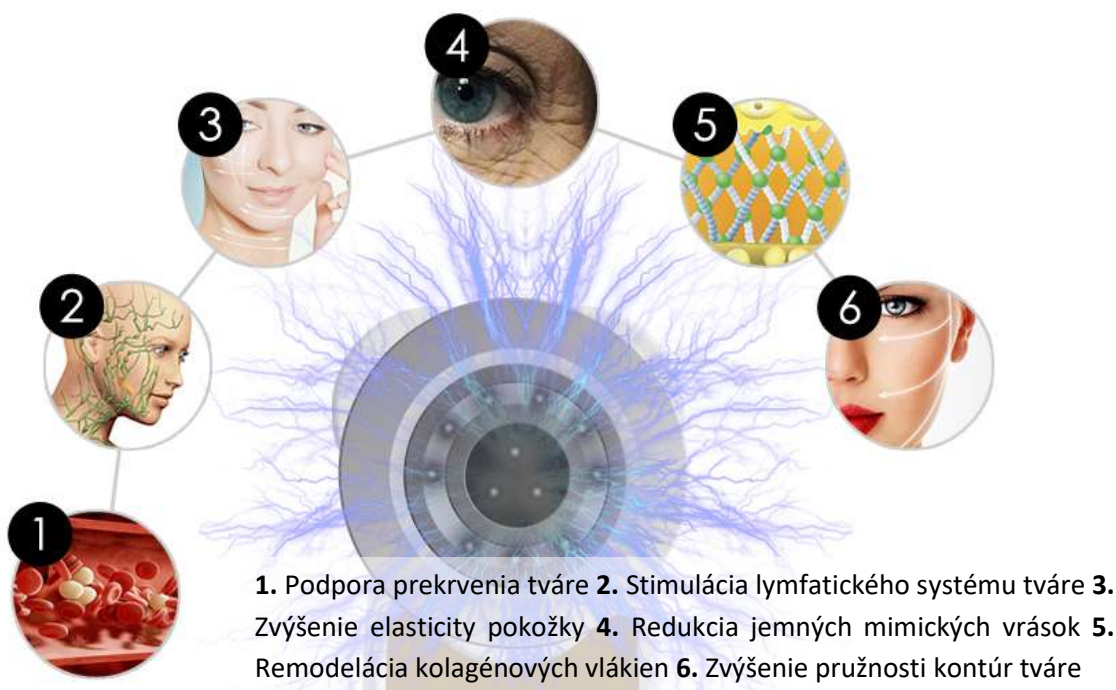

VIBRACE



Správna funkcia lymfatického systému sa týka nielen končatín, ale aj našej tváre. Ak je náš lymfatický a krvný obeh v poriadku, odstraňovanie nečistôt z krvi sa mnohonásobne zlepšuje. Zlepšenie krvného obehu = stimulácia lymfatického systému = lepšie odstraňovanie nečistôt a škodlivín z tela = krásna a zdravá pokožka. Jednoduchá rovnica, ktorá platí nielen pre tvár, ale pre celé telo. Jemná vibračná masáž je technologicky jednou z najjednoduchších, ale veľmi účinných techník ošetrovania pleti.

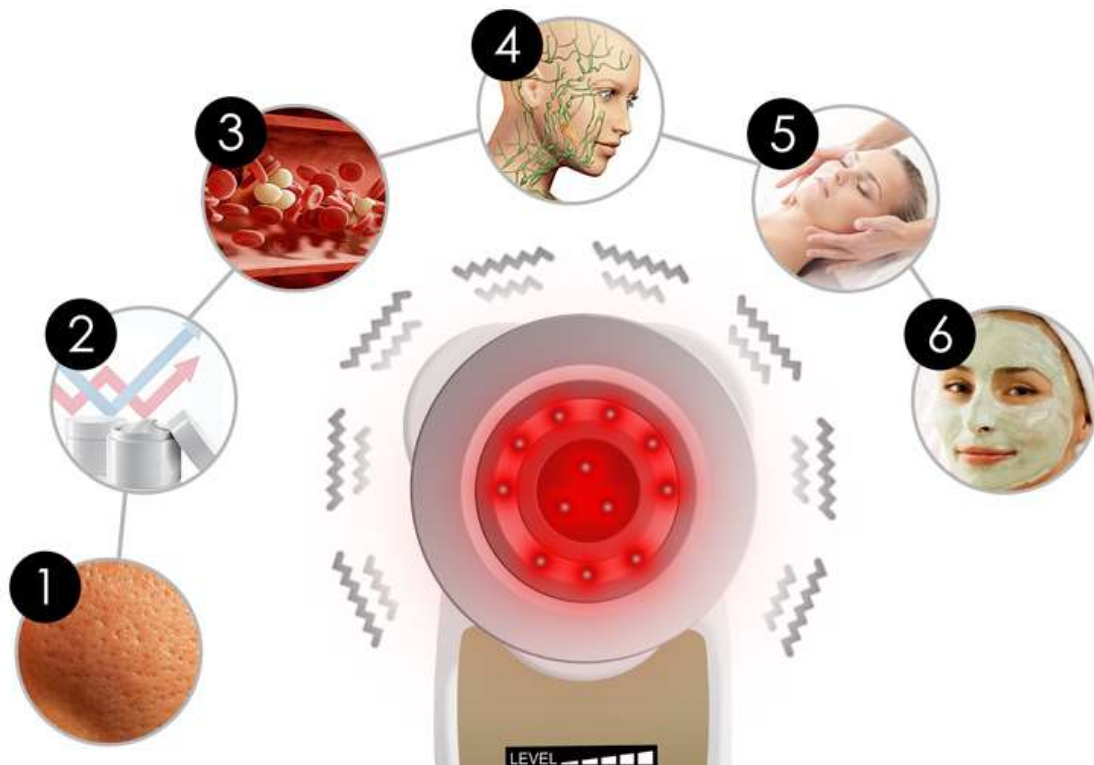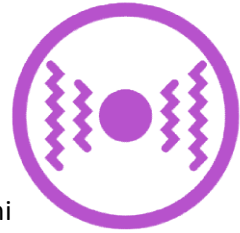

1. Uvoľnenie kožných pórov **2.** Zvýšenie schopnosti absorbovať krémy a séra **3. Stimulácia** lymfatického systému tváre **5.** Mechanická masáž pokožky **6.** Podpora prirodzenej detoxikácie pokožky

FOTONOVÁ TERAPIA

Svetlo je jednoducho viditeľná časť elektromagnetického žiarenia rôznych frekvencií. Dosahuje rôzne vlnové dĺžky v intervale 390 až 760 nm (nanometrov). Ľudské oko je schopné vnímať svetlo s vlnovou dĺžkou od 400 do 800 nm. Pri fotónovej terapii vstupuje svetlo do tela ako prúd energie vo forme fotónov. Je vedecky dokázané, že rôzne vlnové dĺžky svetla majú špecifické účinky na starostlivosť o pleť. Štúdie overili skutočné pozitívne terapeutické účinky na živé tkanivá a organizmy na bunkovej úrovni. BeautyRelax Multicare ponúka funkciu červeného a modrého svetla.

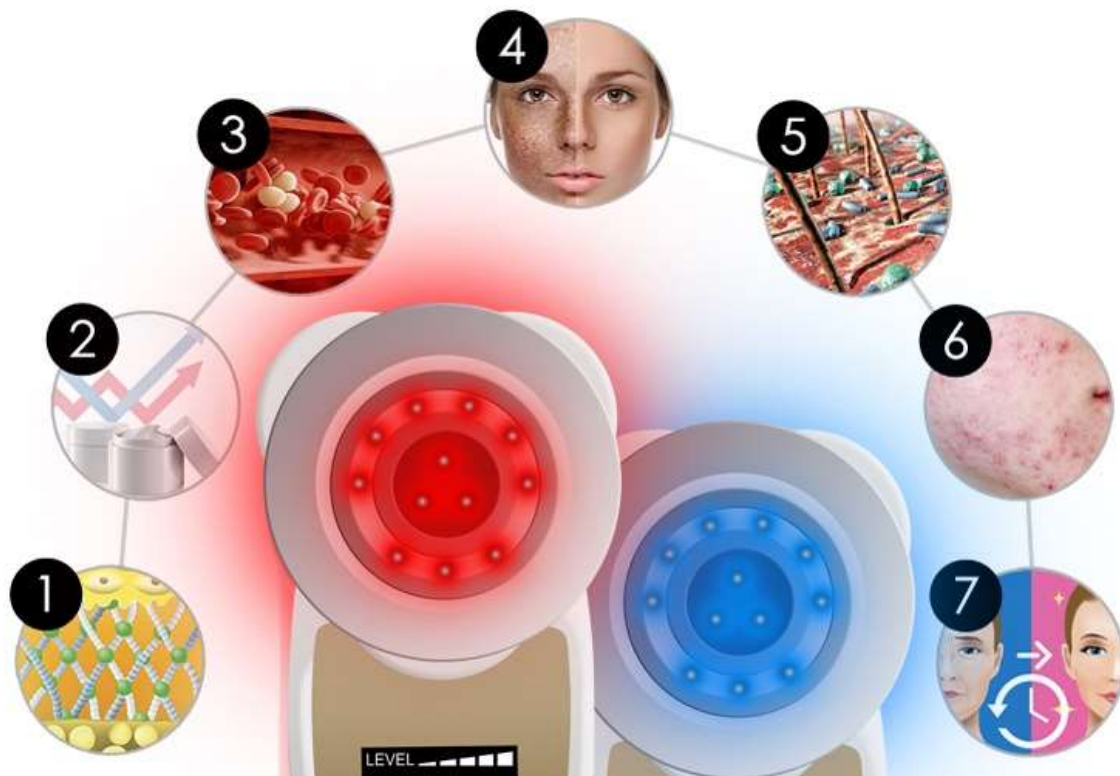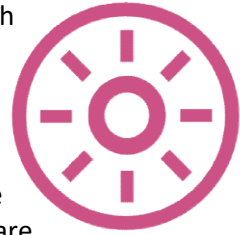


1. Podporuje prirodzenú produkciu kolagénu 2. Zvyšuje vstrebávanie kozmetických prípravkov 3. Zlepšuje prekrvenie podkožného tkaniva 4. Zabraňuje tvorbe pigmentu 5. Antibakteriálny účinok 6. Prevencia proti tvorbe akné 7. Pomáha spomaľovať starnutie pokožky

TEPELNÁ TERAPIA


Ošetrenie pokožky aplikačnou hlavickou pri optimálnej teplote výrazne ovplyvňuje funkciu lymfatického systému tváre a jej metabolismus. Ošetrenie pokožky sa zvyčajne dokončí pri teplote približne 15 °C. Pokožka sa upokojí a póry sa stiahnu.



1. Prirodzená detoxikácia organizmu **2.** Redukcia pórov a upokojenie pleti **3.** Udržiavanie prirodzenej vlhkosti

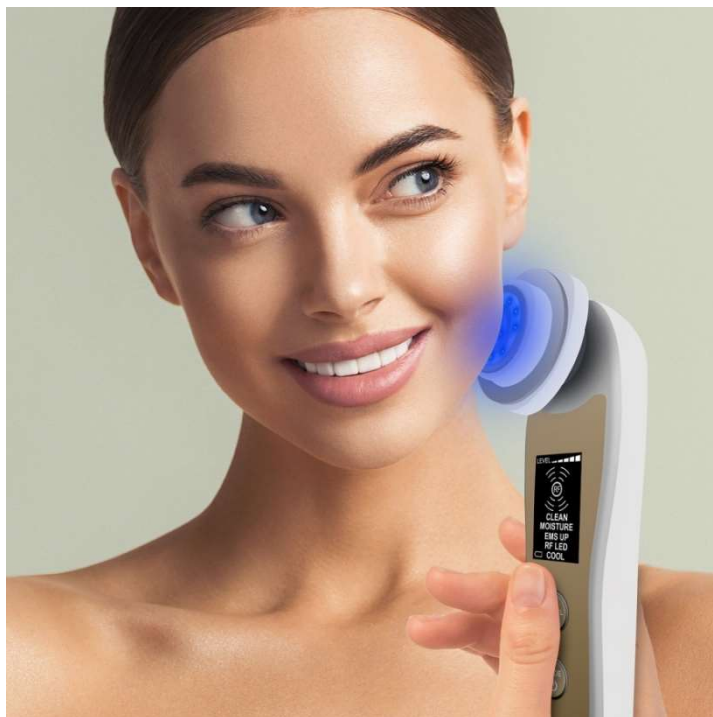

OPIS NÁSTROJA

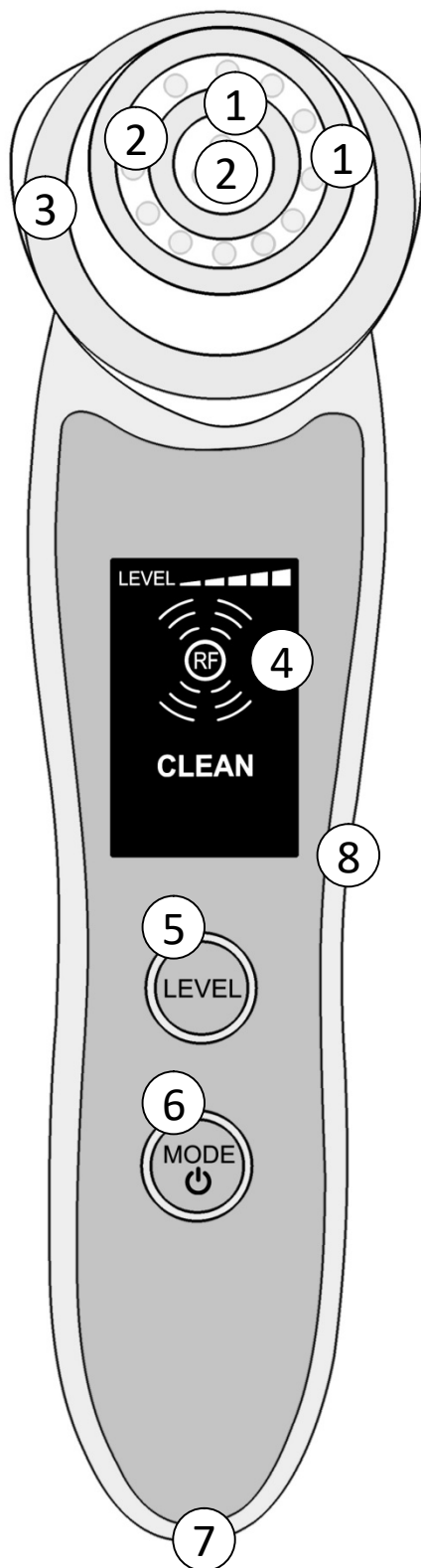

1. Kontaktné elektródy pre rádiofrekvenčný prenos/emisiu/ionizáciu
2. LED diódy pre červenú funkciu a modré svetlo
3. Krúžok na pripevnenie látky/podložky
4. Podsvietený displej
5. Tlačidlo **LEVEL**
6. Tlačidlo **MODE/ON/OFF**
7. Zásuvka pre nabíjací kábel USB
8. Telo nástroja

OVLÁDANIE ZARIADENIA

1. Pred každým použitím je potrebné pokožku dôkladne umyť. Ideálne je načasovať ošetrovanie po kúpeli.
2. Na ošetrovanú oblasť naneste tenkú vrstvu číreho aplikačného gélu (nie je súčasťou balenia). Aplikačný gél s názvom SONOGEL je možné zakúpiť v každom obchode so zdravotníckymi potrebami (možno ho kúpiť aj v lekárni). Gél je pre používanie prístroja veľmi dôležitý. Vytvára potrebnú spojovaciu vrstvu medzi aplikačnou hlaviceou a pokožkou. Je na báze vody. Nemôže poškodiť hlavu aplikácie. Použitie aplikačného gélu je nevyhnutné. Zariadenie bez spojiva medzi kožou a aplikátorom sa neodporúča. Zbytočne by to znížilo účinnosť. Pozri pasáž: **ROZPOČET POUŽÍVANIA AUTOMATICKÝCH PROGRAMOV**.
3. Dlhو stlačte tlačidlo **MODE/ONOFF**. Prístroj má 5 automatických programov, ktoré majú prednastavené jednotlivé technológie ošetrovania pleti.
4. Ihneď po spustení sa automaticky aktivuje režim **CLEAN**.
5. Opätovným stlačením tlačidla **MODE/ONOFF** vstúpíte do režimu **MOISTURE**.
6. Opätovným stlačením tlačidla **MODE/ONOFF** zapnete režim **EMS UP**.
7. Opätovným stlačením tlačidla **MODE/ONOFF** vyberte režim **RF LED**.
8. Opätovným stlačením tlačidla **MODE/ONOFF** vstúpíte do režimu **COOL**.
9. Pomocou tlačidla **LEVEL** môžete nastaviť výkon zariadenia presne podľa svojich potrieb. Na výber je celkovo 5 úrovní intenzity.
10. Podsvietený displej zobrazuje základné informácie o ošetrovaní. Môžete sledovať úroveň intenzity každého ošetrovania a priebeh práce zariadenia.
11. Každý automatický program sa automaticky vypne po 3 minútach.
12. Zariadenie môžete kedykoľvek vypnúť dlhým stlačením tlačidla **MODE/ONOFF**.

Poznámka: Každý automatický program má časovač, ktorý automaticky vypne zariadenie po 3 minútach prevádzky.

Upozornenie: Pri prvom kontakte s pokožkou majte vždy zapnutý nízky stupeň. Aplikátor priložte na tú časť tváre, kde je viac podkožného tuku. Silu môžete postupne zvyšovať. Vždy však závisí od vášho subjektívneho pocitu. Ak je liečba už nepríjemná až mierne bolestivá, nastavte ju späť na najnižšiu úroveň alebo liečbu prerušte.

Tip: Ošetrovaná oblasť tváre a krku by mala byť v ideálnom prípade bez silných chĺpkov. Tým sa zlepší pohyb aplikačnej hlavice po pokožke. Najmä rádiovlnové vlny budú mať lepšiu možnosť preniknúť do podkožného tkaniva.

Odporúčanie: Ak používate rádiovlnovú a EMS s vyššou intenzitou, nevystavujte ošetrovanú pokožku horúcej vode aspoň 3 dni. Pokožka sa po ošetrovaní zotavuje a horúca voda (alebo pobyt v saune) môže pokožku zbytočne podráždiť. Pri používaní zariadenia sa pokožka zahrieva. Ak je vám príliš teplo, urobte si prestávku a nechajte pokožku vychladnúť.

NASADENIE HANDRIČKY NA APLIKÁTOR

Na aplikátor sa nasadí krúžok, ktorý je pripevnený magnetom. Krúžok sa používa na pripevnenie utierky alebo obrúska. Ideálne na nanášanie čistiaceho krému alebo výživného séra. Tkanina môže byť vyrobená aj z látky. Nemala by byť príliš hustá.



- 1. Odstráňte krúžok z aplikačnej hlavy**
- 2. Pripevnite látku a upevnite ju pomocou krúžku.**
- 3. Magnetické upevnenie**

Poznámka: Hlava aplikátora nie je vodotesná. Nikdy ho nečistite pod prúdom tečúcej vody. Po skončení ošetrovania pokožky aplikátor dôkladne osušte.

Možnosť pripevnenia utierky je inováciou modelu Multicare, ktorá nie je vždy nevyhnutná a slúži skôr ako doplnok. Hlavným princípom je prenikanie účinných látok, najmä z tých kozmetických výrobkov, ktoré majú veľmi nízku hustotu. Inými slovami, sú takmer ako voda a po nanosení na pokožku skôr stečú. To platí najmä pre séra. Zároveň ich môžete používať v režime CLEAN na zachytávanie nečistôt.

Pri automatických programoch **CLEAN** a **EMS UP** sa odporúča používať handričku (možno používať aj bez handričky).

OKAMŽITÁ HYDRATÁCIA POKOŽKY

Hydratácia pokožky je jedným z najdôležitejších kozmetických ošetroení. Zdravá a krásna pleť sa nezaobíde bez dostatočnej hydratácie. Na trhu je množstvo kozmetických výrobkov, ktoré sú určené na intenzívnu hydratáciu pleti. Najčastejšie ide o krémy, séra, gély alebo éterické oleje. Galvanická žehlička v režime **MOISTURE** využíva technológie, ktoré mnohonásobne zlepšujú prenikanie kozmetických výrobkov do pokožky.

1. Použite kozmetický prípravok určený na hydratáciu pokožky.
2. Pomocou prístroja v režime **MOISTURE** postupne "zapracujte" kozmetický prípravok do pokožky. Ak 3 minúty nestačia na ošetroenie celej tváre, zopakujte režim **MOISTURE**.



Pomocou diagnostického prístroja na meranie vlhkosti pokožky možno zmerať, že po zapracovaní kozmetického výrobku s galvanickou žehličkou sa obsah vlhkosti pokožky znásobí. Pred ošetroením bola vlhkosť pokožky v nasledujúcom príklade približne **32 %**. Po ošetroení prístrojom v kombinácii s kozmetickým prípravkom sa obsah vlhkosti zvýšil na **65 %**.



SCHÉMA TLAČIDLA REŽIMU

Pomocou tlačidla **MODE** môžete ľubovoľne meniť automaticky prednastavené programy. Okamžite po zapnutí zariadenia sa spustí režim **ČISTENIE**. Ostatné funkcie sa aktivujú pomocou tlačidla **MODE** podľa nasledujúcej schémy:

MÓD	CLEAN	MOISTURE	EMS	LED	COOL
FUNKCE	Radiofrekvence Ionizace+ Vibrace	Radiofrekvence Ionizace- Vibrace	Radiofrekvence EMS	Radiofrekvence Červené světlo	Působení chladu Modré světlo
DISPLEJ	 CLEAN	 MOISTURE	 EMS UP	 RF LED	 COOL

SYSTÉM NASTAVENIA INTENZITY

Pomocou tlačidla **LEVEL (Úroveň)** nastavíte intenzitu ošetrovania pokožky. Intenzitu ošetrovania pleti možno nastaviť na režimy **CLEAN**, **MOISTURE**, **EMS UP**. Aktuálne nastavená hodnota sa zobrazuje v hornej časti displeja. Predvolená intenzita je **úroveň 1**. K dispozícii je celkovo **5 úrovní**.

level 1	level 2	level 3	level 4	level 5
				

Upozornenie: Odporúčanie pre ideálne nastavenie intenzity je veľmi subjektívne a nedá sa presne určiť. Ponuka viacerých úrovní intenzity ošetrovania pokožky je spôsobená rôznymi vrstvami podkožného tuku každého používateľa. Pri silnejšej vrstve tuku je potrebný väčší výkon, aby bolo ošetrovanie pokožky čo najúčinnnejšie. Vždy začnite na **úrovni 1** a postupne ju zvyšujte podľa svojho

POPIS AUTOMATICKÝCH PROGRAMOV

REŽIM ČISTENIA (čistenie pokožky)

LEVEL 



CLEAN

Čištění pleti

- Radiofrekvence
- Galvanický proud
- Vibrační masáž

Zahřátí podkožní tkáně.
Uvolnění napětí pokožky.

- Galvanický proud
 - Vibrační masáž
- Kladný náboj přitahuje
záporně nabitě nečistoty.

LEVEL 



MOISTURE

Hydratace

- Radiofrekvence
- Galvanický proud
- Vibrační masáž

Zahřátí podkožní tkáně.
Uvolnění napětí pokožky.

- Galvanický proud
 - Vibrační masáž
- Záporný náboj penetruje
účinné látky hluboko
do pleti.

Režim EMS UP (zdvíhanie EMS)

LEVEL 



EMS UP

EMS lifting

- EMS mikropulzy
- Radiofrekvence

Zahřátí podkožní tkáně.
Uvolnění napětí pokožky.

- EMS mikropulzy

Elektrické mikropulzy
stimulují intenzivně
svaly podkožní tkáně.

Režim RF LED (červená LED)

LEVEL 



RF LED


Červené LED

- Červené světlo
- Radiofrekvence

Zahřátí podkožní tkáně.
Uvolnění napětí pokožky.
Podpora přirozené
tvorby kolagenu.
Příznivý vliv na elastická
vlákna.

CHLADNÝ REŽIM (upokojenie pokožky)

LEVEL 

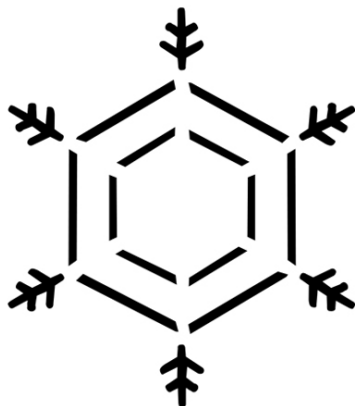

COOL

Zklidnění pleti

- Tepelná terapie
- Modré LED světlo

Během kosmetického ošetření pleť snadno zarudne. Chlad pleť zklidní a přispěje k návratu barvy pleti zpět do normálu. Modré světlo působí antibakteriálně.

SCHÉMA POUŽÍVANIA AUTOMATICKÝCH PROGRAMOV

Automatické programy možno kombinovať s vašimi obľúbenými kozmetickými výrobkami. Nasledujúca tabuľka slúži ako odporúčanie pre dĺžku a frekvenciu ošetrení.

MÓD	FUNKCE	POUŽITÍ HADŘÍKU	DOPORUČENÝ KOSMETICKÝ PRODUKT	DÉLKA OŠETŘENÍ	FREKVENCE OŠETŘENÍ
CLEAN	Radiofrekvence Ionizace+ Vibrace	Doporučeno.	Čistící krém nebo vodivý sonogel.	Přibližně 3 minuty	2x až 3x týdně
MOISTURE	Radiofrekvence Ionizace- Vibrace	Netřeba.	Vyživující maska. Hydratační nebo regenerační krém či sérum.	Přibližně 3 minuty	2x až 3x týdně
EMS UP	Radiofrekvence EMS	Doporučeno.	Vodivý sonogel.	Přibližně 3 minuty	2x až 3x týdně
RED LED	Radiofrekvence Červené světlo	Netřeba.	Vodivý sonogel.	Přibližně 3 minuty	2x až 3x týdně
COOL	Působení chladu Modré světlo	Netřeba.	Netřeba.	Přibližně 3 minuty	Každý den

MOŽNÉ OBLASTI PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA



Poznámka: Počas ošetrovania sa snažte udržať aplikačnú hlavicu čo najviac v kontakte s pokožkou. Vždy sa vyhýbajte oblastiam, ako sú očné viečka, oblasť spánkov alebo štítna žľaza.

METÓDA OŠETRENIA TVÁRE A KRKU



FACE: vzdialiť sa od stredu čelo až po okraj, postupne pokryte celú oblasť




NOS: pohybujte sa od čela okolo nosa k lícam, zhora nadol



Tvár: pohybujte tvárou v smere zdola nahor



brada: pohybujte sa od špičky brady pozdĺž kontúr tváre, zdola nahor

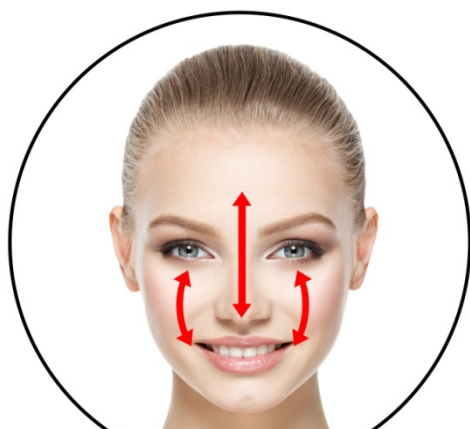

Zóna T: pohybujte sa od čela po špičku nosa a tvár, pohyb v oboch smeroch



Krk: pohybujte sa od brady k uchu a potom dole ku krku

DÔLEŽITÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- BeautyRelax Multicare je nová generácia kozmetických prístrojov určených na neinvazívne ošetrovanie pleti. To znamená, že žiadna časť aplikačnej hlavice fyzicky nepreniká pod kožu.
 - Neinvazívna prevádzka je predpokladom používania zariadenia používateľom v domácom prostredí. Používanie prístroja si nevyžaduje dohľad erudovaného odborníka v oblasti medicíny alebo estetickej kozmetiky.
 - Prístroj BeautyRelax Multicare je certifikovaný a spĺňa všetky normy požadované pre prístroj tohto druhu.
 - Ošetrovanie by sa malo vždy kombinovať s čírym vodivým gélom alebo iným kozmetickým prípravkom na báze gélu. Dá sa kúpiť v každej lekární alebo obchode so zdravotníckymi potrebami. Stojí niekoľko desiatok korún. Rozhodne stačí najlacnejší. Neplaťte čím drahšie, tým lepšie. Hlavným účelom nanášania jemnej vrstvy gélu na pokožku je zvýšenie vodivosti. Rádiofrekvenčné vlny a jemné elektrické mikropulzy majú lepšiu schopnosť preniknúť do vrstvy dermy, kde sa nachádza štruktúra kolagénu a elastických vlákien. Ak je to možné, vyhnite sa vodivému gélu s pridanými vonnými látkami alebo farbivami. Pokožka citlivejších používateľov nemusí reagovať pozitívne.
 - **Ak držíte hlavicu aplikátora na pokožke príliš dlho, rádovo niekoľko sekúnd, a máte nastavenú najvyššiu úroveň ošetrovania (rádiofrekvencia, elektropulz), zariadenie je dostatočne silné na to, aby nepríjemne poranilo vašu pokožku. Preto k liečbe pristupujte s maximálnou opatrnosťou a jemnosťou. Ak by zariadenie nebolo dostatočne výkonné, nebolo by možné dosiahnuť požadované výsledky.**
 - Ak je to možné, vyhnite sa aplikačnou hlavice miestam s veľmi tenkou a citlivou pokožkou. Ak sa na pokožke nachádza menšia vrstva podkožného tuku, pracujte s nižším výkonom alebo sa tejto oblasti kože úplne vyhnite.
- Aplikačnou hlavice môžete po pokožke pohybovať rôznymi spôsobmi. Krátke, dlhé ťahy alebo krátke bodové ošetrovanie - tzv. pečiatkovanie. Výhodou pečiatkovania je priame zacielenie na konkrétnu časť pokožky (napr. vejárovité alebo hrebienkovité vrásky). Ak držíte hlavicu v kontakte s pokožkou príliš dlho (rádiofrekvencia), nahromadí sa množstvo energie, ktoré zvýši teplotu aplikátora. Preto pred opätovným nanesením na pokožku počkajte niekoľko sekúnd. Zvýšenie teploty aplikátora nie je poruchou zariadenia, ale vedľajším účinkom dlhodobého pôsobenia rádiofrekvenčných vln. Začnite s krátkymi "ťuknutiami" na pokožku a postupne ich dĺžku predlžujte.**
- 
- Po každom ošetrovaní aplikačnú hlavicu vždy dôkladne vyčistite. Na dezinfekciu je ideálne použiť číry alkohol. V poslednej fáze aplikátor dôkladne vysušte. Vlhkosť môže spôsobiť oxidáciu kontaktov aplikátora. Tým sa výrazne predĺži životnosť aplikačnej hlavy.
 - Pri používaní červeného alebo modrého svetla sa nevyžaduje žiadna ochrana očí. Pri používaní sa však prísne odporúča nepozerať priamo na zdroj svetla. Opakované a dlhodobé používanie by mohlo poškodiť váš zrak.
 - V prípade akýchkoľvek pochybností a otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať:
Tel: 737 196 160 E-mail: mh@santadria.cz

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Prečo je výrazný cenový rozdiel medzi prístrojmi v kozmetických salónoch a prístrojmi na domáce použitie?

Hlavným dôvodom je rozdielna frekvencia používania. Stroje v kozmetických salónoch musia byť schopné pracovať nepretržite od rána do večera. To kladie zvýšené nároky na použité materiály a celkovú technologickú koncepciu (väčšie napájacie zdroje, vyššia rýchlosť chladenia atď.) Výkonnosť domácich kozmetických strojov je navrhnutá tak, aby spĺňala výhody, ktoré boli oznámené používateľovi. Vyššia frekvencia používania = drahšie výrobné náklady.

Aký je dôvod čistenia/dezinfekcie aplikačnej hlavy?

Po ošetrení môžu na aplikačnej hlavici prilnúť mikroskopické čiastočky kože. Čistenie zabraňuje ich prenikaniu do zariadenia a zabezpečuje hygienu prevádzky.

Ako často môžem zariadenie používať?

Počet opakovaní je veľmi individuálny. Závisí to od veku a stavu pokožky. Ideálne je raz alebo dvakrát týždenne. Pokožka, a najmä dermis, potrebuje čas na autonómny proces regenerácie. Rozhodne neplatí rovnica - čím častejšie, tým lepšie dosiahnuteľné výsledky. Ani tu neplatí, že čím väčší výkon, tým rýchlejší a lepší výsledok. Koža každého človeka je orgán s individuálnym stupňom citlivosti. Pre niekoho môže byť mierna úroveň výkonu už výrazne bolestivá, niekto nemá problém s najvyšším výkonom pri dlhších procedúrach.

Ako dlho by malo trvať individuálne ošetrenie pleti?

Optimálna dĺžka každého automatického programu je 3 minúty. Kompletné ošetrenie pomocou všetkých programov by preto nemalo trvať dlhšie ako 15 minút.

Existujú nejaké kontraindikácie? (situácie, v ktorých sa zariadenie nemôže používať)

BeautyRelax Multicare je určený pre všetky typy pleti bez obmedzenia veku. Prístroj by sa nemal používať, ak používateľ trpí vážnym kožným ochorením. Pozri zoznam kontraindikácií v úvode príručky.

Je potrebné v režime fotónového svetla používať nejakú ochranu očí?

Pri používaní červeného alebo modrého svetla sa nevyžaduje žiadna ochrana očí. Pri používaní sa však prísne odporúča nepozerať priamo na zdroj svetla. Opakované a dlhodobé používanie by mohlo poškodiť váš zrak.

Je zariadenie zdravotníckou pomôckou?

Nie, nie je. Prístroj nie je určený na liečbu závažných kožných ochorení. Prístrojom sa nelieči: aktinická keratóza, bazaliómy, melanómy, spinaliómy, atopický ekzém, kontaktný ekzém, solárna dermatitída, psoriáza.

Čo mám robiť, ak batéria po dlhšom čase stratí kapacitu?

Ak sa kapacita batérie časom výrazne zníži, neváhajte nás kontaktovať na adrese mh@santadria.cz. Pošleme vám informácie o tom, ako batériu vymeniť.

Má zariadenie nejakú certifikáciu?

Nástroj na štandardnú európsku certifikáciu. Spĺňa všetky normy, ktoré sú stanovené pre prístroje tohto typu. Vyhlásenie o zhode je súčasťou dokumentácie k výrobku v krabici.

Kde sa zariadenie vyrába?

Prístroj sme nechali vyrobiť v Číne podľa našich požiadaviek a špecifikácií. Garantujeme štandardný záručný a pozáručný servis.

Môže zariadenie používať viac ako jedna osoba?

V prvom rade to neodporúčame. Ak však ide o člena rodiny a po každom ošetrení sa dodrží postup čistenia a dezinfekcie aplikačnej hlavice, môže prístroj používať aj iná osoba.

Aké kozmetické prípravky by som mala kombinovať počas ošetrovania BeautyRelax Multicare?

Môžete použiť ktorýkoľvek zo svojich obľúbených krémov a sér. Vždy sa však uistite, že je hlava po ošetrení pokožky dôkladne vysušená.

Ktoré časti tela možno prístrojom ošetriť?

Prístroj je určený na ošetrovanie tváre a krku.

NABÍJANIE BATÉRIE

Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Hneď ako sa počas používania rozsvieti symbol batérie, je potrebné zariadenie nabiť. Zariadenie sa počas nabíjania nemôže používať.

Poznámka: Ak je zariadenie vypnuté, proces nabíjania sa po pripojení nabíjacieho kábla USB nespustí, je potrebné stlačiť tlačidlo ON/OFF. Spustí sa proces nabíjania batérie. Priebeh napájania je indikovaný blikajúcou ikonou batérie na displeji. V opačnom prípade sa nabíjanie batérie nespustí.

Postup nabíjania:

1. Na nabíjanie používajte priložený nabíjací kábel USB.
2. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB na počítači alebo notebooku.
3. Počas nabíjania bliká ikona batérie.
4. Po nabití batérie prestane blikáť ikona batérie.
5. Nabíjanie trvá približne 2,5 hodiny (v závislosti od zostávajúcej energie batérie).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po ukončení ošetrovania vždy zabezpečte vyčistenie aplikačnej hlavy. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Odporúčame používať špeciálne dezinfekčné spreje, ktoré sa bežne používajú napr. v zdravotníctve alebo kozmetických salónoch na čistenie nástrojov. Stačí aj obyčajný alkohol. Vlhkosť nesmie NIKDY preniknúť priamo do prístroja. Pred čistením sa odporúča odstrániť pridržiavací krúžok látky. Na čistenie je ideálny vatový tampón alebo suchá handrička. Pred ďalším použitím prístroja by na aplikátore nemali zostať žiadne zvyšky gélu, kozmetického krému alebo séra. Nakoniec vždy skontrolujte, či je hlava aplikátora úplne suchá. Nikdy nepoužívajte žiadne ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch aplikačnej hlavy. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kontaktnej plochy hlavy.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, renováciu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, získajte potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych orgánov alebo od svojho predajcu.

CERTIFIKÁCIA



Výrobok je schválený na používanie v krajinách Európskej únie a je označený značkou CE. Vyhlásenie o zhode a všetka dokumentácia je k dispozícii u dovozcu.

DOPRAVA

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, neváhajte nás kontaktovať:
E-mail: mh@santadria.cz

Tlačové chyby, funkcie a zmeny technických parametrov vyhradené.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Podpísaný, zastupujúci spoločnosť

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, ID: 29195454

týmto ako dovozca do EÚ vyhlasuje, že tento výrobok s obchodným názvom

Kozmetický prístroj Beautyrelax Multicare

predávané pod názvom modelu: **BR-1380**

EAN: **8594166116771**

patriace do skupiny výrobkov značky **BeautyRelax Multicare**

je v súlade s týmito európskymi normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2: 2015

Podrobnosti sú uvedené v skúšobnej správe číslo: LCS181122009CE001

Na základe súladu s týmito smernicami bol výrobok označený CE.

Výrobok je tiež v súlade so smernicou 2002/95/ES (RoHS). Všetky materiály sú zdravotne nezávadné. Neobsahujú žiadne ťažké kovy, ako je kadmium a iné toxické látky.

Pre bezpečné používanie je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia.



Martin Hrbek, výkonný riaditeľ

Miesto vydania: Brno Deň: 20.6.2020