

NÁVOD NA OBSLUHU

Kozmetické zariadenie na čistenie pleti
BeautyRelax **BR-1490**

POREMAX HOT&COLD



OBSAH:

UPOZORNENIE	4
HLAVNÉ VÝHODY	5
ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA	5
TECHNICKÉ PARAMETRE	5
ZAVEDENIE ZARIADENIA	6
VÁKUOVÝ SACÍ SYSTÉM	6
STRIEDANIE TEPLA A CHLADU PRI TEPELNEJ TERAPII	7
ÚČINKY TEPELNEJ TERAPIE	7
DODÁVKA TEPLA	8
VYSTAVENIE CHLADU	8
ÚČINKY VYSTAVENIA CHLADU	8
PROBLÉM TVORBY ČIERNYCH BODOV	9
VYSTAVENIE VONKAJŠÍM NEGATÍVNYM VPLYVOM	10
OBSAH BALENIA	11
OPIS NÁSTROJA	12
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA	13
PRED PRVÝM POUŽITÍM	13
PROFESIONÁLNE OŠETRENIE V 3 KROKOCH	14
INTENZÍVNE A VEĽMI ŠETRITÉ ODSÁVANIE	15
VÁKUOVÉ ODSÁVANIE 1-2-3	16
DISTRIBÚCIA SACIEHO VÝKONU VÁKUA	17
POUŽÍVANIE INDIVIDUÁLNYCH APLIKÁTOROV	18
VÝZNAM VYMENITEĽNÝCH APLIKÁTOROV	19
OVLÁDANIE ZARIADENIA	20
DOSIAHNUTEĽNÉ ÚČINKY ČISTENIA PLETI	21
METÓDA OŠETRENIA TVÁRE A KRKU	22
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE	23
NABÍJANIE BATÉRIE	24
ČISTENIE A ÚDRŽBA	24
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	25
CERTIFIKÁCIA	25
DOPRAVA	25
VYHLÁSENIE O ZHODE	26

Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru pri kúpe nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky podrobné informácie v návode na použitie. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Zariadenie používajte presne podľa pokynov. Všetky tieto kroky pomôžu maximálne využiť všetky funkcie prístroja. V tejto príručke sa vám pokúsime poskytnúť čo najlepšiu predstavu o použitej technológii a o tom, ako prístroj čo najlepšie používať.

Ak pri čítaní pokynov narazíte na akékoľvek nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: mh@santadria.cz

Návod na použitie si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie.

UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím si prečítajte tento návod, prečítajte si všetky ilustrácie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Ak je vaša pokožka postihnutá vážnym kožným ochorením, zariadenie nepoužívajte. Pri prvom použití sa poraďte so svojím praktickým lekárom.
- Zariadenie je primárne určené na vaše osobné použitie. Nezdieľajte ho s rodinnými príslušníkmi ani priateľmi. Ak zariadenie používa viac ako jedna osoba, treba venovať osobitnú pozornosť hygiene.
- Ak je zariadenie poškodené, nefunguje správne alebo spadlo do vody, nikdy ho neuvádzajte do prevádzky.
- Ak je jednotka poškodená, nedotýkajte sa vnútorných častí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie spadne na zem, môže sa poškodiť. V takom prípade prístroj ďalej nepoužívajte a obráťte sa na servisné oddelenie predajcu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody alebo na miestach so zvýšenou vlhkosťou (vaňa, sprcha, bazén atď.).
- Zariadenie nie je možné umývať. Nesmie byť ponorený do vody ani pod prúdom tečúcej vody.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Po každom použití spotrebič vždy dôkladne vypnite.
- Ak bolo zariadenie premiestnené z veľmi chladného do veľmi teplého prostredia, pred použitím počkajte aspoň 3 hodiny.
- Spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami, ktorých fyzický alebo duševný stav neumožňuje bezpečné používanie spotrebiča.
- Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte na horúcich zdrojoch tepla (radiátor, sporák, oheň atď.).
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať alebo opravovať.
- Zariadenie skladujte v suchom prostredí. Snažte sa ho chrániť pred prachom.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke. Nezodpovedá za následky spôsobené nedodržaním bezpečnostných upozornení.
- Distribútor nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným použitím.

HLAVNÉ VÝHODY

- Neinvazívne ošetrovanie (zariadenie nepreniká priamo cez pokožku).
- Ošetrovanie bez nepríjemných pocitov.
- Žiadne nežiaduce trvalé zmeny pigmentácie kože.
- Bezprostredne po zákroku sa môžu používať kozmetické prípravky.

ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA

- Vysoko účinné mechanické čistenie pokožky.
- Zlepšenie prekrvenia pokožky.
- Stimulácia kolagénových a elastických vlákien.
- Pleť vyzerá hladká a svieža.
- Teplo zvýši účinnosť ošetrovania tým, že otvorí póry pokožky.
- Chlad na konci ošetrovania upokojuje pokožku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- 5 úrovní nastavenia intenzity odsávania (až do 70 kPa).
- Podsvietený LCD displej.
- Indikácia stavu batérie a intenzity vysávania.
- 5 vymeniteľných aplikátorov na ošetrovanie pokožky.
- Napájanie: kábel USB (súčasťou balenia).
- Nabíjacie napätie: 5 V, výkon: 4 W.
- Kapacita batérie: 1200 mAh.
- Čas nabíjania: do 2 hodín v závislosti od stavu batérie.
- Čas používania: približne 1 až 2 hodiny v závislosti od na sile vákuového sania.
- Rozmery: výška 19x4x4,5 cm.
- Hmotnosť: 154 g.



ZAVEDENIE ZARIADENIA


BeautyRelax Poremax hot&cold iLift je praktický nástroj na pravidelnú starostlivosť o pleť. Kombinuje niekoľko technológií na dosiahnutie najlepších možných výsledkov. Môžete si vychutnať čistiace ošetrovanie s vákuovým odsávaním doplnené tepelnou terapiou. Exkluzívna kombinácia rôznych typov ošetrovaní v jednom zariadení. Podsvietený LCD displej, 5 vymeniteľných aplikátorov, 5 nastavení intenzity. BeautyRelax Poremax hot&cold si jednoducho zamilujete vďaka jeho vysokej úžitkovej hodnote!

VÁKUOVÝ SACÍ SYSTÉM



Každý deň je naša pleť vystavená rôznym faktorom, ktoré majú negatívny vplyv (prach, smog, baktérie, zvyšky make-upu, vlhkosť). Tvorba kožného mazu v kombinácii s nečistotami a odumretými kožnými bunkami upcháva póry a vytvára **čierne bodky** alebo **pupienky s bielymi "čiapočkami"**. Ideálne prostredie pre rozvoj baktérií a následného zápalu. Hlavným predpokladom krásnej a zdravej pleti je pravidelná starostlivosť.

Kozmetický prístroj Poremax hot&cold dôkladne čistí pleť. V prípade čiernych bodiek a pupienkov ich pomáha odstrániť. Hlava aplikátora nasáva pokožku a okraj aplikátora odstraňuje z povrchu nečistoty, **čierne bodky a nevzhľadné biele čiapčky**. Nepříjemné ručné stláčanie, ktoré spôsobuje výrazné začervenanie a podráždenie pokožky, je definitívne preč! Povrchové pigmentové škvrny a póry sú zjemnené. Kozmetický prístroj Poremax hot&cold je vysoko účinný, ale zároveň šetrný k pokožke!

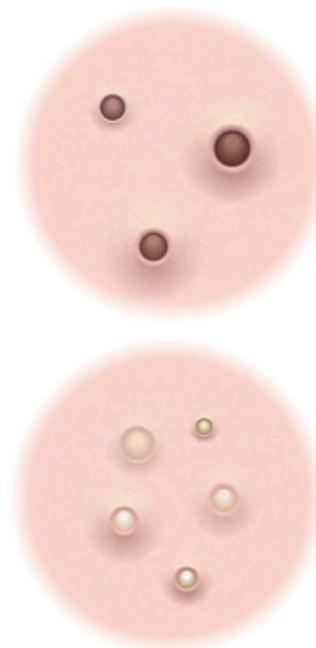

STRIEDANIE TEPLA A CHLADU PRI TEPELNEJ TERAPII

Kozmetický prístroj Poremax hot&cold iLift je vybavený špeciálnym plochým aplikátorom, ktorý dokáže nastaviť teplotu podľa potreby. Teplota sa mení v priebehu niekoľkých sekúnd. Vykurovanie alebo chladenie môžete nastaviť bez výrazného časového oneskorenia. Tepelná terapia je veľmi praktická funkcia, ktorú môžete využiť na začiatku a na konci ošetrovania.

ÚČINKY TEPELNEJ TERAPIE

Teplo alebo chlad majú na pokožku špecifické účinky. Základom je zdroj tepla alebo chladu aplikovaný na pokožku. V priebehu niekoľkých okamihov dôjde k zmene teploty na povrchu kože. Ak má zariadenie obe funkcie, zmena z tepla na chlad a naopak sa uskutoční v priebehu niekoľkých sekúnd. Aplikácia tepla je zvyčajne prvým krokom po exfoliácii pokožky. Stačí niekoľko minút ošetrovania. Pôsobenie chladu na pokožku výrazne ovplyvňuje funkciu lymfatického systému tváre a jej metabolismus. Ošetrovanie chladom je zvyčajne koncom ošetrovania pokožky.




Prírodné
detoxikácia organizmu



Zníženie
póry



Udržiavanie stránky
prirodzená vlhkosť

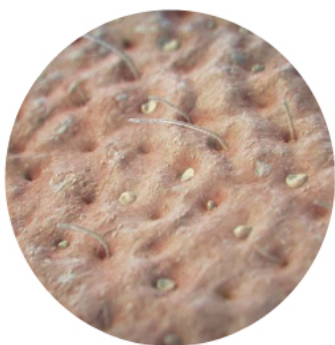

Uvoľnenie
kožné pory




Za asistencie
na dôkladné čistenie pokožky



Podpora
krvný obeh

DODÁVKA TEPLA

Hlavným účinkom tepla na pokožku je otvorenie kožných pórov. V kozmetickom štúdiu sa tento krok používa po exfoliácii pokožky. Nasleduje akýkoľvek iný postup. Otvorenie pórov je základom hĺbkového čistenia pleti. Okrem toho sú póry schopné absorbovať živiny z kozmetických výrobkov hlbšie do pokožky. Kozmetičky najčastejšie používajú naparovaný uterák. Vy ako skutočný profesionál v oblasti krásy používate BeautyRelax.

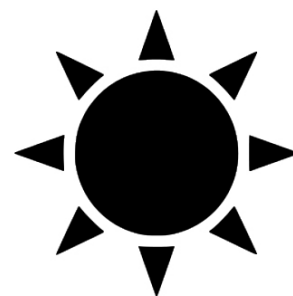

VYSTAVENIE CHLADU

Naopak, chlad má na pokožku všeobecne upokojujúci účinok. Doma používame studený uterák, ak máme vysokú teplotu alebo ak je naša pokožka červená a podráždená. Chlad okrem iného sťahuje kožné póry. BeautyRelax ocenia najmä používatelia s veľmi citlivou pokožkou, ktorá je citlivá na vonkajšie podnety. Ak pokožka ľahko sčervená, ako sa to stáva po kozmetickom ošetrovaní, chlad ju upokojí a pomôže jej vrátiť normálnu farbu.




ÚČINKY VYSTAVENIA CHLADU

- okamžité upokojenie pokožky na konci ošetrovania
- protizápalový účinok
- potlačenie opuchu
- aktivácia samoozdravných procesov kože



PROBLÉM TVORBY ČIERNYCH BODOV

Jednou z hlavných príčin vzniku čiernych bodiek je upchatie pórov kožným mazom alebo odumretou pokožkou. Čierna farba hlavy upchatého póru nie je nečistota. Je výsledkom oxidácie po vystavení kožného mazu a odumretých kožných buniek okolitému prostrediu. Vákuové odsávanie kozmetickým prístrojom je jednou z najúčinnějších metód odstraňovania čiernych bodiek s čo najmenším podráždením pokožky.

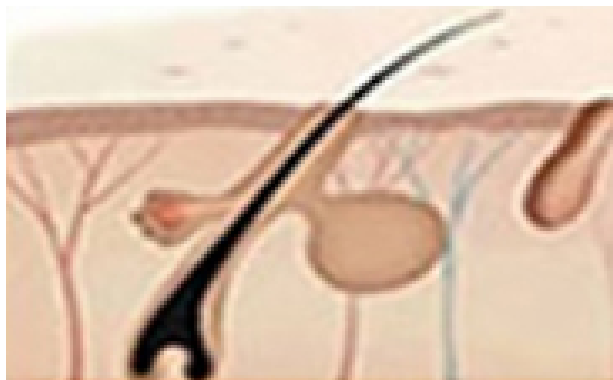

Uvoľňuje sa tuk z mazových žliaz pozdĺž vlasových folikulov.



Mazové žľazy uvoľňujú viac alebo menej tuku podľa rôznych faktorov.



Masť sa mení na bielu.



Mazivo je odhalené a zoxidované vo vzduchu, aby sa vytvorilo veľké množstvo čiernych bodov.

VYSTAVENIE VONKAJŠÍM NEGATÍVNYM VPLYVOM

Naša pokožka je vystavená rôznym vonkajším faktorom, ktoré v rôznej miere ovplyvňujú kvalitu a rýchlosť starnutia našej pokožky. Slnko, prach, nedostatok spánku, nesprávna životospráva, nedostatočné pravidelné čistenie pleti od make-upu.



Rozšírené póry, zvýšený výskyt čiernych bodiek, neúčinná starostlivosť o pleť



Zvýšený výskyt baktérií, zvýšená citlivosť pokožky, väčšia náchylnosť na akné



Zvýšená tvorba kožného mazu, mastná pleť, ktorá sa veľmi ťažko čistí




Ucpané póry zvyškami zvyškov make-up so zníženým účinkom čistenia pleti

OBSAH BALENIA



OPIS NÁSTROJA

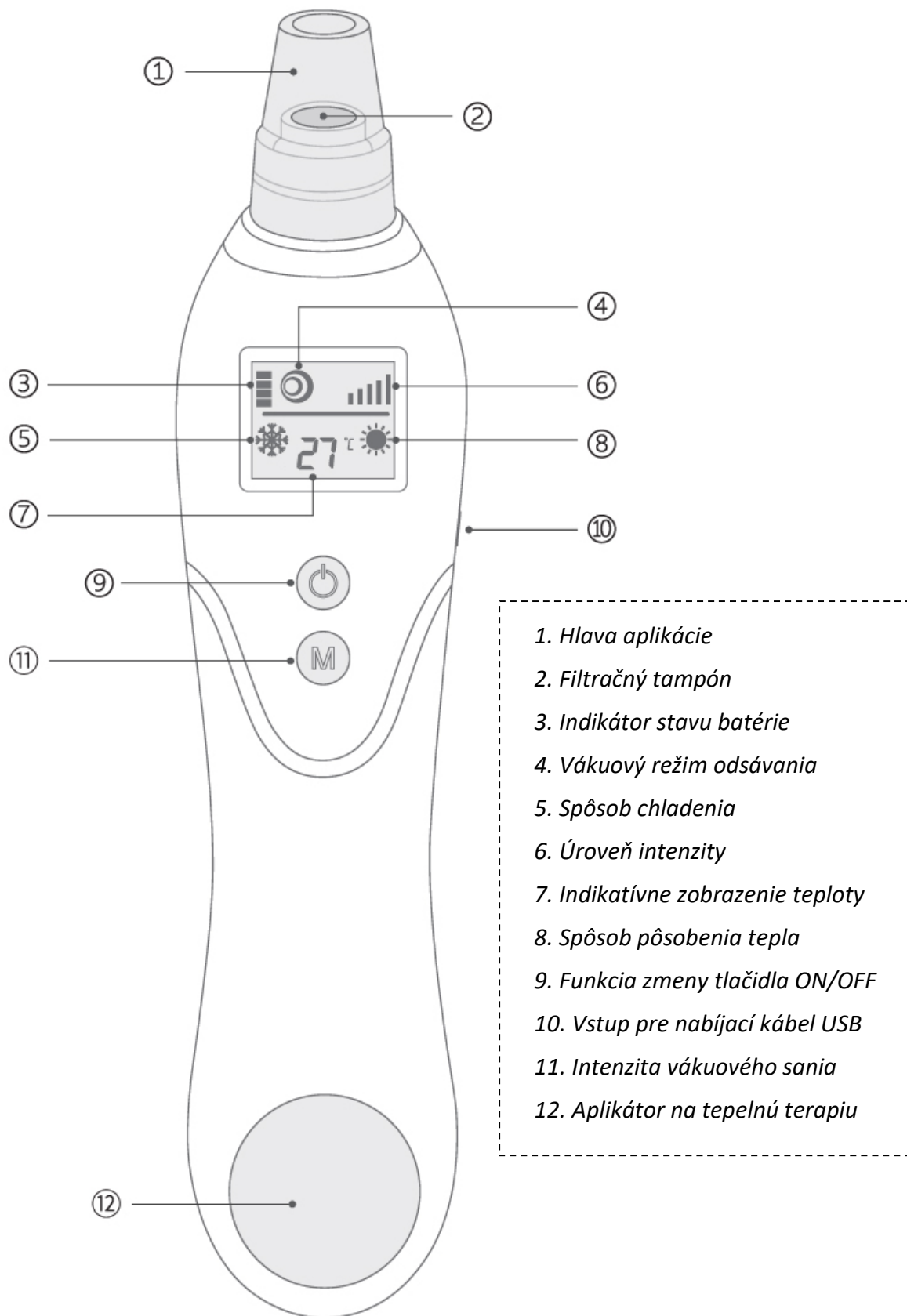

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

Pred samotným ošetrením pleti prístrojom odstráňte z pokožky všetku mastnotu a make-up. Počkajte, kým pokožka úplne nevyschne. Pred použitím nesmú byť na pokožke žiadne stopy vlhkosti. Pred prvým použitím zariadenia vyskúšajte jeho použitie, napr. na predlaktí. Počkajte približne 1 hodinu, aby ste zistili, či koža na vákuové odsávanie reaguje negatívne.


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Prístroj nepoužívajte na silne zjazvenú pokožku.
- Prístroj nepoužívajte, ak trpíte ekzémom alebo inými kožnými ochoreniami.
- Ak máte citlivú pokožku, používajte zariadenie so zvýšenou opatrnosťou.
- Netlačte hlavicu aplikátora príliš silno na pokožku.
- Pokožka môže byť po ošetrení mierne červená. Ide o dočasný účinok, ktorý by mal zmiznúť v priebehu niekoľkých desiatok minút.
- Po ošetrení sa odporúča použiť výživnú masku, krém alebo nočný krém. Pred odchodom von (v prípade silného slnečného žiarenia) nezabudnite použiť opaľovací krém.
- Po ošetrení tváre sa môžete podľa potreby nalíčiť takmer okamžite po upokojení pleti.
- Pred vložením aplikačnej hlavy nezabudnite do nasávacieho otvoru vložiť filtračnú podložku. V opačnom prípade sa zariadenie poškodí, ak sa doň nasaje nečistota.




PROFESIONÁLNE OŠETRENIE V 3 KROKOCH

Používanie zariadenia je oveľa jednoduchšie, ako si možno predstavujete. Zariadenie je multifunkčné. Je to ako mať k dispozícii 3 rôzne nástroje naraz. Ošetrovanie nezaberie veľa času. Preto si ľahko vytvoríte návyk na rutinné ošetrovanie, ktoré je nevyhnutné na udržanie zdravej a krásnej pleti. 3 rôzne typy prístrojov v jednom, 3 rôzne typy ošetrovania pleti pri dosiahnutí vysokého stupňa účinku!

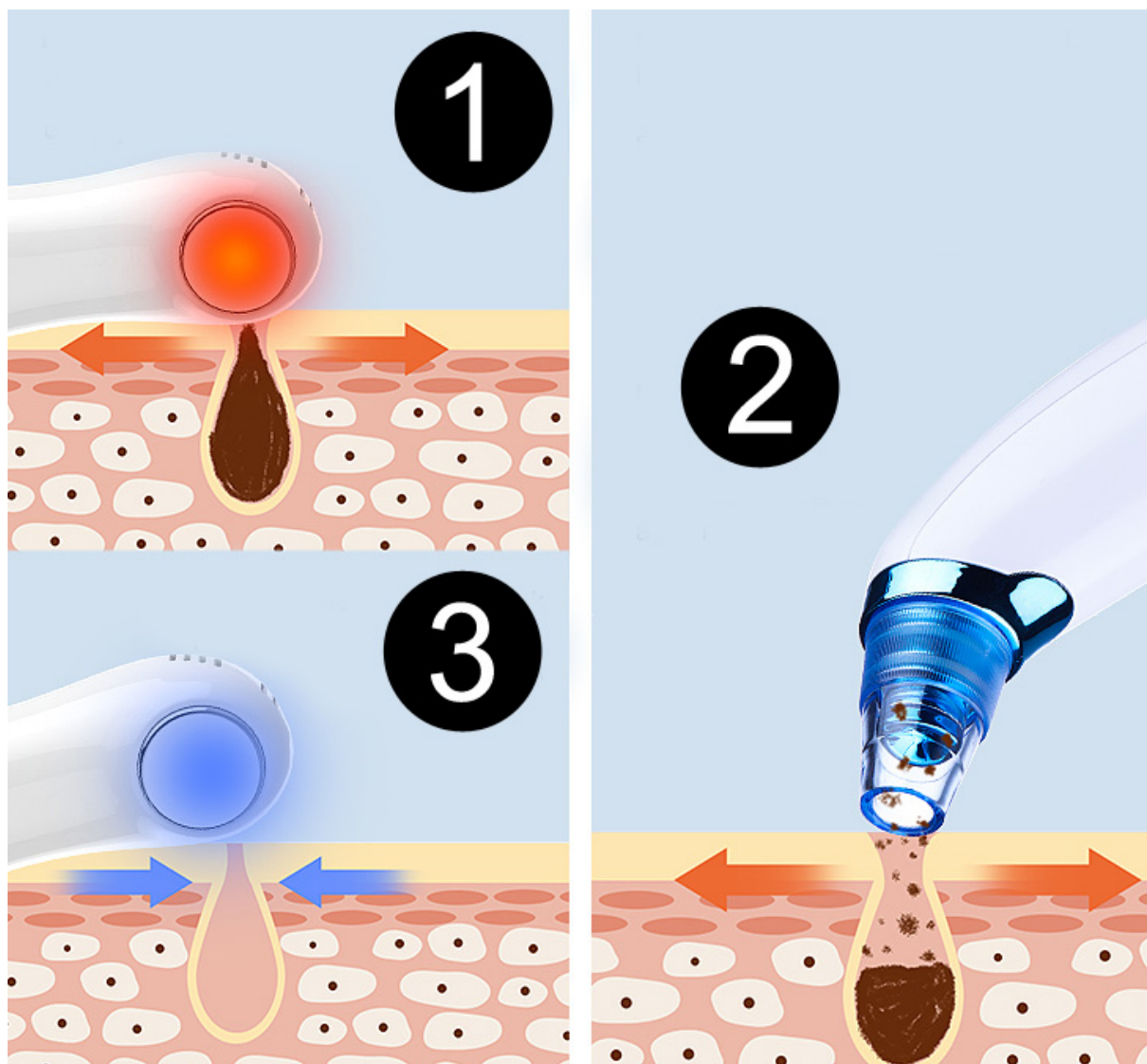

- 1.** Otvorenie kožných pórov je základným predpokladom pre skutočne dobré vyčistenie pleti. Pomocou aplikátora môžete ľahko zahriať pokožku. Zlepší sa prekrvenie lokálnych oblastí tváre.
- 2.** Zmeny v nastavení sacieho výkonu vysávača pôsobia na pokožku ako vysávač. Všetky mikroskopické nečistoty, zvyšky make-upu a odumretej pokožky sú úplne odstránené.
- 3.** Pokožka je po mechanickom čistení červená a mierne podráždená. Nastavíte studený režim. Pomocou aplikátora pokožku krásne ochladíte a upokojíte. Kožné póry sa stiahnu do normálneho stavu.

INTENZÍVNE A VEĽMI ŠETRNE ODSÁVANIE

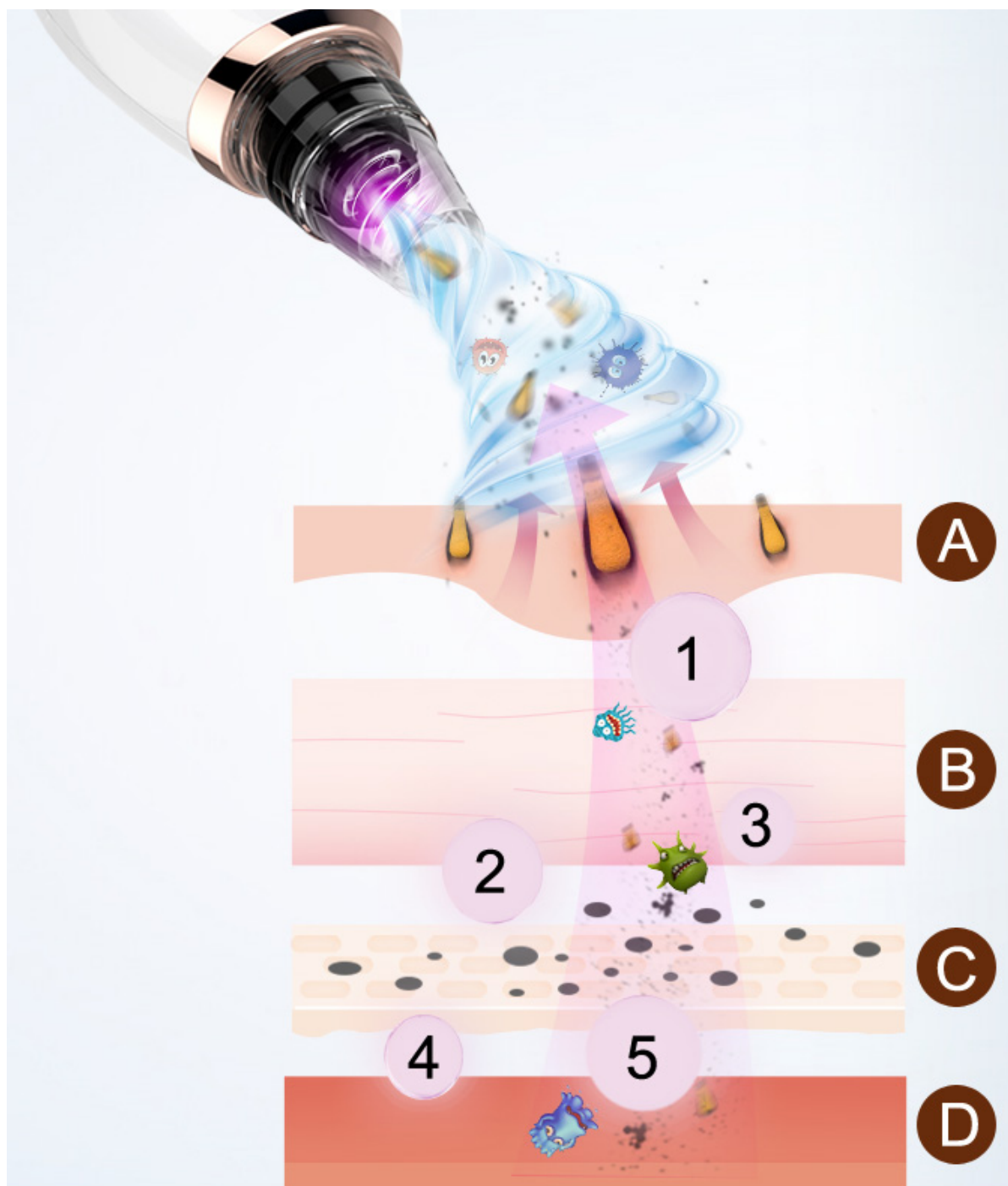

(1) čierne bodky

(2) zvyšky odumretej kože

(3) zvyšky make-upu

(4) tuk

(5) baktérie


(A) povrch kože

(B) zrohovatená vrstva

(C) bazálna vrstva

(D) vrstva dermy

VÁKUOVÉ ODSÁVANIE 1-2-3

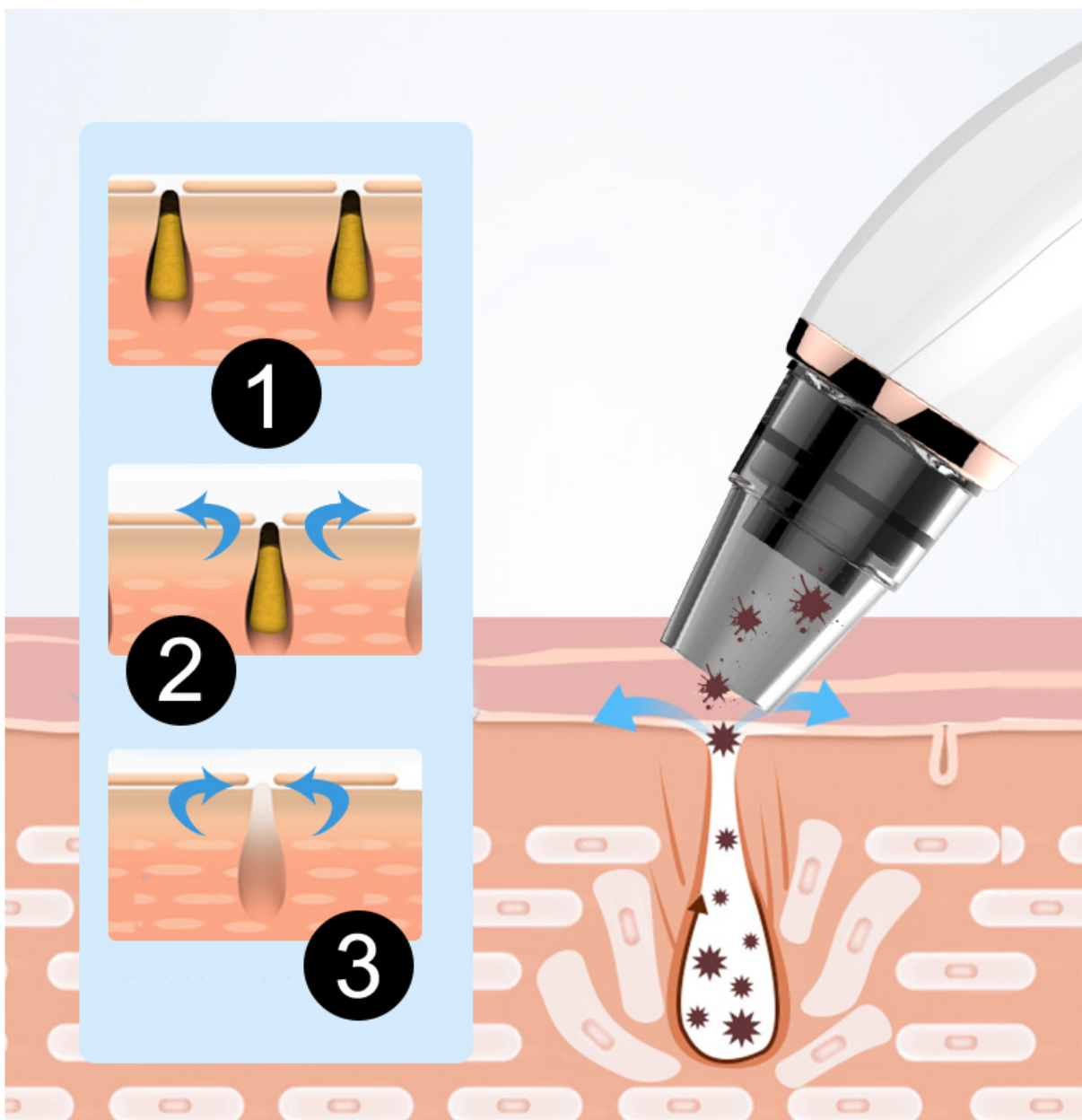

1. **OTVORENIE:** otvorenie pórov, čierne bodky.
2. **SEN:** vysávanie čiernych bodiek a akné.
3. **Upokojujúce:** znižuje póry a upokojuje pokožku.

DISTRIBÚCIA SACIEHO VÝKONU VÁKUA

Sací výkon vysávača môžete individuálne nastaviť podľa svojich potrieb. Ak máte veľmi citlivú pokožku a znečistenie nie je výrazné, použite nižší výkon. Ak je vaša pokožka odolná a silne znečistená, použite vyšší výkon. Pri pravidelnom používaní si nastavenia výkonu veľmi rýchlo osvojíte. Vždy sa snažte zvoliť vhodný výkonový kompromis, aby bolo ošetrovanie účinné, ale pre vás pohodlné. Očakávajte, že vaša pokožka bude pri vyššom výkone viac podráždená a začervenaná. Bude potrebovať viac času na zotavenie.



(1) 40KPA - vhodné pre veľmi citlivú pokožku

(2) 50KPA - vhodné pre normálnu pokožku

(3) 60KPA - vhodné pre mastnú pleť

(4) 65KPA - vhodné pre zmiešanú pleť


(5) 70KPA - vhodné pre veľmi odolnú a znečistenú pokožku

POUŽÍVANIE INDIVIDUÁLNYCH APLIKÁTOROV

Každý z nás má inú veľkosť, tvar a citlivosť pokožky. Rozdiely sú aj v aktuálnom stave pokožky. Každý z nás je originál. Súčasťou balenia je 5 rôznych aplikátorov, aby bolo používanie kozmetického prístroja čo najvšestrannejšie. Pokyny pre každý aplikátor sú len všeobecné. V praxi si môžete sami vyskúšať, ktorá kombinácia aplikátorov je pre vás najlepšia. Môže sa stať, že z dlhodobého hľadiska niektoré z nich vôbec nepoužijete.



Na jemné mechanické čistenie pokožky použite zaoblený aplikátor. Dôkladne zbavuje pleť všetkých nečistôt. Ostatné aplikátory sú zakončené otvorom s rôznym priemerom. Čím menší je otvor, tým menší podtlak prechádza. V praxi to znamená, že menší otvor koncentruje viac podtlaku na menšej ploche. Vákuový sací výkon tak možno nastaviť nielen pomocou tlačidla na prístroji, ale aj vhodným výberom aplikátora. Aplikátory s rôznym priemerom otvorov použite na odstránenie čiernych bodiek, podporu lokálneho prekrvenia tváre alebo masážny lifting jemných vrások na tvári.

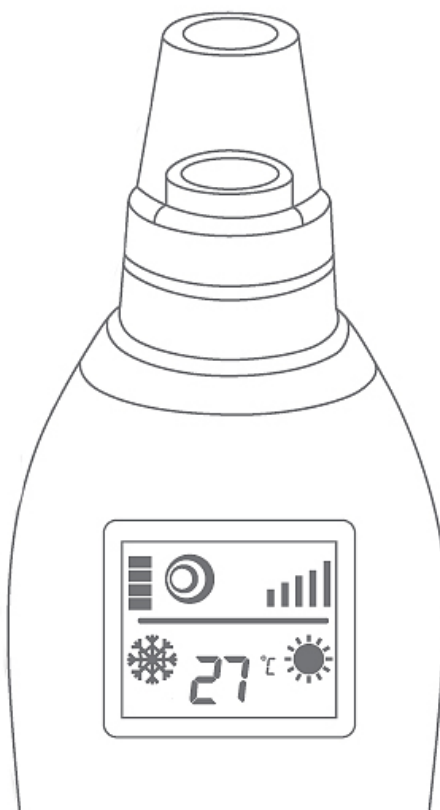

VÝZNAM VYMENITEĽNÝCH APLIKÁTOROV



Aplikátor s okrúhlym hrotom s menším priemerom

Určené na veľmi malé ošetrované plochy s veľkým počtom záhybov. Ideálny na hĺbkové čistenie citlivej pleti alebo oblastí tváre s čiernymi bodkami.



Aplikátor so zaobleným povrchom na čistenie pokožky

Čistenie od odumretých buniek a zvyškov pokožky. S výnimkou oblastí s veľmi tenkou pokožkou (napr. spánkov) ho možno použiť na celú tvár.



Aplikátor s okrúhlym hrotom základného priemeru

Určené na ošetrovanie T-zóny tváre. V prípade mastnej pleti. Liftingový účinok a účinná masáž pre intenzívny krvný obeh.



Aplikátor s okrúhlym hrotom so stredným priemerom

Optimálne na pery, nos a najmä záhyby nosa. Môže sa používať na čistenie pokožky. Skvelé na odstránenie jemných liniek a vrások.



Aplikátor s okrúhlym hrotom s veľkým priemerom

Vhodné na čelo alebo nos. Ideálne na odstraňovanie čiernych bodiek. Môže sa použiť na ošetrovanie tváre alebo dekoltu.

OVLÁDANIE ZARIADENIA

- 1.** Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ON/OFF **(9)** na minimálne 3 sekundy. Displej sa rozsvieti. Na displeji sa zobrazia základné informácie. Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF **(9)** môžete prepínať medzi rôznymi režimami ošetrovania pokožky (vákuové odsávanie, studené pôsobenie, tepelné pôsobenie). Aktivácia konkrétneho režimu je indikovaná príslušnými ikonami **(4)** vákuové odsávanie, **(5)** studené pôsobenie, **(8)** tepelné pôsobenie. Zobrazenie teploty je veľmi orientačné. Pred priložením aplikátora na pokožku vždy skontrolujte teplotu rukou.
- 2.** Pred vložением príslušného aplikátora sa vždy uistite, že ste do oblasti nasávania vložili filtračnú podložku. Nasadte aplikátor podľa vlastného výberu pre režim ošetrovania pokožky vákuovým odsávaním. Prúd vzduchu bude prúdiť cez tampón a zachytávať nečistoty. Inak by mohlo dôjsť k nasatiu nečistôt a poškodeniu zariadenia.
- 3.** Pomocou tlačidla M **(11)** môžete nastaviť silu sania vysávača (úroveň 1,2,3,4,5). V režime ohrevu (zahrievania) môžete nastaviť úroveň teploty (úroveň 1,2,3,4,5).
- 4.** Po 9 minútach sa zariadenie automaticky vypne.
- 5.** Zariadenie môžete kedykoľvek vypnúť dlhým stlačením tlačidla ON/OFF **(9)**.

DOSIAHNUTEĽNÉ ÚČINKY ČISTENIA PLETI



METÓDA OŠETRENIA TVÁRE A KRKU



FACE: vzdialiť sa od stredu čelo až po okraj, postupne pokryte celú oblasť




NOS: pohybujte sa od čela okolo nosa k lícam, zhora nadol



Tvár: pohybujte tvárou v smere zdola nahor



brada: pohybujte sa od špičky brady pozdĺž kontúr tváre, zdola nahor

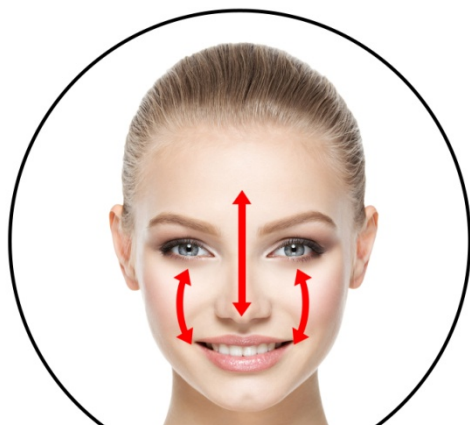

Zóna T: pohybujte sa od čela po špičku nosa a tvár, pohyb v oboch smeroch



Krk: pohybujte sa od brady k uchu a potom dole ku krku

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Je potrebné pri každom použití vložiť filtračnú vložku?

Vatový tampón vytvára potrebnú bariéru medzi nečistotami a elektronikou zariadenia. Ak tampón nepoužijete, do zariadenia sa môžu dostať nečistoty, čo môže viesť k jeho poškodeniu. Kontaktujte predajcu/distribútora prístroja a zakúpte si náhradné filtračné tampóny. Ak nástroj používa jedna osoba, môže sa použiť viac ako raz. Ak prístroj používa viac ako jedna osoba, je potrebné vymeniť filtračnú vložku po každom ošetrení pokožky.

Aká je optimálna dĺžka individuálneho ošetrenia pleti?

Optimálna dĺžka čistenia pleti je 15 až 30 minút. Záleží na tom, ako starostlivo sa staráte o všetky časti tváre, bradu, prípadne dekolt. Začnite s kratším časom ošetrenia a postupne ho predlžujte podľa toho, ako vaša pokožka reaguje na prístroj. Nie vždy platí, že čím dlhšie, tým lepšie. Ak máte citlivejšiu pokožku, začnite s kratšou dobou ošetrenia. Pri ďalšom používaní zariadenia môžete postupne predlžovať dĺžku ošetrenia.

Predstavuje ošetrenie kože následné obmedzenie?

Po ukončení čistenia pokožky môže byť pokožka mierne začervenaná. Ide o úplne prirodzený efekt. Stimuluje sa krvný obeh a lymfatický systém tváre. Zmena farby by mala ustúpiť v priebehu niekoľkých minút. Koža sa vráti do normálu.

Je používanie zariadenia bolestivé?

Hoci je čistenie založené na princípe odsávania vrchnej vrstvy odumretej kože, nebudete cítiť žiadne nepríjemné pocity. Vďaka vákuovému odsávaniu budete čistenie pokožky vnímať ako príjemnú relaxačnú masáž. Ak máte veľmi citlivú pokožku, nastavte sanie vysávača na nižší výkon. Nastavte výkon podľa toho, ako reaguje vaša pokožka.

Prečo sa toto ošetrenie pleti niekedy označuje ako omladenie?

Omladenie stimuluje rast nových, zdravých a pružných kožných buniek odolných voči vonkajším vplyvom. Tým sa vráti biologický čas pokožky a spomalí sa jej ďalšie starnutie.

Je zariadenie vhodné pre moju pleť?

Čistenie je vhodné pre všetky typy pleti. Obmedzenia sa uplatňujú len v prípadoch, keď je koža postihnutá závažným kožným ochorením. Osobám, ktoré majú veľmi citlivú tenkú pokožku na dotyk, treba pri používaní venovať zvýšenú pozornosť. Dôležitú úlohu zohráva aj úľava od pokožky. Ak sa na vašej pokožke nachádza veľké množstvo jaziev alebo neštandardných nerovností (bradavice, kožné výrastky), môže to ošetrenie skomplikovať. Odporúča sa vyhýbať sa týmto oblastiam pomocou aplikátora.

Má teplo/chlad vôbec nejaký skutočný význam?

Som si istý, že je. Nie náhodou sa tepelná terapia kombinuje so zariadením na mechanické čistenie pokožky. Roky skúseností s estetickými štúdiami viedli inžinierov k vývoju zariadenia, ktoré by ponúkalo rýchly prechod medzi teplom a chladom. Vyhriata pokožka sa čistí oveľa lepšie. Hoci je mechanické čistenie pokožky šetrné, dochádza k miernemu podráždeniu a prirodzenému zahriatiu. Studená aplikačná hlavica príjemne ochladí pokožku a vráti ju do pohodlia. V poslednom čase sa funkcia tepelnej terapie stala veľmi populárnou v kozmetických prístrojoch.


NABÍJANIE BATÉRIE

Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Na nabíjanie používajte iba nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Batériu nabíte hneď, ako sa na displeji zobrazí jeden riadok.

Poznámka: Nabíjací kábel **nepripájajte k sieťovému adaptéru 220 V**. Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie. Ako zdroj napájania používajte iba port USB počítača alebo notebooku.

Postup nabíjania:

1. Na nabíjanie používajte iba nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia.
2. Jeden koniec kábla zapojte do napájacieho vstupu zariadenia.
Druhý koniec pripojte k portu USB na počítači alebo notebooku.
3. Počas nabíjania bliká ikona batérie.
4. Po nabití batérie prestane blikáť ikona batérie.

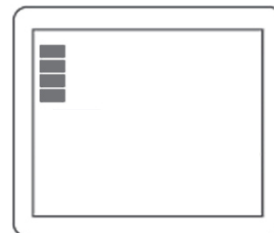

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením aplikátora ho odpojte od zariadenia. Samotný aplikátor môžete umyť prúdom vlažnej vody. Na čistenie úzkych priestorov aplikátora je ideálne použiť vatovú tyčinku na čistenie uší. Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Odporúčame používať špeciálne dezinfekčné spreje, ktoré sa bežne používajú napr. v lekárskech alebo kozmetických salónoch na čistenie nástrojov. Postačí aj obyčajný lieh na potieranie. Na čistenie je ideálny bavlnený tampón alebo suchá handrička. Nakoniec vždy skontrolujte, či je aplikačná hlava úplne suchá. Počas údržby v žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť aplikátory alebo zariadenie.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, renováciu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, získajte potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych orgánov alebo od svojho predajcu.

CERTIFIKÁCIA



Výrobok je schválený na používanie v krajinách Európskej únie a je označený značkou CE. Vyhlásenie o zhode a všetka dokumentácia je k dispozícii u dovozcu.

DOPRAVA

SANTADRIA s.r.o., Mojmirovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, neváhajte nás kontaktovať:

E-mail: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tlačové chyby, funkcie a zmeny technických parametrov vyhradené.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Podpísaný, zastupujúci spoločnosť

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, ID: 29195454

týmto ako dovozca do EÚ vyhlasuje, že tento výrobok s obchodným názvom

Kozmetické zariadenie na čistenie pleti

predávané pod názvom modelu: **POREMAX HOT&COLD BR-1490**

EAN: **8594166116917**

patriace do skupiny výrobkov značky **BeautyRelax**

je v súlade s týmito európskymi normami:

EN55014-1:2017

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

EN55014-2:2015

EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014

EN61000-4-6:2014, EN61000-4-11:2004

Podrobnosti sú opísané v osvedčení č. **LST180268006E**

Na základe súladu s týmito smernicami bol výrobok označený CE.

Výrobok je tiež v súlade so smernicou 2002/95/ES (RoHS). Všetky materiály sú zdravotne nezávadné. Neobsahujú žiadne ťažké kovy, ako je kadmium a iné toxické látky.

Pre bezpečné používanie je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia.



Martin Hrbek, výkonný riaditeľ

Miesto vydania: Brno Deň: 15.6.2020