

NÁVOD NA OBSLUHU

Ručný masážny prístroj

BeautyRelax BR-1790B

Kineticforce Portable



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	4
ÚČEL POUŽITIA	5
HLAVNÉ VÝHODY	5
4 VYMENITEĽNÉ HLAVY	5
TECHNICKÉ PARAMETRE	5
OBSAH BALENIA	5
OPIS NÁSTROJA	6
POUŽÍVANIE INDIVIDUÁLNYCH APLIKÁTOROV	7
POPIS OVLÁDACIEHO PANELA	8
POUŽÍVANIE ZARIADENIA	9
NABÍJANIE BATÉRIE	9
VENUJTE POZORNOSŤ	9
MOŽNOSTI POUŽITIA	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ	11
CERTIFIKÁCIA	11
DOPRAVA	11
ES VYHLÁSENIE O ZHODE	12

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za dôveru pri kúpe nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky podrobné informácie v návode na použitie. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Zariadenie používajte presne podľa pokynov. Všetky tieto kroky pomôžu maximálne využiť všetky funkcie prístroja. V tejto príručke sa vám pokúsime poskytnúť čo najlepšiu predstavu o použitej technológii a o tom, ako prístroj čo najlepšie používať.

Ak pri čítaní pokynov narazíte na akékoľvek nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: mh@santadria.cz

Návod na použitie si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- V žiadnom prípade sa nepokúšajte jednotku sami rozoberať alebo opravovať
- prístroj skladujte a používajte v suchom, uzavretom prostredí.
(je zakázané používať zariadenie v kúpeľni)
- je zakázané používať prístroj, ak ste podstúpili operáciu krčnej chrbtice alebo inej časti tela, pre ktorú je masážny prístroj určený
- zariadenie sa nesmie používať, ak máte vážne chronické zdravotné problémy s krčnou chrbticou a ak je oblasť krku veľmi citlivá.
- nepoužívajte prístroj príliš dlho; 5 až 20 minút denne postačuje na príjemnú relaxáciu a uvoľnenie svalov; dlhšie používanie ako je uvedený čas by mohlo spôsobiť bolesti hlavy (v prípade aplikácie na krčnú chrbticu)
- ak si nie ste istí, v krajnom prípade sa poraďte so svojím praktickým lekárom alebo fyzioterapeutom; zariadenie nepotrebuje žiadnu väčšiu mechanickú údržbu
- pred čistením ovládača odpojte jednotku od napájacieho adaptéra; povrch ovládača čistite len čistou mäkkou handričkou
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky; povrch ovládača by sa mohol poškodiť; nenechávajte obalový materiál voľne ležať; mohol by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne; nevystavujte ho nárazom, otrasom ani úderom; prípustná teplota okolia: 5 °C až +50 °C
- škody spôsobené zanedbaním týchto bezpečnostných upozornení a návodov na použitie budú znamenať zánik nároku na záruku na spotrebič; za následné škody spôsobené porušením týchto podmienok nenesieme zodpovednosť
- nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví spôsobené nesprávnou alebo chybnou manipuláciou s výrobkom; v takýchto prípadoch záruka na výrobok zaniká.

ÚČEL POUŽITIA

Prenosný ručný masážny prístroj BeautyRelax Kineticforce je revolučné a inovatívne riešenie, ktoré zmení váš pohľad na celkovú rehabilitáciu a regeneráciu tela. Zariadenie navrhli profesionálni terapeuti. Počas procesu vývoja sa kládol dôraz na najvyššiu kvalitu a maximálnu účinnosť. V súčasnosti nie je na trhu účinnejšie zariadenie porovnateľnej kvality. BeautyRelax Kineticforce Portable okamžite uvoľňuje napäté svaly kdekoľvek na tele. Doprajte svojmu telu blahodarné účinky moderných technológií! Vďaka kompaktným rozmerom môže byť zariadenie všade s vami.

HLAVNÉ VÝHODY

- Okamžité uvoľnenie stuhnutých svalov
- Zmiernenie stresu a duševného napätia
- Svieži pocit počas dlhotrvajúcej únavy
- Lokálne zlepšenie krvného obehu
- zmiernenie opuchov, najmä končatín
- Regenerácia mysle po náročnej intelektuálnej činnosti

4 VYMENITEĽNÉ HLAVY

- Veľký okrúhly aplikátor - vhodný pre veľké svalové skupiny
- Vidlica - oblasť okolo chrbtice
- Plochá hlava - vhodná na všetky časti tela
- Vystreľovacia hlava - kolená, kĺby a ťažko prístupné miesta

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Ergonomická rukoväť je potiahnutá protišmykovým materiálom
- Extrémne nízka hlučnosť
- 4 vymeniteľné aplikačné hlavy
- 4 rýchlosti masáže (1800 až 3200 vibrácií za minútu)
- Displej zobrazuje úroveň nabitia batérie a rýchlosť masáže
- Prevádzkové napätie: 24 V
- Nabíjanie: vstavaná 2400mAh lítium-iónová batéria
- Napájanie: kábel USB typu C (súčasťou balenia)
- Rozmery: 22x22x7cm
- Hmotnosť: 800 g

OBSAH BALENIA


- 1x prenosný ručný masážny prístroj BeautyRelax Kineticforce
- 4x vymeniteľné aplikátory rôznych tvarov
- 1x nabíjací kábel USB typu C
- 1x návod na obsluhu

OPIS NÁSTROJA



- 1. Hlava aplikácie
- 2. Ovládací panel
- 3. Rukoväť
- 4. Sada vymeniteľných aplikačných hláv

POUŽÍVANIE INDIVIDUÁLNYCH APLIKÁTOROV

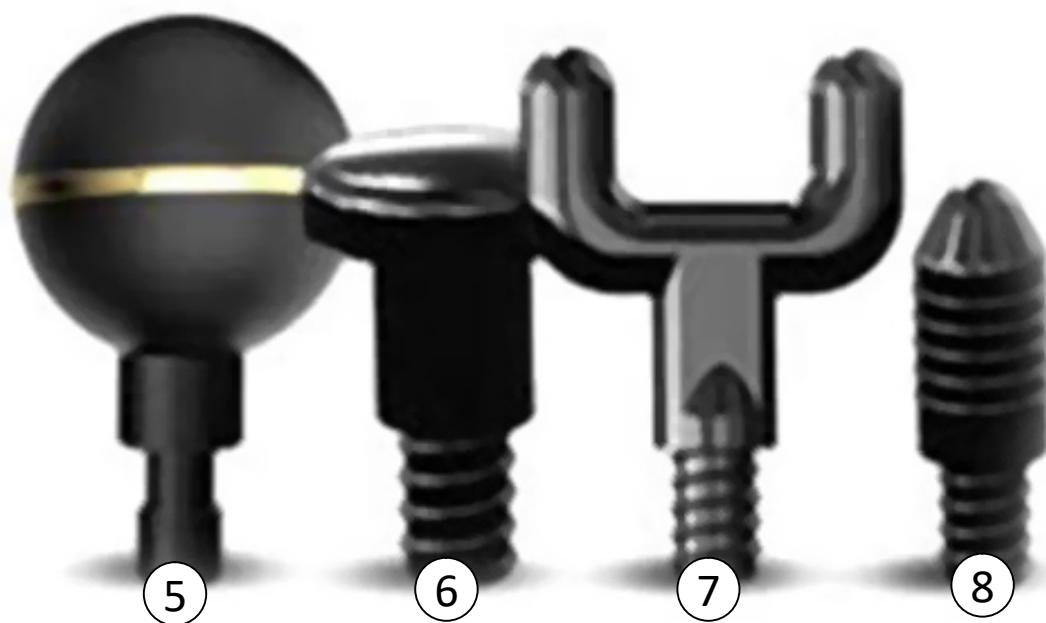

- 5. Lopta** - vhodná pre veľké svalové skupiny
- 6. Plochá hlava** - vhodná na všetky časti tela
- 7. Vidlica** - vhodná na oblasť okolo chrbtice
- 8. Projektil** - vhodný na oblasť okolo kolien, kĺbov a ťažko dostupných miest

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA



- 1. Vstup napájacieho kábla
- 2. % stavu batérie
- 3. Rýchlosť masáže
- 4. Tlačidlo **ON/OFF**
- 5. Tlačidlo (+) - zvýšenie rýchlosti masáže
- 6. Tlačidlo (-) - zníženie rýchlosti masáže

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

1. Vyberte si jeden zo 4 aplikátorov podľa účelu použitia.
2. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla **ON/OFF**.
3. Pomocou tlačidiel **(+)** a **(-)** ľahko nastavíte rýchlosť masáže. Stlačením tlačidla **(+)** zvýšite rýchlosť a tlačidlom **(-)** znížite rýchlosť masáže. K dispozícii je 20 úrovní masáže.
4. Na displeji môžete sledovať % nabitia batérie a rýchlosť masáže.
5. Zariadenie môžete kedykoľvek vypnúť pomocou tlačidla **ON/OFF**.


NABÍJANIE BATÉRIE

1. Batéria sa nabíja pomocou blikajúcej kontrolky. Na displeji sa zobrazí priebeh nabíjania.
2. Keď je batéria úplne nabitá, blikanie sa zastaví.
3. Neodporúča sa nabíjať batériu, keď je úplne vybitá na najnižšiu úroveň.
4. Výdrž batérie na jedno nabitie závisí od rýchlosti masáže. Vyššie rýchlosti masáže vybíjajú batériu mnohonásobne rýchlejšie.
5. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
6. Nabíjanie batérie môže trvať 3 až 6 hodín.

VENUJTE POZORNOSŤ

1. Pri výmene aplikačnej hlavy sa vždy uistite, že je čo najpevnejšie zatlačená do otvoru určeného pre aplikátor.
2. Zariadenie nepoužívajte dlhšie ako 1 hodinu v kuse. To by mohlo výrazne skrátiť jeho životnosť. Medzi jednotlivými použitiami nechajte uplynúť aspoň 30 minút.
3. Keď je batéria nabitá a rozhodnete sa zariadenie začať používať, vždy odpojte napájací kábel.
4. Silu masáže si môžete zvoliť sami podľa tlaku, ktorý vyvíjate na jednotlivé časti tela. Vždy majte na pamäti, že celková intenzita masáže vždy závisí od sily, ktorou pôsobíte na časť tela, a od nastavenej rýchlosti.
5. Na začiatku vždy začnite zariadenie používať pri nižšej rýchlosti masáže.

MOŽNOSTI POUŽITIA

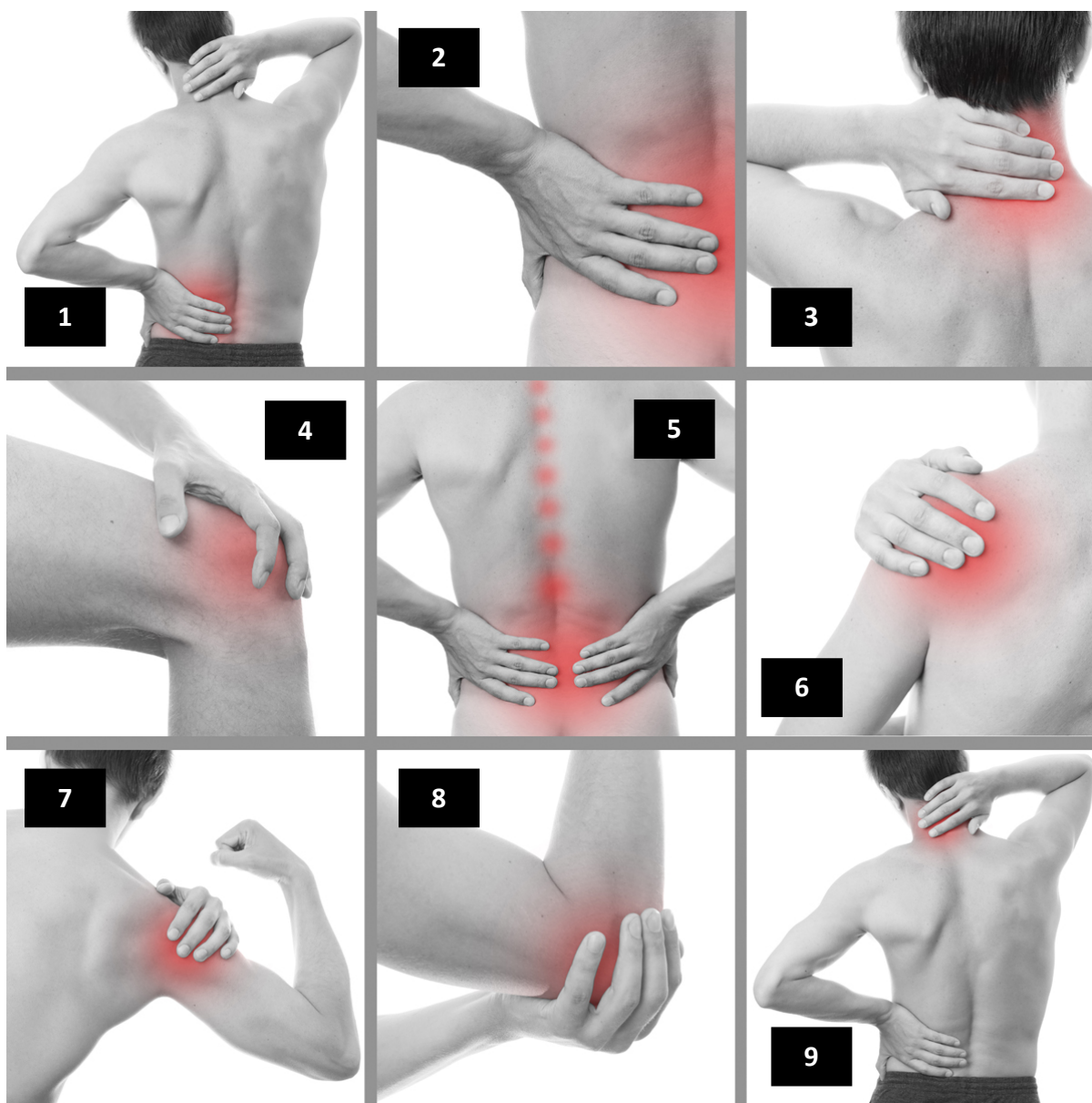

1. Bedrová oblasť
2. Dolná časť chrbta
3. Krčná chrbtica
4. Kolená
5. Oblasť okolo chrbtice
6. rameno
7. rameno
8. Koleno
9. Krčná chrbtica + krk

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, renováciu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, získajte potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych orgánov alebo od svojho predajcu.

CERTIFIKÁCIA



Výrobok je schválený na používanie v krajinách Európskej únie a je označený značkou CE. Vyhlásenie o zhode a všetka dokumentácia je k dispozícii u dovozcu.

DOPRAVA

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, neváhajte nás kontaktovať:
E-mail: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tlačové chyby, funkcie a zmeny technických parametrov vyhradené.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Podpísaný, zastupujúci spoločnosť

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, ID: 29195454

týmto ako dovozca do EÚ vyhlasuje, že tento výrobok s obchodným názvom

Prenosný masážny prístroj BeautyRelax Kineticforce

predávané pod modelovým označením: **BR-1790B;BR-1790P;BR-1790R**

EAN: **8594166118539;8594166118959;8594166118966**

patriace do skupiny výrobkov značky **BeautyRelax**

je v súlade s týmito európskymi normami:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Na základe súladu s týmito smernicami bol výrobok označený CE.

Výrobok je tiež v súlade so smernicou 2002/95/ES (RoHS). Všetky materiály sú zdravotne nezávadné. Neobsahujú žiadne ťažké kovy, ako je kadmium a iné toxické látky.

Pre bezpečné používanie je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia.



Martin Hrbek, výkonný riaditeľ

Miesto vydania: Brno Deň: 1.4.2020