

NÁVOD NA OBSLUHU

Prístroj na fotónovú terapiu
Beautyrelax BR-2610

LIGHTMASK EXCLUSIVE



OBSAH:

UPOZORNENIE	4
KONTRAINDIKÁCIE	5
OBSAH BALENIA	5
TECHNICKÉ PARAMETRE	5
ZAVEDENIE ZARIADENIA	6
HLAVNÉ VÝHODY	6
FOTÓNOVÁ SVETELNÁ TERAPIA	6
PRIAZNIVÉ ÚČINKY FOTÓNOVEJ TERAPIE	6
OPIS NÁSTROJA	8
POUŽITIE PODĽA TYPU POKOŽKY	9
OVLÁDANIE ZARIADENIA	10
NABÍJANIE BATÉRIE	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ	11
CERTIFIKÁCIA	11
DOPRAVA	11
ES VYHLÁSENIE O ZHODE	12

Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru pri kúpe nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky podrobné informácie v návode na použitie. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Zariadenie používajte presne podľa pokynov. Všetky tieto kroky pomôžu maximálne využiť všetky funkcie prístroja. V tejto príručke sa vám pokúsime poskytnúť čo najlepšiu predstavu o použitej technológii a o tom, ako prístroj čo najlepšie používať.

Ak pri čítaní pokynov narazíte na akékoľvek nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: mh@santadria.cz

Návod na použitie si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie.

UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím si prečítajte tento návod, prečítajte si všetky ilustrácie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Ak je vaša pokožka postihnutá vážnym kožným ochorením, zariadenie nepoužívajte. Pri prvom použití sa poraďte so svojím praktickým lekárom.
- Zariadenie je primárne určené na vaše osobné použitie. Nezdieľajte ho s rodinnými príslušníkmi ani priateľmi. Ak zariadenie používa viac ako jedna osoba, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hygiene.
- Ak je zariadenie poškodené, nefunguje správne alebo spadlo do vody, nikdy ho neuvádzajte do prevádzky.
- Ak je jednotka poškodená, nedotýkajte sa vnútorných častí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie spadne na zem, môže sa poškodiť. V takom prípade prístroj ďalej nepoužívajte a obráťte sa na servisné oddelenie predajcu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody alebo na miestach so zvýšenou vlhkosťou (vaňa, sprcha, bazén atď.).
- Zariadenie nie je možné umývať. Nesmie byť ponorený do vody ani pod prúdom tečúcej vody.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Po každom použití spotrebič vždy dôkladne vypnite.
- Ak bolo zariadenie premiestnené z veľmi chladného do veľmi teplého prostredia, pred použitím počkajte aspoň 3 hodiny.
- Spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami, ktorých fyzický alebo duševný stav neumožňuje bezpečné používanie spotrebiča.
- Zariadenie neumiestňujte ani nepoužívajte na horúcich zdrojoch tepla (radiátor, sporák, oheň atď.).
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať alebo opravovať.
- Zariadenie skladujte v suchom prostredí. Snažte sa ho chrániť pred prachom.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke. Nezodpovedá za následky spôsobené nedodržaním bezpečnostných upozornení.
- Distribútor nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným použitím.



KONTRAINDIKÁCIE

Prístroj **by za žiadnych okolností nemali** používať osoby postihnuté niektorým z týchto stavov:

- Epilepsia, vírusové ochorenie
- Duševné ochorenie
- Stavy úzkosti
- Depresia
- V stave vysokej horúčky
- Ochorenie srdca, kardiostimulátor, hypertenzia
- Osoby, ktoré vyžadujú stály dohľad, môžu zariadenie používať len po konzultácii s lekárom



OBSAH BALENIA

- 1x maska na tvár Beautyrelax BR-2610
- 1x nabíjací kábel USB
- 1x návod na obsluhu

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Časovač: áno, 28 minút
- Prevádzkové napätie: 5 V
- Prevádzkový prúd: 1A
- Napájanie: 850mAh nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Nabíjanie: cez kábel USB (je súčasťou balenia)
- Rozmery: 19,7 × 19,5 × 13 cm
- Hmotnosť: 190 g

ZAVEDENIE ZARIADENIA

Fotónová svetelná terapia je veľmi populárna v oblasti kozmetických ošetrovaní. Ošetrovanie fotónovým svetlom nebolí a má veľmi dobré výsledky. Prístroj na fotónovú terapiu BeautyRelax Lightmask Exclusive poskytuje fotónovú terapiu s úplným pokrytím tváre. Váš zrak je počas používania maximálne chránený. Tvárová maska sľubuje veľmi pohodlné používanie v porovnaní s manuálnymi zariadeniami. Zariadenie nemusíte držať v ruke a zároveň svetlo rovnomerne pokrýva celú tvár. Pre úspešné výsledky je rozhodujúca dôslednosť vystavenia fotónovému svetlu.

HLAVNÉ VÝHODY

- Rovnomerné pokrytie tváre svetelnými pásmi
- Nízka hmotnosť masky nezaťažuje hlavu
- Praktické ovládanie jedným tlačidlom
- Jednoduché bezdrôtové používanie
- Napájanie pomocou zabudovanej nabíjateľnej batérie

FOTÓNOVÁ SVETELNÁ TERAPIA

Svetlo je jednoducho viditeľná časť elektromagnetického žiarenia rôznych frekvencií. Dosahuje rôzne vlnové dĺžky v intervale 390 až 760 nm (nanometrov). Ľudské oko je schopné vnímať svetlo s vlnovou dĺžkou od 400 do 800 nm. Pri fotónovej terapii vstupuje svetlo do tela ako prúd energie vo forme fotónov. Je vedecky dokázané, že rôzne vlnové dĺžky svetla majú špecifické účinky na starostlivosť o pleť. Štúdie overili skutočné pozitívne terapeutické účinky na živé tkanivá a organizmy na bunkovej úrovni.



SKUTOČNÉ POZITÍVNE ÚČINKY NA ŽIVÉ TKANIVÁ A ORGANIZMY NA BUNKOVEJ ÚROVNI

- Fotónové svetlo môže neinvazívne a bezbolestne preniknúť do vnútra bunky.
- Svetlo aktivuje fotoreceptory v bunkách.
- Svetelná terapia stimuluje hojivú silu buniek prirodzeným spôsobom.
- Fotónová terapia nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky ani poškodenie organizmu.
- Rieši zápalové ochorenia spôsobené chorobou, úrazom alebo stresom.

PRIAZNIVÉ ÚČINKY FOTÓNOVEJ TERAPIE

Zápalové ochorenia môžu vzniknúť v dôsledku choroby, poranenia alebo stresu. Svetelná terapia stimuluje hojivú silu buniek prirodzeným spôsobom. Svetlo môže vstúpiť do vnútra bunky neinvazívne a bezbolestne. Svetlo aktivuje fotoreceptory v bunkách. Fotónová terapia nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky ani poškodenie organizmu. Vďaka svojim pozitívnym účinkom si získal popularitu nielen v oblasti dermatológie, ale aj v segmente kozmetického ošetrovania pleti.



Červené svetlo

Vlnová dĺžka 660 až 665 nm

Stimuluje podporu tvorby kolagénu. Kolagén je základný proteín, ktorý slúži na obnovu poškodených a starnúcich tkanív. Zlepšenie kvality pleti a zmenšenie pórov. Pomáha spomaľovať starnutie pokožky.



Modré svetlo

vlnová dĺžka 465 až 470 nm


Baktérie akné obsahujú porfyríny. Modré svetlo je vďaka svojej vysokej afinite k vlnovej dĺžke schopné ničiť porfyríny. Okrem toho má modré svetlo upokojujúci účinok, ktorý je veľmi účinný pre precitlivenú pokožku.



Fialové svetlo

vlnová dĺžka 395 až 440 nm

Podporuje regeneráciu kožných buniek. Zameriava sa na vrstvu epidermy. Zlepšuje krvný obeh a bunkový metabolizmus.

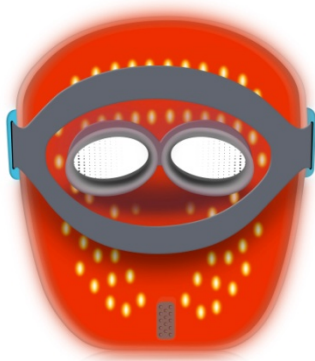

Oranžové svetlo


Vlnová dĺžka 600 až 605 nm

Oranžové svetlo pomáha zosvetliť pigmentové škvrny. Zameriava sa na vrstvu dermy. Podporuje krvný obeh a aktivuje bunky. Potláča tvorbu tmavých škvŕn. Ideálny na rozjasnenie pleti.

OPIS NÁSTROJA



- 1. Tlačidlo ON/OFF
- 2. Vstup pre nabíjací kábel
- 3. Popruh na hlavu
- 4. Priestor pre oči
- 5. Podpora brady
- 6. Port USB pre napájací kábel

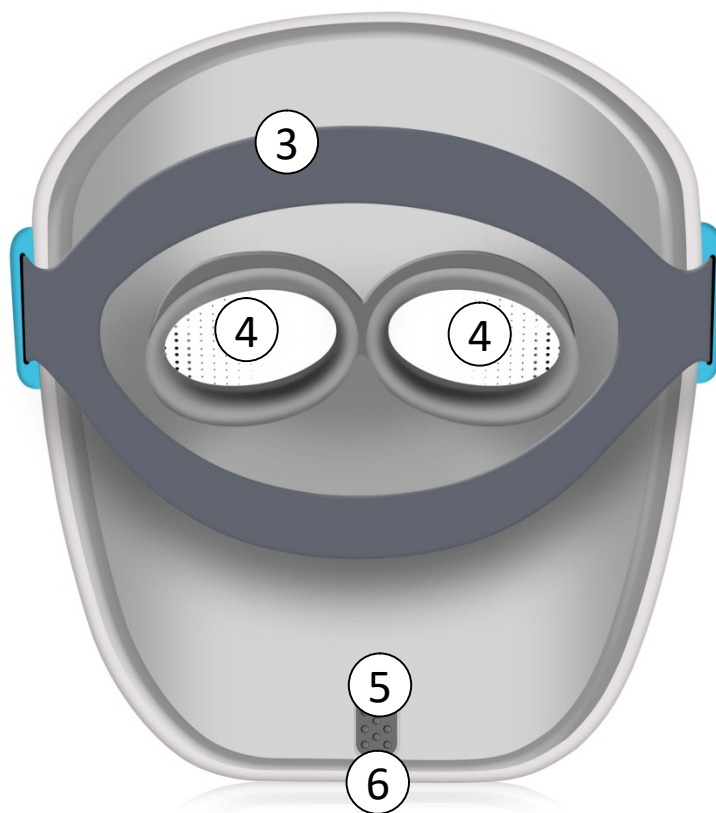

POUŽITIE PODĽA TYPU POKOŽKY

Šetrnosť fotónovej terapie umožňuje ošetrovať všetky typy pleti.



normálne



suché



zmiešané



mastné



citlivé



akné

OVLÁDANIE ZARIADENIA

1. Pred použitím odporúčame odstrániť z pokožky make-up. Pokožku dôkladne umyte a osušte.
2. V prípade potreby môžete použiť svoj obľúbený kozmetický krém alebo sérum.
3. Skontrolujte, či je batéria zariadenia dostatočne nabitá.
4. Zariadenie si nasadte na hlavu tak, aby vám vyhovovalo. Maska by nemala príliš tlačiť na tvár. Na druhej strane by mal pevne sedieť na tvári.
5. Dlhو stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Zariadenie sa zapne. Zapnutie je sprevádzané zvukovým signálom. Červené svetlo sa spustí automaticky.
6. Každá farba má prednastavený časovač na 7 minút. Potom sa automaticky prepne na ďalšiu farbu. Ak chcete, aby fungovala konkrétna farba, môžete jednotlivé farby svetla prepínať krátkym stlačením tlačidla **ON/OFF**.
7. Ak chcete zabezpečiť komplexnú starostlivosť o pokožku pomocou fotónového svetla, odporúčame nechať zariadenie postupne meniť všetky farby svetla.
8. Po 28 minútach sa zariadenie automaticky vypne.
9. Ideálna doba používania je 30 až 60 minút (jedno alebo dve automatické ošetrenia).
10. Frekvencia používania je optimálna 2 až 3-krát týždenne.
11. Zariadenie môžete kedykoľvek vypnúť dlhým stlačením tlačidla **ON/OFF**. Vypnutie je sprevádzané zvukovým signálom.

Poznámka: Pri používaní masky sa dotýkajte najmä oblastí okolo očí a brady. Aby bolo používanie čo najpohodlnejšie, posuňte hlavový popruh trochu vyššie nad temeno hlavy. Maska dobre drží na tvári.

NABÍJANIE BATÉRIE

Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Dostatočne nabitá batéria umožňuje správnu funkciu prístroja.

Postup nabíjania:

1. Na nabíjanie použite nabíjací adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
2. Po vybití batérie sa zariadenie vypne a nie je možné ho zapnúť.
3. Druhý koniec pripojte k nabíjacej zásuvke.
4. Pribeh nabíjania je signalizovaný červeným svetlom. Plné nabitie - indikácia zhasne.
5. Dĺžka nabíjania závisí od stavu vybitia a celkového stavu batérie.

Upozornenie: Na nabíjanie používajte iba priložený adaptér. Použitie iného typu adaptéra môže spôsobiť fatálne poškodenie batérie a stratu záruky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Udržujte povrch zariadenia čistý. Najmä oblasť na vnútornej strane masky, kde sa aplikuje svetelná terapia. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Vlhkosť nesmie NIKDY preniknúť priamo do zariadenia. Na čistenie je ideálny bavlnený kozmetický tampón alebo suchá handrička. Počas údržby nikdy nepoužívajte žiadne ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, renováciu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, získajte potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych orgánov alebo od svojho predajcu.

CERTIFIKÁCIA



Výrobok je schválený na používanie v krajinách Európskej únie a je označený značkou CE. Vyhlásenie o zhode a všetka dokumentácia je k dispozícii u dovozcu.

DOPRAVA

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, neváhajte nás kontaktovať:

E-mail: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tlačové chyby, funkcie a zmeny technických parametrov vyhradené.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Podpísaný, zastupujúci spoločnosť

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, ID: 29195454

týmto ako dovozca do EÚ vyhlasuje, že tento výrobok s obchodným názvom

LIGHTMASK EXCLUSIVE maska na tvár

predávané pod názvom modelu: **BR-2610**

EAN: **8594166119482**

patriace do skupiny výrobkov značky **BeautyRelax**

je v súlade s týmito európskymi normami:

EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 55014-2:2015

EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010

EN 61000-4-4: 2012 EN 61000-4-5: 2014+A1:2017

EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017

Na základe súladu s týmito smernicami bol výrobok označený CE.

Výrobok je tiež v súlade so smernicou 2002/95/ES (RoHS). Všetky materiály sú zdravotne nezávadné. Neobsahujú žiadne ťažké kovy, ako je kadmium a iné toxické látky.

Pre bezpečné používanie je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia.



.....
Martin Hrbek, výkonný riaditeľ

Miesto vydania: Brno Deň: 1.4.2022