

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj na podporu pružnosti pleti
BeautyRelax BR-2620

EMS LIFT SMART



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE	5
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	5
OBSAH BALENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
EMS LIFTING	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE	9
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	10
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Přístroj není zdravotnický prostředek.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arterioskleróza
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE

- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Při používání budete vnímat pouze jemné mravenčení.
- Ošetření pleti je časově nenáročné.

VLASTNOSTI & SPECIFIKACE

- Stimulace pleti EMS pulzy
- 4 úrovně intenzity
- Určeno na povadlou a nezdravě vyhlížející pleť
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Intenzivní stimulace kolagenních a elastických vláken
- Výrazné nerovnosti pleti způsobené věkem
- Největší aplikační hlavice ve srovnání s přístroji obdobného typu
- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Při používání budete vnímat pouze jemné mravenčení
- Ošetření pleti je časově nenáročné
- Určeno pro ošetření obličeje a dekoltu
- Kompaktní rozměry
- Bezdrátový (snadno se používá)
- Napájení: li-ion baterie
- Nabíjení: USB kabelem (součást balení)
- Rozměry: 5,6×13,1cm
- Hmotnost: 83g

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2620.
- Nabíjecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj na podporu pružnosti pleti BeautyRelax Emslift Smart. Určeno pro zralou a povislou pleť. Maximální efekt stimulace kolagenních a elastických vláken. Pravidelné používání udržuje pleť ve skvělé kondici. Zvýšení pružnosti pleti se zaměřením na výrazné vrásky a nerovnosti pleti. Posílení obličejových svalů.

EMS LIFTING

Obličej je protkaný hustou strukturou svalů. Obličejové svaly tvoří skupinu svalů, které mají za následek výraz a mimiku obličeje. V průběhu života však ztrácí svojí pružnost a elasticitu. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily ošetření obličeje. Aplikační hlavice kosmetického přístroje přenáší při kontaktu s pleť jemné elektrické pulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. Kosmetické přístroje s funkcí elektrické stimulace svalů se používají výhradně pro ošetření obličeje. Aplikační hlavice stimuluje ty části obličeje, kde je největší tuková a svalová tkáň. Dochází ke zlepšení pružnosti a pevnosti jemných obličejových svalů.



ZÁSADNÍ ÚČINKY TECHNOLOGIE EMS

- podpora krevního oběhu obličeje
- stimulace lymfatického systému obličeje
- zvýšení elasticity pleti
- redukce jemných mimických vrásek
- remodelace kolagenových vláken
- zvýšení pružnosti kontur obličeje

POPIS PŘÍSTROJE



- 1. Aplikační hlavice**
- 2. Tlačítko +**
- 3. Tlačítko -**
- 4. Vstup pro napájecí kabel**
- 5. Světelná signalizace - úroveň intenzity EMS pulzů 1 (nízká)**
- 6. Světelná signalizace - úroveň intenzity EMS pulzů 2 (základní)**
- 7. Světelná signalizace - úroveň intenzity EMS pulzů 3 (vysoká)**
- 8. Světelná signalizace - úroveň intenzity EMS pulzů 3 (nejvyšší)**

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Než přistoupíte k samotnému ošetření, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Naneste na pleť tenkou vrstvu sonogelu.
2. Přístroj zapnete stiskem tlačítka **(+)**. Aplikační hlavice generuje elektrické mikropulzy na nízké úrovni 1.
3. Dalším stiskem tlačítka **(+)** zvýšíte intenzitu mikropulzů o jeden stupeň na úroveň 2.
4. Dalším stiskem tlačítka **(+)** zvýšíte intenzitu mikropulzů o jeden stupeň na úroveň 3.
5. Dalším stiskem tlačítka **(+)** zvýšíte intenzitu mikropulzů o jeden stupeň na úroveň 4.
6. Pomocí tlačítka **(-)** můžete snížit intenzitu působení mikropulzů dle vaší potřeby. Je doporučeno vždy začínat od nejnižší hodnoty a přidávat postupně. Každý stisk tlačítka je doprovázen zvukovou signalizací.
7. Průběh působení mikropulzů je doprovázeno zvukovou signalizací - pípáním. Jedná se o průvodní jev zapnutého přístroje.
8. Ovládací tlačítko pracuje v režimu VYPNUTO - 1 - 2 - 3 - 4 - VYPNUTO.

Poznámka 1: Po pleti se pohybujte vždy pomalu.

Poznámka 2: Při ošetření dbejte na to, aby byly v kontaktu s pletí obě aplikační hlavice.

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

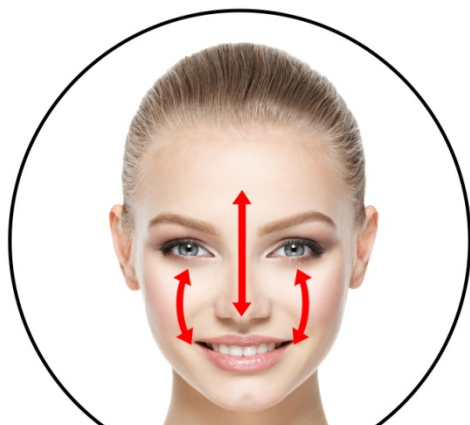

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nejde zapnout.	Přístroj je zapojen k nabíjecímu USB kabelu.	Před použitím přístroje odpojte přístroj od napájecího kabelu.
	Baterie je vybitá.	Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte.
Problém s nabíjením.	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k USB portu počítače nebo notebooku.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do USB portu počítače nebo notebooku.
	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k přístroji.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu od přístroje.
	Nabíjecí kabel je poškozen.	Vyměňte nabíjecí kabel za nový.
Působení elektrických mikropulzů je příliš silné.	Úroveň intenzity je příliš silná.	Snižte úroveň intenzity nižší úroveň.
	Sonogel je na pleti v příliš malém množství nebo vůbec.	Aplikujte na pleť větší množství gelu pro zvýšení vodivosti pleti.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak poznám, že EMS pulzy pracují správně?

Při pohybu aplikačních hlavic po pleti můžete vnímat přítomnost EMS pulzů jako jemné mravenčení. Přesně v ten moment jsou stimulovány všechny struktury jemných mimických vrásek. Pulzy stimulují kolagenní a elastická vlákna pokožky.

S přístrojem se pohybuji po pleti a necítím žádné pulzy. Je to v pořádku?

Působení elektrických mikropulzů je velmi subjektivní a individuální. Závisí na více faktorech. Vnímání elektrických pulzů je slabší, pokud máte na ošetřované partii silnější tukovou vrstvu. Příčina může spočívat v malém množství kosmetického krému na pleti. Během používání můžete také změnit úhel úchopu přístroje.

Jak zvolit správnou intenzitu funkce EMS?

Přístroj nabízí celkem 4 úrovně intenzity EMS pulzů. Každý uživatel může mít jinou vrstvu podkožního tuku. Tuk funguje jako odpor. Pokud je podkožního tuku více, elektrické pulzy musí mít větší sílu, aby pronikly až do vrstvy dermis.

Mohu přístroj používat, pokud mám na pleti make-up?

Před každým použitím přístroje vždy odstraňte všechny zbytky make-upu. Vytvářel by překážku mezi masážními válečky a pletí. Elektrické mikropulzy by tak nemohli dostatečně proniknout do pleti.

Jak často a dlouho přístroj používat?

V této oblasti není žádné výrazné omezení. Optimální délka ošetření by se měla pohybovat mezi 15 až 20 minutami. Lze každý den během odpočinku nebo sledování televize. Ráno před použitím make-upu nebo večer před spaním. Pokud je při vyšším výkonu pleť více podrážděna, před dalším použitím přístroje si udělejte den a dva pauzu.

Mohu použít přístroj kromě obličeje i na tělo?

Díky velikosti válečků lze použít přístroj nejen na obličej, ale také na tělo. Vždy je lepší použít tělový krém, aby se zvýšila vodivost pleti a elektrické mikropulzy mohly co nejlépe působit na pleť.

Je přístroj náročný na údržbu?

Po každém ošetření pleti věnujte pozornost zejména aplikačním hlavicím. Vždy dbejte na to, aby se na nich nenacházely zbytky vlhkosti. Jednou za čas použijte líh k maximální dezinfekci.

Kdy mohu očekávat nějaké výsledky?

Rychlost docílení příznivých účinků přístroje jsou velice individuální. Záleží na mnoha faktorech: míra podkožního tuku, věk, pohlaví. K dosažení výsledků je nezbytná kontinuita přístrojového ošetření. Díky kompaktní velikosti přístroje ho sebou můžete mít i na cestách. Snažte se, aby se přístroj stal běžnou součástí vašeho každodenního rituálu péče o pleť.

Je používání v některých případech zakázáno?

Jsou situace, kdy používání přístroje není doporučeno. Následujte pasáž v tomto návodu k obsluze s názvem kontraindikace.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Vstup pro nabíjecí kabel je umístěn na spodní straně přístroje. Nabíjecí kabel je součástí balení. Druhý konec zapojíte do USB portu počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte k nabíjecímu stojánu. Druhý k USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení doprovází světelná pulzující signalizace.
4. Jakmile je baterie nabita, světelné pulzování ustane.
5. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie. Proces nabíjení může trvat až 2 hodiny.

Jakmile kapacita baterie klesne pod 20%, symbol baterie začne blikat. V případě nízkého stavu baterie se přístroj automaticky vypne.

Nabíjecí kabel nepřipojujte k žádnému typu adaptéru do sítě 220V. Mohlo by dojít k poškození přístroje. Pro nabíjení používejte vždy USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byly aplikátory dostatečně očištěny. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampóněk nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160