

Silk'nTM
Beautiful Technology

SKINVIVID

I389



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International,
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko
www.silkn.eu
info@silkn.com

Obsah

Zákonné oznámení	2
Obsah balení / části zařízení.....	5
Obecná informace	6
Čtení a uložení návodu k použití	6
Vysvětlení symbolů.....	6
Bezpečnost	8
Správné použití.....	8
Bezpečnostní instrukce.....	8
První použití.....	12
Nabíjení přístroje SkinVivid	12
Příprava	12
Masážní režim (horký, studený, zvukové vibrace)	13
Provoz.....	13
Tipy pro každodenní použití	14
Ranní rituál	14
Večerní rituál	14
Čištění.....	15
Odstraňování problémů	16
Technická data.....	17
Prohlášení o shodě	17
Likvidace	18
Likvidace obalu	18
Likvidace SkinVivid.....	18
Informace o záruce.....	19
Služby zákazníkům.....	19

A

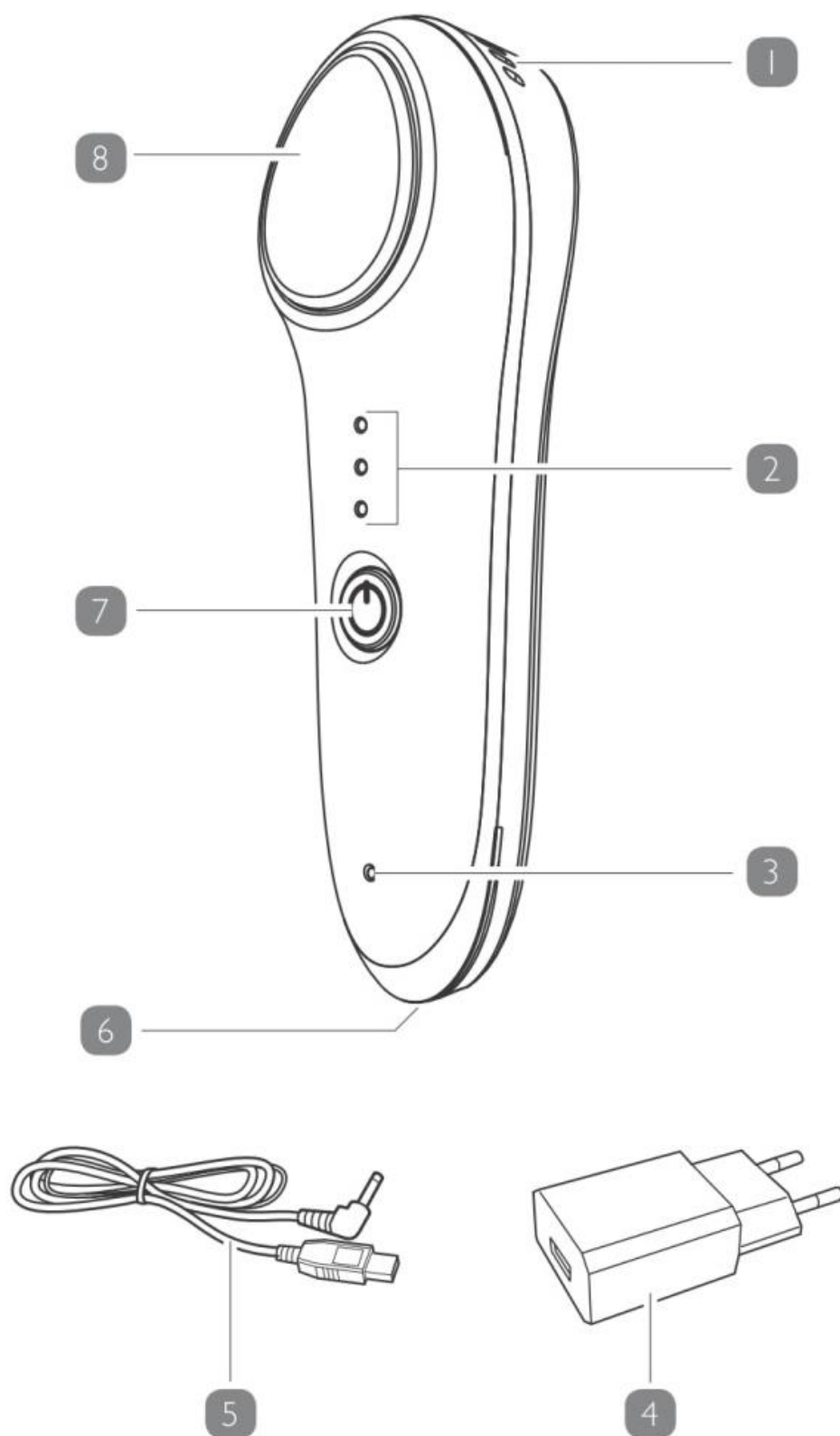

Obsah balení / části zařízení

1. Ventilace
2. Indikátor režimu masáže
 - Indikátor pro horkou masáž
 - Indikátor pro studenou masáž
 - Indikátor pro zvukové vibrace
3. Indikátor nabíjení
4. USB síťový adaptér
5. Nabíjecí kabel USB
6. Konektor pro nabíjení
7. Ovladač
8. Masážní hlava

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka se vztahuje k masážnímu přístroji SkinVivid (dále jen „SkinVivid“). Obsahuje důležité informace o spuštění a manipulaci.

Před použitím SkinVivid si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny. Nedodržení této uživatelské příručky může mít za následek vážné zranění nebo poškození přístroje SkinVivid.

Uživatelská příručka vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. Pokud jste v zahraničí, musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi.

Návod k použití uchovávejte pro budoucí použití. Pokud předáváte produkt SkinVivid třetím stranám, nezapomeňte tento návod k použití přiložit.

Tuto uživatelskou příručku si můžete vyžádat také ve formátu PDF na našich webových stránkách www.silkn.eu.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly a signální slova se používají v tomto návodu k použití, na přístroji SkinVivid nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí s vyšším stupněm rizika, které může vést k úmrtí nebo vážnému zranění, pokud mu není zabráněno.



POZOR!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek menší nebo střední zranění.

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento symbol vám poskytuje užitečné doplňující informace o použití.



Prohlášení o shodě (viz kapitola „Prohlášení o shodě“): Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné předpisy Společenství pro Evropský hospodářský prostor.



Nepoužívejte SkinVivid v blízkosti vany, sprchových vaniček nebo jiných nádob obsahujících vodu.



Tento symbol označuje elektrická zařízení, která patří do třídy ochrany II (síťový adaptér).



Elektrická zařízení označená tímto symbolem jsou vhodná pouze pro použití v suchých místnostech.

Bezpečnost

Správné použití

SkinVivid je určen pouze k vyhlazení, zpevnění a zlepšení pružnosti pokožky teplou a studenou masáží. SkinVivid je vhodný pro všechny typy pleti. Těhotné osoby a osoby s popáleninami, akné, alergiemi nebo jinak podrážděnou kůží nesmějí přípravek SkinVivid používat.

SkinVivid je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely, např. pro kosmetické salony. Nevystavujte SkinVivid povětrnostním podmínkám a nepoužívejte je ve vlhkých prostorách. SkinVivid není dětská hračka.

Používejte SkinVivid pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku.

InnoEssentials nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

- SkinVivid připojujte pouze tehdy, pokud síťové napětí zásuvky odpovídá specifikaci typového štítku.
- Přístroj SkinVivid připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky, abyste jej mohli v případě poruchy rychle odpojit od sítě.
- Nepoužívejte přístroj SkinVivid, pokud je viditelně poškozen nebo je-li vadný kabel USB nebo síťový adaptér USB.
- Pokud je nabíjecí kabel přístroje SkinVivid poškozen, musí být vyměněn za nabíjecí kabel USB se stejnou specifikací, aby nedošlo k žádnému riziku. Obraťte se prosím na specializovaný obchod nebo zákaznický servis.
- Neotevírejte kryt; místo toho nechte provést opravy kvalifikovaným odborníkem. Obraťte se na odborný servis nebo na zákaznický servis.
- V případě oprav provedených uživatelem, nesprávným připojením přístroje nebo nesprávným provozem se ruší nároky z odpovědnosti a záruky.
- Pro opravy mohou být použity pouze díly, které splňují původní informace o přístroji. Elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí, jsou součástí přístroje SkinVivid.
- Přístroj SkinVivid ani nabíjecí kabel USB ani síťový adaptér USB neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru USB vlhkými rukama.

- Nikdy nevytahujte SkinVivid ze zásuvky pomocí nabíjecího kabelu USB; místo toho vždy postupujte tak, že uchopíte síťový adaptér USB.
- Udržujte SkinVivid, síťový adaptér USB a nabíjecí kabel USB mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Nezakrývejte nabíjecí kabel a nepokládejte jej na ostré hrany.
- Používejte SkinVivid pouze v interiéru.
- Neskladujte SkinVivid ve vlhkých prostorách a v žádném případě jej nevystavujte vlivům deště.
- Nikdy neskladujte SkinVivid tak, že hrozí nebezpečí, že spadne do vany nebo umyvadla.
- Nikdy nesahejte na elektrické zařízení připojené k síti, pokud spadlo do vody. V takovém případě okamžitě odpojte síťový adaptér USB ze zásuvky.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru USB vlhkými rukama.
- Jakmile je SkinVivid zcela nabitý nebo chcete-li jej vyčistit, nechte SkinVivid vypnutý a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- S SkinVivid nechodte do blízkosti silných magnetických polí.
- Při nabíjení nepoužívejte přístroj SkinVivid.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí výbuchu a požáru!

Nesprávná manipulace s akumulátorem představuje zvýšené riziko výbuchu a požáru.

- Nikdy nevystavujte SkinVivid teplu, jako je přímé sluneční světlo, otevřený oheň nebo podobně.
- Jakmile je SkinVivid plně nabitý, vytáhněte síťový adaptér USB ze zásuvky.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí pro děti a osoby s tělesnými, smyslovými nebo duševními poruchami (např. osoby se zdravotním postižením, starší osoby se sníženými tělesnými a duševními schopnostmi) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Skupiny SkinVivid nesmějí používat tyto skupiny osob: děti, osoby mladší 16 let, dospělí s tělesnými, smyslovými nebo duševními poruchami nebo osoby bez zkušeností s přístrojem.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj SkinVivid a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Obsah balení zahrnuje obalový materiál. Uchovávejte mimo dosah dětí, protože při požití hrozí nebezpečí udušení.



POZOR!

Nebezpečí chemického popálení!

Uniklá tekutina z akumulátoru může způsobit zranění, pokud se dostane do styku s pokožkou nebo jinými částmi těla.

- Pokud tekutina z akumulátoru přístroje SkinVivid unikla, vezměte si ochranné rukavice a zajistěte, aby se tekutina z akumulátoru nedostala do styku s pokožkou, očima nebo sliznicemi.
- V případě kontaktu s kyselinou z akumulátoru ihned opláchněte příslušné oblasti velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.



POZOR!

Nebezpečí poranění!

Nesprávné zacházení s produktem SkinVivid může mít za následek zranění.

Nepoužívejte aplikaci SkinVivid, pokud:

- jste těhotná
- trpíte neurologickými onemocněními
- podstoupili jste kosmetickou operaci v oblasti obličeje
- jste alergičtí na chlad, teplo nebo měkkou gumu
- máte kovové, keramické nebo plastové implantáty v důsledku zlomenin nebo jiné plastické chirurgie v oblasti obličeje
- nejste schopni cítit teplo nebo nejste citlivý/-á na teplo.

Nepoužívejte SkinVivid, pokud trpíte následujícím podrážděním nebo onemocněním kůže:

- alergie
- akné
- ekzém
- podrážděná kůže, zarudnutí nebo podráždění (včetně spálení sluncem)
- otok v oblasti obličeje
- rány kolem obličeje
- lupénka
- neurodermatitida

Nepoužívejte SkinVivid v blízkosti otevřených ran nebo pro odstraňování bradavic.

Pokud se u Vás objeví bolest nebo podráždění kůže, okamžitě ukončete léčbu.

Neprovádějte nepřetržité ošetření pokožky kůže déle než dvě až tři sekundy na stejném místě.

Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás SkinVivid vhodný, zeptejte se před prvním použitím svého lékaře.

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s produktem SkinVivid může mít za následek poškození zařízení SkinVivid.

- Chraňte SkinVivid před otřesy, extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.
- SkinVivid používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Chraňte přístroj SkinVivid před korozivními kapalinami.

První použití

Kontrola vzhledu SkinVivid a obsahu balení

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Pokud nejste opatrní při otevírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete přístroj SkinVivid rychle poškodit.

- Při otevírání obalu buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte SkinVivid z obalu.
2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz obr. A).
3. Zkontrolujte, zda SkinVivid nebo jednotlivé části nevykazují poškození. V takovém případě nepoužívejte přístroj SkinVivid. Obráťte se na místní servisní středisko Silk'n (viz kapitola „Informace o záruce“).

Nabíjení přístroje SkinVivid



Během nabíjení je normální, že se přístroj SkinVivid zahřeje.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj SkinVivid vypnutý.
2. Úplně uvolněte nabíjecí kabel USB (5).
3. Zasuňte zástrčku konektoru nabíjecího kabelu USB do konektoru pro nabíjení (6) přístroje SkinVivid.
4. Zasuňte konektor USB nabíjecího kabelu do konektoru USB síťového adaptéru (4).
5. Zasuňte síťový adaptér USB do elektrické zásuvky. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení (3) červeně. Doba nabíjení pro úplné nabití dobíjecí baterie přístroje SkinVivid činí cca. 3 hodiny.
6. Jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá, indikátor nabíjení se rozsvítí modře. Odpojte SkinVivid od síťového napájení.
Nabíjecí baterii lze nyní provozovat po dobu 40 minut.

Příprava

1. Před použitím přípravku SkinVivid očistěte obličej a části pokožky, které chcete ošetřit, pomocí běžných kosmetických čisticích prostředků.
2. Pokud je to nutné, upravte si obličej a části pokožky, kterou hodláte ošetřit obvyklými ošetřovacími krémy a hydratačními krémy.

3. Pokud chcete, aby tyto přípravky pro péči o pokožku rychleji absorbovaly, použijte horký režim se zvukovými vibracemi po nanesení krému (viz kapitola „Použití horké masáže“ a „Ovládání“).

Masážní režim (horký, studený, zvukové vibrace)



Každý zvolený režim se spustí automaticky na dobu 2 a ½ minuty. SkinVivid se poté vypne.

Použití horké masáže

Masáž pleti SkinVivid při teplotě 42°C podporuje cirkulaci v kůži a umožňuje rychlejší absorpci produktů péče o pleť a zlepšuje rovnováhu vlhkosti. Zapnutí zvukové vibrace zlepší efekt horké masáže.

V ideálním případě byste měli tento režim používat po každodenním očištění obličeje.

Použití studené masáže

Masáž za studena při 6°C zpevňuje vaši pokožku a snižuje velikost pórů.

V tomto režimu SkinVivid také uvolňuje napjaté svaly, snižuje otok očí a vrásky. Zapnutí zvukové vibrace zvýší účinek studené masáže.

V ideálním případě byste měli tento režim používat po každodenním očištění obličeje a úplné absorpci přípravků na péči o pleť a před použitím make-upu.



Pro hladší, zářivější a pružnější pokožku doporučujeme střídavě masírovat teplou a studenou masáží.

Provoz



Při nabíjení nelze použít přístroj SkinVivid.

1. Chcete-li zapnout přístroj SkinVivid, podržte ovládací knoflík (7) po dobu 3 sekund. Ozve se pípnutí, horní světlo indikátoru režimu masáže (2) se rozsvítí červeně a signalizuje, že SkinVivid je v režimu horké masáže.
2. Dalším stiskem ovládacího knoflíku zapnete zvukové vibrace. Ozve se pípnutí a kromě horního světla se současně rozsvítí spodní indikátor režimu masáže žlutě. SkinVivid je v režimu pro horkou masáž se zvukovými vibracemi.
3. Pro přepnutí do režimu pro studenou masáž znovu stiskněte ovládací knoflík. Ozve se pípnutí, světlo uprostřed indikátoru režimu masáže se rozsvítí modře a signalizuje, že SkinVivid je v režimu pro studenou masáž.

4. Opětovným stiskem ovládacího knoflíku zapnete zvukové vibrace.
Ozve se pípnutí a kromě středního světla se současně rozsvítí spodní světlo indikátoru režimu masáže žlutě. SkinVivid je v režimu pro studenou masáž se zvukovými vibracemi.
5. Přiložte SkinVivid na obličej a umístěte masážní hlavu (8) na požadovanou část obličeje.
6. V závislosti na části pokožky, kterou ošetřujete, nechte SkinVivid klouzat v kruhových pohybech zevnitř ven nebo shora dolů.
7. Pro vypnutí přístroje SkinVivid stiskněte ovladač na 3 sekundy.
Ozve se pípnutí a světla v indikátoru režimu masáže zhasnou.



Pro maximální výkon se doporučuje plně nabít SkinVivid po 5 použitích.

Tipy pro každodenní použití

Bez ohledu na to, zda máte suchou, mastnou nebo citlivou pokožku, Silk'n SkinVivid je vhodný pro všechny typy pleti.

Ranní rituál

Můžete použít horkou masáž, např. ráno po vyčištění obličeje. Poté aplikujte své produkty denní péče. Jakmile se dobře vstřebají, použijte masáž za studena, která je ideální např. pro uvolnění otoku očí a je vhodná pro vytvoření hladkého základu pro aplikaci make-upu.

Večerní rituál

Nebo se rozhodnete pro kompletní večerní rituál krásy po náročném dni. Po vyčištění pokožky nejprve použijte horkou masáž. Poté naneste oční gel, ošetřující masku nebo hydratační krém. Po vstřebání přípravků pro péči o pokožku použijte studenou masáž pro uzavření pórů a omlazení pokožky.

Čištění

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Použití nesprávných čisticích prostředků a čisticích pomůcek může dojít k poškození produktu SkinVivid.

- Nepoužívejte žádné tvrdé, ostré nebo škrábající čisticí prostředky a pomůcky.
- Přístroj SkinVivid ani nabíjecí kabel USB ani síťový adaptér USB neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Nikdy nedávejte žádné části do myčky.
- Po každém použití vyčistěte masážní hlavu (8) a SkinVivid přiloženým čisticím hadříkem.
- SkinVivid nečistěte vodou.

Odstraňování problémů

V případě chyby zkontrolujte, zda problém vyřeší následující kroky:

Problém	Možné příčiny a řešení
Přístroj SkinVivid nefunguje.	Dobíjecí baterie může být prázdná nebo není dostatečně nabitá. - Před použitím plně nabijte SkinVivid (viz kapitola „Nabíjení SkinVivid“).
Neexistují žádné viditelné efekty.	Před použitím jste zapomněli vyčistit nebo upravit pokožku obličeje. - Vyčistěte a upravte kůži podle pokynů v kapitole „Příprava“.
	SkinVivid jste příliš dlouho nepoužívali, nebo nebyl používán pravidelně. - Pravidelně používejte SkinVivid.

Technická data

Model: 1389

Číslo výrobku: SV1PEU001

Výkon: 5,6 W

Síťový adaptér

Model:	SC / 8WH050100EUU
Vstupní napětí:	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A
Výstupní napětí:	5V $\overline{\text{---}}$, 1000 mA
Třída ochrany:	II

SkinVivid

Nabíjecí baterie:	5V $\overline{\text{---}}$, 800 mAh
Doba nabíjení:	cca. 3 hodiny
Doba provozu:	cca. 40 minut (při plném nabití)
Rozměry (V × Š × H):	přibl. 15,2 × 4,8 × 4,3 cm
Teplotní masážní hlavy:	horká masáž 42°C ± 3°C, studená masáž 6°C ± 3°C
Automatická deaktivace:	po 2,5 minutách v libovolném režimu
Hmotnost:	cca. 109 g

Prohlášení o shodě



EU prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace SkinVivid

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud SkinVivid již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 I 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu