


Silk'n[®]
Beautiful Technology

SatinGlow

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

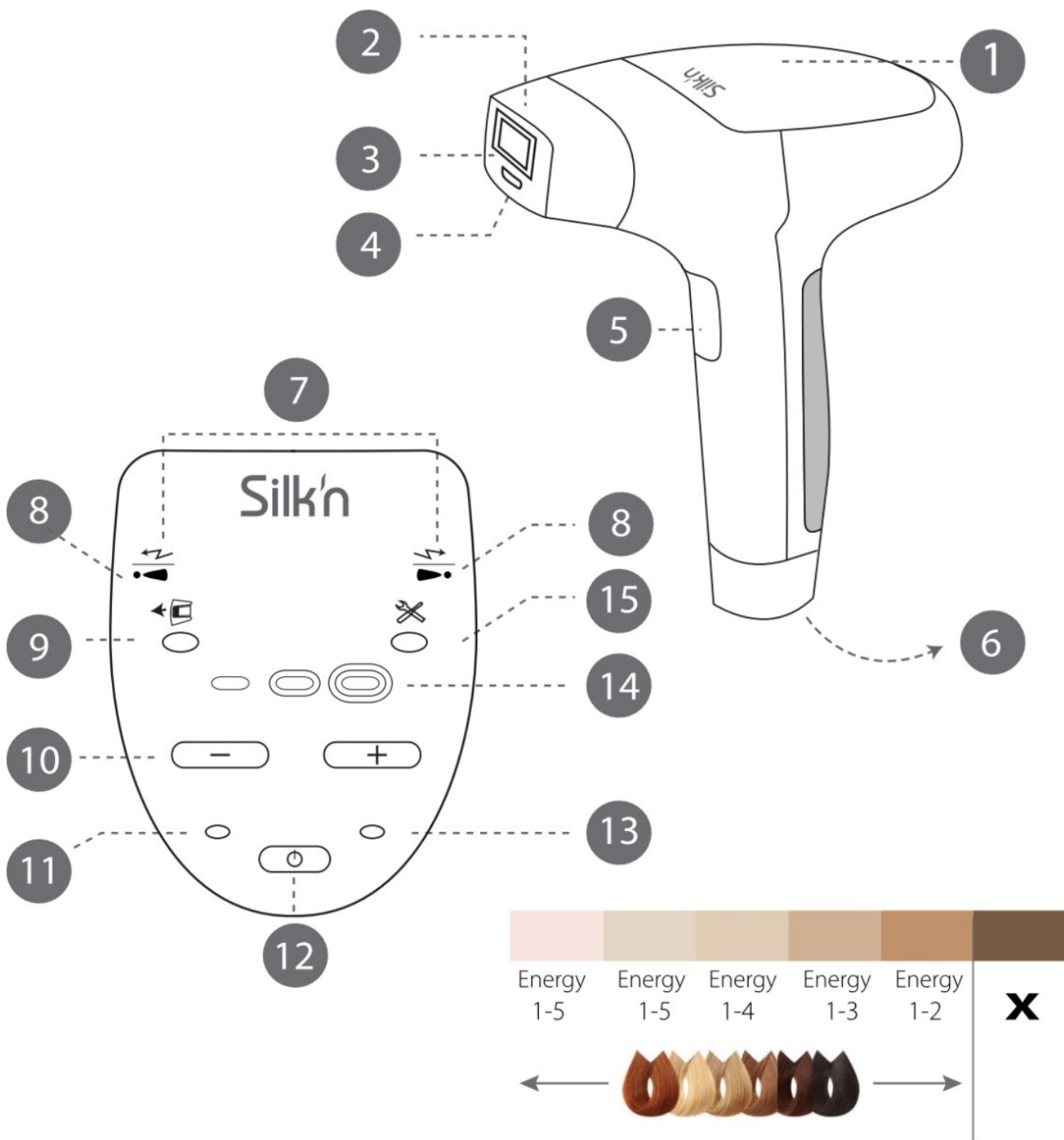

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International,
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko
www.silkn.eu
info@silkn.eu

Obsah

Zákonné oznámení	3
1. Než začnete	5
1.1 Popis zařízení Silk'n SatinGlow	5
1.2 Obsah balení.....	5
1.3 Jednorázová kazeta	5
Části zařízení.....	5
2. Zamýšlené použití Silk'n SatinGlow	6
3. Bezpečnost se Silk'n SatinGlow	6
4. Kontraindikace.....	6
5. SatinGlow nepoužívejte pokud:.....	8
6. SatinGlow přestaňte používat, jestliže dojde k následujícímu:.....	9
7. Možné vedlejší účinky při použití Silk'n SatinGlow	9
8. Dlouhodobé odstraňování chloupků pomocí Silk'n SatinGlow	10
9. První kroky se Silk'n SatinGlow.....	11
9.1. Úroveň energie	13
9.2 Senzor barvy pokožky	13
9.3 Pulzování a klouzání	13
9.4 Co můžete při ošetření Silk'n SatinGlow očekávat?	14
9.5 Po ošetření Silk'n SatinGlow.....	14
10. Údržba Silk'n SatinGlow	15
10.1. Čištění Silk'n SatinGlow	15
10.2. Výměna KAZETY.....	15
11. Řešení problémů	15
11.1. Můj Silk'n SatinGlow se nespouští.....	15
11.2. Při stisknutí PULZNÍHO SPÍNAČE nedojde k vyslání světelného pulzu.	16
12. Zákaznický servis	16
13. Záruka	16
14. Likvidace	16
Likvidace obalu	16
Likvidace produktu	17
15. Technická data.....	17
16. Značky a symboly.....	18

1. Než začnete

Před prvním použitím Silk'n SatinGlow si přečtěte celý Návod k použití. Věnujte pozornost částem věnovaným použití zařízení, obsluze zařízení a postupům po použití. Doporučujeme, abyste se s tímto Návodem k použití seznámili před každým použitím Silk'n SatinGlow. Silk'n SatinGlow je výkonné elektronické zařízení. Jako takové musí být používáno se speciálním přihlédnutím k bezpečnosti. Před použitím si přečtěte všechna varování a bezpečnostní opatření a při použití Silk'n SatinGlow je dodržte.

Silk'n SatinGlow je zařízení pro trvalé odstranění chloupků pomocí využití laseru.

1.1 Popis zařízení Silk'n SatinGlow

Váš Silk'n SatinGlow se skládá z jednotky pro odstraňování chloupků s ovládacím panelem a jednorázovou kazetou.

Na zařízení pro odstraňování chloupků Silk'n SatinGlow naleznete tlačítko impuls. Jednorázová kazeta se nachází na konci zařízení pro odstraňování chloupků.

1.2 Obsah balení

Zařízení na odstraňování chloupků
Adaptér
Návod k použití

1.3 Jednorázová kazeta

JEDNORÁZOVÁ KAZETA Silk'n SatinGlow může vystřelit omezený a přednastavený počet impulsů (bez ohledu na úroveň energie těchto impulsů). Počet impulsů z JEDNORÁZOVÉ KAZETY je uveden na obalu. Pro vaši informaci - Kompletní řada ošetření povrchu celého těla zpravidla vyžaduje 7-10 000 impulsů. Kromě běžné více účelové JEDNORÁZOVÉ KAZETY je rovněž k dispozici JEDNORÁZOVÁ KAZETA určená na péči o obličej. Typ JEDNORÁZOVÉ KAZETY přibalené do vašeho systému a počet obsažených impulsů je uveden na obalu vašeho Silk'n SatinGlow.

Části zařízení

1. Ovládací panel
2. Jednorázová kazeta s lampou
3. Povrch ošetření
4. Senzor barvy pleti
5. Pulzní tlačítko
6. Zásuvka kabelu adaptéru
7. Kontrolka Připraveno
8. Světelné indikátory tónu pleti
9. Kontrolka náhradní kazety
10. Tlačítka pro nastavení úrovně energie
11. Kontrolka zapnutí
12. Tlačítko zapnutí / pohotovostního režimu

13. Kontrolka pohotovostního režimu
14. Kontrolky úrovně energie
15. Kontrolka systému

2. Zamýšlené použití Silk'n SatinGlow

Silk'n SatinGlow lze použít k odstranění nechtěných chloupků.

Ideální tělesné plochy pro použití Silk'n SatinGlow zahrnují obličej, podpaží, oblast třísel, paží a rukou, zadních částí ramen a hrudník.

3. Bezpečnost se Silk'n SatinGlow

Bezpečnost je u Silk'n SatinGlow na prvním místě

Technologie Home Pulsed Light dokáže dosáhnout dlouhodobého odstranění chloupků, díky čemuž dokáže dosáhnout dlouhodobých výsledků při využití zlomku energie v porovnání s ostatními zařízeními na odstraňování chloupků, která využívají laser. Nízké množství energie použité v Silk'n SatinGlow snižuje potenciál působit zranění a komplikace a přispívá k celkové bezpečnosti.

Silk'n SatinGlow chrání vaši pokožku

Technika odstraňování chloupků na bázi světla není vhodná pro přirozeně tmavší odstíny pleti nebo pro opálenou pokožku. Silk'n SatinGlow přichází s vestavěným ČIDLEM KONTROLY POKOŽKY, které je navrženo tak, aby změřilo používaný povrch a umožnilo aplikaci pouze na vhodné odstíny pleti.

Unikátní bezpečnostní funkce vám nedovolí provést ošetření v případě, že je pokožka příliš tmavá nebo opálená. Kromě toho, OŠETŘENÍ 1x3cm² prostřednictvím světelných impulzů dodávaných ZÁSOBNÍKEM na OŠETŘOVANÝ POVRCH. Umožňuje Silk'n SatinGlow chránit vaši pokožku a vyhnout se tak přímému kontaktu mezi OŠETŘOVANÝM POVRCHEM a pokožkou.

Silk'n SatinGlow chrání vaše oči


Silk'n SatinGlow má vestavěnou bezpečnostní funkci, která slouží k ochraně očí. Byl navržen tak, aby světelný impulz nebylo možné vypustit, pokud APLIKÁTOR směřuje do volného prostoru.

Bezpečnostní spínač se aktivuje pouze je-li POVRCH v kontaktu s tkání.

4. Kontraindikace

Silk'n SatinGlow není určen pro všechny. Před použitím si přečtěte informace uvedené v následující části. Pro další informace a personalizované rady navštivte www.silkn.com, www.silkn.eu nebo stránky místního prodejce Silk'n.

Pokud si nejste jisti, zda je Silk'n SatinGlow pro vás bezpečný, zeptejte se svého lékaře nebo dermatologa!

Varování	Možné důsledky	Bezpečnostní tip
<p>SatinGlow nepoužívejte na přirozeně tmavou pokožku.</p> <p>Není bezpečný!</p> <p>Viz tabulka barvy pleti na vnitřním obalu.</p> 	<p>Ošetření tmavé pokožky s pomocí SatinGlow může mít za následek nežádoucí účinky, např. zrudnutí a podráždění kůže.</p>	<p>Unikátní SENZOR BARVY POKOŽKY je zabudován do přístroje SatinGlow , aby změřil typ ošetřované pleti ještě na začátku ošetření a příležitostně i během něj. SENZOR BARVY POKOŽKY zajistí, že pulsy budou vysílány pouze na pokožku vhodného odstínu.</p>
<p>SatinGlow nepoužívejte na opálenou pokožku nebo při současném vystavení slunci (včetně opalovacích strojů). Ošetřené oblasti nevystavujte slunci.</p>	<p>Ošetření pomocí SatinGlow před nebo po vystavení slunci může mít za následek nežádoucí účinky, jako je zčervenání a podráždění pokožky. Opálená pokožka, zejména po opálení se obsahuje velké množství pigmentu melaninu. To se týká všech typů pleti, včetně těch, které se neopalují rychle. Přítomnost velkého množství melaninu pokožku vystavuje vyššímu riziku při použití jiného způsobu odstranění chloupků pomocí laseru.</p>	<p>Před ošetřením pomocí SatinGlow se vyhněte pobytu na slunci! Mezi vystavení se slunci patří nechráněné vystavení se přímému slunečnímu světlu po dobu delší 15 minu nebo nechráněného vystavení rozptýlenému slunečnímu světlu po dobu delší 1 hodiny. Abyste ochránili již ošetřenou pokožku vystavenou slunci se ujistěte, že použijete SPF 30 nebo vyšší, po dobu dvou týdnů po každém odstraňování chloupků.</p>
<p>SatinGlow nikdy nepoužívejte v okolí či blízkosti očí.</p>	<p>I když lze SatinGlow použít pro ošetření chloupků na obličeji, je mu věnovat obzvláštní pozornost, a vyhnout se tak očím.</p>	<p>SatinGlow má vestavěnou bezpečnostní funkci pro ochranu očí. Byla navržena tak, aby světelný impulz nemohl být vyslán v případě, že OŠETŘOVACÍ POVRCH míří do volného prostoru. Bezpečnostní spínač umožňuje ošetření pouze je-li OŠETŘOVACÍ POVRCH v kontaktu s tkání.</p>
<p>Neošetřujte tetování ani permanentní make-up, pihy nebo tmavá místa (např. velké skvrny, mateřská znaménka, jizvy), bradavky, genitálie nebo rty.</p>	<p>Ošetření kterékoli oblasti, která je tmavá nebo má více pigmentu pomocí SatinGlow může mít za následek nežádoucí účinky, např. popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentace).</p>	<p>Oblast zakryjte materiálem, který nevstřebává světlo, např. bílým oblečením nebo obvazem.</p>
<p>Neošetřujte aktivní ekzém, psoriázu, léze, otevřené rány nebo infekce, pokožku s abnormálními podmínkami způsobenými systemickými nebo metabolickými chorobami</p>	<p>Ošetření světlem může způsobit nežádoucí reakce na již citlivých oblastech.</p>	<p>Než použijete SatinGlow , počkejte dokud se zasažené oblasti neuzdraví.</p>

(např. diabetes).		
Ošetřovaná plocha, na které se v minulosti objevila ohniska herpesu.	Ošetření světlem může způsobit nežádoucí reakce na již citlivých oblastech.	V souvislosti s ošetřením SatinGlow se poraďte se svým lékařem.
SatinGlow nepoužívejte, jste-li těhotná nebo pokud kojíte.	Hormonální změny během těhotenství mohou zvýšit citlivost pokožky a riziko nežádoucích účinků.	
Nepoužívejte na oblasti, na kterých chcete růst chloupků zachovat.	Výsledky jsou trvalé	
Všechny části SatinGlow uchovejte mimo vodu! Nepokládejte SatinGlow na místa, kde by mohl spadnout do odpadu nebo do jiné nádoby obsahující vodu.	To může způsobit úraz elektrickým proudem.	Nepoužívejte SatinGlow : během koupání ve vaně nebo pokud zvlhne. Po pádu do vody ho okamžitě odpojte.
Zařízení SatinGlow se nepokoušejte otevírat ani opravovat.	Otevření SatinGlow vás může vystavit nebezpečným elektrickým komponentům a pulzní energii, a může dojít k vážnému fyzickému úrazu a/ nebo trvalému poškození očí. Rovněž může dojít k poškození vašeho zařízení a zneplatnění záruky.	V případě, že dojde k rozbití nebo poškození zařízení a je třeba provést opravu, kontaktujte zákaznický servis Silk'n.

5. SatinGlow nepoužívejte pokud:

JEDNORÁZOVÁ KAZETA je poškozena nebo je-li POVRCH poškozen, zlomen nebo chybí.		Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
Příslušenství není doporučeno Home Skinovations Ltd.		Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
Má poškozený kabel nebo zástrčku.	Napájecí kabel uchovejte mimo dosah zahřátých povrchů.	Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.

Během používání uvidíte nebo ucítíte kouř.		Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
Nefunguje správně nebo se zdá poškozený.		Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
Je-li SENZOR BARVY POKOŽKY zlomený nebo rozbitý.		Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
Vnější obal je rozbitý nebo se rozděluje.		Používání okamžitě zastavte a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.

6. SatinGlow přestaňte používat, jestliže dojde k následujícímu:

Pokud se vám v minulosti utvořily keloidní jizvy.	Před použitím Silk'n SatinGlow se obraťte na svého lékaře.
Pokud trpíte epilepsií.	
Máte-li onemocnění související s přecitlivělostí na světlo, např. porfyrii, lupus, atd.	
Máte-li v anamnéze výskyt rakoviny kůže nebo oblasti s možnými kožními nádory.	
Pokud jste během uplynulých 3 měsíců podstoupili chemoterapii.	
Pokud došlo k jiným podmínkám, které by mohly dle vašeho lékaře způsobit, že ošetření by pro vás bylo nebezpečné.	
Pokud vaše pokožka byla během posledních 6 měsíců ošetřena léky na předpis, obraťte se na svého lékaře.	

7. Možné vedlejší účinky při použití Silk'n SatinGlow

Při použití podle pokynů jsou nežádoucí účinky a komplikace spojené s používáním Silk'n SatinGlow neobvyklé. Každý kosmetický zákrok, včetně těch, které jsou určeny pro domácí použití, však zahrnuje určitou míru rizika. Proto je důležité, abyste pochopili a přijali rizika a komplikace, které mohou nastat u systémů pro odstraňování chloupků pulzním světlem určených pro domácí použití.

Nežádoucí účinky

Menší nepohodlí

I když je domácí epilace zpravidla dobře snášena, většina uživatelů cítí během použití mírné nepohodlí. Pichlavý pocit zpravidla trvá během samotné aplikace nebo několik minut po jejím ukončení. Cokoli nad rámec tohoto menšího nepohodlí je abnormální a znamená to, že buď byste neměli nadále používat SatinGlow, protože nejste schopni tolerovat samotnou depilaci, nebo že energetická úroveň nastavení je příliš vysoká.

Zarudnutí pokožky

Vaše pokožka může přímo po použití SatinGlow nebo do 24 hodin od použití SatinGlow zrudnout. Zrudnutí zpravidla zmizí do 24 hodin. Pokud zrudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů, obraťte se na svého lékaře.

Zvýšená přecitlivělost pokožky

Pokožka v zasažené oblasti je citlivější, proto může dojít k vysušení nebo zarudnutí pokožky.

Pigmentové změny

SatinGlow se zaměřuje na vlasové váčky, zejména pigmentové buňky ve vlasových folikulách. Přesto zde existuje riziko dočasné hyperpigmentace (zvýšené množství pigmentu nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (zesvětlení) na okolní pokožce. Toto nebezpečí změn pigmentace pokožky je vyšší u lidí s tmavším odstínem pleti. Zbarvení pokožky je zpravidla dočasné a k trvalé hyperpigmentaci nebo hypopigmentaci dochází zřídka..

Nadměrné zarudnutí a svědění

Ve vzácných případech může ošetřená pokožka výrazně zrudnout a svědit. Dochází k tomu častěji na citlivých částech těla. Zarudnutí může trvat 2 až 7 dnů a je třeba ho léčit častým přikládáním ledu. jemné čištění je v pořádku, ale je třeba se vyhnout vystavení se slunci.

Odstranění chloupků pomocí laserů nebo zdrojů intenzivního pulzního světla může u některých jedinců způsobit zvýšený růst chloupků. Na základě dosud dostupných informací je toto riziko nejvyšší u žen pocházejících ze Středomoří, Středního východu a jižní Asie, které byly ošetřeny na obličeji a krku.

8. Dlouhodobé odstraňování chloupků pomocí Silk'n SatinGlow

Typický úplný cyklus růstu vlasů může trvat 18-24 měsíců. Během tohoto období je třeba použít Silk'n SatinGlow několikrát, aby tak bylo dosaženo dlouhodobého odstranění chloupků.

Efektivita odstranění chloupků se liší individuálně podle tělesné oblasti, barvy chloupků a způsobu použití Silk'n SatinGlow.

Typický plán pro odstranění chloupků pomocí Silk'n SatinGlow v průběhu cyklu:

Ošetření 1-4 – v rozmezí dvou týdnů

Ošetření 5-7 – v rozmezí čtyř týdnů

Ošetření 8 + – dle potřeby, dokud není dosaženo požadovaných výsledků.

Očekávaný výsledek ošetření při odstranění chloupků

Typ pleti	Barva vlasů	Lehká hustota [J/cm ²]	Anatomická oblast těla ²	Průměrný počet ošetření ¹	Efektivita (% odstranění chloupků/opětovného růstu) ¹
I-IV	Světle hnědá až hnědá	3-4.5	Spodní a horní končetiny	Relace 10-12, přibl. v rozmezí čtyř týdnů.	60% ztráta chloupků
			Paže		50% ztráta chloupků
			Ohanbí		60% ztráta chloupků
			Podpaží		55% ztráta chloupků
I-IV	Hnědá až černá	3-4.5	Spodní a horní končetiny	Relace 8-10, přibl. v rozmezí čtyř týdnů	70% ztráta chloupků
			Paže		60% ztráta chloupků
			Ohanbí		70% ztráta chloupků
			Podpaží		65% ztráta chloupků

1 Individuální reakce závisí na typu chloupků stejně jakož i na biologických faktorech, které mohou ovlivnit růst chloupků. Někteří pacienti mohou reagovat rychleji nebo pomaleji než v průběhu průměrného počtu ošetření.

2 Nelze očekávat dlouhodobou epilaci při jednom či dvojitém ošetření. Průběh odpočinu pro vlasové váčky závisí na části těla.

9. První kroky se Silk'n SatinGlow

1. Z krabičky vyjměte ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ Silk'n SatinGlow a ostatní komponenty.
2. Zkontrolujte, zda je JEDNORÁZOVÁ KAZETA vložena správně a zda hrot aplikátoru není poškozen.
3. Do zásuvky ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ SatinGlow zapojte kabel ADAPTÉRU.
4. ADAPTÉR zapojte do zásuvky. Rozsvítí se KONTROLKA POHOTOVOSTNÍHO STAVU.

Váš SatinGlow je nyní připravený k použití.

Ošetřujte pomocí Silk'n SatinGlow bezpečně a správně!

Vyberte oblasti k ošetření, které nebyly nedávno vystaveny slunci.

5. Pokožka ošetřených oblastí musí být oholená, čistá, suchá a bez zásyvu nebo pudru, antiperspirantů nebo deodorantů. Nenatírejte voskem, ani chloupky nevytrhávejte. Holení je důležitým krokem pro dosažení požadovaných výsledků!
6. Stisknutím TLAČÍTKA ZAPNOUT/POH.REŽIM zařízení zapněte. Rozsvítí se KONTROLKA (oranžová) a spustí se zvuk ventilátoru (podobný zvuku fénu).
7. Zhruba 3,5 sekund po stisknutí TLAČÍTKA ZAP./POH.REŽIM se zapne KONTROLKA PŘIPRAVENOSTI (zelená). Zařízení je poté připraveno k vyslání prvního impulsu při nejnižší úrovni.
8. Je-li to vaše první ošetření - Zvolte si libovolnou úroveň energie. SatinGlow nabízí 5 úrovní energie od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší). Pro výběr té správné úrovně otestujte každou oblast ošetření samostatně.
9. Nastavte úroveň energie. Má-li být úroveň vyšší než nejnižší, stiskněte TLAČÍTKA NASTAVENÍ ÚROVNĚ ENERGIE, použijte k tomu “-“ nebo “+” - dokud není dosaženo požadované úrovně energie. (Podrobnosti viz kapitola “Úroveň energie” v tomto návodu).
10. POVRCH PRO OŠETŘENÍ použijte na pokožku, ujistěte se, že je rovnoměrná a hladká. Jakmile je POVRCH PRO OŠETŘENÍ v plném kontaktu s pokožkou, začne blikat KONTROLKA PŘIPRAVENO K POUŽITÍ. Čeština
11. Stiskněte TLAČÍTKO IMPULZ. Zařízení nejprve stanoví barvu vaší pleti. Pokud je vaše barva dostatečně světlá pro bezpečnou aplikaci, zařízení se rozbliká a KONTROLKA PŘIPRAVENO K POUŽITÍ zhasne.

Uvidíte jasný záblesk světla a současně s tím zaslechnete pípnutí, což je běžný zvuk zařízení.

Ucítíte mírné teplo a štípnutí. SatinGlow okamžitě dobije další impuls. Po uplynutí 3,5 sekund se KONTROLKA PŘIPRAVENO K POUŽITÍ znovu rozsvítí.
12. Z ošetřené pokožky sejměte POVRCH PRO OŠETŘENÍ.
13. POVRCH PRO OŠETŘENÍ přesuňte na jinou část pokožky. Pro určení správné pozice pro další impuls využijte otlak na pokožce, vyhněte se překrývání mezi oblastmi impulsu.

Impulzy SatinGlow musí být vyslány v řadách, počínaje jedním koncem řady, konče druhým koncem a zpracovány postupně směrem ke konci. Tato technika umožní lepší kontrolu nad pokrytím pokožky a pomůže vám vyhnout se opakovanému ošetření překrývajících se oblastí. Při použití na pokožce je POVRCH PRO OŠETŘENÍ SatinGlow určen k vytváření dočasných otlaků na ošetřené oblasti. Tyto viditelné značky lez použít pro správné umístění zařízení při vyslání dalšího impulsu.

Snažte se vyhnout překrývání impulsů!

14. Proces opakujte dokud nebude oblast určená k ošetření pokrytá.

Varování: Neošetřujte stejnou oblast více než jednou!

Ošetření stejné oblasti pokožky zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Pokud se na pokožce objevují puchýřky nebo popáleniny, OKAMŽITĚ ZAŘÍZENÍ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT!

9.1. Úroveň energie

Energetická hladina určuje intenzitu světelného impulsu Silk'n SatinGlow dodaného na vaši pokožku, od nejnižší (-) po nejvyšší (+). Jak se úroveň energie zvyšuje, dochází k vyššímu odstraňování chloupků, stejně jakož i k zvýšenému výskytu možných vedlejších účinků a komplikací.

Silk'n SatinGlow nabízí 5 energetických hladin od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší), představovaných 3 kontrolkami energetické hladiny:

- Úroveň 1 (nejnižší) - levá kontrolka, trvale rozsvícená
- Úroveň 2 - levá kontrolka je rozsvícená a prostřední kontrolka bliká.
- Úroveň 3 - levá i prostřední kontrolka jsou trvale rozsvícené.
- Úroveň 4 - levá a prostřední kontrolka jsou rozsvícené a pravá kontrolka bliká.
- Úroveň 5 (nejvyšší) - všechny 3 kontrolky jsou trvale rozsvícené.

Při každé zapnutí Silk'n SatinGlow se energetická hladina automaticky restartuje na nejnižší úroveň. Rozsvítí se pouze KONTROLKA ENERGETICKÉ ÚROVNĚ.

Pro nastavení energetické hladiny stiskněte TLAČÍTKA NASTAVENÍ ENERGETICKÉ HALDINY “-“ nebo “+“ a energetickou hladinu zvýšte nebo snižte.

9.2 Senzor barvy pokožky

Odstranění chloupků na pokožce tmavšího tónu může mít za následek nežádoucí účinky, např. popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentace).

Aby se předešlo takovému zneužití, detekuje unikátní SENZOR BARVY POKOŽKY na Silk'n SatinGlow měří tón ošetřované pokožky a to na začátku každé relace a příležitostně i během ošetření. Pokud SENZOR BARVY POKOŽKY zjistí, že je tón pokožky pro aplikaci Silk'n SatinGlow, zařízení vysílání impulsů automaticky zastaví.

Pokud zjistíte, že po dobu 3 sekund nevyšel žádný impuls a že KONTROLA UPOZORNĚNÍ NA BARVU POKOŽKY bliká, znamená to, že tón vaší pokožky, změřený SENZOREM BARVY POKOŽKY, je pro bezpečnou aplikaci příliš tmavý. Spotřebič zkuste použít na jinou část těla nebo kontaktujte podporu Silk'n SatinGlow .

9.3 Pulzování a klouzání

Pulzování je nejlepší technikou pro práci na vyšších energetických úrovních.

- Přitlačte hlavici na pokožku. Pracujte v řadách (buď napříč, nebo dolů, jak je znázorněno na obrázku). Začněte na jednom konci každého řádku a postupujte na druhý konec.
- Hlavice vytváří dočasné tlakové stopy na ošetřované ploše, takže vidíte ošetřené oblasti.
- Po každém pulzu posuňte hlavici na další místo. Pokračujte v této pulzující akci pro oblast, kterou ošetřujete.
- Při používání zařízení se vyhněte mezerám nebo přesahům.

Klouzání je nejlepší technikou pro práci při nižších úrovních energie.

- Pevně přitlačte hlavici na pokožku a pomalu klouzejte po pokožce (buď napříč nebo dolů, jak je znázorněno na obrázku). Dbejte na to, aby se hlavice vždy dotýkala vaší pokožky.

- Při nižších úrovních energie trvá nabíjení zařízení mezi impulsy pouze 1-3,5 sekundy. Tím se vytvoří nepřetržitá sekvence záblesků.
- Klouzejte rychlostí, abyste se vyhnuli mezerám nebo přesahům.

Neošetřujte stejnou oblast pokožky více než jednou za relaci odstraňování chloupků. Okamžitě přestaňte používat, pokud máte nepohodlí.

9.4 Co můžete při ošetření Silk'n SatinGlow očekávat?

Pro mnoho lidí může být použití Silk'n SatinGlow jejich první zkušeností se zařízením pro odstraňování chloupků pomocí laseru. Silk'n SatinGlow se používá snadno a odstranění chloupků se provádí rychle. Během použití Silk'n SatinGlow je běžné zažít a cítit:

- **Hluk ventilátoru** - ventilátor v Silk'n SatinGlow vytváří hluk podobný fénu. To je normální.
- **Zvuk při každém impulsu** – Při aktivaci impulsu HPL je běžné, že zaslechnete mírné pípnutí - ve stejný okamžik, kdy dojde k záblesku.
- **Jemný tlak POVRCHU PRO OŠETŘENÍ** – To je nezbytné a nutné pro umístění sousedících světelných impulsů a jede o bezpečnostní funkci Silk'n SatinGlow .
- **Pocit tepla a pálení** – Během každého světelného impulsu je normální, že ze zdroje světla cítíte teplo a pálení.
- **Mírné zarudnutí nebo zrůžovění** - během a po použití SatinGlow se občas zobrazí velmi mírná, narůžovělá barva pokožky. Zpravidla si toho můžete povšimnout v okolí chloupků.

Pokud spatříte zarudnutí kůže, puchýře, přestane zařízení Silk'n SatinGlow okamžitě používat.

9.5 Po ošetření Silk'n SatinGlow

- Po dokončení ošetření Silk'n SatinGlow zařízení Silk'n SatinGlow vypněte stisknutím TLAČÍTKA ZAP. VYP. (Nezapomeňte poslední použitou úroveň energie, neboť při opětovném zapnutí Silk'n SatinGlow nebude tato úroveň obnovena.)
- ADAPTÉR odpojte ze zásuvky.
- Po každém odstranění chloupků se doporučuje, abyste své zařízení vyčistili, zejména POVRCH PRO OŠETŘENÍ (Viz: "Čištění Silk'n SatinGlow").
- Po čištění se doporučuje uložit vaše zařízení Silk'n SatinGlow do původního obalu a uchovat ho mimo dosah vody.

Péče o pokožku po odstranění chloupků:

Ošetřené oblasti nevystavujte slunci. Ujistěte se, že na ošetřenou pokožku používáte krémy na opalování, a to po celé období odstraňování chloupků a nejméně 2 týdny po ošetření pomocí Silk'n SatinGlow.

10. Údržba Silk'n SatinGlow

10.1. Čištění Silk'n SatinGlow

- Po každém odstranění chloupků se doporučuje, abyste své zařízení Silk'n SatinGlow vyčistili, zejména POVRCH PRO OŠETŘENÍ.
- Před čištěním odpojte Silk'n SatinGlow ze sítě. Použijte suchý, čistý hadřík a speciální čisticí prostředek pro elektronická zařízení a povrch Silk'n SatinGlow jemně otřeta, zejména POVRCH PRO OŠETŘENÍ.

Silk'n SatinGlow ani žádnou z jeho částí nikdy neponořujte do vody!

10.2. Výměna KAZETY

JEDNORÁZOVÁ KAZETA Silk'n SatinGlow může vystřelit přednastavený a omezený počet světelných impulzů. Intenzita impulzů je určena v souladu s nastavení úrovně energie. Během využitelné životnosti KAZETY nedojde k poklesu energie.

- Když v JEDNORÁZOVÉ KAZETĚ zbývá pouze 100 světelných impulzů, začne blikat KONTROLKA PRO VÝMĚNU KAZETY na OVLÁDACÍM PANELU, která značí, že je třeba JEDNORÁZOVOU KAZETU VYMĚNIT.
- Jak se počet světelných impulzů v JEDNORÁZOVÉ KAZETĚ dále snižuje, KONTROLKA PRO VÝMĚNU KAZETY bliká rychleji.
- Jakmile jsou všechny impulzy z JEDNORÁZOVÉ KAZETY využity, zůstane KONTROLKA PRO VÝMĚNU KAZETY trvale zapnutá a označuje, že nelze vyslat žádné další impulzy.
- Aby bylo možné pokračovat v odstraňování chloupků, je třeba vyměnit JEDNORÁZOVOU KAZETU..

Výměna JEDNORÁZOVÉ KAZETY:

1. Stiskněte TLAČÍTKO ZAPNOUT/VYPNOUT a Silk'n SatinGlow vypněte.
2. Ze zásuvky odpojte napájecí kabel.
3. Uchopte JEDNORÁZOVOU KAZETU po obou stranách, vytáhněte ji a vyhodte do běžného odpadu.
4. Rozbalte novou JEDNORÁZOVOU KAZETU.
5. Novou JEDNORÁZOVOU KAZETU jemně vtlačte na místo.

Poznámka! Po výměně jednorázové kazety za novou vždy nastavte úroveň energie na nejnižší. Úroveň energie poté zvýšte pouze pokud během nebo po ošetření nepocítíte žádné nepohodlí.

11. Řešení problémů

11.1. Můj Silk'n SatinGlow se nespouští

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojený do spotřebiče Silk'n SatinGlow.

- Ujistěte se, zda je napájecí kabel zapojený do elektrické zásuvky.

11.2. Při stisknutí PULZNÍHO SPÍNAČE nedojde k vyslání světelného pulzu.

Ujistěte se, zda KONTROLKA bliká a zda máte dobrý kontakt s pokožkou a že POVRCH PRO OŠETŘENÍ je jemně a pevně přitisknut na pokožku. Pro vlastní bezpečnost PULZNÍ TLAČÍTKO aktivuje impulz pouze pokud je POVRCH PRO OŠETŘENÍ pevně přitisknut k pokožce.

- Zkontrolujte KONTROLKU INDIKÁTORU TÓNU POKOŽKY - pokud bliká, znamená to, že je vaše pokožka, která byla změřena SENZOREM BARVY POKOŽKY, pro bezpečnou aplikaci příliš tmavá. Zařízení použijte na jinou část těla nebo kontaktujte zákaznickou podporu Silk'n SatinGlow .
- Zkontrolujte KONTROLU PRO VÝMĚNU KAZETY. Pokud svítí, Silk'n SatinGlow odpojte a vyměňte za JEDNORÁZOVOU KAZETU.
- Ujistěte se, zda je KONTROLKA PŘIPRAVENOSTI zapnutá. Pokud se během 10 sekund KONTROLKA nerozsvítí, Silk'n SatinGlow vypněte a znovu zapněte stisknutím TLAČÍTKA ZAP./VYP. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní centrum zákaznické podpory Silk'n SatinGlow .
- Zkontrolujte KONTROLKU SYSTÉMOVÉHO VAROVÁNÍ. Je-li kontrolka zapnutá, Silk'n SatinGlow vypněte a znovu zapněte stisknutím TLAČÍTKA ZAP./VYP. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní centrum zákaznické podpory Silk'n SatinGlow .
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní centrum zákaznické podpory Silk'n SatinGlow .

Otevřením Silk'n SatinGlow se můžete vystavit nebezpečným elektrickým komponentům a pulzní světelné energii, což může způsobit vážné úrazy a/nebo trvalé poškození zraku.

Budete-li se snažit otevřít Silk'n SatinGlow , zařízení se může poškodit a dojde k propadnutí vaší záruky. Máte-li rozbité nebo poškozené zařízení, které je třeba opravit, kontaktujte zákaznický servis Silk'n SatinGlow .

12. Zákaznický servis

Další informace najdete na našich webových stránkách www.silkn.eu (Evropa) nebo www.silkn.com (USA a Kanada). Kontaktujte zákaznický servis Silk'n a nahláste neočekávané operace nebo události nebo jakýkoli jiný problém s vaším zařízením.

13. Záruka

Viz záruční list.

14. Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace produktu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud produkt již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.





* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

15. Technická data

Specifikace, Velikost místa	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm ²]
Rychlost	1 impulze každé 3,5 sekundy. 1,1 cm ² /sek.
Technologie	Home Pulsed Light TM
Max. úroveň energie	Max. 4 J/cm ²
Vlnová délka	475-1200nm
Doba dobíjení/Zdroj napájení	Plynulý provoz
Požadavky na napájení	100-240VAC, 0.9A
Čas pro ošetření spodních končetin	30 minut
Obsluha a bezpečnost	Nové čidlo zajistí použití pouze na kůži vhodného stavu.
Velikost balení	22 cm x 22 cm x 13,5 cm
Hmotnost systému	0.35kg
Teplota	Provoz 10 až 40°C

	Skladování	-40 až +70°C
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75%rH
	Skladování	10 až 90%rH
Atmosférický tlak	Provoz	700 až 1060hPa
	Skladování	500 až 1060hPa

16. Značky a symboly

	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnic EU.
	Třída II. Adaptér je chráněn před úrazem elektrickým proudem pomocí dvojitě izolace.
IP30	IP30 Zařízení je chráněno proti vniknutí předmětů větších než 2,5 mm, například prstů, aby bylo chráněno před úrazem elektrickým proudem.
	Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
	Nevhazujte do domácího odpadu. Likvidujte v souladu s právními předpisy vaší země a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnicí WEEE.