

Silk'n[®]
Beautiful Technology

SONICSMILE



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.



Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International,
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko
www.silkn.eu
info@silkn.com

Obsah

Zákonné oznámení	2
Obsah balení / části zařízení.....	5
Obecná informace	6
Čtení a uložení návodu k použití	6
Vysvětlení symbolů.....	6
Bezpečnost	8
Správné použití.....	8
Bezpečnostní instrukce.....	8
První použití.....	11
Základní čištění	11
Nabíjení přístroje SonicSmile	11
Použití.....	12
Čištění zubů	12
Výběr módu.....	12
Čištění.....	13
Uskladnění	13
Odstraňování problémů	14
Technická data.....	15
Prohlášení o shodě	15
Likvidace	16
Likvidace obalu	16
Likvidace SonicSmile.....	16
Informace o záruce.....	17
Služby zákazníkům.....	17

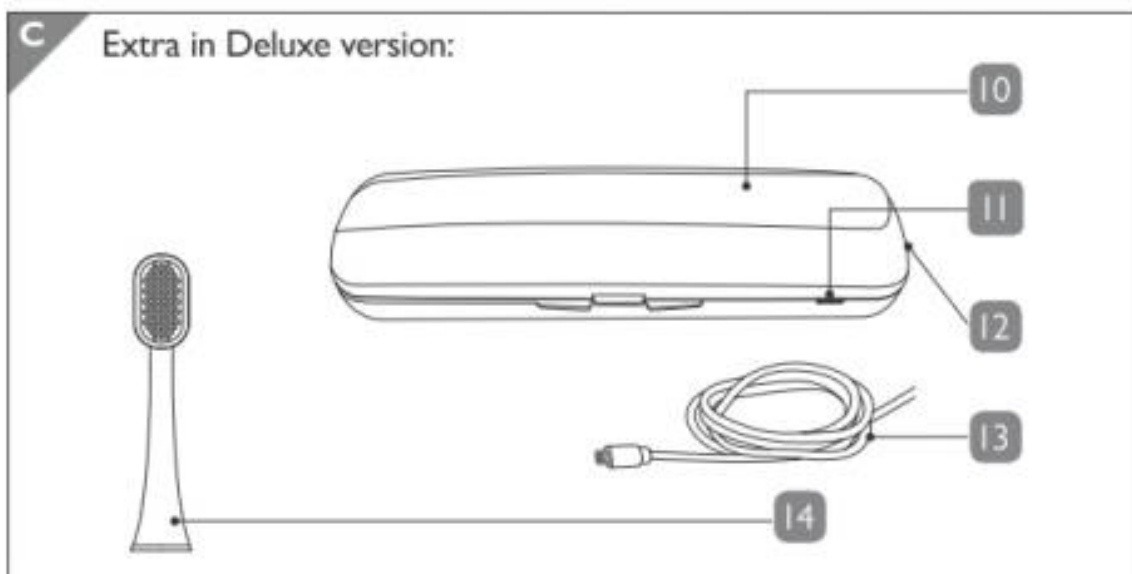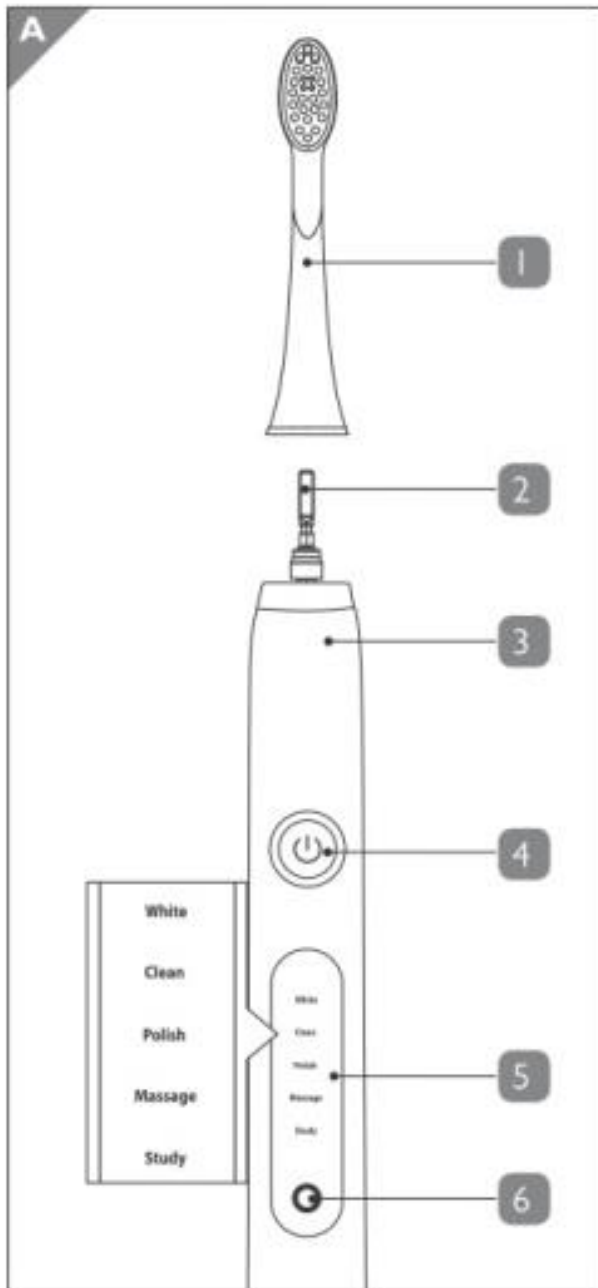

Obsah balení / části zařízení

1. Kartáčová hlava, 2 ×
2. Bod připevnění štětce
3. Rukojeť
4. Multifunkční tlačítko
5. LED indikátor režimu
6. Indikátor úrovně nabití
7. Hlavní kabel s portem USB
8. Nabíjecí stanice
9. USB adaptér
10. Cestovní nabíjecí pouzdro (pouze Deluxe)
11. Indikátor úrovně nabití (pouze Deluxe)
12. Micro USB port (pouze Deluxe)
13. Micro USB kabel (pouze Deluxe)
14. Čistič jazyku, 2x (pouze Deluxe)

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka se vztahuje k masážnímu přístroji SonicSmile (dále jen „SonicSmile“). Obsahuje důležité informace o spuštění a manipulaci.

Před použitím SonicSmile si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny. Nedodržení této uživatelské příručky může mít za následek vážné zranění nebo poškození přístroje SonicSmile.

Uživatelská příručka vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. Pokud jste v zahraničí, musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi.

Návod k použití uchovávejte pro budoucí použití. Pokud předáváte produkt SonicSmile třetím stranám, nezapomeňte tento návod k použití přiložit.

Tuto uživatelskou příručku si můžete vyžádat také ve formátu PDF na našich webových stránkách www.silkn.eu.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly a signální slova se používají v tomto návodu k použití, na přístroji SonicSmile nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí s vyšším stupněm rizika, které může vést k úmrtí nebo vážnému zranění, pokud mu není zabráněno.



POZOR!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek menší nebo střední zranění.

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento symbol vám poskytuje užitečné doplňující informace o použití.



Prohlášení o shodě (viz kapitola „Prohlášení o shodě“): Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné předpisy Společenství pro Evropský hospodářský prostor.

Bezpečnost

Správné použití

SonicSmile je určen pouze k vyhlazení, zpevnění a zlepšení pružnosti pokožky teplou a studenou masáží. SonicSmile je vhodný pro všechny typy pleti. Těhotné osoby a osoby s popáleninami, akné, alergiemi nebo jinak podrážděnou kůží nesmějí přípravek SonicSmile používat.

SonicSmile je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely, např. pro kosmetické salony. Nevystavujte SonicSmile povětrnostním podmínkám a nepoužívejte je ve vlhkých prostorách. SonicSmile není dětská hračka.

Používejte SonicSmile pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku.

InnoEssentials nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

- SonicSmile připojujte pouze tehdy, pokud síťové napětí zásuvky odpovídá specifikaci typového štítku.
- Hlavní kabel nabíjecí stanice nelze vyměnit. V případě poškození musí být nabíjecí stanice zlikvidována.
- Přístroj SonicSmile připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky, abyste jej mohli v případě poruchy rychle odpojit od sítě.
- Nepoužívejte přístroj či základnu SonicSmile, pokud jsou viditelně poškozeny nebo je-li vadný kabel USB nebo síťový adaptér USB.
- Neotevírejte kryt; místo toho nechte provést opravy kvalifikovaným odborníkem. obraťte se na odborný servis nebo na zákaznický servis. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávným připojením přístroje nebo nesprávným provozem se ruší nároky z odpovědnosti a záruky.
- Pro opravy mohou být použity pouze díly, které splňují původní informace o přístroji. Elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí, jsou součástí přístroje SonicSmile.
- Nabíjecí stanice nebo nabíjecí pouzdro nesmí být provozovány s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládním.
- Nabíjecí kabel USB ani síťový adaptér USB neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru USB vlhkými rukama.

- Nikdy nevytahujte SonicSmile ze zásuvky pomocí nabíjecího kabelu USB; místo toho vždy postupujte tak, že uchopíte síťový adaptér USB.
- Udržujte SonicSmile, síťový adaptér USB a nabíjecí kabel USB mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Nezakrývejte nabíjecí kabel a nepokládejte jej na ostré hrany.
- Používejte SonicSmile pouze v interiéru.
- Nikdy neskladujte SonicSmile tak, že hrozí nebezpečí, že spadne do vany nebo umyvadla.
- Nikdy nesahejte na elektrické zařízení připojené k síti, pokud spadlo do vody. V takovém případě okamžitě odpojte síťový adaptér USB ze zásuvky.
- Zubní kartáček nabíjejte pouze s přiloženou nabíjecí stanicí nebo nabíjecím pouzdem. Používejte pouze dodaný USB adaptér a dodaný micro USB kabel.
- Dbejte na to, aby děti do nabíjecí stanice, nabíjecího pouzdra ani do kartáčku nevkládaly žádné předměty.
- Pokud nepoužíváte nabíjecí stanicí nebo nabíjecí pouzdro, odpojte USB po procesu nabíjení, stejně tak je odpojte před čištěním, uložením nebo v případě poruchy.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí chemického popálení!

Uniklá tekutina z akumulátoru může způsobit zranění, pokud se dostane do styku s pokožkou nebo jinými částmi těla.

- Pokud tekutina z akumulátoru přístroje SonicSmile unikla, vezměte si ochranné rukavice a zajistěte, aby se tekutina z akumulátoru nedostala do styku s pokožkou, očima nebo sliznicemi.
- V případě kontaktu s kyselinou z akumulátoru ihned opláchněte příslušné oblasti velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí výbuchu a požáru!

Nesprávná manipulace s akumulátorem představuje zvýšené riziko výbuchu a požáru.

- Nikdy nezkratujte akumulátory.
- Nikdy nedemontujte akumulátory.
- Nikdy nevhazujte akumulátory do ohně.
- Nikdy nevystavujte dobíjecí baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Dobíjecí baterie v žádném případě neotevírejte.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí pro děti a osoby s tělesnými, smyslovými nebo duševními poruchami (např. osoby se zdravotním postižením, starší osoby se sníženými tělesnými a duševními schopnostmi) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Tento zubní kartáček mohou používat děti a osoby s tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, které jsou pod dohledem nebo byli poučeni, jak bezpečně používat zubní kartáček a rozuměli rizikům spojeným s jeho obsluhou. Děti se nesmí hrát s kartáčkem na zuby.
- Čištění a údržba uživatele nesmí být prováděna dětmi.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Během používání nenechávejte kartáček bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s malými částmi. Uchovávejte mimo dosah dětí, protože při požití hrozí nebezpečí udušení.



POZOR!

Nebezpečí poranění!

Nesprávné zacházení s produktem SonicSmile může mít za následek zranění.

- Hlavní kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Opotřebované nebo poškozené hlavy kartáčů ihned vyměňte, abyste zabránili poranění úst a oblasti zubů.

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s produktem SonicSmile může mít za následek poškození zařízení SonicSmile.

- Rukojeť nesmí spadnout. Pokud k tomu dojde, nepoužívejte zubní kartáček. Nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisu.
- Pokud chcete vyměnit kartáčovou hlavu, vypněte kartáček.
- Nabíjecí stanici nebo nabíjecí pouzdro umístěte na snadno přístupný, rovný a suchý povrch.
- Ujistěte se, že hlavní kabel, nabíjecí stanice nebo pouzdro pro nabíjení a zubní kartáček nepřichází do styku s horkými částmi.

- Nepoužívejte zubní kartáček, pokud jeho plastové části vykazují praskliny nebo praskliny nebo jsou zdeformované.

První použití

Kontrola vzhledu SonicSmile a obsahu balení

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Pokud nejste opatrní při otevírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete přístroj SonicSmile rychle poškodit.

- Při otevírání obalu buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte SonicSmile z obalu.
2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz obr. A, B a při verzi Deluxe také C).
3. Zkontrolujte, zda SonicSmile nebo jednotlivé části nevykazují poškození. V takovém případě nepoužívejte přístroj SonicSmile. Obráťte se na místní servisní středisko Silk'n (viz kapitola „Informace o záruce“).

Základní čištění

1. Odstraňte obalový materiál a všechny ochranné fólie.
2. Před prvním použitím vyčistěte všechny části kartáčku, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Nabíjení přístroje SonicSmile

1. Hlavní kabel s portem USB 7 vložte do přiloženého USB adaptéru 9.
2. Umístěte kartáček na nabíjecí stanici 8. Zubní kartáček se bude nyní indukčně nabíjet.
3. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení 6 červeně.
4. Zubní kartáček je plně nabitý (z 0% do 100%) po cca. 16 hodinách, indikátor stavu nabití zhasne.

Po úplném nabití bude akumulátor možné používat až po 3 týdny.

Použití



POZOR!

Nebezpečí poranění!

Nesprávné zacházení s kartáčkem může mít za následek zranění.

- Při čištění kartáčkem nepoužívejte příliš velký tlak na zuby.
- Při několika prvních použití mohou Vaše dásně krvácet. Pokud krvácení dásní trvá déle než 14 dnů, obraťte se prosím na zubního lékaře.



- Čistěte zuby co nejbližší k dásním.
- Čistěte zuby malými kruhovými pohyby.
- Vyčistěte až do prostoru mezi zuby.

Čištění zubů

1. K rukojeti 3 připevněte hlavu 1 kartáčku tak, aby bod připevnění kartáče 2 rukojeti zasahoval do hlavy kartáče.
Hlava kartáče musí slyšitelně a viditelně zapadnout.
Hlavička kartáče musí směřovat k multifunkčnímu tlačítku 4.
2. Držte hlavu kartáčku na chvíli pod tekoucí vodou, aby se navlhčila.
3. Na hlavu kartáčku naneste zubní pastu v množství o velikosti hrachu.
4. Opatrně posuňte hlavu kartáčku nahoru k zubům.
5. Vyberte požadovaný režim stisknutím multifunkčního tlačítka (viz kapitola „Výběr režimu“).
Pro vypnutí zubního kartáčku stiskněte tlačítko déle než 3 sekundy.
6. Čistěte horní a dolní část zubů, stejně jako vnější a vnitřní část zubů po dobu 30 sekund, aniž byste museli vyvíjet tlak.



Po každých 30 sekundách se zubní kartáček zastaví na 0,5 sekundy a po 2 minutách se automaticky vypne.

7. Po každém použití vyčistěte kartáček tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Výběr módu

LED indikátor režimu 5 zobrazuje aktuální režim.

Funkce	Stav	Popis
White	Stisk 1x	Pro bílé zuby a méně skvrn.
Clean	Stisk 2x	Pro odstranění plaku, ideální pro citlivé zuby a dásně.

Polish	Stisk 3x	Pro leštění zubů.
Masage	Stisk 4x	Pro jemnou masáž vašich dásní a zlepšení zdraví dásní.
Study	Stisk 5x	Nastavení pro zvyknutí si na kartáček na zuby. Během prvních 12 aplikací se intenzita vibrací postupně zvyšuje ze slabých na silné.

Čištění

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s kartáčkem může vést k poškození produktu.

- V žádném případě se nepokoušejte čistit zubní kartáček, nabíjecí stanici ani nabíjecí pouzdro v myčce. Tyto části by byly zničeny.
 - Nabíjecí stanici ani pouzdro na nabíjení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
1. Po každém použití držte hlavu kartáče 1 pod tekoucí vodou a zapněte kartáček.
 2. Vyčistěte a omyjte veškerou zbytkovou zubní pastu z hlavy kartáčku a rukojeti 3 a vypněte kartáček.
 3. Vytáhněte hlavu kartáčku z rukojeti.
 4. Vyčistěte hlavu kartáčku pod tekoucí vodou.
 5. Vysušte hlavu kartáčku a rukojeť. Nabíjecí základnu a / nebo pouzdro na čištění čistěte měkkým vlhkým hadříkem a otřete do sucha.
 6. Kartáčovou hlavu vyměňte nejpozději každé 3 měsíce.



Jakmile hlava kartáčku změní svoji barvu, vyměňte ji.

Uskladnění

Všechny části musí být před uskladněním zcela suché.

- Kartáček vždy skladujte na suchém místě.
- Pro skladování používejte originální obal, podobnou krabici nebo cestovní kufřík.
- Zubní kartáček skladujte tak, aby byl bezpečně zajištěn a zajištěn před dětmi.

Odstraňování problémů

V případě chyby zkontrolujte, zda problém vyřeší následující kroky:

Problém	Možné příčiny	Řešení
Zubní kartáček se nenabíjí.	Nabíjecí stanice je vadná nebo poškozená.	Vyzkoušejte jiné zásuvky nebo konektory USB a kartáček na zuby nabíjejte minimálně 16 hodin.
	Konektor USB je vadný.	Vyzkoušejte jiné zásuvky nebo konektory USB a kartáček na zuby nabíjejte minimálně 16 hodin.
	Nabíjecí stanice je vadná nebo poškozená.	Nabíjecí stanici vyměňte v záruční době.
Zubní kartáček pracuje pouze s malým množstvím vibrací.	Nabíjecí baterie je vybitá.	Zubní kartáček nabíjejte nejméně 16 hodin.
Zubní kartáček neběží po dobu 2 minut.	Nabíjecí baterie je vybitá.	Zubní kartáček nabíjejte minimálně 16 hodin a ujistěte se, že je kartáček správně položen v nabíjecí stanici.

Technická data

Model: SG-986

Nabíjecí stanice

Síťové napětí: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 1,5 W

Třída ochrany: III

Kód IP: IPX7

Rozměry (L × Š × V): 6,2 × 6,2 × 4,3 cm

Kartáček

Nabíjecí baterie: 3,7 V, 700 mAh

Provozní doba: 42 krát / plné nabití

Časovač: 0,5 sekundová pauza po cca. 30 sekund, deaktivace po 2 minutách

Rozměry (L × Š × V): 2,6 × 2,7 × 25,4 cm

Adaptér

Číslo modelu: ZD5C050060EUDU

Vstup: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,2A

Výkon: 5,0V 600mA

Třída ochrany: II

Prohlášení o shodě



EU prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace SonicSmile

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud SonicSmile již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 | 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu