


Silk'n[®]
Beautiful Technology



BRIGHT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

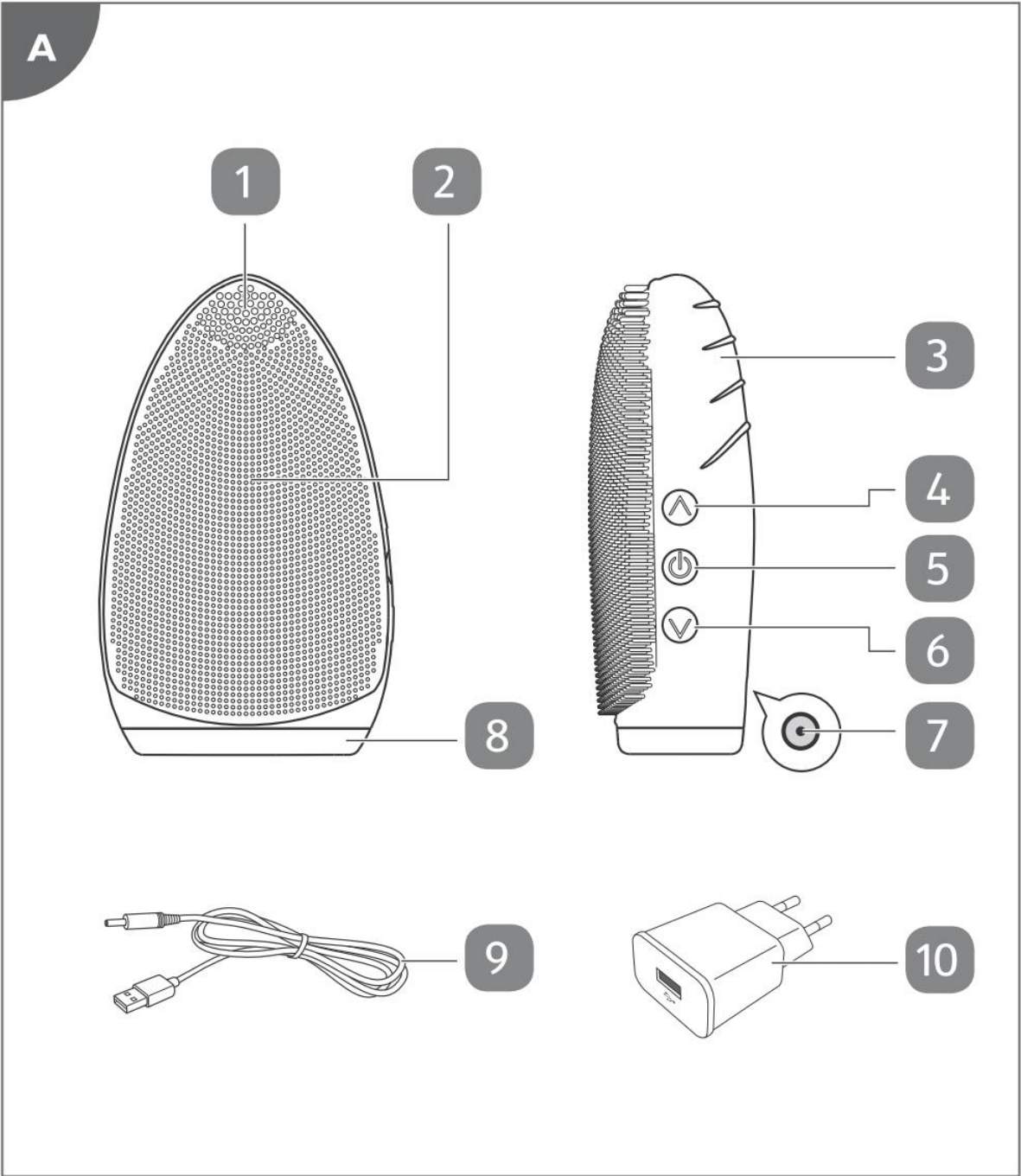

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.

Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Obsah

Zákonné oznámení	3
1. Obsah balení/části zařízení.....	5
2. Obecné informace	5
2.1 Čtení a uložení uživatelské příručky	5
2.2 Vysvětlení symbolů.....	5
3. Bezpečnost	6
3.1 Správné používání	6
3.2 Bezpečnostní pokyny.....	6
4. Kontrola kartáčku na obličej a obsahu	8
5. Nabíjení.....	9
6. Provoz	9
6.1 Použití různých oblastí obličejového kartáče	9
6.2 Provozní režimy a nastavení rychlosti	10
6.3 Zapnutí/vypnutí a výběr provozního režimu	10
6.4 Výběr nastavení rychlosti	10
6.5 Spuštění a ukončení ošetření	10
7. Kroky ošetření.....	10
8. Čištění	11
9. Uskladnění.....	11
10. Odstraňování problémů	11
11. Technická data.....	12
12. Likvidace	12
12.1 Likvidace obalu	12
12.2 Likvidace produktu	12
13. Informace o záruce.....	13
14. Služby zákazníkům.....	13

1. Obsah balení/části zařízení

1. Čisticí plocha (silnější kolíky)
2. Čisticí plocha (tenčí kolíky)
3. Masážní plocha (hřebeny)
4. Tlačítko pro zvětšení
5. Ovládací tlačítko
6. Tlačítko pro snížení
7. Nabíjecí port
8. LED světlo
9. Kabel USB
10. USB síťový adaptér

2. Obecné informace

2.1 Čtení a uložení uživatelské příručky



Tento uživatelský manuál je přiložen k tomuto Bright - kartáčku na čištění obličeje (dále jen "kartáček na obličej") a obsahuje důležité informace o nastavení a zacházení.

Před použitím kartáčku na obličej si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny.

Jejich nedodržení může mít za následek zranění osob nebo poškození kartáčku na obličej. Uživatelská příručka vychází z norem a platných v Evropské unii. V zahraničí je nutné dodržovat také směrnice a zákony platné v dané zemi. Uchovávejte uživatelskou příručku

návod k použití pro další použití. Nezapomeňte přiložit tuto uživatelskou příručku při předávání kartáčku na obličej třetím osobám.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití jsou použity následující symboly a signální slova, na kartáčku na obličej, USB síťovém adaptéru nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí se středním rizikem, které může mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud mu nebude zabráněno.

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento signální symbol poskytuje užitečné další informace o zacházení a používání.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.



Tento symbol označuje elektrická zařízení, která patří do třídy ochrany III (zařízení).



Tento symbol označuje elektrická zařízení, která patří do třídy ochrany II (USB síťový adaptér).



Slovo "GS" označuje testovanou bezpečnost. Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).



Zařízení označená tímto symbolem jsou vhodná pouze pro použití v domácnosti (suché vnitřní prostory).



Tento symbol označuje napětí a jmenovitý proud pro stejnosměrný proud.



Mezinárodní značka účinnosti označuje, že napájecí zdroj splňuje požadavky úrovně VI.



Kartáč na obličej je chráněn proti vodě ponořením do vody po dobu až 30 minut v hloubce 1 m.

3. Bezpečnost

3.1 Správné používání

Kartáček na obličej je určen výhradně k čištění obličeje a masírování. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Kartáček na obličej byl testován na vodu v rozsahu krytí IPX7. To znamená, že zařízení je vodotěsné a vhodné pro použití ve sprše nebo při sprchování a koupeli, ale nenechávejte jej ponořený ve vodě (max. 1 m) nebo pod tekoucí vodou po dobu delší než 30 minut.

Kartáček na obličej používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození kartáčku, majetku nebo osob. Výrobce nebo prodejce nemůže být nést odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Kartáč na obličej připojujte pouze v případě, že vedení napětí v zásuvce odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku síťového adaptéru USB.
- USB síťový adaptér připojujte pouze k snadno přístupné zásuvce, abyste ji v případě problému mohli rychle odpojit od elektrické sítě.
- Kartáček na obličej používejte pouze s dodaným USB síťovým adaptérem.
- Dodaný USB síťový adaptér lze použít pouze k obličejovému kartáčku. Nepoužívejte pro jiné účely.
- Nepoužívejte kartáček na obličej, USB kabel ani USB síťový adaptér, pokud jsou poškozené nebo vadné. Výrobce nebo servis musí poškozené zařízení nebo vadné díly vyměnit, aby se předešlo rizikům.
- Neotevírejte kryt; místo toho nechte opravu provést kvalifikovaného odborníka. V této věci se obraťte na zákaznický servis. Odpovědnosti a záručních nároků se zříkáte v případě oprav prováděných uživatelem, nesprávným připojením nebo vlivem nesprávného provozu.
- K opravám lze použít pouze díly, které odpovídají údajům původního zařízení. Tento kartáček na obličej obsahuje elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro zajištění ochrany před zdroji nebezpečí.
- Kartáček na obličej nepoužívejte během nabíjení.
- Neponořujte USB kabel ani USB adaptér do vody nebo jiných tekutin.
- USB kabel a USB síťový adaptér uchovávejte mimo dosah vody. Nejsou vodotěsné.
- Nenechávejte kartáček na obličej ponořený ve vodě (max. 1 m) ani pod tekoucí vodou déle než 30 minut.
- Kartáček na obličej vždy vypínejte, když se nepoužíváte, když hodláte kartáček čistit nebo v případě poruchy. Vždy odpojte USB adaptér ze zásuvky, když kartáček na obličej nenabíjíte.
- Nikdy se nedotýkejte kabelu USB a síťového adaptéru USB mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nikdy nevkládejte do přístroje žádné předměty.
- Nevytahujte USB adaptér ze zásuvky za kabel; místo toho jej vždy vytahujte za samotný adaptér. Kartáček na obličej nikdy nepřenašejte, netahejte za USB kabel ani jej za něj netahejte.
- Kartáček na obličej, USB kabel a USB síťový adaptér uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- USB kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Kabel USB neomotávejte kolem kartáčku na obličej. Nepokládejte USB kabel přes ostré hrany.
- Kartáček na obličej používejte pouze v interiéru.



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI (NAPŘ. ČÁSTEČNĚ POSTIŽENÉ OSOBY, STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI) NEBO NEDOSTATEK ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPŘ. STARŠÍ DĚTI).

- Tento přístroj mohou používat děti od osmi let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak bezpečně používat přístroj a rozuměly rizikům spojeným s jeho používáním. Děti si s epilátorem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Děti mladší osmi let udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje a síťového kabelu.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi. Děti by mohly spolknout malé části a udusit se.



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Nepoužívejte kartáček na obličej na oční víčko, uvnitř oční jamky, v oblastech se zánětlivým akné nebo na místech vyrážky nebo rány.
- Okamžitě přestaňte používat kartáček na obličej pokud pocítíte nepříjemné pocity nebo se u vás objeví jakékoli neobvyklé reakce, jako je svědění, nepříjemný zánět nebo škrábance.
- Nezaměřujte kartáč na obličej na jedno místo na pokožce a nepoužívejte kartáček na obličej déle než 2 minuty.
- Nikdy nenechávejte kartáček na obličej bez dozoru, když je v činnosti.
- Před použitím obličejového kartáčku se poraďte se svým lékařem kartáčkem na obličej, pokud:
 - trpíte alergiemi, podrážděním pokožky nebo kožním onemocněním.
 - jste těhotná.
 - používáte kardiostimulátor.
 - nejste si jisti, zda kartáček na obličej je pro vás vhodný.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte s kartáčkem na obličej s čistícími prostředky, exfoliátory nebo peelings na bázi hlíny, silikonu nebo zrníček, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body kartáčku na obličej.
- Nenechávejte kartáček na obličej na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Nepokládejte kartáček na obličej na okraj povrchu, abyste zabránili jeho pádu.
- Nikdy nenaplňujte pouzdro kartáčku na obličej tekutinou.
- Kartáček na obličej čistěte po každém použití, aby se na něm nehromadila mastnota a zbytky mycích přípravků.
- Přestaňte kartáček na obličej používat, pokud jeho plastové části vykazují praskliny nebo zlomy nebo jsou deformované.
- Poškozené díly vyměňte pouze za správné odpovídajícími originálními náhradními díly.
- Nepoužívejte kartáček na obličej, pokud spadl nebo je jakkoli poškozen.
- Nechte kartáček na obličej zkontrolovat a/nebo v případě potřeby opravit kvalifikovaným technikem.

4. Kontrola kartáčku na obličej a obsahu

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud nebudete při otevírání balení ostrým nožem nebo jiným špičatým předměty opatrní, můžete poškodit kartáček. Při otevírání buďte velmi opatrní.

1. Vyměňte kartáček na obličej z obalu.
2. Zkontrolujte, zda jsou součástí balení všechny díly (viz obr. A).
3. Zkontrolujte, zda není kartáček na obličej nebo jednotlivé části poškozeny. V takovém případě kartáček na obličej nepoužívejte. Obratě se na náš Zákaznický servis.

5. Nabíjení



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Nenabíjejte, když kartáček na obličej používáte nebo pokud je mokrá. Před použitím kartáčku se ujistěte, že je suchý
- Kartáček na obličej nabíjejte pouze s dodaným kabelem USB a síťovým adaptérem USB.
- Kartáček na obličej nabíjejte pouze při teplotách mezi 0 a 40 °C.
- Po ukončení nabíjení kartáček na obličej vždy odpojte ze zásuvky.



- Kartáček na obličej plně nabijte před prvním použitím a když je baterie vybitá.
- Když je energie baterie nízká, rozsvítí se kontrolka LED červeně a začne blikat. Nabijte kartáček na obličej.
- Během nabíjení nelze kartáček na obličej používat.

1. Zapojte menší konec kabelu USB 9 do nabíjecího kartáčku 7 .
2. Větší konec kabelu USB zapojte do portu USB síťového adaptéru 10 .
Kabel USB můžete také připojit ke kompatibilnímu napájecímu adaptéru USB (např. USB port počítače) pro nabíjení.
3. Pro nabíjení zapojte USB síťový adaptér do síťové zásuvky.
Během nabíjení se kontrolka LED 8 rozsvítí červeně a začne blikat.
4. Po úplném nabití se kontrolka LED stane trvale bílou.
Odpojte USB síťový adaptér od síťové zásuvky a odpojte kabel USB od kartáčku na obličej.

6. Provoz



- Před prvním použitím vyčistěte kartáček na obličej podle popisu v části v kapitole "Čištění".
- Před prvním čištěním oblasti obličej, proveďte na jednom místě test citlivosti pokožky. Spusťte ošetření pouze v případě, že se neobjeví žádná nežádoucí reakce.
- LED kontrolka 8 je během provozu trvale bílá a jednou blikne, kdykoli je stisknuto tlačítko.

6.1 Použití různých oblastí obličejového kartáče

Oblast	Nejlepší pro
Čistící oblasti (silnější kolíky) 1	Přesné čištění a odstranění odumřelé kůže buněk a zrohovatělé vrstvy.
Čistící oblast (tenčí hroty) 2	Jemné čištění velkých ploch, jako např. tváře.
Masážní oblast (hřebeny) 3	Masírování pokožky pro lepší prokrvení a podporu vstřebávání produktů péče o pleť.

6.2 Provozní režimy a nastavení rychlosti

- Kartáček na obličej je vybaven vibračním a pulzačním režimem. Každý režim má 7 nastavení rychlosti.
- Vibrační režim využívá rovnoměrné vibrace pro hloubkové a jemné čištění.
- Pulzující režim používá střídavě silné a slabé vibrace pro zklidňující účinek podobný masáži.

6.3 Zapnutí/vypnutí a výběr provozního režimu

1. Jednou stiskněte ovládací tlačítko 5. Kartáček na obličej je nyní zapnutý a nachází se ve vibračním režimu.
Po zapnutí kartáčku na obličej uslyšíte jedno pípnutí.
2. Znovu stiskněte ovládací tlačítko. Kartáček na obličej je nyní v pulzujícím režimu.
3. Třetím stisknutím ovládacího tlačítka obličejový kartáček vypnete.
Po vypnutí kartáčku na obličej uslyšíte dva zvukové signály.

6.4 Výběr nastavení rychlosti

1. Zvolte provozní režim (viz kapitola "Zapnutí/vypnutí a výběr provozního režimu").
2. Stiskněte tlačítko zvýšení 4 nebo snížení 6 ve zvoleném provozním režimu pro volbu nastavení rychlosti (1-7). Výchozí úroveň je 4.

6.5 Spuštění a ukončení ošetření

- Po výběru provozního režimu a nastavení rychlosti můžete zahájit ošetření.
- Po spuštění kartáčku na obličej uslyšíte každých 30 sekund zvukový signál, který vás upozorní na uplynulý čas. Kartáček na obličej se po 2 minutách automaticky vypne. Upozorňujeme, že kdykoli během ošetření změníte provozní režim nebo nastavení rychlosti, časovač se vynuluje.
- Ošetření můžete také kdykoli ukončit stisknutím tlačítka ovládacího tlačítka 5 jednou nebo dvakrát, v závislosti na aktuálním provozním režimu.

7. Kroky ošetření

1. Před použitím kartáčku na obličej se ujistěte, že má kartáček dostatek energie z baterie (viz kapitola "Nabíjení").
2. Navlhčete obličej a kartáček na obličej vlažnou vodou.
3. Na obličej naneste běžný mycí přípravek (viz krok 1. na obrázku B).
4. Zapněte kartáček na obličej, zvolte vibrační režim a rychlost (viz kapitola "Provoz").
5. Čistěte obličej krouživými pohyby čisticí plochy (1 nebo 2) po obličejí. Plochu se silnějšími výstupky použijte pro oblasti, které vyžadují přesné čištění (např. kolem nosu, očí a brady), a plochu s tenčími výstupky použijte pro větší oblasti (např. čelo, tváře a krk) (viz krok 2 na obr. B). Kartáček na obličej se po 2 minutách automaticky vypne.
6. Obličej a kartáč na obličej důkladně opláchněte vodou a poté je osušte čistým suchým ručníkem (viz krok 3 na obr. B).
7. Na obličej naneste sérum nebo denní/noční krém.
8. Zapněte obličejový kartáček a zvolte pulzní režim a nastavení rychlosti (viz kapitola "Provoz").
9. Masírujte obličej krouživými pohyby masážní plochy 3 po tváři, abyste stimulovali krevní oběh a podpořte tak vstřebávání přípravku péče o pleť (viz krok 4 na obrázku B). Kartáček na

obličej se automaticky vypne po 2 minutách. Pokud chcete ošetření ukončit dříve, stiskněte tlačítko ovládací tlačítko 5 jednou nebo dvakrát.

10. Po použití kartáček na obličej důkladně vyčistěte (viz kap. "Čištění").



- Kůži můžete rozdělit do 6 oblastí: čelo, nos, bradu, levou tvář, pravou tvář a krk. Doporučujeme, abyste každou oblast neošetřovali déle než 20 sekund.
- Tento kartáček na obličej je navržen tak, aby vyčistil vaši pleť během pouhých 2 minut. Doporučujeme, abyste tuto dobu nepřekračovali.
- Nepoužívejte tento kartáček na obličej častěji než dvakrát denně, protože může dojít k podráždění pleti a zarudnutí.

8. Čištění



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Kartáček na obličej vždy odpojte ze zásuvky před čištěním.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Nenechávejte kartáček na obličej ponořený ve vodě (max. 1 m) ani pod tekoucí vodou déle než 30 minut. Ujistěte se, že do kartáče nevnikla voda ani jiné tekutiny.

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami, ani ostré nebo kovové čisticí náčiní, jako jsou nože, tvrdé škrabky apod.

Po každém použití kartáček na obličej vždy vyčistěte.

1. Kartáček na obličej omyjte vlažnou vodou a mýdlem.
2. Důkladně jej opláchněte vodou.
3. Otřete jej do sucha suchým hadříkem.

9. Uskladnění

Před uskladněním musí být všechny díly zcela suché.

- Skladujte kartáč na obličej na čistém a suchém místě a vyhněte se teplu a přímému slunečnímu záření.
- Kartáček na obličej uchovávejte mimo dosah dětí.

10. Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými závadami, které můžete opravit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce.

Pokud se problém přesto nepodaří vyřešit, obraťte se na servisní službu.

Problém	Akce
Kartáč na obličej se nespustí.	Zkontrolujte, zda je kartáček na obličej správně nabitý.
Kartáček na obličej nenabíjí.	Zkontrolujte, zda je kabel USB bezpečně připojen mezi kartáčkem na obličej a USB síťovým adaptérem a že je USB síťový adaptér správně připojen k síťové zásuvce.

11. Technická data

Kartáček na obličej

Model: ND-FC04

Jmenovité napětí: 5 V

Jmenovitý výkon: 3 W

Kapacita baterie: 500 mAh

IP kód: ND-FC: IPX7 (chráněno proti ponořením do vody až do 30 minut v hloubce 1 m)

Třída ochrany: 1: III

Nastavení rychlosti: 7

Režimy: 1: Vibrační a pulzující

Materiál: Materiál: ABS a silikon

Hmotnost: 100 g

Rozměry (D × Š × V): 110 × 35 × 70 mm

USB síťový adaptér

Příkon: 1,5 W: 110-240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A

Napájecí výstup: 5 V DC, 0,5 A

Třída ochrany: II

Číslo modelu: AK06WG-0500050VU

12. Likvidace

12.1 Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

12.2 Likvidace produktu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud produkt již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obec

úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

13. Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis Vám rád pomůže!

14. Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 I 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu