



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.




Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko

www.silkn.eu

info@silkn.eu

Obsah

Zákonné oznámení	2
Obsah balení / části zařízení.....	6
Obecná informace	7
Čtení a uložení návodu k použití	7
Vysvětlení symbolů.....	7
Bezpečnost	9
Správné použití.....	9
Bezpečnostní instrukce.....	9
Kontrola obsahu produktu a balení.....	11
Nabíjení	11
Sestavení	12
Používání	12
Provedení ošetření	12
Manuální režim.....	13
Automatický režim	13
Léčebný program.....	14
Čištění.....	14
Ukládání.....	14
Odstraňování problémů	15
Technická data.....	16
Obecné	16
USB nástěnný adaptér	16
Prohlášení o shodě	16
Likvidace	17
Likvidace obalu	17
Likvidace výrobku	17
Informace o záruce.....	18
Služby zákazníkům.....	18

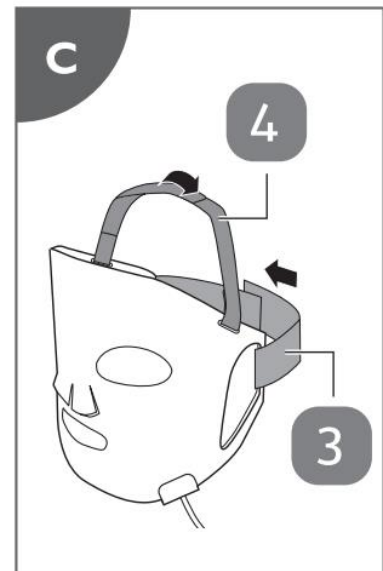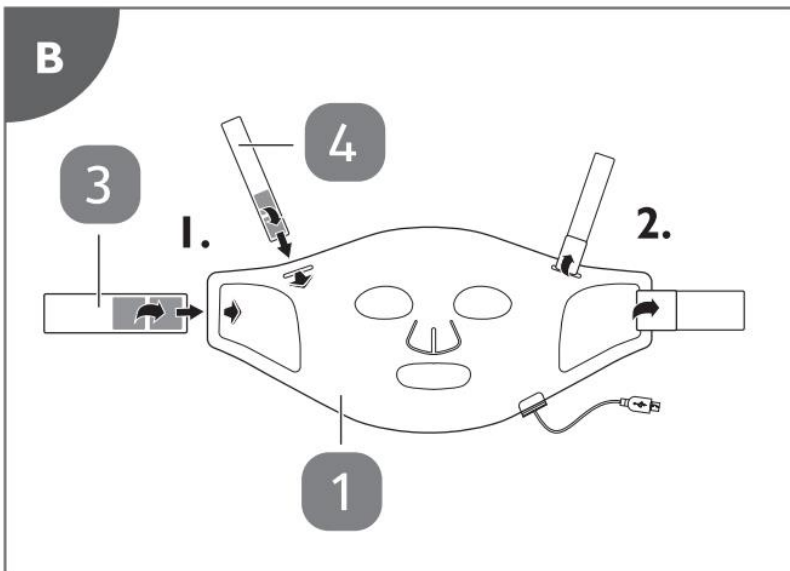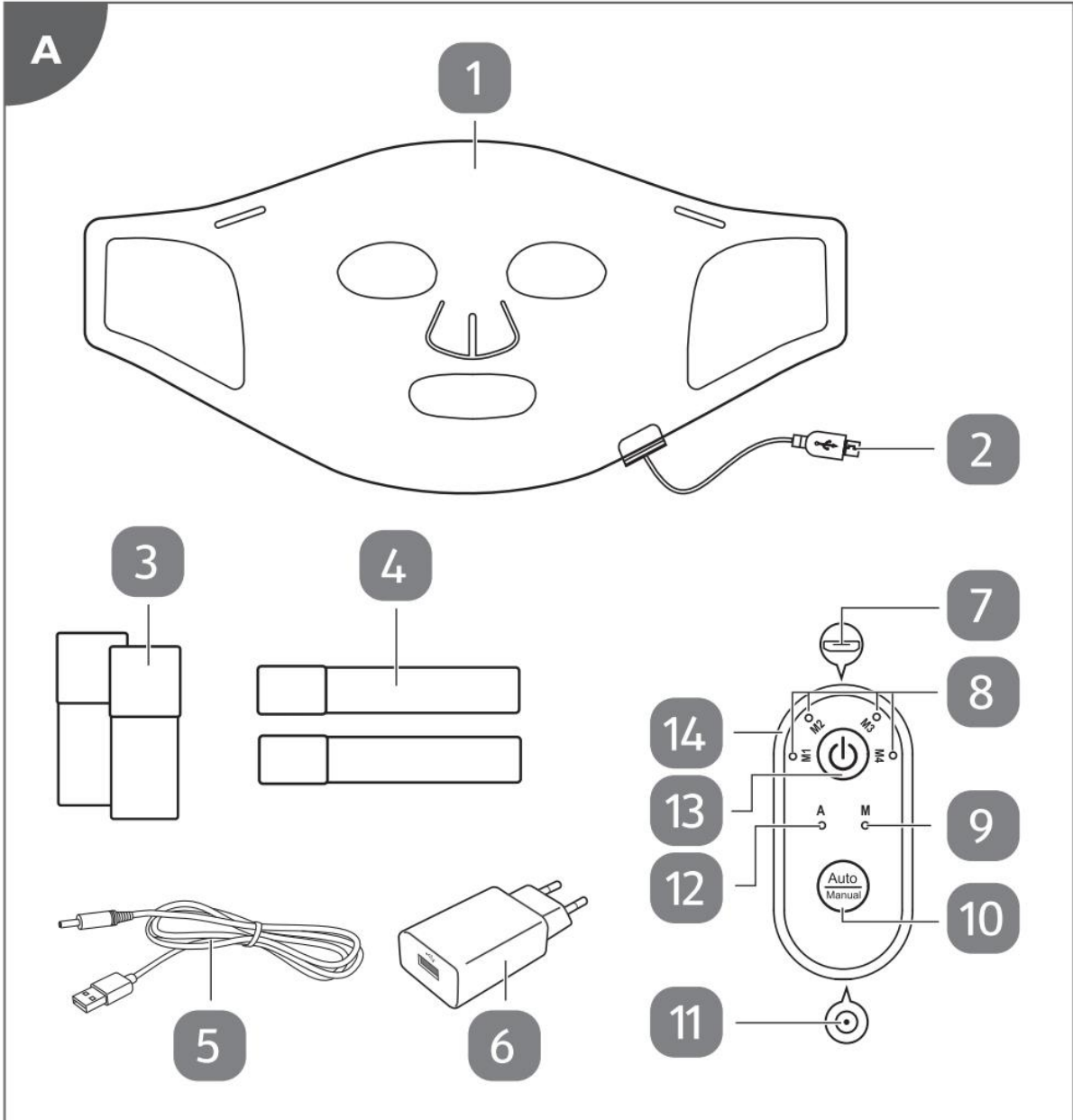

Obsah balení / části zařízení

1. Pleťová maska
2. Zástrčka
3. Velký elastický popruh 2x
4. Malý elastický popruh 2x
5. USB kabel
6. USB adaptér
7. Konektor
8. Kontrolní světlo pro terapii 4x
9. Kontrolní světlo pro manuální režim
10. Tlačítko pro výběr režimu
11. Nabíjecí port
12. Kontrolní světlo pro automatický režim
13. Ovládací tlačítko
14. Dálkové ovládání

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka je přiložena k této obličejové masce LED 100 (dále jen „produkt“ nebo „přístroj“) a obsahuje důležité informace o nastavení a zacházení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku, zejména bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli případnému zranění osob nebo poškození výrobku.

Uživatelská příručka vychází z platných norem a pravidel v Evropské unii. Když jste v zahraničí, musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi. Uložte uživatelskou příručku pro pozdější použití. Při zapůjčení produktu třetím stranám nezapomeňte zapůjčit i tuto uživatelskou příručku.

Vysvětlení symbolů

V této uživatelské příručce jsou použity následující symboly/ slova, na výrobku nebo obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí s vyšším stupněm rizika, které může vést k úmrtí nebo vážnému zranění, pokud mu není zabráněno.



OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento symbol vám poskytuje užitečné doplňující informace o použití.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.



Zařízení označená tímto symbolem jsou vhodná pouze pro použití v domácnosti (suché vnitřní místnosti).



Tento symbol označuje napětí a stejnosměrný proud.



Slovo „GS“ znamená testování bezpečnosti. Produkty označené tímto symbolem splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

IP20

USB nástěnný adaptér je chráněn proti pevným předmětům až do 12 mm.




Mezinárodní značka účinnosti ukazuje, že napájecí zdroj splňuje požadavky úrovně VI (nástěnný adaptér USB).



USB nástěnný adaptér je vybaven bezpečnostním transformátorem odolným proti zkratu.



USB nástěnný adaptér má spínací napájecí zdroj.

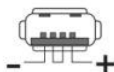

Tento symbol označuje polaritu kolíků v nástěnném adaptéru USB.



Tento symbol označuje elektrická zařízení, která patří do třídy ochrany II.

ta

Okolní teplota (nástěnný adaptér USB)

Bezpečnost

Správné použití

Výrobek je určen výhradně k rejuvenaci a obnovení pružnosti vaší pokožky. Pomáhá také zlepšit metabolismus pokožky, má “anti-ageingový” účinek, eliminuje záněty, akné a vrásky. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k poškození majetku nebo osob. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění vzniklá nesprávným použitím.

Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

- Produkt připojujte pouze tehdy, pokud síťové napětí zásuvky odpovídá údajům na štítku nástěnného adaptéru USB.
- USB adaptér připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky, abyste jej mohli v případě problému rychle odpojit od elektrické sítě.
- K nabíjení používejte pouze dodaný USB kabel a dodaný USB adaptér. Nepoužívejte je k jiným účelům.
- Nepoužívejte výrobek, USB kabel nebo USB adaptér, pokud jsou poškozené nebo vadné. Aby se předešlo rizikům, poškozené nebo vadné součásti může vyměnit jedině výrobce nebo určený servis.
- Neotevírejte kryt výrobku; opravu nechte provést kvalifikovaným odborníkem.
- Za tímto účelem kontaktujte zákaznický servis.
- V případě poškození kvůli opravám provedených uživatelem, nebo kvůli jeho nesprávné manipulaci s produktem se výrobce zříká odpovědnosti a záručních nároků.
- K opravám lze použít pouze díly, které odpovídají danému zařízení. Tento výrobek obsahuje elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Neponořujte výrobek, USB kabel nebo USB adaptér do vody nebo jiných tekutin. Chraňte je před vodou.
- Výrobek vždy vypínejte, pokud jej nepoužíváte, pokud jej hodláte vyčistit nebo v případě poruchy. Pokud produkt nenabíjíte, vždy odpojte napájecí adaptér USB.
- Nikdy se nedotýkejte pouzdra, USB kabelu a USB adaptéru mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nikdy nevkládejte do pouzdra žádné předměty.
- Nevytahujte USB nástěnný adaptér ze zásuvky tržením za kabel; místo toho vždy vytahujte chycením za samotný adaptér. Nikdy netahejte nebo nepřenášejte výrobek za kabel USB.
- Uchovejte produkt, USB kabel a USB adaptér mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.

- Kabel USB položte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- USB kabel nelámejte a neomotávejte kolem výrobku. Namotávejte kabel USB přes ostré hrany.
- Výrobek používejte pouze uvnitř.
- Nepoužívejte výrobek během nabíjení.



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- Výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení týkající se bezpečného používání výrobku a porozuměli souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Výrobek nemohou používat těhotné ženy, děti, lidé s epilepsií, pacienti s nemocnou štítnou žlázou, lidé užívající léky na štítnou žlázu, lidé, kteří jsou fotoalergičtí nebo užívají léky na alergii na světlo.
- Výrobek nelze použít na kožní onemocnění, ulceraci ran, traumata a pooperační rány.
- Nepoužívejte přípravek déle než 15 minut na jedno ošetření.
- Pokud si nejste jisti, zda můžete výrobek používat, poraďte se se svým lékařem.
- Okamžitě přestaňte produkt používat, pokud pocítíte jakékoli nepříjemné pocity, objeví se u vás abnormální reakce (jako je svědění nebo nepříjemný zánět) nebo v případě, že se vaše pokožka zahřeje až do bodu nepohodlí.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, stejně tak kabel USB a napájecí adaptér USB.

Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás přístroj vhodný, zeptejte se před prvním použitím svého lékaře.

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s produktem může mít za následek poškození zařízení.

- Chraňte výrobek před otevřeným ohněm, horkými povrchy, vysokými teplotami nebo vlivy počasí (např. déšť).
- Přestaňte výrobek používat, pokud jeho části prasknou nebo se zlomí nebo jsou zdeformované. Poškozené díly vyměňujte pouze za odpovídající originální náhradní díly.

Kontrola obsahu produktu a balení

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Pokud nejste opatrní při otvírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete přístroj rychle poškodit.

Při otvírání obalu buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte výrobek z obalu.
2. Zkontrolujte, zda jsou zahrnuty všechny součásti (viz obr. A).
3. Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé části výrobku poškozeny. V takovém případě výrobek nepoužívejte. Kontaktujte zákaznický servis.

Nabíjení



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- Nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB a napájecího adaptéru USB.
- Výrobek nabíjejte pouze při teplotách mezi 0 a 40°C.



- Před prvním použitím a když je baterie téměř vybitá, produkt plně nabijte.
 - Když je baterie téměř vybitá, kontrolky na dálkovém ovladači (14) 10krát zablikají, než se automaticky vypnou. Nabijte produkt.
 - Výrobek nelze používat během nabíjení.
 - Pokud má být výrobek skladován delší dobu, je třeba zkontrolovat úroveň nabití a lithiovou baterii pravidelně nabíjet.
1. Připojte zástrčku (2) obličejové masky (1) ke konektoru (7) dálkového ovladače.
 2. Zapojte menší konec kabelu USB (5) do nabíjecího portu (11) dálkového ovladače.
 3. Zapojte větší konec kabelu USB do portu USB nástěnného adaptéru USB (6).
K nabíjení můžete také připojit kabel USB ke kompatibilnímu zdroji napájení USB (5 V, 0,5 A) (např. k počítači, notebooku nebo powerbance).

4. Připojte USB nástěnný adaptér do síťové zásuvky pro nabíjení. Průběh nabíjení kontrolujte na kontrolním světle pro světelnou terapii (8):
Jedna kontrolka = nabitá na 25%
Dvě kontrolky = 50% nabití
Tři kontrolky = nabité na 75%
Čtyři kontrolky = plně nabité
5. Po dokončení nabíjení odpojte nástěnný adaptér USB ze zásuvky a odpojte kabel USB z nabíjecího portu dálkového ovladače.

Sestavení

1. Otevřete pružné pásky (3) / (4).
2. Vedďte malé elastické (4) popruhy skrz malé horní otvory a velké elastické popruhy (3) skrz velké boční otvory obličejové masky (1) (viz krok 1 na obr. B).
3. Zavřete háčky a smyčky upevňovací pásky na obličejové masce (viz krok 2 na obr. B).

Používání



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Nepoužívejte výrobek déle než 15 minut na jedno ošetření.

Provedení ošetření

1. Plně nabijte produkt a řádně připevněte elastické popruhy (3) / (4) (viz kapitola „Nabíjení“ a „Sestavení“).
2. Důkladně očistěte a osušte obličej a ruce. Ujistěte se, že jsou bez make-upu a nečistot.
3. Posadte se nebo si lehněte a položte si obličejovou masku (1) na obličej.
4. Použijte suché zipy na popruzích tak, aby vám maska pohodlně padla na obličej.
Malé elastické popruhy (4) by měly být uzavřeny v horní části hlavy a velké elastické pásky (3) by měly být uzavřeny v zadní části hlavy (viz obr. C).
5. Zapojte zástrčku (2) obličejové masky do konektoru (7) dálkového ovladače (14).
6. Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka (13) produkt zapněte.
Ve výchozím nastavení se produkt přepne do manuálního režimu M1 (červená) terapie zvolená po zapnutí.
7. V případě potřeby vyberte opakovaným stisknutím tlačítka režimu (10) mezi automatickým a manuálním režimem. Podle vašeho výběru se rozsvítí odpovídající kontrolka režimu (9) nebo (12).
Chcete -li použít manuální režim, viz kapitola „Manuální režim“.
Chcete -li použít automatický režim, viz kapitola „Automatický režim“.
8. Po ošetření sundejte pleťovou masku a naneste sérum a/nebo denní/noční krém na obličej.

Manuální režim

- Ve výchozím nastavení přejde produkt po zapnutí do manuálního režimu s terapií M1 (červená).
- Pokud je požadována jiná terapie (M2, M3 nebo M4), stiskněte pro výběr 1 - 3krát ovládací tlačítko (13). Svítí příslušná světelná kontrolka dané terapie (8), která ukazuje váš výběr.
Poznámka: Produkt se při operaci vypne, pokud je ovládací tlačítko (13) stisknuto poctvrté.
- Když je zvolena terapie, světelná kontrolka pro manuální režim (9) 5x zabliká, než zůstane svítit a produkt spustí vybranou terapii.

Přehled terapií

Terapie	LED	Vhodné pro
M1	Červené světlo	Redukuje jemné linky a vrásky, stimuluje kolagen a pomáhá zlepšit krevní oběh
M2	Modré světlo	Bojuje s bakteriemi, které způsobují akné, a pomáhá normalizovat produkci kožního mazu, pro jasnější pokožku a zlepšenou strukturu pokožky
M3	Žluté světlo	Snižuje zarudnutí a má uklidňující a uklidňující účinky pro suchou a citlivou pokožku
M4	Fialové světlo	Protizánětlivé a anti-ageingové účinky na pokožku, pro zlepšení vitality pokožky

- Terapie trvá 10 minut. Přístroj se automaticky vypne po uplynutí doby terapie.
- Přístroj můžete také kdykoli vypnout stisknutím a podržením ovládacího tlačítka (13).

Automatický režim

- Je-li vybrán automatický režim, indikační kontrolka (12) zabliká 5krát, pak zůstane rozsvícená a produkt zahájí ošetření.
- V automatickém režimu bude produkt provádět terapie v následujícím pořadí:

M1 (červená): 5 minut

M2 (modrá): 3 minuty

M3 (žlutá): 4 minuty

M4 (fialová): 3 minuty

- Celé ošetření trvá 15 minut. Produkt se automaticky vypne po uplynutí doby ošetření.
- Produkt můžete také kdykoli vypnout stisknutím a podržením ovládacího tlačítka (13).

Léčebný program

Pokud používáte výrobek poprvé, postupujte podle níže uvedeného plánu:

První týden	Používejte jednou za 3 dny, max. 10 minut v kuse
Druhý týden	Používejte jednou za 2 dny, max. 10 minut v kuse
Třetí týden	Používejte jednou za 2 dny, max. 10 - 15 minut v kuse
Čtvrtý týden	Používejte jednou denně, max. 10 - 15 minut v kuse

Jakmile se ukážou výsledky, upravte frekvenci na jednou nebo dvakrát týdně.

Čištění



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Před čištěním vždy odpojte výrobek od zdroje napájení.

NOTICE!

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. odstraňovače octa nebo vodního kamene), kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí potřeby, jako jsou nože, tvrdé škrabky a podobně.
- K čištění nepoužívejte horkou vodu.

K otření produktu (1) použijte vlhký hadřík nebo ubrousek na vodní bázi. Poté jej otřete suchým hadříkem.

Uskladnění

Před uskladněním musí být všechny díly zcela suché.

- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě, ne v blízkosti tepelného zdroje či pod přímým slunečním světlem.
- Uchovávejte výrobek tak, aby nebyl přístupný dětem.
- Pro nejlepší ochranu skladujte výrobek v původním obalu.

Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými závadami, které můžete vyřešit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud problém stále není možné vyřešit, obraťte se na zákaznický servis. Neopravujte výrobek sami.

Problém	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	Zkontrolujte, zda je produkt správně nabitý. Ujistěte se, že produkt není připojen ke zdroji napájení USB. Během nabíjení produkt nefunguje.
Produkt se nenabíjí.	Zkontrolujte, zda je kabel USB bezpečně připojen mezi nabíjecí port a zdroj napájení USB.

Technická data

Obecné

Model:	ND-FM02
Jmenovité napětí:	3.7 V
Kapacita baterie:	1,500 mAh lithium
Počet LED světel:	100
Materiály:	potravinářský silikon, ABS
Hmotnost:	307 g
Rozměry (D × Š × V):	383 × 198 × 33.5 mm

USB nástěnný adaptér

Modelové číslo:	PS06H050K1000EU / PS06H050K1000BU
Vstup:	100–240V~, 50/60 Hz, 0.25 A
Výstup:	5V $\equiv$, 0.5 Ah, 2.5 W
Třída ochrany:	II

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Jméno nebo ochranná známka výrobce, číslo obchodního rejstříku a adresa:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd budova A2, Haosan Linpokeng 2. průmyslová zóna, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Čína	
Vstupní napětí:	100–240	V
Vstupní frekvence střídavého proudu:	50/60	Hz
Výstupní napětí:	5.0	V
Výstupní proud:	0.5	A
Výstupní výkon:	2.5	W
Průměrná účinnost během provozu:	73.61	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %):	63.55 (min.)	%
Spotřeba energie při nulovém zatížení:	0.0396	W

Prohlášení o shodě



EU prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud již výrobek není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Poznámka: Chcete -li dobíjecí baterii vyjmout, omotejte kolem dálkového ovladače ručník a pomocí kladiva rozbijte kryt. Zajistěte ochranu očí a rukou, aby nedošlo ke zranění. Vezměte prosím na vědomí, že vyjmutí dobíjecí baterie není reverzibilní.

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 I 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu / info@silkn.eu