


Komponenty produktu	2
Technologie klíčového jádra	4
Klíčové efekty	8
Klíčové vlastnosti	12
Návod k použití	15
Opatření	26
Často kladené dotazy	28
Specifikace produktu	32
Záruka	33

Komponenty produktu


■ Komponenty

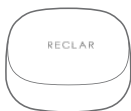


Ochrana
hlavice




Zařízení

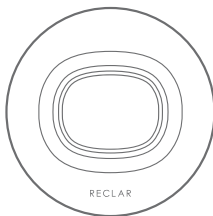

Bezdrátový
nabíjecí stojan

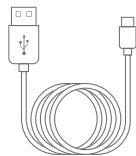

Nabíjecí kabel
C-typu USB

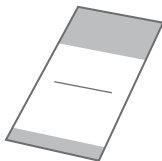


Certifikát
o zajištění kvality




Uživatelský
manuál

Názvy jednotlivých částí

■ Hlavní zařízení

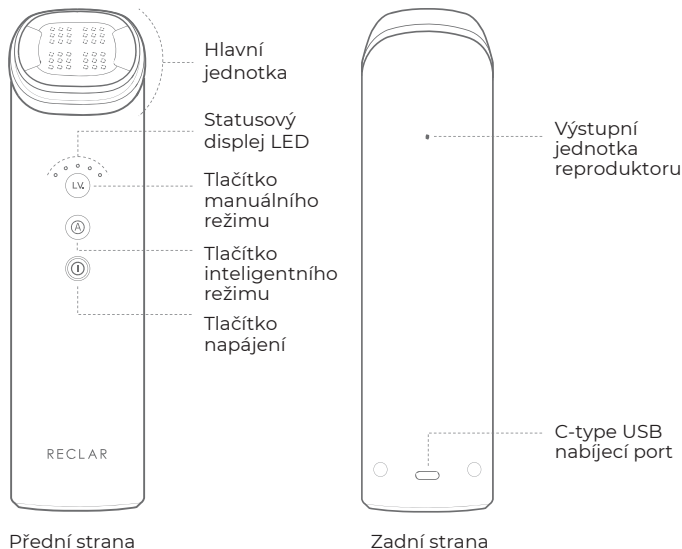

■ Hlavní jednotka

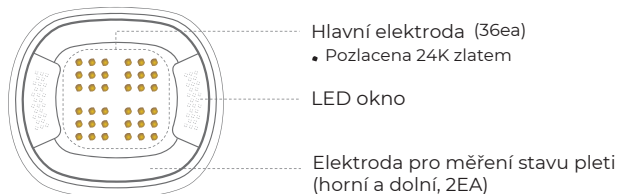

1


10minutový denní rituál pro účinnou regeneraci kožních buněk a zlepšení pružnosti pleti

Jedinečné a silné účinky RE-MERGE na regeneraci pleti, poskytované 1 MHz vysokofrekvenční energií generovanou prostřednictvím 36 hlavních elektrod pozlacených 24K zlatem.

Vysokofrekvenční technologie regenerace kožních buněk

Přenáší vysokofrekvenční energii do tukové vrstvy, která podporuje rozklad tuku a napomáhá liftingu pleti.

Vysokofrekvenční přenos

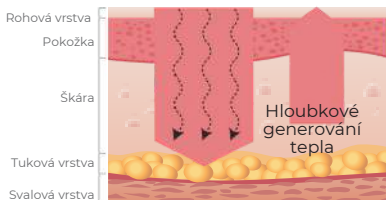


LED světelná terapie

Využívá tři stupně LED světla a blízké infračervené paprsky k podpoře produkce elastinu a kolagenu.




Elektroporace

Elektrické mikropulzy pomáhají aktivním složkám pronikat hluboko do pokožky.

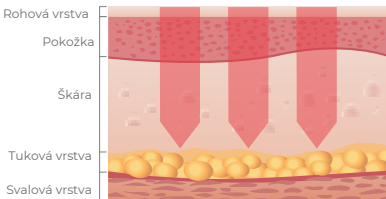


Zažijte proměnu pleti s RE-Merge!

Povrch pleti před a po použití RE-Merge

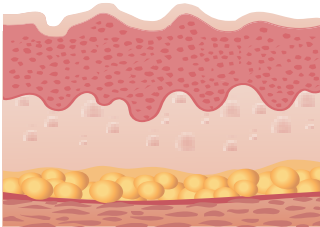


[Před použitím]

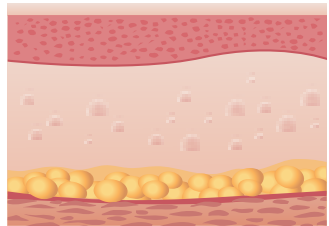

[Po použití]


Mechanismus regenerace kožních buněk

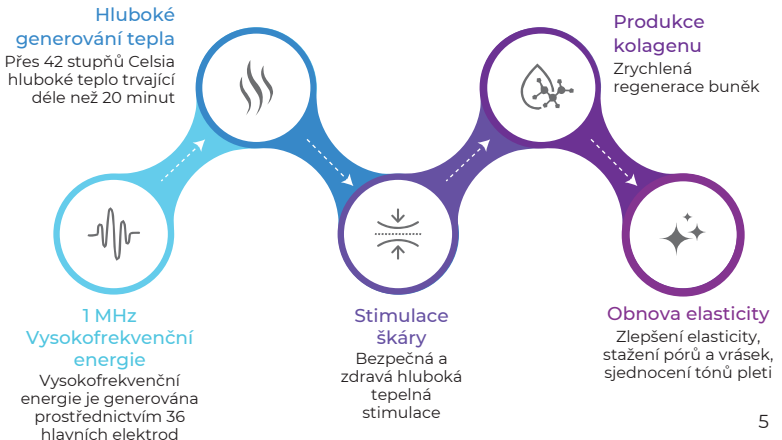



Funkce prevence spálení kůže

Zařízení monitoruje teplotu a intenzitu výstupu hlavních elektrod v reálném čase, aby se zabránilo popálení a poškození kůže během používání.

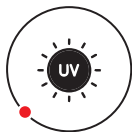

Funkce automatické sterilizace

Hlavní jednotka, která je v přímém kontaktu s pokožkou, prochází automatickou sterilizací pomocí UV sterilizačního LED světla po dobu 40 minut.

- Funkce automatické sterilizace funguje pouze během nabíjení.
- Ujistěte se, že je během nabíjení uzavřen ochranný kryt.




Bipolární metoda

Vysokofrekvenční energie je aplikována pouze mezi elektrody, takže je bezpečná pro použití na tenkých a citlivých místech, jako je okolí očí.

Přístroj měří stav pleti každého uživatele a automaticky optimalizuje energetický výdej, což umožňuje bezpečnou a efektivní chytrou péči o pleť pro podporu pružnosti a regenerace.





Chytrá péče

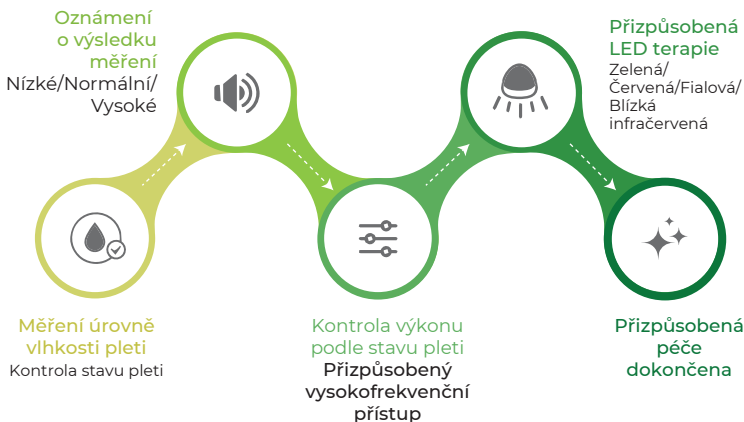


Klíčové efekty

Šest potvrzených účinků ověřených 12 aplikačními testy na skutečných uživateli.


Zlepšení pružnosti pleti

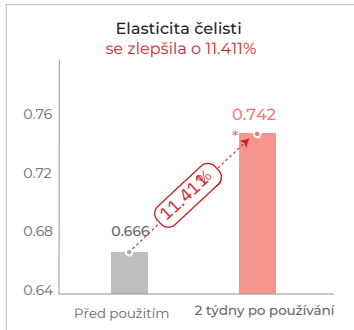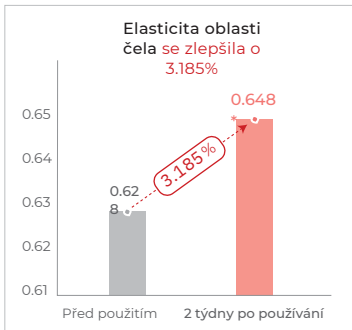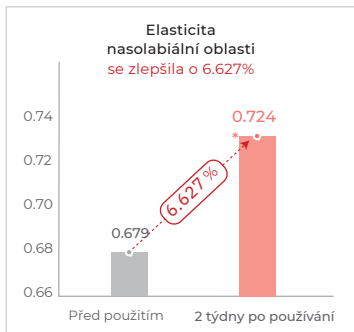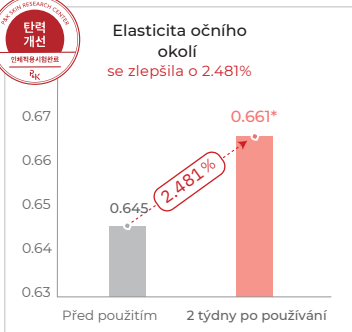

Zlepšení pružnosti pleti

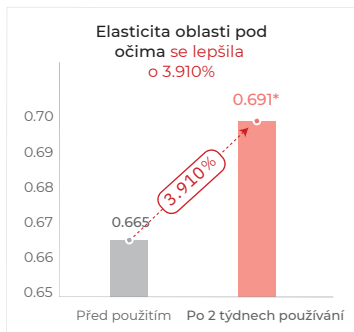

Zlepšení hustoty pleti

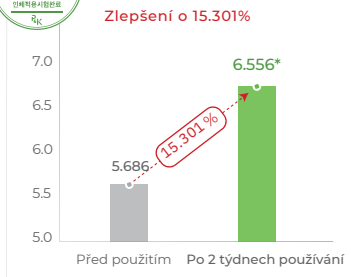

Případ 1



Před použitím



Po 2 týdnech používání

Případ 2




Před použitím




Po 2 týdnech používání

Klíčové efekty


Snížení viditelnosti pórů

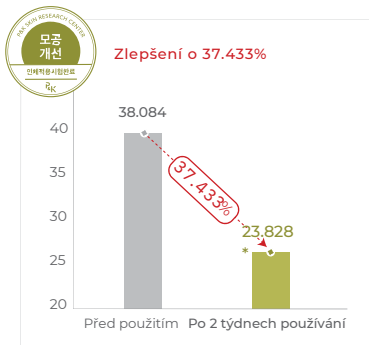

Případ 1

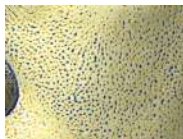

Před použitím

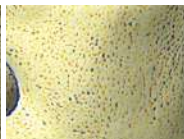

Po 2 týdnech používání

Případ 2




Před použitím




Po 2 týdnech používání


Zjemnění textury (drsnosti) pleti

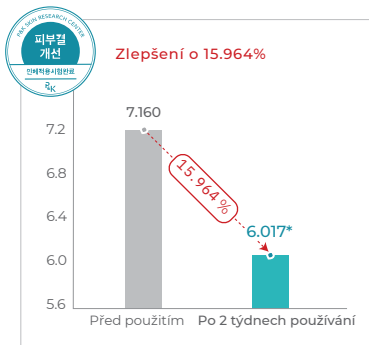

Případ 1

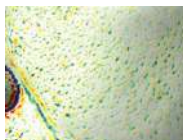


Před použitím

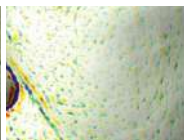


Po 2 týdnech používání

Případ 2

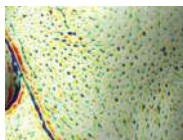


Před použitím

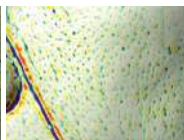

Po 2 týdnech používání

Snížení průhlednosti pleti

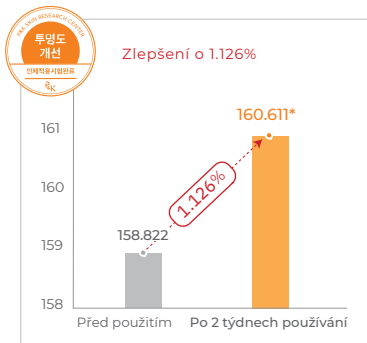

Případ 1



Před použitím



Po 2 týdnech používání

Případ 2




Před použitím



Po 2 týdnech používání

Rozjasnění pleti

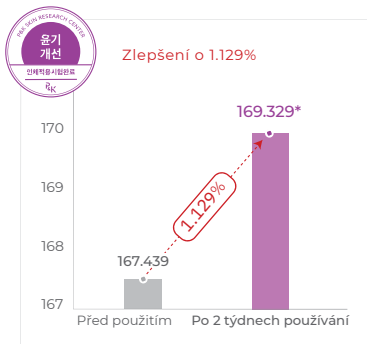

Případ 1



Před použitím



Po 2 týdnech používání

Případ 2




Před použitím



Po 2 týdnech používání


- Účinky výrobku se mohou u jednotlivců lišit.
- Všechny údaje jsou výsledky z aplikačních testů u lidí provedených s použitím 8Pepta Boosting Gel Cream.

Klíčové vlastnosti

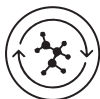

Regenerace kožních buněk

1 MHz 36 hlavních elektrod
Výkonný účinek regenerace buněk

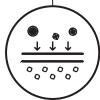

Efektivní penetrace přísad

Elektroporace
Pronikání účinných látek do pokožky




Bezpečnost

Chytré bezpečnostní zařízení
Zabraňuje popálení a poškození kůže



Chytrá péče

Měření stavu pokožky
Chytrá péče na míru založená na stavu pokožky uživatele

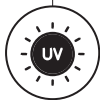

UV sterilizace

Funkce automatické sterilizace
Umožňuje čisté a hygienické použití



Jednoznačné efekty

Silné účinky za pouhých 10 minut denně
Zlepšuje elasticitu, velikost pórů, hustotu, drsnost a zářivost



Uživatelská přívětivost (hlasové navádění)

Hlasové navádění
Snadné a pohodlné použití pro každého



Bezdrátový nabíjecí stojan

Pohodlné nabíjení a skladování

Speciální technologie

Certifikace



KC (Korea) / CE (Europe) / TELEC (Japan)

Patenty a Užitéčné vzory



Zařízení pro řízení vysokofrekvenčního výstupu založené na měření vlhkosti a teploty / Uživatelsky přizpůsobený vysokofrekvenční výstup
Ovládací zařízení pro kůži / Aplikace a registrace pro celý design zařízení a hlavní jednotky

Certifikované zkušební zprávy



Testování kosmetiky / Mění frekvence / Testování při vysoké teplotě a vysoké vlhkosti / Testování tepelným šokem



Testování postřikem slanou vodou / Testování špičkové vlnové délky LED

Zapnutí

Po obdržení produkt jednou plně nabijte.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund ve vypnutém stavu a uslyšíte hlasové pokyny „RECLAR“, které indikují, že je napájení zapnuto. Tento stav je pohotovostní režim a stavová LED dioda postupně bliká.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund během provozu nebo v pohotovostním režimu a uslyšíte zvuk upozornění na vypnutí, což znamená, že je napájení vypnuto.

Automatické vypnutí

Režim Elasticity Care Mode se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 10 minutách provozu. Pokud v pohotovostním režimu není po dobu 5 minut detekována žádná aktivita, napájení se automaticky vypne.

Upozornění na vybitou baterii

Pokud je nabití baterie během provozu elastického zařízení nízké, zazní hlasové upozornění „Battery Low, Charging is Required“ a napájení se vypne.

- Pokud zazní upozornění na vybitou baterii, vyhněte se nadměrnému používání a před dalším použitím zařízení plně nabijte.

Návod k použití

Nabíjení baterie a automatická sterilizace

Připojte nabíjecí kabel USB k nabíjecímu portu ve spodní části na zadní straně hlavního zařízení nebo použijte bezdrátovou nabíjecí stanici.



Nabíjení pomocí
příмого připojení
kabelem



Nabíjení pomocí bezdrátové stanice

- Umístěte zařízení na stanici tak, aby přední strana směřovala k logu nabíjecí stanice

1. Zazní hlasové upozornění: „Nabíjení začíná! Zavřete prosím ochranný kryt“ a proces nabíjení začne.

2. Po zahájení nabíjení se rozsvítí červené LED světlo a ozve se hlasové upozornění a řekne "UV sterilizace začíná." Na hlavní jednotce bude zahájen automatický sterilizační proces, který bude trvat 40 minut.

- Funkce automatické sterilizace funguje pouze během nabíjení.
- Zařízení nelze používat během nabíjení; vždy zavřete ochranný kryt během nabíjení, aby se aktivoval proces UV sterilizace.
- **Nedívejte se přímo na UV LED světlo z blízké vzdálenosti, abyste předešli poškození zraku nebo poškození rohovky. Ochranný kryt mějte vždy zavřený.**
- Bezdrátová nabíjecí stanice je určena výhradně pro RE-Merge. Nepokládejte ani nenabíjejte žádné jiné produkty než toto zařízení na stanici pro bezdrátové nabíjení.



Probíhá
nabíjení



Nabíjení
dokončeno

Příprava před použitím

Před použitím RE-Merge vždy odliďte a vyčistěte svou pleť.

- **Nepoužívejte zařízení bez odličení nebo čištění, nečistoty mohou způsobit kožní problémy.**

Aplikace masážního gelu/krému

Naneste přiměřené množství masážního gelu nebo krému na elektrody hlavní jednotky.

- Při péči o místa s tenkou kůží, jako je okolí očí, rtů, pod bradou a na čele, dbejte na aplikaci dostatečného množství masážního gelu nebo krému.
- **Nepoužívejte přístroj bez masážního gelu nebo krému, abyste předešli riziku popálení.**
- Pro účinnou péči a prevenci popálení vždy používejte speciální masážní gel nebo krém.





Masážní technika

1. Během procesu péče o pleť se ujistěte, že se hlavní elektrody dostanou do kontaktu s pleť přitlačením hlavní jednotky vodorovně k pleti.
2. Přitlačte hlavní jednotku pevně k pleti, abyste zajistili dobrý kontakt s hlavními elektrodami, a proveďte pomalou a jemnou masáž pohyby tam a zpět.

[TIP] Doporučuje se začít s masáží v oblastech s relativně silnějšími vrstvami kůže, jako jsou tváře a čelist.


- Při péči o místa s tenkou pokožkou, jako je okolí očí, rtů, pod bradou a na čele, dbejte na to, abyste nanесли dostatečné množství masážního gelu nebo krému.
- **Nepoužívejte přístroj bez masážního gelu nebo krému, abyste předešli riziku popálení.**

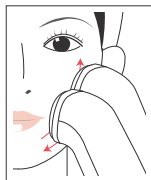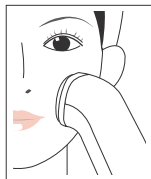

Doba a frekvence masáže

Doporučené použití je jednou denně po dobu 10 minut (5 minut na levé straně / 5 minut na pravé straně).

- Dodržujte prosím doporučenou frekvenci a čas používání. Používání zařízení příliš často nebo po delší dobu může poškodit kožní buňky nebo narušit kožní bariéru.

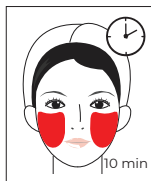



Jak používat inteligentní režim

Smart Mode je přizpůsobený automatický režim péče o pleť, který měří úroveň vlhkosti pokožky a automaticky nastavuje výstupní intenzitu a vlnovou délku LED světél pro optimální péči o pleť na základě stavu pokožky uživatele.

Použijte "Smart Mode", pokud spadáte do některé z následujících kategorií:

- Ti, kteří touží po individuální péči o pleť
- Ti, kteří si nejsou jisti, kterou úroveň použít pro počáteční použití
- Ti, kteří nejsou obeznámeni se svým vlastním stavem kůže
- Ti, pro které je obtížné používat manuální režim

1. Po očištění a odstranění zbývajících vlhkosti z pleti, aniž byste cokoli zakryli, krátce stiskněte tlačítko Smart Mode.

Poté přitiskněte elektrody přístroje pevně na tvář, abyste změřili úroveň vlhkosti pokožky. (Trvá to asi 3 sekundy)

- V závislosti na úrovni vlhkosti pokožky se výstupní intenzita automaticky nastaví na úroveň 1 až 9.
- Výstupní vlnová délka LED se také automaticky přizpůsobí na základě úrovně vlhkosti pokožky.
- [Viz strana 19 pro ovládání LED na základě úrovně vlhkosti pokožky.](#)

2. Naneste přiměřené množství masážního gelu nebo krému na elektrodovou část hlavní jednotky.

- [Viz strana 17 způsob aplikace masážního gelu nebo krému.](#)

3. Přiložte vodorovně hlavní jednotku na obličej a jemně masírujte celý obličej po dobu 10 minut, přičemž ji pevně přitiskněte k pleti.

- [Viz strana 17 pro metodu masáže.](#)

4. Po použití zařízení naneste základní produkty péče o pleť (krém nebo pleťové mléko) a dokončete rutinu péče o pleť.

LED ovládání na základě úrovně vlhkosti pokožky

Blízké infračervené 844-856 nm	Funguje ve všech režimech péče o pleť Podporuje krevní oběh pro urychlenou regeneraci
--	---

ZELENÁ 520-565nm 	Nízká úroveň vlhkosti		
	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
	Fáze opravy Dodání vitality do kožních buněk Komplexní kožní problémy a péče o tmavé skvrny		

ČERVENÉ 625-700 nm 	Normální úroveň vlhkosti		
	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6
	Fáze buněčné regenerace Urychlení regenerace pleti Podpora produkce kolagenu / stažení vrásek		

FIALOVÁ 400-420 nm 	Úroveň vysoké vlhkosti		
	Úroveň 7	Úroveň 8	Úroveň 9
	Posilovací fáze Regenerace a údržba kožních buněk Udržování zdravé vrstvy pokožky		

Jak používat manuální režim

Manuální režim použijte, chcete-li přímo zvolit požadovanou výstupní intenzitu pro péči o pleť.

Pokud spadáte do některé z následujících kategorií, použijte „Manuální režim“:

- Ti, kteří touží po silnější péči, než je automatický výstup péče
- Ti, kteří dávají přednost fixaci výstupní intenzity pro péči
- Ti, pro které je obtížné měřit stav pokožky (vlhkost)

1. Po vyčištění krátce stiskněte tlačítko Manual Mode a vyberte požadovanou úroveň péče (Úroveň 1-5)

- Při zvýšení úrovně z 1 na 5, se zvyšuje výstupní intenzita a vyšší úrovně také vedou ke zvýšenému pocitu tepla v pleti.
- Pro počáteční použití se doporučuje začít s úrovněmi 1 nebo 2 a postupně zvyšovat, abyste našli tu vhodnou intenzitu pro vaši pleť.
- [Viz strana 17 příprava před použitím.](#)

2. Naneste přiměřené množství masážního gelu nebo krému na hlavní elektrodovou část hlavní jednotky.

- [Viz strana 17 jak na aplikaci masážního gelu nebo krému.](#)

3. Umístěte vodorovně hlavní jednotku na obličej a jemně masírujte celý obličej po dobu 10 minut, přičemž pevně přitiskněte k pleti.


- [Viz strana 17 pro metodu masáže.](#)

4. Po použití zařízení naneste základní produkty péče o pleť (krém nebo pleťové mléko) a dokončete rutinu péče o pleť.

Jak používat volbu jazyka hlasu a funkci ztlumení

Výběr jazyka hlasu


(korejština ↔ angličtina)

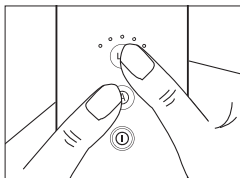

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko manuálního režimu (LV) a tlačítko inteligentního režimu (A) současně po dobu 5 sekund.

- Vstup do pohotovostního režimu: Při prvním zapnutí nebo během používání jednou krátce stiskněte tlačítko napájení.
- Při nákupu v tuzemsku je výchozí jazyk nastaven na Korejštinu.

Funkce ztlumení

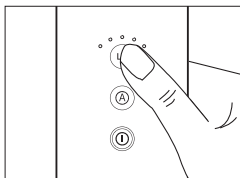

2. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko manuálního režimu (LV) po dobu 5 sekund.

- Vstup do pohotovostního režimu: Při prvním zapnutí nebo během používání jednou krátce stiskněte tlačítko napájení.
- Způsob deaktivace režimu ztlumení: Po nastavení ztlumení stiskněte a podržte tlačítko ručního režimu po dobu 5 sekund v pohotovostním režimu.

Návod k použití

Návod k použití pro různé oblasti obličeje:

Doporučené pořadí péče o pleť:

Začněte v horní části obličeje a pohybem směrem dolů provádějte péči o pleť v následujícím pořadí pro efektivnější výsledky:


Čelo ▶ Oblast očí ▶ Tváře/nasolabiální ▶ Čelisti

Oblast čela




Jemně masírujte od oblasti nad obočím a kolem očí až k linii vlasů.

Oblast očí

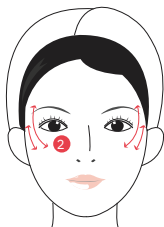


Jemně masírujte pod očima směrem ke koutkům očí, spánkům a horní části obočí.

Tváře/nasolabiální

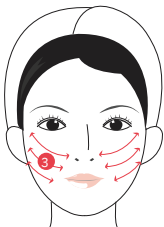



Jemně masírujte podél nasolabiální linie v diagonálním směru, pohybujte se nahoru směrem k horní části obočí.

Čelisti

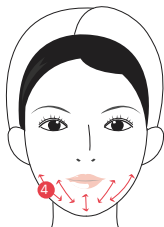

Jemně masírujte oblast pod čelistí a pod tvářemi.

Metody čištění a skladování

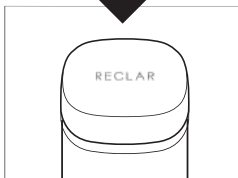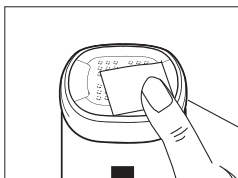

1. Po použití navlhčete ubrousek nebo čistý hadřík vodou a setřete zbývající masážní gel nebo krém z hlavní jednotky a přikryjte ji ochranným víčkem pro uskladnění.

(Automatická sterilizace během nabíjení)

Podrobnosti najdete na straně 16 o funkci automatické sterilizace.

2. Při dlouhodobém skladování očistěte hlavní jednotku alkoholovým tamponem (dezinfekčním alkoholovým tampónem) a zakryjte ji ochranným víčkem.

Návod k použití

Opatření pro použití




Používání zařízení bez masážního gelu nebo krému může způsobit poškození pokožky, proto jej používejte se speciálním masážním gelem nebo krémem.




Po nanesení masážního gelu nebo krému na přístroj ihned začněte s masáží.

Pokud je přístroj ponechán s naneseným masážním gelem nebo krémem delší dobu, může se zahřát v důsledku výstupu vysokofrekvenční energie.

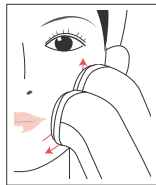

Pokud je vysokofrekvenční energie nepřetržitě aplikována do stejné oblasti bez pohybu, hrozí popálení kůže, proto dbejte na jemný pohyb a masáž pokožky.

[Podrobnosti o funkci prevence spálení kůže najdete na straně 6.](#)

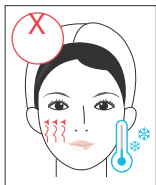

Během používání se díky regeneraci buněk, může vytvářet pocit tepla nebo brnění v oblasti aplikace.


Jedná se o přirozený proces, kdy se k regeneraci kožních buněk využívá vysokofrekvenční tepelná energie. Přibližně 20 minut po ošetření se doporučuje vyhýbat se činností, které snižují teplotu pokožky, jako je mytí studenou vodou nebo aplikace chladivé masáže.

• Provedení chladivé a zklidňující péče po 20 až 30 minutách může vést k efektivnějším výsledkům.



Při regeneraci a obnově kožních buněk opakovanou péčí, se může relativní pocit tepla snížit, i když zvýšíte úroveň péče.

Nejedná se o závadu zařízení.

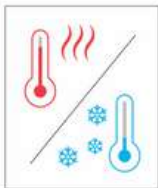

Vnímaný pocit tepla se na pleti může lišit v závislosti na místě a prostředí (teplotě), kde se zařízení používá. Zejména může být pocit tepla v létě nižší než v zimě. Vezměte prosím na vědomí, že tento pocit tepla nesouvisí s vysokofrekvenční energií aplikovanou do pleti a jejími účinky na regeneraci buněk.



Nepoužívejte na tyto oblasti:

Uvula (štítná žláza)
Oblasti s akné, záněty nebo ranami



Dbejte na to, abyste před a po použití přípravku nepodráždili pokožku, protože pokožka může během procesu regenerace kožních buněk dočasně zcitlivět.

Vyhňte se používání produktu současně s peelingem, masáží nebo jinými kosmetickými přístroji.

Opatření pro použití

- Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.
- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
- Zabraňte pádu nebo vystavení nárazu.
- Uchovávejte mimo dosah silných vibrací nebo magnetických zdrojů.
- Při odpojování nabíjecího kabelu od hlavní jednotky za kabel netahejte; místo toho držte konec kabelu a odpojte jej.
- Neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj neponořujte do vody ani jej neomývejte tekoucí vodou.

(Pokud se do zařízení dostane voda, může to způsobit poruchu, dávejte pozor, aby se do zařízení nedostala vlhkost.)

- Nepoužívejte v blízkosti vysokonapěťových elektrických zařízení. (např. elektrické šoky, pasti na komáry atd.).
- Nepoužívejte na místa se zánětem nebo ranami.
- Pokud zaznamenáte podráždění kůže, jako je teplo na kůži, zarudnutí nebo otok po 24 hodinách po použití, přestaňte přístroj používat.
- Pokud jste podstoupil(a) lékařskou operaci nebo zákrok v zamýšlené oblasti použití, před použitím se poradte s lékařem.
- Pokud jsou v oblasti kovové materiály (např. piercing nebo ortodontická zařízení) zamýšleného použití, před použitím je odložte.
- Když je UV LED světlo v provozu během nabíjení pro automatickou sterilizaci, nedívejte se na něj přímo z blízkosti, abyste předešli možnému poškození zraku nebo poškození rohovky. Ochranný kryt mějte vždy zavřený.
- Tento produkt je určen pouze pro použití na obličej; nepoužívejte na jiné části těla.

Opatření pro skladování

- Po použití přístroje se ujistěte, že jste před uložením důkladně odstranili veškeré zbytky masážního gelu nebo krému z hlavní jednotky.
- Neskladujte na místech s příliš vysokými teplotami (nad 40 °C) nebo nízkými teplotami (pod 0 °C).
- Udržujte mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla, jako jsou topná tělesa.
- Neskladujte v oblastech s vysokou úrovní vlhkosti, prachu nebo sazí.
- Při skladování v uzavřeném prostoru, například v autě, dejte pozor, abyste přístroj nevystavovali přímému slunečnímu záření.
- Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s plastovými nebo pryžovými materiály.
- Vyvarujte se používání silných chemických produktů, jako je alkohol, benzen, nebo ředidlo pro čištění, protože mohou poškodit povrch produktu.

Opatření týkající se baterie

- Plně nabijte baterii před prvním použitím.
- Baterie je spotřební materiál a doba používání zařízení se může časem zkrátit.
- Pokud je nutná výměna baterie, použijte k výměně určené servisní středisko.
- Tento produkt má vestavěnou baterii. Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo vyměnit.
- Některé nabíječky nebo nabíjecí kabely nemusí fungovat pro nabíjení kvůli jejich konstrukci nebo struktuře.
- Bezdrátová nabíjecí stanice je určena výhradně pro RE-Merge.
- Nepokládejte ani nenabíjejte jiné produkty na stanici pro bezdrátové nabíjení.

Často kladené dotazy

FAQ

Otázka: Musím při používání RE-Merge používat masážní gel nebo krém?

Odpověď: Ano, při použití RE-Merge musíte použít masážní gel nebo krém. Používání přístroje bez masážního gelu nebo krému může způsobit popáleniny a poškození kůže. Před použitím zařízení je nezbytné nanést gel nebo krém.

Otázka: Proč musím používat speciální masážní gel nebo krém?

Odpověď: Speciální masážní gel nebo krém je navržen tak, aby mohla vysokofrekvenční energie proniknout kůží, aniž by způsobila poškození. Běžný gel nebo krém se může odpařovat příliš rychle, což vede k vysušení a snížení účinnosti vysokofrekvenčního přenosu energie do pleti.

Otázka: Mám po použití zařízení smýt zbytky gelu nebo krému?

Odpověď: Speciální kosmetika pro používání s RE-Merge je funkční proti vráskám a obsahuje aktivní složky pro maximalizaci regenerace buněk a pružnosti pleti. Pomáhá zlepšit elasticitu pleti i po smytí, pokud jej lehce vklepete do pleti pro lepší vstřebání.

Otázka: Mohu jej použít na jiné části těla než na obličej?

Odpověď: RE-Merge je navržen speciálně pro použití na obličej a nedoporučuje se používat na jiné části těla. Vyhněte se jeho použití v oblasti krku (štítné žlázy), stejně jako v oblastech s ranami nebo záněty.

Otázka: Mohu jej používat po kožních operacích nebo zákrocích?

Odpověď: Po kosmetické chirurgii nebo kožních procedurách se poraďte s lékařem, aby potvrdil, že je použití bezpečné.

Pokud si nejste jisti, doporučuje se zdržet se používání zařízení po dobu přibližně dvou měsíců, aby se plet plně zotavila.

Otázka: Chci nabít zařízení na bezdrátové nabíjecí stanici, ale nenabíjí se.

Odpověď: Během bezdrátového nabíjení se ujistěte, že přední strana zařízení a logo na stanici jsou zarovnány ve stejném směru.

Zkontrolujte vyrovnaní stanice a zařízení a zkuste nabíjet znovu.

• Viz strana 16 pro nabíjení baterie a automatickou sterilizaci.

Otázka: Hlasové navádění nefunguje.

Odpověď: RE-Merge podporuje Korejský / Anglický / Tichý režim pro hlasové navádění. Pokud hlasové navádění nefunguje, můžete přepnout do hlasového režimu stisknutím tlačítka Manual Mode po dobu delší než 5 sekund v pohotovostním režimu.

• Viz strana 21 jak používat volbu jazyka hlasu a funkci ztlumení.

Otázka: Zařízení vůbec nefunguje.

Odpověď: Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení nemusí fungovat. Před použitím zařízení plně nabijte.

Otázka: Nenabíjí se.

Odpověď: V některých případech některé nabíječky nebo kabely nemusí podporovat nabíjení. Zkuste k nabíjení zařízení použít jinou nabíječku a kabel.

Otázka: Jak mám vyčistit zařízení po použití?

Odpověď: Po použití otřete veškeré zbytky na hlavní jednotce vlhkým hadříkem nebo alkoholovým tamponem a poté použijte funkci sterilizace během nabíjení.

• Viz strana 16 pro nabíjení baterie a automatickou sterilizaci a strana 24 pro metody čištění a skladování.

Často kladené dotazy

Otázka: Jaká je doporučená frekvence a čas používání?

Odpověď: Doporučené použití je jednou denně po dobu 10 minut. Pokud cítíte nadměrnou stimulaci, přístroj použijte jednou za dva dny.

• **Doba a frekvence masáže viz strana 18.**

Otázka: Zdá se, že se zařízení během používání zahřívá.

Odpověď: Všechna elektronická zařízení vytvářejí během provozu teplo. V případě RE-Merge je obvod generující vysokofrekvenční energii umístěn na horní části zařízení, takže při používání může docházet k pocitu tepla. Zařízení je však navrženo tak, aby odvádělo teplo a má uvnitř bezpečnostní obvody, takže jej můžete používat s důvěrou.

Otázka: Cítím silnou stimulaci v určitých oblastech.

Odpověď: Stupeň tepla a stimulace se může lišit v závislosti na tloušťce a stavu pleti obličeje. Zejména pokud pociťujete nepohodlí nebo nadměrné teplo v citlivých oblastech, jako je tenká kůže kolem očí, na čele nebo čelisti, můžete před použitím nanést více masážního gelu nebo krému nebo snížit výstupní úroveň o jeden krok.

Otázka: Měření vlhkosti pokožky v chytrém režimu funguje i bez přímého kontaktu s pokožkou.

Odpověď: V chytrém režimu může zařízení automaticky měřit vlhkost pokožky i bez přímého kontaktu s pokožkou, pokud jsou na hlavové elektrodě zbytky gelu nebo pokud není zcela suchá. Měření a provoz se vrátí do normálu, když je zařízení v přímém kontaktu s pokožkou.

Otázka: Při používání zařízení je z hlavní jednotky slyšet praskání.

Odpověď: Zařízení může kvůli frekvenci vydávat mírný šum, během přenosu vysokofrekvenční energie do pleti. To je však normální a neznamená to žádné problémy s výkonem nebo provozem produktu.

Otázka: Mám otázku, která není výše uvedena.

Odpověď: Kontaktujte prosím zákaznický servis RECLAR na telefonním čísle +420 731 911 959 nebo na e-mailu: support@reclar.com



Online návod na webu

Specifikace produktu

Jméno výrobku	RE-Merge
Číslo produktu	Číslo produktu
Velikost	Hlavní jednotka 172 mm x 46,2 mm x 34,6 mm Stanice (výška x průměr) 16,5 mm x 94,6 mm
Hmotnost	220 g (hlavní jednotka 175 g, stanice 45 g)
Baterie	3,7V, 3000 mAh, Lion
Doba nabíjení	Kabelem: Kolem 3 hodin / Bezdrátově: Kolem 9 hodin
Způsob nabíjení	Kabelem: Typ USB C / Bezdrátově: Exkluzivní nabíjecí stanice
Čas výkonu	Přibližně 120 min
Vstupní napětí	3,7V
Výstupní napětí	100V
Spotřeba energie	10W
Země výroby	Jižní Korea
Výrobce	RNU Co., Ltd.
Adresa	58 Maeyeoro, Dong-gu, Daegu, Jižní Korea
Telefonní číslo	+82 80-854-0001

Zaregistrujte svůj originální produkt

Přejděte na webovou stránku pomocí QR kódu a přejděte na stránku registrace pravého produktu. Pro dokončení registrace originálního produktu uveďte sériové číslo (S/N) ve spodní části na zadní stranu zařízení spolu s dalšími informacemi.



- Upozorňujeme, že systém ověřování registrace pravého produktu je v současné době dostupný pouze v Jižní Koreji.

Podmínky záruky

- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a procesní kontrolou ze strany RECLAR. Je zaručen licencí na originální produkt RECLAR. Pokud se vyskytne vada v kvalitě tohoto produktu, můžete jej vyměnit nebo získat vrácení peněz do 7 dnů od data obdržení.
- Tento produkt má nárok na bezplatný záruční servis podle záručních předpisů poskytovaných společnostmi. Pokud však spadá pod zpoplatněné služby podle záručních předpisů, můžete službu obdržet za příplatek.

Podrobnosti o záruce

- Na tento produkt se vztahuje záruka kvality po dobu 1 roku od data nákupu (pouze pro hlavní tělo a nabíjecí stanici).
- Záruční doba se počítá od data nákupu, proto prosím uschovejte účtenku.
- Pokud nelze potvrdit datum nákupu, bude záruční doba vycházet z data výroby.
- V případě závad, které se vyskytnou při výrobě, bude zajištěna bezplatná oprava nebo výměna.
- Vezměte prosím na vědomí, že na poškození nebo poruchu způsobenou nedbalostí uživatele se záruka nevztahuje, a to ani v rámci záruční doby.
- Neoprávněná demontáž nebo oprava neurčeným servisním střediskem ruší platnost záruky.

Placená služba (na náklady zákazníka)

- V případě poruchy z důvodu vyšší moci.
- Poškození nebo závada způsobená pádem nebo nárazem produktu.
- Vnější deformace nebo poškození způsobené chemikáliemi, jako je benzín nebo benzen.
- Spotřební díly, jako jsou baterie a kabely.
- Poškození nebo porucha způsobená použitím jiných než originálních dílů nebo příslušenství.
- Jiné případy nefunkčnosti produktu v důsledku nedbalosti zákazníka.

Záruka

Datum nákupu:

Koupeno od:

RNU Co., Ltd.

Address: 58 Maeyeoro, Dong-gu, Daegu, South Korea



R-R-gbt-B-500

Tyto záruční zásady platí konkrétně pro zákazníky v Jižní Koreji a zásady záruky se mohou lišit v závislosti na zemi/prodejci.

Vezměte prosím na vědomí, že obrázky v tomto návodu se mohou lišit od skutečného produktu. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit v závislosti na podmínkách společnosti.
