


Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a splnilo vyhovujúce požiadavky pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s Pravidlami FCC, časťou 15. Tieto pravidlá boli vytvorené, aby poskytli nutnú ochranu pred škodlivým rušením počas montáže v domácich podmienkach. Toto zariadenie produkuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je namontované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiového spojenia.

Neexistuje garancia, že rušenie nenastane pri konkrétnej montáži. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímača, ktoré sa môže prejaviť vypnutím a zapnutím zariadenia, mal by používateľ skúsiť opraviť rušenie jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi meraniami:

- Zmeniť orientáciu alebo premiestniť anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než do ktorého je zapojený prijímač.
- Poradiť sa s výrobcom alebo rádio/TV technikom a požiadať ho o pomoc.

Výmena batérií

1. Pre prístup k batériám otočte spodnou časťou kefky.
2. Použite malý skrutkovač pre uvoľnenie spodnej časti a vložte batérie.
3. Priehradku s batériou vybavte krytom a vaša Tickle Tooth kefka je opäť pripravená na použitie!

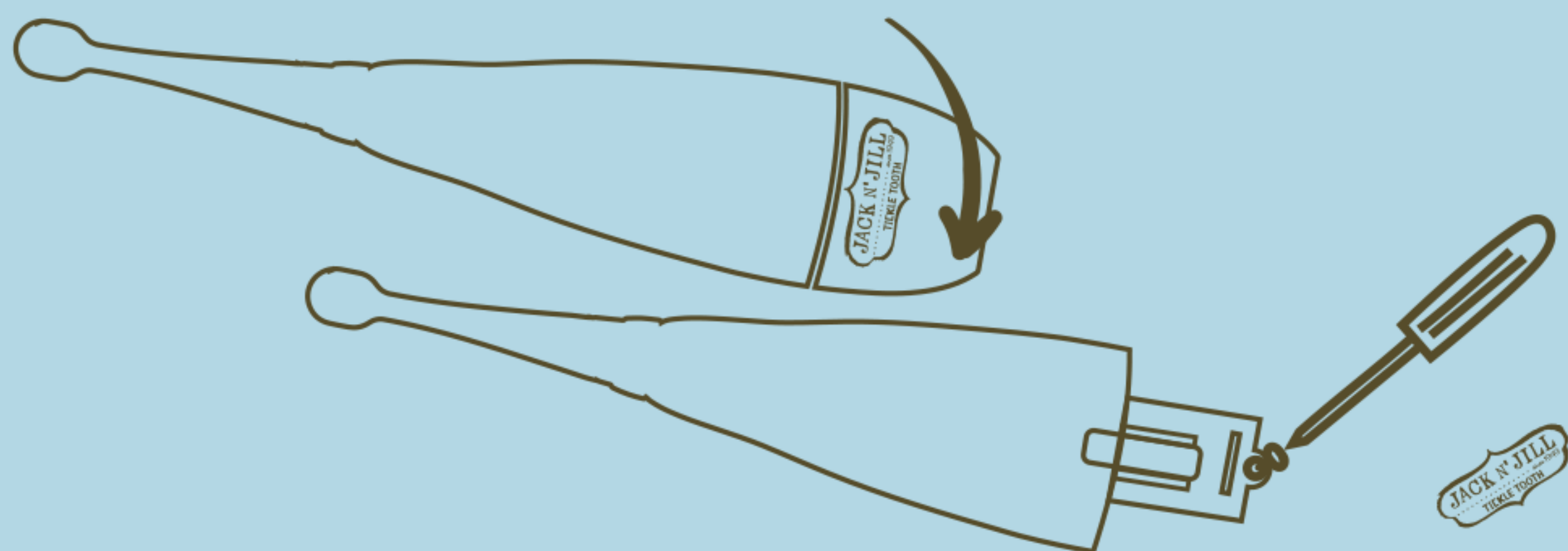

Dôležité upozornenie týkajúce sa vody a predĺženia životnosti zubnej kefky Tickle Tooth:

Vnútorne elektronické časti sú veľmi kvalitné a boli navrhnuté tak, aby boli spoľahlivé. Kontakt s vodou však môže spôsobiť nesprávnu funkciu alebo poruchu kefky Tickle Tooth. Pri oplachovaní štetiniek otočte kefku tak, aby ste mali istotu, že voda sa dostane iba na štetinky. Po každom opláchnutí takto otočenú kefku ešte osušte, aby ste ju zbavili prebytočnej vody.

Upozornenie:

Používanie sonickej kefky Tickle Tooth vo vani alebo sprche bude mať vplyv na jej životnosť, preto používanie sonickej zubnej kefky Tickle Tooth vo vani či sprche neodporúčame!

Nenechávajte deti, aby sa dotýkali batérií.

Kefku musí držať dospelý.

I keď je kefka zábavná, nie je to hračka.

Vždy je nutný dohľad dospelšej osoby.

Časť s batériami neponárajte do vody!

Navštívte nás!

WWW.JACKANDJILLKIDS.SK

Včetně
baterie

JACK N' JILL

od roku 1949
VESELÉ ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ!

0-6
LET

(TICKLE TOOTH)

SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK
ŠETRNÉ ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ
PRO MIMINKA, BATOLATA
I VĚTŠÍ DĚTI

BÍLÉ
LED SVĚTÝLKO
PRO KONTROLU
MALÝCH
ZOUBKŮ

HLAVICE 1
PRO DĚTI
OD 0-18M

HLAVICE 2
PRO DĚTI
OD 18M

HLAVICE
VELIKOSTI 1 A 2

EXTRA MĚKKÉ
ŠTĚTKY PRO ŠETRNÉ
ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ

ZÁBAVNÝ
SVĚTELNÝ ČASOVAČ
S AUTOMATICKÝM
VYPÍNÁNÍM
PO 2 MINUTÁCH

KAŽDÝCH 30 VTEŘIN
VIBRACE UPOZORNÍ,
ŽE JE ČAS PŘEJÍT
NA ČIŠTĚNÍ DALŠÍ
ČÁSTI CHRUPY

RUKOJEŤ A HLAVICE
KARTÁČKU BEZ PVC
A BPA PLASTŮ

BATERIE
SOUČÁSTÍ BALENÍ!
1 ALKALICKÁ
BATERIE AAA

(Používejte pouze alkalické baterie!)

Návod k použití: Před každým použitím kartáček zkontrolujte. Jeho štetinky opláchněte vodou. Naneste na ně malé množství přírodní pasty na zuby Jack N' Jill. Po jednom stisknutí zapínacího tlačítka se rozsvítí LED světýlko, při dalším stisku tlačítka se zapne vibrace s 2minutovým časovačem. Každou část chrupu čistěte po dobu 30 vteřin a na další část přejděte, jakmile kartáček zavibruje. Pro vypnutí kartáčku stiskněte tlačítko. Kartáček očistěte opláchnutím hlavice vodou a nechte ji uschnout.

Upozornění: Tento výrobek není hračka. Doporučujeme, aby na děti vždy dohlížela dospělá osoba. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hlavici kartáčku vyměňujte každé 3 měsíce nebo častěji – v případě opotřebení či po nemoci. Nebezpečí zadušení baterií. Nevkládejte baterii obráceně, nenabíjejte ji, nevhazujte ji do ohně ani ji nedávejte mezi ostatní typy baterií. Mohla by explodovat nebo způsobit zranění při vytečení obsahu. Nevhodné k ponoření do vody.

- ✓ TESTOVÁNO NA TOXICKÉ LÁTKY
- ✓ KONTROLOVANÁ VÝROBA
- ✓ KVALITNÍ, BEZPEČNÝ
A PLOŠNĚ TESTOVANÝ PRODUKT

Toto zařízení splňuje v rámci FCC pravidlo 15. Jeho provoz podléhá následujícím 2 podmínkám:
(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně toho, které může mít nežádoucí dopad na jeho provoz.
Mějte na paměti, že změny nebo úpravy nejsou schváleny v rámci strany zodpovědné za dodržování předpisů a mohou zneplatnit právo uživatele na právo toto zařízení používat.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím požadavkům pro digitální zařízení třídy B

BALENÍ OBSAHUJE: 1 SONICKÝ KARTÁČEK, 1 NÁHRADNÍ HLAVICI, 1 AAA ALKALICKOU BATERII

Distribútor: SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26, 911 01 Trenčín, +421 918 087 576

BEZ PVC, FTALÁTŮ A BPA PLASTŮ