

FOREO



UFO™ 2

BEAUTY-TECH SUECA
MASCARILLAS POWER



MANUAL ONLINE

MANUAL DE USO



COMENCEMOS

Enhorabuena por haber dado el primer paso hacia un cuidado facial de otro planeta con UFO™ 2. Antes de que comiences a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de mascarillas power desde la comodidad de tu hogar, por favor tómate un momento para leer detalladamente las instrucciones de este manual.

Por favor LEE LAS INSTRUCCIONES AL COMPLETO ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO y utiliza este producto sólo para el uso que se describe en este manual.

⚠ **ATENCION:** NO SE PERMITE LA MODIFICACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO.

INTRODUCCIÓN A UFO™ 2

Rediseñado con tecnología de calor ultra rápida y un mayor espectro de luz LED, UFO™ 2 es un revolucionario dispositivo de mascarillas power que te brinda una piel sensacional en cuestión de segundos. Con su avanzada tecnología de hiper infusión, UFO™ 2 combina la termoterapia y la crioterapia con pulsaciones T-Sonic™ que mejoran los beneficios de las mascarillas power de UFO™. Además, está equipado con 8 luces LED diferentes, ¡UFO™ 2 te ayuda a conseguir una piel cuidada y radiante en sólo 90 segundos!

CONOCE A TU UFO™ 2

BOTÓN DE ENCENDIDO

Enciende y apaga el dispositivo, activa el modo de emparejamiento por Bluetooth y permite seleccionar rutinas de tratamiento.

SILICONA ULTRA HIGIÉNICA

Resistente a las bacterias y ultra suave.

PULSACIONES T-SONIC™

Te ofrecen un masaje facial relajante que aumenta la luminosidad de la piel.

PUERTO DE CARGA

Hasta 40 usos por cada carga de 2.5 horas.



LUZ LED DE ESPECTRO COMPLETO

Ayuda a que la piel se muestre visiblemente rejuvenecida para un rostro limpio y radiante.

TERMO-TERAPIA

Suaviza la piel para que los ingredientes penetren profundamente en el cutis.

INDICADORES DE LUZ

Se enciende para indicarte en qué tratamiento de mascarilla está configurado tu dispositivo.

ANILLO DE SUJECCIÓN

Te permite asegurar la mascarilla power activa de UFO™ en su lugar.

CRIOTERAPIA

Minimiza la apariencia de los poros y proporciona una piel más firme.



MASCARILLA POWER ACTIVA UFO™

Máscarillas de microfibra blanda formuladas exclusivamente para su uso con UFO™.




CABLE DE CARGA USB

Carga el dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar con el cable USB.



APLICACIÓN INTERACTIVA

Sincroniza automáticamente en el dispositivo las rutinas pre-programadas de mascarillas power.

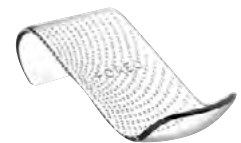


SOPORTE ELEGANTE Y ESTILIZADO

Protege y sujeta tu UFO™ 2, y lo ayuda a secarse rápidamente.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Descarga la aplicación FOREO For You para desbloquear y registrar tu dispositivo por primera vez.
- 2 Conéctate a la aplicación a través de Bluetooth con tu smartphone y presiona el botón de encendido de UFO™ 2 para sincronizar tu dispositivo con la app.
- 3 En la aplicación, escanea el código de barras de la mascarilla y sigue las instrucciones.

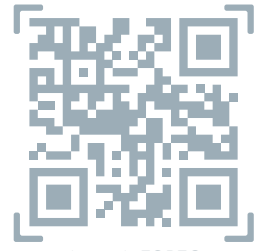

Descarga la app de FOREO aquí



Retira el anillo de fijación de UFO™ 2.



Extrae la mascarilla power de la bolsita.



Asegura la mascarilla en el dispositivo colocando el anillo de fijación en su lugar, con el logotipo de FOREO hacia arriba.



¡Disfruta con tu tratamiento de mascarilla power!

AGREGA UN NUEVO TRATAMIENTO

Las rutinas de Make My Day y Call It a Night ya están pre-programadas en tu dispositivo. Cualquier otro tratamiento de mascarilla debe activarse a través de la aplicación cuando la uses por primera vez. Después podrás acceder a la rutina a través de la aplicación o mediante el botón de encendido.



Todos los tratamientos de mascarillas adicionales *

USA UFO™ SIN LA APLICACIÓN

- 1 Presiona el botón de encendido para activar la rutina de tratamiento Make My Day.
- 2 Presiona nuevamente para activar el tratamiento Call It a Night, y así sucesivamente con cada mascarilla. (Por ejemplo, si H2Overdose está en la posición 3 de su aplicación, presiona el botón de encendido 3 veces para activar el tratamiento con H2Overdose).
- 3 ¡Tu tratamiento de mascarilla power está listo para comenzar!

¿TODAVÍA QUIERES MÁS?

Si el tratamiento con UFO™ 2 no fue suficiente, presiona el botón de encendido nuevamente dentro de los 30 segundos posteriores al final de la rutina para comenzar de nuevo el mismo tratamiento. También puedes personalizar tu experiencia con las mascarillas creando tu propia rutina de tratamiento a través de la aplicación, donde podrás ajustar y seleccionar varios parámetros para una experiencia de mascarillas power activas UFO™ más adaptada a tus necesidades.

APLICACIÓN

Limpia y seca la piel. Para obtener mejores resultados, recomendamos usar un dispositivo LUNA™.

- 1 Asegura la mascarilla en tu dispositivo y desliza suavemente UFO™ 2 sobre tu piel, distribuyendo la fórmula de manera uniforme.
- 2 Masajea la fórmula de la mascarilla en tu piel con el dispositivo UFO™ 2 mediante movimientos circulares. Mueve el dispositivo haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del rostro, comenzando en la barbilla, y subiendo hasta la mejilla derecha y la frente. Continúa por la mejilla izquierda hasta la barbilla y el cuello. Repite este movimiento hasta que termine el tratamiento.
- 3 Masajea suavemente el exceso de esencia en tu piel, o límpialo con un algodón. Si lo deseas, puedes aplicar una crema hidratante de tu elección.



*Cuando uses la mascarilla para el contorno de los ojos, distribuye suavemente la fórmula alrededor de tus ojos, alternando entre el ojo izquierdo y derecho hasta que finalice el tratamiento.

CÓMO LIMPIAR UFO™ 2

Retira el anillo de plástico del dispositivo y desecha la mascarilla de microfibra. UFO™ 2 es 100% resistente al agua, así que puedes aclarar tanto UFO™ 2 como el anillo de plástico con agua corriente a temperatura ambiente. Sécalo con un paño o toalla sin pelusa y no abrasivo. Después de su uso, recomendamos rociar el dispositivo con el spray de limpieza de silicona de FOREO y aclararlo con agua tibia para obtener resultados óptimos.

NOTA: Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

AVISO IMPORTANTE PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA:

Tu dispositivo UFO™ 2 está diseñado para utilizarse únicamente con las mascarillas activas de FOREO. En ningún momento se debe colocar el dispositivo directamente sobre la piel o el rostro cuando el cable de USB esté conectado.

- Si tienes una afección de la piel o cualquier problema médico, consulta a un dermatólogo antes de usar el dispositivo.
- El uso de UFO™ 2 debe ser agradable. Si sientes molestias, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.
- Ten especial cuidado cuando uses UFO™ 2 alrededor de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados o los propios ojos.
- Por razones de higiene, no recomendamos compartir tu UFO™ 2 con otra persona.
- Evita que tu UFO™ 2 tenga contacto con la luz directa del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- UFO™ 2 tiene una superficie térmica. Las personas sensibles al calor deben tener precaución y cuidado al usar este dispositivo.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por niños o cerca de ellos, así como por personas con capacidades físicas y mentales reducidas.
- Detén su uso si este producto parece estar dañado de alguna manera. Este producto no contiene piezas reparables.
- Usa este dispositivo sólo para el uso previsto que se describe en este manual. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica, o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita foreo.com/support.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Precauciones a tomar en caso de cambios en el rendimiento de UFO™ 2.

Si UFO™ 2 no se activa al presionar el botón de encendido:

- La batería está vacía. Carga tu UFO™ 2 a través del cable de carga por USB hasta que la luz emita un brillo constante. Una carga completa de 2.5 horas alcanza para 40 tratamientos.

Si UFO™ 2 no se puede apagar y/o los botones de la interfaz no responden:

- El microprocesador no está funcionando adecuadamente. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo.

Si UFO™ 2 no se sincroniza con la aplicación FOREO For You:

- Desactiva el Bluetooth y vuelve a activarlo. Intenta emparejar el dispositivo de nuevo.
- Cierra la aplicación FOREO For You y luego vuelve a abrirla para comenzar el proceso.
- Verifica si la aplicación necesita actualizarse en la tienda de aplicaciones (App Store) de tu dispositivo móvil.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

REGISTRO DE GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 2 años, descarga la aplicación FOREO For You y sigue las instrucciones para registrar tu producto.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha original de compra contra defectos de fabricación o derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del dispositivo. La garantía NO cubre el deterioro cosmético causado por un desgaste normal, o daños causados por accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y lo notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, bajo discreción, reemplazará el dispositivo de forma gratuita. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable de que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original junto con estas condiciones de garantía durante el período de garantía.

Para reclamar tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y luego selecciona la opción para hacer un reclamo de garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso es adicional a tus derechos legales como consumidor y no afecta esos derechos de ninguna manera.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO


Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida de residuos separados).



El símbolo de un contenedor tachado indica que este dispositivo no debe tratarse como basura doméstica, por lo que debe llevarse a un punto de recolección de equipamientos eléctricos y electrónicos. Al asegurarte de que este dispositivo se elimine correctamente, ayudarás a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían ser causadas por un desecho inadecuado del producto. El reciclaje de materiales también ayudará a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio local de eliminación de residuos domésticos o con tu lugar de compra.

CÓMO EXTRAER LA BATERÍA

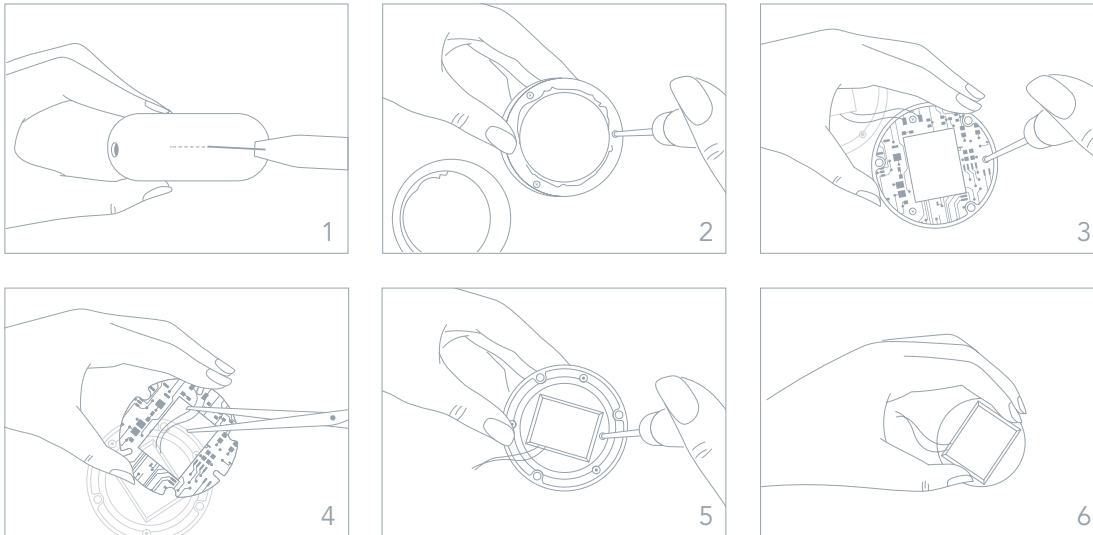

ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona y PC + ABS, Aleación de Aluminio
COLOR:	Rosa Perla / Menta / Fucsia
TAMAÑO:	72,5 mm x 31,4 mm
PESO:	146,2g
BATERÍA:	Li-Ion 1200mAh 3.7V
TEMPERATURA:	5 - 45 grados Celsius
USO:	Hasta 40 usos por carga.
STANDBY:	180 días
FRECUENCIA:	180 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:	<50 dB
INTERFAZ:	1 botón

Aviso legal: los usuarios de este dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus minoristas asumen ninguna responsabilidad u obligación por lesiones o daños, físicos o de otro tipo, que resulten directa o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios ocasionales en el contenido de la misma sin obligación de notificar a persona alguna dicha revisión o cambios.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede confirmar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

El modelo puede ser modificado sin previo aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES

CONCEPTOS BÁSICOS DE UFO™ 2

¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE RECIBIR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

¡Felicidades, has descubierto una forma más inteligente de cuidar tu piel! Lo primero es lo primero: descarga la aplicación FOREO For You de forma gratuita para desbloquear y registrar tu dispositivo. (Para obtener más información, consulta la sección titulada "LA APLICACIÓN").

¿CÓMO COMIENZO MI PRIMER TRATAMIENTO?

Primero, limpia y seca tu rostro y tu cuello con cuidado; te recomendamos que uses un dispositivo de la gama LUNA™ para obtener mejores resultados. A continuación, coloca una mascarilla power activada en tu dispositivo UFO™ 2. Finalmente, activa tu rutina de mascarilla UFO™ 2 a través de la aplicación o sigue las instrucciones de uso paso a paso, las puedes encontrar en este manual.

¿CÓMO ENCIENDO / APAGO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Presiona el botón de encendido en tu dispositivo UFO™ 2 para activarlo. Para apagar tu dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Después de completar una rutina de mascarilla pre-programada, el dispositivo se apagará automáticamente.

¿QUÉ INCLUYE MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

1 dispositivo UFO™ 2, 1 cable de carga USB, 1 mascarilla Make My Day, 1 manual de usuario, 1 guía de inicio rápido y 1 soporte.

EL DISPOSITIVO UFO™ 2

¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Los tratamientos con mascarillas de UFO™ 2 han sido desarrollados para ser usados dos veces al día, mañana y tarde. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de tu piel y tus preferencias personales, puedes modificar el periodo de uso.

¿CUÁNTO DURA CADA TRATAMIENTO?

Los tratamientos de mascarillas Make My Day & Call It a Night duran tan sólo 90 segundos. La duración del resto de tratamientos varía según la combinación de tecnologías más efectiva.

¿TODOS LOS TRATAMIENTOS DE UFO™ 2 SON IGUALES?

No, cada mascarilla power activada por UFO™ 2 tiene un tratamiento único que optimiza sus resultados.

¿ES SEGURO UTILIZAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 EN PIEL SENSIBLE?

Los dispositivos UFO™ 2 son seguros de usar y aptos para todo tipo de pieles. Además, puedes elegir entre una variedad de mascarillas power activadas con UFO™ según las necesidades específicas de tu piel.

¿PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 ALREDEDOR DE LOS OJOS?

Sí, los dispositivos UFO™ 2 son seguros para usar alrededor de los ojos. Te recomendamos que deslices suavemente el dispositivo sobre el contorno de los ojos y que apliques una presión mínima.

¿PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 DESPUÉS DE TENER CIRUGÍA PLÁSTICA, BOTOX O RELLENOS DÉRMICOS?

Los dispositivos UFO™ 2 te ofrecen un tratamiento facial suave y apto para todo tipo de pieles. Sin embargo, debes consultar a tu médico antes de usarlo en caso de que hayas tenido algún procedimiento médico reciente.

¿PUEDO UTILIZAR SÓLO LOS TRATAMIENTOS DE LUZ LED, SIN TENER QUE USAR UNA MASCARILLA O REALIZAR UN PROGRAMA COMPLETO?

No, no recomendamos usar el dispositivo UFO™ 2 sin una mascarilla o un programa preestablecido, ya que no ofrecerá la misma eficiencia o resultado que cuando se combina con una mascarilla power activada por UFO™.

¿PUEDO USAR MI FOREO LUNA™ CON MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

¡Por supuesto! Los dispositivos UFO™ 2 y LUNA funcionan mejor juntos: el cepillo de limpieza facial LUNA™ exfolia suavemente las células muertas de la piel, destapa los poros y elimina hasta el 99.5% de la suciedad y la grasa, preparando tu rostro para que reciba a continuación un tratamiento con mascarilla power UFO™ 2.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UFO™ 2 Y UFO™ mini 2?

UFO™ 2 y UFO™ mini 2 incluyen sofisticados tratamientos de mascarillas power que puedes disfrutar en sólo 90 segundos. Sin embargo, UFO™ 2 también incluye la función de crioterapia; el dispositivo se enfría instantáneamente para disminuir la apariencia de los poros y reafirmar el rostro.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISPOSITIVOS UFO™ Y LOS DISPOSITIVOS UFO™ 2?

Los dispositivos UFO™ 2 han sido rediseñados con termoterapia ultra rápida y luces LED de espectro completo (8 en total), para ofrecerte una experiencia más eficiente y efectiva que su predecesor.

LA APLICACIÓN

¿POR QUÉ DEBO DESCARGAR LA APLICACIÓN DE FOREO ANTES DE USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Todos los productos de FOREO que se pueden sincronizar con la aplicación deben activarse y desbloquearse a través de la app FOREO For You antes del primer uso. Esto ayuda a protegerte de las copias o falsificaciones de los productos de FOREO, facilita el registro de la garantía y protege tu inversión.

¿CÓMO EMPAREJO MI DISPOSITIVO UFO™ 2 CON LA APLICACIÓN DE FOREO?

Descarga la aplicación FOREO For You en tu smartphone o tablet y activa el Bluetooth. Presiona el botón de encendido en tu dispositivo una vez para activarlo. Una luz blanca parpadeante indica que tu dispositivo está en modo de emparejamiento. Sigue las instrucciones en la aplicación para registrar y emparejar tu dispositivo UFO™ 2.

¿MI DISPOSITIVO UFO™ 2 FUNCIONA SIN LA APLICACIÓN?

Sí, puedes usar manualmente ambos dispositivos y no requieren el uso de la aplicación FOREO For You. Sin embargo, antes del primer uso debes registrar tu dispositivo a través de la aplicación FOREO For You para desbloquearlo. Los tratamientos Make My Day y Call It a Night están pre-programados en tu UFO™ 2 y no requieren el uso de la aplicación de FOREO. Sin embargo, para desbloquear el resto de mascarillas power activadas con UFO™, debes usar la aplicación para seleccionar el tratamiento o escanear el código de barras ubicado en la parte posterior de cada caja de mascarillas UFO™; la mascarilla se sincronizará automáticamente con tu dispositivo para que se puedas acceder manualmente la próxima vez. Sólo puedes personalizar tu rutina de mascarilla power a través de la aplicación.

¿PUEDO PERSONALIZAR MI RUTINA DE TRATAMIENTO DE MASCARILLA POWER?

Sí. Si bien cada máscara power activada por UFO™ incluye una rutina de tratamiento que te recomendamos, puedes personalizar tu experiencia con mascarillas power creando tus propias rutinas a través de la aplicación FOREO For You. En la aplicación, puedes elegir tu luz LED preferida y la frecuencia de las pulsaciones T-Sonic™, y también puedes seleccionar si deseas que tu rutina personalizada incluya Termoterapia o Crioterapia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI DISPOSITIVO UFO™ 2 PARPADEE CONTINUAMENTE?

Una luz parpadeante alrededor del dispositivo indica que UFO™ 2 está en modo de emparejamiento por Bluetooth, o que el dispositivo debe cargarse. Sigue las instrucciones en la aplicación para sincronizar tu dispositivo.

¿CÓMO CARGO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Los dispositivos UFO™ 2 son recargables por USB. Una carga de dos horas y media alcanza para 40 usos.

¿CÓMO LIMPIO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Retira el anillo de sujeción del dispositivo y desecha la mascarilla de microfibra. Como UFO™ 2 es 100% resistente al agua, puedes aclarar tanto UFO™ 2 como el anillo de sujeción con agua corriente tibia. Seca con un paño o toalla sin pelusa y no abrasivo. Después de su uso, te recomendamos rociar el dispositivo con el spray de limpieza de silicona de FOREO y aclararlo de nuevo con agua tibia para obtener resultados óptimos.

MASCARILLAS POWER ACTIVADAS POR UFO™

¿PUEDO REUTILIZAR LAS MASCARILLAS POWER ACTIVADAS POR UFO™?

Cada mascarilla power activada por UFO™ está diseñada para un solo uso. Sin embargo, si un tratamiento con UFO™ 2 no es suficiente para ti, presiona el botón de encendido nuevamente dentro de los 30 segundos posteriores al final de la rutina y comenzará el mismo tratamiento de nuevo.

¿NECESITO ACLARAR EL EXCESO DE LA ESENCIA DESPUÉS DE USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

No, la tecnología de Hiper-infusión está diseñada específicamente para ayudar a que la fórmula de la mascarilla se absorba rápida y profundamente en la piel. Después del tratamiento, simplemente masajea cualquier materia restante en tu piel o elimina el exceso con un algodón.

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI MÁSCARILLA UFO 2 POWER ACTIVATED ES AUTÉNTICA?

Con la aplicación FOREO For You, puedes escanear el código de barras en el embalaje de la mascarilla para verificar su autenticidad.

©2020 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM