

FOREO



UFO™ 2

ŠVÉDSKÁ KOSMETICKÁ
TECHNOLOGIE
POWER MASKY



ONLINE PŘÍRUČKA

KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ZAČÍNÁME

Gratulujeme, že jste koupili UFO™ 2 udělali první krok k fantastické péči o pleť. Než si začnete užívat veškerých výhod sofistikované technologie power masky v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvilku pečlivému přečtení pokynů v této příručce.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento produkt pouze k danému účelu, jak je popsáno v této příručce.

⚠ UPOZORNĚNÍ: NENÍ POVOLENO TOTO ZAŘÍZENÍ JAKKOLIV UPRAVOVAT.

UFO™ 2 SHRNUTÍ

Upravený UFO™ 2 je díky ultrarychlému zahřívání a ještě širšímu spektru LED světla revolučním zařízením pro aplikaci power masky, které vám během několika sekund poskytne dokonalou pleť. Díky pokročilé technologii Hyper-Infusion kombinuje UFO™ 2 termoterapii s T-Sonic™ pulzací, aby se zlepšily přínosy Power Activated masek UFO™. UFO™ 2, které je vybaveno 8 různými LED světly, vám pomůže odhalit rafinovanou a zářivou pleť za pouhých 90 sekund!

SEZNAMTE SE SE SVÝM UFO™ 2

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapíná a vypíná zařízení, přepíná zařízení do režimu párování přes Bluetooth a vybírá léčebné procedury.

EXTRA HYGIENICKÝ SILIKON

Odolný vůči bakteriím a velmi měkký.

T-SONIC™ PULZACE

Zaručuje uklidňující masáž obličeje pro posílení záře pleti.

NABÍJECÍ PORT

Až 40 použití po 2,5hodinovém nabíjení.



KRYOTERAPIE

Stahuje póry pro plnější vzhled pleti.

PLNOSPEKTRÁLNÍ LED SVĚTLO

Pomáhá pokožce vypadat viditelně omlazeně pro přirozeně regenerovanou pleť.

TERMOTERAPIE

Zvláčňuje pokožku, aby zpřístupnila ingredience masky nejhlubším vrstvám pleti.

SVĚTELNÉ KONTROLKY

Rozsvícení indikuje, ke které proceduře masky je zařízení nastaveno.

PŘÍPEVNŮVACÍ KROUŽEK

Drží Power Activated masku UFO™ na místě.



UFO™ POWER ACTIVATED MASKA

Měkké masky z mikroválkna určené výhradně pro použití s UFO™.




USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoliv a kdekoliv s USB kabelem.



INTERAKTIVNÍ APLIKACE

Automaticky synchronizuje předprogramované procedury power masky se zařízením.

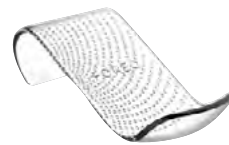

ELEGANTNÍ A STYLOVÝ STOJÁNEK

Chrání a vystavuje vaše UFO™ 2 a zároveň mu pomáhá rychle vyschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Pro odemčení zařízení a jeho registraci před prvním použitím si stáhněte aplikaci FOREO For You.
- 2 Připojte se k aplikaci pomocí Bluetooth na smartphonu a stisknutím univerzálního tlačítka napájení na UFO™ 2 synchronizujte své zařízení s aplikací.
- 3 V aplikaci naskenujte čárový kód masky a postupujte podle uvedených pokynů.



Zde si stáhněte aplikaci FOREO




Odstraňte přípevňovací kroužek z UFO™ 2.



Vyndejte Power Activated masku UFO™ ze sáčku.




Zajistěte masku na zařízení pomocí přípevňovacího kroužku na místě tak, aby logo FOREO směřovalo nahoru.

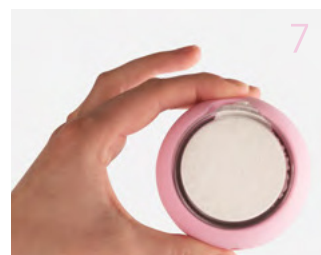

Užijte si proceduru power masky!

PŘIDÁNÍ NOVÉ PROCEDURY

Masky Make My Day a Call It a Night jsou na vašem zařízení již přednastaveny. Jakákoli jiná procedura masky musí být před prvním použitím aktivována prostřednictvím aplikace. Poté lze k proceduře přistupovat prostřednictvím aplikace nebo pomocí univerzálního tlačítka.

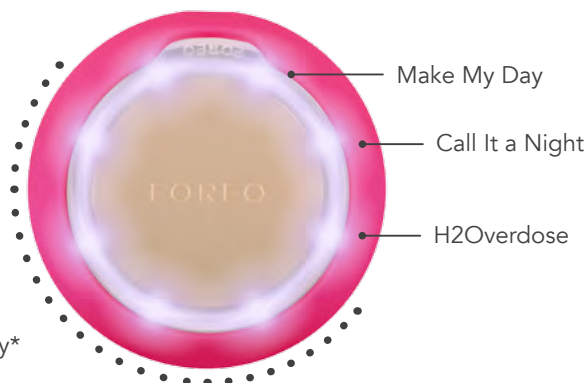

Všechny další procedury masky*

POUŽITÍ UFO™ 2 BEZ APLIKACE

- 1 Stisknutím univerzálního tlačítka zapnete a aktivujete proceduru ošetření Make My Day.
- 2 Opětovným stisknutím aktivujete proceduru Call It a Night, a tak pokračujte dále u každé masky. (Pokud je například H2Overdose ve vaší aplikaci na 3. pozici, aktivujte proceduru H2Overdose trojným stisknutím univerzálního tlačítka).
- 3 Vaše procedura power masky je připravena začít!

CHCETE JEŠTĚ VÍČ?

Pokud jedna procedura UFO™ 2 nestačí, stiskněte znovu univerzální tlačítko do 30 sekund po skončení procedury a spusťte stejné ošetření ještě jednou! Můžete si také přizpůsobit svou power masku tím, že si vytvoříte vlastní léčebnou proceduru prostřednictvím aplikace, kde si můžete vybrat/upravit každou technologii, která bude doprovázet vaši Power Activated masku UFO™ Power Activated Mask.

APLIKACE

Začněte s čistou a suchou pokožkou. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nejprve čištění přístrojem LUNA™.

- 1 Maskou připevněnou k vašemu zařízení UFO™ 2 jemně klouzejte po vaší pleti a rovnoměrně rozetřete esenci masky.
- 2 Pomocí zařízení UFO™ 2 vmasírujte krouživým pohybem složky masky do pokožky. Pohybujte zařízením krouživým pohybem ve směru hodinových ručiček po obličeji, počínaje bradou, poté se přemístěte nahoru na pravou tvář a čelo. Pokračujte dolů na levou tvář až k bradě a krku. Tento pohyb opakujte až do ukončení procedury.
- 3 Jemně vklepejte zbývající esenci do pokožky nebo odstraňte přebytek odličovacím tampónkem. V případě potřeby použijte hydratační krém dle vašeho výběru.

*U očních masky jemně přejíždějte po celém obrysu oka, střídáte levé a pravé oko, dokud není procedura ukončena.



ČIŠTĚNÍ UFO™ 2

Sundejte plastový kroužek ze zařízení a vyhodte masku z mikrovlákná. Jelikož je UFO™ 2 100% voděodolný, můžete UFO™ 2 i plastový kroužek opláchnout pod teplou tekoucí vodou. Osušte suchým hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme po použití postříkat zařízení silikonovým čistícím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože by mohly dráždit pokožku a poškodit silikon.

DŮLEŽITÉ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

Vaše zařízení UFO™ 2 je určeno k použití pouze společně s doprovodnými maskami. Zařízení by nikdy nemělo být v přímém kontaktu s pokožkou/obličejem, když je zapnuté.

- Pokud máte kožní potíže nebo jiné zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Používání UFO™ 2 by mělo být příjemné - v případě nepohodlí okamžitě přerušete používání a vyhledejte lékaře.
- Při používání UFO™ 2 v oblasti pod očima buďte obzvláště opatrní a zamezte styku zařízení s očními víčky nebo samotnými očima.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílení vašeho UFO™ 2 s jinou osobou.
- Nenechávejte své UFO™ 2 na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémním teplotám nebo vroucí vodě.
- UFO™ 2 má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí při používání tohoto zařízení postupovat obezřetně a opatrně.
- Pokud je vaše zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, jakož i těmi, kteří mají snížené fyzické a duševní schopnosti, je nutný přísný dohled.
- Nepoužívejte, pokud se zdá, že je tento produkt jakýmkoli způsobem poškozen. Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné součásti.
- Používejte toto zařízení pouze k danému účelu, jak je popsáno v této příručce. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo máte-li jakékoli další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte [Foreo.com/support](https://foreo.com/support).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je potřeba učinit v případě změn výkonu UFO™ 2.

Pokud se UFO™ 2 neaktivuje stisknutím univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte své UFO™ 2 pomocí nabíjecího kabelu USB, dokud světlo nezáří rovnoměrně. Nabíjení během plných 2,5 hodiny vydrží až 40 procedur.

Pokud UFO™ 2 nelze vypnout nebo tlačítka rozhraní neodpovídají:

- Mikroprocesor je dočasně mimo provoz. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujte zařízení.

Pokud se UFO™ mini 2 nesynchronizuje s aplikací FOREO For You:

- Vypněte a opětovně zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO For You a následně ji opětovně otevřete, aby se proces znovu rozběhl.
- Zkontrolujte, zda není potřeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi na vašem mobilním zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUKA REGISTRACE

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se stažením aplikace FOREO For You a postupujte dle uvedených pokynů.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od původního data nákupu na závady způsobené vadným zpracováním nebo materiálem vzniklé při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené přiměřeným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo zanedbáním. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) ruší platnost záruky.

Pokud objevíte závadu a informujete FOREO během záruční doby, FOREO dle svého uvážení zařízení bezplatně vymění. Nárok na uplatnění záruky musí být doložen přiměřeným důkazem o tom, že datum reklamace je v záruční době. Pro potvrzení záruky si, prosím, uschovejte původní záruční list společně s těmito záručními podmínkami po dobu záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruku, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat možnost týkající se uplatnění záruky. Náklady na přepravu se neproplácí. Tento závazek kromě vašich zákonných práv jakožto spotřebitele nijak neovlivňuje tato práva.

INFORMACE O LIKVIDACI


Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy separovaného sběru odpadu).



Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že by se s tímto zařízením nemělo zacházet jako s domácím odpadem, ale mělo by být odvezeno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete zabránit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Recyklace materiálů pomůže také zachovat přírodní zdroje.

Pro další informace o recyklaci vašeho zařízení kontaktujte, prosím, místní sběrný dvůr nebo místo nákupu.

VYBITÍ BATERIE

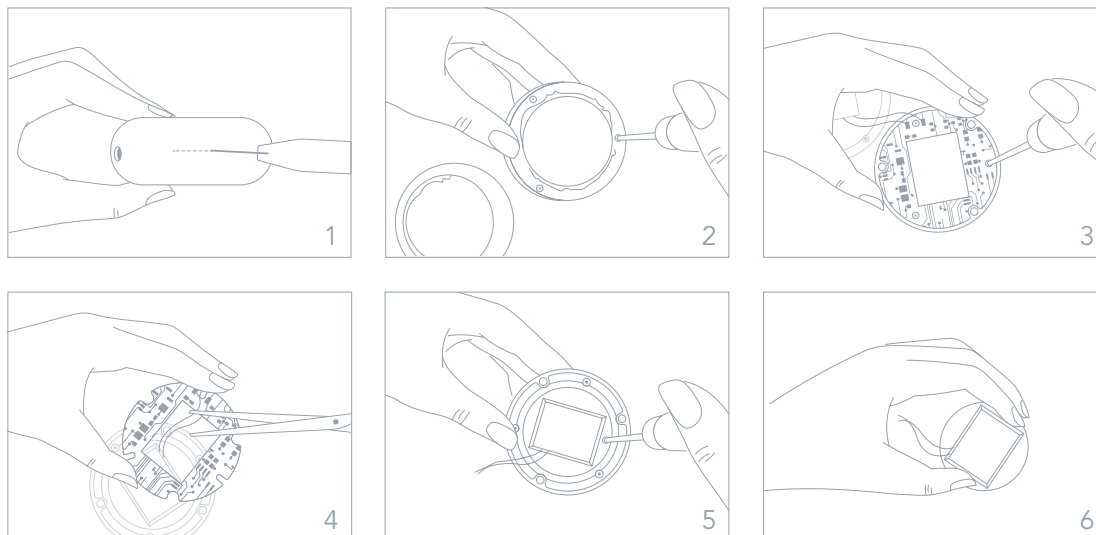

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Nezávadný silikon a PC + ABS, slitina hliníku
BARVA:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
VELIKOST:	72,5 mm x 31,4 mm
VÁHA:	146,2 g
BATERIE:	Li-Ion 1200mAh 3,7V
TEPLOTA:	5-45 stupňů Celsia
POUŽITÍ:	Až 40 použitá na jedno nabití
POHOTOVOST:	180 dní
FREKVENCE:	180 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1 tlačítkové

Odpovědnost: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. FOREO ani jeho prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za případné zranění nebo poškození, ať už fyzické či jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z použití tohoto zařízení. FOREO si dále vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a čas od času provádět změny jejího obsahu bez povinnosti informovat jakoukoli osobu o takové revizi nebo změnách.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly vést k zábraně provozování zařízení uživatelem.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení způsobuje užívání a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nepříznivé rušení rádiového vysílání. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje nepříznivé rušení rádiového nebo televizního vysílání, které lze vysledovat vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o opravu tohoto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Model může být vyměněn za lepší bez předchozího upozornění.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY UFO™ 2

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ DOSTANU SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?

Gratulujeme k objevování chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You, odemkněte a zaregistrujte své zařízení. (Další informace naleznete v části nazvané „APLIKACE“).

JAK ZAHÁJÍM SVOU PRVNÍ PROCEDURU?

Nejprve si pečlivě očistěte a osušte obličej a krk - pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme očistit pleť pomocí přístroje LUNA™. Poté nasadte UFO™ Power Activated masku na své zařízení UFO™ 2. Nakonec aktivujte prostřednictvím aplikace svou proceduru masky UFO™ 2 nebo postupujte krok za krokem podle podrobného návodu Jak na to.

JAK ZAPNU/VYPNU SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?

Své zařízení UFO™ 2 zapnete stisknutím univerzálního tlačítka. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte univerzální tlačítko po dobu 3 sekund. Po dokončení předprogramované procedury masky se zařízení automaticky vypne.

CO OBSAHUJE MÉ BALENÍ S UFO™ 2?

1 UFO™ 2, 1 USB nabíjecí kabel, 1 masku Make My Day, 1 návod k obsluze, 1 Quick Start Guide a 1 stojánek.

ZAŘÍZENÍ UFO™ 2

JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?

Procedury power masky na zařízení UFO™ 2 byly vyvinuty pro použití dvakrát denně, ráno a večer. V závislosti na potřebách vaší pokožky a osobních preferencích je však můžete použít častěji či méně často.

JAK DLOUHO TRVÁ KAŽDÁ LÉČEBNÁ PROCEDURA?

Ošetření maskami Make My Day a Call It a Night zabere pouhých 90 sekund. Doba trvání všech ostatních procedur se liší v závislosti na nejúčinnější kombinaci technologií.

JSOU VŠECHNY PROCEDURY UFO™ 2 STEJNÉ?

Ne. Každá UFO™ Power Activated maska je spárována s jedinečnou léčebnou procedurou pro dosažení optimálních výsledků.

JE MÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA CITLIVOU KŮŽI?

Zařízení UFO™ 2 jsou bezpečná a vhodná pro všechny typy pleti. Kromě toho si v závislosti na konkrétních potřebách vaší pokožky můžete vybrat z řady různých UFO™ Power Activated masek, které uspokojí různá přání v péči o pleť.

MOHU POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 V OBLASTI OČÍ?

Ano, zařízení UFO™ 2 lze bezpečně používat v oblasti pod očima. Doporučujeme jemně přejíždět zařízením v oblasti očí a dávat pozor, abyste vyvinuli pouze minimální tlak.

MOHU POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 PO PLASTICKÉ OPERACI, BOTOXU ČI KOŽNÍCH VÝPLNÍCH?

Zařízení UFO™ 2 nabízí šetrné ošetření obličeje, vhodné pro všechny typy pleti. Pokud jste však v nedávné době podstoupili nějaké lékařské zákroky, měli byste se před použitím poradit se svým lékařem.

MOHU VYUŽÍVAT POUZE PROCEDURU SAMOTNÉHO LED SVĚTLA, BEZ POUŽITÍ MASKY NEBO DANÉHO PROGRAMU?

Ne, nedoporučujeme používat zařízení UFO™ 2 bez masky nebo přednastaveného programu, protože nenabízí stejnou účinnost či výsledky jako v kombinaci s UFO™ Power Activated maskou.

MOHU POUŽÍVAT SVŮJ FOREO LUNA™ S UFO™ 2?

Ano! UFO™ 2 a LUNA™ se skvěle doplňují - přístroj na čištění obličeje LUNA™ jemně odlupuje odumřelé kožní buňky, stahuje póry a odstraňuje až 99,5% nečistot a mazu, čímž zanechává perfektní podklad pro proceduru masky UFO™ 2.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UFO™ 2 A UFO™ mini 2?

UFO™ 2 a UFO™ mini 2 nabízejí sofistikovanou proceduru power masky, kterou si můžete užít během pouhých 90 sekund. UFO™ 2 je však vybaven kryoterapií, která okamžitě ochlazuje pleť a stahuje tak póry, v důsledku čehož pleť vypadá jemněji.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UFO™ A UFO™ 2?

Na rozdíl od UFO™ byl UFO™ 2 obohacen o ultrarychlou termoterapii a plnospektrální LED světla (celkem 8), které nabízejí efektivnější a účinnější zážitek z masky než kdykoli předtím!

APLIKACE

PROČ JE NUTNÉ STÁHNOUT SI APLIKACI FOREO PŘED TÍM, NEŽ ZAČNU POUŽÍVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?

Všechny aplikací řízené produkty FOREO je při prvním zapnutí nutno aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You. To pomáhá chránit před paděláním/kopírováním produktů FOREO, usnadňuje to registraci záruky a chrání vaše investice.

JAK SPÁRUJI SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 S APLIKACÍ FOREO?

Stáhněte si do svého smartphonu nebo tabletu aplikaci FOREO For You a zapněte Bluetooth. Jedním stisknutím univerzálního tlačítka zapnete zařízení. Blikající bílé světlo znamená, že je vaše zařízení v režimu párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte své zařízení UFO™ 2.

FUNGUJE MÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 BEZ APLIKACE?

Ano, obě zařízení můžete používat manuálně a nevyžadují použití aplikace FOREO For You. Chcete-li však zařízení odemknout pro první použití, musíte jej zaregistrovat prostřednictvím aplikace FOREO For You. Procedury masek Make My Day a Call It a Night jsou předprogramovány na UFO™ 2 a nevyžadují použití aplikace FOREO. Chcete-li však odemknout všechny zbývající UFO™ Power Activated masky, musíte buď vybrat svou proceduru, nebo naskenovat čárový kód ze zadní strany každého balení UFO™ Power Activated masky pomocí aplikace a proceduru aktivovat - maska se poté automaticky synchronizuje s vaším zařízením, takže k němu bude přístě možné přistupovat ručně. Chcete-li přizpůsobit svou proceduru power masky, musíte to udělat přes aplikaci.

MOHU SI PŘIZPŮSOBIT PROCEDURU POWER MASKY?

Ano. Přestože každá UFO™ Power Activated maska přichází s doporučenou předprogramovanou léčebnou procedurou, můžete si přizpůsobit svůj zážitek z masky vytvořením své vlastní léčebné procedury pomocí aplikace FOREO For You. V aplikaci si můžete vybrat preferovanou úroveň LED světla LED a T-Sonic™ pulzace a vybrat, zda si přejete, aby vaše personalizovaná procedura zahrnovala termoterapii nebo kryoterapii..

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A ÚDRŽBA

CO ZNAMENÁ, KDYŽ MÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 PRAVIDELNĚ BLIKÁ?

Blikající světlo po obvodu zařízení znamená, že je zařízení UFO™ 2 v režimu párování přes Bluetooth nebo že je potřeba zařízení nabít. Synchronizujte zařízení dle pokynů v aplikaci.

JAK NABIJU SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?

Zařízení UFO™ 2 se dobíjí přes USB, s dobou nabíjení dvě a půl hodiny, která umožňuje až 40 použití.

JAK VYČISTÍM SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?

Sundejte plastový kroužek ze zařízení a vyhodte masku z mikroválků. Jelikož je UFO™ 2 100% voděodolný, můžete UFO™ 2 i plastový kroužek opláchnout pod teplou tekoucí vodou. Osušte je suchým hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme po použití postříkat zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou.

UFO™ POWER ACTIVATED MASKY

MOHU UFO™ POWER ACTIVATED MASKU POUŽÍT VÍCEKRÁT?

Každá UFO™ Power Activated maska je určena pouze na jedno použití. Pokud však jedna procedura UFO™ 2 nestačila, stiskněte do 30 sekund po skončení procedury opětovně univerzální tlačítko a spusťte znovu stejné ošetření!

JE POTŘEBA PO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 SMÝT ZBYTKY ESENCE MASKY?

Ne, technologie Hyper-Infusion je speciálně navržena tak, aby pomohla složkám masky rychleji se vstřebávat hlouběji do pokožky. Po ošetření jednoduše vmasírujte zbývající esenci do své pokožky nebo odstraňte přebytek vatovým tampónkem.

JAK ZJISTÍM, ŽE JE MOJE POWER ACTIVATED MASKA UFO™ PRAVÁ?

Pomocí aplikace FOREO For You můžete naskenovat čárový kód z obalu masky a ověřit jeho pravost.

©2020 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

DISTRIBUTOR V EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO.

DISTRIBUTOR V USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTOR V AUSTRÁLII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIE.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ FOREO VE ŠVÉDSKU.

VYROBENO PRO FOREO AB.

WWW.FOREO.COM