

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### PERSONALISIEREN SIE IHRE BEHANDLUNG

#### kissfoliator™ Kisser

Der kissfoliator entfernt abgestorbene Hautschüppchen mithilfe von Aluminiumoxid-Kristallen für geschmeidige und unwiderstehliche Lippen.

#### Intelligente Behandlungsgeschwindigkeiten

Modus 1: Standardgeschwindigkeit für eine schnelle Behandlung

Modus 2: Geringe Geschwindigkeit für eine intensivere, gezielte Behandlung


#### Wählen Sie Ihren Kisser

Die Kisser-Aufsätze sind in zwei Größen erhältlich. Testen Sie beide Aufsätze und entscheiden Sie, welcher am besten für Ihre Lippen geeignet ist.

#### hydrakiss™ Lippenmaske

Als zusätzlichen Feuchtigkeitsspender und zur Verbesserung der Anti-Aging-Ergebnisse der Behandlung empfehlen wir nach Wunsch die Verwendung einer hydrakiss™ Maske.

### ANWENDUNG

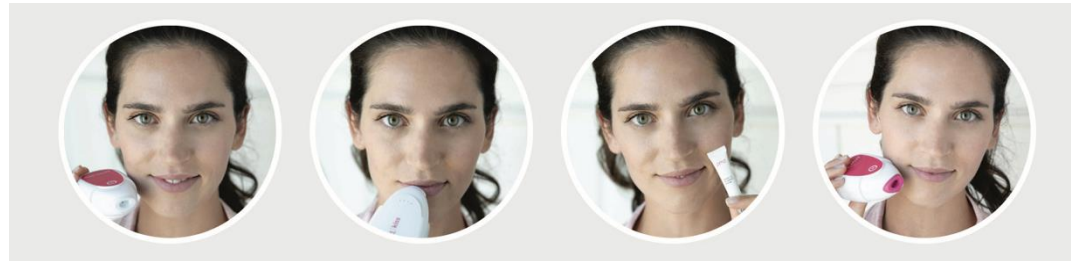

**Schritt 1** Setzen Sie den Kissfoliator-Aufsatz in den PMD Kiss ein.

**Schritt 2** Schalten Sie den PMD Kiss ein. Beginnen Sie mit gereinigten, trockenen Lippen und lassen Sie den PMD Kiss sanft über Ihre Lippen gleiten, während das Gerät pulsiert. Für eine intensivere Behandlung können Sie mehr Druck ausüben oder reiben. Nach Bedarf auf trockenen, rissigen Lippen verwenden.

**Schritt 3** Tragen Sie das Smart Lip Plumping Serum auf die gereinigten, trockenen Lippen auf.

**Schritt 4** Wechseln Sie den PMD Kiss-Aufsatz. Während das Smart Lip Plumping Serum einwirkt, entfernen Sie den Kissfoliator-Aufsatz und setzen Sie den Kisser-Aufsatz ein.



**Schritt 5** Schalten Sie den PMD Kiss ein. Führen Sie den Kisser-Aufsatz dicht und direkt an die Lippe, sodass er sich ansaugen kann. Lassen Sie den PMD Kiss so lange pulsieren und über Ihre Lippen gleiten, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

**Schritt 6** Tragen Sie die hydrakiss-Lippentuchmaske auf und lassen Sie sie mindestens 5 Minuten einwirken, um ein optimales Anti-Aging-Ergebnis zu erzielen.

**Schritt 7** Tragen Sie Ihr bevorzugtes Lipgloss oder einen Lippenstift auf, um den Look Ihrer Lippen zu optimieren.

**Schritt 8** Starten Sie mit einem neuen Gefühl der #brilliantconfidence in den Tag.

**MEHR FRISCHE. MEHR STRAHLKRAFT.**  
**#brilliantconfidence**