

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

### PERSONALIZAȚI-VĂ TRATAMENTUL

#### kissfoliator™ Kisser

Kissfoliator îndepărtează celulele cutanate moarte, folosind cristale antibacteriene de oxid de aluminiu, pentru buze netede și bune de sărutat.

#### Vitezele tratamentului inteligent

Modul 1: Viteză standard, pentru un tratament rapid

Modul 2: Viteză redusă pentru un tratament țintit, mai intens


#### Alegeți-vă propriul Kissser

Capetele Kissser sunt disponibile în două mărimi. Testați-le pe amândouă, pentru a decide care este cel mai potrivit pentru buzele dvs.

#### hydrakiss™ Lip Mask

Pentru buze mai hidratate sau pentru a intensifica efectele anti-aging ale tratamentului, folosiți o mască hydrakiss™.

### MOD DE UTILIZARE

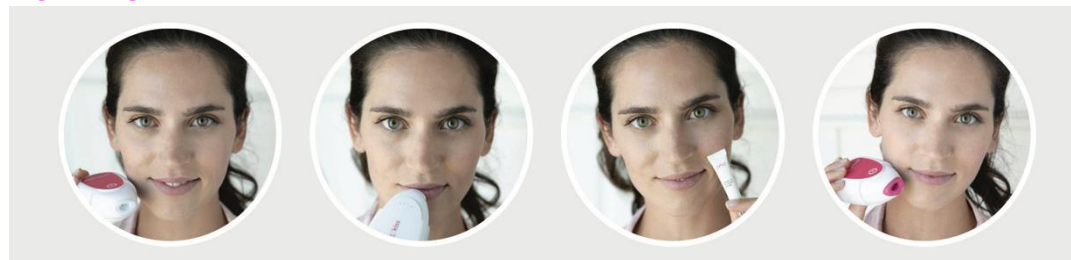

**Pasul 1** Introduceți capul Kissfoliator în PMD Kiss.

**Pasul 2** Porniți PMD Kiss. Glisați delicat PMD Kiss peste buzele curate și uscate, în timp ce aparatul pulsează. Pentru un tratament mai intens, exercitați o ușoară presiune sau frecați buzele. Folosiți după dorință pe buzele uscate și crăpate.

**Pasul 3** Aplicați Smart Lip Plumping Serum pe buzele uscate și curate.

**Pasul 4** Schimbați capetele PMD Kiss. În timp ce Smart Lip Plumping Serum își face efectul, înlăturați capul Kissfoliator și introduceți în locul său capul Kissser.



**Pasul 5** Porniți PMD Kiss. Plasați capul Kissser ferm și direct pe buză, creând o etanșeizare pentru a facilita aspirația. Lăsați PMD Kiss să pulseze și să alunece pe buze, până la obținerea rezultatului dorit.

**Pasul 6** Aplicați pe buze masca folie hydrakiss, timp de cel puțin 5 minute, pentru intensificarea efectelor anti-aging.

**Pasul 7** Aplicați balsamul sau rujul de buze preferat, pentru accentuarea frumuseții buzelor.

**Pasul 8** Începeți ziua cu atitudine nouă de #brilliantconfidence.

**FIȚI FRESH. FIȚI RADIOASĂ.**

**#brilliantconfidence**