

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ОБЕРІТЬ ПРОЦЕДУРУ, ЯКА ВІДПОВІДАТИМЕ ВАШИМ ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПОТРЕБАМ

kissfoliator™ Kissер

Насадка kissfoliator видаляє відмерлі клітини шкіри за допомогою антибактеріальних кристалів оксиду алюмінію, даруючи гладенькі губи, які так і хочеться поцілувати.

Режими швидкості смарт-процедури

Режим 1: стандартна швидкість для швидкої процедури

Режим 2: низька швидкість для більш інтенсивного догляду за конкретними ділянками


Оберіть свій Kissер

Доступні два розміри насадок Kissер. Випробуйте обидві насадки й оберіть ту, яка краще підходить для ваших губ.

Маска для губ hydrakiss™

Для додаткового зволоження губ, а також для підсилення антивікового ефекту процедури можна скористатися маскою для губ hydrakiss™.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

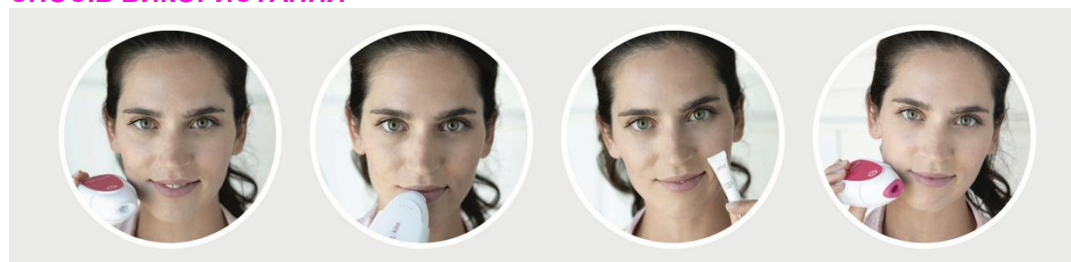

Крок 1 Вставте насадку Kissfoliator у пристрій PMD Kiss.

Крок 2 Увімкніть PMD Kiss. Прикладіть його до чистих сухих губ, і, поки пристрій пульсує, плавно рухайте ним по всій площині губ. Для більш інтенсивної дії спробуйте сильніше натиснути на пристрій або потерти ним губи. За потреби пристрій можна використовувати для сухих потрісканих губ.

Крок 3 Нанесіть на чисті сухі губи сироватку для надання об'єму Smart Lip Plumping Serum.

Крок 4 Замініть насадки PMD Kiss. Чекаючи, доки сироватка Smart Lip Plumping Serum подіє, зніміть насадку Kissfoliator і вставте натомість насадку Kissер.



Крок 5 Увімкніть PMD Kiss. Щільно прикладіть насадку Kissер безпосередньо до губи так, щоб утворився вакуум. Поки PMD Kiss пульсує, переміщуйте його по всій площині губ, доки не досягнете бажаного результату.

Крок 6 Щоб підсилити антивіковий ефект, нанесіть на губи тканинну маску hydrakiss і залиште щонайменше на 5 хвилин.

Крок 7 Нанесіть на губи улюблений блиск або губну помаду, щоб зробити їх ще гарнішими.

Крок 8 Розпочніть день із новим відчуттям #brilliantconfidence.

**ВИПРОМІНЮЙТЕ СВІЖІСТЬ. ВИПРОМІНЮЙТЕ СЯЙВО.
#brilliantconfidence**