

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Síťové napětí: 100-240 V AC, 50 Hz, 2,5 W, třída II, IPX7
Baterie: dobijecí Ni-MH
Provozní doba: 40 minut (plně vybité baterie)
Doba nabíjení u prvního nabíjení: 12 hodin

Technické parametry

Doba nabíjení: 12 hodin
Toto zařízení je v souladu se směrnicemi EU
(EMC / RoHS) o nízkém napětí.
Certifikováno: GS Intertek



Likvidace

Baterie musí být ze zařízení odstraněna předtím než odevzdáte přístroj do šrotu. Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení vyjmutím baterie. Zlikvidujte vybité baterie správně. Využijte přitom speciální kontejnery určené pro likvidaci nabíjecích baterií v obchodech nebo na veřejných sběrných místech. Při likvidaci hlavní jednotky upevněte lepicí pásku nebo štítek k elektrodám na baterii. Nevhazujte akumulátor do ohně.

Správná likvidace tohoto produktu:

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být používán s jinými domácími zařízeními po celé EU. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí a ochránilo lidské zdraví ohrožené nekontrolovanou likvidací, recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen a kde bude použit pro recyklaci.



Tým pro farmacie s.r.o.
Veselá 199/5
60200 Brno

www.megasmile.cz
info@megasmile.cz

megasmile


SONIC GENERATION®

Návod k použití

Srdečně gratulujeme k nákupu Megasmile Sonic Black Whitening - sonického zubního kartáčku nejnovější generace. Megasmile Sonic Black Whitening splní rozličné potřeby a požadavky vaší rodiny. Při správném používání pomůže udržet zdraví ústní dutiny na dlouhou dobu.

TECHNOLOGIE SONICKÉHO ZUBNÍHO KARTÁČKU MEGASMILE SONIC BLACK WHITE- NING

Megasmile Sonic Black Whitening je dobíjecí hydroaktivní zubní kartáček se sonickou technologií pro 100% všestranné čištění zubů. Tlakové vlny na zvukové technologii vytvářejí pulzující proudění kapalin, které snadno proniká do těch nejužších mezizubních mezer. Odstraňují nečistoty a zabarvení kolem každého zubu. Zuby jsou pak přirozeně bílé a zdravé. Hlavice kartáčku Dual Clean čistí zubní povrch dvou zubů zároveň a je vybavena mikrovlákný KONEX®, která zároveň chrání dásně.

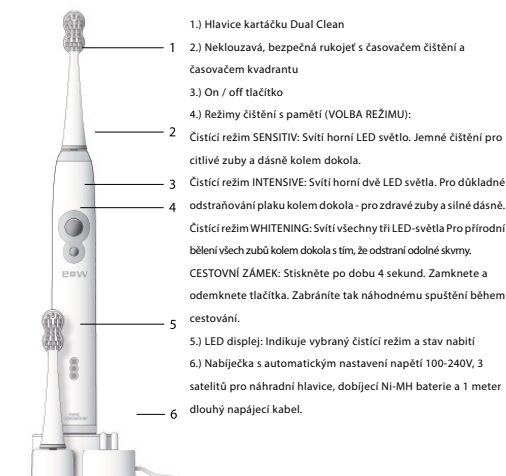

- 1.) Hlavice kartáčku Dual Clean
- 2.) Neklouzavá, bezpečná rukojeť s časovačem čištění a časovačem kvadrantu
- 3.) On / off tlačítka
- 4.) Režimy čištění s pamětí (VOLBA REŽIMU):
Čistící režim SENSITIV: Svítí horní LED světlo. Jemné čištění pro citlivé zuby a dásně kolem dokola.
Čistící režim INTENSIVE: Svítí horní dvě LED světla. Pro důkladné odstraňování plaku kolem dokola - pro zdravé zuby a silné dásně.
Čistící režim WHITENING: Svítí všechny tři LED-světla Pro přírodní bělení všech zubů kolem dokola s tím, že odstraní odolné skvrny.
CESTOVNÍ ZÁMEK: Stisknete po dobu 4 sekund. Zamknete a odemknete tlačítka. Zabrání tak náhodnému spuštění během cestování.
- 5.) LED displej: Indikuje vybraný čistící režim a stav nabití
- 6.) Nabíječka s automatickým nastavením napětí 100-240V, 3 satelitů pro náhradní hlavice, dobíjecí Ni-MH baterie a 1 metr dlouhý napájecí kabel.

Bezpečnostní upozornění

Varování:

- Pokud jste absolvovali operaci v ústní dutině nebo operaci dásní v poslední době, obraťte se na svého zubaře, pokud dochází k nadměrnému krvácení po použití tohoto zubního kartáčku nebo pokud krvácení pokračuje.
- Nerozebírejte přístroj (Výjimka: likvidace).

- Zubní kartáčky mohou používat pod dozorem také děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Upozornění:

- Napájecí kabel nemůže být nahrazen. Zlikvidujte zařízení, pokud je kabel poškozen.
- Udržujte nabíječku mimo dosah vody či jiných kapalin! Nenechávejte ji v blízkosti vany nebo umyvadla.
- Uchovávejte nabíječku mimo horké povrchy a chraňte ji před přímým slunečním zářením, pokud je připojena do zásuvky.
- Megasmile Sonic Black Whitening odpovídá všem bezpečnostním normám pro elektromagnetická zařízení. Máte-li implantovaný přístroj, kontaktujte svého lékaře nebo výrobce implantovaného zařízení.

Prosím přečtěte si tento návod pečlivě před použitím zařízení a uschovejte jej pro budoucí použití.

SPUŠTĚNÍ

Přiložte hlavici kartáčku tak, aby štetiny směřovaly směrem k přední straně rukojeti.



Pevně zatlačte hlavici kartáčku na kovový nástavec, dokud nezapadne na své místo. Vložte zástrčku nabíječky do zásuvky a rukojeť do nabíječky. LED displej se rozsvítí na dobu asi 10 sekund. Poté všechny LED světla vypnou. Megasmile Sonic Black Whitening sonický zubní kartáček se nabíjí.

Indikátor nabití

Nabíjení trvá asi 12 hodin. Nabíjte sonický zubní kartáček Megasmile Sonic Black Whitening před prvním použitím.

LED displej bude blikat po dobu 10 sekund. V případě, že zařízení je mimo nabíječku, světlo pak zhasne.

Tři blikající LED kontrolky indikují plně nabitou baterii. Pokud bliká jen jedna kontrolka, je baterie nabitá méně než z 25%.

Kartáček nenechávejte v základně pokud jej nemáte v úmyslu nabit.

POUŽITÍ

Opatrně přiložte kartáček na zuby v mírném úhlu k dásni.


Zubní kartáček si pamatuje poslední zvolený režim a automaticky se spustí stisknutím tlačítka v tomto režimu (paměť). Opakovaným stlačením knoflíku VOLBA REŽIMU změníte čistící režim:

SENSITIV: svítí horní LED světlo
INTENSIV: svítí horní dvě LED světla
WHITENING: svítí všechna tři LED světla



Přesuňte kartáček na zuby bez tlaku, způsobem od zubu k zubu a nechte kartáček dělat jeho práci. Přidržte u každého zubu po dobu asi 2-3 vteřin a přejděte na další. Ujistěte se, že delší štětiny kartáčku proniknou do všech mezizubních prostor. U každého kvadrantu, přesuňte kartáček nejprve podél vnitřní strany zubů na povrch a pak po vnější straně zubů.

Po 30 vteřinách signalizuje zubní kartáček změnu kvadrantu krátkým přerušením jeho vibrací. Opakujte tento proces čištění pro každý kvadrant. Když čas vyprší, přístroj se automaticky vypne. V případě potřeby je možné provádět čištění jednoduše znovu a aktivovat zařízení.

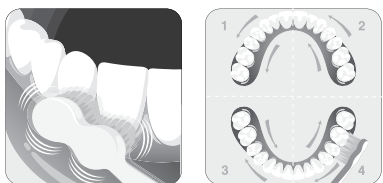

Důležité: nevyvíjejte tlak nazuby. Jemný kontakt s povrchem podél linie zubů povede k lepšímu výsledku čištění a udržení zdraví vašich zubů a dásní.

Sonický zubní kartáček Megasmile Sonic Black Whitening je také bezpečný pro použití na: rovnátka, implantáty a zubní náhrady (výplně, korunky, fazety).

Vyměňte hlavice kartáčku Megasmile Sonic Black Whitening? každé 3 měsíce z hygienických důvodů. Hlavice kartáčku se opotřebávají rychleji při použití na rovnátka.

Zeptejte se svého zubního lékaře, dentální hygienistky nebo asistenta po každém ošetření, jak používat sonický zubní kartáček. Dentální odborníci jsou vždy k dispozici pro všechny vaše dotazy.

REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Megasmile Sonic Black Whitening je určen pro různé použití. V závislosti na potřebách uživatele je možné kdykoliv změnit režim čištění.

Výběr režimu a funkce paměti

Různé režimy lze vybrat opakovaným stisknutím tlačítka pro výběr režimu. Megasmile Sonic Black Whitening si pamatuje poslední zvolený režim, takže se nemusí při příštím použití znovu aktivovat (funkce paměť).

Režim čištění SENSITIVE

Po zapnutí vznikají zvukové vlny, které se pohybují s rychlostí až 45 000 kmitů za minutu. Jemná vlákna umožňují štětinám vibrovat jemně a pronikají i do těch nejmenších zubních mezer. Tento jemný a účinný způsob čištění je zároveň velmi šetrný k dásním a sklovině odhalených zubních krčků. Doporučujeme režim SENSITIVE zejména pro osoby s citlivými zuby, odhalenými zubními krčky, při paradontóze, implantátech, mústcích a jiných zubních náhradách. Tento režim je ideální pro pravidelnou péči o zuby se zubními pastami obsahujícími fluoridy.

Režim čištění INTENSIVE

Po zvolení čistícího režimu INTENSIVE svítí dvě horní LED-světla. Díky sonické technologii se vytváří pulzující vlny tekutiny, která snadno proniká i do těch nejužších mezizubních prostor a neutralizuje škodlivé nečistoty, dokonce i ve skrytých výklencích. Tento režim zajišťuje optimální čištění pro zdravé zuby. Je doporučován jako základní režim.

Režim čištění WHITENING

Volbou režimu WHITENING svítí všechna tři LED světla. Zvýšený režim pohybů na povrchu zubů umožní důkladnější odstranění nepříjemného zbarvení (pigmentace). Doporučujeme zvolit režim WHITENING zejména pro případy odstranění zbarvení, které vzniklo v důsledku nikotinu, vína, čaje nebo kávy, a pro příležitostně extra důkladné čištění zubů.

Časovač kvadrantu

Časovač kvadrantu je v intervalu 30 vteřin. Časovač, který krátce přeruší čištění, signalizuje doporučenou změnu dalšího kvadrantu. To vám připomene, abyste čistili všechny čtyři kvadranty úst rovnoměrně a důkladně.

Časovač čištění

Zubní lékaři doporučují čištění zubů po dobu minimálně 2 minut. Po doporučené době čištění a nezávisle na tom, jaký režim byl vybrán, se sonický zubní kartáček Megasmile Black Whitening vypne.

CESTOVNÍ ZÁMEK

U sonického zubního kartáčku Megasmile Black Whitening je cestovní zámek, který se zamkne a odemkne tlačítkem, aby se zabránilo náhodnému spuštění během cestování.

Uzamčení zařízení:

Aby bylo možné zamknout kartáček, stiskněte tlačítko:

VOLBA REŽIMU po dobu asi 4 vteřin, dokud bliká LED světlo. Zařízení je nyní v bezpečí před náhodnou aktivací.

Odemknout:

Chcete-li odemknout zařízení stiskněte tlačítko pro výběr režimu po dobu asi 4 vteřin. LED-světlo ukazuje blikáním, že zařízení je odemčeno. Alternativou je, když je zubní kartáček zpět na nabíjecí základně. Pak se odemkne automaticky.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Mám citlivé zuby a dásně. Jaký je nejlepší způsob, jak se čistit se sonickým zubním kartáčkem Megasmile Black Whitening

Pokud máte citlivé zuby a dásně, doporučujeme nastavit zkušební období po dobu 1-2 týdnů. Během této doby doporučujeme použít režim SENSITIVE.

Jak mohu nejlépe odstranit zbarvení na zubech?

Doporučujeme režim WHITENING, který zbaví zubů trvalého zbarvení.

Co mám vzít v úvahu, pokud nosím rovnátka nebo mám zubní náhrady (mústky, implantáty, korunky nebo fazety) a chci si čistit zuby sonickým zubním kartáčkem Megasmile Black Whitening?

V tomto případě použijte režim INTENSIVE, který odstraní plak a bakterie. V případě rovnátek pohybujte jemně kartáčkem mezi drátky rovnátek a dásněmi krouživými pohyby.

Před krátkou dobou jsem se podrobil chirurgické operaci. Mohu používat sonický zubní kartáček Megasmile Sonic Black Whitening?

Vždy konzultujte možnosti ústní hygieny u svého dentálního chirurga nebo zubního lékaře a postupujte podle uvedených pokynů po operaci. Jakmile se vaše zuby a dásně vyléčí, můžete pokračovat v čištění zubů pomocí Megasmile Sonic Black Whitening?.

Čištění přístroje

Opláchněte kartáček a štětiny po každém použití pod tekoucí vodou. Vyměňte kartáček z rukojeti a opláchněte připojení alespoň jednou týdně. Vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, otřete kartáček ručnickem a teprve poté jej zapojte do elektrické sítě, pokud je zcela suchý. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Potom vyčistěte spotřebič a uložte ho na suchém a chladném místě.

Záruka

Tým pro farmacie s.r.o. poskytuje záruku na produkty po dobu 2 let od data nákupu. Tato záruka je stejná v každé zemi, ve které se Megasmile Sonic Black Whitening? zařízení prodává.

Tato záruka se nevztahuje na:

Vady způsobené nevhodným použitím, opotřebením a špatnou manipulací. Zejména se to týká výměnné hlavice kartáčku a nedostatků, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo funkčnost zařízení. Záruka vyprší, pokud byl přístroj opravován neoprávněným servisem nebo v případě otevření těla krytu.

Za účelem prokázání nároku na záruku zašlete, prosím, celé zařízení s dokladem o koupi na oficiálního obchodního partnera megasmile ve vaší zemi, info@megasmile.cz