

GIO-356

InnoGIO



GIO mum Line Handy


Tire-lait électrique main libre

MANUEL D'UTILISATION

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'utiliser
et conservez le manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.

Schéma de la structure du produit

01

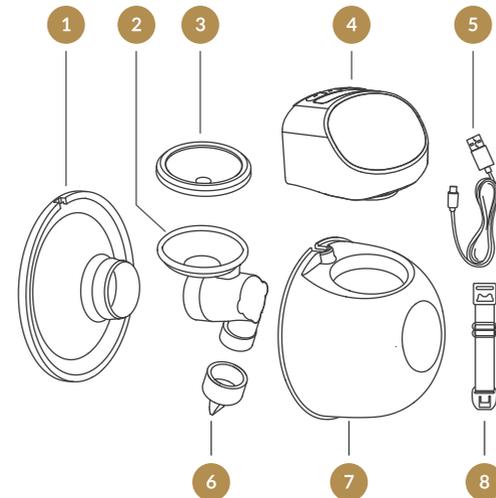


Liste des pièces

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1 Bride | 5 Câble de chargement USB |
| 2 Connecteur | 6 Soupape |
| 3 Membrane en silicone | 7 Collecteur de lait |
| 4 Moteur de pompe | 8 Boucle de réglage du soutien-gorge |

Description de l'affichage écran a LED et de la fonction des boutons

02

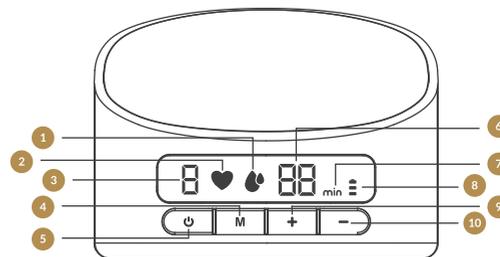

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Mode de prélèvement | 6 Affichage de l'heure |
| 2 Mode stimulation | 7 Heure/Minute |
| 3 Affichage du niveau | 8 Affichage de la puissance |
| 4 Bouton de sélection du mode | 9 Bouton d'augmentation du niveau |
| 5 Bouton d'alimentation | 10 Bouton de diminution du niveau |

Contenu de la boîte

- Bride • moteur de pompe • membrane en silicone
- câble de chargement USB • collecteur de lait • valve
- connecteur • boucle de réglage du soutien-gorge

Montage

03

Pour assembler la pompe, suivez les étapes ci-dessous.


! PRECAUTIONS

- Veillez à nettoyer la pompe conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.
- Veillez à assembler la pompe correctement en suivant les instructions de ce manuel d'utilisation.
- Pour éviter les fuites, enlevez les résidus autour de la jante avant de procéder à l'assemblage.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant d'assembler des composants nettoyés.


1. Placez le diaphragme en silicone dans connecteur et pressez-le avec les mains pour que les bords se fixent fermement afin d'assurer une étanchéité parfaite.



2. Installer la valve dans le fond du linker; assurez-vous qu'elle est installée dans le bon sens.

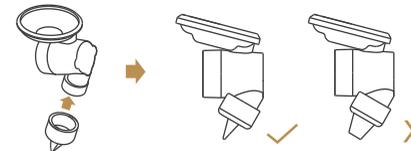


3. Placez le connecteur assemblé dans le collecteur de lait, la partie "oreille" du connecteur étant alignée avec la fente interne du collecteur de lait, et appuyez sur la partie disque connecteur avec les deux mains pour fixer fermement les bords afin d'assurer une étanchéité complète.

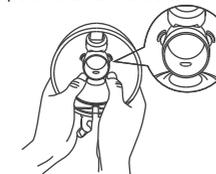

4. Installez la bride sur le collecteur de lait, alignez la fente de la bride avec la même fente sur le collecteur de lait et pressez les bords avec les deux mains pour s'assurer qu'ils s'emboîtent.



5. Pressez le moteur de la pompe sur le collecteur de lait et assurez-vous qu'il s'insère parfaitement dans le collecteur de lait.

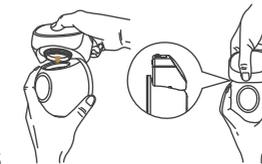


! AVERTISSEMENTS

Le tire-lait ne fonctionne pas lorsque l'appareil est chargé à l'aide du chargeur.


Pour démarrer le pompage

05


1. Appuyez fermement la collerette contre le sein, sans laisser d'espace et en veillant à ce que le mamelon soit centré. Maintenez la collerette en position verticale. Veillez à ne pas fausser la position du produit et de la poitrine, sinon le tire-lait n'aura pas de suction.

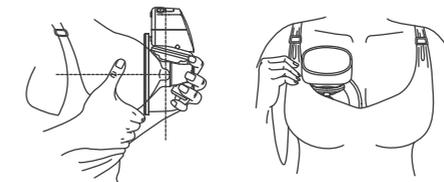


2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le tire-lait.

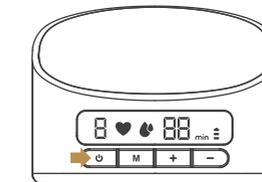

3. Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer en mode stimulation. Ce mode comporte 9 niveaux. Vous pouvez choisir la suction "+" pour augmenter le niveau et sur le bouton "-" pour le diminuer. Ce mode peut être utilisé pour stimuler les seins et favoriser sélectivement la sécrétion de lait.

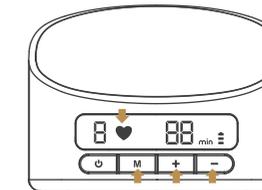


4. Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer en mode prélèvement. Ce mode comporte 9 niveaux. Vous pouvez choisir le niveau d'aspiration qui vous convient en appuyant brièvement sur le bouton "+" pour augmenter le niveau et sur le bouton "-" pour le diminuer.

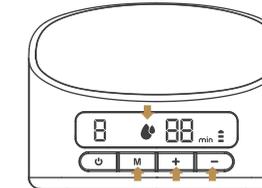


5. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation "M" pour passer en mode automatique. Dans ce mode, la pompe passe par défaut en mode stimulation à la vitesse 1 et monte d'une vitesse toutes les 15 secondes, jusqu'à la vitesse maximale de 9, puis reste à ce niveau ("♥" clignote et "💧" est toujours allumé). Ce processus dure 2 minutes. Passez ensuite en mode prélèvement à la vitesse 1, passer une vitesse toutes les 15 secondes, et il restera à ce niveau jusqu'à l'arrêt automatique ("💧" clignote et "♥" est toujours allumé). La fonction de passage automatique à la vitesse supérieure est arrêtée et passe en mode manuel lorsqu'un bouton est enfoncé pendant le fonctionnement en mode automatique. Si l'alimentation est coupée après le passage en mode manuel, le mode actuel est mémorisé.

07

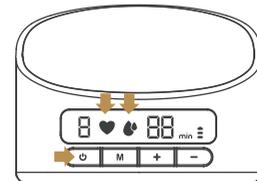

6. Une fois le pompage terminé, appuyez brièvement sur "⏻" pour éteindre la pompe.

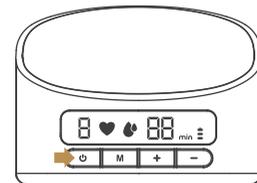


- Conseils:**
- Ce modèle est doté d'une fonction de mémoire intégrée; lorsque vous remettez la pompe en marche, elle passe automatiquement au mode de travail et au niveau d'aspiration que vous avez utilisés la dernière fois. Lorsque vous éteignez la pompe en mode automatique et que vous la rallumez, elle démarre par défaut à la première vitesse du mode stimulation.
 - Le tire-lait s'arrête automatiquement après 20 minutes de fonctionnement.

08

Position assise pour l'allaitement

Détendez-vous et asseyez-vous dans un fauteuil confortable, penchez-vous légèrement en avant (utilisez un coussin pour soutenir votre dos). Veillez à ce que le tire-lait et la tétérèlle soient en position verticale.

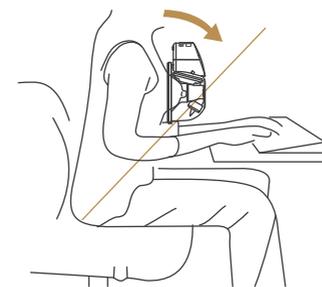

Posture assise

Nettoyage

09

Nettoyage et entretien

| | Première utilisation | Après chaque utilisation |
|--|---|---|
| Corps de pompe | Éteignez la pompe en appuyant sur le bouton d'alimentation. | Essuyez-la avec un chiffon propre et humide contenant de l'alcool éthylique à 70 % ou de l'alcool isopropylique si nécessaire. Ne pas immerger la pompe dans l'eau. |
| Bride, diaphragme en silicone, connecteur, valve et collecteur de lait | Faire bouillir dans l'eau pendant 5 minutes. Ne pas passer la bride, la membrane en silicone, connecteur, la valve ou le collecteur de lait au micro-ondes. | Nettoyez avec du savon à vaisselle doux ou de l'eau pure. |

⚠️ AVERTISSEMENTS

- Soyez prudent lorsque vous retirez et nettoyez la valve ; si la valve est endommagée, le tire lait ne fonctionnera pas correctement.
- Pour nettoyer la valve, frottez-le doucement dans de l'eau tiède additionnée de quelques gouttes d'un liquide de nettoyage. Ne pas introduire d'objets dans la valve, cela pourrait l'endommager.

Nettoyage manuel

- Placez les pièces de la pompe dans un lavabo propre utilisé uniquement pour les articles d'alimentation pour nourrissons. Ne pas placer les pièces de la pompe directement dans l'évier.
- Versez du savon et de l'eau chaude dans la cuvette.
- Nettoyez les pièces à l'aide d'une brosse propre dédiée uniquement aux articles d'alimentation pour nourrissons.
- Rincez en tenant les pièces sous l'eau courante ou en les immergeant dans de l'eau douce dans un bassin séparé.
- Séchez à l'air libre. Placez les pièces de la pompe, le bac de lavage et le goupillon sur un torchon ou un essuie-tout propre et inutilisé, dans un endroit protégé de la saleté et de la poussière. N'utilisez pas le torchon pour frotter ou tapoter les éléments pour les sécher.
- Nettoyez le bac de lavage et le goupillon. Rincez-les soigneusement et laissez-les sécher à l'air libre après chaque utilisation. Lavez-les à la main au moins tous les deux jours.

Instructions pour la boucle de réglage du soutien-gorge

Ajustez la longueur des bretelles du soutien-gorge pour rendre la succion plus confortable. Une extrémité de la boucle de réglage du soutien-gorge doit être accrochée à la boucle intérieure du soutien-gorge d'allaitement. Ajustez la longueur de la boucle du soutien-gorge à l'autre extrémité de la boucle de réglage du soutien-gorge.

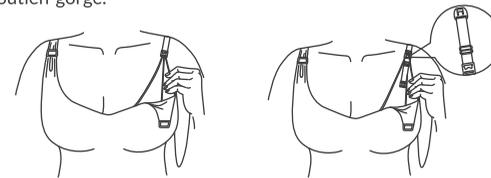


Image 1

Image 2

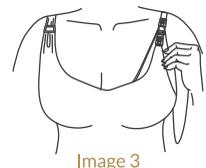


Image 3

Illustration de l'indicateur d'état de la batterie

| Affichage de l'état de la batterie | Durée de pompage restante |
|------------------------------------|---------------------------|
| Le voyant du niveau 3 est allumé | Au moins 100 minutes |
| Le voyant du niveau 2 est allumé | Au moins 65 minutes |
| Le voyant du niveau 1 est allumé | Au moins 25 minutes |
| Le voyant du niveau 1 clignote | Au moins 5 minutes |

Fin du pompage


11

Une fois le pompage terminé, retirez le tire-lait de votre sein. Maintenez le tire-lait en position verticale, retirez la partie moteur et tenez le collecteur de lait pour verser le lait dans le biberon. Veillez à ce que la fente du collecteur de lait de la coupelle soit alignée avec l'embouchure du biberon afin d'éviter que le lait ne se répande.

- Lorsque vous avez fini de tirer votre lait, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le tire-lait et rompez l'étanchéité du joint entre le sein et l'entonnoir du tire-lait avec votre doigt, puis retirez délicatement le tire-lait de votre sein.



- Séparez le collecteur de lait du moteur de la pompe; le lait collecté est prêt à être utilisé/stocké. Nettoyez les autres pièces utilisées en suivant les instructions.

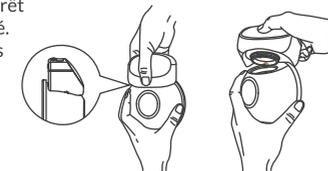

- Versez le lait dans le biberon; assurez-vous que la fente est alignée avec le biberon.



Conservation de votre lait maternel

12

Conservation du lait maternel

- Ne conservez que le lait maternel recueilli à l'aide de tire-laits stérilisés.
- Le lait extrait peut être placé dans un sac de conservation de lait propre et stérilisé ou dans une bouteille de lait munie d'un joint d'étanchéité, et placé immédiatement au réfrigérateur pour être réfrigéré ou congelé.

Conservation du lait maternel au froid

- Le lait maternel ne doit pas être congelé plus d'une fois,
- Ne pas mélanger du lait maternel frais avec du lait maternel congelé.
- Veillez à jeter les restes de lait maternel.
- Le lait extrait peut être conservé au réfrigérateur pendant 48 heures (à l'intérieur du réfrigérateur) ou congelé au congélateur pendant trois mois; la bouteille de lait ou le sac de conservation du lait doit être muni d'une étiquette indiquant clairement la date et l'heure de la collecte.

Décongélation du lait maternel

Placez le lait maternel congelé dans le compartiment réfrigérateur pendant une nuit pour le décongeler. Si vous devez décongeler le lait de toute urgence, vous pouvez utiliser un bol d'eau chaude pour faire décongeler le lait maternel. Après décongélation, le lait maternel doit être consommé dans les 24 heures.

Chauffage du lait maternel

- Placez le biberon dans un bol d'eau chaude à la verticale ou chauffez le lait maternel rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un chauffe-biberon et d'un chauffe-aliment.
- N'oubliez pas ! Avant de nourrir votre bébé, vérifiez la température du lait maternel.

- N'utilisez pas de four à micro-ondes pour chauffer le lait maternel, car cela peut détruire des nutriments et des anticorps précieux.
- En outre, un chauffage inégal peut entraîner une surchauffe partielle du liquide, ce qui peut provoquer des brûlures.
- Ne plongez pas le biberon dans de l'eau bouillante pour le chauffer - le biberon risquerait de se rompre ou de se fissurer.


13

innogio

INNOGIO sp. z o.o.
rue Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne

www.innogio.fr

@innogio.official @innogio_com

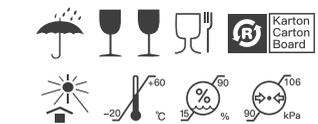

Karton Carton Board