


GIO-357I

EE

innoGIO

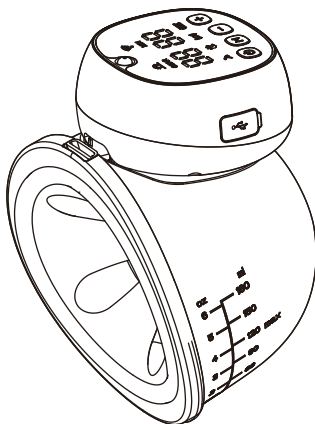

GIO**mum** Line Comfort
Kantav elektriline rinnapump

KASUTUSJUHEND

Palju õnne emaks saamise puhul! Kui see on teie esimene kogemus rinnapumba kasutamisega, võib kuluda aega, enne kui harjute selle tööga.

Oluline on, et jääksite protsessi ajal rahulikuks, isegi kui alguses ei õnnestu nii palju piima väljutada, kui soovite. Teie keha kohaneb vastavalt ja pärast mitmeid katseid suudate rohkem piima väljutada.

Palun lugege enne kasutamist


- Piirake kasutamist maksimaalselt 15 minutiga korraga. On täiesti normaalne, kui selle aja jooksul ei välju esialgu palju piima. Kui kasutate seda regulaarselt, kohaneb teie keha lõpuks nii, et toodab rohkem piima.
- Uuringud on näidanud, et optimaalse rinnapiima tootmise saavutamiseks peaksite olema täiesti lõdvestunud. See aitab teil vabastada oksütotsiini, hormooni, mis stimuleerib piima väljutamiseks vajaliku refleksi. Nii et istuge oma lemmikdiivanil, kuulates oma lemmikmuusikat, proovige hingamisharjutusi või laske oma partneril teile massaaži teha!
- Seadmel on massaažifunktsioon, mida saate kasutada (1-3 minutit) enne pumpamist. See aitab teie kehal vabastada oksütotsiini ja suurendada piimatootmist.
- Puhastage seadet regulaarselt. Puhastage kõik rinnapiimaga kokku puutunud pumba osad ning peske käsi enne ja pärast iga kasutamist.
- Valige õige optimaalne imemistase. Suurendage järk-järgult rinnapumba imemist, kuni see muutub veidi ebamugavaks, ja seejärel keerake seda sammu võrra allapoole. Uuesti käivitamisel hakkab pump töötama viimati kasutatud imemistasemel.
- Kuna tegemist on kantava rinnapumbaga, veenduge, et kasutate sobivat rinnahoidjat.

Toote kirjeldus


Type-C kaabel - 1 tk



Rinnahoidja reguleerimise
lukk - 1 tk.

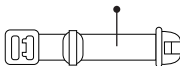

Pumba mootor - 1 tk

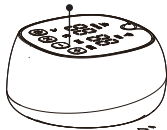


Silikoonmembraan
(gaasitass) - 1 tk



Silikoonist massaažileht 24mm - 1 tk.




Tihendusrõngas
- 1 tk

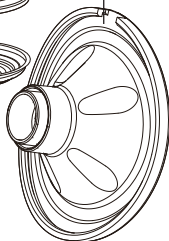

Klapp - 1 tk

Linker - 1 tk

Piimakoguja - 1 tk

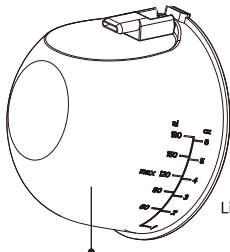


Tarvikud:

Kaugjuhtimispult - 1 tk

Kott hoiustamiseks - 1 tk

Kontrollipanel

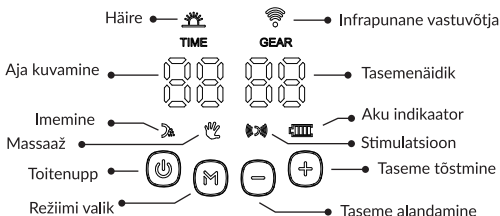

Kasutage massaažifunktsiooni enne sügavat pumpamist.

3 režiimi

Massaažifunktsioon: massaaži funktsioon: 12 taset

(Piimatootmise stimuleerimiseks esmalt massaaž)

Imemisfunktsioon: 12 taset

(Valige optimaalne tase; pumpamisrežiim on mõeldud nii aeglaseks kui ka sügavaks imemiseks)

Stimulatsioon: 6 taset

(Massaaž ja imemine, mida kasutatakse samaaegselt, on suurepäraseks vajunud nibude või esmakordselt emaks saavate emade puhul, sel juhul kasutage 3 + 1 režiimi, 3 lühikese sagedusega massaaži ja 1 sügav imemine).

Sisse/välja lülitada: Vajutage ja hoidke 3 sekundit all toitenuppu "⏻".

Paus ja jätkamine: Vajutage toitenuppu "⏻".

Režiimi muutmine: Vajutage režiimiklahvi "M".

Taseme muutus: Vajutage "+" või "-", et suurendada või vähendada taset.

Aku ja laadimisindikaator

Vilkuv valge: Madal aku (laadimine vajalik)

Pidev valge: Aku on täielikult laetud (laadimise ajal vilgub valge).

Piima hoiatus: Häire vilgub punaselt iga 10 minuti järel. Kui on aeg piimakogu välja võtta, lülitub pump iga 30 minuti järel automaatselt välja.

Puhastusjuhised


Enne kasutamist

1. Eemaldage pumba mootor.
2. Pange kõik silikoonosad 3-5 minutiks keevasse vette.
3. Peske piimakollektorit ja ühendusseadet sooja seebiveega ja loputage hästi.
4. Enne kasutamist pühkige osad lapiga või kuivatage need õhu käes.

Pärast kasutamist


1. Loputage piimakollektorit, klappi ja ühendusseadet kohe pärast kasutamist.
2. Pange kõik silikoonist osad 3-5 minutiks keevasse vette.
3. Enne ladustamist pühkige osad lapiga või kuivatage need õhu käes.
4. Ärge kastke seadme elektrilist osa vette.

Seadme kokkupanek

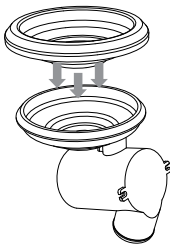


STEP 1

Pange silikoonmembraan ühendusse ja vajutage seda kätega, et servad kinnituksid tihedalt, et tagada täiuslik tihendus.

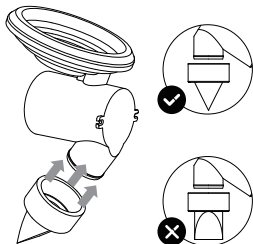


STEP 2

Paigaldage ventiil ühendusseadme põhja, veenduge, et see on paigaldatud õiges suunas.

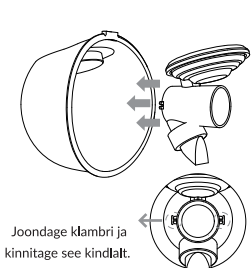

Joondage klambri ja kinnitage see kindlalt.

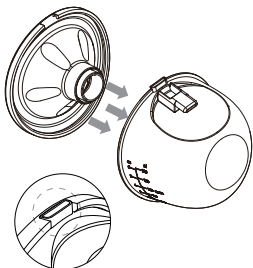


STEP 3

Tõmmake kokkupandud ühendaja piimakollektorisse.

STEP 4


Asetage silikoonist massaažileht piimakollektorisse ja veenduge, et see on korralikult suletud, et vältida lekkeid.

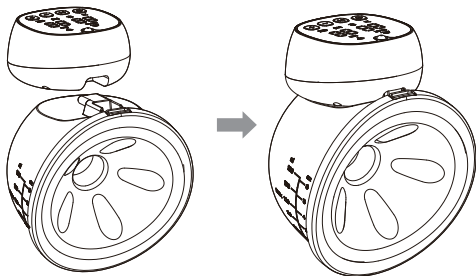

STEP 5


Paigaldage põhipump.

Pumba asetamine rinnahoidjasse.

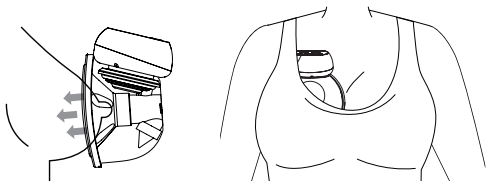

Vajutage silikoonist massaažileht kindlalt vastu rinda, ärge jätke vahele ja veenduge, et teie nibud on keskelt läbi. Hoidke seadet püsti. Olge ettevaatlik, et mitte moonutada toote ja teie rinna asendit, vastasel juhul ei saa rinnapump vajalikku imemist.


Lülitage pump välja ja eemaldage see ettevaatlikult.

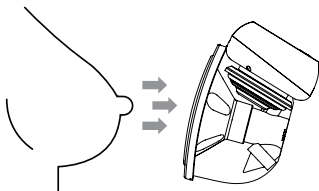

Märkus: Ärge lamage rinnapumba kasutamise ajal. Kui tunnete imemise ajal ebamugavustunnet või märkate oma rinnanibul või rinnal villide/koore tekkimist, proovige vähendada rinnapumba imemistaset.


Istuvas asendis imemiseks

Lõdvestage oma keha, istuge mugavale toolile ja nõjatuge veidi ettepoole (kasutage selja toetamiseks padja). Hoidke rinnapumpa ja piimakogujat kindlasti püsti.

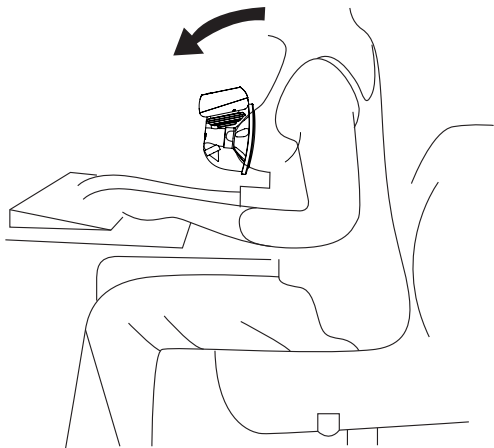


Vala piim

Hoidke rinnapumpa püsti ja eemaldage pumba mootor ettevaatlikult pumba korpusest. Piima pudelisse valamisel pidage silmas piimakoguja lõhet.

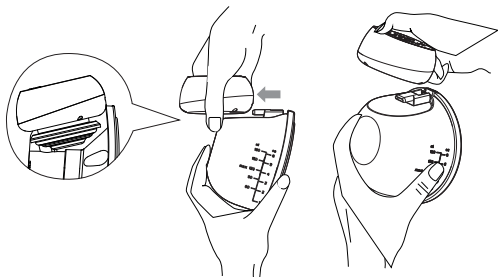

Piltuur 1

Piltuur 2

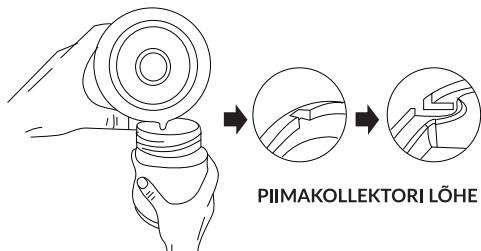


PIIMAKOLLEKTORI LÕHE

Piltuur 3

Juhised rinnahoidja reguleerimise luku

Reguleerige oma rinnahoidja rihmade pikkust, et imemine oleks mugavam. Riputage rinnahoidja reguleerimise luku üks ots imetamise rinnahoidja sisemise luku külge. Rinnahoidja pikkust saab reguleerida, riputades rinnahoidja reguleerimiss luku teise otsa külge.

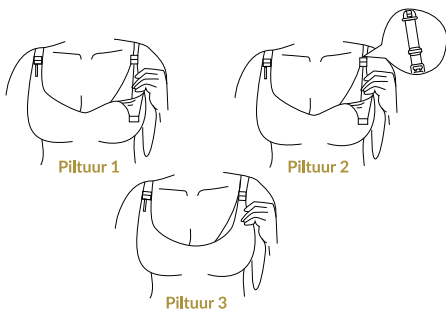

TÕRKEOTSING

Nõrk imemine või imemise puudumine	1. Kontrollige, kas ventiil on korralikult paigaldatud. 2. Laadige seadet enne kasutamist. 3. Kontrollige, kas seade on õigesti paigutatud, vastasel juhul ei saa rinnapump imeda.
Nibu valu	1. Esmalt masseerige ja valige mugav imemistase. 2. Konsulteerige imetamisnõustajaga.
Ei ole/vähe piima väljendatud	1. Veenduge, et olete mugavas asendis. 2. Kui olete pumpanud 5-10 minutit, tehke paus ja proovige muul ajal. 3. Tagage kasutamise ajal optimaalne imemistase. 4. Lõdvestuge ja proovige uuesti.


Kaugjuhtimispuldi juhised

Veenduge, et rinnapump oleks õigesti paigutatud imetamise rinnahoidja sisse ja hästi ühendatud teie rinna külge.

Suunake vastuvõtja peremehe kohale ja vajutage pumba käivitamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu ON/OFF; lülitage töörežiimi vabalt vastavalt kaugjuhtimispuldil olevale ikoonile, et suurendada või vähendada töötaset. Pärast kasutamist vajutage seadme väljalülitamiseks kaugjuhtimispuldil olevat nuppu ON/OFF.

Märkused:

Kaugjuhtimispult on täiendav juhtimisvahend. Kui see on kahjustatud või kadunud, saab rinnapumpa endiselt juhtida rinnapumba mootoril olevate nuppude abil.

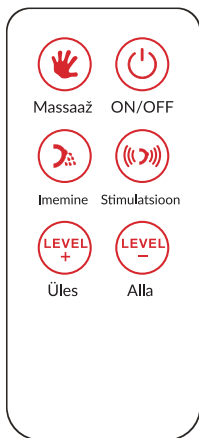

Aitäh, et valisid InnoGIO tooted!

Selleks, et toodet hästi kasutada, lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles, kui teil peaks tulevikus küsimusi tekkima.

Kasutusjuhendis kasutatud pildid on ainult võrdluseks.
Kui piltide ja toote vahel on lahknevusi,
siis järgige hoopis tegelikku toodet.

innoGIO

Importija: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka 74H
03-289 Varssavi, Poola
www.innogio.com

 @innoGIO.official  @innogio_com

