


GIO-357I

LV

innoGIO

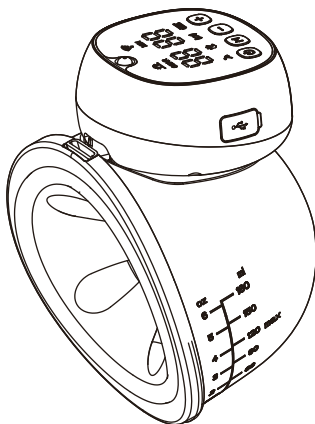

GIÖmum Line Comfort

Pārnēsājams elektriskais
krūts pumpis

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Apsveicam ar kļūšanu par māti! Ja šī ir jūsu pirmā pieredze ar krūts sūkni, var paiet zināms laiks, līdz jūs pieradīsiet pie tā darbības.

Svarīgi, lai procesa laikā jūs būtu atslābusi, pat ja sākumā nespējat izspiest tik daudz piena, cik vēlētos. Jūsu organisms attiecīgi pielāgosies, un pēc vairākiem mēģinājumiem jūs varēsiet izspiest vairāk piena.

Lūdzu, izlasiet pirms lietošanas


- Ierobežojiet lietošanu uz ne vairāk kā 15 minūtēm vienlaicīgi. Tas ir pilnīgi normāli, ja sākumā šajā laikā nav daudz piena. Ja to lietosiet regulāri, Jūsu organisms ar laiku pielāgosies un saražos vairāk piena.
- Pētījumi liecina, ka, lai sasniegtu optimālu krūts piena ražošanu, jums vajadzētu būt pilnībā atpūsties. Tas palīdz izdalīties oksitocīnam - hormonam, kas stimulē piena izvadīšanas refleksu. Tāpēc apsēdieties uz sava iecienītā dīvāna, klausoties mīlākās melodijas, izmēģiniet elpošanas vingrinājumus vai palūdziet savam partnerim veikt jums masāžu!
- Ierīcei ir masāžas funkcija, ko varat izmantot (1 - 3 minūtes) pirms sūknēšanas. Tas palīdzēs jūsu ķermenim izdalīt oksitocīnu un palielinās piena ražošanu.
- Regulāri tīriet ierīci. Pirms un pēc katras lietošanas reizes notīriet visas sūkņa daļas, kas ir bijušas saskarē ar mātes pienu, un nomazgājiet rokas.
- Izvēlieties pareizo optimālo sūkšanas līmeni. Pakāpeniski palieliniet krūts sūkņa sūknēšanu, līdz tā kļūst nedaudz neērta, un pēc tam samaziniet to par pakāpi. Pēc atkārtotas iedarbināšanas sūknis sāks darboties ar pēdējo reizi izmantoto sūkšanas līmeni.
- Tā kā šis ir nēsājams krūts sūknis, pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu krūšturi zīdīšanai.

Produkta apraksts


C tipa kabelis - 1 gab.



Krūštura regulēšanas sprādze
- 1 gab.

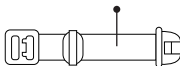

Sūkņa motors - 1 gab.

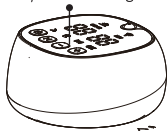


Silikona masāžas ziedlapiņa 24mm
- 1 gab.

Silikona membrāna
(gāzu glāze) - 1 gab.




Blīvējuma gredzens
- 1 gab.

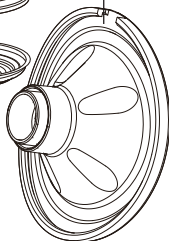

Vārsts - 1 gab.

Slēdzis - 1 gab.

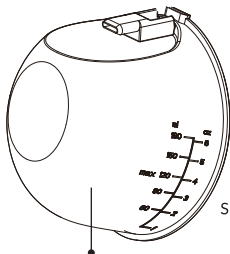


Piena savācējs - 1 gab.

Piedevas:

Tālvadības pults - 1 gab.

Uzglabāšanas maisiņš - 1 gab.

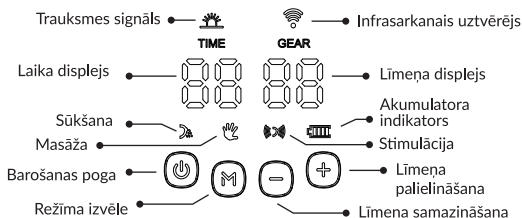

Pirms dziļās atslaukšanas izmantojiet masāžas funkciju.

3 režīmi

Masāžas funkcija: 12 līmeņi

(Vispirms veiciet masāžu, lai stimulētu piena ražošanu.)

Iesūkšanas funkcija: 12 līmeņi.

(Izvēlieties optimālo līmeni; sūkņēšanas režīms ir paredzēts gan lēnai, gan dziļai sūkņēšanai.)

Stimulācija: 6 līmeņi

(Masāža un sūkšana vienlaikus ir lieliski piemērota ievilktiem krūtsgaliem vai jaunajām māmiņām, tādā gadījumā izmantojiet 3 + 1 režīmu, 3 īsas frekvences masāžai un 1 dziļā sūkšana.)

Ieslēgšana/izslēgšana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu "⏻" 3 sekundes.

Pauze un atsākšana: nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu "⏻".

Režīma maiņa: Nospiediet režīma taustiņu "M".

Līmeņa maiņa: Nospiediet "+" vai "-", lai palielinātu vai samazinātu līmeni.

Akumulatora un uzlādes indikators

Mirgojoša balta: Izlādēta baterija (nepieciešama uzlāde)

Nepārtraukta baltā krāsā: Akumulators ir pilnībā uzlādēts (uzlādes laikā mirgo balti)

Brīdinājums par pienu: Ik pēc 10 minūtēm mirgo sarkana indikatora gaismā. Kad piena savācējs ir pilns, sūknis automātiski izslēdzas pēc 30 minūtēm.

Tīrīšanas instrukcijas


Pirms lietošanas

1. Noņemiet sūkņa motoru.
2. Ievietojiet visas silikona daļas verdošā ūdenī uz 3 līdz 5 minūtēm.
3. Mazgājiet piena savācēju un savienotāju ar siltu ziepjūdeni un labi noskalojiet.
4. Pirms lietošanas noslaukiet detaļas ar drānu vai nosusiniet gaisā.

Pēc lietošanas


1. Piena savācēju, vārstu un savienotāju izskalojiet uzreiz pēc lietošanas.
2. Ievietojiet visas silikona daļas verdošā ūdenī uz 3 līdz 5 minūtēm,
3. Pirms uzglabāšanas noslaukiet detaļas ar drānu vai izžāvējiet gaisā.
4. Neiegremdējiet ierīces elektrisko daļu ūdenī.

Ierīces montāža

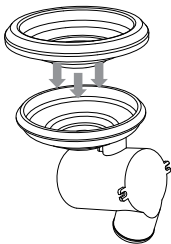

1 DARBĪBA


Ievietojiet silikona membrānu savienotājā un piespiediet to ar rokām, lai pārliecinātos, ka malas cieši pieguļ, tādējādi nodrošinot perfektu blīvējumu.

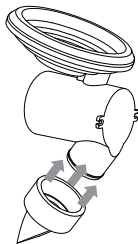


2 DARBĪBA

Ievietojiet vārstu savienotāja apakšdaļā, pārliecinieties, ka tas ir uzstādīts pareizajā virzienā.



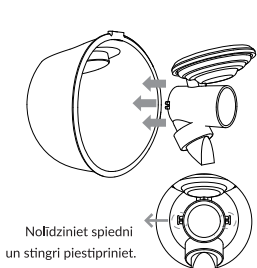

Nolidziniet spiedni
un stingri piestipriniet.

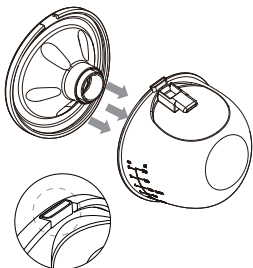


3 DARBĪBA

levelciat salikto savienotāju
piena savācējā

4 DARBĪBA

ievietojiet silikona masāžas ziedlapu
piena savācējā un pārļiecinieties,
ka tā ir pienācīgi noslēgta,
lai novērstu noplūdes.

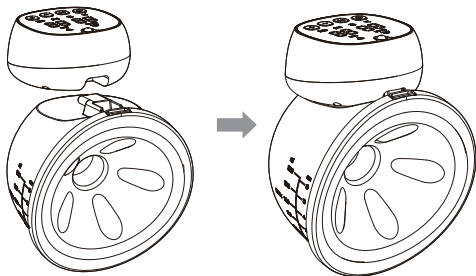


5 DARBĪBA

Uzstādiet galveno sūkni.


Lietošanas norādījumi

Sūkņa ievietošana krūsturī.

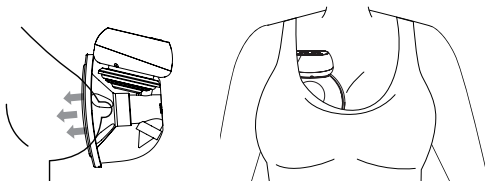

Stingri piespiediet silikona masāžas ziedlapiņu pie krūts, neatstājot atstarpes un pārļiecinoties, ka krūtsgali ir centrēti. Turiet ierīci vertikāli. Esiet uzmanīgi, lai neizkropļotu produkta un krūts pozīciju, pretējā gadījumā krūts sūknim nebūs nepieciešamās sūkšanas jaudas.


Izslēdziet krūts sūkni un uzmanīgi izņemiet to.

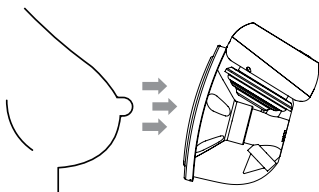

Piezīme: Krūts sūkņa lietošanas laikā nedrīkst gulēt. Ja krūts sūknēšanas laikā jūtat diskomfortu vai uz krūtsgala vai krūts vērojāt pūslīšu/plaisu veidošanos, mēģiniet samazināt krūts sūkņa sūkšanas jaudu.


Atsūkšana sēdus stāvoklī

Atslābiniet ķermeni, apsēdieties ērtā krēslā un nedaudz noliecieties uz priekšu (izmantojiet spilvenu, lai atbalstītu muguru). Pārliecinieties, vai krūts pumpis un piena savācējs ir vertikāli.

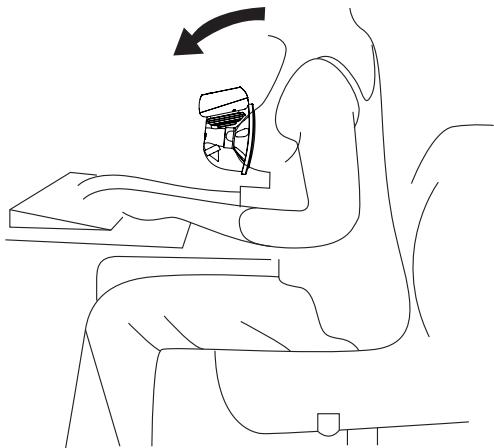


Piena ieliešana

Turiet krūts sūkni vertikāli un uzmanīgi noņemiet sūkņa motoru no sūkņa korpusa. Lejot pienu pudelītē, noteikti paturiet prātā piena savākšanas spraugu.

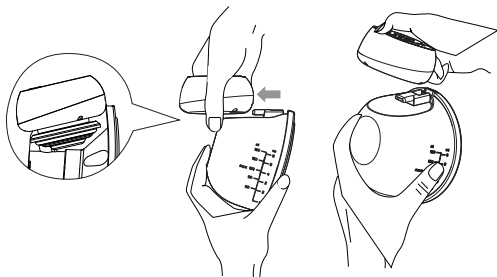

1 Attēls

2 Attēls

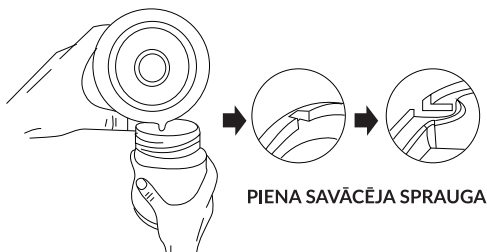


3 Attēls

Krūštura auklu regulēšanas instrukcija

Noregulējiet krūštura lencīšu garumu, lai atvieglotu atslaukšanu. Pakariet vienu krūštura regulēšanas auklas galu pāri barošanas krūštura iekšējai sprādzi. Krūštura garumu var regulēt, pakarinot barošanas krūštura sprādzi pāri krūštura regulēšanas auklas otram galam.



1 Attēls

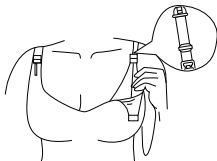

2 Attēls



3 Attēls

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Vāja iesūkšana vai nav iesūkšanas	1. Pārbaudiet, vai vārsts ir pareizi uzstādīts. 2. Pirms lietošanas uzlādējiet ierīci. 3. Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi ievietota, pretējā gadījumā krūtis sūknis nesūknēs.
Sāpes krūtsgalos	1. Vispirms veiciet masāžu un izvēlieties ērtu sūkšanas līmeni. 2. Konsultējieties ar laktācijas konsultantu.
Piena nav/ mazāk izteikta	1. Pārliecinieties, ka esat ērtā stāvoklī. 2. Ja esat sūknējis 5-10 minūtes, paņemiet pārtraukumu un mēģiniet citā laikā. 3. Nodrošiniet optimālu sūkšanas līmeni lietošanas laikā. 4. Atpūties un mēģiniet vēlreiz.

Tālvadības pults lietošanas instrukcijas

Pārliecinieties, vai krūts sūkņi ir pareizi ievietots barošanas krūštūrī un stingri piestiprināts pie krūts. Centieties turēt uztvērēju vērstu uz augšu un nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu sūkņi; lai palielinātu vai samazinātu darba līmeni, brīvi pārslēdziet režīmu atbilstoši ikonai uz tālvadības pults. Pēc lietošanas nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

Piezīmes:

Tālvadības pults ir papildu vadības rīks. Ja tā ir bojāta vai pazaudēta, krūts sūkņi joprojām var vadīt ar krūts sūkņa motora pogām.



Paldies, ka izvēlējāties InnoGIO produktus!

Lai nodrošinātu pareizu produkta lietošanu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Rokasgrāmatā redzamie attēli ir tikai informatīvi.

Ja rodas neatbilstības starp attēliem un produktu, lūdzu, skatiet faktisko produktu.

innoGIO

Importētājs: **INNOGIO** sp. z o.o.

Ostródzka 74H

03-289 Varšava, Polija

www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

CE RoHS

