

Momini

Sniffley




Automatyczny aspirator do nosa

Automatic nasal aspirator


Instrukcja obsługi

User manual


Create happy beginnings



A

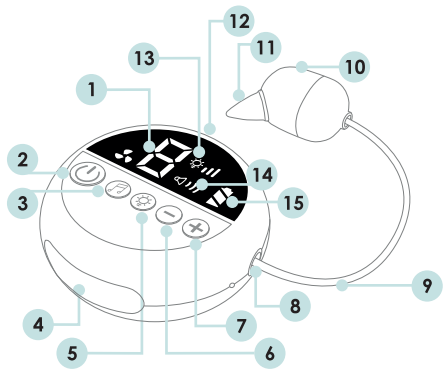

B

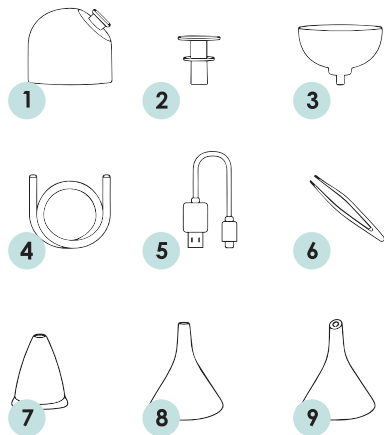

01. BEZPIECZEŃSTWO:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

02. OPIS URZĄDZENIA [STRONA 2 - A]:

1. Kontrolka trybu nr/2, przycisk zasilania/3. Przycisk muzyki/4. Lampka/5. Przycisk regulacji światła/6. Przycisk zmniejszenia mocy ssania/7. Przycisk zwiększenia mocy ssania/8. Ssanie/9. Rurka/10. Kubek zbierający/11. Końcówka silikonowa/12. Port ładowania/13. Kontrolka jasności/14. Wskaźnik muzyki/głośności/15. Wskaźnik poziomu baterii.

03. OPIS AKCESORIUM [STRONA 2 - B]:

1. Pokrywka kubka/2. Kolumna dywersyjna/3. Dolna część kubka/4. Rurka/5. Kabel do ładowania USB/B. Pęseta/7. Końcówka stożkowa/8. Końcówka płaska/9. Końcówka kątowa

Uwaga: Przed użyciem aspiratora do nosa upewnij się, że rozumiesz cechy każdej końcówki i wybierasz odpowiednią na podstawie wieku dziecka, aby zapewnić komfortowe i skuteczne użytkowanie.

Stożkowa końcówka - płytką głębokość: 0 - 2 lata.

Płaska końcówka - głębokość: od 0 - 1 lat.

Kątowa końcówka - bardzo głębokość: od 0 lat.

Przycisk zasilania [strona 2 - A2]: Długie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie. Krótkie naciśnięcie rozpoczyna/zatrzymuje ssanie.

Przycisk muzyki [strona 2 - A3]: Krótkie naciśnięcie dostosowuje głośność do poziomów 1 do 3. Sekwencyjne przycisków to: 1 — 2 — 3 — Wyłączone — Włączone. Ponowne naciśnięcie przełącza na inną muzykę.

Przycisk światła [strona 2 - A5]: Tryb wyłączenia: Długie naciśnięcie włącza/wyłącza światło. Po włączeniu, pojedyncze naciśnięcie przełącza poziomy jasności od 1 do 3.

Tryb wyłączenia: Po włączeniu urządzenia, podwójne naciśnięcie przełącza poziomy jasności od 1 do 3, a następnie wyłącza.

Przycisk zmniejszenia mocy ssania [strona 2 - A6]: Po włączeniu urządzenia, podwójne naciśnięcie przycisku "-" zmniejsza moc ssania. Po wyłączeniu mocowanie ssania od 0 do 3.

Przycisk zwiększenia mocy ssania [strona 2 - A7]: Po włączeniu urządzenia, pojedyncze naciśnięcie przycisku "+" zwiększa moc ssania. Możliwość regulacji poziomów ssania od 1 do 9.

04. OPIS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:

1. Użyj noża, aby rozdzielić taczkę na spodzie miseczki zbierającej.
2. Podłącz miseczkę zbierającą na dolną pokrywę.
3. Wybierz końcówkę i zainstaluj ją na miseczce zbierającej.
4. Połącz miseczkę zbierającą z porłem wlotu powietrza głównej jednostki

(ssanie) za pomocą wężyka.

5. Długie naciśnięcie przycisku "power" (włączenia) aby uruchomić urządzenie (długie naciśnięcie ponownie wyłącza je).

6. Użyj przycisków regulacji mocy ssania "-" lub "+" aby dostosować się ssania dożądanego poziomu.

7. Użyj przycisku "melodia" aby aktywować opcjonalny tryb odpowiedni dla Twojego dziecka.

8. Delikatnie umieść końcówkę wewnątrz noska dziecka aby skutecznie oczyścić nos ze śluzu.

9. Po oczyszczeniu śluzu z nosa dziecka, zdejmij miseczkę zbierającą.

10. Po wyjęciu komponentów miseczki zbierającej, natychmiast je optucz (Uwaga: Główna korpus urządzenia nie powinno się myć wodą!)
11. Po oczyszczeniu użyj miękkiej szmatki, aby osuszyć powierzchnię urządzenia i przechowuj w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

05. WSKAZÓWKI:

Dla lepszych wyników, jeśli śluz w nosie dziecka jest suchy, zaleca się użycie soli fizjologicznej do nawilżenia przed użyciem elektrycznego aspiratora do nosa.

06. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

1. Zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu.
2. Zdejmij końcówkę ssącą i miseczkę zbierającą, a następnie oczyść je przy użyciu środka czyszczącego i wody.
3. Po użyciu przetrzyj korpus urządzenia w czystości i schłodzic.
4. Końcówkę ssącą i miseczkę zbierającą można sterylizować gotując w wodzie lub parą, ale nie w mikrofalówce.
5. Główny korpus produktu nie jest wodoodporny, więc nie płucz go wodą ani nie czyść w wysokich temperaturach. Proszę użyć miękkiej, wilgotnej szmatki do czyszczenia głównego korpusu.
6. Unikaj przechowywania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub wilgotnym środowisku.

07. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Ważne jest, aby dziecko używa urządzenia tylko przy otwarte, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza w jamie nosowej i zapobiec przypadkowym uszkodzeniom wywołanym negatywnym ciśnieniem.
2. Unikaj blokowania otworów wlotu nosdra dziecka podczas używania aspiratora do nosa, aby zapobiec dyskomfortowi wynikającemu z negatywnego ciśnienia w głowie.
3. Kiedy miseczka zbierająca jest w połowie pełna, zaleca się opróżnienie jej przed kontynuowaniem użytkowania, jako że to zapobiega zassaniu śluzu do pompy i potencjalnemu uszkodzeniu urządzenia.

08. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie wkładaj aspiratora do nosa podczas ładowania.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obsługi przez dorosłych.
3. Nie wystawiaj urządzenia do działania wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
4. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do usuwania śluzu z nosa. Nie powinno być używane do żadnych innych celów!
5. Po każdym użyciu czyść i susz części oraz korpus urządzenia.
6. Ładuj baterię do 100% co 2 miesiące, jeśli nie używasz jej przez długi czas.
7. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
8. Podczas użytkowania dziecko/niemowlę nie powinno wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani polykać. Nadmierne ciśnienie próżniowe może spowodować brak równowagi w ciśnieniu usznym.
9. Nie stosuj nadmiernej siły podczas umieszczania końcówki ssącej w jamie nosowej.
10. Jeśli dziecko/niemowlę doświadcza jakiegokolwiek dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia, natychmiast przewij jego używanie i skonsultuj się z lekarzem.
11. Nie używaj aspiratora do nosa na zewnątrz nosa.
12. Nie używaj produktu jako zabawki dla dzieci.
13. Jeśli w nosie są rany, zapalenie lub objawy krwawienia, nie używaj aspiratora do nosa.
14. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis.
15. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
16. Nie używaj środków trujących do czyszczenia urządzenia.

● Napięcie ładowania: DC 5V/1A

Maksymalna moc: maks. 5.5W

Nominalne napięcie: 3.7V/2500mAh

Czas ładowania: około 3 godzin

Poziomy intensywności: 9 poziomów

Siła ssania: 65kPa±3kPa

Waga netto produktu: 235g

Rozmiar produktu: 95mm*45mm

01. SECURITY:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

02. DEVICE DESCRIPTION [PAGE 2 - A]:

1. Mode indicator / 2. Power button / 3. Music button / 4. Lamp / 5. Light adjustment button / 6. Suction power decrease button / 7. Suction power increase button / 8. Suction / 9. Tube / 10. Collection cup / 11. Silicone tip / 12. Charging port / 13. Brightness indicator / 14. Music/volume indicator / 15. Battery level indicator.

03. ACCESSORY DESCRIPTION [PAGE 2 - B]:

1. Cup cover / 2. Diversion column / 3. Lower part of the cup / 4. Tube / 5. USB charging cable / 6. Tweezers / 7. Conical tip / 8. Flat tip / 9. Angle tip.

Note: Before using the nasal aspirator, make sure you understand the features of each tip and choose the appropriate one based on your child's age to ensure comfortable and effective use.

Conical tip - Shallow Depth - 0-2 years.

Flat tip - deep - from 0 years.

Angled tip - very deep - from 0 years.

Power button [page 2 - A2]: Long press turns the device on/off. A short press starts/stops suction.

Music button [page 2 - A3]: A short press adjusts the volume to levels 1 to 3. The button sequence is: 1 → 2 → 3 → Off → On. Pressing it again will switch to different music.

Light button [page 2 - A5]: Off mode: Long press turns the light on/off. Once turned on, a single press cycles through brightness levels 1 to 3.

Power-on mode: Once the device is turned on, a single press switches brightness levels from 1 to 3 and then turns off.

Suction power reduction button [page 2 - A6]: After turning on the device, a single press of the "-" button reduces the suction power. You can select suction levels from 1 to 9.

Suction power increase button [page 2 - A7]: After turning on the device, a single press of the "+" button increases the suction power. You can select suction levels from 1 to 9.

04. DESCRIPTION OF DEVICE USE:

1. Install the separation insert on the bottom of the collection cup.
2. Place the collection cup on the bottom cover.
3. Select a tip and install it on the collection cup.
4. Connect the collection cup to the main unit's air inlet port (suction) with a hose.
5. Long press the "power" button to turn on the device (long press

again to turn it off).

6. Use the "-" or "+" suction power button to adjust the suction power to the desired level.

7. Use the "melody" button to activate an optional mode suitable for your child.

8. Gently place the tip inside your baby's nose to effectively cleanse their mucus.

9. After clearing the mucus from your baby's nose, remove the collection cup.

10. After removing the collection cup components, rinse them immediately. (Note: The main body of the device should not be washed with water!)

11. After cleaning, use a soft cloth to dry the surface of the device and store it in a cool place away from direct sunlight.

05. TIPS:

For better results, if the mucus in your baby's nose is dry, it is recommended to use saline to moisturize before using the electric nasal aspirator.

06. CLEANING AND STORAGE:

1. Always turn off the power after use.
2. Remove the suction tip and collection cup and clean them with cleaning agent and water.
3. Keep the parts and body of the device clean and dry after use.
4. The suction tip and collection cup can be sterilized by boiling in water or steam, but not in the microwave.
5. The main body of the product is not waterproof, so do not rinse it with water or clean it at high temperatures. Please use a soft damp cloth to clean the main body.
6. Avoid storing the product in direct sunlight or humid environments.

07. SECURITY MEASURES:

1. It is important that the baby's mouth is open during use to ensure proper airflow in the nasal cavity and prevent discomfort caused by negative pressure.
2. Avoid blocking the baby's other nostril when using the nasal aspirator to prevent discomfort from negative pressure in the head.
3. When the collection cup is half full, it is recommended to empty it before continuing use as this prevents mucus from being sucked into the pump and potentially damaging the device.

08. PRECAUTIONS:

1. Do not turn on the nasal aspirator while charging.
2. The device is intended for use by adults only.
3. Do not expose the device to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
4. The device is specially designed to remove mucus from the nose. It

should not be used for any other purposes!

5. Clean and dry the parts and body of the device after each use.
6. Charge the battery to 100% every 2 months if you don't use it for a long time.
7. Do not immerse the entire device in water when cleaning.
8. During use, the child/infant should not hold their breath, close their mouth or swallow. Excessive vacuum pressure may cause an imbalance in ear pressure.
9. Do not use excessive force when placing the suction tip into the nasal cavity.
10. If your child/infant experiences any discomfort while using the device, stop using it immediately and consult a doctor.
11. Do not use the nasal aspirator on the outside of the nose.
12. Do not use the product as a toy for children.
13. If your nose has sores, inflammation or signs of bleeding, do not use the nasal aspirator.
14. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service.
15. Do not use the device if it is damaged.
16. Do not use corrosive agents to clean the device.

● Charging Voltage: DC 5V/1A

Maximum Power: max. 5.5W

Nominal Voltage: 3.7V/2500mAh

Charging Time: About 3 hours

Intensity Levels: 9 levels

Suction Power: 65kPa±3kPa

Net Product Weight: 235g

Product Size: 95mm * 45mm



01. SICHERHEIT:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

02. GERÄTEBESCHREIBUNG [SEITE 2 - A]:

1. Modusanzeige / 2. Einschalttaste / 3. Musiktaste / 4. Lampe / 5. Lichteinstellungstaste / 6. Taste zum Verringern der Saugleistung / 7. Taste zum Erhöhen der Saugleistung / 8. Saugen / 9. Schlauch / 10. Auffangbecher / 11. Stilkonspitze / 12. Ladeanschluss / 13. Heiligkeitsanzeige / 14. Musik-/Lautstärkeanzeige / 15. Batteriestandsanzeige.

03. ZUBEHÖR-BESCHREIBUNG [SEITE 2 - B]:

1. Becherdeckel / 2. Umlenksäule / 3. Unterteil des Bechers / 4. Schlauch / 5. USB-Ladekabel / 6. Pinzette / 7. Konische Spitze / 8. Flache Spitze / 9. Winkelspitze.

Hinweis: Bevor Sie den Nasensauger verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionen der einzelnen Spitzen verstanden haben, und wählen Sie je nach Alter Ihres Kindes die passende aus, um eine komfortable und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Konische Spitze – geringe Tiefe – 0–2 Jahre,
Flache Spitze - tief - ab 0 Jahren,
Abgewinkelte Spitze – sehr tief – ab 0 Jahren.

Ein-/Aus-Taste [Seite 2 - A2]: Langes Drücken schaltet das Gerät ein/aus, Ein kurzer Druck startet/stopp die Absaugung, Musiktaste [Seite 2 - A3]: Durch kurzes Drücken wird die Lautstärke auf die Stufen 1 bis 3 eingestellt. Die Tastenfolge ist: 1 → 2 → 3 → Aus → Ein, Durch erneutes Drücken wird auf eine andere Musik umgeschaltet.

Lichttaste [Seite 2 - A5]: Aus-Modus: Langes Drücken schaltet das Licht ein/aus, Nach dem Einschalten können Sie mit einem einzigen Tastendruck zwischen den Heiligkeitsstufen 1 bis 3 wechseln. Einschaltmodus: Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wechselt ein einziger Tastendruck die Heiligkeitsstufen von 1 auf 3 und schaltet sich dann aus.

Taste zur Reduzierung der Saugleistung [Seite 2 - A6]: Nach dem Einschalten des Geräts wird durch einmaliges Drücken der Taste „-“ die Saugleistung reduziert. Sie können Saugstufen von 1 bis 9 wählen.

Taste zur Erhöhung der Saugleistung [Seite 2 - A7]: Nach dem Einschalten des Geräts wird durch einmaliges Drücken der Taste „+“ die Saugleistung erhöht. Sie können Saugstufen von 1 bis 9 wählen.

04. BESCHREIBUNG DER GERÄTENUTZUNG:

1. Installieren Sie den Trenneinsatz am Boden des Auffangbehälters.
2. Stellen Sie den Auffangbehälter auf die untere Abdeckung.
3. Wählen Sie eine Spitze aus und installieren Sie sie am Auffangbecher.
4. Verbinden Sie den Auffangbecher mit einem Schlauch mit dem Luftleitlass (Ansaugung) des Hauptgeräts.
5. Drücken Sie lange auf die „Power“-Taste, um das Gerät einzuschalten (erneut lange drücken, um es auszuschalten).
6. Stellen Sie die Saugleistung mit der Saugkräfttaste „+“ oder „-“ auf das gewünschte Niveau ein.
7. Aktivieren Sie über die Taste „Melodie“ einen optionalen Modus, der für Ihr Kind geeignet ist.
8. Führen Sie die Spitze vorsichtig in die Nase Ihres Babys ein, um den Schleim effektiv zu reinigen.
9. Nachdem Sie den Schleim aus der Nase Ihres Babys entfernt haben, entfernen Sie den Auffangbecher.
10. Nachdem Sie die Bestandteile des Auffangbehälters entfernt haben, spülen Sie diese sofort aus. (Hinweis: Der Hauptkörper des Geräts sollte nicht mit Wasser gewaschen werden!)
11. Trocknen Sie die Oberfläche des Geräts nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab und bewahren Sie es an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

05. TIPPS:

Um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, wenn der Schleim in der Nase Ihres Babys trocken ist, vor der Verwendung des elektrischen Nasensaugers Kochsalzlösung zur Befeuchtung zu verwenden.

06. REINIGUNG UND LAGERUNG:

1. Schalten Sie nach Gebrauch immer den Strom aus.
2. Saugspitze und Auffangbecher abnehmen und mit Reinigungsmittel und Wasser reinigen.
3. Halten Sie die Teile und das Gehäuse des Geräts nach dem Gebrauch sauber und trocken.
4. Die Saugspitze und der Auffangbecher können durch Kochen in Wasser oder Dampf sterilisiert werden, jedoch nicht in der Mikrowelle.
5. Der Hauptkörper des Produkts ist nicht wasserdicht, Spülen Sie es daher nicht mit Wasser ab und reinigen Sie es nicht bei hohen Temperaturen. Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Hauptgehäuses ein weiches, feuchtes Tuch.
6. Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchten Umgebungen.

07. SICHERHEITSMABNAHMEN:

1. Es ist wichtig, dass der Mund des Babys während der Anwendung geöffnet ist, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation in der Nasenhöhle zu gewährleisten und Beschwerden durch Unterdruck zu vermeiden,

2. Vermeiden Sie es, das andere Nasenloch des Babys zu blockieren, wenn Sie den Nasensauger verwenden, um Beschwerden durch Unterdruck im Kopf zu vermeiden.
3. Wenn der Auffangbecher halb voll ist, empfiehlt es sich, ihn vor der weiteren Verwendung zu leeren, da so verhindert wird, dass Schleim in die Pumpe gesaugt wird und das Gerät möglicherweise beschädigt wird.

08. VORSICHTSMAßNAHMEN:

1. Schalten Sie den Nasensauger während des Ladevorgangs nicht ein.
2. Das Gerät ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.
3. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Das Gerät wurde speziell zum Entfernen von Schleim aus der Nase entwickelt, Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden!
5. Reinigen und trocknen Sie die Teile und das Gehäuse des Geräts nach jedem Gebrauch.
6. Laden Sie den Akku alle 2 Monate auf 100 % auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
7. Tauchen Sie beim Reinigen nicht das gesamte Gerät in Wasser.
8. Während der Anwendung sollte das Kind/Kleinkind nicht den Atem anhalten, den Mund schließen oder schlucken. Ein zu hoher Vakuumdruck kann zu einem Ungleichgewicht des Ohrdrucks führen.
9. Wenden Sie beim Einführen der Saugspitze in die Nasenhöhle keine übermäßige Kraft an.
10. Wenn Ihr Kind/Kleinkind bei der Verwendung des Geräts Beschwerden verspürt, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
11. Benutzen Sie den Nasensauger nicht außerhalb der Nase.
12. Benutzen Sie das Produkt nicht als Spielzeug für Kinder.
13. Wenn Ihre Nase Wunden, Entzündungen oder Anzeichen von Blutungen aufweist, verwenden Sie den Nasensauger nicht.
14. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden.
15. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
16. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel.

- Ladespannung: DC 5V/1A
Maximale Leistung: max. 5,5 W
Nennspannung: 3,7 V/2500 mAh
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Intensitätsstufen: 9 Stufen
Saugleistung: 65 kPa ± 3 kPa
Nettoproduktgewicht: 235 g
Produktgröße: 95 mm * 45 mm

01. SEGURIDAD:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

02. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:

1. Indicador de modo / 2. Botón de encendido / 3. Botón de música / 4. Lámpara / 5. Botón de ajuste de luz / 6. Botón de disminución de potencia de succión / 7. Botón de aumento de potencia de succión / 8. Succión / 9. Tubo / 10. Vaso recolector / 11. Punta de silicona / 12. Puerto de carga / 13. Indicador de brillo / 14. Indicador de música/volumen / 15. Indicador de nivel de batería.

03. DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS [PÁGINA 2 - B]:

1. Tapa de copa / 2. Columna desviadora / 3. Parte inferior de la copa / 4. Tubo / 5. Cable de carga USB / 6. Pinzas / 7. Punta cónica / 8. Punta plana / 9. Punta en ángulo.

Nota: Antes de utilizar el aspirador nasal, asegúrese de comprender las características de cada punta y elija la adecuada según la edad de su hijo para garantizar un uso cómodo y eficaz.

Punta cónica - Poca profundidad - 0 -2 años.

Punta Plana - profunda - a partir de 0 años.

Punta en ángulo - muy profunda - a partir de 0 años.

Botón de encendido [página 2 - A2]: Al presionarlo prolongadamente se enciende/apaga el dispositivo. Una pulsación breve inicia/detiene la succión.

Botón de música [página 2 - A3]: Una pulsación breve ajusta el volumen a los niveles 1 a 3. La secuencia de botones es: 1 → 2 → 3 → Apagado → Encendido. Al presionarlo nuevamente se cambiará a una música diferente.

Botón de luz [página 2 - A5]: Modo apagado: una pulsación larga enciende/apaga la luz. Una vez encendido, una sola pulsación pasa por los niveles de brillo del 1 al 3.

Modo de encendido: una vez que el dispositivo está encendido, una sola pulsación cambia los niveles de brillo de 1 a 3 y luego se apaga. Botón de reducción de potencia de succión [página 2 - A6]: Después de encender el dispositivo, una sola pulsación del botón "-" reduce la potencia de succión. Puedes seleccionar niveles de succión del 1 al 9. Botón de aumento de potencia de succión [página 2 - A7]: Después de encender el dispositivo, una sola pulsación del botón "+" aumenta la potencia de succión. Puedes seleccionar niveles de succión del 1 al 9.

04. DESCRIPCIÓN DEL USO DEL DISPOSITIVO:

1. Instale el inserto de separación en el fondo del vaso colector.
2. Coloque el recipiente recolector en la cubierta inferior.
3. Seleccione una punta e instálela en el vaso colector.
4. Conecte el recipiente colector al puerto de entrada de aire (succión) de la unidad principal con una manguera.
5. Mantenga presionado el botón "encendido" para encender el dispositivo (presión prolongadamente nuevamente para apagarlo).
6. Utilice el botón de nivel de succión "+" o "-" para ajustar la potencia de succión al nivel deseado.
7. Utilice el botón "melodía" para activar un modo opcional adecuado para su hijo.
8. Coloque suavemente la punta dentro de la nariz de su bebé para limpiar eficazmente su mucosidad.
9. Después de eliminar la mucosidad de la nariz de su bebé, retire el recipiente recolector.
10. Después de retirar los componentes del recipiente recolector, enjuáguelos inmediatamente. (Nota: ¡el cuerpo principal del dispositivo no debe lavarse con agua!)
11. Después de la limpieza, utilice un paño suave para secar la superficie del dispositivo y guárdelo en un lugar fresco lejos de la luz solar directa.

05. CONSEJOS:

Para obtener mejores resultados, si la mucosidad de la nariz de su bebé está seca, se recomienda utilizar solución salina para hidratarla antes de utilizar el aspirador nasal eléctrico.

06. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Apague siempre la alimentación después de su uso.
2. Retire la punta de succión y la copa recolectora y límpielas con un agente limpiador y agua.
3. Mantenga las piezas y el cuerpo del dispositivo limpios y secos después de su uso.
4. La punta de succión y la copa recolectora se pueden esterilizar hirviéndolas en agua o vapor, pero no en el microondas.
5. El cuerpo principal del producto no es resistente al agua, por lo que no lo enjuague con agua ni lo limpie a altas temperaturas. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el cuerpo principal.
6. Evite almacenar el producto bajo la luz solar directa o en ambientes húmedos.

07. MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1. Es importante que la boca del bebé esté abierta durante el uso para asegurar un flujo de aire adecuado en la cavidad nasal y evitar molestias causadas por la presión negativa.
2. Evite bloquear la otra fosa nasal del bebé cuando use el aspirador nasal para evitar molestias por la presión negativa en la cabeza.

3. Cuando el vaso colector esté medio lleno, se recomienda vaciarlo antes de continuar usándolo, ya que esto evita que la mucosidad sea succionada por la bomba y pueda dañar el dispositivo.

08. PRECAUCIONES:

1. No encienda el aspirador nasal mientras se carga.
2. El dispositivo está diseñado para que lo utilicen únicamente adultos.
3. No exponga el dispositivo a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
4. El dispositivo está especialmente diseñado para eliminar la mucosidad de la nariz. ¡No debe usarse para ningún otro propósito!
5. Limpia y secar las piezas y el cuerpo del dispositivo después de cada uso.
6. Cargue la batería al 100% cada 2 meses si no la usa durante mucho tiempo.
7. No sumerja todo el dispositivo en agua durante la limpieza.
8. Durante el uso, el niño/bebé no debe contener la respiración, cerrar la boca ni tragar. Una presión de vacío excesiva puede provocar un desequilibrio en la presión del oído.
9. No utilice fuerza excesiva al colocar la punta de succión en la cavidad nasal.
10. Si su niño/bebé siente alguna molestia mientras usa el dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.
11. No utilice el aspirador nasal en la parte exterior de la nariz.
12. No utilice el producto como juguete para niños.
13. Si su nariz tiene llagas, inflamación o signos de sangrado, no utilice el aspirador nasal.
14. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio.
15. No utilice el dispositivo si está dañado.
16. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo.

- Voltaje de carga: CC 5 V/1 A.
Potencia máxima: máx. 5.5 W
Voltaje nominal: 3,7 V/2500 mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
Niveles de intensidad: 9 niveles
Potencia de succión: 65kPa±3kPa
Peso neto del producto: 235 g
Tamaño del producto: 95 mm * 45 mm

01. SEGURANÇA:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

02. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:

1. Indicador de modo / 2. Botão liga / 3. Botão de música / 4. Lâmpada / 5. Botão de ajuste de luz / 6. Botão de diminuição da potência de sucção / 7. Botão de aumento da potência de sucção / 8. Sucção / 9. Tubo / 10. Copo de coleta / 11. Ponta de silicone / 12. Porta de carregamento / 13. Indicador de brilho / 14. Indicador de música/volume / 15. Indicador de nível da bateria.

03. DESCRIÇÃO DO ACESSÓRIO [PÁGINA 2 - B]:

1. Tampa do copo / 2. Coluna de desvio / 3. Parte inferior do copo / 4. Tubo / 5. Cabo de carregamento USB / 6. Pinça / 7. Ponta cônica / 8. Ponta plana / 9. Ponta angular.

Nota: Antes de usar o aspirador nasal, certifique-se de compreender as características de cada ponta e escolher a adequada com base na idade do seu filho para garantir um uso confortável e eficaz.

Ponta Cônica - Profundidade Rasa - 0 -2 anos.

Ponta plana – profunda – a partir dos 0 anos.

Ponta angular - muito profunda - a partir dos 0 anos.

Botão liga/desliga [página 2 - A2]: Um toque longo liga/desliga o dispositivo. Um toque curto inicia/interrompe a sucção.

Botão Música [página 2 - A3]: Um toque curto ajusta o volume para os níveis 1 a 3. A sequência dos botões é: 1 → 2 → 3 → Desligado → Ligado. Pressioná-lo novamente mudará para músicas diferentes. Botão de luz [página 2 - A5]: Modo desligado: um toque longo liga/desliga a luz. Uma vez ligado, um único toque alterna entre os níveis de brilho 1 a 3.

Modo ligado: Depois que o dispositivo é ligado, um único toque alterna os níveis de brilho de 1 a 3 e depois desliga.

Botão de redução da potência de sucção [página 2 - A6]: Depois de ligar o aparelho, um único toque no botão "-" reduz a potência de sucção. Você pode selecionar níveis de sucção de 1 a 9.

Botão de aumento da potência de sucção [página 2 - A7]: Depois de ligar o aparelho, um único toque no botão "+" aumenta a potência de sucção. Você pode selecionar níveis de sucção de 1 a 9.

04. DESCRIÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO:

1. Instale o inserto de separação na parte inferior do copo coletor.
2. Coloque o copo coletor na tampa inferior.
3. Selecione uma ponta e instale-a no copo coletor.
4. Conecte o copo coletor à porta de entrada de ar da unidade

principal (sucção) com uma mangueira.

5. Pressione longamente o botão "ligar" para ligar o dispositivo (pressione longamente novamente para desligá-lo).

6. Use o botão de potência de sucção "-" ou "+" para ajustar a potência de sucção para o nível desejado.

7. Use o botão "melodia" para ativar um modo opcional adequado ao seu filho.

8. Coloque delicadamente a ponta dentro do nariz do bebê para limpar efetivamente o muco.

9. Depois de limpar o muco do nariz do bebê, retire o copo coletor.

10. Após retirar os componentes do copo coletor, enxágue-os imediatamente. (Nota: O corpo principal do dispositivo não deve ser lavado com água!)

11. Após a limpeza, use um pano macio para secar a superfície do aparelho e guarde-o em local fresco e longe da luz solar direta.

05. PONTAS:

Para melhores resultados, se o muco do nariz do seu bebê estiver seco, é recomendado o uso de soro fisiológico para hidratar antes de usar o aspirador nasal elétrico.

06. LIMPEZA E ARMAZENAMENTO:

1. Sempre desligue a energia após o uso.
2. Remova a ponta de sucção e o copo coletor e limpe-os com agente de limpeza e água.
3. Mantenha as peças e o corpo do dispositivo limpos e secos após o uso.
4. A ponta de sucção e o copo coletor podem ser esterilizados fervendo em água ou vapor, mas não no micro-ondas.
5. O copo principal do produto não é à prova d'água, portanto não enxágue com água nem limpe em altas temperaturas. Use um pano macio e úmido para limpar o corpo principal.
6. Evite armazenar o produto sob luz solar direta ou ambientes úmidos.

07. MEDIDAS DE SEGURANÇA:

1. É importante que a boca do bebê esteja aberta durante o uso para garantir o fluxo de ar adequado na cavidade nasal e evitar desconforto causado pela pressão negativa.
2. Evite bloquear a outra narina do bebê ao usar o aspirador nasal para evitar desconforto causado pela pressão negativa na cabeça.
3. Quando o copo coletor estiver meio cheio, recomenda-se esvaziá-lo antes de continuar a usá-lo, pois isso evita que o muco seja sugado para dentro da bomba e possa danificar o dispositivo.

08. PRECAUÇÕES:

1. Não ligue o aspirador nasal durante o carregamento.
2. O dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por adultos.

3. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta.

4. O dispositivo foi especialmente projetado para remover o muco do nariz. Não deve ser usado para quaisquer outros fins!

5. Limpe e seque as peças e o corpo do dispositivo após cada utilização.

6. Carregue a bateria até 100% a cada 2 meses se não for usá-la por um longo período.

7. Não mergulhe todo o dispositivo em água durante a limpeza.

8. Durante a utilização, a criança/bebê não deve prender a respiração, fechar a boca ou engolir. A pressão excessiva do vácuo pode causar um desconforto na pressão do ouvido.

9. Não use força excessiva ao colocar a ponta de sucção na cavidade nasal.

10. Se seu filho/bebê sentir algum desconforto durante o uso do dispositivo, pare de usá-lo imediatamente e consulte um médico.

11. Não utilize o aspirador nasal na parte externa do nariz.

12. Não utilize o produto como brinquedo para crianças.

13. Se o seu nariz apresentar feridas, inflamação ou sinais de sangramento, não utilize o aspirador nasal.

14. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço.

15. Não utilize o dispositivo se estiver danificado.

16. Não utilize agentes corrosivos para limpar o aparelho.

● Tensão de carregamento: DC 5V/1A

Potência máxima: máx. 5,5W

Tensão nominal: 3,7V/250mAh

Tempo de carregamento: cerca de 3 horas

Níveis de intensidade: 9 níveis

Potência de sucção: 65kPa±3kPa

Peso líquido do produto: 235g

Tamanho do produto: 95mm x 45mm

01. BEZPEČNOSTNÍ:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

02. POPIS ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - A]:

1. Indikátor režimu / 2. Tlačítko napájení / 3. Tlačítko hudby / 4. Lampa / 5. Tlačítko nastavení světla / 6. Tlačítko snížení sacího výkonu / 7. Tlačítko zvýšení sacího výkonu 8. Sání / 9. Trubice / 10. Sběrný kelímek / 11. Silikonový hrot / 12. Nabíjecí port / 13. Indikátor jasu / 14. Indikátor hudby/hlasitosti / 15. Indikátor stavu baterie.

03. POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ [STRANA 2 - B]:

1. Kryt kelímku / 2. Sloupek pro odklon / 3. Spodní část kelímku / 4. Trubička / 5. USB nabíjecí kabel / 6. Pinzeta / 7. Kónický hrot / 8. Plochý hrot / 9. Úhlový hrot.

Poznámka: Před použitím nosní odsávačky se ujistěte, že rozumíte vlastnostem každé koncovky a vyberte si vhodnou na základě věku vašeho dítěte, abyste zajistili pohodlné a efektivní používání.

Kónický hrot - malá hloubka - 0 -2 roky.
Flat Tip - hluboký - od 0 let.
Šikmá špička - velmi hluboká - od 0 let.

Tlačítko napájení [strana 2 - A2]: Dlouhým stisknutím se zařízení zapne/vypne. Krátké stisknutí spustí/zastaví sání.
Tlačítko Hudba [strana 2 - A3]: Krátkým stisknutím nastavíte hlasitost na úroveň 1 až 3. Posloupnost tlačítek je: 1 → 2 → 3 → Vypnuto → Zapnuto, Dalším stisknutím přepnete na jinou hudbu.
Tlačítko osvětlení [strana 2 - A5]: Režim vypnuto: Dlouhým stisknutím se světlo zapne/vypne. Po zapnutí jedním stisknutím procházíte úrovněmi jasu 1 až 3.
Režim zapnutí: Jakmile je zařízení zapnuto, jediným stisknutím přepnete úroveň jasu z 1 na 3 a poté se vypne.
Tlačítko snížení sacího výkonu [strana 2 - A6]: Po zapnutí zařízení jediným stisknutím tlačítka " - " snížíte sací výkon. Můžete si vybrat úroveň sání od 1 do 9.
Tlačítko zvýšení sacího výkonu [strana 2 - A7]: Po zapnutí zařízení jediným stisknutím tlačítka " + " zvýšíte sací výkon. Můžete si vybrat úroveň sání od 1 do 9.

04. POPIS POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ:

1. Nainstalujte separační vložku na dno sběrné nádoby.
2. Umístěte sběrnou nádobu na spodní kryt.
3. Vyberte špičku a nainstalujte ji na sběrnou nádobu.
4. Připojte sběrnou nádobu k vstupnímu portu vzduchu hlavní jednotky (sání) pomocí hadice.

5. Dlouhým stisknutím tlačítka „napájení“ zařízení zapnete (dalším dlouhým stisknutím jej vypnete).

6. Pomocí tlačítka výkonu sání „-“ nebo „+“ nastavte výkon sání na požadovanou úroveň.

7. Pomocí tlačítka „melodie“ aktivujte volitelný režim vhodný pro vaše dítě.
8. Jemně umístěte špičku do nosu vašeho dítěte, abyste účinně vyčistili jeho hlen.

9. Po odstranění hlenu z nosu vašeho dítěte vyměňte sběrný kalíšek.

10. Po vyjmutí součástí sběrné nádoby je ihned opláchněte. (Poznámka: Hlavní tělo zařízení by se nemělo umývat vodou!)

11. Po vyčištění osušte povrch zařízení měkkým hadříkem a uložte jej na chladném místě mimo přímé sluneční světlo.

05. TIPY:

Pro lepší výsledek, pokud je hlen v nose vašeho dítěte suchý, se doporučuje použít fyziologický roztok ke zvlhčení před použitím elektrické nosní odsávačky.

06. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

1. Po použití vždy vypněte napájení.

2. Odstraňte sací koncovku a sběrnou nádobku a očistěte je čisticím prostředkem a vodou.

3. Po použití udržujte části a tělo přístroje čisté a suché.

4. Přísavku a sběrnou nádobku lze sterilizovat vařením ve vodě nebo páře, ale ne v mikrovlnné troubě.

5. Hlavní tělo produktu není vodotěsné, proto jej neoplachujte vodou ani nečistěte při vysokých teplotách, K čištění hlavního těla použijte měkký vlhký hadřík.

6. Neskladujte výrobek na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.

07. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Je důležité, aby byla ústa dítěte během používání otevřená, aby se zajistilo správné proudění vzduchu v nosní dutině a zabránilo se nepohodlí způsobenému podtlakem.

2. Při používání nosní odsávačky zabraňte ucpaní druhé nosní dírky dítěte, abyste předešli nepohodlí způsobenému podtlakem v hlavě.

3. Když je sběrná nádobka z poloviny plná, doporučuje se ji před dalším používáním vyprázdnit, protože to zabrání nasávání hlenu do pumpy a případnému poškození zařízení.

08. OPATŘENÍ:

1. Během nabíjení nezapínejte nosní odsávačku.

2. Zařízení je určeno pouze pro dospělé.

3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.

4. Zařízení je speciálně navrženo k odstranění hlenu z nosu. Neměl by být používán pro žádné jiné účely!

5. Po každém použití očistěte a osušte části a tělo zařízení.

6. Nabíje baterii na 100 % každé 2 měsíce, pokud ji nebudete delší dobu používat.

7. Při čištění neponořujte celé zařízení do vody.

8. Během používání by dítě/kojenec nemělo zadržovat dech, zavírat ústa nebo polykat. Nadměrný podtlak může způsobit nerovnováhu ušního tlaku.

9. Při vkládání sací koncovky do nosní dutiny nepoužívejte nadměrnou sílu.

10. Pokud vaše dítě/kojenec pociťuje při používání zařízení jakékoli nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat a poradte se s lékařem.

11. Nepoužívejte nosní odsávačku na vnější stranu nosu.

12. Nepoužívejte výrobek jako hračku pro děti.

13. Pokud má váš nos vředy, zánět nebo známky krvácení, nosní odsávačku nepoužívejte.

14. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou.

15. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

16. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky.

● Nabíjecí napětí: DC 5V/1A

Maximální výkon: 5,5W

Jmenovité napětí: 3,7V/2500mAh

Doba nabíjení: Přibližně 3 hodiny

Úrovně intenzity: 9 úrovní

Sací výkon: 65KPa±3kPa

Čistá hmotnost produktu: 235 g

Velikost produktu: 95 mm * 45 mm



01. ZABEZPEČENIE:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

02. POPIS ZARIADENIA [STRANA 2 - A]:

1. Indikátor režimu / 2. Tlačidlo napájania / 3. Tlačidlo hudby / 4. Lampa / 5. Tlačidlo nastavenia svetla / 6. Tlačidlo zníženia sacieho výkonu / 7. Tlačidlo zvýšenia sacieho výkonu / 8. Odsávanie / 9. Hadička / 10. Zberný pohár / 11. Silikónový hrot / 12. Nabíjaci port / 13. Indikátor jasu / 14. Indikátor hudby/hlasitosti / 15. Indikátor stavu batérie.

03. POPIS PRÍSLUŠENSTVA [STRANA 2 - B]:

1. Kryt pohára / 2. Odvzdušňovací stĺpik / 3. Spodná časť pohára / 4. Hadička / 5. USB nabíjaci kábel / 6. Pinzeta / 7. Kónický hrot / 8. Plochý hrot / 9. Uholový hrot.

Poznámka: Pred použitím nosovej odsávačky sa uistite, že rozumiete vlastnostiam každej koncovky a vyberte si vhodnú na základe veku vášho dieťaťa, aby ste zaistili pohodlné a efektívne používanie.

Kónický špička - malá hĺbka - 0-2 roky.
Flat Tip - hlboký - od 0 rokov.
Šikmý hrot - veľmi hlboký - od 0 rokov.

Tlačidlo napájania [strana 2 - A2]: Dlhým stlačením sa zariadenie zapne/vypne. Krátko stlačením spustí/zastaví odsávanie.
Tlačidlo Hudba [strana 2 - A3]: Krátkym stlačením nastavíte hlasitosť na úrovne 1 až 3. Postupnosť tlačidej je: 1 → 2 → 3 → Vypnuté → Zapnuté. Opätovným stlačením prepnete na inú hudbu.
Tlačidlo svetla [strana 2 - A5]: Režim vypnutia: Dlhým stlačením sa svetlo zapne/vypne. Po zapnutí jedným stlačením prejdete medzi úrovňami jasu 1 až 3.
Režim zapnutia: Po zapnutí zariadenia jediným stlačením prepnete úroveň jasu z 1 na 3 a potom sa vypne.
Tlačidlo zníženia sacieho výkonu [strana 2 - A6]: Po zapnutí prístroja jediným stlačením tlačidla "-" sa zníži sací výkon. Môžete si vybrať úroveň odsávania od 1 do 9.
Tlačidlo zvýšenia sacieho výkonu [strana 2 - A7]: Po zapnutí prístroja sa jediným stlačením tlačidla "+" zvýši sací výkon. Môžete si vybrať úroveň odsávania od 1 do 9.

04. POPIS POUŽITIA ZARIADENIA:

1. Nainštalujte separačnú vložku na spodok zbernej misky.
2. Umiestnite zbernú nádobu na spodný kryt.
3. Vyberte hrot a nainštalujte ho na zberný pohár.
4. Pripojte zbernú nádobu k otvoru privodu vzduchu hlavnej jednotky

(nasávanie) pomocou hadice.

5. Dlhým stlačením tlačidla „napájanie“ zariadenie zapnete (opätovným dlhým stlačením ho vypnete).
6. Pomocou tlačidla „-“ alebo „+“ nastavíte sací výkon na požadovanú úroveň.
7. Pomocou tlačidla „melódia“ aktivujete voľiteľný režim vhodný pre vaše dieťa.
8. Jemne umiestnite špičku do nosa vášho dieťaťa, aby ste účinne vyčistili hlien.
9. Po odstránení hlienu z nosa vášho dieťaťa vyberte zberný pohár.
10. Po vybratí komponentov zberného pohára ich ihneď opláchnite. (Poznámka: Hlavné telo zariadenia by sa nemalo umývať vodou!)
11. Po vyčistení osušte povrch zariadenia mäkkou handričkou a uložte ho na chladnom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

05. TIPY:

Pre lepší výsledok, ak je hlien v nose vášho dieťaťa suchý, odporúča sa použiť fyziologický roztok na zvlhčenie pred použitím elektrickej nosovej odsávačky.

06. ČISTENIE A SKLADOVANIE:

1. Po použití vždy vypnite napájanie.
2. Odstráňte saciu koncovku a zbernú nádobu a vyčistite ich čistiacim prostriedkom a vodou.
3. Po použití udržujte časti a telo prístroja čisté a suché.
4. Prísavný nástavec a zberný pohár možno sterilizovať varením vo vode alebo pare, nie však v mikrovlnnej rúre.
5. Hlavné telo produktu nie je vodotesné, preto ho neoplachujte vodou ani nečistite pri vysokých teplotách. Na čistenie hlavného tela použite mäkkú vlhku handričku.
6. Neskladujte výrobok na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.

07. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Je dôležité, aby malo dieťa počas používania otvorené ústa, aby sa zabezpečilo správne prúdenie vzduchu v nosovej dutine a zabránilo sa nepohodliu spôsobenému podtlakom.
2. Zabráňte upchatu druhej nosovej diery dieťaťa pri používaní nosovej odsávačky, aby ste predišli neprijemným pocitom z negatívneho tlaku v hlave.
3. Keď je zberný pohárik do polovice plný, odporúča sa ho pred ďalším používaním vyprázdniť, pretože to zabráni nasatiu hlienu do pumpy a potenciálnemu poškodeniu zariadenia.

08. PREVENČIA:

1. Počas nabíjania nezapínajte nosovú odsávačku.
2. Zariadenie je určené len na používanie dospelými osobami.

3. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
4. Prístroj je špeciálne navrhnutý na odstránenie hlienu z nosa. Nemal by sa používať na žiadne iné účely!
5. Po každom použití vyčistite a vysušte časti a telo zariadenia.
6. Nabíte batériu na 100 % každé 2 mesiace, ak ju nebudete dlhší čas používať.
7. Pri čistení neponárajte celé zariadenie do vody.
8. Počas používania by dieťa/dojča nemalo zdržiavať dych, zatvárať ústa ani prehĺtať. Nadmerný podtlak môže spôsobiť nerovnováhu tlaku v uchu.
9. Pri vkladaní sacej koncovky do nosovej dutiny nepoužívajte nadmernú silu.
10. Ak vaše dieťa/dojča pociťuje pri používaní zariadenia akékoľvek nepohodlie, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
11. Nepoužívajte nosovú odsávačku na vonkajšej strane nosa.
12. Nepoužívajte výrobok ako hračku pre deti.
13. Ak má váš nos vredy, zápal alebo známky krvácania, nosovú odsávačku nepoužívajte.
14. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba.
15. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené.
16. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.

- Nabíjacie napätie: DC 5V/1A
- Maximálny výkon: 5,5W
- Nominálne napätie: 3,7V/2500mAh
- Doba nabíjania: Približne 3 hodiny
- Úroveň intenzity: 9 úrovní
- Sací výkon: 65kPa±3kPa
- Čistá hmotnosť produktu: 235 g
- Veľkosť produktu: 95 mm * 45 mm

01. VARNOST:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

02. OPIS NAPRAVE [STRAN 2 - A]:

1. Indikator načina / 2. Gumb za vklop / 3. Gumb za glasbo / 4. Svetilka / 5. Gumb za nastavitve svetlobe / 6. Gumb za zmanjšanje sesalne moči / 7. Gumb za povečanje sesalne moči 8. Sesanje / 9. Cev / 10. Zbira skodelica / 11. Silikonska konica / 12. Vrata za polnjenje / 13. Indikator svetlosti / 14. Indikator glasbe/glasnosti / 15. Indikator naplnjenosti baterije.

03. OPIS DODATNE OPREME [STRAN 2 - B]:

1. Pokrov skodelice / 2. Odvodni steber / 3. Spodnji del skodelice / 4. Cev / 5. USB kabel za polnjenje / 6. Pinceta / 7. Stožčasta konica / 8. Ploščata konica / 9. Kotna konica.

Opomba: Pred uporabo nosnega aspiratorja se prepričajte, da razumete značilnosti vsake konice in izberite ustrezno glede na starost vašega otroka, da zagotovite udobno in učinkovito uporabo.

Stožčasta konica - plitva globina - 0-2 leti.
Ravna konica - globoka - od 0 let.
Konica pod kotom - zelo globoka - od 0 let.

Gumb za vklop [stran 2 - A2]: Dolg pritisek vklopi/izklopi napravo. Kratek pritisek zažene/ustavi sesanje.

Gumb za glasbo [stran 2 - A3]: Kratek pritisek prilagodi glasnost na stopnje od 1 do 3. Zaporedje gumbov je: 1 → 2 → 3 → izklop → Vklp. S ponovnim pritiskom preklopite na drugo glasbo. Gumb za osvetlitev [stran 2 - A5]: način izklopa: dolg pritisek vklopi/izklopi luč. Ko je vklopljen, se z enim pritiskom preklaplja med stopnjami svetlosti od 1 do 3.

Način vklopa: Ko je naprava vklopljena, z enim samim pritiskom preklopi ravni svetlosti od 1 do 3 in se nato izklopi. Gumb za zmanjšanje sesalne moči [stran 2 - A6]: Po vklopu naprave se z enim samim pritiskom na gumb " - " zmanjša sesalna moč. Izberete lahko stopnje sesanja od 1 do 9.

Gumb za povečanje sesalne moči [stran 2 - A7]: Po vklopu naprave se z enim pritiskom na gumb "+" poveča sesalna moč. Izberete lahko stopnje sesanja od 1 do 9.

04. OPIS UPORABE NAPRAVE:

1. Namestite ločavilni vložek na dno zbiralne posode.
2. Zbimo posodo postavite na spodnji pokrov.
3. Izberite konico in jo namestite na zbiralno skodelico.
4. Zbimo posodo s cevjo povežite z vstopno odprtino za zrak

(sesalno) glavne enote.

5. Dolgo pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo (znova pritisnete dolgo, da jo izklopite).
6. Z gumboma za moč sesanja "-" ali "+" nastavite moč sesanja na zeleno raven.
7. Z gumbom "melodija" aktivirajte izbirni način, primeren za vašega otroka.
8. Nežno položite konico v otrokov nos, da učinkovito očistite njegovo sluz.
9. Ko očistite sluz iz otrokovega nosu, odstranite posodo za zbiranje.
10. Ko odstranite komponente zbiralne posode, jih takoj sperite. (Opomba: glavnega ohišja naprave ne smete prati z vodo!)
11. Po čiščenju z mehko krpo osušite površino naprave in jo shranite na hladno mesto, stran od neposredne sončne svetlobe.

05. NASVETI:

Za boljše rezultate, če je sluz v otrokovem nosu suha, je priporočljivo, da pred uporabo električnega nosnega aspiratorja uporabite fiziološko raztopino za vlaženje.

06. ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:

1. Po uporabi vedno izklopite napajanje.
2. Odstranite sesalno konico in zbiralno posodo ter ju očistite s čistilnim sredstvom in vodo.
3. Po uporabi naj bodo deli in ohišje naprave čisti in suhi.
4. Sesalno konico in zbiralno posodo lahko sterilizirate s kuhanjem v vodi ali pari, vendar ne v mikrovalovni pečici.
5. Glavni del izdelka ni vodotesen, zato ga ne izpirajte z vodo ali čistite pri visokih temperaturah. Za čiščenje ohišja uporabite mehko vlažno krpo.
6. Izogibajte se shranjevanju izdelka na neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem okolju.

07. VARNOSTNI UKREPI:

1. Pomembno je, da so otrokova usta med uporabo odprta, da se zagotovi ustrezen pretok zraka v nosni votlini in prepreči nelagodje, ki ga povzroča podtlak.
2. Pri uporabi nosnega aspiratorja se izogibajte zamašitvi otrokove druge nosnice, da preprečite nelagodje zaradi podtlaka v glavi.
3. Ko je zbiralna posoda napol polna, je priporočljivo, da jo pred nadaljnjo uporabo izpraznite, saj s tem preprečite, da bi se sluz vsesala v črpalko in potencialno poškodovala napravo.

08. PREVIDNOSTNI UKREPI:

1. Med polnjenjem ne vklopite nosnega aspiratorja.
2. Naprava je namenjena samo odraslim osebam.
3. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.

4. Naprava je posebej zasnovana za odstranjevanje sluzi iz nosu. Ne sme se uporabljati za druge namene!
5. Po vsaki uporabi očistite in posušite dele in telo naprave.
6. Napolnite baterijo do 100 % vsaka 2 meseca, če je ne uporabljate dlje časa.
7. Pri čiščenju ne potaplajte celotne naprave v vodo.
8. Med uporabo otrok/dojenček ne sme zadrževati diha, zapirati ust ali požirati. Previsok vakuumski tlak lahko povzroči neravnovesje v ušesnem tlaku.
9. Ne uporabljajte pretirane sile, ko sesalno konico nameščate v nosno votlino.
10. Če vaš otrok/dojenček med uporabo naprave občuti nelagodje, jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
11. Nosnega aspiratorja ne uporabljajte na zunanji strani nosu.
12. Izdelka ne uporabljajte kot igračo za otroke.
13. Če ima vaš nos rane, vnetja ali znake krvavitve, ne uporabljajte nosnega aspiratorja.
14. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj oceni servis.
15. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
16. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev.

● Polnilna napetost: DC 5V/1A

Največja moč: max 5,5 W
Nazivna napetost: 3,7 V/2500 mAh
Čas polnjenja: približno 3 ure
Stopnje intenzivnosti: 9 stopenj
Sesalna moč: 65kPa±3kPa
Neto teža izdelka: 235 g
Velikost izdelka: 95 mm * 45 mm



01. TURVALISUS:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

02. SEADME KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - A]:

1. Režiimi indikaator / 2. Toitenupp / 3. Muusikanupp / 4. Lamp / 5. Valguse reguleerimise nupp / 6. Imemisvõimsuse vähendamise nupp / 7. Imemisvõimsuse suurendamise nupp / 8. Imemis / 9. Toru / 10. Kogumistops / 11. Silikoonotsik / 12. Laadimisport / 13. Heleduse indikaator / 14. Muusika/helitugevuse indikaator / 15. Aku laetuse näidik.

03. TARVIKU KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - B]:

1. Tassi kaas / 2. Suunamissammas / 3. Tassi alumine osa / 4. Toru / 5. USB laadimiskaabel / 6. Pintsetid / 7. Kooniline ots / 8. Lame ots. 9. Nurga ots.

Märkus: Enne ninaaspiraatori kasutamist veenduge, et mõistate igat otsiku omadusi ja valite sobiva, mis põhineb teie lapse vanusel, et tagada mugav ja tõhus kasutamine.

Kooniline ots - madal sügavus - 0 +2 aastast.
Lame ots - sügav - alates 0 aastast.
Nurga ots - väga sügav - alates 0 aastast.

Toitenupp [lk 2 - A2]: pikk vajutus lülitab seadme sisse/välja. Lühike vajutus käivitab/peatab imemise.
Muusikanupp [lehekülg 2 - A3]: Lühike vajutus reguleerb helitugevust tasemetele 1 kuni 3. Nuppude järjestus on järgmine: 1 → 2 → 3 → Väljas → Sees. Uuesti vajutades lülitub sisse teistsugune muusika. Valguse nupp [lk 2 - A5]: Väljalülitusrežiim: Pika vajutus lülitab valguse sisse/välja. Kui see on sisse lülitatud, liigub üks vajutus läbi heledustasetete 1 kuni 3. Sisselülitusrežiim: kui seade on sisse lülitatud, lülitab üks vajutus heleduse taseme 1-3 ja lülitub seejärel välja. Imemisvõimsuse vähendamise nupp [lk 2 - A6]: pärast seadme sisselülitamist vähendab üks nupu " - " vajutus imemisvõimsust. Saate valida imemistase vahemikus 1 kuni 9. Imemisvõimsuse suurendamise nupp [lk 2 - A7]: pärast seadme sisselülitamist suurendab imemisvõimsust ühekordne nupu "+" vajutus. Saate valida imemistase vahemikus 1 kuni 9.

04. SEADME KASUTAMISE KIRJELDUS:

1. Paigaldage eraldussisustus kogumistopsi põhjale.
2. Asetage kogumistops alumisele kaanele.
3. Valige otsik ja paigaldage see kogumistopsi külge.
4. Ühendage kogumistops volikui abil põhiseadme õhu

sisselaskeavaga (imemine).

5. Seadme sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu (väljalülitamiseks vajutage uuesti).

6. Kasutage imemisvõimsuse reguleerimiseks soovitud tasemeni imemisvõimsuse nuppu "-" või "+".

7. Kasutage oma lapsele sobiva valikulise režiimi aktiveerimiseks nuppu "meeloodia".

8. Asetage ots õrnalt lapse nina sisse, et tema lima tõhusalt puhastada.

9. Pärast lima eemaldamist beebi ninast eemaldage kogumistops.

10. Pärast kogumistopsi komponentide eemaldamist loputage need koheselt. (Märkus: seadme põhiosa ei tohi veega pestud)

11. Pärast puhastamist kuivatage seadme pind pehme lapiga ja hoidke seda jahedas, otseste päikesevalguse eest kaitstult.

05. NÕUANDED:

Paremate tulemuste saavutamiseks, kui teie beebi ninas olev lima on kuiv, on enne elektrilise ninaaspiraatori kasutamist soovitatav otsikuta niisutamiseks soolalahust.

06. PUHASTAMINE JA LADUSTAMINE:

1. Pärast kasutamist lülitage alati toide välja.
2. Eemaldage imiotsik ja kogumiskork ning puhastage need puhastusvahendi ja veega.
3. Hoidke seadme osad ja korpus pärast kasutamist puhtad ja kuivad.
4. Imiotsikut ja kogumistopsi saab steriliseenda vees või aurus keetes, kuid mitte mikrolaineahjus.
5. Toote põhiosa ei ole veekindel, seega ärge loputage seda veega ega puhastage seda kõrge temperatuuril. Kasutage põhikorpuse puhastamiseks pehmet niisket lappi.
6. Vältige toote hoidmist otseste päikesevalguse käes või niiskes keskkonnas.

07. TURVAMEETMED:

1. Oluline on, et lapse suu oleks kasutamise ajal avatud, et tagada õige õhuvoolu ninaõõnes ja vältida alarõhku tingitud ebamugavustunnet.
2. Vältige nasalese aspiraatori kasutamisel lapse teise ninaõõrme blokeerimist, et vältida pea alarõhku tekitatud ebamugavustunnet.
3. Kui kogumistops on pooltäis, on soovitatav see enne kasutamise jätkamist tühjendada, kuna see hoiab ära lima imemise pumpa ja seadme kahjustamise.

08. ETTEVAATUSABINÕUD:

1. Ärge lülitage ninaaspiraatorit laadimise ajal sisse.
2. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
3. Ärge jätke seadet kõrgete temperatuuride, kõrge niiskuse ega otseste päikesevalguse kätte.
4. Seade on spetsiaalselt ette nähtud lima eemaldamiseks ninast. Seda ei

tohi kasutada muul otstarbel!

5. Puhastage ja kuivatage seadme osi ja korpus pärast iga kasutuskorda.

6. Laadige akut 100% iga 2 kuu tagant, kui te seda pikka aega ei kasuta.

7. Ärge kastke kogu seadet puhastamise ajal vette, 8. Laps/laps ei tohi kasutamise ajal hinge kinni hoida, suud sulgeda ega neelata. Liigne vaakumrõhk võib põhjustada kõrvarõhu tasakaalustamatust.

9. Ärge kasutage imemisotsa ninaõõnde asetamisel liigest jõudu.

10. Kui teie laps/imik kogeb seadme kasutamise ajal ebamugavust, lõpetage kohe selle kasutamine ja konsulteerige arstiga.

11. Ärge kasutage ninaaspiraatorit nina välisküljel.

12. Ärge kasutage toodet laste mänguasjana.

13. Kui teie ninal on haavandeid, põletikku või verejooksu tunnuseid, ärge kasutage ninaaspiraatorit.

14. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi.

15. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.

16. Ärge kasutage seadme puhastamiseks soovitavaid aineid.

● Laadimispinge: DC 5V/1A
Maksimaalne võimsus: max 5,5W
Nimipinge: 3,7 V / 2500 mAh
Laadimisaeg: umbes 3 tundi
Intensiivsuse tasemed: 9 taset
Imemisvõimsus: 65kPa±3kPa
Toote netokaal: 235 g
Toote suurus: 95mm * 45mm

01. SAUGUMAS:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

02. ĮRENGINIO APRAŠAS [2 PUSLAPIS – A]:

1. Režimo indikatorius / 2. Maitinimo mygtukas / 3. Muzikos mygtukas / 4. Lempa / 5. Šviesos reguliavimo mygtukas / 6. Siurbimo galios mažinimo mygtukas / 7. Siurbimo galios didinimo mygtukas 8. Siurbimo / 9. Vamzdis / 10. Surinkimo puodelis / 11. Silikoninis antgalis / 12. Įkrovimo priedavadas / 13. Ryškumo indikatorius / 14. Muzikos/garsumo indikatorius / 15. Baterijos lygio indikatorius.

03. PRIEDO APRAŠYMAS [PUSLAPIS 2 - B]:

1. Puodelio dangtelis / 2. Nukreipimo kolonėlė / 3. Puodelio apatinė dalis / 4. Vamzdis / 5. USB įkrovimo laidas / 6. Pincetas / 7. Kūginis antgalis / 8. Plokščias antgalis / 9. Kampinis antgalis.

Pastaba: Prieš naudodami nosies aspiratorių įsitikinkite, kad suprantate kiekvieno antgalio ypatybes ir pagal vaiko amžių pasirinkite tinkamą, kad užtikrintumėte patogų ir efektyvų naudojimą.

Kūginis antgalis - seklius gylis - 0-2 metai.
Plokščias antgalis - gilus - nuo 0 metų.
Kampuotas antgalis - labai gilus - nuo 0 metų.

Maitinimo mygtukas [puslapis 2 - A2]: Ilgai paspaudus įjungiamas / išjungiamas įrenginys. Trumpas paspaudimas pradeda / sustabdo siurbimą.

Muzikos mygtukas [2 psl. – A3]: trumpai paspaudus garsas sureguliuojamas iki 1–3 lygių. Mygtukų seka yra tokia: 1 → 2 → 3 → Išjungta → Įjungta. Dar kartą paspausdami persijungsite į kitą muziką.

Šviesos mygtukas [puslapis 2 - A5]: Išjungimo režimas: Ilgai paspaudus, šviesa įjungiama/išjungiama, įjungus vieną kartą paspaudus perjungiamas ryškumo lygis nuo 1 iki 3. Įjungimo režimas: kai įrenginys įjungiamas, vienu paspaudimu ryškumo lygis perjungiamas nuo 1 iki 3, o tada išjungia. Siurbimo galios mažinimo mygtukas [2 puslapis – A6]: įjungus įrenginį, vienas mygtuko „-“ paspaudimas sumažina siurbimo galią. Galite pasirinkti siurbimo lygius nuo 1 iki 9. Siurbimo galios didinimo mygtukas [2 puslapis – A7]: įjungus įrenginį, vienas mygtuko „+“ paspaudimas padidina siurbimo galią. Galite pasirinkti siurbimo lygius nuo 1 iki 9.

04. PRIETAISO NAUDOJIMO APRAŠYMAS:

1. Idėkite atskyrimo idėklą surinkimo puodelio apačioje.
2. Padėkite surinkimo puodėlį ant apatinio dangčio.

3. Pasirinkite antgalį ir uždėkite jį ant surinkimo puodelio.

4. Prijunkite surinkimo taurėlę prie pagrindinio įrenginio oro įleidimo angos (siurbimo) naudodami žarną.

5. Ilgai paspauskite „maitinimo“ mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį (ilgai paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte).

6. Siurbimo galios mygtuku „+“ arba „-“ sureguliuokite siurbimo galią iki norimo lygio.

7. Mygtuku „melodija“ suaktyvinkite pasirinktą jūsų vaikui tinkamą režimą.

8. Švelniai įkiškite galiuką į kūdikio nosį, kad efektyviai išvalytumėte jo gleives.

9. Išvalę gleives iš kūdikio nosies, išimkite surinkimo taurėlę.

10. Išėmę surinkimo puodelio komponentus, nedelsdami juos nuplaukite. (Pastaba: pagrindinio prietaiso korpuso negalima plauti vandeniu!)

11. Po valymo minkštu skudurėliu nusauskite įrenginio paviršių ir laikykite jį vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

05. PATARIMAI:

Norint pasiekti geresnių rezultatų, jei gleivės kūdikio nosyje yra sausos, prieš naudojant elektrinį nosies aspiratorių rekomenduojama sudrėkinti fiziologinį tirpalą.

06. VALYMAS IR SANDĖLIAVIMAS:

1. Po naudojimo visada išjunkite maitinimą.

2. Nuimkite siurbimo antgalį ir surinkimo taurę ir nuvalykite juos valymo priemone bei vandeniu.

3. Panaudoję prietaiso dalis ir korpusą laikykite švariis ir sausus.

4. Siurbimo antgalį ir surinkimo taurėlę galima sterilizuoti verdant vandenyje arba garuose, bet ne mikrobangų krosnelėje.

5. Pagrindinis gamtinio korpusas nėra atsparus vandeniui, todėl neskalkaukite jo vandeniu ir nevalykite aukštoje temperatūroje. Norėdami išvalyti pagrindinį korpusą, naudokite minkštą drėgną šluostę.

6. Nelaiškite gamtinio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba drėgnoje aplinkoje.

07. APSAUGOS PRIEMONĖS:

1. Svarbu, kad kūdikio burna naudojimo metu būtų atidaryta, kad būtų užtikrintas tinkamas oro srautas nosies ertmėje ir išvengta diskomforto, kurį sukelia neigiamas slėgis.

2. Neužkimškite kitos kūdikio šnervės, kai naudojate nosies aspiratorių, kad išvengtumėte diskomforto dėl neigiamo spaudimo galvoje.

3. Kai surinkimo puodelis yra pusiau pilnas, prieš tęsiant naudojimą rekomenduojama jį ištuštinti, nes taip išvengsite gleivių įsiurbimo į siurblią ir galimo prietaiso pažeidimo.

08. ATSARGUMO PRIEMONĖS:

1. Neįjunkite nosies aspiratoriaus kraunant.

2. Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.

3. Nelaiškite prietaiso nuo aukšto temperatūros, didelės drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.

4. Prietaisas specialiai sukurtas gleivėms iš nosies pašalinti. Jis neturėtų būti naudojamas jokiems kitoms tikslams!

5. Nuvalykite ir išdžiovinkite prietaiso dalis ir korpusą po kiekvieno naudojimo.

6. Įkraukite akumuliatorių iki 100% kas 2 mėnesius, jei nenaudojate jo ilgą laiką.

7. Valydami nenardinkite viso prietaiso į vandenį.

8. Vartojimo metu vaikas/kūdikis neturėtų sulaukyti kvėpavimo, uždaryti burnos ar nuryti. Per didelį vakuuminis slėgis gali sukelti ausies slėgio disbalansą.

9. Nenaudokite per didelės jėgos, kai įkišate siurbimo antgalį į nosies ertmę.

10. Jeigu jūsų vaikas/kūdikis jaučia diskomfortą naudodamas prietaisą, nedelsdami nutokite jį naudoti ir kreipkitės į gydytoją.

11. Nenaudokite nosies aspiratoriaus išorinėje nosies pusėje.

12. Nenaudokite gamtinio kaip žaislo vaikams.

13. Jei nosyje yra opų, uždegimų ar kraujavimo požymių, nenaudokite nosies aspiratoriaus.

14. Netaisykite, neardykite ir nemodifikuokite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba.

15. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas.

16. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų.

- Įkrovimo įtampa: DC 5V/1A
- Maksimali galia: max 5.5W
- Nominali įtampa: 3.7 V / 2500 mAh
- Įkrovimo laikas: apie 3 valandas
- Intensyvumo lygiai: 9 lygiai
- Siurbimo galia: 65kPa±3kPa
- Grynas gamtinio svoris: 235 g
- Gaminio dydis: 95 mm * 45 mm

01. DROŠĪBA:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

02. IERĪCES APRAKSTS [2. LAPA — A]:

1. Režīma indikators / 2. Barošanas poga / 3. Mūzikas poga / 4. Lampa / 5. Gaismas regulēšanas poga / 6. Sūkšanas jaudas samazināšanas poga / 7. Sūkšanas jaudas palielināšanas poga 8. Sūkšanas / 9. Caurule / 10. Savākšanas krūze / 11. Silikona uzgalis / 12. Uzlādes ports / 13. Spļūgtuma indikators / 14. Mūzikas/skaļuma indikators / 15. Akumulatora līmeņa indikators.

03. PIEDERUMA APRAKSTS [LAPA 2 - B]:

1. Krūzes vāciņš / 2. Novirzīšanas kolonna / 3. Krūzes apakšējā daļa / 4. Caurule / 5. USB uzlādes kabelis / 6. Pincete / 7. Konisks uzgalis / 8. Plakans uzgalis / 9. Leņķa uzgalis.

Piezīme: Pirms deguna aspiratora lietošanas pārlicinieties, ka izprotat katra uzgaļa īpašības un izvēlieties atbilstošu, ņemot vērā bērna vecumu, lai nodrošinātu ērtu un efektīvu lietošanu.

Konisks uzgalis - Sekls Dzļums - 0-2 gadi.

Plakans uzgalis - dzļš - no 0 gadiem.

Leņķiskais gals - ļoti dzļš - no 0 gadiem.

Barošanas poga [2. lapa - A2]: Ilgi nospiežot, ierīce tiek ieslēgta/izslēgta. Iši nospiežot, tiek sākota/apturēta sūkšana. Mūzikas poga [2. lapa — A3]: Iši nospiežot, skaļums tiek noregulēts līdz līmenim no 1 līdz 3. Pogu secība ir šāda: 1 → 2 → 3 → Izslēgts → Ieslēgts. Nospiežot to vēlreiz, tiks pārslēgta cita mūzika. Appaismojuma poga [2. lapuse - A5]: Izslēgšanas režīms: ilgi nospiežot, appaismojums tiek ieslēgts/izslēgts. Kad tas ir ieslēgts, ar vienu nospiešanu tiek pārslēgts spļūgtuma līmenis no 1 līdz 3, ieslēgšanas režīms: kad ierīce ir ieslēgta, ar vienu nospiešanu tiek pārslēgti spļūgtuma līmeņi no 1 līdz 3 un pēc tam izslēdzas. Sūkšanas jaudas samazināšanas poga [2. lapa — A6]: pēc ierīces ieslēgšanas vienreizēja pogas "-" nospiešana samazina sūkšanas jaudu. Jūs varat izvēlēties sūkšanas līmeni no 1 līdz 9. Sūkšanas jaudas palielināšanas poga [2. lapa — A7]: pēc ierīces ieslēgšanas vienreizēja pogas "+" nospiešana palielina sūkšanas jaudu. Jūs varat izvēlēties sūkšanas līmeni no 1 līdz 9.

04. IERĪCES LIETOŠANAS APRAKSTS:

1. Uzstādiet atdālīšanas ielīktni savākšanas krūzes apakšā.
2. Novietojiet savākšanas krūzi uz apakšējā vāka.
3. Izvēlieties uzgali un uzstādiet to savākšanas krūzē.
4. Savienojiet savākšanas krūzi ar galvenās ierīces gaisa ieplūdes

portu (iesūkšanas) ar šūteni.

5. Turiet nospiestu pogu "barošana", lai ieslēgtu ierīci (nospiediet vēlreiz, lai to izslēgtu).

6. Izmantojiet sūkšanas barošanas pogu "-" vai "+", lai noregulētu sūkšanas jaudu vēlamajā līmenī.

7. Izmantojiet pogu "melodija", lai aktivizētu izvēles režīmu, kas piemērots jūsu bērnam.

8. Uzmaniģi ievietojiet galu mazajā deguna iekšpusē, lai efektīvi atfīrītu viņa gļotas.

9. Pēc gļotu izfīrīšanas no mazajā deguna ņemiet savākšanas krūzi.

10. Pēc savākšanas krūzes sastādājoņu noņemšanas nekavējoties tās izskalojiet. (Piezīme: ierīces galveno korpusu nedrīkst nosusināt ar ūdeni!)

11. Pēc fīrīšanas ar mikstu drāniņu nosusiniet ierīces vismu un uzglabājiet to vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

05. PADOMI:

Lai iegūtu labākus rezultātus, ja gļotas mazajā degunā ir sausas, pirms elektriskā deguna aspiratora lietošanas mitrināšanai ieteicams izmantot fizioloģisko šķīdumu.

06. TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA:

1. Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet strāvu.
2. Nonemiet sūkšanas uzgali un savācējkausu un notīriet tos ar fīrīšanas līdzekli un ūdeni.
3. Pēc lietošanas turiet ierīces daļas un korpusu tīru un sausu.
4. Sūkšanas galu un savākšanas krūzi var sterilizēt, vārot ūdenī vai vaiķos, bet ne mikroviļņu krāsnī.
5. Produkta galvenais korpus nav ūdensizturīgs, tāpēc neskalojiet to ar ūdeni un neīniet augstā temperatūrā. Lai notīrītu galveno korpusu, izmantojiet mikstu, mitru drānu.
6. Izvairieties no produkta glabāšanas tiešos saules staros vai mitrā vidē.

07. DROŠĪBAS PASĀKUMI:

1. Svarīgi, lai lietošanas laikā mazajā mute būtu atvērta, lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu deguna dobumā un novērstu negatīvā spiediena radīto diskomfortu.
2. Lietojot deguna aspiratoru, izvairieties no bērna otras nāsīs bloķēšanas, lai novērstu diskomfortu, ko rada negatīvs spiediens galvā.
3. Kad savākšanas krūze ir līdz pusei pilna, pirms lietošanas turpināšanas ieteicams to iztukšot, jo tas novērs gļotu iesūkšanas sūkni un potenciāli ierīces bojājumu.

08. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

1. Uzlādes laikā neieslēdziet deguna aspiratoru.
2. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai pieaugušajiem.
3. Nepakļaujiet ierīci augstas temperatūras, augsta mitruma vai tiešas saules gaismas iedarbībai.
4. Ierīce ir īpaši paredzēta gļotu noņemšanai no deguna. To nedrīkst

izmantot citiem mērķiem!

5. Pēc katras lietošanas reizes notīriet un nosusiniet ierīces daļas un korpusu.

6. Uzlādējiet akumulatoru līdz 100% ik pēc 2 mēnešiem, ja nelietojat to ilgu laiku.

7. Tīrīšanas laikā neiegremdējiet visu ierīci ūdenī.

8. Lietošanas laikā bērnam/zīdaiņim nevajadzētu aizturēt elpu, aizvērt muti vai norīt. Pārmērīgs vakuuma spiediens var izraisīt auss spiediena nelīdzsvarotību.

9. Nelietojiet pārmērīgu spēku, ievietojot sūkšanas galu deguna dobumā.

10. Ja jūsu bērns/zīdaiņis ierīces lietošanas laikā izjūt diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

11. Neizmantojiet deguna aspiratoru deguna ārpusē.

12. Neizmantojiet produktu kā rotaļlietu bērniem.

13. Ja deguna ir čūlas, iekaisums vai asiņošanas pazīmes, nelietojiet deguna aspiratoru.

14. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jekburi pārķūpumi ir jānovērtē dienestam.

15. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

16. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus.

- Uzlādes spriegums: DC 5V/1A
- Maksimālā jauda: max 5,5W
- Nominālais spriegums: 3,7 V/2500 mAh
- Uzlādes laiks: apmēram 3 stundas
- Intensitātes līmeņi: 9 līmeņi
- Sūkšanas jauda: 65KPa±3kPa
- Produkta neto svars: 235g
- Produkta izmērs: 95mm * 45mm

01. BIZTONSÁG:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

02. ESZKÖZ LEÍRÁSA [2. OLDAL - A]:

1. Üzemind jelző / 2. Bekapcsológomb / 3. Zene gomb / 4. Lámpa / 5. Fénybeállító gomb / 6. Szívóteljesítmény csökkentő gomb / 7. Szívóteljesítmény növelő gomb / 8. Szívó / 9. Cső / 10. Gyűjtőpohár / 11. Szilikon hegy / 12. Töltőcsatlakozó / 13. Fényerő jelző / 14. Zenehangere jelző / 15. Akku töltöttségi szint jelző.

03. TARTOZÉK LEÍRÁSA [2. OLDAL - B]:

1. Cseszfeledél / 2. Elterelő cső / 3. A csesze alsó része / 4. Cső / 5. USB töltőkábel / 6. Csispez / 7. Kúpos hegy / 8. Lapos hegy / 9. Szögcsúcs.

Megjegyzés: Az orrszívó használatát előződjön meg arról, hogy megértette az egyes hegyek jellemzőit, és gyermeke életkorának megfelelően válassza ki a megfelelőt a kényelmes és hatékony használat érdekében.

Kúpos hegy - sekély mélység - 0-2 év.

Lapos hegy - mély - 0 éves kortól.

Szögletes csúcs - nagyon mély - 0 éves kortól.

Bekapcsológomb [2. oldal - A2]: Hosszan megnyomva be-/kikapcsolja a készüléket. Egy rövid megnyomás elindítja/leállítja a szívást.

Zene gomb [2. oldal - A3]: Rövid megnyomásával a hangerő 1-től 3-ig állítható be. A gombok sorrendje a következő: 1 → 2 → 3 → KI → Be. Újabb megnyomásával más zenére válhat.

Világítás gomb [2. oldal - A5]: Kikapcsolt üzemmódot: Hosszan megnyomva be-/kikapcsolja a lámpát. Bekapcsolás után egyetlen megnyomással válthat az 1-3 fényerőszint között.

Bekapcsolási mód: A készülék bekapcsolása után egyetlen gombnyomással 1-től 3-ra váltja a fényerőt, majd kikapcsol. Szívóteljesítmény-csökkentő gomb [2. oldal - A6]: A készülék bekapcsolása után a "-" gomb egyszeri megnyomása csökkenti a szívási teljesítményt. A szívási szintet 1 és 9 között választhatja ki. Szívóteljesítmény-növelő gomb [2. oldal - A7]: A készülék bekapcsolása után a "+" gomb egyetlen megnyomása növeli a szívási teljesítményt. A szívási szintet 1 és 9 között választhatja ki.

04. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA:

1. Szerelje fel az elválasztó betétet a gyűjtőpohár aljára.
2. Helyezze a gyűjtőpoharat az alsó fedélre.
3. Válasszon ki egy hegyet, és szerelje fel a gyűjtőpohárra.

4. Csatlakoztassa a gyűjtőpoharat a fő egység levegőbemeneti (szívó) nyílásához egy tömlő segítségével.

5. Nyomja meg hosszan a "bekapcsoló" gombot a készülék bekapcsolásához (a kikapcsoláshoz nyomja meg ismét hosszan).

6. A "-" vagy a "+" szívási bekapcsológombbal állítsa be a szívási teljesítményt a kívánt szintre.

7. Használja a „dallam” gombot a gyermeke számára megfelelő opcionális mód aktíválásához.

8. Finoman helyezze a hegyet a baba orrába, hogy hatékonyan megtisztítsa a nyálkahártyáját.

9. Miután eltávolította a váladékot a baba orráról, távolítsa el a gyűjtőpoharat.

10. A gyűjtőpohár alkatrészeinek eltávolítása után azonnal öblítse le őket. (Megjegyzés: A készülék testét nem szabad vízzel lemosni!)

11. Tisztítás után puha kendővel szárítsa meg a készülék felületét, és tárolja hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve.

05. TIPPEK:

A jobb eredmény érdekében, ha a baba orrában a nyálka kiszáradt, ajánlatos sóoldatot használni az elektromos orrszívó használatát előtt.

06. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

1. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket.

2. Távolítsa el a szívóhegyet és a gyűjtőkorongot, és tisztítsa meg tisztítószerezellel és vízzel.

3. Használat után tartsa tisztán és szárazon a készülék részeit és testét.

4. A szívóhegy és a gyűjtőpohár sterilizálható vízben vagy gőzben forralással, de mikrohullámú sütőben nem.

5. A termék teste nem vízálló, ezért ne öblítse le vízzel, és ne tisztítsa magas hőmérsékleten. Kerülj, puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülékházat.

6. Ne tárolja a terméket közvetlen napfényben vagy párák környezetben.

07. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

1. Fontos, hogy használat közben a baba szája nyitva legyen, hogy biztosítva legyen a megfelelő légáramlás az orrüregben, és elkerülhető legyen a negatív nyomás okozta kellemetlenség.
2. Kerülje el a baba másik orlyukának elzárását az orrszívó használat közben, hogy elkerülje a fejben lévő negatív nyomás okozta kellemetlenséget.
3. Amikor a gyűjtőpohár félig megtelt, ajánlatos kiüríteni a használat folytatása előtt, mivel ez megakadályozza, hogy nyálka szívja be a pumpát, és károsítsa a készüléket.

08. ÖVINTÉZKEDÉSEK:

1. Töltés közben ne kapcsolja be az orrszívót.
2. A készüléket csak felnőttek használhatják.

3. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.

4. A készüléket kifejezetten a nyálka eltávolítására tervezték az orrból. Más célra nem szabad használni!

5. Minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék részeit és testét.

6. Ha hosszabb ideig nem használja, 2 havonta tölts fel az akkumulátort 100%-ra.

7. Tisztításkor ne merítse vízbe az egész készüléket.

8. Használat közben a gyermek/csecsemő ne tartsa vissza a lélegzetét, ne zárja be a száját vagy nyelje le. A túlzott vákuumnyomás egyensúlyhiányt okozhat a fülnyomásban.

9. Ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor a szívócsúcsot az orrüregbe helyezi.

10. Ha gyermeke/csecsemője bármilyen kellemetlenséget érez a készülék használatában, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.

11. Ne használja az orrszívót az orm külső oldalán.

12. Ne használja a terméket gyermekjátékként.

13. Ha az orrán sebek, gyulladások vagy vérzés jelei vannak, ne használja az orrszívót.

14. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket.

Az esetleges szabálytalanságokat a szolgálatnak értékelnie kell.

15. Ne használja a készüléket, ha az sérült.

16. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához.

● Töltőfeszültség: DC 5V/1A

Maximális teljesítmény: 5.5W

Névleges feszültség: 3,7V/2500mAh

Töltési idő: kb 3 óra

Intenzitási szintek: 9 szint

Szívóteljesítmény: 65kPa±3kPa

A termék nettó súlya: 235 g

Termék mérete: 95mm × 45mm

01. SECURITATE:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

02. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI [PAGINA 2 - A]:

1. Indicator de mod / 2. Buton de pomire / 3. Buton de muzică / 4. Lampă / 5. Buton de reglare a luminii / 6. Buton de scădere a puterii de aspirație / 7. Buton de creștere a puterii de aspirație / 8. Aspirație / 9. Tub / 10. Cupă de colectare / 11. Vârf din silicon / 12. Port de încărcare / 13. Indicator de luminozitate / 14. Indicator de muzică/volum / 15. Indicator de nivel al bateriei.

03. DESCRIEREA ACCESORIILOR [PAGINA 2 - B]:

1. Capac pentru pahare / 2. Coloana de deversare / 3. Partea inferioară a cupei / 4. Tub / 5. Cablu de încărcare USB / 6. Pensetă / 7. Vârf conic / 8. Vârf plat / 9. Vârf unghiular.

Notă: Înainte de a utiliza aspiratorul nazal, asigurați-vă că înțelegeți caracteristicile fiecărui vârf și îl alegeți pe cel potrivit în funcție de vârsta copilului dumneavoastră pentru a asigura o utilizare confortabilă și eficientă.

Vârf conic - adâncime mică - 0 - 2 ani.

Vârf plat - adânc - de la 0 ani.

Vârf înclinat - foarte adânc - de la 0 ani.

Buton de pomire [pagina 2 - A2]: Apăsarea lungă pornește/oprește dispozitivul. O apăsare scurtă pornește/oprește aspirația.
Buton Muzică [pagina 2 - A3]: O apăsare scurtă ajustează volumul la nivelul 1 la 3. Secvența butoanelor este: 1 → 2 → 3 → Oprit → Activat. Dacă apăsați din nou, veți trece la o muzică diferită.
Buton de lumină [pagina 2 - A5]: Mod oprit: Apăsarea lungă aprinde/stinge lumina. Odată pornit, o singură apăsare parcurge nivelurile de luminozitate de la 1 la 3.

Modul de pomire: odată ce dispozitivul este pornit, o singură apăsare comută nivelurile de luminozitate de la 1 la 3 și apoi se oprește.

Buton de reducere a puterii de aspirație [pagina 2 - A6]: După pornirea dispozitivului, o singură apăsare a butonului " - " reduce puterea de aspirație. Puteți selecta nivelul de aspirație de la 1 la 9.
Buton de creștere a puterii de aspirație [pagina 2 - A7]: După pornirea dispozitivului, o singură apăsare a butonului " + " crește puterea de aspirație. Puteți selecta nivelul de aspirație de la 1 la 9.

04. DESCRIEREA UTILIZĂRII DISPOZITIVULUI:

1. Instalați inserția de separare pe fundul cupei de colectare.
2. Așezați cana de colectare pe capacul inferior.
3. Selectați un vârf și instalați-l pe paharul de colectare.

4. Conectați paharul de colectare la oficiul de admisie a aerului (de aspirație) al unității principale cu un furtun.

5. Apăsăți lung butonul „power” pentru a porni dispozitivul (apăsăți lung din nou pentru a-l opri).

6. Folosiți butonul de putere de aspirație „-” sau „+” pentru a regla puterea de aspirație la nivelul dorit.

7. Folosește butonul „melodie” pentru a activa un mod opțional potrivit pentru copilul tău.

8. Așezați ușor vârful în nasul bebelușului pentru a-i curăța eficient mucusul.

9. După ce curățați mucusul din nasul bebelușului, scoateți cana de colectare.

10. După îndepărtarea componentelor cupei de colectare, clătiți-le imediat. (Notă: corpul principal al dispozitivului nu trebuie spălat cu apă!)

11. După curățare, utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafața dispozitivului și depozitați-l într-un loc răcoșor ferit de lumina directă a soarelui.

05. SFATURI:

Pentru rezultate mai bune, dacă mucusul din nasul bebelușului este uscat, este recomandat să utilizați soluție salină pentru hidratare înainte de a utiliza aspiratorul nazal electric.

06. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:

1. Oprți întotdeauna alimentarea după utilizare.
2. Scoateți vârful de aspirație și cupa de colectare și curățați-le cu agent de curățare și apă.
3. Păstrați părțile și corpul dispozitivului curate și uscate după utilizare.
4. Vârza și cana de colectare pot fi sterilizate prin fierbere în apă sau abur, dar nu în cuptorul cu micround.
5. Corpul principal al produsului nu este impermeabil, așa că nu îl clătiți cu apă și nu îl curățați la temperaturi ridicate. Vă rugăm să utilizați o cârpă moale umedă pentru a curăța corpul principal.
6. Evitați depozitarea produsului în lumina directă a soarelui sau în medii umede.

07. MASURI DE SECURITATE:

1. Este important ca bebelușul să aibă gura deschisă în timpul utilizării pentru a asigura un flux adecvat de aer în cavitatea nazală și pentru a preveni disconfortul cauzat de presiunea negativă.
2. Evitați blocarea celeilalte nări a bebelușului atunci când utilizați aspiratorul nazal pentru a preveni disconfortul cauzat de presiunea negativă în cap.
3. Când cana de colectare este plină pe jumătate, se recomandă golirea acesteia înainte de a continua utilizarea, deoarece acest lucru împiedică aspirarea mucusului în pompă și eventual deteriorarea dispozitivului.

08. PRECAUȚII:

1. Nu porniți aspiratorul nazal în timpul încărcării.
2. Dispozitivul este destinat utilizării numai de către adulți.
3. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
4. Aparatul este special conceput pentru a elimina mucusul din nas. Nu trebuie folosit în alte scopuri!
5. Curățați și uscați părțile și corpul dispozitivului după fiecare utilizare.
6. Încărcați bateria la 100% la fiecare 2 luni dacă nu o folosiți o perioadă lungă de timp.
7. Nu scufundați întregul dispozitiv în apă când curățați.
8. În timpul utilizării, copilul/sugarul nu trebuie să-și țină respirația, să închidă gura sau să înghită. Presiunea excesivă a vidului poate cauza un dezechilibru în presiunea urechii.
9. Nu folosiți forță excesivă când introduceți vârful de aspirație în cavitatea nazală.
10. Dacă copilul/sugarul dumneavoastră se confruntă cu orice disconfort în timpul utilizării dispozitivului, oprți-l imediat și consultați un medic.
11. Nu utilizați aspiratorul nazal pe exteriorul nasului.
12. Nu utilizați produsul ca jucărie pentru copil.
13. Dacă nasul dumneavoastră are răni, inflamații sau semne de sângerare, nu utilizați aspiratorul nazal.
14. Nu reparați, dezamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către serviciu.
15. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
16. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul.

- Tensiune de încărcare: DC 5V/1A
- Putere maximă: max
- Tensiune nominală: 3,7V/2500mAh
- Timp de încărcare: aproximativ 3 ore
- Nivele de intensitate: 9 nivele
- Putere de aspirare: 65kPa±3kPa
- Greutate netă a produsului: 235 g
- Dimensiune produs: 95 mm * 45 mm

01. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

02. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА [СТРАНИЦА 2 - A]:

1. Индикатор режима / 2. Кнопка питания / 3. Кнопка «Музыка» / 4. Лампа / 5. Кнопка регулировки света / 6. Кнопка уменьшения мощности всасывания / 7. Кнопка увеличения мощности всасывания / 8. Сосание / 9. Трубка / 10. Чашка для сбора / 11. Силиконовый наконечник / 12. Порт зарядки / 13. Индикатор яркости / 14. Индикатор музыки/громкости / 15. Индикатор уровня заряда батареи.

03. ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРА [СТРАНИЦА 2 - B]:

1. Крышка чашки / 2. Колонка перенаправления / 3. Нижняя часть чашки / 4. Трубка / 5. USB-кабель для зарядки / 6. Песета / 7. Конический наконечник / 8. Плоский наконечник / 9. Угловой наконечник.

Примечание: Прежде чем использовать назальный аспиратор, убедитесь, что вы понимаете особенности каждого наконечника, и выберите подходящий в зависимости от возраста вашего ребенка, чтобы обеспечить комфортное и эффективное использование.

Конический наконечник – малая глубина – 0–2 года.
Плоский кончик – глубокий – от 0 лет.
Схоженный кончик – очень глубокий – с 0 лет.

Кнопка питания [стр. 2 - A2]: длительное нажатие включает/выключает устройство. Короткое нажатие запускает/останавливает всасывание.

Кнопка «Музыка» [стр. 2 – A3]: короткое нажатие регулирует громкость до уровня от 1 до 3. Последовательность кнопок следующая: 1 → 2 → 3 → Выкл. → Вып. Повторное нажатие переключит на другую музыку.

Кнопка освещения [стр. 2 - A5]: Режим выключения: длительное нажатие включает/выключает свет. После включения одним нажатием переключаются уровни яркости от 1 до 3. Режим включения: после включения устройства одно нажатие переключает уровни яркости от 1 до 3, а затем выключается. Кнопка уменьшения мощности всасывания [стр. 2 - A6]: после включения устройства однократное нажатие кнопки «←» снижает мощность всасывания. Вы можете выбрать уровни всасывания от 1 до 9.

Кнопка увеличения мощности всасывания [стр. 2 - A7]: после включения устройства однократное нажатие кнопки «→»

увеличивает мощность всасывания. Вы можете выбрать уровни всасывания от 1 до 9.

04. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА:

1. Установите разделительную вставку на дно сборника.
2. Поместите чашку для сбора на нижнюю крышку.
3. Выберите насадку и установите ее на сборник.
4. Подсоедините сборный резервуар к впускному отверстию для воздуха (всасыванию) основного блока с помощью шланга.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство (снова нажмите и удерживайте, чтобы выключить его).
6. С помощью кнопки мощности всасывания «←» или «→» отрегулируйте мощность всасывания до желаемого уровня.
7. Кнопкой «мелодия» активируйте дополнительный режим, подходящий для вашего ребенка.
8. Аккуратно поместите наконечник в нос ребенка, чтобы эффективно очистить его слизь.
9. Очистив нос ребенка от слизи, снимите чашку для сбора.
10. После снятия компонентов сборника немедленно промойте их. (Примечание: основной корпус устройства нельзя мыть водой!)
11. После очистки протрите поверхность устройства мягкой тканью и храните его в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

05. СОВЕТЫ:

Для достижения лучших результатов, если слизь в носу вашего ребенка сухая, рекомендуется использовать физиологический раствор для увлажнения перед использованием электрического назального аспиратора.

06. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

1. Всегда выключайте питание после использования.
2. Снимите всасывающую насадку и сборную чашку и очистите их чистящим средством и водой.
3. После использования держите детали и корпус устройства чистыми и сухими.
4. Присоску и емкость для сбора можно стерилизовать кипячением в воде или паре, но не в микроволновой печи.
5. Основной корпус изделия не является водонепроницаемым, поэтому не промывайте его водой и не очищайте при высоких температурах. Для очистки основного корпуса используйте мягкую влажную ткань.
6. Избегайте хранения продукта под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.

07. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Важно, чтобы рот ребенка был открыт во время использования, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха в носовую полость и предотвратить дискомфорт, вызванный отрицательным давлением,

2. Не закрывайте другую ноздрю ребенка при использовании назального аспиратора, чтобы предотвратить дискомфорт от отрицательного давления в голове.

3. Когда чашка для сбора наполовину заполнена, рекомендуется опорожнить ее перед продолжением использования, поскольку это предотвращает засасывание слизи в помпу и потенциальное повреждение устройства.

08. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не включайте назальный аспиратор во время зарядки.
2. Устройство предназначено только для использования взрослыми.
3. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
4. Аппарат специально разработан для удаления слизи из носа. Его нельзя использовать для каких-либо других целей!
5. Очищайте и сушите детали и корпус устройства после каждого использования.
6. Заряжайте аккумулятор до 100% каждые 2 месяца, если не пользуетесь им долгое время.
7. Не погружайте все устройство в воду во время чистки.
8. Во время использования ребенком/младенцем не должен задерживать дыхание, закрывать рот или глотать. Чрезмерное вакуумное давление может вызвать дисбаланс давления в ушах.
9. Не применяйте чрезмерную силу при введении аспираторного наконечника в полость носа.
10. Если ваш ребенок/младенец испытывает дискомфорт при использовании устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
11. Не используйте назальный аспиратор снаружи носа.
12. Не используйте изделие в качестве игрушки для детей.
13. Если у вас в носу язва, воспаление или признаки кровотечения, не используйте назальный аспиратор.
14. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой.
15. Не используйте устройство, если оно повреждено.
16. Не используйте едкие вещества для очистки устройства.

- Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока/1 А
- Максимальная мощность: макс. 5,5 Вт.
- Номинальное напряжение: 3,7 В/2500 мАч
- Время зарядки: около 3 часов
- Уровни интенсивности: 9 уровней
- Мощность всасывания: 65кПа±3кПа
- Вес нетто продукта: 235 г
- Размер продукта: 95 мм * 45 мм



01. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

02. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Α]:

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / 2. Κομπι λειτουργίας / 3. Κομπι μουσικής / 4. Λάμπτα / 5. Κομπι ρύθμισης φωτός / 6. Κομπι μείωσης ισχύος αναρρόφησης / 7. Κομπι αύξησης ισχύος αναρρόφησης / 8. Το πηλίμα / 9. Σωλήνας / 10. Κύπελλο συλλογής / 11. Μύτη σιλκόνια / 12. Θύρα φόρτισης / 13. Ενδείξη φωτεινότητας / 14. Ενδείξη μουσική/έντασης / 15. Ενδείξη στάθμης μπαταρίας.

03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Β]:

1. Κάλυμμα κύπελλου / 2. Στήλη εκτροπής / 3. Το κάτω μέρος της κοπής / 4. Σωλήνας / 5. Καλώδιο φόρτισης USB / 6. Πεσέτα / 7. Κωνική μύτη / 8. Επιπέδη άκρη / 9. Γωνιακή άκρη.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη ρινική αναρρόφηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα χαρακτηριστικά κάθε άκρης και επιλέξετε την κατάλληλη με βάση την ηλικία του παιδιού σας για να εξασφαλίσετε άνετη και αποτελεσματική χρήση.

Κωνική άκρη - Μικρό βάθος - 0-2 ετών.

Flat Tip - βαθιά - από 0 χρονών.

Γωνιακή άκρη - πολύ βαθιά - από 0 ετών.

Κομπι λειτουργίας [σελίδα 2 - A2]: Παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη συσκευή. Ένα σύντομο πάτημα ξεκινά/σταματά την αναρρόφηση.

Κομπι μουσικής [σελίδα 2 - A3]: Ένα σύντομο πάτημα ρυθμίζει την ένταση στα επίπεδα 1 έως 3. Η σειρά των κομπιτών είναι: 1 → 2 → 3 → Off → On. Πατώντας το ξανά θα μεταβεί σε διαφορετική μουσική.

Κομπι φωτός [σελίδα 2 - A5]: Λειτουργία απενεργοποίησης: Παρατεταμένο πάτημα ανάβει/σβήνει το φως. Μόλις ενεργοποιηθεί, ένα μόνο πάτημα περνάει από τα επίπεδα φωτεινότητας 1 έως 3. Λειτουργία ενεργοποίησης: Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, ένα μόνο πάτημα αλλάζει τα επίπεδα φωτεινότητας από 1 σε 3 και στη συνέχεια απενεργοποιείται.

Κομπι μείωσης ισχύος αναρρόφησης [σελίδα 2 - A6]: Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, ένα μόνο πάτημα του κομπιού "-" μειώνει την ισχύ αναρρόφησης. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδα αναρρόφησης από 1 έως 9.

Κομπι αύξησης ισχύος αναρρόφησης [σελίδα 2 - A7]: Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, ένα μόνο πάτημα του κομπιού "+" αυξάνει την ισχύ αναρρόφησης. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδα αναρρόφησης από 1 έως 9.

04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Τοποθετήστε το διακομιστικό ενέθετο στο κάτω μέρος του δοχείου συλλογής.
2. Τοποθετήστε το κύπελλο συλλογής στο κάτω κάλυμμα.
3. Επιλέξτε ένα άκρο και τοποθετήστε το στο δοχείο συλλογής.
4. Συνδέστε το κύπελλο συλλογής στη θύρα εισόδου αέρα (αναρρόφηση) της κύριας μονάδας με ένα εύκαμπτο σωλήνα.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κομπι «προφθοδοσία» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (πατήστε ξανά παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε).
6. Χρησιμοποιήστε το κομπι αναρρόφησης "-" ή "+" για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης στο επιθυμητό επίπεδο.
7. Χρησιμοποιήστε το κομπι «μελודία» για να ενεργοποιήσετε μια προαεριστική λειτουργία κατάλληλη για το παιδί σας.
8. Τοποθετήστε απαλά το άκρο μέσα στη μύτη του μωρού σας για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τη βλέννα του.
9. Αφού καθαρίσετε τη βλέννα από τη μύτη του μωρού σας, αφαιρέστε το κύπελλο συλλογής.
10. Αφού αφαιρέσετε τα εξαρτήματα του δοχείου συλλογής, ξεπλύνετε τα αμέσως. (Σημείωση: Το κύριο σώμα της συσκευής δεν πρέπει να πλένεται με νερό!)
11. Μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσετε την επιφάνεια της συσκευής και αποθηκεύστε την σε δροσερό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

05. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Για καλύτερα αποτελέσματα, εάν η βλέννα στη μύτη του μωρού σας είναι ξηρή, συνιστάται η χρήση φυσιολογικού ορού για ενυδάτωση πριν χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό ρινικό αναρροφητή.

06. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΚΕΥΣΗ:

1. Πάντα να απενεργοποιείτε το ρεύμα μετά τη χρήση.
2. Αφαιρέστε το ρύγχος αναρρόφησης και το δοχείο συλλογής και καθαρίστε τα με καθαριστικό και νερό.
3. Διατηρείτε τα μέρη και το σώμα της συσκευής καθαρά και στεγνά μετά τη χρήση.
4. Το άκρο αναρρόφησης και το κύπελλο συλλογής μπορούν να αποστειρωθούν με βράσιμο σε νερό ή ατμό, αλλά όχι στο φούorno μικροκυμάτων.
5. Το κύριο σώμα του προϊόντος δεν είναι αδιάβροχο, γι' αυτό μην το ξεπλύνετε με νερό και μην το καθαρίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε το κύριο σώμα.
6. Αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή υγρά περιβάλλοντα.

07. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. Είναι σημαντικό το στόμα του μωρού να είναι ανοιχτό κατά τη χρήση για να διασφαλιστεί η σωστή ροή αέρα στη ρινική κοιλότητα και να αποφευχθεί η ενόχληση που προκαλείται από την αρνητική πίεση.

2. Αποφύγετε να φράξετε το άλλο ρουθούνι του μωρού όταν χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση για να αποτρέψετε την ενόχληση από την αρνητική πίεση στο κεφάλι.

3. Όταν το κύπελλο συλλογής είναι μισογεμάτο, συνιστάται να το αδειάζετε πριν συνεχίσετε τη χρήση, καθώς αυτό εμποδίζει την αναρρόφηση βλέννας στην αντίλια και πιθανά ζημιά στη συσκευή.

08. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Μην ενεργοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση κατά τη φόρτιση.
2. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
4. Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να απομακρύνει τη βλέννα από τη μύτη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς!
5. Καθαρίστε και στεγνώστε τα μέρη και το σώμα της συσκευής μετά από κάθε χρήση.
6. Φορτίστε την μπαταρία στο 100% κάθε 2 μήνες εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή στο νερό κατά τον καθαρισμό.
8. Κατά τη χρήση, το παιδί/βρέφος δεν πρέπει να κρατάει την αναπνοή του, να κλείνει το στόμα του ή να καταπιεί. Η υπερβολική πίεση κενού μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στην πίεση του αυτιού.
9. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν τοποθετείτε το άκρο αναρρόφησης στη ρινική κοιλότητα.
10. Εάν το παιδί/βρέφος σας αισθανθεί κάποια ενόχληση κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση στο εξωτερικό της μύτης.
12. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως παιχνίδι για παιδιά.
13. Εάν η μύτη σας έχει πηλές, φλεγμονή ή σημάδια αιμορραγίας, μην χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση.
14. Μην επικουμάζετε, αποσυρμαριολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη.
16. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παραγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Τύπος φόρτισης: DC 5V/1A
- Μέγιστη ισχύς: 5.5 W
- Ονομαστική τάση: 3.7V/2500mAh
- Χρόνος φόρτισης: Περίπου 3 ώρες
- Επίπεδα Έντασης: 9 επίπεδα
- Ισχύς αναρρόφησης: 65kPa±3kPa
- Καθαρό Βάρος Προϊόντος: 235g
- Μέγεθος προϊόντος: 95mm * 45mm

01. VEILIGHEID:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

02. BESCHRIJVING APPARAAT [PAGINA 2 - A]:

1. Modusindicator nr./2. aan/uit-knop/3. Muziekknop/4. Licht/5. Lichtinstelknop/6. Knop voor reductie zuigkracht/7. Knop voor zuigkracht/8. Zuigen/9. Buis/10. Verzamelbeker/11. Siliconen tip/12. Oplaadpoort/13. Helderheidsindicatielampje/14. Muziek/volume/15-indicator. Indicator batterijniveau.

03. BESCHRIJVING ACCESSOIRES [PAGINA 2 - B]:

1. Bekerdeksel/2. Omleidingsskolom/3. Onderste deel van de cup/4. Buis/5. USB-oplaadkabel/6. Pincet/7. Conische punt/8. Platte punt/9. Hoekpunt

Let op: Voordat u de neuszuiger gebruikt, zorg ervoor dat u de kenmerken van elke tip begrijpt en kies de juiste op basis van de leeftijd van uw kind om comfortabel en effectief gebruik te garanderen.

Conische punt - geringe diepte: 0 - 2 jaar.

Platte punt - diep: van 0 - 1 jaar.

Schuine punt - zeer diep: vanaf 0 jaar.

Aan/uit-knop [pagina 2 - A2]: Lang indrukken schakelt het apparaat in/uit. Een korte druk start/stopt het zuigen.

Muziekknop [pagina 2 - A3]: Een korte druk stelt het volume in op niveau 1 tot 3. De volgorde van de knoppen is: 1 - 2 - 3 - Uit - Aan. Als u er nogmaals op drukt, schakelt u over naar andere muziek.

Lichtknop [pagina 2 - A5]: Uitmodus: Lang indrukken schakelt het licht aan/uit. Eenmaal ingeschakeld, blaadt een enkele druk door de helderheidsniveaus 1 tot 3.

Uitschakelmodus: Zodra het apparaat is ingeschakeld, kunt u tweemaal drukken tussen de helderheidsniveaus 1 tot 3 en vervolgens uitschakelen. Knop voor reductie van zuigkracht [pagina 2 - A6]: Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, drukt u twee keer op de knop "+" om de zuigkracht te verminderen. Wanneer uitgeschakeld, gaat de chokehouders van 0 naar 3. Zuigkrachtknop [pagina 2 - A7]: Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, verhoogt een enkele druk op de knop "+" de zuigkracht. De zuigniveaus kunnen worden aangepast van 1 tot 9.

04. BESCHRIJVING VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

1. Gebruik een mes om de bak aan de onderkant van de opvangbeker los te maken.

2. Bevestig de opvangbeker op de bodemafdekking.

3. Selecteer een tip en installeer deze op de opvangbeker.

4. Sluit de opvangbeker met een slang aan op de luchtinlaatpoort (aanzuiging) van het hoofdapparaat.

5. Druk lang op de "aan/uit"-knop om het apparaat in te schakelen (houd nogmaals lang ingedrukt om het uit te schakelen).

6. Gebruik de zuigkrachtknoppen "+" of "-" om de zuigkracht op het gewenste niveau in te stellen.

7. Gebruik de knop "melodie" om een optionele modus te activeren die geschikt is voor uw kind.

8. Plaats het puntje voorzichtig in de neus van het kind om de neus effectief van slijm te reinigen.

9. Nadat u het slijm uit de neus van uw baby heeft verwijderd, verwijdert u de opvangbeker.

10. Nadat u de onderdelen van de opvangbeker hebt verwijderd, spoelt u deze onmiddellijk af. (Opmerking: het hoofdgedeelte van het apparaat mag niet met water worden gewassen!)

11. Gebruik na het reinigen een zachte doek om het oppervlak van het apparaat te drogen en bewaar het op een koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

05. TIPS:

Voor betere resultaten wordt aanbevolen om, als het slijm in de neus van uw baby droog is, een zoutoplossing te gebruiken om te hydrateren voordat u de elektrische neuszuiger gebruikt.

06. REINIGING EN OPSLAG:

1. Schakel na gebruik altijd de stroom uit.

2. Verwijder de zuignap en opvangbeker en reinig deze met schoonmaakmiddel en water.

3. Veeg na gebruik de behuizing van het apparaat schoon en laat het afkoelen.

4. De zuignap en opvangbeker kunnen worden gesteriliseerd door ze in water of stoom te koken, maar niet in de magnetron.

5. Het hoofdgedeelte van het product is niet waterdicht, dus spoel het niet af met water en maak het niet schoon bij hoge temperaturen. Gebruik een zachte, vochtige doek om het hoofdgedeelte schoon te maken.

6. Bewaar het product niet in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.

07. VEILIGHEIDSMATREGELEN:

1. Het is belangrijk dat het kind het apparaat alleen gebruikt als het open is, om een goede luchtstroom in de neusholte te garanderen en om accidentele schade veroorzaakt door negatieve druk te voorkomen.

2. Vermijd het blokkeren van de neusgaten van de baby bij gebruik van de neuszuiger om ongemak veroorzaakt door negatieve druk in het hoofd te voorkomen.

3. Wanneer de opvangbeker halfvol is, wordt aanbevolen deze te legen

voordat u verder gaat met gebruik, omdat dit voorkomt dat slijm in de pomp wordt gezogen en mogelijk het apparaat beschadigt.

08. VOORZORGSMAATREGELEN:

1. Steek de aspirator niet in uw neus tijdens het opladen.

2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen.

3. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.

4. Het apparaat is speciaal ontworpen om slijm uit de neus te verwijderen. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt!

5. Reinig en droog de onderdelen en behuizing van het apparaat na elk gebruik.

6. Laad de batterij elke 2 maanden op tot 100% als u deze langere tijd niet gebruikt.

7. Dompel het hele apparaat tijdens het reinigen niet onder in water.

8. Tijdens gebruik mag het kind/de baby de adem niet inhouden, de mond sluiten of slikken. Overmatige vacuümdruk kan een onbalans in de oordruk veroorzaken.

9. Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van de zuigtip in de neusholte.

10. Als uw kind/baby enig ongemak ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.

11. Gebruik de neusaspirator niet aan de buitenkant van de neus.

12. Gebruik het product niet als speelgoed voor kinderen.

13. Als uw neus zweren, ontstekingen of tekenen van bloeding vertoont, gebruik dan de neuszuiger niet.

14. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden.

15. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

16. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken.

Laadspanning: DC 5V/1A

Maximaal vermogen: max. 5,5 W

Nominale spanning: 3,7 V/2500 mAh

Oplaadtijd: ongeveer 3 uur

Intensiteitsniveaus: 9 niveaus

Zuigkracht: 65kPa±3kPa

Nettogewicht product: 235 g

Productgrootte: 95 mm * 45 mm

01. SÉCURITÉ:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

02. DESCRIPTION DE L'APPAREIL [PAGE 2 - A] :

1. Indicateur de mode n°2. bouton d'alimentation/3. Bouton musique/4. Lumière/5. Bouton de réglage de la lumière/6. Bouton de réduction de la puissance d'aspiration/7. Bouton d'augmentation de la puissance d'aspiration/8. Sucre/9. Tube/10. Tasse de collecte/11. Embout en silicone/12. Port de chargement/13. Voyant de luminosité/14. Indicateur musique/volume/15. Indicateur de niveau de batterie.

03. DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE [PAGE 2 - B] :

1. Couvercle de tasse/2. Colonne de déroutement/3. Partie inférieure de la tasse/4. Tube/5. Câble de chargement USB/6. Pincettes/7. Pointe conique/8. Pointe plate/9. Pointe angulaire

Remarque: Avant d'utiliser l'aspirateur nasal, assurez-vous de bien comprendre les caractéristiques de chaque embout et choisissez celui qui convient en fonction de l'âge de votre enfant pour garantir une utilisation confortable et efficace.

Pointe conique - faible profondeur : 0 - 2 ans.

Pointe plate - profonde : de 0 à 1 ans.

Pointe coudée - très profonde : à partir de 0 ans.

Bouton d'alimentation [page 2 - A2] : un appui long allume/éteint l'appareil. Une pression courte démarre/arrête l'aspiration.

Bouton Musique [page 2 - A3] : Un appui court ajuste le volume aux niveaux 1 à 3. La séquence des boutons est : 1 - 2 - 3 - Off - On. En appuyant à nouveau dessus, vous passez à une musique différente.

Bouton Lumière [page 2 - A5] : Mode Arrêt : Un appui long allume/éteint la lumière. Une fois allumé, une simple pression fait défiler les niveaux de luminosité 1 à 3.

Mode mise hors tension : une fois l'appareil allumé, appuyez deux fois pour basculer les niveaux de luminosité de 1 à 3, puis s'éteint.

Bouton de réduction de la puissance d'aspiration [page 2 - A6] : Après avoir allumé l'appareil, appuyez deux fois sur le bouton "*" pour réduire la puissance d'aspiration. Lorsqu'il est éteint, le support du starter passe de 0 à 3.

Bouton boost d'aspiration [page 2 - A7] : Après la mise sous tension de l'appareil, une simple pression sur le bouton "*" augmente la puissance d'aspiration. Les niveaux d'aspiration peuvent être réglés de 1 à 9.

04. DESCRIPTION DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL :

1. Utilisez un couteau pour séparer le plateau au fond du gobelet de

collecte.

2. Fixez le gobelet de collecte au couvercle inférieur.

3. Sélectionnez un embout et installez-le sur le gobelet collecteur.

4. Connectez la coupelle de collecte au port d'entrée d'air (aspiration) de l'unité principale avec un tuyau.

5. Appuyez longuement sur le bouton « power » pour allumer l'appareil (appuyez longuement à nouveau pour l'éteindre).

6. Utilisez les boutons de puissance d'aspiration "*" ou "+" pour régler la puissance d'aspiration au niveau souhaité.

7. Utilisez le bouton « mélodie » pour activer un mode optionnel adapté à votre enfant.

8. Placez délicatement l'embout dans le nez de l'enfant pour nettoyer efficacement le nez du mucus.

9. Après avoir éliminé le mucus du nez de votre bébé, retirez le gobelet collecteur.

10. Après avoir retiré les composants du godet de collecte, rincez-les immédiatement. (Remarque : le corps principal de l'appareil ne doit pas être lavé à l'eau !)

11. Après le nettoyage, utilisez un chiffon doux pour sécher la surface de l'appareil et rangez-le dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

05. CONSEILS:

Pour de meilleurs résultats, si le mucus du nez de votre bébé est sec, il est recommandé d'utiliser une solution saline pour hydrater avant d'utiliser l'aspirateur nasal électrique.

06. NETTOYAGE ET STOCKAGE:

1. Coupez toujours l'alimentation après utilisation.

2. Retirez la pointe d'aspiration et la coupelle de collecte et nettoyez-les avec un produit de nettoyage et de l'eau.

3. Après utilisation, essuyez le corps de l'appareil et laissez-le refroidir.

4. La ventouse et la coupelle de collecte peuvent être stérilisées en les faisant bouillir dans de l'eau ou de la vapeur, mais pas au micro-ondes.

5. Le corps principal du produit n'est pas étanche, donc ne le rincez pas à l'eau et ne le nettoyez pas à haute température. Veuillez utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer le corps principal.

6. Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil ou dans des environnements humides.

07. MESURES DE SÉCURITÉ:

1. Il est important que l'enfant utilise l'appareil uniquement lorsqu'il est ouvert pour garantir une bonne circulation de l'air dans la cavité nasale et éviter tout dommage accidentel causé par une pression négative.

2. Évitez de bloquer les ouvertures des narines du bébé lorsque vous utilisez l'aspirateur nasal pour éviter l'inconfort causé par la pression

négative dans la tête.

3. Lorsque le gobelet de collecte est à moitié plein, il est recommandé de le vider avant de continuer à l'utiliser, car cela évite que du mucus ne soit aspiré dans la pompe et n'endommage potentiellement l'appareil.

08. PRÉCAUTIONS:

1. N'insérez pas l'aspirateur dans votre nez pendant le chargement.

2. L'appareil est destiné à être utilisé uniquement par des adultes.

3. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.

4. L'appareil est spécialement conçu pour éliminer le mucus du nez. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins !

5. Nettoyez et séchez les pièces et le corps de l'appareil après chaque utilisation.

6. Chargez la batterie à 100 % tous les 2 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

7. Ne plongez pas l'ensemble de l'appareil dans l'eau lors du nettoyage.

8. Pendant l'utilisation, l'enfant/nourrisson ne doit pas retenir sa respiration, fermer la bouche ou avaler. Une pression de vide excessive peut provoquer un déséquilibre de la pression auditive.

9. N'utilisez pas de force excessive lorsque vous placez l'embout d'aspiration dans la cavité nasale.

10. Si votre enfant/nourrisson ressent une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.

11. N'utilisez pas l'aspirateur nasal à l'extérieur du nez.

12. N'utilisez pas le produit comme jouet pour les enfants.

13. Si votre nez présente des plaies, une inflammation ou des signes de saignement, n'utilisez pas l'aspirateur nasal.

14. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service.

15. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

16. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil.

Tension de charge : cc 5 V/1 A

Puissance maximale : 5,5 W maximum

Tension nominale : 3,7 V/2500 mAh

Temps de charge : environ 3 heures

Niveaux d'intensité : 9 niveaux

Puissance d'aspiration : 65 kPa ± 3 kPa

Poids net du produit : 235g

Taille du produit: 95 mm * 45 mm



[PL] Zasady postępowania z sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe

szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nim lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczającego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczającego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment

from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005 r.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności:

Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.momini.eu/deklaracja

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.momini.eu/deklaracja

Wyprodukowano w Chinach
Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
 00-095 Warszawa, Polska
Model: Sniffley

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:

EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:

DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:

ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:

PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:

CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:

SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:

SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:

EE | Rohkem teavet toote kohta leiate tootja veebisaidil aadressil:

LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:

LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:

HU | A termékről további információkat a gyártó weboldalan találhat az alábbi címen:

RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:

RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:

EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστοτόπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:

SCAN IT



www.momini.eu/do-pobrania

Create happy beginnings



www.momini.eu
contact@momini.eu