


GIO-353 ES

innoGIO

GIOluna Smart

Extractor de leche eléctrico doble

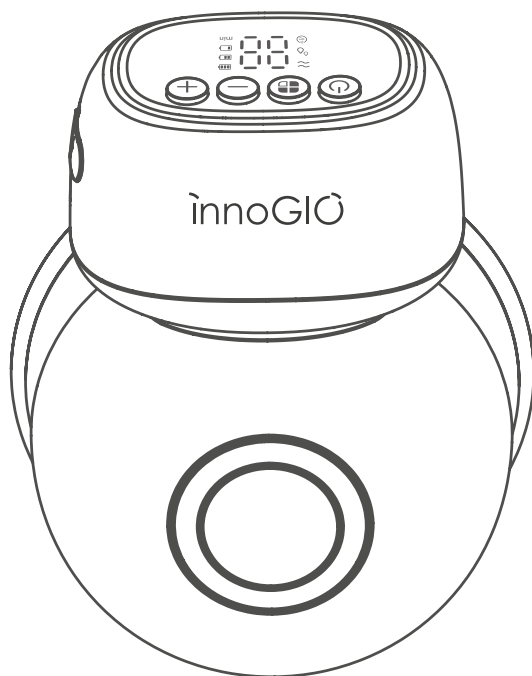

MANUAL DE USO

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el producto;
guárdelo en un lugar seguro después de su uso, ¡gracias!

Problemas frecuentes para las madres

1. Extracción lenta

- La velocidad de extracción varía de una persona a otra, más leche, una succión mayor no significa que se extraiga más rápido, depende de la estructura del pecho, la permeabilidad mamaria, el estado de ánimo, etc., es normal extraer leche más lentamente que otras personas. Además, extraer leche con regularidad también hará que el proceso sea más fluido.
- Solución para la extracción lenta: antes de extraer, utilice una toalla caliente para comprimir el pecho y, a continuación, masajee durante 2 minutos en modo lactancia, y el programa cambiará automáticamente al modo de extracción. Ajuste la succión alta en el modo de extracción, también puede masajear con las manos para estimular el pecho.

2. No se extrae leche o dolor en los senos

- El pecho está hinchado y dolorido, pero no sale leche, lo que puede deberse a una obstrucción de la glándula mamaria; la obstrucción de la glándula mamaria puede causar mastitis, acuda al hospital a tiempo. El dolor al extraer leche también puede deberse a una mastitis leve. Vaciar el pecho a tiempo ayuda a prevenir la mastitis.
 - Solución para la obstrucción de los senos y el dolor al extraer leche.
- A. Puedes ir a la farmacia a comprar dientes de león y hervirlos en agua, envolver los dientes de león calientes con una gasa, aplicarlos sobre el bulto, calentarlos si se enfrían, aplicarlos durante 2-3 horas seguidas, aplicarlos unas 5 veces al día, y el dolor se reducirá o incluso desaparecerá al día siguiente.
- B. Masaje de los senos:



Masaje circular

Coloca las manos por encima y por debajo de los senos y masajea todo el pecho. en dirección circular



Masaje en espiral

Sujete el pecho con una mano y, con el índice y el pulgar de la otra mano, frote el pezón con movimientos espirales.



Masaje Shiatsu

Coloca las manos abiertas a ambos lados de los senos y apriete desde los senos hacia los pezones.

- C. Mantén un estado de ánimo alegre y duerme lo suficiente. (Que mantener un estado de ánimo alegre puede favorecer la secreción de leche no es solo una frase hecha, sino que investigaciones científicas han confirmado que la depresión hace que las glándulas suprarrenales del cuerpo liberen la hormona del estrés epinefrina, lo que provoca que los vasos sanguíneos alrededor de los senos se contraigan, reduciendo así el efecto de la oxitocina sobre el reflejo de lactancia de las glándulas mamarias, lo que retrasa el flujo de leche y dificulta su extracción).

3. Dolor al extraer la leche


- El grado de fuerza que se ejerce sobre el cuerpo humano no siempre es el mismo, es como ir a un salón de masajes para recibir un masaje, algunas personas son muy resistentes a la fuerza, mientras que otras gritan de dolor con una pequeña fuerza de contacto. Si siente dolor durante la succión, por un lado, enderece el embudo del extractor para asegurarse de que el pezón esté alineado con el orificio; además, reduzca el nivel de succión, ya que a medida que aumenta el número de succiones, el cuerpo humano se adaptará a esta succión y no sentirá dolor.

4. Hay leche después de extraer a mano


- La estructura del pecho humano está dividida en una red de conductos, y ningún método de extracción puede eliminar completamente toda la leche. Esto depende de la intensidad de la extracción y la frecuencia con la que se extrae. Después de cada método de extracción de leche, un método diferente de extracción provocará una pérdida de leche.
- Después de la succión eléctrica, aún se puede extraer la leche manualmente; y viceversa, después de la extracción manual, también se puede extraer la leche con un sacaleches eléctrico.

Método adecuado para verter la leche


Nota: Este set no incluye biberón de almacenamiento, deberá adquirirla por separado.

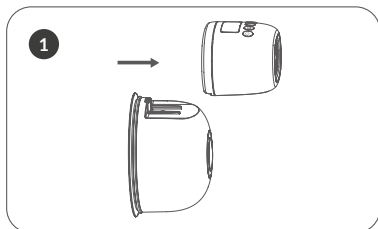


Nota: Este set no incluye biberón de almacenamiento, deberá comprarla por separado.

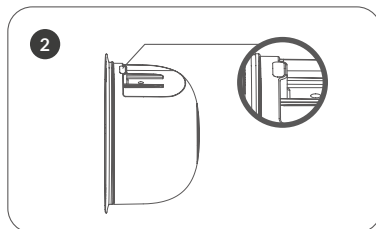

Vierta la leche del recipiente en el biberón de almacenamiento.

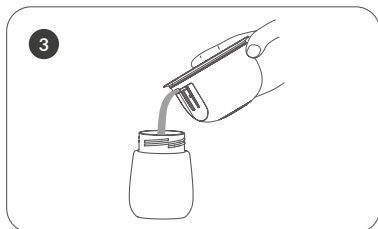

El puerto de salida se muestra en la figura (no lo invierta para evitar que se derrame la leche materna).

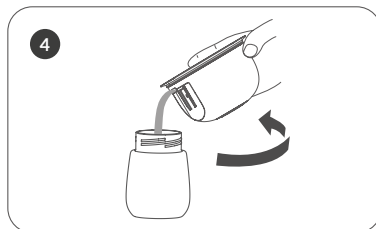

Al verter la leche, puede girar el contenedor para verter la leche restante.

Método adecuado para verter

El sacaleches eléctrico portátil está especialmente diseñado para madres lactantes. Simula el ritmo de succión del bebé mediante tecnología de conversión de frecuencia por microordenador y cuenta con 9 niveles de ajuste de succión y 3 modos de lactancia, extracción y estimulación. Su diseño ligero, compacto y sencillo con batería de litio, así como su funcionamiento discreto, cómodo y rápido, proporcionan a las madres una experiencia de extracción de leche eficaz y cómoda.



Modo inteligente de conversión de frecuencia

Los tres modos de lactancia, extracción y estimulación pueden resolver eficazmente los problemas a los que se enfrentan las madres en la secreción y extracción tempranas.



Protector de pecho suave y agradable para la piel

Material de contacto de grado alimentario, diseño agradable para la piel, contacto suave con el pecho, lo que permite a las madres extraer la leche sin dolor.



Modo de memoria inteligente

Ajustes inteligentes del programa de memoria, que pueden recordar automáticamente el nivel adecuado antes de apagarse, lo que resulta más cómodo para la extracción de leche.



Diseño compacto y portátil.

Llévelo consigo, modelo integrado sin tubo de conexión, portátil, para que pueda salir libremente, puede llevarlo al trabajo, ayuda a las madres trabajadoras.



Batería de litio de gran capacidad

La batería de litio de gran capacidad integrada de 1400 mAh permite múltiples usos con una sola carga y satisface las necesidades tanto en casa como fuera de ella.




Menos accesorios, fácil de montar

Menos accesorios, más fácil de montar y desmontar, puedes quitar la unidad principal y es más fácil limpiar los accesorios.

Especificaciones del producto

Nombre	InnoGIO GIOluna Smart	Modelo	GIO-353
Voltaje de entrada	DC 5V 1A	Potencia nominal	5 W
Batería de litio	1200 mAh 5,18 Wh	Voltaje de la batería	DC 3,7 V
Paquete	2 unidades	Lugar de origen	China
Temperatura ambiente recomendada	5°C ~ 40°C	Año de fabricación	Indicado en la caja
Entorno de uso	Interior		
*Nota: Utilice el adaptador de 5 V-1 A con una potencia de salida máxima inferior a 15 W.			


Piezas del producto

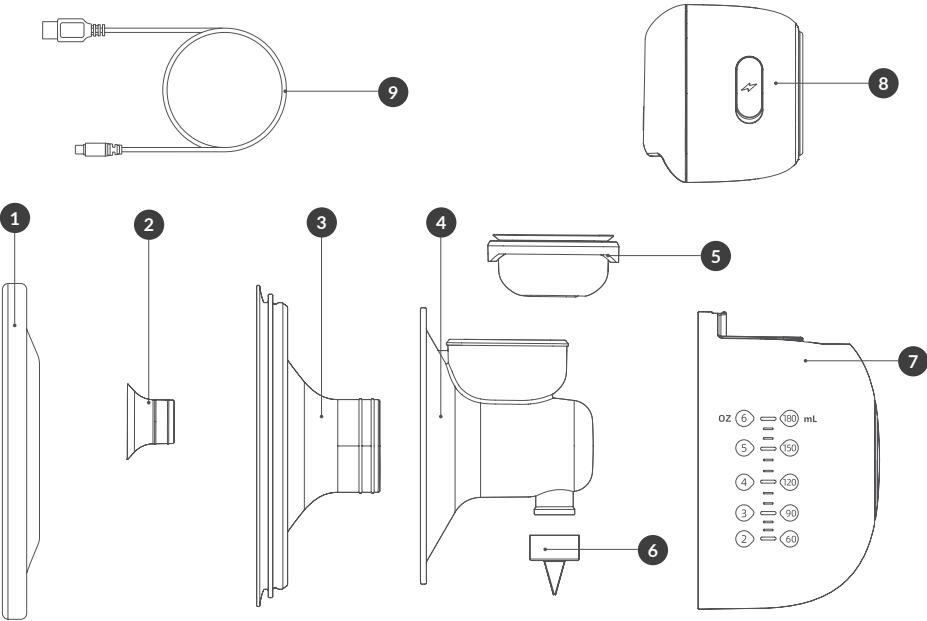

N.º	Nombre	Material	Resistencia a la temperatura	Cantidad
1	Tapa higiénica	PP	-20°C ~ 120°C	2
2	24 mm Inserto	Silicona	-20°C ~ 200°C	2
3	Protector mamario (27 mm)*	Silicona	-20°C ~ 200°C	2
4	Embudo	PP	-20°C ~ 120°C	2
5	Membrana	Silicona	-20°C ~ 200°C	2
6	Válvula	Silicona	-20°C ~ 200°C	4
7	Contenedor de leche	PP	-20°C ~ 120°C	2
8	Unidad principal	-	-	2
9	Cable USB	-	-	2

*Nota: E: La inserción de 24 mm, el protector de pecho (27 mm), el embudo, la membrana y la válvula son componentes que entran en contacto con alimentos.

Panel de visualización

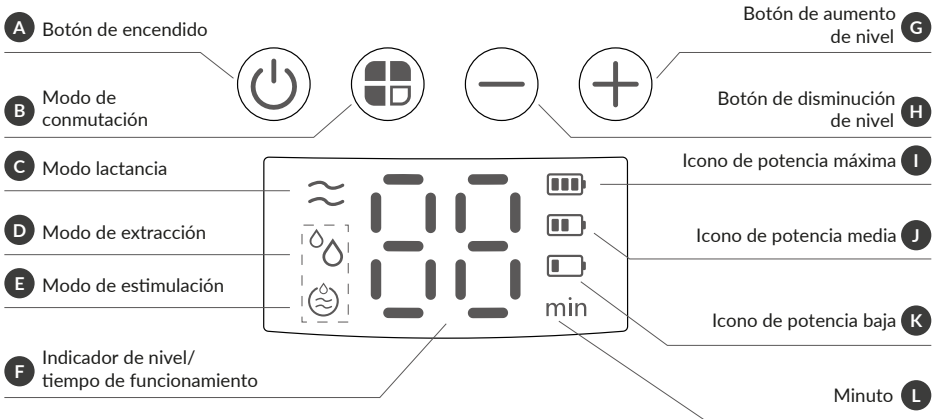

Descripción de los botones

-  **Botón de encendido**
Mantenga pulsado durante 2 segundos para encender/apagar, pulse para pausar, el dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad; el producto se apaga automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
-  **Modo de conmutación** – Pulse para alternar entre el modo de lactancia, el modo de extracción y el modo de estimulación.
-  **Aumentar el nivel**
Botón para aumentar la succión. (Un total de 9 niveles, siendo el nivel 9 el más potente)
-  **Disminuir nivel**
Botón para disminuir la succión. (Un total de 9 niveles, el nivel 1 es el más débil)

Descripción de los iconos



Modo lactancia

Un total de 9 niveles con frecuencia de extracción rápida y succión suave para estimular eficazmente la glándula mamaria para la lactancia.



Modo de extracción

Un total de 9 niveles con frecuencia de extracción lenta y gran succión, adecuados para una rápida extracción de leche.



Modo de estimulación

Un total de 9 niveles, los modos de lactancia y extracción se combinan para simular la succión del bebé, lo que hace que el proceso de extracción sea más inmersivo.



Visualización del nivel/tiempo de funcionamiento

Muestra el nivel de funcionamiento actual del dispositivo y el tiempo de funcionamiento acumulado actual.




Pantalla de energía de la batería

La potencia es suficiente  , se consume la mitad de la potencia  , la potencia es insuficiente  , el dispositivo se apagará automáticamente en breve 

Método de montaje


Compruebe que los accesorios pertinentes estén montados correctamente antes de utilizar.

1

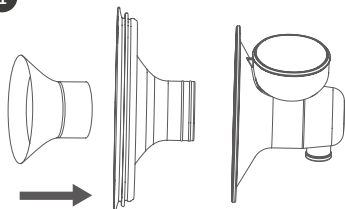


Coloque el inserto en el embudo y asegúrese de que quede bien ajustado.

2

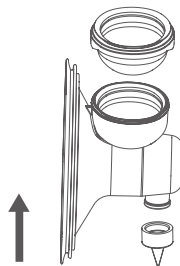


Fije la membrana y la válvula al cuerpo del conector. (Como se muestra en la figura).

3

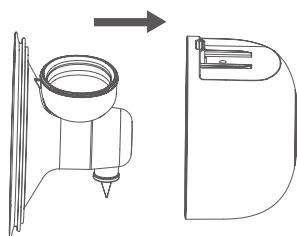


Fije el conjunto de la copa colectora al cuerpo del conector y asegúrese de que quede bien ajustado. (Como se muestra en la figura).

4

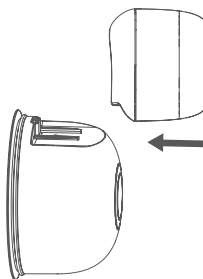

Fije la unidad principal al conjunto del contenedor de recogida, asegurándose de que quede bien ajustada. (Como se muestra en la figura).


5

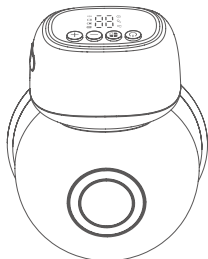


El montaje ha finalizado (como se muestra en la figura).

Instrucciones de funcionamiento


- 1 Lávese las manos antes de usar el producto, compruebe que el conjunto del sacaleches esté completamente limpio y correctamente instalado según las instrucciones de montaje.
- 2 Utilice toallas calientes para comprimir y masajear el pecho antes de extraer la leche, a fin de obtener un mejor efecto de extracción.

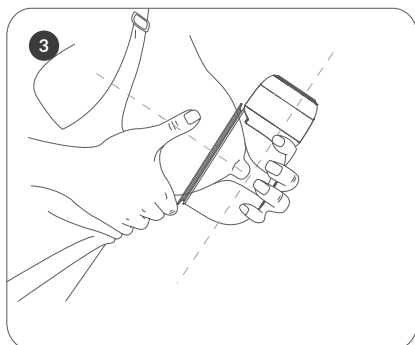


Alinee el centro del embudo ensamblado con el pezón y manténgalo cerca del pecho, y sujete el pecho con la otra mano para asegurarse de que no entre aire. (Figura 1).

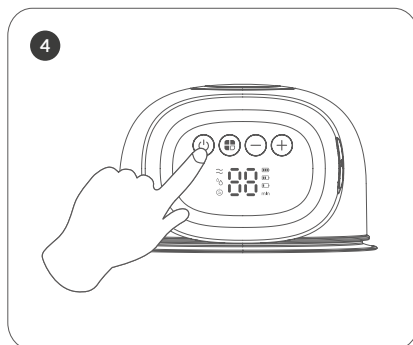

Mantenga pulsado el botón de encendido para iniciar el funcionamiento, púlselo para pausar la extracción y vuelva a pulsarlo para continuar con la extracción. (Figura 2).

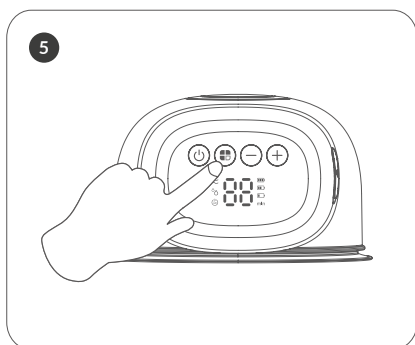


El producto se encuentra en modo lactancia por defecto después de encenderse. Pulse «■» durante el funcionamiento para cambiar entre los tres modos: lactancia, extracción y estimulación. (Figura 3).

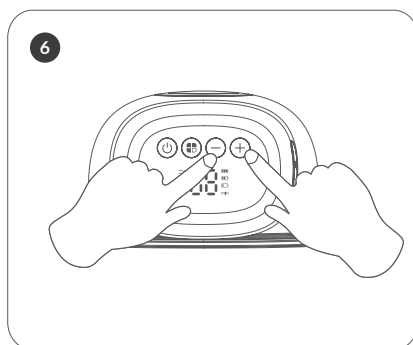

Durante el funcionamiento normal del dispositivo, pulse «+» y «-» para cambiar los niveles de 1 a 9. (Figura 4).

Conexión de alimentación

Abra el tapón de silicona del puerto de carga situado en el lateral de la unidad principal, conecte el conector tipo C del cable de alimentación USB al puerto de carga situado en el lateral del dispositivo y conecte el otro extremo del conector USB al adaptador DC5V/1A, al banco de energía o al puerto USB. (Como se muestra en la figura).

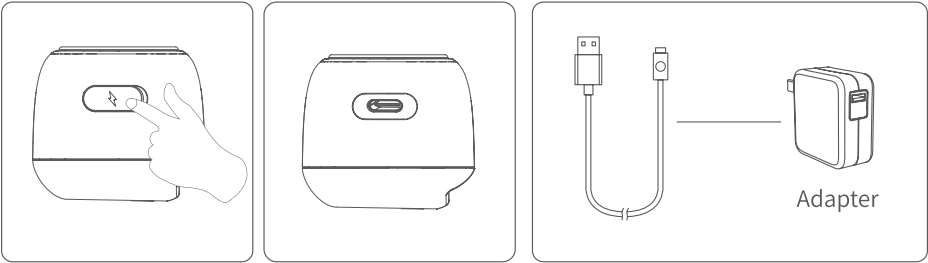

El dispositivo reconoce automáticamente el nivel de batería

- Cuando la batería está baja, el indicador de alimentación  parpadea en rojo; cárguelo a tiempo.
- Cuando la batería está llena, la pantalla muestra .
- Cuando se consume la mitad de la energía, la pantalla muestra .
- Cuando la batería está baja, la pantalla muestra .
- Durante la carga, el indicador de energía parpadea  ; cuando está completamente cargada, permanece encendido.

Nota: No lo utilice mientras se está cargando. (Necesita disponer de su propio adaptador de corriente, especificaciones: DC5V/1A).

Solución de problemas

Avería	Solución
El dispositivo no funciona	• La batería está baja; cárguela completamente antes de usarla y compruebe que el puerto de CC esté bien conectado durante la carga.
Poca o ninguna succión	• Compruebe que todas las piezas estén bien conectadas y asegúrese de que no haya fugas de aire. • Vuelva a montarlo siguiendo el procedimiento de montaje. • Compruebe que la salida de aire la válvula se abre y se cierra con normalidad. • Compruebe que el protector mamario se ajusta perfectamente al pecho.
El indicador de alimentación muestra el código «E1».	• Cuando el indicador de nivel del adaptador es superior a 6,5 V, muestra el código «E1», la unidad principal entra en protección contra sobretensión y no se puede cargar. • Utilice un adaptador de 5 V para cargar el dispositivo, que volverá a cargarse con normalidad.

Precauciones de limpieza

- Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto.
- Limpie las piezas que entran en contacto con la leche materna inmediatamente después de su uso para evitar residuos de leche y la proliferación de bacterias.
- Antes de limpiar, retire todos los accesorios que entren en contacto con el pecho o la leche materna (excepto la unidad principal).
- Al desmontar o montar, monte cada pieza en orden; al desmontar y limpiar, tenga cuidado con las piezas pequeñas, evite perderlas, ya que podría imposibilitar el montaje o el funcionamiento del dispositivo.
- Después de limpiarlo, coloque la copa colectora y el protector de pezones en el recipiente de esterilización para esterilizarlo (excepto la unidad principal y el cable USB).
- No sumerja la unidad principal del sacaleches en agua para limpiarla y desinfectarla; no la introduzca en el esterilizador a vapor para esterilizarla.
- No coloque el producto ni las piezas desmontadas en lugares accesibles para bebés y niños pequeños para evitar peligros.
- Si desea utilizar el sacaleches durante la fase de baja producción de leche, utilícelo siguiendo las instrucciones de su médico o del personal de enfermería.
- Si la unidad principal está dañada, no la retire usted misma. Debe ser reparada o sustituida por el fabricante o por profesionales. El producto y todas las piezas del paquete deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Advertencia

1. Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Este producto solo debe suministrarse a una tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca indicada en el aparato.
3. Este producto contiene pilas que no son reemplazables.
4. Para evitar infecciones y enfermedades, este producto es para uso de un solo usuario.

Precauciones de uso de baterías de litio

- Está prohibido desmontarlas, golpearlas, aplastarlas o arrojarlas al fuego.
- No las deje en entornos con altas temperaturas.
- Si se produce una hinchazón grave, no continúe utilizándola.
- No intente sustituir la batería usted mismo, ya que podría dañarla y provocar un sobrecalentamiento, un incendio o lesiones personales.
- No desmonte la batería, ya que algunos componentes de las baterías de litio son inflamables, nocivos y pueden causar lesiones, incendios, grietas o explosiones.
- Está prohibido desmontar, abrir, cortar o raspar la batería o el paquete de baterías con metal.
- Utilice únicamente un adaptador estándar que cumpla con la normativa de carga, de lo contrario será peligroso. No cargue el paquete de baterías durante mucho tiempo.
- Las baterías de litio solo pueden ser sustituidas por la empresa o por proveedores de servicios autorizados, y sustituir las por un modelo incorrecto conlleva riesgo de explosión; el dispositivo debe estar apagado antes de retirar la batería.
- Deseche las baterías o paquetes de baterías usados de acuerdo con las normativas nacionales de protección medioambiental.

Eliminación del extractor

Al final de su vida útil, separe todas las piezas de su extractor de leche.

La tapa higiénica, el inserto, el cuerpo del conector, la copa de succión, la válvula y el colector de leche están fabricados en plástico o silicona. Puede seguir el sistema de recogida selectiva según los sistemas locales de recogida y reciclaje.

El motor del extractor, incluido el cable de carga USB (equipo electrónico), puede contener sustancias peligrosas y no se permite desecharlo junto con los residuos municipales sin clasificar. La batería integrada no debe retirarse para su eliminación. Si la batería tiene fugas, se debe desechar el sacaleches.

**Los productos electrónicos y eléctricos (EEE)
están identificados con el siguiente símbolo:**




En la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, el fabricante o distribuidor deben recoger los residuos de AEE; otros países pueden tener sistemas de recogida y reciclaje similares. Este producto contiene baterías que no son reemplazables y no deben retirarse para su eliminación.

AVISO

Deseche los residuos de aparatos de acuerdo con la normativa local. Consulte en el punto de venta o póngase en contacto con las autoridades locales para conocer los puntos de recogida adecuados para los residuos de aparatos. La recogida selectiva y el reciclaje de su aparato usado en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se recicle de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente.

-  Scan the QR code to download the manual
-  Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
-  Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
-  Scannez le code QR pour télécharger le manuel
-  Escanee el código QR para descargar el manual
-  Digitalize o código QR para descarregar o manual
-  Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
-  Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
-  Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
-  Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
-  Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
-  Scanează codul QR pentru a descărca manualul
-  Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
-  Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
-  Lae juhend alla, skannides QR-koodi
-  A használati utasítás letöltéséhez olvassd be a QR-kódot
-  لتنزيل الدليل (QR) امسح رمز الاستجابة السريعة

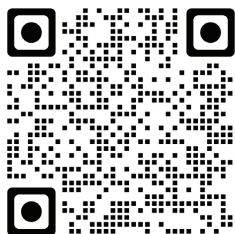

innoGIO

Fabricado en China para **InnoGIO GLOBAL** Sp. z o.o.
Calle Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.es



@innogIO.official



@innogio_com