


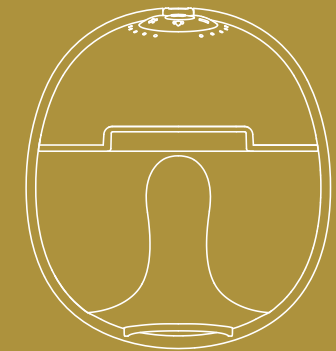

GIOmum Line Premium Warm


Elektryczny laktator muszlowy
z funkcją ciepłego kompresu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem laktatora należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
i zachować ją na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

Schemat budowy produktu

01

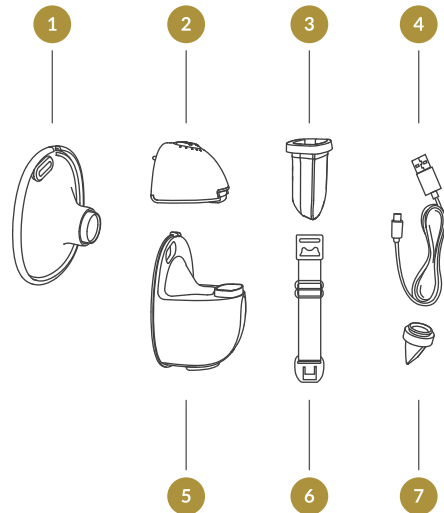


Lista części:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Nasadka | 5 Miseczka do zbierania pokarmu |
| 2 Silnik laktatora | 6 Zapięcie do regulacji biustonosza |
| 3 Membrana silikonowa | 7 Zawór |
| 4 Kabel USB do ładowania | |

Opis wyświetlacza LED i funkcji przycisków

02

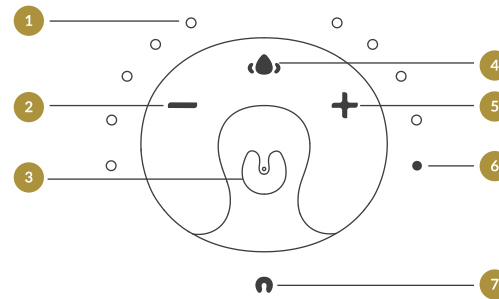

- 9 światełek odpowiadających 9 poziomom mocy odciągania (rosnąco od lewej do prawej)
- Przycisk zmniejszania mocy
- Przycisk zasilania/ Przycisk zmiany trybu
- Przycisk funkcji gorącego kompresu
- Przycisk zwiększania mocy
- Wskaźnik trybu gorącego kompresu
- Wskaźnik stanu baterii

Zawartość opakowania

- Nasadka
- Silnik laktatora
- Membrana silikonowa
- Zawór
- Kabel USB do ładowania
- Miseczka do zbierania pokarmu
- Zapięcie do regulacji biustonosza
- Torba do przechowywania

Montaż urządzenia

03

Aby złożyć laktator, wykonaj następujące czynności.


UWAGA

- Pamiętaj o czyszczeniu laktatora zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że laktator został złożony prawidłowo, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec przeciekaniu, przed złożeniem laktatora usuń pozostałości znajdujące się wokół brzegów.
- Przed montażem oczyszczonych elementów dokładnie umyj ręce.


- Przymocuj zawór na miseczce do zbierania pokarmu, zwracając uwagę na kąt jego montażu.




- Silikonową membranę umieść w miseczce do zbierania pokarmu i dociśnij ją rękami tak, aby krawędzie ściśle przylegały do siebie, co zapewni doskonałe uszczelnienie.

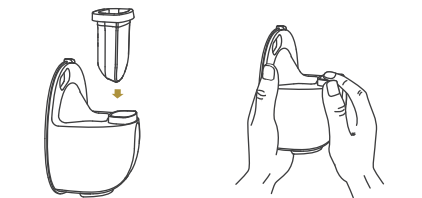

- Aby zamontować nasadkę na miseczce do zbierania pokarmu, upewnij się, że rowek nasadki jest w jednej linii z rowkiem przepływu wstecznego miseczki. Upewnij się, że magnetyczny element nasadki jest w równej linii z otworem magnetycznego elementu miseczki do zbierania pokarmu, a następnie dociśnij krawędzie obiema rękami, aby upewnić się, że są prawidłowo dopasowane.

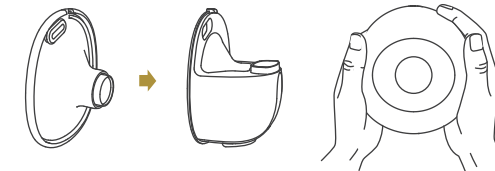

- Przymocuj korpus główny laktatora do miseczki do zbierania pokarmu, wyrównaj wycięcie pod korpusem głównym z silikonową membraną, a następnie zamontuj ją do góry nogami tak, aby dopasować ją do miseczki i zapewnić całkowite uszczelnienie.

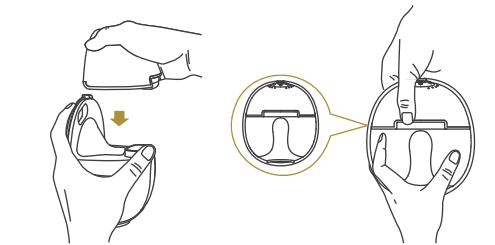


UWAGA

Korzystanie z laktatora podczas ładowania jest niemożliwe.


Instrukcja odciągania pokarmu

05


- Mocno dociśnij nasadkę tak, aby całkowicie przylegała do piersi i upewnij się, że brodawki znajdują się w pozycji centralnej. Utrzymuj nasadkę w pozycji pionowej. Uważaj, aby nie zmienić pozycji urządzenia i biustu, w przeciwnym razie laktator nie wytworzy niezbędnego do pracy podciśnienia.

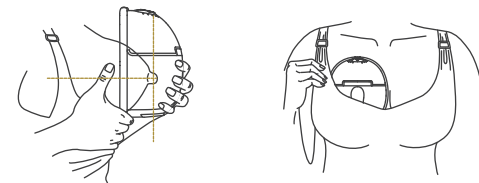


- Aby uruchomić laktator naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się wyświetlacz.

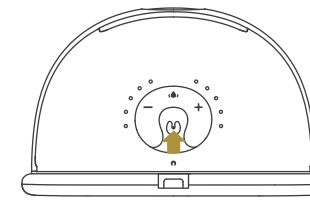


- Po włączeniu laktatora, naciśnij krótko przycisk "⌂", aby zmieniać tryby. Ten przycisk pozwala na przełączanie pomiędzy dwoma różnymi trybami (tryb odciągania, tryb masażu). Kontrolka miga, gdy urządzenie jest w trybie masażu, a w przypadku trybu odciągania świeci się ciągłym światłem.

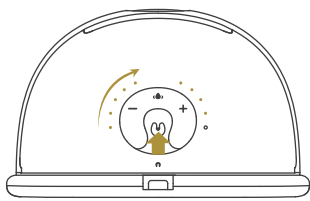


- W każdym trybie dostępnych jest 9 poziomów. Każde światło odpowiada kolejnemu z 9 poziomów mocy odciągania (rosnąco od lewej do prawej). Aby wybrać dogodną moc ssania, krótko naciśnij przycisk „+” aby zwiększyć poziom oraz przycisk „-” aby zmniejszyć poziom.

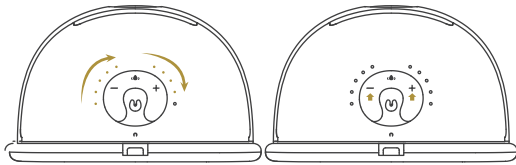

- Naciśnij krótko przycisk "⬆️" aby włączyć lub wyłączyć funkcję gorącego kompresu. Gdy ta funkcja jest włączona, będzie świecić się wskaźnik trybu gorącego kompresu (migające światło podczas podgrzewania, ciągłe światło podczas trybu utrzymywania ciepła). Jeżeli wtedy nie włączy się wskaźnik trybu gorącego kompresu, sprawdź, czy magnetyczny element nasadki jest w równej linii z silnikiem laktatora. Po skorzystaniu z funkcji gorącego kompresu, naciśnij krótko przycisk "⬆️"; jeśli nie zapali się wskaźnik trybu gorącego kompresu, oznacza to, że ta funkcja jest wyłączona.

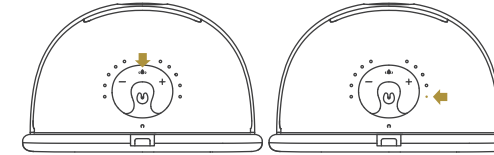


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „⌂”, aby wyłączyć laktator.

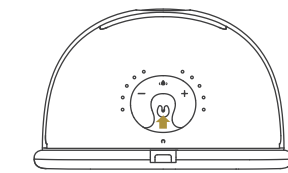


Wskazówki:

- Ten model ma wbudowaną funkcję pamięci; po włączeniu urządzenie jest automatycznie ustawione na ostatnio używany tryb stymulacji i poziom ssania.
- Laktator wyłącza się automatycznie po 20 minutach pracy.


- Podczas korzystania z laktatora, jeśli urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik naładowania baterii będzie się świecić ciągłym zielonym światłem, a gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik naładowania baterii będzie się świecić na czerwono. Należy podłączyć urządzenie do ładowania.

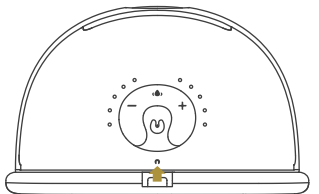

- Nie należy używać urządzenia podczas ładowania, w tym czasie interfejs wyświetlacza pokazuje tylko aktualny poziom naładowania. Podczas ładowania, wskaźnik stanu baterii będzie migać na czerwono, a gdy urządzenie będzie prawie w pełni naładowane, zacznie on migać na zielono. Po pełnym naładowaniu będzie się świecić ciągłym zielonym światłem.

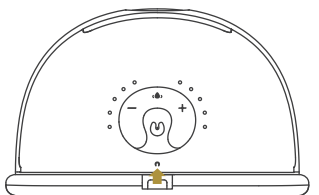

- Rozluźnij się i usiądź wygodnie, a następnie pochyl się lekko do przodu (użyj poduszki dla podparcia pleców). Utrzymuj laktator oraz miseczkę do zbierania pokarmu w pozycji pionowej.

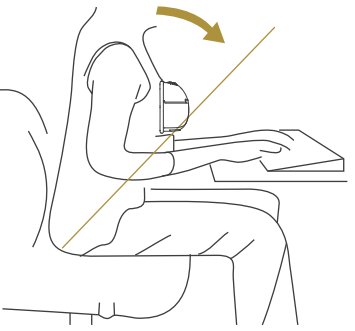

Postawa do odciągania pokarmu

Czyszczenie i konserwacja

	Pierwsze użycie	Po każdym użyciu
Obudowa laktatora	Włącz laktator za pomocą przycisku zasilania.	W razie potrzeby przetrzyj urządzenie czystą, wilgotną szmatką nasączoną 70% alkoholem etylowym lub izopropylowym. Nie zanurzaj laktatora w wodzie.
Nasadka, Membrana silikonowa, Zawór i Miseczka do zbierania pokarmu	Zanurz urządzenie do wrzątku na 5 minut. Nie wkładaj następujących części do kuchenki mikrofalowej: Nasadka, Membrana silikonowa, Zawór i Miseczka do zbierania pokarmu	Do czyszczenia używaj łagodnego płynu do mycia naczyń lub czystej wody.


UWAGA

- Przy demontażu i czyszczeniu zaworu zachowaj ostrożność; jeżeli zawór zostanie uszkodzony, laktator nie będzie działał prawidłowo.
- Aby wyczyścić zawór, delikatnie umyj go pod ciepłą wodą z kilkoma kroplami środka czyszczącego. Nie wkładaj do zaworu żadnych przedmiotów, które mogłyby go uszkodzić.


Czyszczenie ręczne

- Części laktatora umieść w czystej misce do mycia, używanej wyłącznie do przedmiotów służących do karmienia niemowląt. Nie umieszczaj części laktatora bezpośrednio w zlewie.
- Dodaj do miski mydło i gorącą wodę.
- Wyczyść części za pomocą czystej szczotki służącej tylko do artykułów przeznaczonych do karmienia niemowląt.
- Wypłucz części, trzymając je pod bieżącą wodą lub zanurzając je w czystej wodzie w osobnym naczyniu.
- Dokładnie wysusz wszystkie części. Umieść części laktatora, miskę i szczotkę do butelek na czystej, nieużywanej ściereczce do naczyń lub ręczniku papierowym w miejscu osłoniętym od brudu i kurzu. Nie używaj ściereczki do naczyń do wycierania ani osuszania przedmiotów.
- Wyczyść miskę i szczotkę do butelek. Po każdym użyciu dokładnie wypłucz urządzenie i pozostaw je do wyschnięcia. Przynajmniej co kilka dni myj je ręcznie.


- Dopasuj długość ramiączek biustonosza tak, aby odciąganie było bardziej komfortowe. Jeden koniec zapięcia do regulacji biustonosza powinien znajdować się na wewnętrznym zapięciu biustonosza do karmienia. Długość zapięcia biustonosza można regulować poprzez przyczepienie klamry biustonosza do karmienia do drugiego końca zapięcia do regulacji

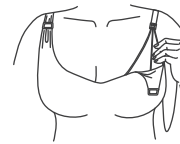

Grafika 1

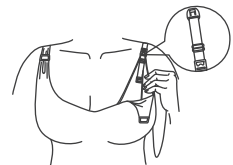

Grafika 2

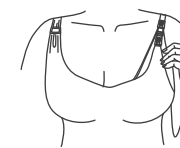


Grafika 3

- Po zakończeniu odciągania zdejmij laktator z piersi. Laktator trzymaj w pozycji pionowej i odłącz silnik. Trzymaj miseczkę do zbierania pokarmu, aby przełączyć mleko do butelki. Zwróć uwagę na to, aby otwór w miseczce do zbierania mleka był ustawiony w jednej linii z otworem butelki, aby zapobiec wylaniu się mleka.


- Po zakończeniu odciągania pokarmu naciśnij długi przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i palcem otwórz szczelinę między piersią a lejkiem laktatora, a następnie ostrożnie zdejmij laktator z piersi.



- Oddziel butelkę od silnika laktatora, aby przygotować ją do karmienia/przechowywania. Pozostałe używane części wyczyść zgodnie z instrukcją.

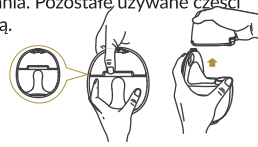

- Wlej mleko do butelki do przechowywania; zanim to zrobisz, upewnij się, że otwór jest dopasowany do butelki.

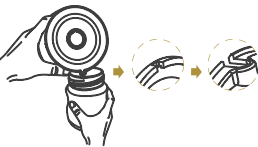**Przechowywanie mleka**

- Przechowuj wyłącznie mleko zebrane za pomocą wysterylizowanego laktatora.
- Odciągnięte mleko można przełączyć do czystego i wysterylizowanego woreczka do przechowywania mleka lub butelki na mleko z uszczelnieniem i następnie natychmiast umieścić je w lodówce.

Jak przechowywać mleko

- Nie należy zamrażać mleka, które już raz zostało rozmrożone.
- Nie należy mieszać świeżego mleka z mlekiem mrożonym.
- Niewykorzystane podczas karmienia resztki mleka należy wylać po karmieniu.
- Odciągnięte mleko można przechowywać w lodówce przez 48 godzin lub zamrozić i przechowywać w zamrażarce przez maksymalnie trzy miesiące. Butelka lub woreczek do przechowywania mleka powinny być opatrzone etykietą, na której wyraźnie zaznaczono datę i godzinę odciągnięcia.

Jak rozmrozić mleko

- Zamrożone mleko umieść w lodówce na noc, aby się rozmroziło. Jeśli musisz pilnie skorzystać z zamrożonego mleka, możesz rozmrozić je w misce z gorącą wodą. Po rozmrożeniu mleko musi zostać spożyte w ciągu 24 godzin.

Jak podgrzać mleko

- Włóż butelkę do miski z gorącą wodą w pozycji pionowej lub bezpiecznie i szybko podgrzej mleko za pomocą podgrzewacza do butelek i pokarmu.

- Uwaga! Zanim nakarmisz dziecko, sprawdź temperaturę mleka.
- Nie podgrzewaj mleka w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogłoby to zniszczyć znajdujące się w mleku cenne składniki odżywcze i przeciwciała.
- Ponadto nierównomierne podgrzewanie może spowodować częściowe przegrzanie płynu, co może skutkować poparzeniem.
- Nie zanurzaj butelki do przechowywania mleka we wrzącej wodzie w celu podgrzania, ponieważ butelka może się odkształcić lub pęknąć.

innoGIO

Wyprodukowano w Chinach dla INNOGIO sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.innogio.com

@innogio.official



@innogio_com

