


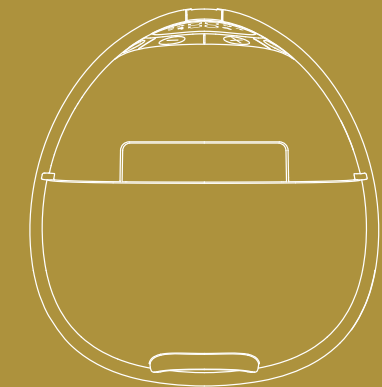

GIOmum Linea Discreet

Sacaleches eléctrico portátil

MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual de usuario antes de utilizar el extractor de leche portátil y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto 01

En primer lugar, el extractor de leche puede simular el patrón de succión de un bebé, ayudar a succionar el pecho, promover la secreción hipofisaria de prolactina y estimular la secreción de leche del pecho para aumentar la producción de leche, lo que puede ayudar a satisfacer las necesidades de su bebé.


En segundo lugar, el sacaleches puede promover la contracción del epitelio mamario para favorecer la eyección de la leche de los conductos mamarios, asegurar el vaciado del pecho y aliviar la congestión mamaria. Además, el uso regular del sacaleches puede favorecer la succión del exceso de leche de los conductos mamarios, lo que puede ayudar a prevenir la mastitis aguda.

En tercer lugar, el uso del sacaleches puede mejorar la tasa de lactancia directa y aumentar la confianza de las madres en la lactancia, lo cual es beneficioso tanto para las madres como para los lactantes.

En cuarto lugar, este dispositivo es adecuado para uso personal en casa y no se recomienda su uso como herramienta auxiliar en instituciones médicas.

Advertencia: Si la potencia de succión se reduce, es probable que sea necesario sustituir la válvula o el diafragma. Las piezas de silicona son piezas de desgaste y deben sustituirse cuando estén desgastadas.


Diagrama de la estructura del producto 02

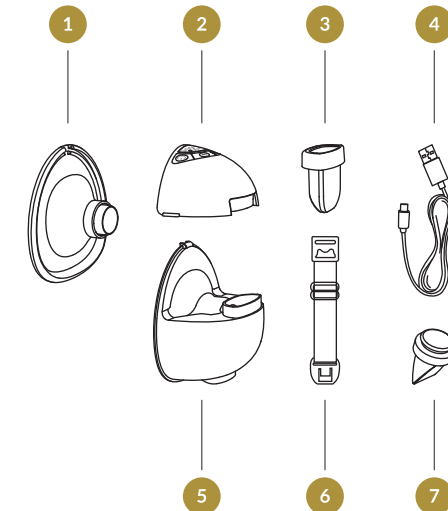

Lista de piezas:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Embudo | 4 Cable de carga USB |
| 2 Motor del extractor | 5 Recolector de leche |
| 3 Diafragma de silicona | 6 Extensor de ajuste del sujetador |
| | 7 Válvula |

Descripción de la pantalla LED y de la función de los botones 03

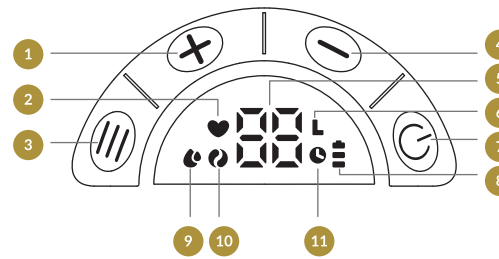


- | | |
|---|---|
| 1 Botón para subir de nivel | 7 Botón de encendido/ Botón de cambio de modo |
| 2 Modo de estimulación | 8 Indicación de batería |
| 3 Botón Pausa / Inicio | 9 Modo de extracción |
| 4 Botón de bajada de nivel | 10 Modo masaje |
| 5 Indicación de nivel/ indicación de tiempo (minutos) | 11 Icono del reloj |
| 6 Símbolo de nivel | |

Montaje 04


Para montar el extractor, siga los pasos que se indican a continuación.

- ¡AVISO!** ⚠
- Asegúrese de limpiar el extractor siguiendo las instrucciones de este manual de usuario.
 - Asegúrese de montar el extractor correctamente, tal y como se indica en este manual de instrucciones.
 - Para evitar fugas, elimine los residuos alrededor del embudo antes de montarla.
 - Lávese bien las manos antes de montar los componentes limpios.

1. Monte la válvula en el colector de leche, prestando atención al ángulo de montaje.

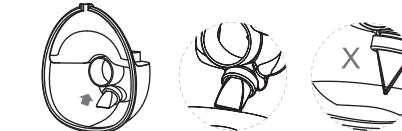

2. Coloque el diafragma de silicona en el colector de leche y presiónelo con las manos para que los bordes queden bien sujetos y garantizar un sellado perfecto.

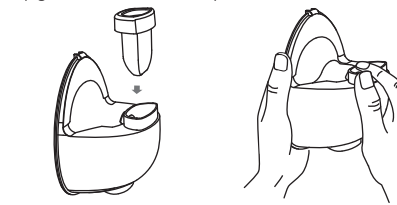


Guía de extracción 06


3. Para montar el embudo en el colector de leche, asegúrese de alinear la ranura de silicona con la ranura de reflujo del colector de leche y, a continuación, presione los bordes con ambas manos para asegurarse de que la junta está en su sitio.




4. Monte el cuerpo principal del extractor de leche en el colector de leche, alinee la muesca situada debajo del cuerpo principal con la membrana de silicona y móntela hacia abajo para ajustarla al colector de leche y garantizar un sellado completo.

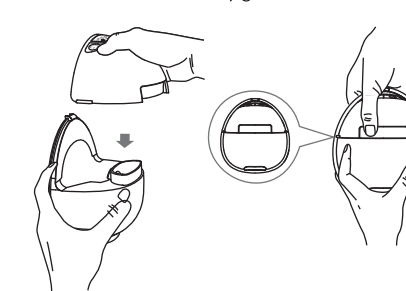

1. Presiona el embudo firmemente contra tu pecho, sin dejar huecos y asegurándote de que tus pezones están centrados. Manténgalo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del dispositivo y su pecho, de lo contrario el sacaleches no tendrá succión.

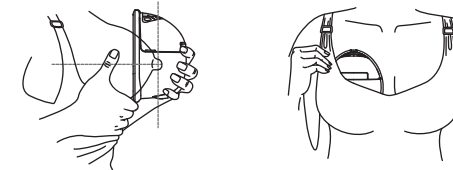


2. Mantenga pulsado el botón de encendido para poner en marcha el extractor de leche hasta que se encienda la pantalla.

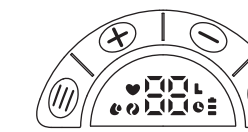


3. Puede iniciar o pausar el funcionamiento del extractor de leche pulsando brevemente el botón . Pulse brevemente el botón para cambiar de modo una vez que el sacaleches se haya puesto en marcha. Con este botón puede cambiar entre tres modos diferentes (modo de extracción, modo de estimulación y modo de masaje).


Cuando se ilumina, significa que el aparato está en modo extracción; Cuando se ilumina, significa que el modo de estimulación está activado; Cuando se ilumina, significa que el modo de masaje está activado.

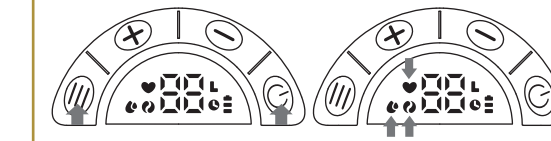


4. Hay 9 niveles disponibles en cada modo. Puede seleccionar el nivel de succión que le resulte más cómodo pulsando brevemente el botón + para subir el nivel y el botón - para bajarlo.

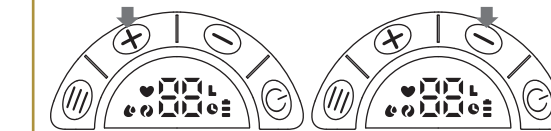

5. Cuando el sacaleches está encendido, si pulsa el botón, la pantalla mostrará el nivel del modo actual. El símbolo de nivel  de la pantalla se iluminará al mismo tiempo. Si no pulsa el botón antes de 2 segundos, la visualización del nivel en la pantalla cambiará a visualización de la hora, y el icono del reloj  de la pantalla se encenderá al mismo tiempo.

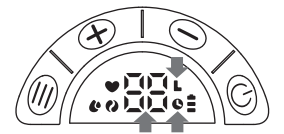




6. Mantenga pulsado el botón de encendido  para apagar el extractor de leche.

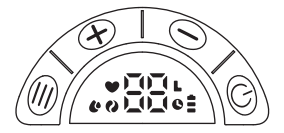

- Consejos:**
- Este modelo tiene una función de memoria incorporada, cuando enciendes el aparato, éste introduce automáticamente el modo de estimulación y el nivel de succión utilizados más recientemente.
 - Cuando se detiene el funcionamiento del aparato y no se pulsa ningún botón en 5 minutos, el sacaleches se apaga automáticamente.
 - El extractor de leche se detendrá automáticamente tras 20 minutos de funcionamiento.

Indicador LED de nivel de batería

09

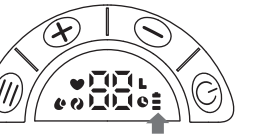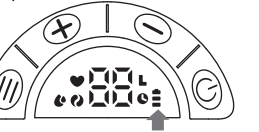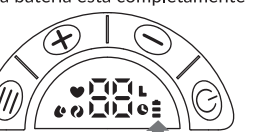- En el extractor de leche se muestran tres niveles de potencia.
- Durante el uso, si el indicador de potencia está a sólo 1 bar y parpadea, indica que la batería se está agotando. Asegúrate de cargarla a tiempo.
- El dispositivo no se puede utilizar mientras se carga, en este momento la interfaz de la pantalla sólo muestra el nivel de carga actual. Cuando el nivel de batería muestra 3 barras y no parpadea, significa que la batería está completamente cargada.
- Después de cada uso, pulsa el botón de encendido para comprobar el indicador de batería. Si la pantalla indica un nivel bajo de batería, cárgala utilizando un cargador DC5V  1A.

Puerto de carga Tipo-C

Instrucciones posturales para la lactancia

10

Relájate y siéntate en una silla cómoda, inclinándote ligeramente hacia delante (utiliza un cojín para apoyar la espalda). Asegúrate de que tu cuerpo y el sacaleches están alineados.



Postura de lactancia

Instrucciones relativas al extensor de ajuste del sujetador

Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador para que la succión resulte más cómoda. Cuelgue un extremo de la hebilla de ajuste del sujetador en la hebilla interior del sujetador de lactancia. La longitud de la hebilla del sujetador puede ajustarse colgando la hebilla del sujetador de lactancia en el otro extremo de la hebilla de ajuste del sujetador.

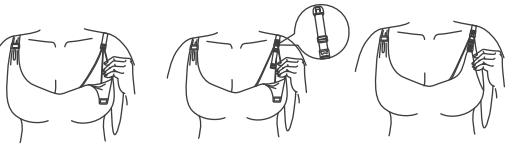


Imagen 1

Imagen 2


Imagen 3

Fin de la sesión de extracción


11

Cuando termine de extraerse leche, retire el extractor del pecho. Mantenga el sacaleches en posición vertical y retire la parte del motor. Sujete el colector de leche para verter la leche en el biberón. Asegúrese de que el hueco del colector de leche de la copa de lactancia está alineado con la boca del biberón para evitar que se derrame la leche materna.


- Cuando termine de extraerse leche, pulse el botón de encendido para apagar el dispositivo y rompa el sello entre el pecho y el embudo del extractor con el dedo; a continuación, retire con cuidado el extractor del pecho.

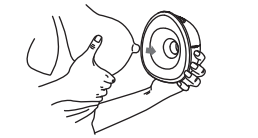

2. Separe el colector de leche del motor de la bomba para prepararlo para la alimentación/almacenamiento. Limpie las demás piezas usadas siguiendo las instrucciones.

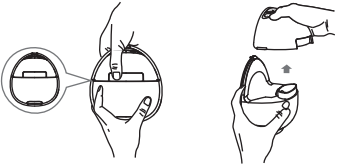

3. Vierte la leche en el biberón; asegúrate de que la ranura está alineada con la boca del biberón.

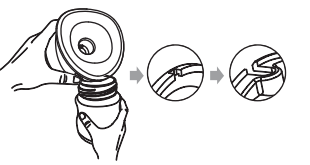

Limpieza

12

Limpieza y mantenimiento

	Primer uso	Después de cada uso
Cuerpo de bomba	-	Limpie con un paño limpio y húmedo con alcohol etílico al 70% o alcohol isopropílico según sea necesario. No sumerja el extractor de leche en agua.
Embudo, diafragma de silicona, válvula y colector de leche	Hervir en agua durante 5 minutos. No introduzca las siguientes piezas en el microondas: Embudo, Diafragma de Silicona, Válvula y Colector de Leche.	Limpie con detergente lavavajillas suave o agua limpia.

Limpieza

13

¡AVISO!

- Tenga cuidado al desmontar y limpiar la válvula; si la válvula está dañada, el sacaleches no funcionará correctamente.
- Para limpiar la válvula, frótela suavemente en agua tibia con unas gotas de detergente. No introduzca ningún objeto en la válvula, ya que podría dañar el aparato.

Limpieza a mano

- Coloque las piezas del sacaleches en un recipiente limpio que sólo se utilice para artículos de alimentación infantil. No coloque las piezas del sacaleches directamente en el fregadero.
- Añade detergente y agua caliente al lavabo.
- Frote los artículos con un cepillo limpio utilizado sólo para artículos de alimentación infantil.
- Aclárelos manteniéndolos bajo el grifo o sumergiéndolos en agua limpia en un recipiente aparte.
- Seque al aire completamente. Coloque las piezas del sacaleches, el recipiente y el cepillo para biberones sobre un paño de cocina o papel de cocina limpio y sin usar, en un lugar protegido de la suciedad y el polvo. No utilice un paño de cocina para frotar o dar palmaditas para secar los artículos.
- Limpie el recipiente y el cepillo para biberones. Acláralos bien y déjalos secar al aire después de cada uso. Lávalos a mano al menos cada pocos días.

Conservar la leche materna

14

Conservar la leche materna

- Guarde únicamente la leche materna recogida con sacaleches esterilizados.
- La leche extraída puede introducirse en una bolsa de almacenamiento de leche limpia y esterilizada o en un biberón con tapa, y colocarse inmediatamente en el frigorífico.

Atención

- No congele la leche materna más de una vez.
- No mezcle leche materna fresca con leche materna congelada.
- Asegúrate de desechar la leche materna sobrante después de la toma.
- La leche extraída puede conservarse en el frigorífico durante 48 horas o en el congelador hasta tres meses. Etiquete el biberón de leche o la bolsa de conservación de la leche con la fecha y la hora claramente marcadas.

Cómo descongelar la leche materna

Coloca la leche materna congelada en el compartimento frigorífico durante toda la noche para que se descongele. Si necesita consumir leche congelada urgentemente, puede utilizar un recipiente o agua caliente para descongelar la leche materna. Después de descongelar la leche materna, debe consumirse en un plazo de 24 horas.

Cómo calentar la leche materna

- Coloca el biberón en un recipiente con agua caliente o calienta la leche materna de forma segura y rápida utilizando un calentador de biberones y alimentos.

2. ¡Atención! Antes de alimentar a tu bebé, asegúrate de comprobar la temperatura de la leche materna.
3. No utilice el microondas ni el horno para calentar la leche materna, ya que podría destruir nutrientes y anticuerpos importantes.
4. Además, el calentamiento desigual puede provocar un sobrecalentamiento parcial del líquido, lo que puede causar quemaduras.
5. No sumerja el biberón de almacenamiento de leche en agua hirviendo para calentarla, ya que podría romperse o agrietarse.

innogio

Fabricado en China para **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.com

 @innogio.official  @innogio_com

