


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Model AC327

Monitor de mișcare a bebelușului
cu sunet și imagine, afișaj 4.3

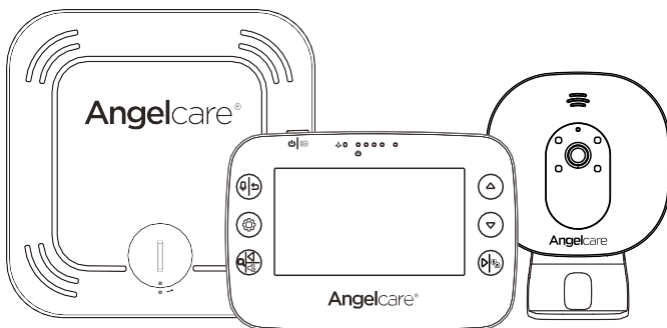

AVERTISMENT

Păstrați manualul de instrucțiuni pentru referințe viitoare. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de avertizare și siguranță înainte de a instala și utiliza produsul. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la răni grave, deces sau deteriorarea produsului.

IMPORTANT - UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Acest produs NU este destinat și nu trebuie utilizat pentru a preveni sindromul morții subite a sugarului (SMSS). Acest produs NU este destinat să diagnosticheze, să trateze, să atenueze, să vindece sau să prevină niciun fel de boală sau afecțiune. Acesta este un produs pentru monitorizarea mișcării copiilor sănătoși și nu înlocuiește supravegherea și îngrijirea unui părinte.

Acest monitor pentru copii respectă toate standardele relevante privind câmpurile electromagnetice și este sigur de utilizat dacă sunt respectate instrucțiunile din acest manual de utilizare.

AVERTISMENT

1. Din cauza riscului serios de strangulare pentru sugari și copii mici, părinții și persoanele care îi îngrijesc trebuie să țină seama de următoarele avertismente.



AVERTISMENT - Pericol de strangulare cu cablul

- **NU ȚINEȚI** unitatea pentru bebeluși și cablurile adaptorului la îndemâna copiilor și la mai puțin de 1 metru.
- **NU folosiți NICIODATĂ** prelungitoare cu adaptorul. Folosiți **NUMAI** adaptoarele furnizate.
- **Acest produs NU este o jucărie. NU permiteți NICIODATĂ** copiilor să se joace cu el.

2.

AVERTISMENT - MIȘCARE PLĂCUȚEI CU SENZOR - FĂRĂ ALARMĂ

- Pad-ul senzorului poate detecta surse de vibrații și mișcare, altele decât bebelușul dvs., afectând performanța monitorului dvs. Angelcare.
- Alarma nu va suna dacă detectează orice altă mișcare decât mișcarea copilului.
- Setările de sensibilitate ridicată pot capta alte surse de vibrații și mișcare - citiți instrucțiunile de setare a sensibilității pentru a ajusta în consecință.
- Alți copii activi și mai mari (copii mici) din aceeași cameră pot fi detectați și alarma nu va suna.
- Asigurați-vă că mediul bebelușului este **LIBER** de orice mișcare sau vibrație atunci când utilizați senzorul - consultați avertismentele de la 3 la 11 de mai jos.

3. NU folosiți carusele deasupra pătutului și alte accesorii pentru pătuț care pot provoca mișcare sau vibrații.

4. Ventilatoarele (inclusiv un ventilator de tavan), mașinile de spălat, pardoseala, încălzirea centrală sau muzica tare sunt diverse forme de mișcare și vibrații care pot provoca interferențe și pot fi detectate de senzorul.

5. Dacă se folosește o altă unitate pentru bebeluși, trebuie să fie plasată la cel puțin 2 metri distanță de unitatea pentru bebeluș #1 și de senzor, deoarece acest lucru ar putea cauza interferențe.

6. NU utilizați dacă pătuțul atinge patul părintelui/îngrijitorului, deoarece senzorul vă va detecta mișcările.

7. NU așezați pătuțul direct la perete sau lângă o plintă, deoarece pot fi detectate vibrații.

8. După ce copilul este scos din pătuț, unele saltele pot determina salteaua să detecteze mișcare, deoarece va reveni la forma inițială și alarma poate să nu sune.

9. Asigurați-vă că pătuțul este stabil, astfel încât să nu existe mișcări nedorite.

10. Pătuțul nu trebuie așezat aproape de alt pătuț sau pat.

11. NU utilizați alte dispozitive wireless în aceeași cameră cu monitorul de mișcare (inclusiv telefoane mobile, cuptoare cu microunde, ...). Pot apărea interferențe de semnal și de performanță.

12. Plăcuța cu senzor este realizată din material plastic și nu permite circulația aerului. Prin urmare, se poate forma mușgai sub saltea în zona plăcuței cu senzor. Vă recomandăm să întoarceți salteaua în mod regulat și să o aerisiți/uscăți pentru a preveni dezvoltarea mușgaiului.

EVITAȚI CONTACTUL CU UMIDITATEA. Curățire – ștergeți cu o cârpă uscată, fără scame.

13. Senzorul nu este adecvat pentru utilizare la un copil mai mare de 24 de luni.

14. Acest produs nu poate înlocui supravegherea responsabilă a unui adult.

- Acest produs este conceput pentru a vă ajuta să vă monitorizați copilul. Când utilizați monitorul de mișcare, trebuie să mențineți în permanență supravegherea necesară pentru siguranța continuă a copilului dumneavoastră.
- Utilizați acest produs NUMAI pentru scopul prevăzut, așa cum este descris în

acest manual de utilizare.

15. Senzorul nu este destinat să determine dacă copilul se află în afara pătuțului.

16. ÎNTOTDEAUNA verificați copilul imediat ori de câte ori sună alarma.

17. Nu lăsați cablurile la îndemâna VREUNUI copil.

18. Folosiți NUMAI încărcătoarele și adaptoare de alimentare furnizate. Nu utilizați alte tipuri, deoarece ar putea deteriora dispozitivul și bateria (dacă este inclusă cu modelul dvs.).

19. Este necesară instalarea de către un adult. Nu lăsați piesele mici la îndemâna copiilor în timpul instalării.

20. Urmați instrucțiunile pentru a testa acest monitor și caracteristicile sale pentru a vă familiariza cu acesta înainte de utilizarea efectivă. ÎNTOTDEAUNA asigurați-vă că atât emițătorul, cât și receptorul funcționează corect și este în raza de acțiune unul față de celălalt - verificați regulat și când unitatea pentru bebeluș este repositionată.

21. NU atingeți contactele ștecherului electric, în special cu obiecte ascuțite sau metalice.

22. NU folosiți monitorul pentru copii lângă apă. Trebuie avut grijă să NU scăpați obiecte pe unități și să vă asigurați că nu se varsă lichide în orificiile unității sau pe placa cu senzor.



ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEȚI



NU EXPUNEȚI LA PLOI SAU LA UMIDITATE

23. Păstrați monitorul FERIT de surse de căldură (sobe, calorifere etc.). Căldura poate deteriora carcasa sau componentele electrice.

24. Așezați ÎNTOTDEAUNA atât copilul, cât și unitatea parentală pe o suprafață plană și fermă, într-o poziție verticală, care să permită VENTILAREA corespunzătoare. NU le așezați pe canapele, perne, paturi etc., unde ventilația poate fi blocată sau oriunde unde sunetul poate fi înfundat sau fluxul de aer poate fi perturbat.

25. Monitorul pentru bebeluși poate fi utilizat numai într-un interval de temperatură de la 10 °C la 40 °C.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ - SPECIFICE BATERIILOR



Nu ingerați bateria, risc de arsuri chimice.

Acest produs conține o baterie tip buton/monedă. Dacă înghiți o baterie tip monedă/buton, se poate ca în doar 2 ore să se producă arsuri interne severe și pot duce la deces. Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Dacă compartimentul bateriei nu poate fi închis în siguranță, nu mai utilizați produsul și nu-l lăsați la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau plasate în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

26. Bateria din unitatea parentală este o baterie litiu-ion înlocuibilă. Senzorul fără fir folosește o baterie cu litiu rotundă care poate fi înlocuită. Utilizați numai bateria de schimb recomandată de Angelcare (vezi Specificații tehnice).

- Există riscul de explozie dacă bateria este utilizată incorect sau dacă bateria este înlocuită incorect. Consultați acest manual de utilizare pentru instalarea corectă a bateriei.
- NU scurtcircuitați bornele de alimentare.

27. NU UTILIZAȚI ÎMPREUNĂ baterii uzate și baterii noi, utilizați numai baterii de schimb recomandate de Angelcare (vezi Specificații tehnice).

28. Bateria tip buton este o componentă mică și prezintă pericol de sufocare - NU LĂSAȚI la îndemâna copiilor!

29. Când manipulați bateriile, aveți grijă să nu le scurtcircuitați cu materiale conductoare, cum ar fi inele, brățări și chei.

30. Supraîncărcarea, scurtcircuitul, încărcarea inversă, deteriorarea sau arderea bateriilor trebuie evitate pentru a preveni unul sau mai multe dintre următoarele: eliberarea de materiale toxice, eliberarea de hidrogen și/sau oxigen, gaz și creșterea temperaturii suprafeței.

31. NU încercați să reîncărcați bateriile furnizate cu acest

produs sau cu scopul utilizării cu acest produs, care nu sunt reîncărcabile. Bateriile pot degaja electrolit coroziv sau pot exploda.

32. Evitați introducerea bateriilor în produs cu polaritate incorectă. Introducerea bateriilor invers poate provoca încărcare și poate duce la scurgeri sau la explozia bateriei.

33. Dacă depozitați produsul mai mult de 30 de zile, vă rugăm să scoateți bateriile din produs, deoarece acestea pot curge și pot deteriora produsul.

34. Aruncați bateriile descărcate cât mai curând posibil, deoarece bateriile „descărcate” pot determina scurgeri în produs. Dacă bateria s-a scurs sau a aerisit, aruncați produsul în mod responsabil.

35. NU depozitați acest produs sau bateriile furnizate sau destinate utilizării cu acest produs într-un mediu cu temperatură ridicată și umiditate ridicată și nu le expuneți la lumina directă a soarelui.

36. ATENȚIE

- Există riscul de explozie dacă bateria este introdusă incorect. Înlocuiți bateriile numai cu același tip sau cu echivalent.
- În timpul utilizării, depozitării sau transportului, bateria nu poate fi expusă la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute și la presiune scăzută a aerului la altitudine mare.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate duce la o explozie sau eliberarea de lichid sau gaz inflamabil.
- Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei poate duce la o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

- Expunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la explozie sau scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- Înălțimea de montare a unității pentru bebeluș ar trebui să fie mai mică de 2 metri.
- Plăcuța cu denumirea este situată pe spatele capacului produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

37. Plăcuța cu senzor –

- Dacă pătuțul dumneavoastră nu are o suprafață solidă, staționară, complet plană și rigidă, care include și un arc sau o bază cu șipci, așezați o placă solidă între baza pătuțului și suportul senzorului pentru a asigura funcționarea corectă (consultați specificațiile în PASUL 2).
- Padul cu senzor funcționează cu arcuri standard și cu saltele din spumă, nu cu spumă de memorie (parțială sau completă), saltele cu cadru gol și paturi cu apă. Dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea saltelei, vă rugăm să consultați Angelcare.

38. Acest monitor folosește unde radio publice pentru a transmite semnale. Unitatea parentală poate capta semnale sau interferențe de la alte monitoare pentru copii din jur. Monitorul dvs. poate fi chiar interceptat de o altă gospodărie. Pentru a vă proteja confidențialitatea, asigurați-vă că ambele unități sunt oprite atunci când nu sunt utilizate.

39. Protecția cablului de alimentare - Protejați cablul de alimentare al adaptorului să nu fie deteriorat prin mers sau prins de mobilier sau alte obiecte. Cablurile de alimentare trebuie să fie așezate astfel încât să nu poată fi călcate sau să nu poată fi plimbate nu prindeți obiecte pe ele sau sprijinite de ele. Acordați o atenție deosebită cablurilor și ștecherelor, prizelor și locurilor în care ies din produs. Priza trebuie instalată lângă dispozitiv și trebuie să fie ușor accesibilă.

Conectați adaptorul la priza cea mai apropiată de dispozitiv și care este ușor accesibilă. Pentru a deconecta de la sursa de curent de rețea,

CERINȚE DE INSTALARE

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 Unitatea pentru copii
- 2 Suport de masă / suport de perete (pentru
- 3 unitatea bebelușului) 2 x adaptor AC
- 4 Unitatea parentală
- 5 Baterie litiu-ion (pentru unitatea parentală)
- 6 Pad cu senzor
- 7 Baterie CR2450 3V (pentru senzor) Echipament
- 8 (pentru montare pe perete)

DE CE AI NEVOIE

O scândură solidă dacă pătuțul nu are o suprafață solidă (vezi specificațiile în PASUL 2)
Burgheu sau șurubelniță (pentru montare pe perete)

deconectați adaptorul. Dacă adaptorul de alimentare este deteriorat sau rupt, NU îl mai folosiți.

40. Utilizați numai accesorii/accesorii și piese de schimb specificate de producător. Orice instalare a produsului trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

- NU așezați acest produs pe un cărucior, suport, trepied, consolă sau masă instabilă. Produsul poate cădea și poate provoca răni grave copiilor sau adulților și deteriorarea gravă a produsului.
- Folosiți NUMAI suportul furnizat împreună cu produsul.
- Utilizați numai piese de schimb furnizate de Angelcare care au aceleași caracteristici ca și piesele originale. Instalarea pieselor de schimb neaprobate poate duce la incendii sau vătămări curentări.

41. Deconectați dispozitivul în timpul unei furtuni sau dacă nu îl veți folosi pentru o perioadă lungă de timp.


42. Reparații - NU încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor (cu excepția ușii bateriei) vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole.

- Alimentare - vezi datele tehnice din acest manual de utilizare.




43. Supraîncărcare - NU supraîncărcați prizele de perete, prelungitoare sau prizele integrate deoarece poate exista risc de incendii sau electrocutare.

44. Antena pentru unitatea bebelușului - Antena utilizată în acest transmisor trebuie instalată menținând o distanță de cel puțin 20 cm față de toate persoanele și nu trebuie să fie amplasată sau operată împreună cu orice altă antenă sau transmisor.

45. Curățare - Deconectați toate unitățile înainte de curățare. NU scufundați nicio parte a monitorului în apă. Curățați numai cu o cârpă uscată.

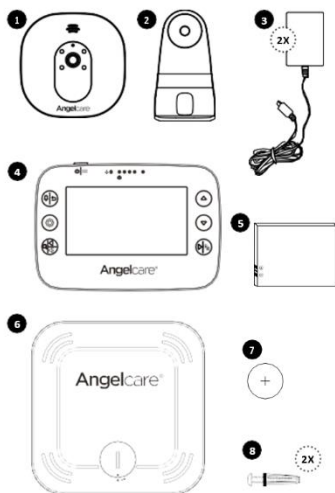

1- CONFIGURARE UNITATE PARENTALĂ

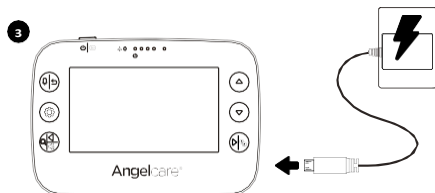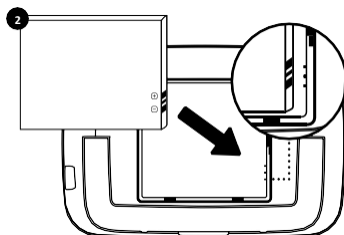
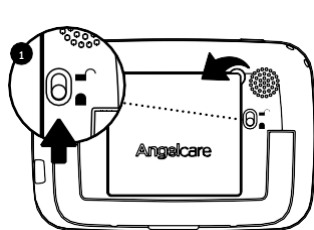


Încărcați unitatea parentală pentru o perioadă înainte de prima utilizare 8 ore.

• Timpul normal de încărcare este de 6 ore.

2- SETAREA PAD-ULUI CU SENZOR

Plăcuța cu senzor este concepută pentru a detecta mișcările subtile ale bebelușului pe suprafața saltei. Alarma va suna numai dacă **NU** este detectată nicio mișcare timp de 20 de secunde.

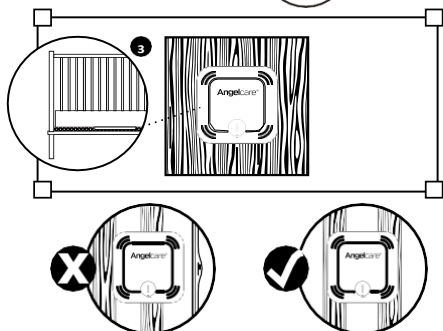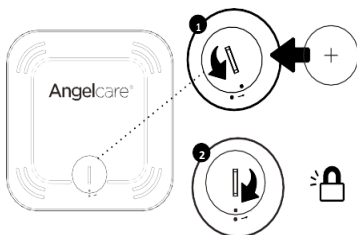

Amplasarea corectă a rătarului cu lamele

1. Îndepărtați capacul bateriei și introduceți bateria cu polul + în sus.
2. Înlocuiți capacul bateriei – aliniați cele 2 puncte și fixați-le.


3. Scoateți salteaua din pătuț. Așezați senzorul **cu logo-ul Angelcare® în sus** pe soclul patului, aproximativ în mijlocul saltei pe lateral. Dacă pătuțul necesită sprijinul unei scânduri solide, ar trebui să fie centrat pe această placă dură (vezi nota „IMPORTANT” mai jos).
4. Întoarceți salteaua în pătuț.

IMPORTANT

- Dacă pătuțul nu are o suprafață fermă, staționară, complet plană, rigidă care include un arc sau o bază cu șipci, așezați o placă solidă între baza pătuțului și suportul senzorului pentru a asigura funcționarea corectă. Placa plină trebuie să aibă dimensiunile de cel puțin 30 x 30 cm și o grosime de 6 mm. Această placă solidă trebuie să fie mai mare decât suprafața plăcuței senzorului.
- Padul cu senzor funcționează cu paturi standard cu arcuri și saltele din spumă, nu cu spumă cu memorie (parțial sau total), saltele cu cadru gol și paturi cu apă. Dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea saltelei, vă rugăm să consultați Angelcare. Placa dură menține presiunea constantă asupra suportului cu senzor, astfel încât suportul poate detecta mișcările bebelușului chiar și atunci când copilul se află pe marginea pătuțului.




3- CONFIGURARE UNITATE BEBE

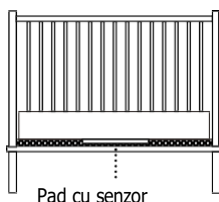


Pad cu senzor

Așezați unitatea pentru bebeluși și cablul adaptor la cel puțin **1 metru** de pătuț.

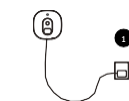

Montare pe perete (înălțime de montare la unitățile pentru copii ar trebui să fie mai mică de 2 metri.)



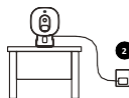


Blatul mesei

MONTARE PE PERETE




OBSERVAȚIE: Pentru cele mai bune rezultate, verificați ambele opțiuni de montare înainte de montarea pe perete.

Opțiunea 1 - vedere de aproape (1,0 până la 1,5 metri - de la perete la pătuț)

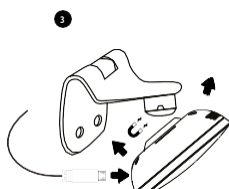
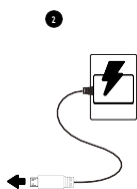
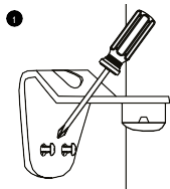


Nu trageți cablu prin orificiul suportului.

Opțiunea 2 - vedere de la distanță (1,5 metri și mai mult - de la perete la pătuț)

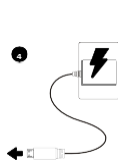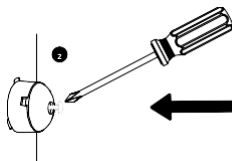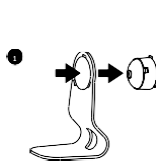


BLAT DE MESA

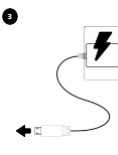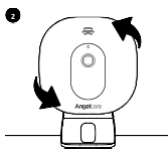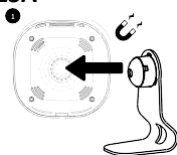

4- MONITOR PORNIT

Dacă copilul nu se află în pătut, senzorul de mișcare va declanșa o alarmă după câteva secunde.

UNITATEA COPIILOR

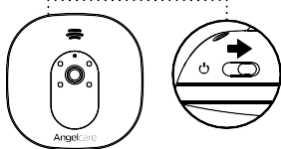

UNITATEA PARENTALĂ



Observație:

- Unitățile pentru copii și părinți sunt împerecheate în avans.
- De fiecare dată când unitatea pentru bebeluși este **pornită**, este necesar să calibrați termometrul intern pentru a asigura acuratețea acestuia. Acest proces automat durează aproximativ 30 de minute.

OPRIREA ȘI REPORNIREA PLĂCUȚEI CU SENZOR

- Vă permite să suspendați senzorul dacă scoateți copilul din pătut, de exemplu pentru hrănire sau liniștire. Butonul este ușor iluminat din spate pentru o vizibilitate ușoară. Nu uitați să porniți din nou senzorul înainte de a pune copilul în pătut.

UNITATEA PARENTALĂ



UNITATE




TESTAREA PLĂCUȚEI CU SENZOR

1. Pad-ul senzorului poate detecta surse de vibrații și mișcare, altele decât bebelușul dvs., afectând performanța monitorului dvs. Angelcare. Alarma nu va suna dacă detectează orice altă mișcare decât mișcarea copilului.
2. Există 4 setări de sensibilitate. Unitatea este setată la sensibilitate medie (implicit) și poate fi reglată în consecință.
3. Dacă atingeți pătutul, senzorul va detecta mișcări false.
4. Dacă nu este detectată nicio mișcare timp de 15 secunde, monitorul va emite un sunet de avertizare pentru a-i cere copilului să se miște. Dacă nu mai este detectată nicio mișcare, alarma principală va suna după 20 de secunde - un bip continuu.

TESTUL COLȚURILOR PENTRU PLĂCUȚA CU SENZOR

1. Așezați plăcuța cu senzor aproximativ în mijlocul zonei în care doarme copilul și readuceți salteaua în pătut.
2. Porniți atât unitatea pentru bebeluși, cât și unitatea pentru părinți - verificați dacă ambele unități sunt împerecheate (conectate).
3. Imediat **atingeți de două ori colțul saltelei** cu mâna, astfel încât senzorul să detecteze mișcarea. Dacă este detectată mișcare, veți auzi un ticăit la fiecare 5 secunde, iar RJ-ul va pălpâi în verde pentru un senzor.
4. Îndepărtează-te de pătut.
5. După 20 de secunde, va suna alarma unității copilului și a unității parentale. Dacă alarma **nu sună**, verificați dacă totul este setat corect și încercați din nou; verificați nivelul bateriei în toate unitățile, urmați instrucțiunile pentru „NICIO ALARMĂ” - setarea sensibilității poate fi necesar să fie redusă cu un nivel din cauza altor vibrații/mișcări.

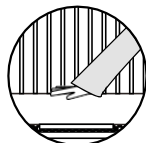

6. Dacă sună alarma, atingeți ușor de două ori și atingeți colțul saltelei cu mâna, astfel încât senzorul să detecteze mișcarea. Poate dura până la 8 secunde pentru a detecta mișcarea și a opri alarma.
7. Dacă alarma persistă chiar și cu o dublă atingere ușoară pe colțul saltelei, reglați sensibilitatea la una mai mare nivelată și repetați acest test.


! IMPORTANT

- Testați monitorul înainte de prima utilizare.
- Înainte de utilizare și în mod regulat (înainte de a așeza copilul în pătuț), verificați întotdeauna ca senzorul să nu detecteze mișcări sau vibrații din împrejurimi.
- Testați monitorul de fiecare dată când mutați senzorul într-o locație diferită.

5- FAMILIARIZAREA CU MONITORUL


UNITATEA COPIILOR

- 1 Difuzor
- 2 Microfon
- 3 Lentila camerei
- 4 Indicator de alimentare
- 5 Port micro USB
- 6 Placa senzorului de pauză / Buton de asociere
- 7 **PORNIT/OPRIT**
- 8 Magnet de masă și suport de perete

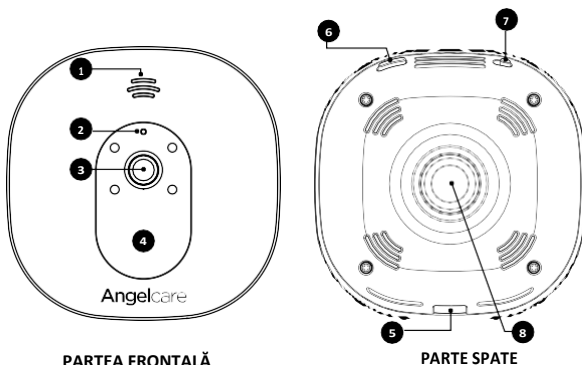


UNITATEA PARENTALĂ

- 1 PORNIT/OPRIT (apăsăți lung) / Modul de repaus (apăsare și eliberare rapidă)
- 2 Vorbire / Reveniți și salvați setările
- 3 Meniu / Selectare
- 4 Funcțiile zoom și pan / Navigare comutator de dezactivare a sunetului la stânga / unitatea bebelușului
- 5 Indicator de mișcare (funcție TIC)
- 6 Indicator de alimentare
- 7 Indicator vizual de sunet
- 8 Microfon
- 9 Creșterea volumului / Creșterea navigației
- 10 Reducerea volumului / Reducerea navigației
- 11 Dreapta de navigare / Modul de urmărire
- 12 Compartiment pentru baterii reîncărcabile
- 13 Port de încărcare micro USB
- 14 Difuzor
- 15 Stand pliabil

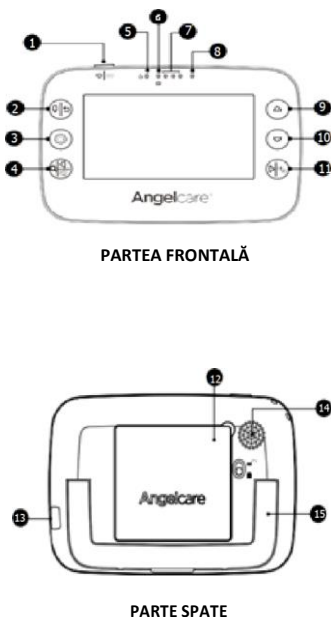


BARĂ DE STARE SUS

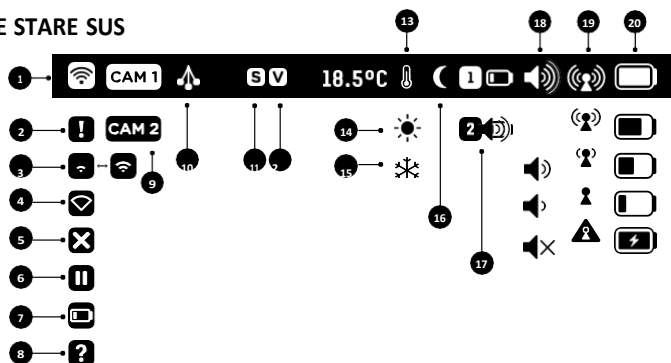

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Este activată detecția de mișcare a plăcuței cu senzor</p> <p>2 Alertă plăcuța cu senzor</p> <p>3 Conectare plăcuța cu senzor</p> <p>4 Conexiune cu senzorul pierdută</p> <p>5 Detectarea mișcării la plăcuța cu senzor este DEZACTIVATĂ</p> <p>6 Plăcuța cu senzor este suspendat</p> <p>7 Bateria plăcuței cu senzor este descărcată</p> | <p>8 Plăcuța cu senzor nu a fost încă împerecheată</p> <p>9 Unitatea bebelușului este selectată și emite sunet</p> <p>10 Funcția „TIC” este activată</p> <p>11 Audio VOX este activat</p> <p>12 Video VOX este activat</p> <p>13 Alarma de temperatură ridicată este activată</p> <p>14 Avertizare de temperatură: temperatură ridicată</p> | <p>15 Alertă de temperatură: temperatură scăzută</p> <p>16 Viziunea de noapte este activată</p> <p>17 Bateria celui de-al doilea senzor este descărcată - va fi afișată dacă aveți 2 senzori asociați</p> <p>18 Indicatori de nivel de volum</p> <p>19 Indicatori de calitate a recepției</p> <p>20 Indicatori de stare a bateriei unității parentale</p> |
|--|--|---|

OFERTA PRINCIPALĂ

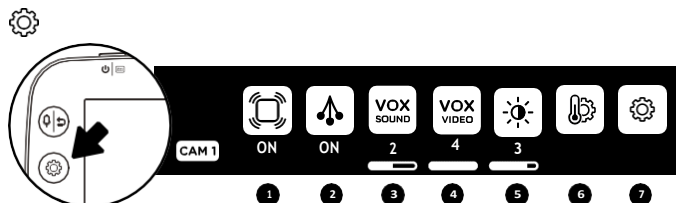

1 Activarea senzorului de mișcare:

PORNIT: Dacă nu este detectată nicio mișcare după 20 de secunde, unitatea parentală și a copilului emite o alarmă.

SUSPENDĂ: Vă permite să suspendați senzorul dacă scoateți copilul din pătut, de exemplu pentru hrănire sau liniștire.

• Pictograma pauză de pe bara de stare va pălpâi.

• Indicatorul de alimentare al unității pentru bebeluș va pălpâi lent.

Înainte de a pune copilul în pătut, nu uitați să porniți din nou senzorul (porniți detectarea mișcării).

OPRIT: Când copilul dumneavoastră este mai mare, detectarea mișcării poate fi dezactivată, iar monitorul poate fi folosit doar pentru monitorizare vizuală.

2 Activarea sunetului „TIC”:

Dacă este activată detectarea mișcării, poate fi activată semnalizarea sonoră (așa-numita bifare), când veți auzi

un sunet la fiecare 5 secunde. Dacă aveți doi senzori conectați, indicația va fi prin bifare verde pentru senzorul 1 și albastru pentru senzorul 2.

- 3 Setări de sunet VOX:** Sunetul VOX înseamnă că sunetul va fi emis numai atunci când este detectat, în funcție de setarea nivelului de sensibilitate (nivelul 4 este cel mai sensibil). Dacă nu este detectat niciun sunet, pentru a economisi energie, transmisia sunetului se oprește după 10 secunde.

Dezactivarea sunetului VOX înseamnă că sunetul este monitorizat continuu și toate sunetele sunt preluate.

- 4 Setări video VOX:** Video VOX înseamnă că atunci când unitatea pentru părinte se află în modul de repaus (ecran negru), ecranul se va aprinde numai când este detectat sunet, pe baza setării nivelului de sensibilitate (nivelul 4 este cel mai sensibil). Pentru a economisi energie, modul de repaus este activat după timpul setat. **Video VOX dezactivat** înseamnă că ecranul unității pentru părinte nu se va porni dacă unitatea pentru bebeluș detectează sunet.


- 5 Luminozitatea afișajului
- 6 Setări de temperatură
- 7 Setări generale



⚠ IMPORTANT


- Trebuie să apăsați întotdeauna butonul pentru a confirma setarea . O pictogramă de confirmare va apărea pe ecran. Setările au fost salvate  Setările nu au fost salvate 
- Dacă aveți 2 unități pentru bebeluși și 2 senzori asociați cu monitorul, puteți schimba configurarea unității pentru bebeluși numai cu video.
- Dacă pictograma caracteristică este gri (gri), înseamnă că nu o puteți utiliza sau edita.

MENIU SETARE TEMPERATURĂ

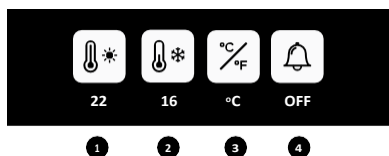


- 1 Setare alarmă de temperatură ridicată
- 2 Setare alarmă de temperatură scăzută
Observație: Intervalul dintre minim iar temperatura maximă trebuie să fie de cel puțin 4 °C.
- 3 Setarea afișajului unităților Celsius sau Fahrenheit
- 4 Activare alarmă de temperatură ridicată

MENIU SETĂRI GENERALE

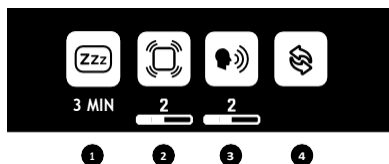

- 1 Setarea modului de repaus
- 2 Reglarea sensibilității senzorului:
Pentru a asigura o monitorizare adecvată a mișcărilor bebelușului, puteți regla sensibilitatea senzorului.
- 3 Reglarea volumului difuzorului unității pentru bebeluș
- 4 Meniu de asociere

MENIU ÎMPERECHERE

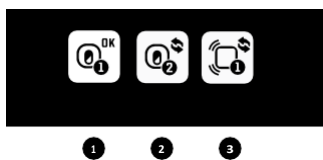

- 1 Starea unității pentru bebeluș 1
- 2 Starea unității pentru bebeluș 2
- 3 Starea senzorului 1

Pictograma de stare a unității pentru bebeluș și a senzorului:

OK Verde: Conectat/Pereche.

 **Albastru:** Adăugați o unitate pentru bebeluși sau un senzor.

 **Roșu:** Scoateți unitatea pentru bebeluși sau plăcuța cu senzor.

Procesul de confirmare PE ECRAN:

 **Albastru:** Pictograma animată „Link” în timpul împerecherii (timp împerechere expirat: 60 s).

 **Verde:** Împerechere reușită.

 **Roșu:** Asocierea nu a reușit, încercați din nou.

PICTOGRAME DE AVERTIZARE



- 1 Avertisment pentru senzor:**
Dacă mișcarea NU este detectată după 20 de secunde, atât difuzoarele unității pentru părinți, cât și cele pentru bebeluș vor emite un bip puternic - aceasta este o alarmă de mișcare.
- 2 Plăcuța cu senzor este suspendată**
- 3 S-a pierdut conexiunea cu senzorul :**
Difuzoarele unității parentale și unității bebelușului vor emite semnale sonore puternice consecutive.
- 4 Bateria plăcuței cu senzor este descărcată:**
Unitatea parentală emite semnal sonor de trei ori la fiecare 5 secunde.
- 5 Unitatea parentală este în afara intervalului:**
Unitatea parentală va emite un semnal sonor de două ori la fiecare 10 secunde.
- 6 Temperatura este prea scăzută:** Unitatea parentală emite un semnal sonor de trei ori la fiecare 5 secunde.
- 7 Temperatura este prea mare:** Unitatea parentală emite semnal sonor de trei ori la fiecare 5 secunde.

Observații: Apăsăți orice tastă **pentru a opri alarma** și a elimina pictograma alarmei.

În cazul unei **alarme la nivelul plăcuței cu senzor**, monitorul va suspenda plăcuța cu senzor.

În modul de repaus, funcția de detectare a mișcării este dezactivată. Pentru a reactiva senzorul, pur și simplu anulați pauza plăcuței cu senzor din primul meniu.

6- ADĂUGAȚI ACCESORII

Monitorul Angelcare vă permite să adăugați o unitate suplimentară pentru bebeluși și o plăcuță cu senzor. Consultați distribuitorul local pentru opțiunile din țara dvs.

IMPORTANT:

- Când utilizați două unități pentru bebeluși, puteți auzi doar sunetul de la o unitate pentru bebeluși (unitatea pentru bebeluși al cărei sunet este difuzat este evidențiată în bara de informații). Pe ecranul divizat, sunetul transmis în flux de la unitatea pentru bebeluș va fi afișat pe ecran cu o pictogramă difuzor în dreapta pictogramelor camerei.
- Când utilizați două plăcuțe cu senzor cu un singur monitor, se recomandă ca senzorii să fie plasați în încăperi separate.

7- REZOLVAREA PROBLEMELOR

ÎNCERCAREA BATERIILOR REÎNCĂRCABILE

- Înainte de a utiliza bateria pentru prima dată, încărcați-o complet timp de 8 ore.
- Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, se recomandă descărcarea completă a bateriei periodic. Dacă unitatea parentală nu este în uz, **opriți-o**.

FĂRĂ TRANSMISIE AUDIO

- Verificați nivelul volumului de pe unitatea parentală și unitatea pentru bebeluș pentru a vă asigura că sunt setate la nivelul corespunzător.
- Încercați să mutați unitatea parentală mai aproape de unitatea pentru bebeluș pentru a verifica dacă auziți un sunet.
- Încărcați unitatea parentală.

INTRARE SLABĂ

- Apropiați unitățile.
- Repoziționați una sau ambele unități.
- Așezați unitățile pe o suprafață plană, la îndemâna copilului.
- Încărcați unitatea parentală.

SUNETE DERANJANTE, DISTORSIUNI, INTERFERENȚE (DE LA ALTE MONITORE, TELEFONURI FĂRĂ FIR, RADIOURI ETC.)

- Rotiți sau mutați unitatea pentru părinte departe de sursa de interferență.

FEEDBACK (SUNETE PUTERNICE DE LA UNITATEA PARENTALĂ)

- Așezați unitățile la o distanță mai mare între ele (cel puțin 3 metri).
- Micșorați volumul unității parentale.

AFIȘAJUL UNITĂȚII PARENTALE ESTE NEGRU (UNITATEA PĂRINȚILOR ESTE OPRITĂ)

- Porniți unitatea parentală apăsând și menținând apăsat butonul **ON/OFF** timp de 2 secunde.
- Încărcați unitatea parentală.

PAD CU SENZOR - FĂRĂ ALARMĂ

- Padul cu senzor poate detecta surse de vibrații și mișcare, altele decât copilul dumneavoastră, ceea ce face ca alarma să nu sune.
- Consultați avertismentele de la 3 la 11 și vedeți PASUL 4, TESTAREA PLĂCUȚEI CU SENZOR .

PLĂCUȚĂ CU SENZOR - ALARMĂ FALSĂ

- Înlocuiți bateria CR2450 a plăcuței cu senzor.
- Opriți unitatea pentru copii.
- Alarmer false ale senzorului pot apărea din mai multe motive. Întotdeauna verificați copilul imediat ce sună alarma:
 - Unitatea pentru bebeluși nu a fost oprită atunci când bebelușul a fost scos din pătuț.
 - Verificați să nu existe lenjerie de pat între saltea și plăcuța cu senzor.
 - Plăcuța cu senzor nu a fost plasată corect sub saltea. Asigurați-vă că plăcuța cu senzor se află pe o suprafață plană și solidă, cu partea imprimată orientată în sus.
 - De asemenea, poate fi necesară ajustarea nivelului de sensibilitate.
- Consultați avertismentele de la 3 la 11 și vedeți PASUL 4, TESTAREA PLĂCUȚEI CU SENZOR .

FĂRĂ TRANSMISIE AUDIO:

- Verificați dacă ambele unități sunt pornite.
- Verificați dacă unitatea parentală nu este MUTE.

CUM SĂ VERIFICAȚI BATERIA DIN UNITATEA PARENTALĂ:

- Deconectați adaptorul de la unitatea parentală și verificați indicatorul de nivel al bateriei.

PIERDEREA CONEXIUNII ÎNTRE UNITATEA PARENTALĂ ȘI CEA PENTRU COPIL

- Dacă unitatea pentru copil nu se împerechează cu unitatea parentală, efectuați din nou împerecherea urmând pașii de mai jos.

1. Porniți unitatea parentală și opriți unitatea pentru copil.

2. Apăsăți butonul de meniu. 

3. Accesați direct meniul de setări generale. Selectați pictograma de asociere  și apăsați butonul de meniu.

4. În meniul de asociere, selectați unitatea copilului 1 și apăsați butonul de meniu. 



- Dacă unitatea pentru copil 1 este marcată ca fiind conectată, selectați-o și accesați opțiunea de asociere pentru copil unitățile 1. Acum eliminați-l selectând pictograma roșie.  Pictograma linkului va apărea pe ecran până când apare pictograma  pereche realizată. Acum puteți trece la pasul 4.

5. Va apărea pe ecran  pictograma conexiune.

6. Porniți unitatea pentru copii și apăsați și mențineți apăsat butonul **pauză/pereche** până când ledul de alimentare începe să pâlpâie.

7. Dacă se realizează conexiunea, pe ecran va apărea o pictogramă verde de asociere reușită, iar în meniu va apărea o pictogramă de asociere reușită. 

8. În caz contrar, va fi afișată pe ecran  pictograma roșie de asociere eșuată. Încearcă din nou.

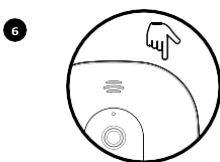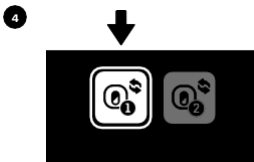

PIERDEREA CONEXIUNII ÎNTRE PLĂCUȚA CU SENZOR ȘI UNITATEA PENTRU COPII

- Dacă senzorul se deconectează de la unitatea parentală, efectuați din nou împerecherea urmând pașii de mai jos. Pentru a reconecta senzorul la unitatea pentru copil, asigurați-vă mai întâi că unitatea pentru copil este asociată cu unitatea parentală.

1. Scoateți bateria din plăcuța cu senzor.

Observații: Dacă aveți două plăcuțe cu senzor, va trebui mai întâi să scoateți bateria din ambele și apoi să urmați instrucțiunile de mai jos.

2. Apăsăți butonul de meniu. 

3. Selectați meniul de setări generale  și apăsați butonul de meniu. 




4. Selectați pictograma de asociere  și apăsați butonul de meniu. 

5. În meniul de asociere, selectați pictograma plăcuței cu senzor 1  și apăsați butonul de meniu. 

- Dacă plăcuța cu senzor este marcată ca fiind conectată,  selectați-o și accesați opțiunea de asociere a senzorilor. Acum eliminați-o selectând pictograma roșie.  Pictograma linkului va apărea pe ecran până când apare pictograma  pereche realizată. Acum puteți trece la pasul 5.

6. Introduceți bateria în plăcuța cu senzor. Este activată automat.

7. Dacă se realizează conexiunea, pe ecran va apărea o pictogramă verde de asociere reușită, iar în meniu va apărea o pictogramă de asociere reușită. 

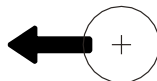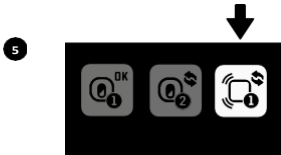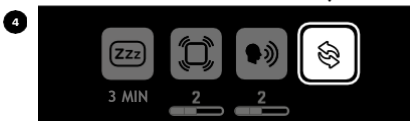

8. În caz contrar, va fi afișată pe ecran  pictograma roșie de asociere eșuată. Vă rugăm să încercați din nou.

⋮

ASISTENȚĂ CLIEŢI - GARANȚIE LIMITATĂ

Angelcare® garantează proprietarului inițial al acestui produs că monitorul Angelcare® nu va avea defecte de material sau de fabricație în timpul perioadei de garanție (consultați tabelul de garanție de mai jos pentru condițiile de garanție pentru țara dumneavoastră). Dacă acest sistem de monitorizare nu funcționează corespunzător, în ciuda faptului că este utilizat conform instrucțiunilor, în condiții normale și în perioada de garanție, Angelcare® va dispune la alegere

dacă va repara sau va înlocui gratuit produsul. Confirmarea garanției și a perioadei de garanție poate fi obținută de la distribuitorul local.

Produsul trebuie să fie însoțit de dovada achiziției, fie o factură, fie un alt document care să ateste că sistemul de monitorizare este în perioada de garanție. Angelcare® acoperă costurile pentru repararea sau înlocuirea produsului și expedierea acestuia înapoi la dumneavoastră.

Această garanție nu se aplică unui produs care a fost deteriorat din cauza întreținerii necorespunzătoare, accident, surse de alimentare necorespunzătoare sau alte utilizări necorespunzătoare. De asemenea, se anulează garanția în cazul în care proprietarul repară sau modifică produsul în vreun fel. Angelcare® nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune accidentale sau indirecte legate de acest produs. De asemenea, garanția exclude orice altă răspundere, cu excepția celor menționate mai sus. Nu se oferă altă garanție.

Această garanție nu acoperă produsele și accesoriile non-Angelcare® sau problemele apărute din utilizarea neconformă cu instrucțiunile produsului, nerespectarea instrucțiunilor produsului sau probleme cauzate de utilizarea accesoriilor, pieselor sau componentelor care nu sunt furnizate de Angelcare.

DREPTURILE LEGALE DIFERĂ ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ. UNELE ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, DECI LIMITĂRILE DE MAI SUSPOT SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS.

NU SUNTEM RESPONSABIL ÎN NICIUN FEL PENTRU NICIO CONSECINȚĂ DERIVĂ DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS.

IMPORTANT! Acest monitor Angelcare® este un produs de îngrijire personală. Vă rugăm să nu returnați acest produs la magazin.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați distribuitorul înainte de a returna acest produs.

Pentru informații privind garanția vă rugăm să contactați distribuitorul local. Puteți găsi distribuitorul local pe site-ul nostru:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Condiții de garanție în funcție de țară	
America de Nord, Regatul Unit, Africa de Sud, Rusia	1 an
Alte țări	2 ani

DATE TEHNICE

Gamă:

Spațiu deschis (spațiu deschis fără obstacole):

- Între unitățile pentru copil și cele pentru părinți: până la 250 de metri.
- Între unitatea pentru copii și plăcuța cu senzor: până la 20 de metri.

Număr de canale:

Europa: 19 canale.

Instrucțiuni pentru termometru:

Alarma de temperatură ridicată:

22 °C

Alarmă de temperatură scăzută:

16 °C.



Alimentare cu energie:

1 o baterie Li-Ion (IS275) 1300mAh 3.7V (fabricată de Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd) pentru unitatea de bază.

2 x 100-240 V AC / 5 V DC 0,6 A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd (EU: K05S050060G, UK: K05S050060B, AU: S05S050060A) Adaptoare pentru unitatea parentală și unitatea copilului.

1 baterie CR2450 3V (Changzhou Jin Tan Chao Chuang

Battery Co., Ltd. numărul modelului.: CR2450H) (fără fir plăcuța cu senzor).

Atenție: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.

Există riscul de explozie dacă bateria este introdusă incorect. Bateria din unitatea parentală este o baterie reincărcabilă litiu-ion care poate fi înlocuită de utilizator. Utilizați numai bateria de schimb recomandată de Angelcare. Bateria din senzor este o baterie cu litiu (nu Li-Ion) care poate fi înlocuită de utilizator și NU este reincărcabilă. Pentru informații despre bateriile de schimb, contactați serviciul pentru clienți Angelcare: www.angelcarebaby.com sau contactați reprezentantul local. Instrucțiunile vor fi incluse împreună cu bateria de schimb. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Conformitatea cu ErP

UTILIZAȚI NUMAI URMĂTOARELE NUMERE DE MODELE DE SURSE DE ALIMENTARE MARCA ANGELCARE®:
UE (INCLUS GERMANIA) - NUMĂR DE MODEL:
K05S050060G
MAREA BRITANIE - NUMĂR DE MODEL: K05S050060B

Baterie:

ATENȚIE: EXISTĂ RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE INTRODUSĂ INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

Transmisie:

Transmisia dintre unitatea parentală și unitatea pentru copil are loc la o frecvență de 2,4 GHz.

Transmisia dintre unitatea bebelușului și plăcuța cu senzor are loc la o frecvență de 2,4 GHz.

Angelcare Canada Inc. prin prezenta declară că acest monitor pentru copii respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Expunerea la energie RF - Acest echipament este proiectat și fabricat pentru a respecta limitele de expunere

la radiații de radiofrecvență (RF) stabilite pentru UE pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu prevederile, distanța dintre o persoană și unitatea pentru copil nu trebuie să fie mai mică de 20 cm în timpul funcționării normale.

PROTECTIA MEDIULUI

Simbolurile pubelă indică faptul că legile și reglementările locale impun ca produsul sau bateria produsului să fie aruncate separat de deșeurile menajere. Când produsul/bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață, duceți-l la punctul de colectare desemnat de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea specială vor contribui la protejarea resurselor naturale și a sănătății umane și mediului înconjurător. Pentru a scoate bateria, vă rugăm să consultați acest manual.

Marcele de conformitate specifice acestui dispozitiv pot fi găsite pe produs.



Informații de contact

IMPORTANT! Acest monitor Angelcare® este un produs de îngrijire personală. Vă rugăm să nu returnați acest produs la magazin. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați distribuitorul înainte de a returna acest produs.

La Angelcare®, garantăm pentru toate produsele noastre. Dacă nu sunteți complet mulțumit de produs sau aveți întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul înainte de a returna acest produs:

Statele Unite și Canada: Contactați-ne la: info@angelcarebaby.com

Alte țări: Puteți găsi distribuitorul dvs. local pe site-ul nostru:

angelcarebaby.com/distributeurs

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informații, urmăriți configurarea și alte videoclipuri cu caracteristici pe site-ul nostru.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Canada Inc.

2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal, Quebec, Canada, H3A 3H3