

AngelSounds JPD-200S



Představení produktu


AngelSounds JPD-200S je lehký a přenosný detektor pro poslech srdečních ozev plodu dítěte.

Pozn. Pro správnou funkčnost musí mít plod alespoň 20 týdnů. Užívání přístroje konzultujte s lékařem.

Obsah balení

AngelSounds JPD-200S, jack-jack kabel, sluchátka, baterie, manuál

Základy používání

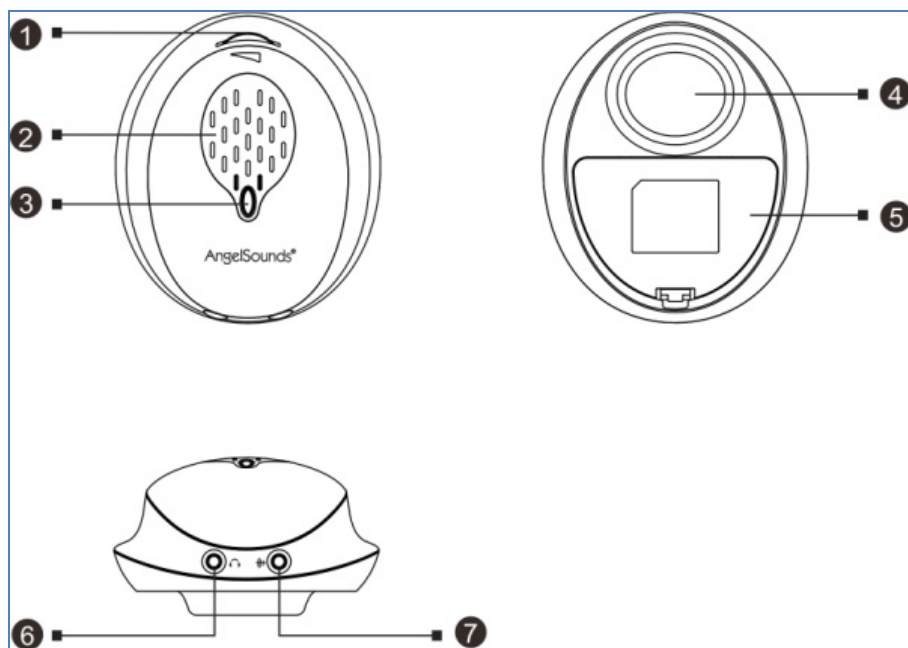

1 – Zapnutí/vypnutí; úprava hlasitosti

2 – Hlasitý reproduktor

3 – Indikátor stavu


4 – Přenos signálu

5 – Kryt baterie

6 – Připojení pro sluchátka


7 – Připojení pro nahrávací kabel

Zařízení zapnete otočením kolečka (1), zapnutí je indikováno rozsvícením diody. Postupným otáčením kolečka se přidává hlasitost, otočením na opačnou stranu se zvuk postupně snižuje až po úplné vypnutí zařízení. Srdeční ozvy můžete poslouchat buď z hlasitého reproduktoru, nebo po připojení sluchátek do příslušného konektoru (6). Zvuk je možné také nahrávat. Kabelem propojte zařízení a mobilní telefon a spusťte nahrávání zvuku.

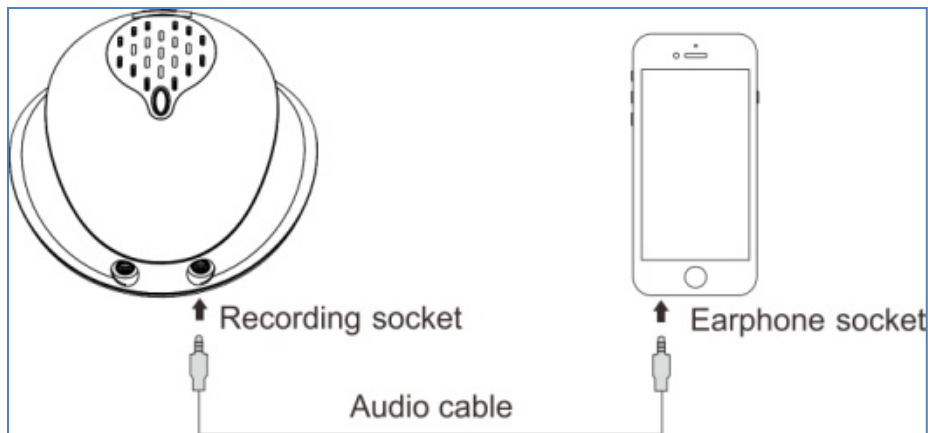

Baterie

Baterie je součástí balení. Je umístěna přímo v zařízení, ale není připojena. Před prvním použitím je nutné baterii připojit podle následujícího obrázku. Sejměte kryt (5) a baterii připojte.

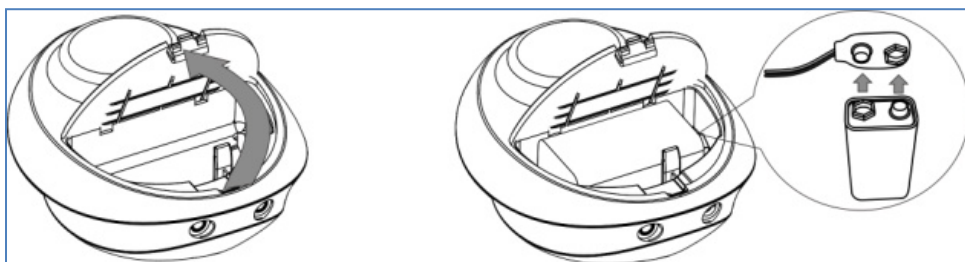


Stavy indikátoru

Stav indikátoru	Operační stav
Svíí zeleně	Zařízení je zapnuté
Bliká zeleně	Zařízení je zapnuté a zachycuje zvuk plodu
Bliká oranžově	Zařízení potřebuje dobít

Postup nalezení srdce plodu

Naneste na sondu (4) trochu gelu a umístěte ji na břicho. Pomalu s ní pohybujte a snažte se nalézt srdce plodu. Po nalezení zvuku se sondou nadále pomalu pohybujte a hledejte místo, kde bude zvukový signál nejčistší. Obvyklou polohu plodu vidíte na následujícím obrázku. Poloha plodu se ale může lišit v závislosti na stupni těhotenství a dalších podmínkách.

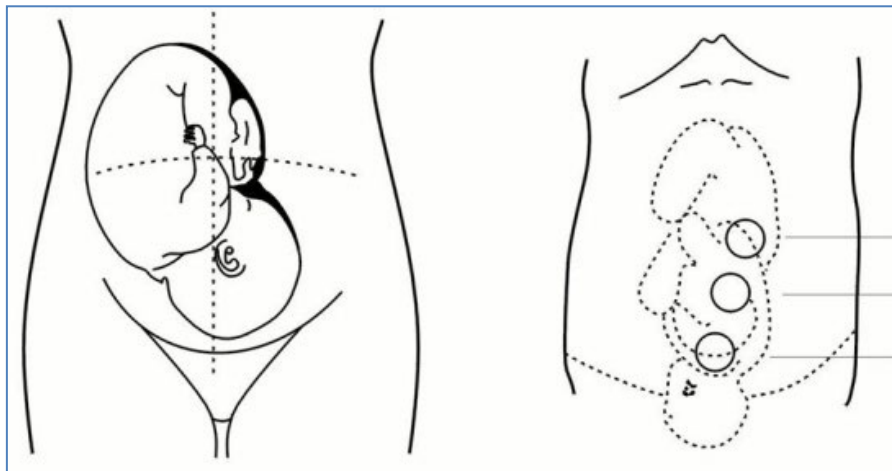

Bezpečnostní upozornění

Vyhňte se používání zařízení v prostředí s potencionálním rizikem výbuchu, prostředí s vysokou či velmi nízkou teplotou nebo vlhkostí, v blízkosti otevřeného ohně. Doporučujeme zařízení nepoužívat ve venkovním prostředí. Po ukončení sledování ze zařízení vždy setřete gel. Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození! Pokud zařízení čistíte, mějte jej vždy vypnuté.

Technické specifikace

Rozměry: 100 mm × 85 mm × 50 mm; 0,15 kg

Akustická frekvence: 3.0MHz±5%

Efektivní oblast zaznamenávání: 7.4 cm²

Doba provozu: 4-6 hodin

Baterie: 9V

Voděodolnost: IP22

Podmínky použití: 5-40 °C

Product Introduction


AngelSounds JPD-200S is a lightweight and portable detector for listening to the heartbeats of a child's fetus.

Note: For proper functioning, the fetus must be at least 20 weeks old. Consult your doctor about the use of the device.

Package Contents

AngelSounds JPD-200S, jack-jack cable, headphones, battery, manual

Basics of use

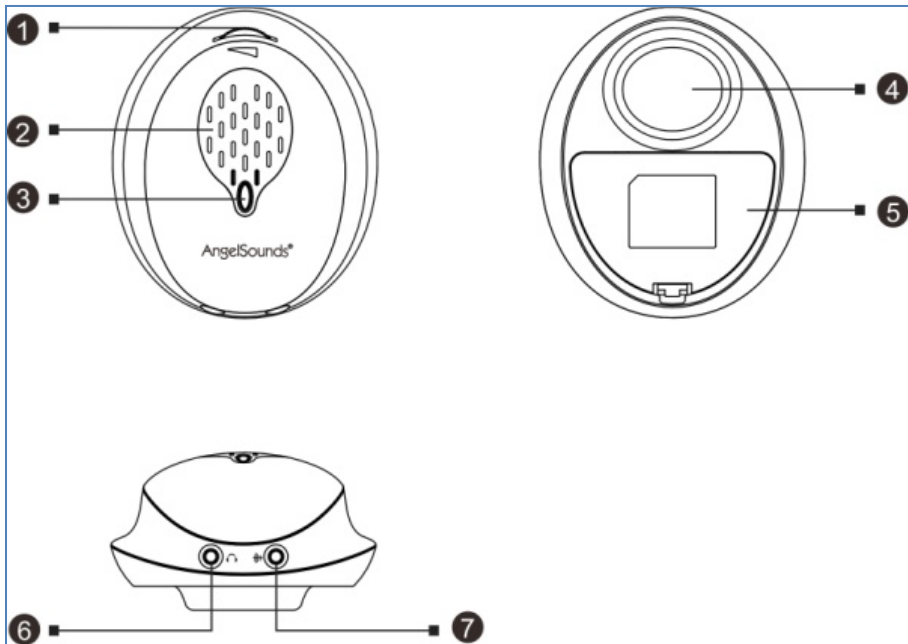

1 - Power on/off; Volume Adjustment

2 - Loudspeaker

3 - Status indicator

4 - Signal transmission

5 - Battery cover

6 - Headphone connection


7 - Connection for recording cable

Turn on the device by turning the wheel (1), the LED lights up to turn it on.

Gradually turning the wheel adds volume, turning to the opposite side gradually reduces the sound until the device is completely turned off.


You can listen to heart sounds either from a loud speaker or by connecting headphones to the appropriate jack (6).

Audio can also be recorded. Connect your device and mobile phone with a cable and start audio recording.

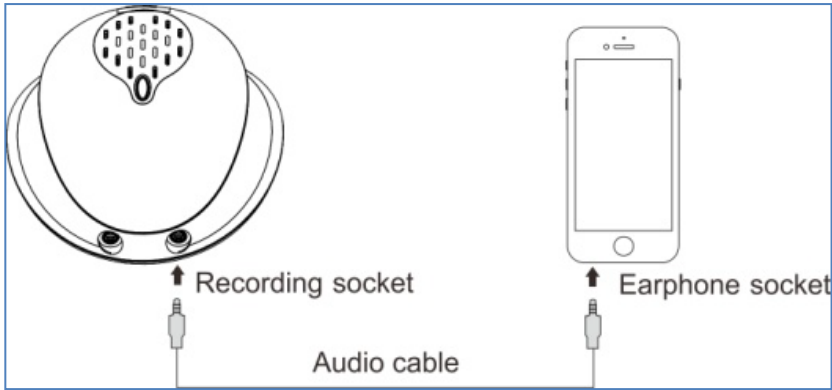

Battery

Battery included. It is located directly on the device, but is not connected. Before first use, the battery must be connected as shown in the following picture. Remove the cover (5) and connect the battery.

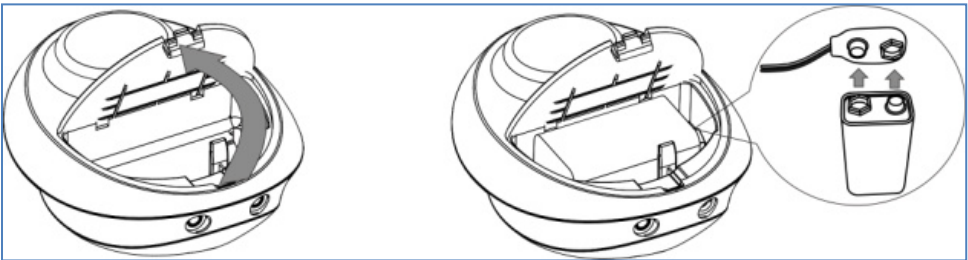


Indicator statuses

Indicator status	Operational status
Lights up green	The device is turned on
Flashing green	The device is turned on and captures the sound of the fetus
Flashing orange	Device needs to be recharged

How to find the heart of the fetus

Apply a little gel to the probe (4) and place it on your stomach. Move it slowly, trying to find the heart of the fetus. After finding the sound, continue to move the probe slowly, looking for the place where the sound signal will be clearest. The usual position of the fetus can be seen in the following picture. However, the position of the fetus may vary depending on the stage of pregnancy and other conditions.

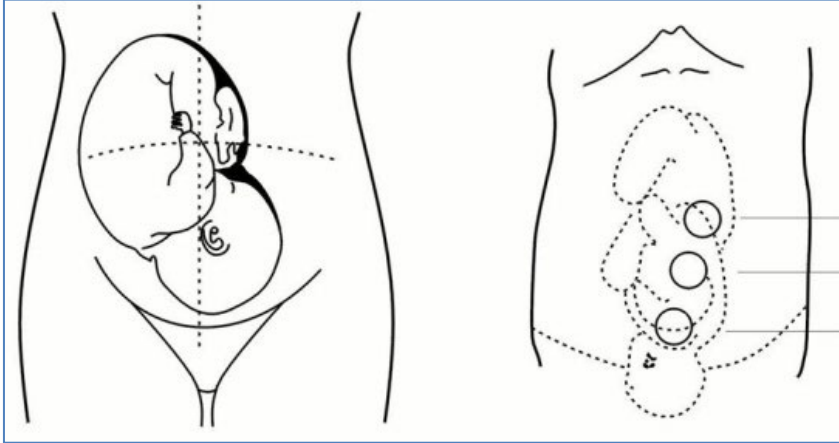

Safety Warnings

Avoid using the device in an environment with a potential risk of explosion, high or very low temperature or humidity, near an open flame. We recommend that you do not use the device outdoors.

Always wipe off the gel from the device after monitoring.

Do not use the device if it shows signs of damage!

If you're cleaning your device, always keep it turned off.

Specifications

Dimensions: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0.15 kg

Acoustic frequency: 3.0MHz±5%

Effective recording area: 7.4 cm²

Good operation: 4-6 hours

Battery: 9V

Water resistance: IP22

Terms of use: 5-40 °C

Predstavenie produktu


AngelSounds JPD-200S je ľahký a prenosný detektor na počúvanie srdcového rytmu plodu dieťaťa.

Poznámka: Pre správne fungovanie musí byť plod najmenej 20 týždňov starý. O používaní prístroja sa poraďte so svojím lekárom.

Obsah balenia

AngelSounds JPD-200S, jack-jack kábel, slúchadlá, batéria, manuál

Základy používania

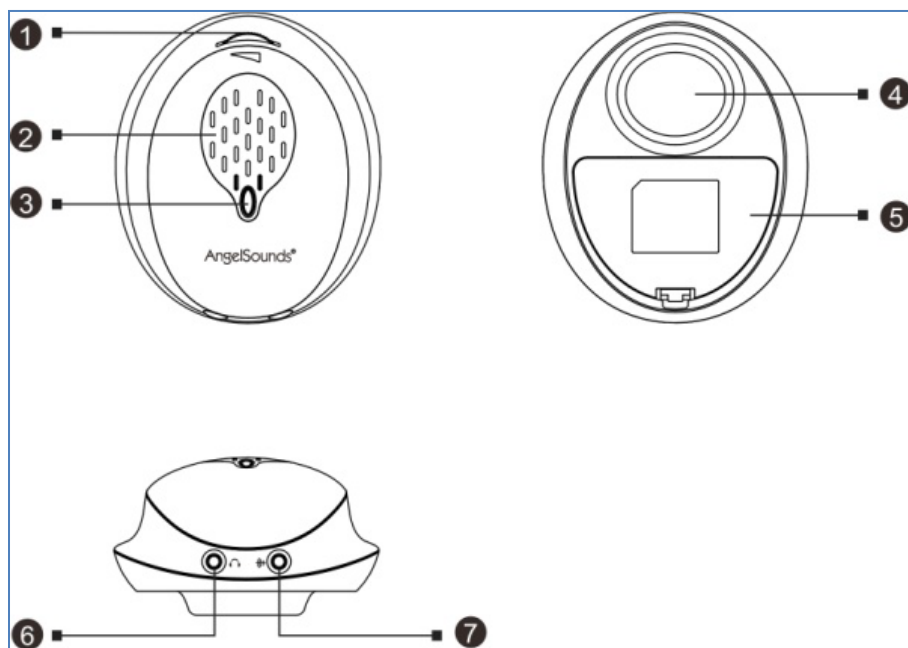

1 - Zapnutie / vypnutie; Nastavenie hlasitosti 2 - reproduktor


3 - Indikátor stavu

4 - Prenos signálu 5 - Kryt batérie 6 - Pripojenie slúchadiel 7 - Pripojenie pre nahrávací kábel

Zapnite zariadenie otočením kolieska (1), LED dióda sa rozsvieti, aby sa rozsvietilo. Postupné otáčanie kolieska dodáva hlasitosť, otáčanie na opačnú stranu postupne znižuje zvuk, až kým sa zariadenie úplne nevypne.

Zvuky srdca môžete počúvať buď z hlasného reproduktora, alebo pripojením slúchadiel k príslušnému konektoru (6).

Zvuk je možné aj nahrávať. Prepojte zariadenie a mobilný telefón pomocou kábla a spustíte nahrávanie zvuku.

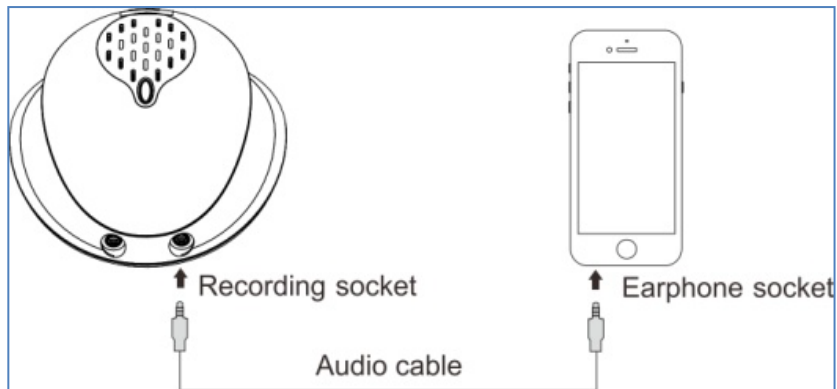

Batéria

Batéria je súčasťou balenia. Nachádza sa priamo na zariadení, ale nie je pripojený. Pred prvým použitím musí byť batéria pripojená, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Odstráňte kryt (5) a pripojte batériu.




Stavy indikátorov

Stav ukazovateľa	Prevádzkový stav
Svieti na zeleno	Zariadenie je zapnuté
Blikajúca zelená	Zariadenie je zapnuté a zachytáva zvuk plodu
Blikajúca oranžová	Zariadenie je potrebné dobiť

Ako nájsť srdce plodu

Naneste trochu gélu na sondu (4) a položte ju na žalúdok. Pomaly ho pohybujte a snažte sa nájsť srdce plodu. Po nájdení zvuku pokračujte v pomalom pohybe sondy a hľadajte miesto, kde bude zvukový signál najjasnejší. Zvyčajná poloha plodu je viditeľná na nasledujúcom obrázku. Poloha plodu sa však môže líšiť v závislosti od štádia tehotenstva a iných podmienok.

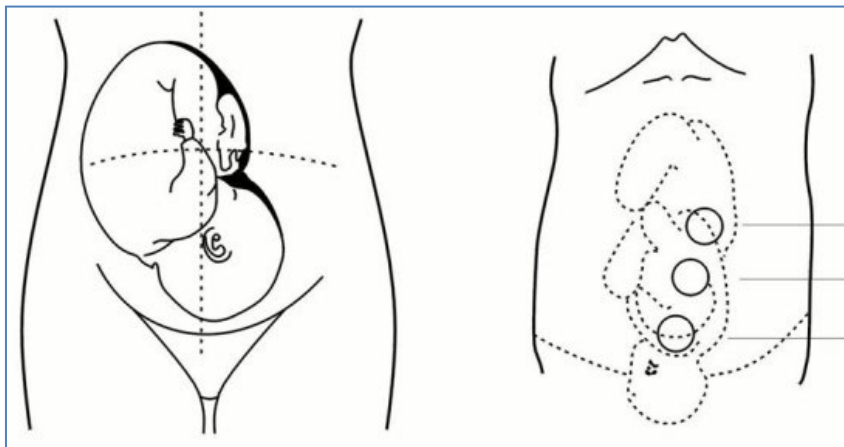

Bezpečnostné upozornenia

Nepoužívajte zariadenie v prostredí s potenciálnym rizikom výbuchu, vysokej alebo veľmi nízkej teploty alebo vlhkosti, v blízkosti otvoreného ohňa.

Odporúčame, aby ste zariadenie nepoužívali vonku.

Po monitorovaní vždy utrite gél zo zariadenia.

Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje známky poškodenia!

Ak čistíte zariadenie, vždy ho nechajte vypnuté.

Špecifikácie

Rozmery: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustická frekvencia: 3.0MHz±5%

Efektívna záznamová plocha: 7,4 cm²

Dobrá prevádzka: 4-6 hodín

Batéria: 9V

Odolnosť voči vode: IP22

Podmienky používania: 5-40 °C

Produkteinführung


AngelSounds JPD-200S ist ein leichter und tragbarer Detektor zum Abhören des Herzschlags des kindlichen Fötus.

Hinweis: Damit der Fötus richtig funktioniert, muss er mindestens 20 Wochen alt sein. Fragen Sie Ihren Arzt über die Verwendung des Geräts.

Packungsinhalt

AngelSounds JPD-200S, Klinken-Klinken-Kabel, Kopfhörer, Batterie, Bedienungsanleitung

Grundlagen der Anwendung

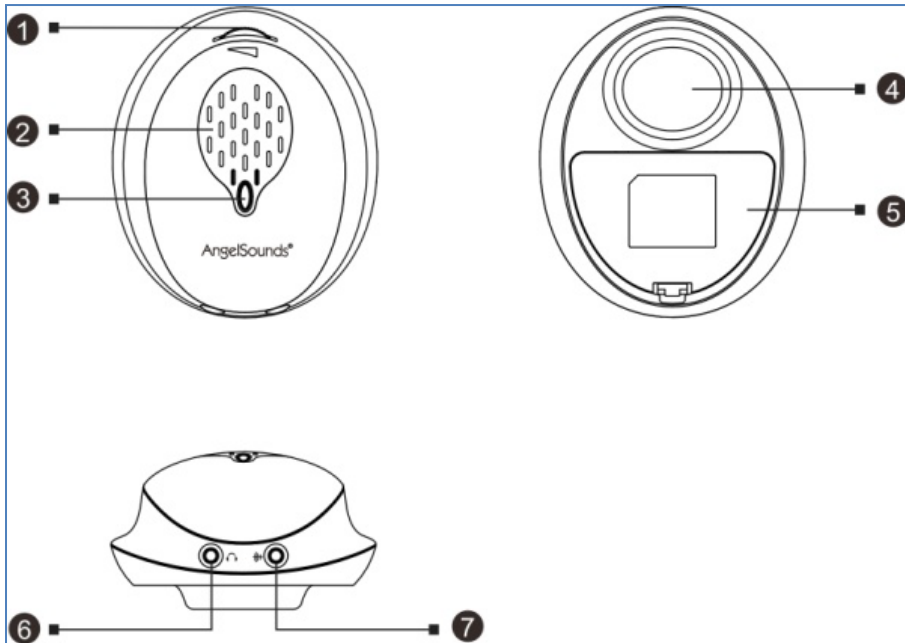

1 - Ein-/Ausschalten; Lautstärkeregelung 2 - Lautsprecher


3 - Statusanzeige

4 - Signalübertragung 5 - Batteriedeckel 6 - Kopfhöreranschluss 7 - Anschluss für Aufnahmekabel

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Rad (1) drehen, die LED leuchtet auf, um es einzuschalten. Durch allmähliches Drehen des Rades wird die Lautstärke

erhöht, durch Drehen auf die gegenüberliegende Seite wird der Ton allmählich reduziert, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.

Sie können Herztöne entweder über einen Lautsprecher oder durch Anschließen von Kopfhörern an die entsprechende Buchse (6) hören. Audio kann auch aufgezeichnet werden. Verbinden Sie Ihr Gerät und Ihr Mobiltelefon mit einem Kabel und starten Sie die Audioaufnahme.

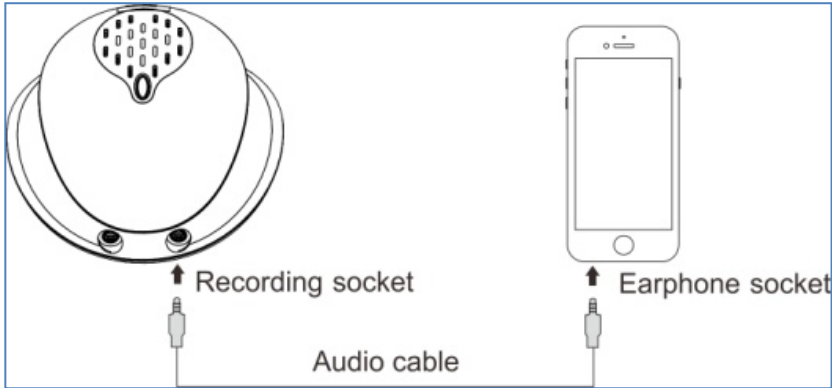

Batterie

Batterie im Lieferumfang enthalten. Er befindet sich direkt am Gerät, ist aber nicht verbunden. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku wie im folgenden Bild gezeigt angeschlossen werden. Entfernen Sie die Abdeckung (5) und




schließen Sie die Batterie an.

Status des Indikators

Status des Indikators	Operativer Status
Leuchtet grün	Das Gerät ist eingeschaltet
Grün blinkend	Das Gerät ist eingeschaltet und nimmt das Geräusch des Fötus auf
Blinkt orange	Gerät muss aufgeladen werden

Wie man das Herz des Fötus findet

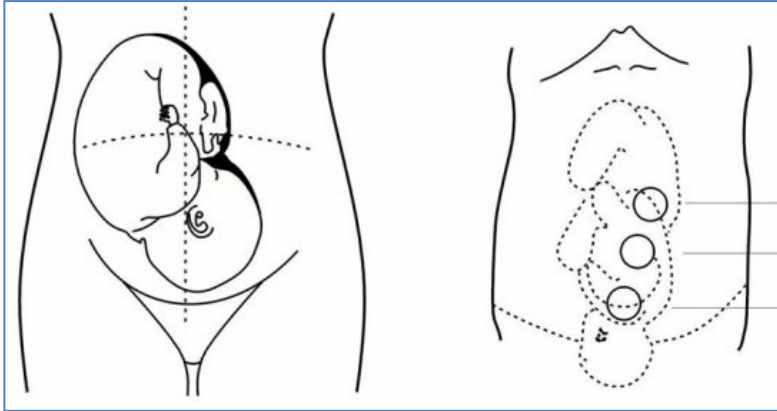

Tragen Sie ein wenig Gel auf die Sonde (4) auf und legen Sie sie auf Ihren Bauch. Bewegen Sie es langsam und versuchen Sie, das Herz des Fötus zu finden. Nachdem Sie den

Ton gefunden haben, bewegen Sie die Sonde langsam weiter und suchen Sie nach der Stelle, an der das Tonsignal am klarsten ist.

Die übliche Position des Fötus ist auf dem folgenden Bild zu sehen. Die Position des Fötus kann jedoch je nach Schwangerschaftsstadium und anderen Bedingungen variieren.

Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie es, das Gerät in einer Umgebung mit potenzieller Explosionsgefahr, hoher oder sehr niedriger Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in der Nähe einer offenen Flamme zu verwenden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht im Freien zu verwenden.

Wischen Sie das Gel nach der Überwachung immer vom Gerät ab.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist!

Wenn Sie Ihr Gerät reinigen, lassen Sie es immer ausgeschaltet.

Leistungsbeschreibung

Abmessungen: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0.15 kg

Akustische Frequenz: 3,0 MHz±5%

Effektiver Aufnahmebereich: 7,4 cm²

Gute Bedienung: 4-6 Stunden

Batterie: 9V

Wasserdichtigkeit: IP22

Nutzungsdauer: 5-40 °C

Présentation du produit


AngelSounds JPD-200S est un détecteur léger et portable pour écouter les battements de cœur du fœtus d'un enfant.

Remarque: Pour un bon fonctionnement, le fœtus doit être âgé d'au moins 20 semaines. Consultez votre médecin au sujet de l'utilisation de l'appareil.

Contenu de l'emballage

AngelSounds JPD-200S, câble jack-jack, écouteurs, batterie, manuel

Bases de l'utilisation

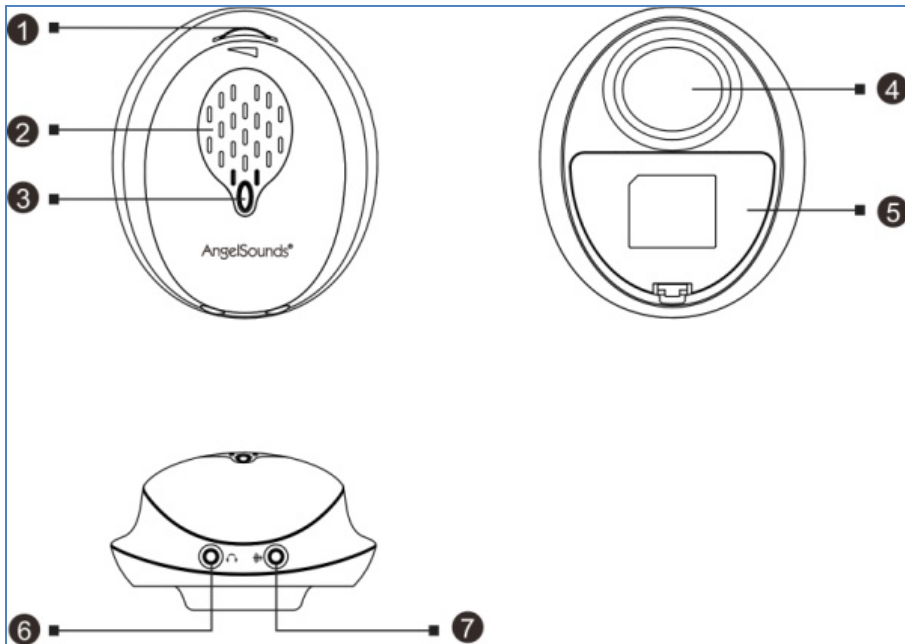


- 1 - Mise sous / hors tension; Réglage du volume
- 2 - Haut-parleur
- 3 - Indicateur d'état
- 4 - Transmission du signal
- 5 - Couvercle de la batterie
- 6 - Connexion casque
- 7 - Connexion pour câble d'enregistrement

Allumez l'appareil en tournant la roue (1), la LED s'allume pour l'allumer.

Tourner progressivement la roue ajoute du volume, tourner du côté opposé réduit progressivement le son jusqu'à ce que l'appareil soit complètement éteint.


Vous pouvez écouter les sons du cœur à partir d'un haut-parleur ou en connectant des écouteurs à la prise appropriée (6).

L'audio peut également être enregistré. Connectez votre appareil et votre téléphone mobile avec un câble et démarrez l'enregistrement audio.

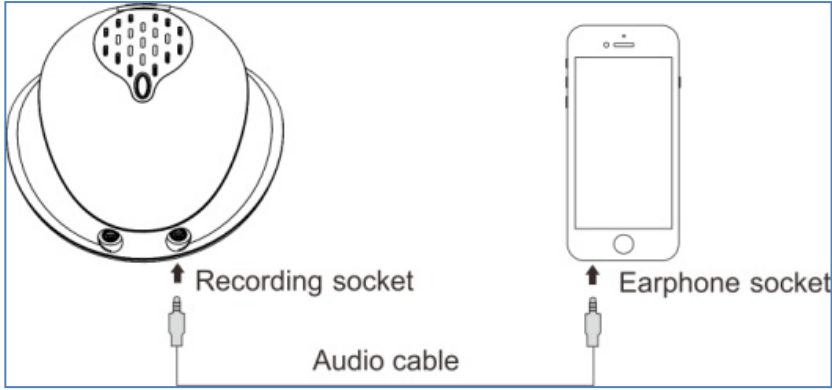

Pile

Batterie incluse. Il est situé directement sur l'appareil, mais n'est pas connecté. Avant la première utilisation, la batterie doit être connectée comme indiqué dans l'image suivante. Retirez le couvercle (5) et connectez la batterie.

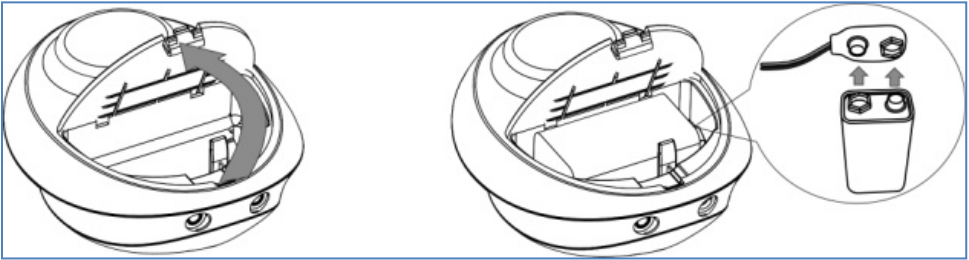

Statuts des indicateurs

État de l'indicateur	État opérationnel
S'allume en vert	L'appareil est allumé
Vert clignotant	L'appareil est allumé et capte le son du fœtus
Orange clignotant	L'appareil doit être rechargé


Comment trouver le cœur du fœtus

Appliquez un peu de gel sur la sonde (4) et placez-la sur votre ventre.

Déplacez-le lentement, en essayant de trouver le cœur du fœtus. Après avoir

trouvé le son, continuez à déplacer la sonde lentement, à la recherche de l'endroit où le signal sonore sera le plus clair.

La position habituelle du fœtus peut être vue sur l'image suivante. Cependant, la position du fœtus peut varier en fonction du stade de la grossesse et d'autres conditions.

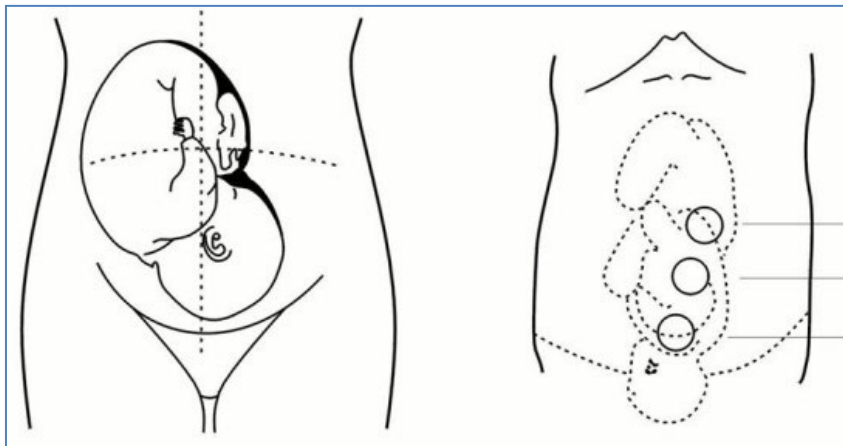

Avertissements de sécurité

Évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement présentant un risque potentiel d'explosion, de température ou d'humidité élevée ou très basse, près d'une flamme nue. Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Essuyez toujours le gel de l'appareil après la surveillance.

N'utilisez pas l'appareil s'il montre des signes de dommages!

Si vous nettoyez votre appareil, gardez-le toujours éteint.

Spécifications

Dimensions : 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Fréquence acoustique: 3.0MHz±5%

Surface d'enregistrement effective : 7,4 cm²

Bon fonctionnement: 4-6 heures

Batterie: 9V

Résistance à l'eau: IP22

Conditions d'utilisation: 5-40 °C

Introduzione al prodotto


AngelSounds JPD-200S è un rilevatore leggero e portatile per ascoltare i battiti cardiaci del feto di un bambino.

Nota: per un corretto funzionamento, il feto deve avere almeno 20 settimane. Consultare il proprio medico circa l'uso del dispositivo.

Contenuto della confezione

AngelSounds JPD-200S, cavo jack-jack, cuffie, batteria, manuale

Nozioni di base sull'utilizzo

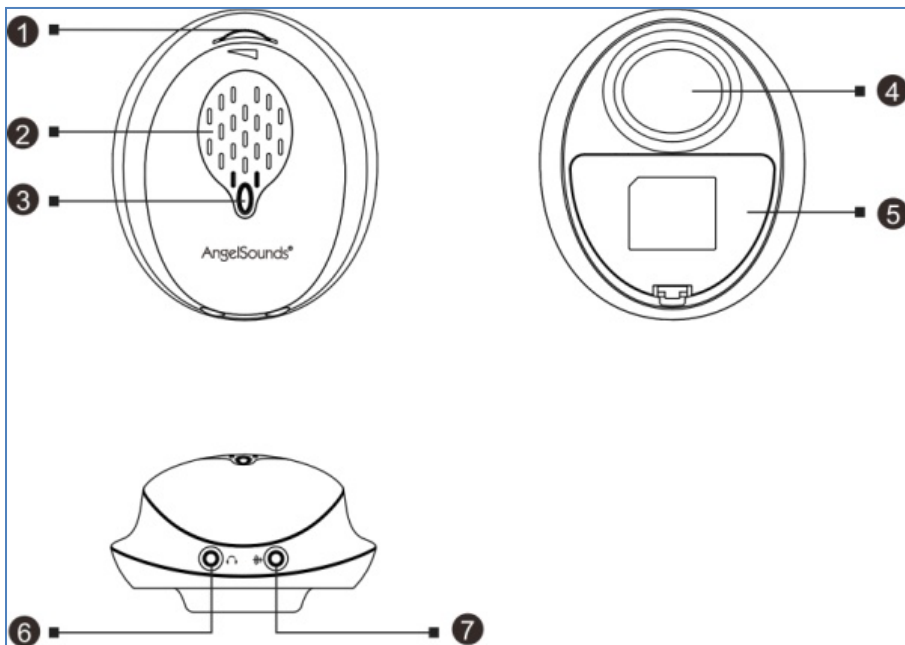


- 1 - Accensione/spengimento; Regolazione volume
- 2 - Altoparlante
- 3 - Indicatore di stato
- 4 - Trasmissione del segnale
- 5 - Coperchio batteria
- 6 - Connessione cuffie
- 7 - Connessione per cavo di registrazione

Accendere il dispositivo ruotando la rotella (1), il LED si accende per accenderlo. Ruotando gradualmente la rotella si aggiunge volume, girando sul lato opposto si riduce gradualmente il suono fino a quando il dispositivo non è completamente spento.

È possibile ascoltare i suoni cardiaci da un altoparlante o collegando le cuffie al jack appropriato (6).

L'audio può anche essere registrato. Collegare il dispositivo e il telefono cellulare con un cavo e avviare la registrazione audio.

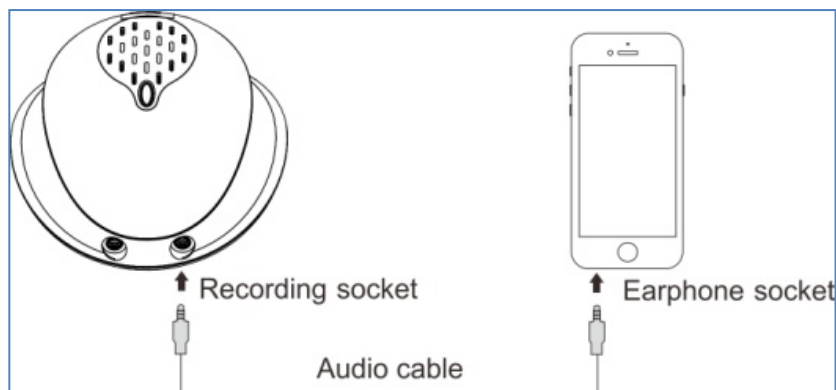

Batteria

Batteria inclusa. Si trova direttamente sul dispositivo, ma non è collegato. Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere collegata come mostrato nella figura seguente. Rimuovere il coperchio (5) e collegare la batteria.



Stati degli indicatori


Stato dell'indicatore	Stato operativo
Si illumina di verde	Il dispositivo è acceso
Verde lampeggiante	Il dispositivo è acceso e cattura il suono del feto
Arancione lampeggiante	Il dispositivo deve essere ricaricato

Come trovare il cuore del feto

Applicare un po' di gel sulla sonda (4) e posizionarlo sullo stomaco. Muovilo lentamente, cercando di trovare il cuore del feto. Dopo aver trovato il suono,

continua a muovere lentamente la sonda, cercando il punto in cui il segnale sonoro sarà più chiaro.

La solita posizione del feto può essere vista nella seguente immagine. Tuttavia, la posizione del feto può variare a seconda della fase della gravidanza e di altre condizioni.

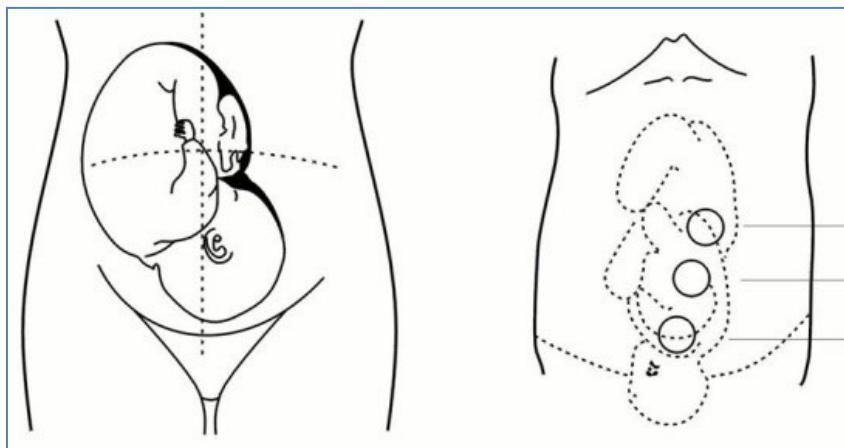

Avvertenze di sicurezza

Evitare di utilizzare il dispositivo in un ambiente con un potenziale rischio di esplosione, temperatura o umidità alta o molto bassa, vicino a una fiamma libera. Si consiglia di non utilizzare il dispositivo all'aperto.

Rimuovere sempre il gel dal dispositivo dopo il monitoraggio.

Non utilizzare il dispositivo se mostra segni di danni!

Se stai pulendo il dispositivo, tienilo sempre spento.

Indicazioni

Dimensioni: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Frequenza acustica: 3,0 MHz±5%

Area di registrazione effettiva: 7,4 cm²

Buon funzionamento: 4-6 ore

Batteria: 9V

Resistenza all'acqua: IP22

Condizioni d'uso: 5-40 °C

Product introductie


AngelSounds JPD-200S is een lichtgewicht en draagbare detector voor het luisteren naar de hartslagen van de foetus van een kind.

Opmerking: Voor een goede werking moet de foetus minstens 20 weken oud zijn. Raadpleeg uw arts over het gebruik van het apparaat.

Inhoud van de verpakking

AngelSounds JPD-200S, jack-jack kabel, hoofdtelefoon, batterij, handleiding

Basisprincipes van gebruik

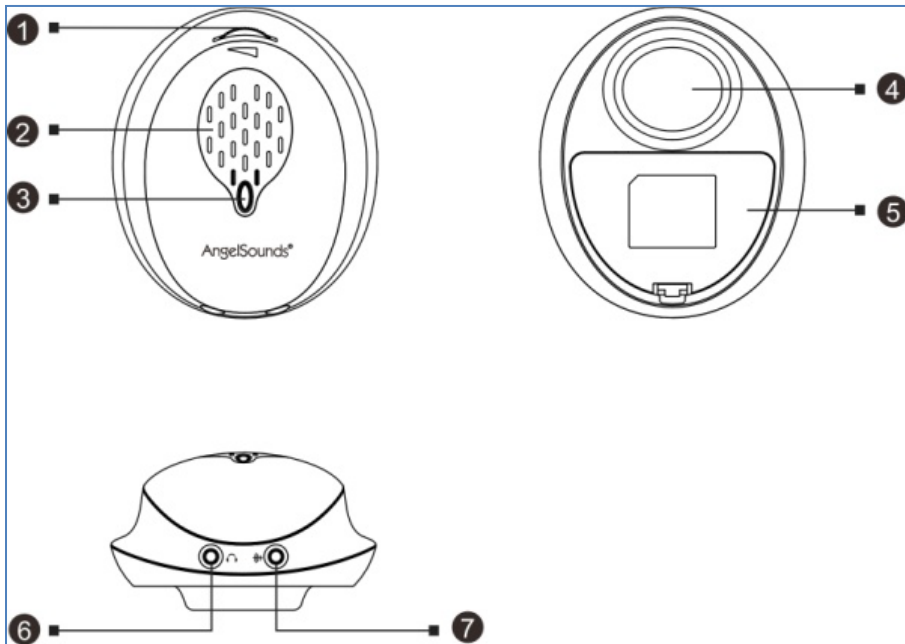

1 - Stroom aan / uit; Volumeregeling

2 - Luidspreker

3 - Statusindicator

4 - Signaaloverdracht

5 - Batterijdeksel


6 - Hoofdtelefoonaansluiting

7 - Aansluiting voor opnamekabel

Schakel het apparaat in door aan het wiel te draaien (1), de LED licht op om het in te schakelen. Geleidelijk aan het wiel draaien voegt volume toe, draaien naar de andere kant vermindert geleidelijk het geluid totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld.


U kunt naar hartgeluiden luisteren via een luidspreker of door een hoofdtelefoon aan te sluiten op de juiste aansluiting (6).

Audio kan ook worden opgenomen. Verbind uw apparaat en mobiele telefoon met een kabel en start de audio-opname.

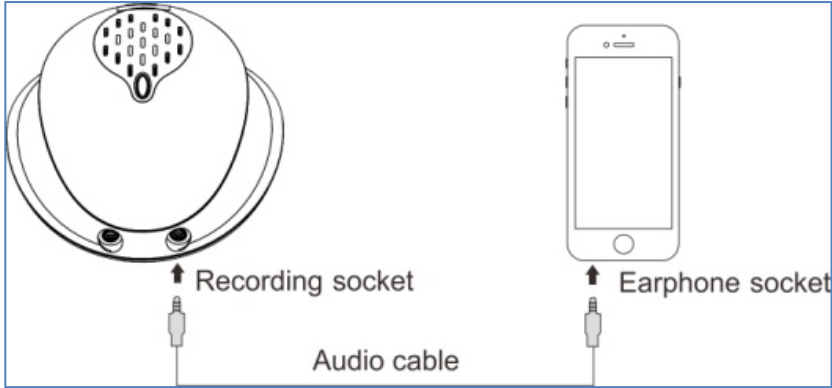

Batterij

Batterij inbegrepen. Het bevindt zich direct op het apparaat, maar is niet verbonden. Voor het eerste gebruik moet de batterij worden aangesloten zoals weergegeven in de volgende afbeelding. Verwijder het klepje (5) en sluit

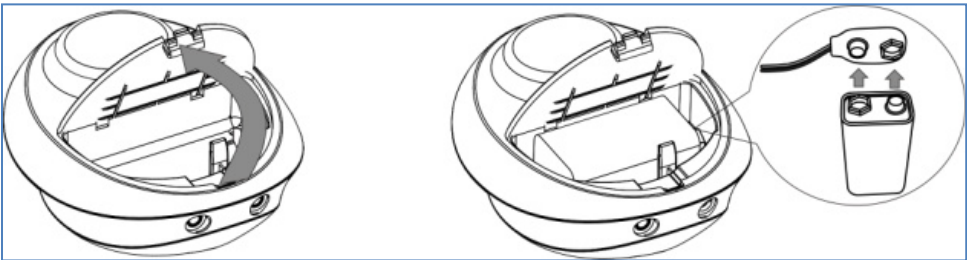

de

batterij aan.


Indicatorstatussen

Status van de indicator	Operationele status
Licht groen op	Het apparaat is ingeschakeld
Knipperend groen	Het apparaat is ingeschakeld en vangt het geluid van de foetus op
Knipperend oranje	Apparaat moet worden opgeladen

Hoe het hart van de foetus te vinden

Breng een beetje gel aan op de sonde (4) en plaats deze op je buik. Beweeg het langzaam en probeer het hart van de foetus te vinden. Nadat u het geluid hebt gevonden, blijft u de sonde langzaam bewegen, op zoek naar de plaats waar het geluidssignaal het duidelijkst zal zijn.

De gebruikelijke positie van de foetus is te zien in de volgende afbeelding. De positie van de foetus kan echter variëren, afhankelijk van het stadium van de zwangerschap en andere aandoeningen.

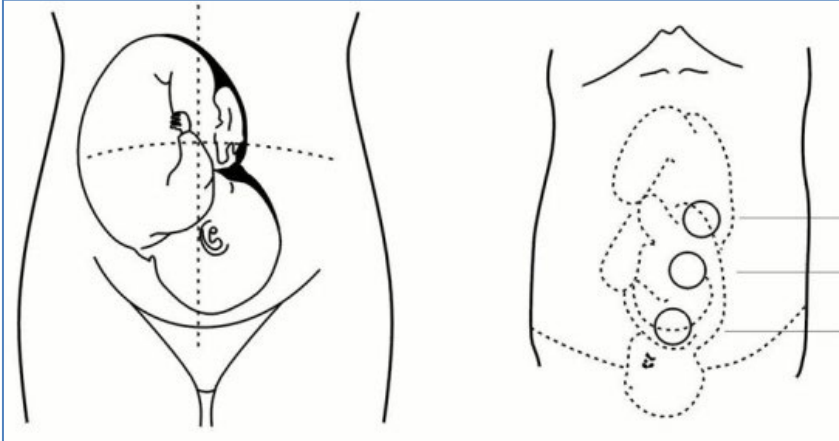

Veiligheidswaarschuwingen

Vermijd het gebruik van het apparaat in een omgeving met potentieel explosiegevaar, hoge of zeer lage temperatuur of vochtigheid, in de buurt van een open vuur. We raden u aan het apparaat niet buiten te gebruiken.

Veeg de gel altijd van het apparaat af na controle.

Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont!

Als u uw apparaat schoonmaakt, moet u het altijd uitgeschakeld houden.

Specificaties

Afmetingen: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akoestische frequentie: 3.0MHz±5%

Effectief opnamegebied: 7,4 cm²

Goede werking: 4-6 uur

Batterij: 9V

Waterdichtheid: IP22

Gebruiksvoorwaarden: 5-40 °C

Introducción del producto


AngelSounds JPD-200S es un detector ligero y portátil para escuchar los latidos del corazón del feto de un niño.

Nota: Para un funcionamiento adecuado, el feto debe tener al menos 20 semanas de edad. Consulte a su médico sobre el uso del dispositivo.

Contenido del paquete

AngelSounds JPD-200S, cable jack-jack, auriculares, batería, manual

Conceptos básicos de uso

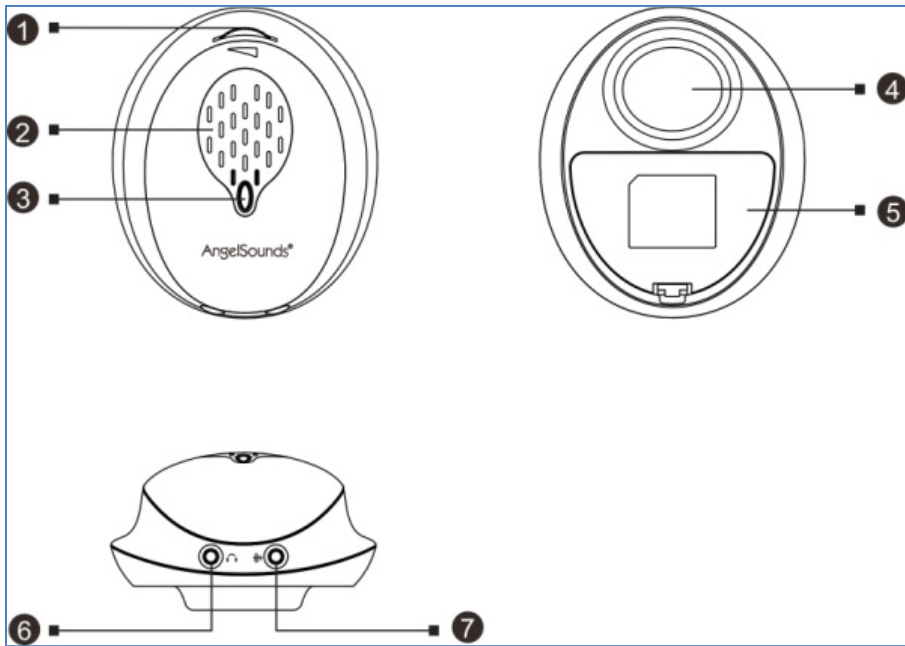

1 - Encendido / apagado; Ajuste de volumen

2 - Altavoz


3 - Indicador de estado
4 - Transmisión de señal

5 - Tapa de la batería
6 - Conexión de auriculares
7 - Conexión para cable de grabación

Encienda el dispositivo girando la rueda (1), el LED se enciende para encenderlo. Girar gradualmente la rueda agrega volumen, girar hacia el lado opuesto reduce gradualmente el sonido hasta que el dispositivo se apaga por completo.


Puede escuchar los sonidos del corazón desde un altavoz o conectando los auriculares a la toma adecuada (6).

El audio también se puede grabar. Conecte su dispositivo y teléfono móvil con un cable e inicie la grabación de audio.

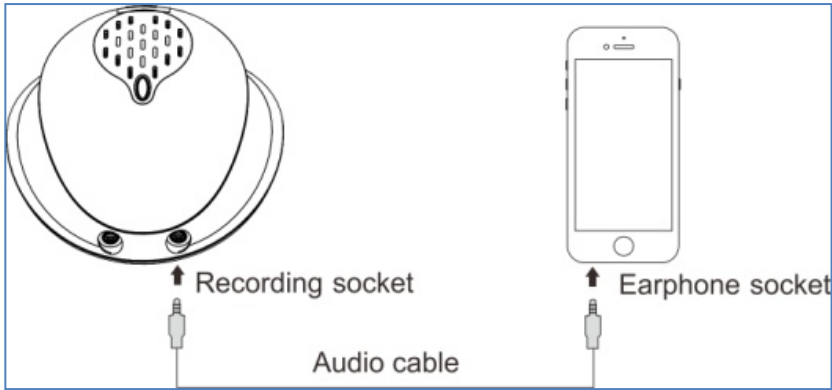

Batería

Batería incluida. Se encuentra directamente en el dispositivo, pero no está conectado. Antes del primer uso, la batería debe estar conectada como se muestra en la siguiente imagen. Retire la tapa (5) y conecte la batería.

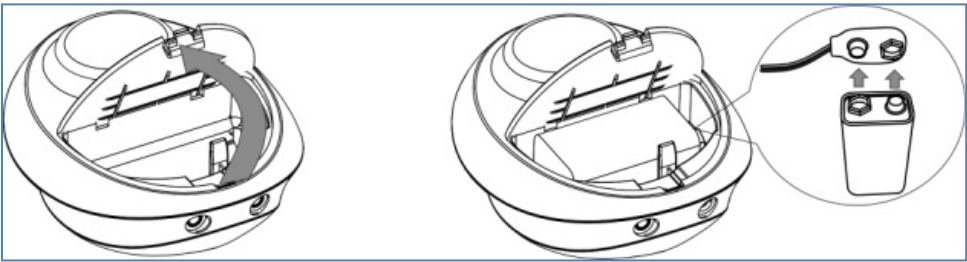

Estados de los indicadores


Estado del indicador	Estado operacional
Se ilumina en verde	El dispositivo está encendido
Verde parpadeante	El dispositivo se enciende y captura el sonido del feto
Naranja intermitente	El dispositivo necesita ser recargado

Cómo encontrar el corazón del feto

Aplique un poco de gel a la sonda (4) y colóquelo sobre su estómago. Muévelo lentamente, tratando de encontrar el corazón del feto. Después de encontrar

el sonido, continúe moviendo la sonda lentamente, buscando el lugar donde la señal de sonido será más clara.

La posición habitual del feto se puede ver en la siguiente imagen. Sin embargo, la posición del feto puede variar dependiendo de la etapa del embarazo y otras condiciones.

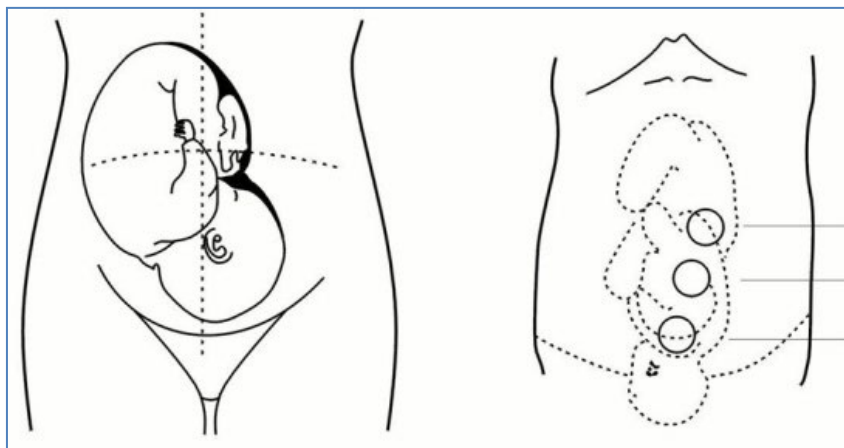

Advertencias de seguridad

Evite usar el dispositivo en un ambiente con un riesgo potencial de explosión, temperatura o humedad alta o muy baja, cerca de una llama abierta. Le recomendamos que no utilice el dispositivo al aire libre.

Siempre limpie el gel del dispositivo después de monitorear.

¡No use el dispositivo si muestra signos de daño!

Si estás limpiando el dispositivo, manténlo siempre apagado.

Características técnicas

Dimensiones: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Frecuencia acústica: 3.0MHz±5%

Área de grabación efectiva: 7,4 cm²

Buen funcionamiento: 4-6 horas

Batería: 9V

Resistencia al agua: IP22

Condiciones de uso: 5-40 °C

Introdução ao produto


AngelSounds JPD-200S é um detetor leve e portátil para ouvir os batimentos cardíacos do feto de uma criança.

Nota: Para o bom funcionamento, o feto deve ter pelo menos 20 semanas de idade. Consulte o seu médico sobre a utilização do dispositivo.

Conteúdos do Pacote

AngelSounds JPD-200S, jack-jack cabo, fones de ouvido, bateria, manual

Noções básicas de uso

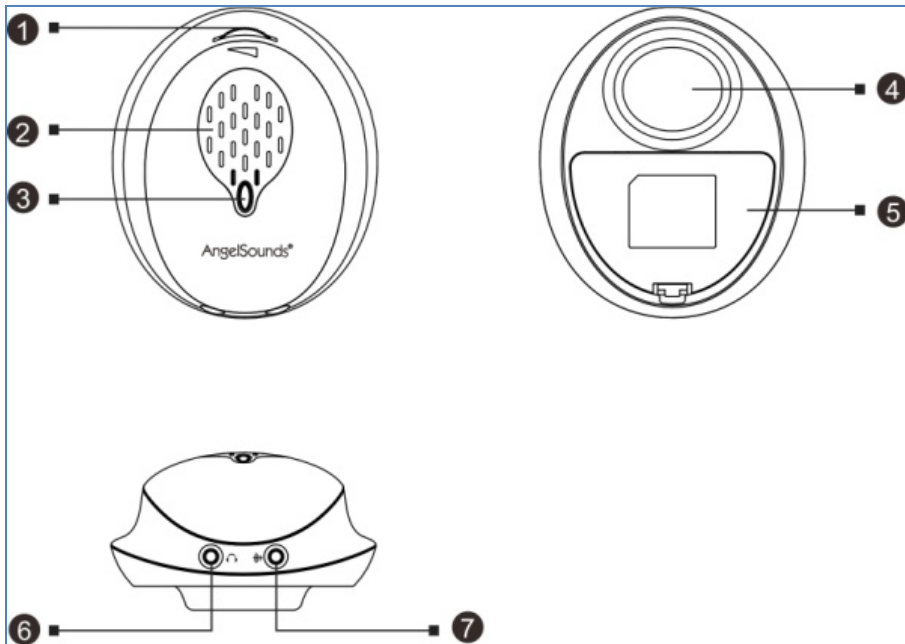

1 - Ligar/desligar; Ajuste de Volume

2 - Altifalante

3 - Indicador de status

4 - Transmissão de sinal

5 - Tampa da bateria


6 - Ligação para auscultadores

7 - Ligação para cabo de gravação

Ligue o dispositivo rodando a roda (1), o LED acende-se para ligá-lo. Girar gradualmente a roda adiciona volume, virar para o lado oposto reduz gradualmente o som até que o dispositivo esteja completamente desligado.


Pode ouvir sons cardíacos a partir de um altifalante ou ligando auscultadores à tomada adequada (6).

O áudio também pode ser gravado. Ligue o seu dispositivo e telemóvel com um cabo e inicie a gravação de áudio.

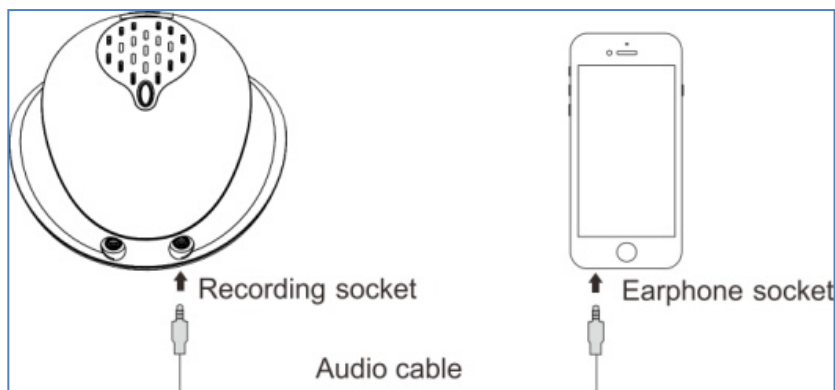

Bateria

Bateria incluída. Ele está localizado diretamente no dispositivo, mas não está conectado. Antes do primeiro uso, a bateria deve ser conectada como mostrado na imagem a seguir. Retire a tampa (5) e ligue a bateria.

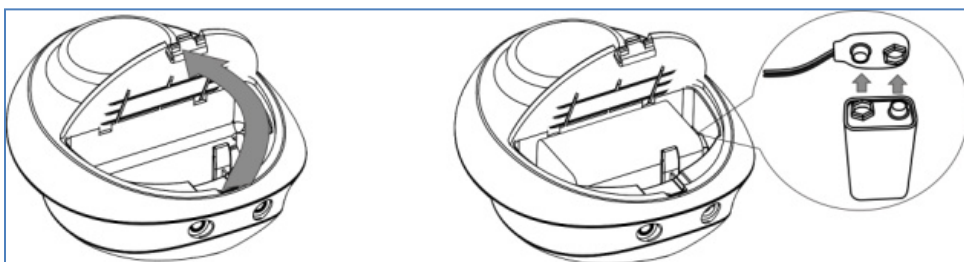

Status dos indicadores


Estado do indicador	Estado operacional
Ilumina-se a verde	O dispositivo está ligado
Verde intermitente	O dispositivo é ligado e captura o som do feto
Laranja intermitente	O dispositivo precisa ser recarregado

Como encontrar o coração do feto

Aplique um pouco de gel na sonda (4) e coloque-o no estômago. Mova-o lentamente, tentando encontrar o coração do feto. Depois de encontrar o

som, continue a mover a sonda lentamente, procurando o local onde o sinal sonoro será mais claro.

A posição habitual do feto pode ser vista na imagem a seguir. No entanto, a posição do feto pode variar dependendo do estágio da gravidez e outras condições.

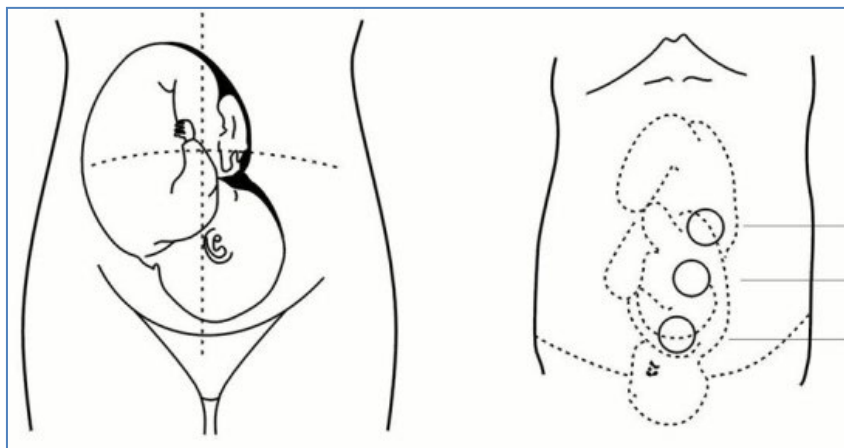

Avisos de segurança

Evite utilizar o dispositivo num ambiente com risco potencial de explosão, temperatura ou humidade elevada ou muito baixa, perto de chama aberta.

Recomendamos que não utilize o dispositivo no exterior.

Limpe sempre o gel do dispositivo após a monitorização.

Não utilize o dispositivo se este mostrar sinais de danos!

Se estiver a limpar o dispositivo, mantenha-o sempre desligado.

Especificações

Dimensões: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Frequência acústica: 3.0MHz±5%

Área de gravação efetiva: 7,4 cm²

Boa operação: 4-6 horas

Bateria: 9V

Resistência à água: IP22

Termos de uso: 5-40 °C

Termék bemutatása


Az AngelSounds JPD-200S egy könnyű és hordozható érzékelő a gyermek magzatának szívverésének meghallgatására.

Megjegyzés: A megfelelő működéshez a magzatnak legalább 20 hetesnek kell lennie. Forduljon orvosához a készülék használatáról.

Csomag tartalma

AngelSounds JPD-200S, jack-jack kábel, fejhallgató, akkumulátor, kézikönyv

A használat alapjai

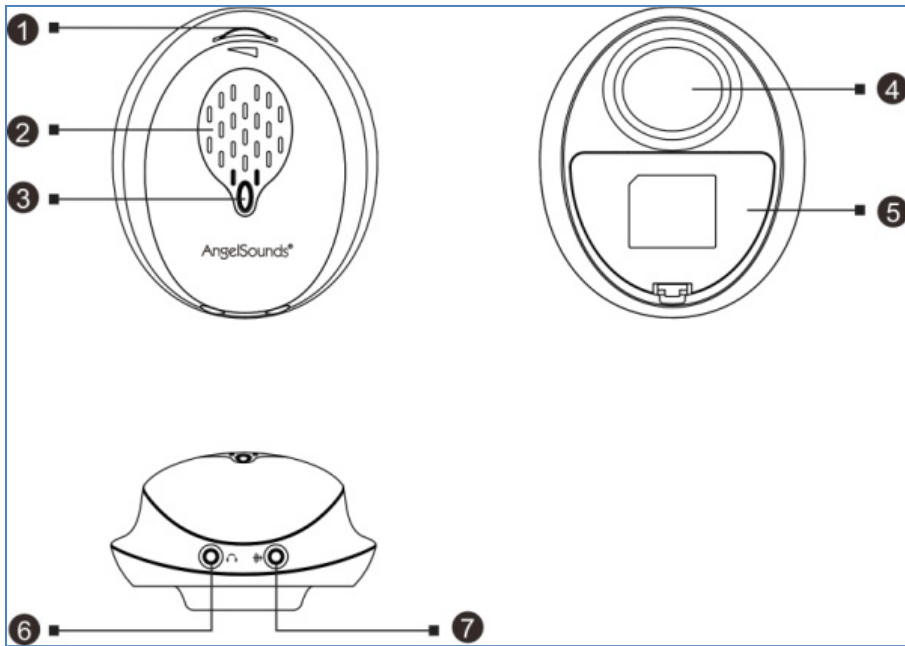

1 - Be- és kikapcsolás; Hangerő beállítása

2 - Hangszóró

3 - Állapotjelző

4 - Jelátvitel


5 - Elemfedél

6 - Fejhallgató csatlakozás
7 - Csatlakozás felvevőkábelhez

Kapcsolja be a készüléket a kerék elforgatásával (1), a LED világít a bekapcsoláshoz. A kerék fokozatos elforgatása növeli a hangerőt, az ellenkező oldalra fordulás fokozatosan csökkenti a hangot, amíg a készülék teljesen ki nem kapcsol.


A szívhangokat hangszóróból vagy fejhallgató megfelelő aljzathoz való csatlakoztatásával hallgathatja (6).

Hang is rögzíthető. Csatlakoztassa a készüléket és a mobiltelefont kábellel, és indítsa el a hangfelvételt.

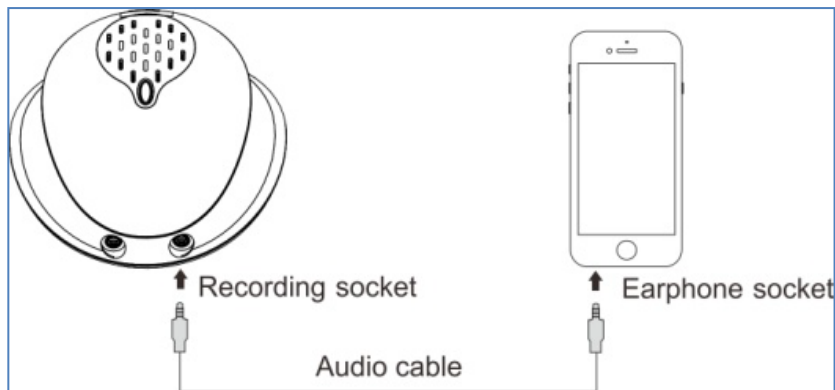

Akkumulátor

Akkumulátor mellékelve. Közvetlenül az eszközön található, de nincs csatlakoztatva. Az első használat előtt az akkumulátort az alábbi képen látható módon kell csatlakoztatni. Távolítsa el a fedelet (5), és csatlakoztassa az

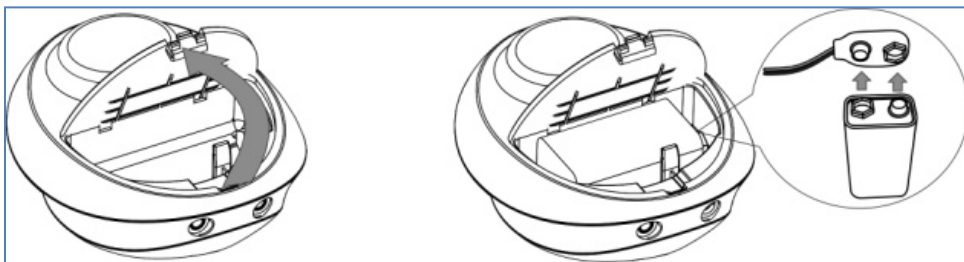

akkumulátort.

Indikátor állapotok


Jelző állapota	Működési állapot
Zölden világít	A készülék be van kapcsolva
Villogó zöld	A készülék be van kapcsolva, és rögzíti a magzat hangját
Villogó narancssárga	A készüléket fel kell tölteni

Hogyan találjuk meg a magzat szívét?

Vigyen fel egy kevés gélt a szondára (4), és helyezze a gyomrára. Mozgassa lassan, próbálja megtalálni a magzat szívét. Miután megtalálta a hangot, lassan

mozgassa tovább a szondát, és keresse meg azt a helyet, ahol a hangjel a legtisztább lesz.

A magzat szokásos helyzete a következő képen látható. A magzat helyzete azonban a terhesség stádiumától és más körülményektől függően változhat.

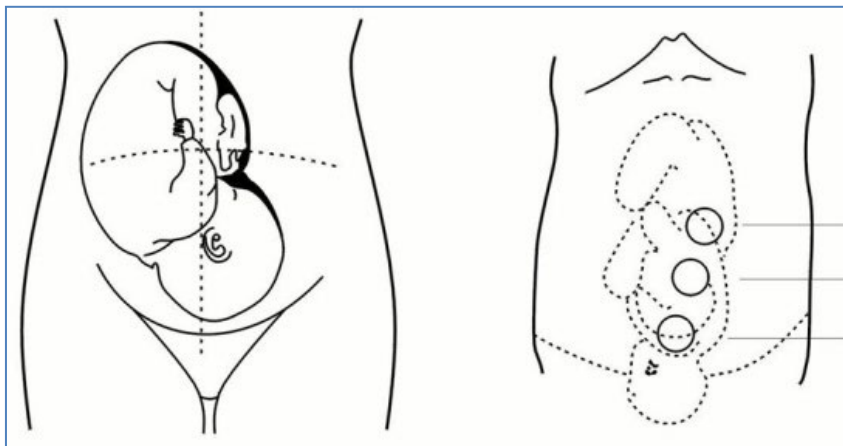

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja a készüléket robbanásveszélynek kitett környezetben, magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten vagy páratartalom mellett, nyílt láng közelében. Javasoljuk, hogy ne használja a készüléket a szabadban.

Megfigyelés után mindig törölje le a gélt a készülékről.

Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja!

Ha tisztítja a készüléket, mindig tartsa kikapcsolva.

Előírások

Méretek: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0.15 kg

Akusztikus frekvencia: 3,0 MHz±5%

Tényleges rögzítési terület: 7,4 cm²

Jó működés: 4-6 óra

Akkumulátor: 9V

Vízállóság: IP22

Használati feltételek: 5-40 °C

Wprowadzenie produktu


AngelSounds JPD-200S to lekki i przenośny detektor do słuchania bicia serca płodu dziecka.

Uwaga: Dla prawidłowego funkcjonowania płód musi mieć co najmniej 20 tygodni. Skonsultuj się z lekarzem na temat korzystania z urządzenia.

Zawartość opakowania

AngelSounds JPD-200S, jack-jack, słuchawki, bateria, instrukcja

Podstawy użytkowania

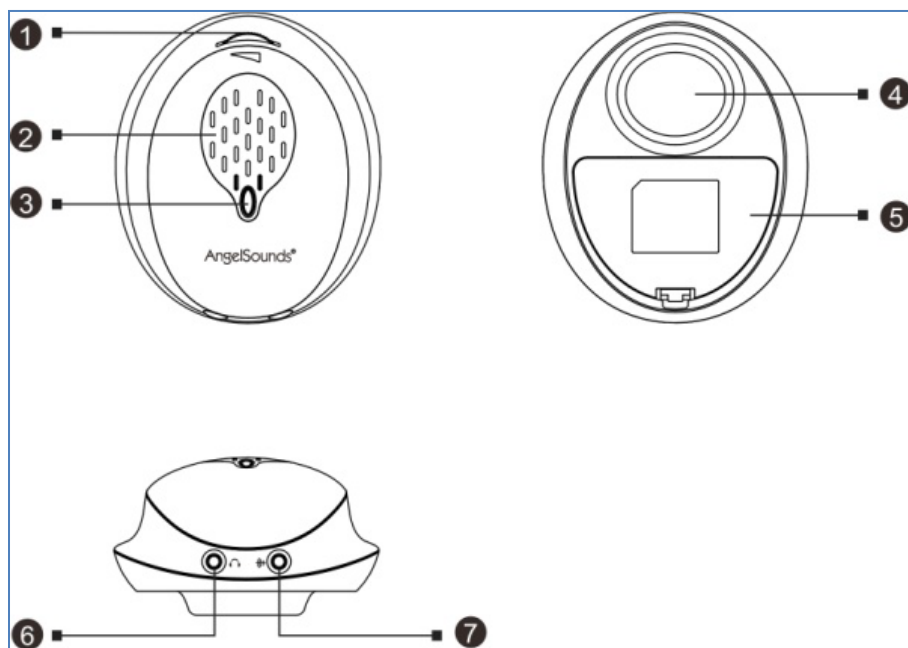


- 1 - Włączanie/wyłączanie zasilania; Regulacja głośności
 2 - Głośnik
 3 - Wskaźnik stanu
 4 - Transmisja sygnału
 5 - Pokrywa baterii
 6 - Połączenie słuchawkowe
 7 - Połączenie do nagrywania

Włącz urządzenie, obracając kółko (1), dioda LED zaświeci się, aby je włączyć. Stopniowe obracanie koła zwiększa głośność, obracanie w przeciwną stronę stopniowo zmniejsza dźwięk, aż urządzenie zostanie całkowicie wyłączone.


Możesz słuchać dźwięków serca z głośnika lub podłączając słuchawki do odpowiedniego gniazda (6).

Można również nagrywać dźwięk. Podłącz urządzenie i telefon komórkowy i rozpocznij nagrywanie dźwięku.

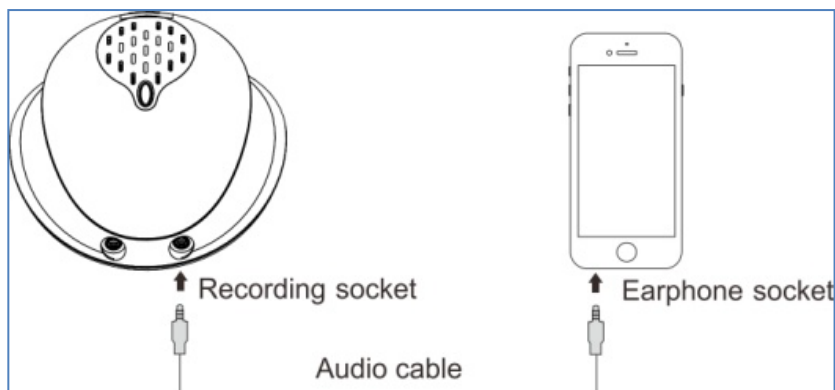

Bateria

Bateria w zestawie. Znajduje się bezpośrednio na urządzeniu, ale nie jest podłączony. Przed pierwszym użyciu akumulator musi być podłączony, jak pokazano na poniższej ilustracji. Zdejmij pokrywę (5) i podłącz baterię.

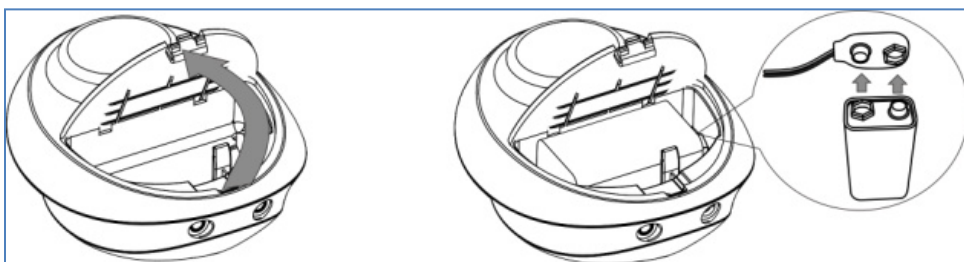

Statusy wskaźników


Stan wskaźnika	Status operacyjny
Świeci na zielono	Urządzenie jest włączone
na zielono	Urządzenie jest włączone i przechwytyje dźwięk płodu
na pomarańczowo	Urządzenie musi zostać naładowane

Jak znaleźć serce płodu

Nałóż trochę żelu na sondę (4) i umieść go na brzuchu. Poruszaj się powoli, próbując znaleźć serce płodu. Po znalezieniu dźwięku kontynuuj powolne

przesuwanie sondy, szukając miejsca, w którym sygnał dźwiękowy będzie najwyraźniejszy.

Zwykłą pozycję płodu można zobaczyć na poniższym obrazku. Jednak pozycja płodu może się różnić w zależności od stadium ciąży i innych warunków.

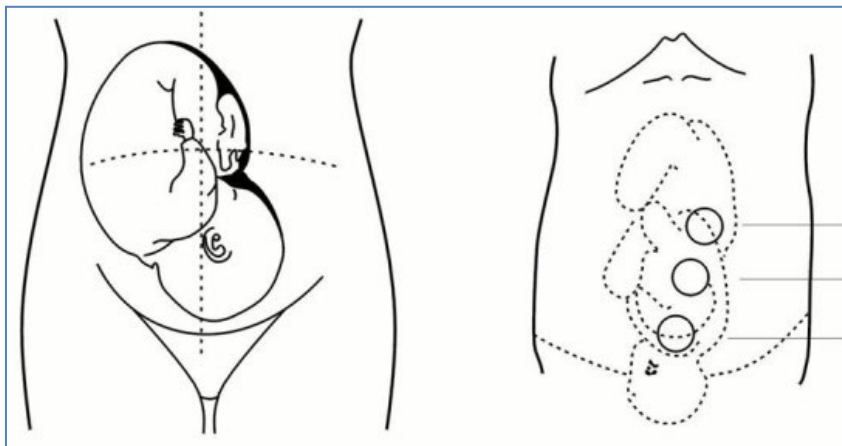

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Unikaj używania urządzenia w środowisku o potencjalnym ryzyku wybuchu, wysokiej lub bardzo niskiej temperatury lub wilgotności, w pobliżu otwartego ognia. Zalecamy, aby nie używać urządzenia na zewnątrz.

Zawsze zetrzyj żel z urządzenia po monitorowaniu.

Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia!

Jeśli czyścisz urządzenie, zawsze wyłączaj je.

Specyfikacje

Wymiary: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Częstotliwość akustyczna: 3,0 MHz±5%

Efektywna powierzchnia rejestrowania: 7,4 cm²

Dobra operacja: 4-6 godzin

Bateria: 9V

Wodoodporność: IP22

Warunki użytkowania: 5-40 °C

Predstavitev izdelka


AngelSounds JPD-200S je lahek in prenosen detektor za poslušanje srčnega utripa otroškega ploda.

Opomba: Za pravilno delovanje mora biti plod star vsaj 20 tednov. O uporabi pripomočka se posvetujte z zdravnikom.

Vsebina paketa

AngelSounds JPD-200S, kabel vtičnice, slušalke, baterija, priročnik

Osnove uporabe

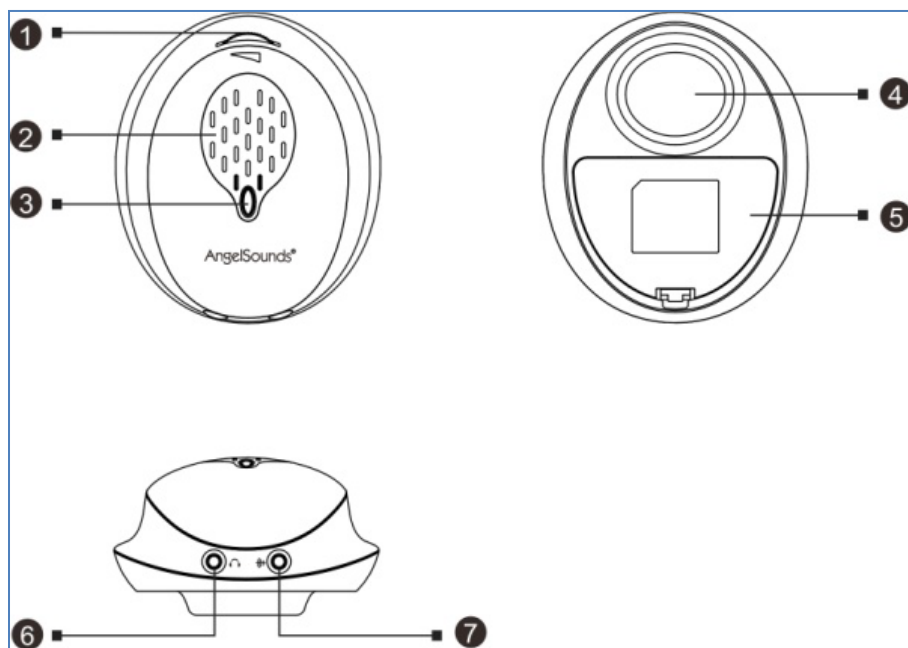

1 - Vklop/izklop; Nastavitev glasnosti

2 - Zvočnik

3 - Indikator stanja

4 - Prenos signala

5 - Pokrov baterije


6 - Povezava slušalk

7 - Povezava za snemalni kabel

Vklopite napravo z obračanjem kolesa (1), lučka LED zasveti, da jo vklopite. Postopno obračanje kolesa dodaja glasnost, obračanje na nasprotno stran postopoma zmanjšuje zvok, dokler naprava ni popolnoma izklopljena.


Zvoke srca lahko poslušate bodisi iz glasnega zvočnika bodisi tako, da slušalke priključite na ustrezno vtičnico (6).

Posnamete lahko tudi zvok. Napravo in mobilni telefon povežite s kablom in začnete snemati zvok.

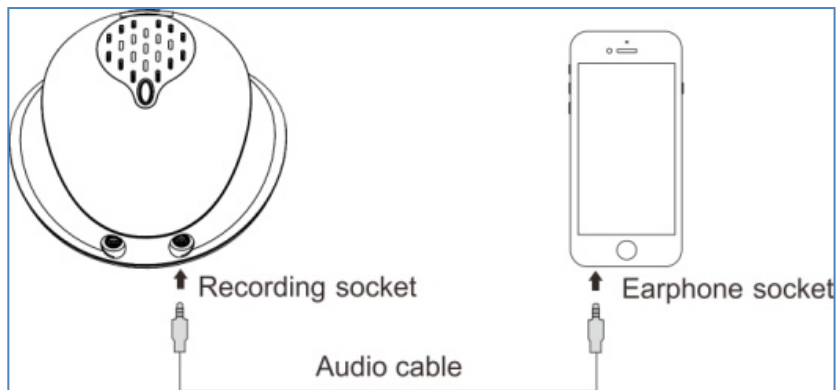

Baterija

Baterija je priložena. Nahaja se neposredno na napravi, vendar ni povezan. Pred prvo uporabo mora biti baterija priključena, kot je prikazano na spodnji sliki. Odstranite pokrov (5) in priključite baterijo.

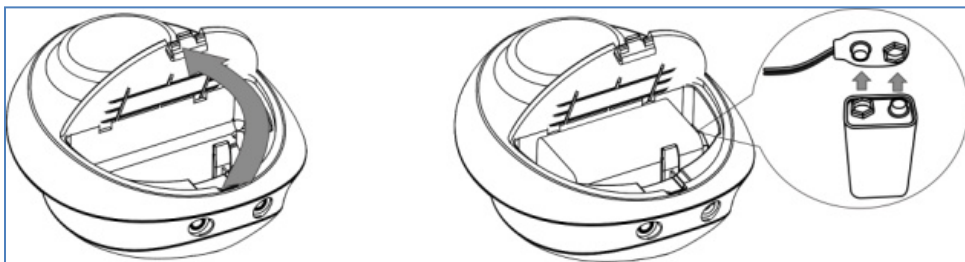


Stanja indikatorjev

Stanje indikatorja	Operativno stanje
Zasveti zeleno	Naprava je vklopljena
Utripa zeleno	Naprava je vklopljena in zajame zvok ploda
Utripajoča oranžna	Napravo je treba ponovno napolniti

Kako najti srce ploda

Na sondo nanesite majhen gel (4) in ga položite na želodec. Premaknite ga počasi in poskušajte najti srce ploda. Ko najdete zvok, nadaljujte s počasnim premikanjem sonde in poiščite mesto, kjer bo zvočni signal najjasnejši. Običajni položaj ploda je viden na naslednji sliki. Vendar pa se položaj ploda lahko razlikuje glede na stopnjo nosečnosti in druga stanja.

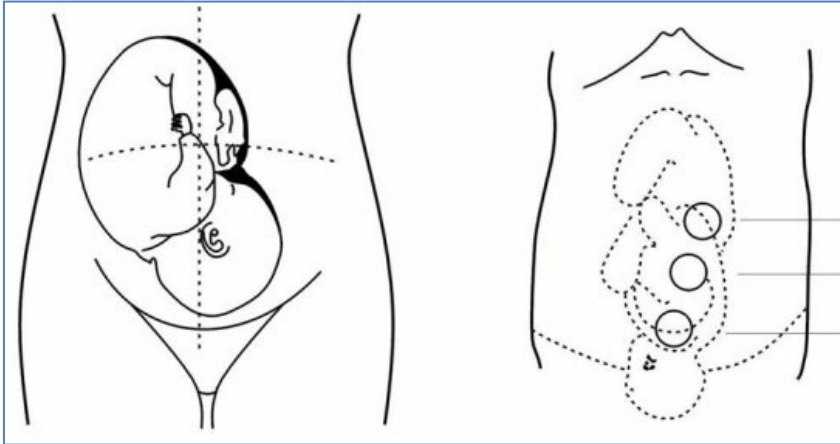

Varnostna opozorila

Naprave ne uporabljajte v okolju z možno nevarnostjo eksplozije, visoke ali zelo nizke temperature ali vlažnosti v bližini odprtega ognja. Priporočamo, da naprave ne uporabljate na prostem.

Po spremljanju gel vedno obrišite z naprave.

Naprave ne uporabljajte, če kaže znake poškodb!

Če čistite napravo, naj bo vedno izklopljena.

Specifikacije

Dimenzije: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustična frekvenca: 3,0 MHz±5 %

Efektivna snemalna površina: 7,4 cm²

Dobro delovanje: 4-6 ur

Baterija: 9V

Vodoodpornost: IP22

Pogoji uporabe: 5-40 °C

Introducerea produsului


AngelSounds JPD-200S este un detector ușor și portabil pentru ascultarea bătăilor inimii fătului unui copil.

Notă: Pentru buna funcționare, fătul trebuie să aibă cel puțin 20 de săptămâni. Consultați-vă medicul despre utilizarea dispozitivului.

Conținutul pachetului

AngelSounds JPD-200S, cablu jack-jack, casti, baterie, manual

Noțiuni de bază de utilizare

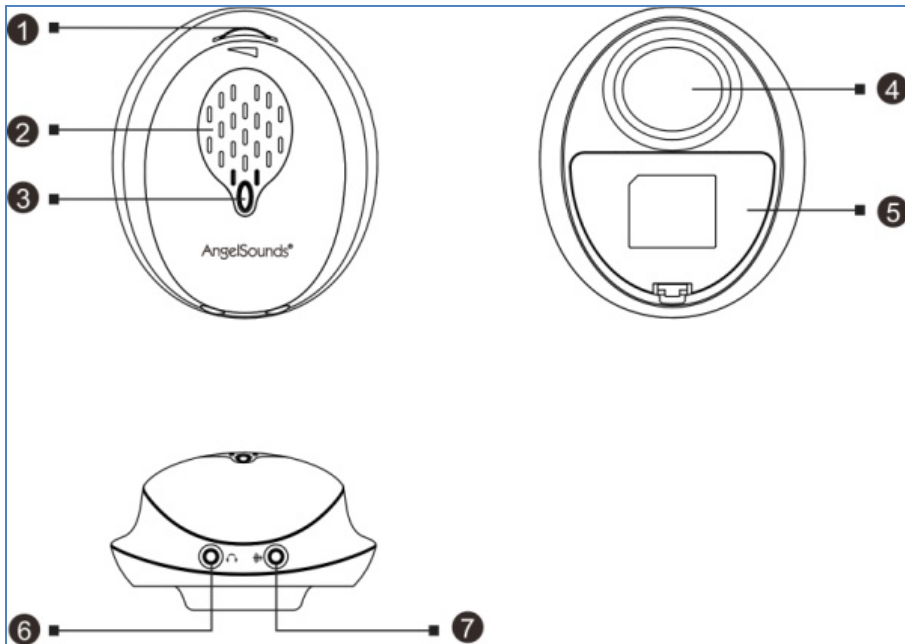

1 - Pornire/oprire; Reglarea volumului 2 - Difuzor

3 - Indicator de stare

4 - Transmisia semnalului 5 - Capacul bateriei 6 - Conectarea căștilor 7 -


Conexiune pentru cablul de înregistrare

Porniți dispozitivul rotind roata (1), LED-ul se aprinde pentru a-l aprinde.

Rotirea treptată a roții adaugă volum, întoarcerea spre partea opusă reduce treptat sunetul până când dispozitivul este complet oprit.


Puteți asculta sunetele inimii fie de la un difuzor puternic, fie conectând căștile la mufa corespunzătoare (6).

Sunetul poate fi, de asemenea, înregistrat. Conectați dispozitivul și telefonul mobil cu un cablu și începeți înregistrarea audio.

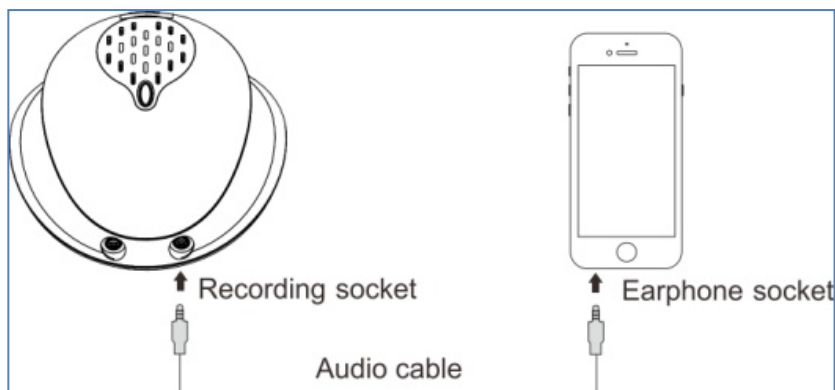

Baterie

Baterie inclusă. Acesta este localizat direct pe dispozitiv, dar nu este conectat. Înainte de prima utilizare, bateria trebuie conectată așa cum se arată în imaginea următoare. Scoateți capacul (5) și conectați bateria.

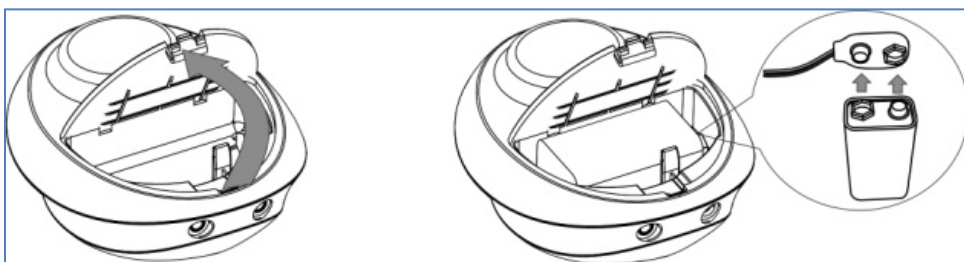


Stările indicatorilor

Starea indicatorului	Starea operațională
Se aprinde verde	Dispozitivul este pornit
Verde intermitent	Dispozitivul este pornit și captează sunetul fătului
Portocaliu intermitent	Dispozitivul trebuie reîncărcat

Cum să găsești inima fătului

Aplicați puțin gel pe sondă (4) și puneți-l pe stomac. Mișcați-l încet, încercând să găsiți inima fătului. După găsirea sunetului, continuați să mișcați încet sonda, căutând locul în care semnalul sonor va fi cel mai clar.

Poziția obișnuită a fătului poate fi văzută în imaginea următoare. Cu toate acestea, poziția fătului poate varia în funcție de stadiul sarcinii și de alte condiții.

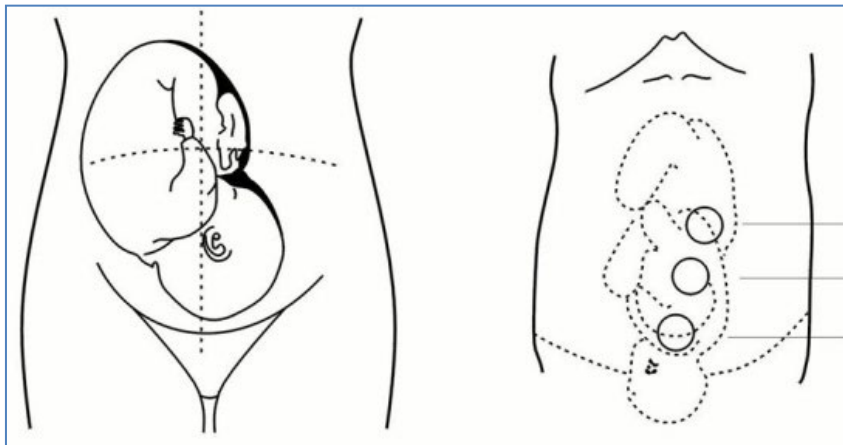

Avertismente de siguranță

Evitați utilizarea dispozitivului într-un mediu cu risc potențial de explozie, temperatură sau umiditate ridicată sau foarte scăzută, în apropierea unei flăcări deschise. Vă recomandăm să nu utilizați dispozitivul în aer liber.

Ștergeți întotdeauna gelul de pe dispozitiv după monitorizare.

Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă semne de deteriorare!

Dacă vă curățați dispozitivul, mențineți-l întotdeauna oprit.

Specificatii

Dimensiuni: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0.15 kg

Frecvență acustică: 3.0MHz±5%

Zona efectivă de înregistrare: 7,4 cm²

Funcționare bună: 4-6 ore

Baterie: 9V

Rezistența la apă: IP22

Termeni de utilizare: 5-40 °C

Въведение в продукта


AngelSounds JPD-200S е лек и преносим детектор за слушане на сърдечния ритъм на плода на детето.

Забележка: За правилното функциониране плодът трябва да е на възраст най-малко 20 седмици. Консултирайте се с Вашия лекар относно използването на устройството.

Съдържание на пакета

AngelSounds JPD-200S, жак-жак кабел, слушалки, батерия, ръководство

Основи на използването

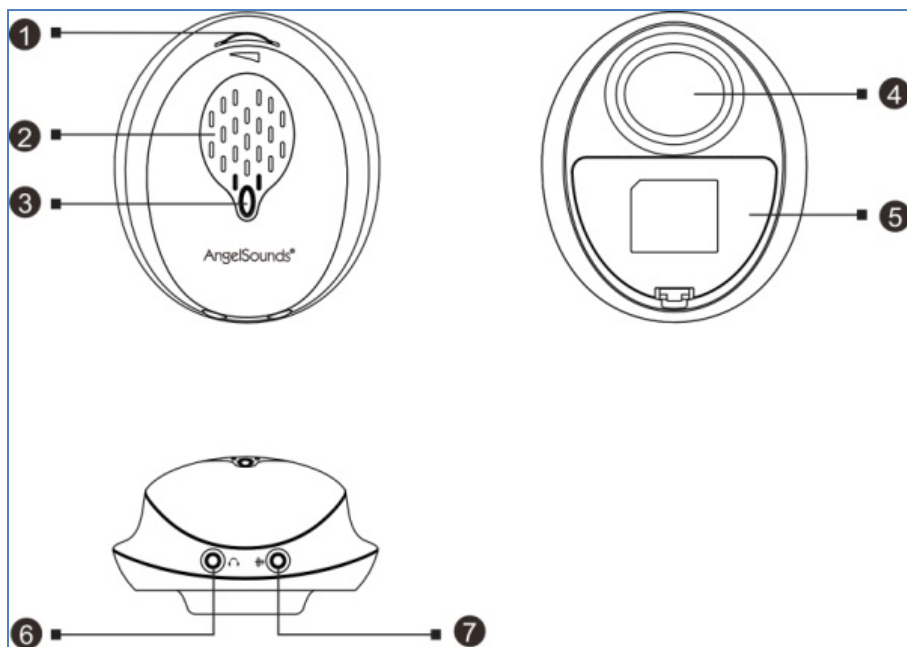

1 - Включване/изключване на захранването; Регулиране на силата на звука
2 - високоговорител


3 - Индикатор за състоянието

4 - Предаване на сигнала
5 - Капак на батерията

6 - Връзка за слушалки
7 - Връзка за запис на кабел


Включете устройството, като завъртите колелото (1), светодиодът светва, за да го включите. Постепенното завъртане на колелото добавя сила на

звук, завъртането на противоположната страна постепенно намалява звука, докато устройството не бъде напълно изключено. Можете да слушате сърдечни звуци или от силен високоговорител, или чрез свързване на слушалки към подходящия жак (6). Аудиото също може да бъде записано. Свържете устройството и мобилния си телефон с кабел и започнете аудиозапис.

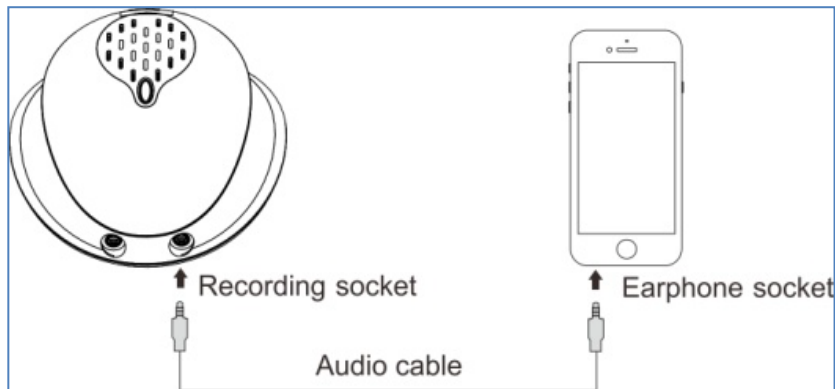

Батерия

Включена батерия. Той се намира директно на устройството, но не е свързан. Преди първата употреба батерията трябва да бъде свързана, както е показано на следващата картина. Свалете капака (5) и свържете

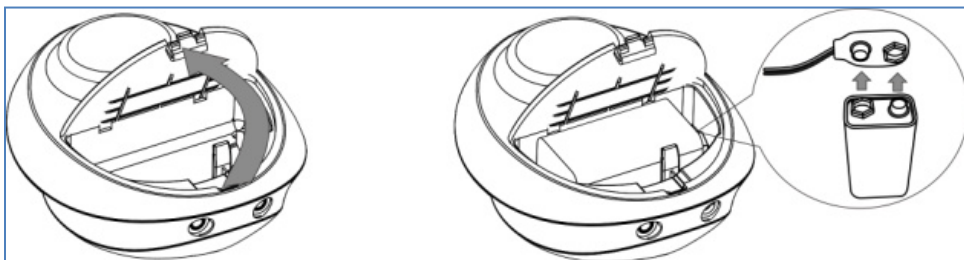


батерията.

Статуси на индикаторите

Състояние на индикатора	Експлоатационно състояние
Светва зелено	Устройството е включено
Мигащо зелено	Устройството е включено и улавя звука на плода
Мигащо оранжево	Устройството трябва да се презареди

Как да намерим сърцето на плода

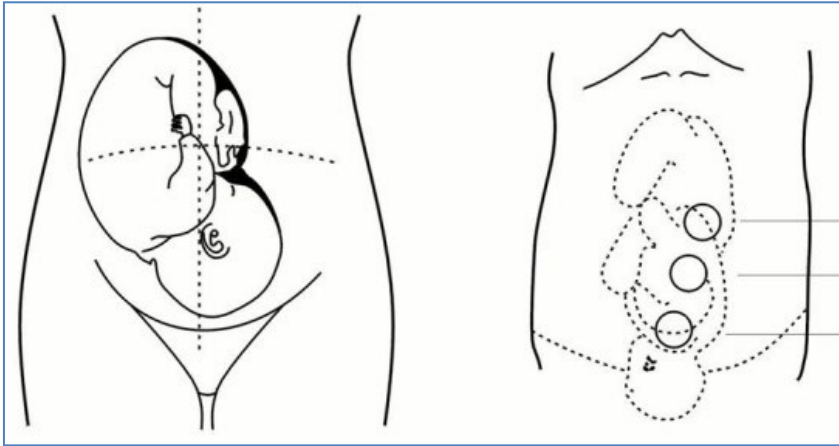

Нанесете малко гел върху сондата (4) и го поставете върху стомаха си. Движете го бавно, опитвайки се да

намерите сърцето на плода. След като намерите звука, продължете да движите сондата бавно, търсейки мястото, където звуковият сигнал ще бъде най-ясен.

Обичайната позиция на плода може да се види на следващата картина. Въпреки това, позицията на плода може да варира в зависимост от етапа на бременността и други условия.

Предупреждения за безопасност

Избягвайте използването на устройството в среда с потенциален риск от експлозия, висока или много ниска температура или влажност, в близост до открит пламък. Препоръчваме ви да не използвате устройството на открито.

Винаги избърсвайте гела от устройството след наблюдение.

Не използвайте устройството, ако показва признаци на повреда!

Ако почиствате устройството си, винаги го дръжте изключено.

Спецификации

Размери: 100 мм × 85 мм × 50 мм ; 0.15 кг

Акустична честота: 3.0MHz±5%

Ефективна площ за запис: 7,4 cm²

Добра работа: 4-6 часа

Батерия: 9V

Водоустойчивост: IP22

Условия за ползване: 5-40 °C

Введення продукту


AngelSounds JPD-200S - легкий і портативний детектор для прослуховування серцебиття плода дитини.

Примітка: Для правильного функціонування плоду має бути не менше 20 тижнів. Проконсультуйтеся з лікарем з приводу використання приладу.

Зміст упаковки

AngelSounds JPD-200S, кабель jack-jack, навушники, акумулятор, ручний

основи використання

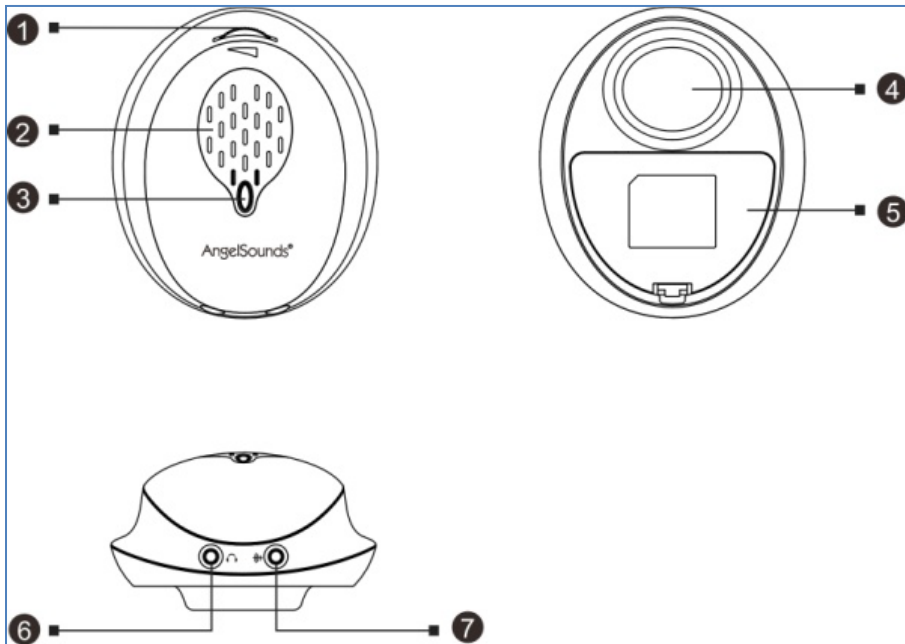

1 - Включення/виключення живлення; Регулювання гучності
2 - гучномовець

3 - Індикатор стану

4 - Передача сигналу

5 - Кришка батареї

6 - Підключення навушників


7 - Підключення кабелю запису

Увімкніть пристрій, повернувши колесо (1), щоб увімкнути його, загориться світлодіод. Поступове поворот колеса додає гучності, поворот

на протилежну сторону поступово знижує звук до повного вимкнення пристрою.


Прослухати тони серця можна як з гучного динаміка, так і підключивши навушники до відповідного гнізда (6).

Аудіо також можна записувати. Підключіть пристрій і мобільний телефон за допомогою кабелю та почніть запис аудіо.

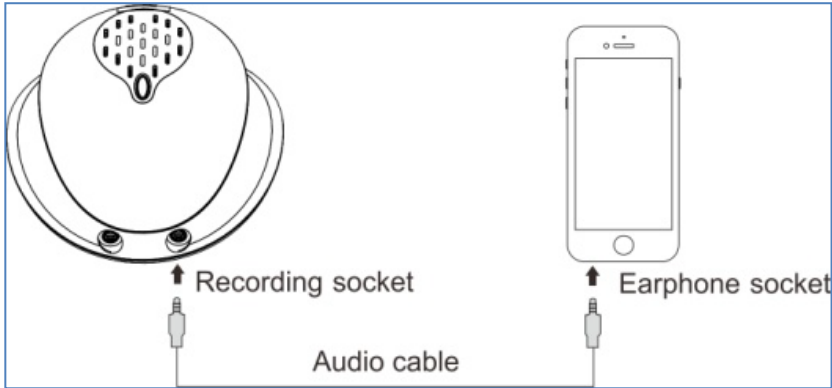

Батарея

Батарея в комплекті. Він знаходиться безпосередньо на пристрої, але не підключений. Перед першим використанням акумулятор потрібно підключити, як показано на наступному малюнку. Зніміть кришку (5) і

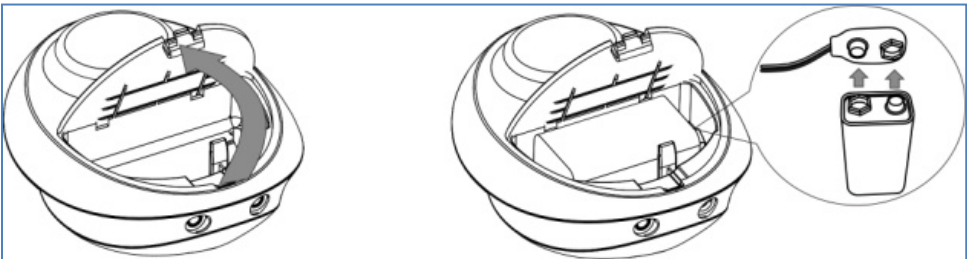

підключіть акумулятор.


Статуси індикаторів

Стан індикатора	Експлуатаційний стан
Світиться зеленим	Пристрій увімкнено
Миготливий зелений	Прилад включається і вловлює звук плода
Миготливий помаранчевий	Пристрій потрібно заряджати

Як знайти серце плода

Нанесіть трохи гелю на зонд (4) і покладіть його на живіт. Рухають його повільно, намагаючись знайти серце плода. Знайшовши звук, продовжуйте повільно рухати зонд, шукаючи місце, де звуковий сигнал буде найбільш чітким.

Звичайне положення плода можна побачити на наступній картинці. Однак положення плода може змінюватися в залежності від стадії вагітності та інших станів.

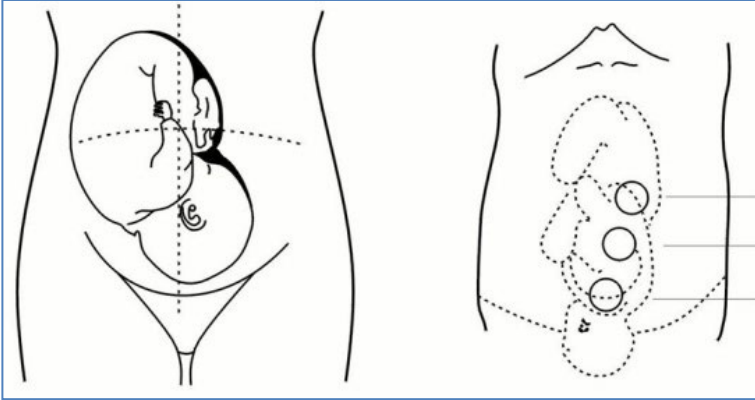

Попередження про безпеку

Уникайте використання пристрою в середовищі з потенційним ризиком вибуху, високою або дуже низькою температурою або вологістю, поблизу відкритого вогню. Рекомендуємо не використовувати прилад на відкритому повітрі.

Завжди витирайте гель з пристрою після моніторингу.

Не використовуйте пристрій, якщо на ньому з'явилися ознаки пошкодження!

Якщо ви чистите пристрій, завжди вимикайте його.

Специфікації

Розміри: 100 мм × 85 мм × 50 мм ; 0.15 кг

Акустична частота: 3,0 МГц±5%

Ефективна площа запису: 7,4 см²

Хороша експлуатація: 4-6 годин

Акумулятор: 9V

Водонепроникність: IP22

Умови використання: 5-40 °C

Produkt Introduktion


AngelSounds JPD-200S er en let og bærbar detektor til at lytte til hjerteslag hos et barns foster.

*Bemærk: For korrekt funktion skal fosteret være mindst 20 uger gammelt.
Kontakt din læge om brugen af enheden.*

Pakkens indhold

AngelSounds JPD-200S, jack-jack-kabel, hovedtelefoner, batteri, manuel

Grundlæggende om brug

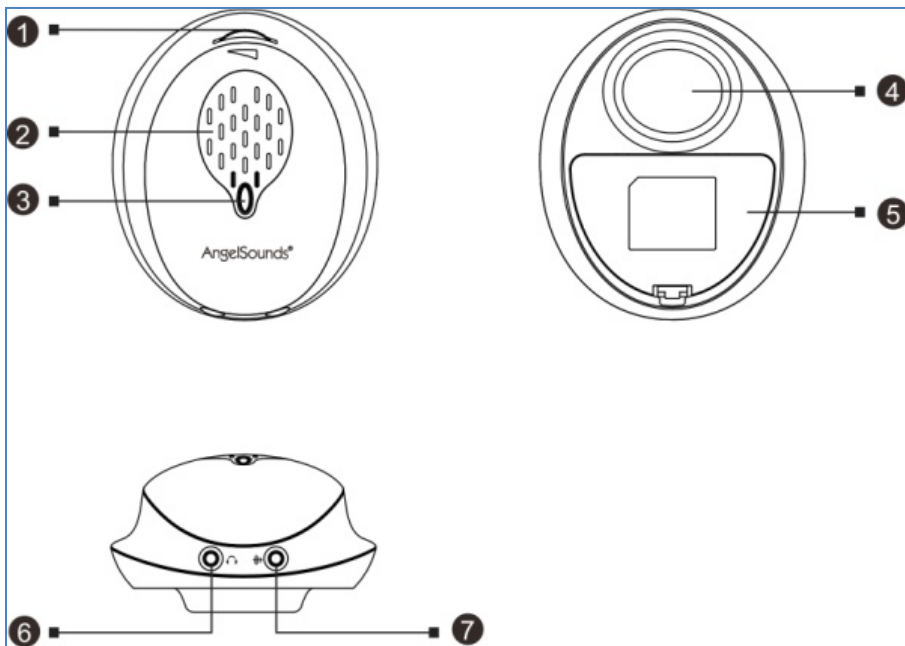

1 - Tænd/sluk; Justering af lydstyrke 2 - Højtaler


3 - Statusindikator

4 - Signaloverførsel 5 - Batteridæksel 6 - Hovedtelefonforbindelse 7 - Tilslutning til optagekabel

Tænd enheden ved at dreje hjulet (1), LED'en lyser for at tænde den. Gradvis drejning af hjulet tilføjer lydstyrke, drejning til den modsatte side reducerer lyden gradvist, indtil enheden er helt slukket.


Du kan lytte til hjertelyde enten fra en højttaler eller ved at slutte hovedtelefoner til det relevante stik (6).

Lyd kan også optages. Tilslut din enhed og mobiltelefon med et kabel, og start lydoptagelse.

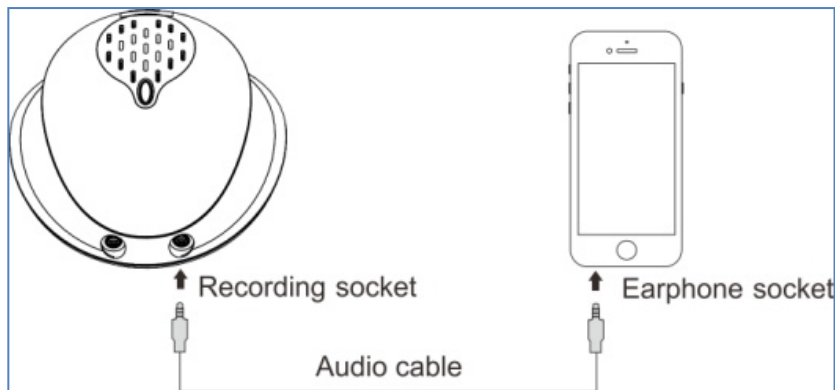

Batteri

Batteri inkluderet. Den er placeret direkte på enheden, men er ikke tilsluttet. Før første brug skal batteriet tilsluttes som vist på følgende billede. Fjern dækslet (5), og tilslut batteriet.

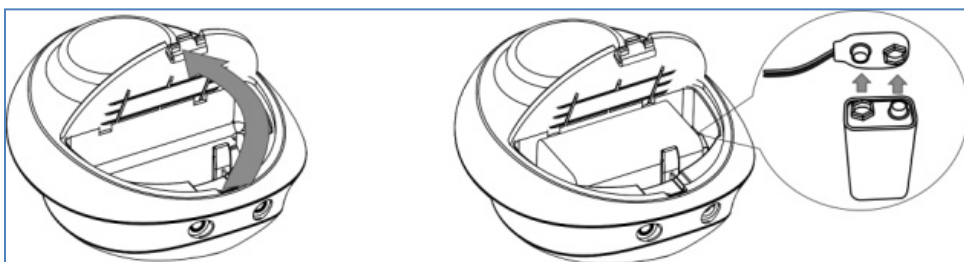

Indikatorstatus


Status for indikator	Operationel status
Lyser grønt	Enheden er tændt
Blinker grønt	Enheden er tændt og fanger fostrets lyd
Blinker orange	Enheden skal genoplades

Sådan finder du fostrets hjerte

Påfør lidt gel på sonden (4) og læg den på maven. Flyt det langsomt og prøv at finde fostrets hjerte. Når du har fundet lyden, skal du fortsætte med at

bevæge sonden langsomt og kigge efter det sted, hvor lydsignalet vil være klarest.

Fostrets sædvanlige position kan ses på det følgende billede. Fostrets position kan dog variere afhængigt af graviditetsstadiet og andre forhold.

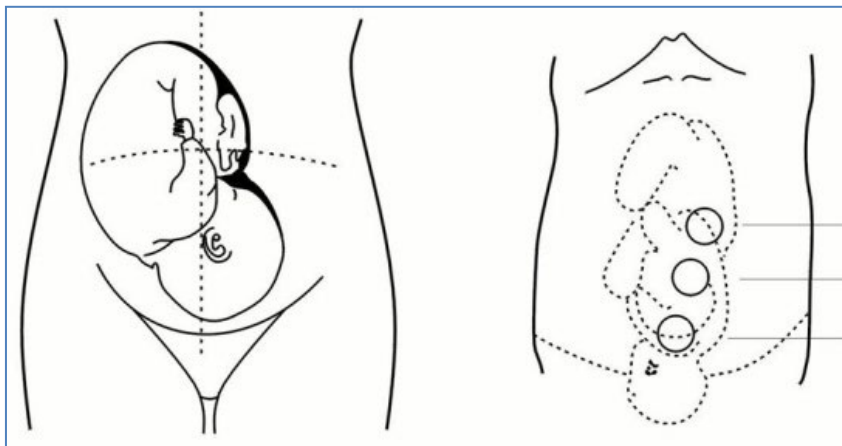

Sikkerhedsadvarsler

Undgå at bruge enheden i et miljø med en potentiel risiko for eksplosion, høj eller meget lav temperatur eller fugtighed i nærheden af åben ild. Vi anbefaler, at du ikke bruger enheden udendørs.

Tør altid gelen af enheden efter overvågning.

Brug ikke enheden, hvis den viser tegn på skade!

Hvis du rengør din enhed, skal du altid holde den slukket.

Specifikationer

Dimensioner: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustisk frekvens: 3,0MHz±5%

Effektivt optageområde: 7,4 cm²

God drift: 4-6 timer

Batteri: 9V

Vandtæthed: IP22

Vilkår for brug: 5-40 °C

Tuotteen esittely


AngelSounds JPD-200S on kevyt ja kannettava ilmaisin lapsen sikiön sydämenlyöntien kuunteluun.

Huomautus: Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi sikiön on oltava vähintään 20 viikkoa vanha. Keskustele lääkärisi kanssa laitteen käytöstä.

Pakkauksen sisältö

AngelSounds JPD-200S, jack-jack-kaapeli, kuulokkeet, akku, käyttöohje

Käytön perusteet

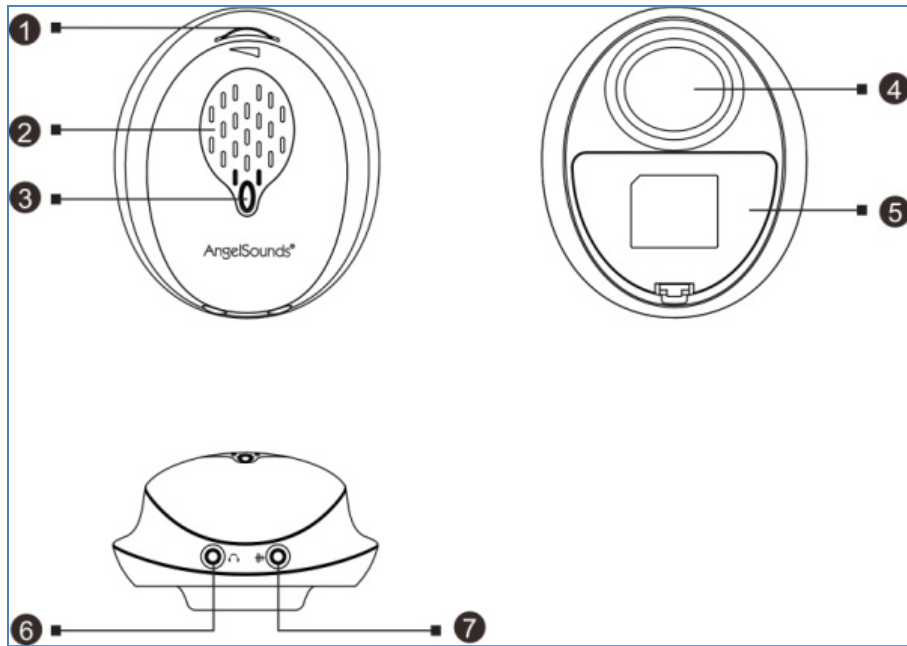

1 - Virta päälle / pois; Äänenvoimakkuuden säätö

2 - Kaiutin

3 - Tilan ilmaisin

4 - Signaalin siirto

5 - Akun kansi

6 - Kuulokeliitännä


7 - Liitännä tallennuskaapelia varten

Käynnistä laite kääntämällä pyörää (1), LED syttyy kytkeäksesi sen päälle.

Pyörän asteittainen kääntäminen lisää äänenvoimakkuutta, kääntäminen vastakkaiselle puolelle vähentää vähitellen ääntä, kunnes laite sammuu kokonaan.


Voit kuunnella sydänääniä joko kaiuttimesta tai liittämällä kuulokkeet sopivaan liittimeen (6).

Ääntä voidaan myös tallentaa. Liitä laite ja matkapuhelin kaapelilla ja aloita äänen tallennus.

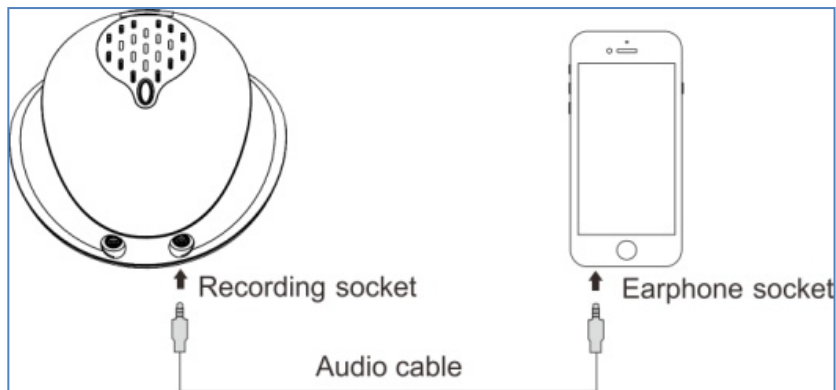

Akku

Akku mukana. Se sijaitsee suoraan laitteessa, mutta sitä ei ole kytketty. Ennen ensimmäistä käyttöä akku on kytkettävä seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Poista kansi (5) ja kytke akku.

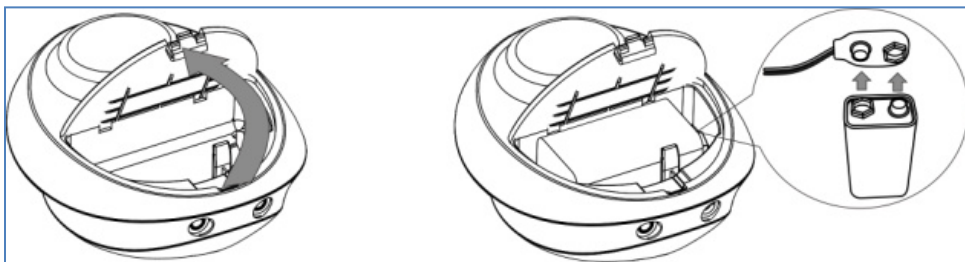


Ilmaisimien tilat

Indikaattorin tila	Operatiivinen tila
Palaa vihreänä	Laitteeseen on kytketty virta
Vilkkuu vihreänä	Laitte kytetään päälle ja sieppaa sikiön äänen
Vilkkuu oranssina	Laitte on ladattava

Miten löytää sikiön sydän

Levitä pieni geeli anturiin (4) ja aseta se vatsallesi. Siirrä sitä hitaasti yrittäen löytää sikiön sydämen. Kun olet löytänyt äänen, jatka anturin siirtämistä hitaasti etsimällä paikkaa, jossa äänisignaali on selkein.

Sikiön tavallinen sijainti näkyy seuraavassa kuvassa. Sikiön asema voi kuitenkin vaihdella raskauden vaiheen ja muiden olosuhteiden mukaan.

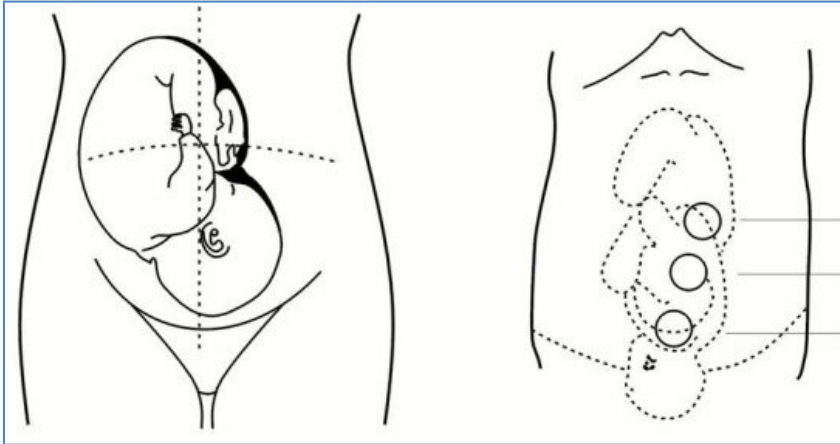

Turvallisuusvaroitukset

Vältä laitteen käyttöä ympäristössä, jossa on räjähdysvaara, korkea tai erittäin matala lämpötila tai kosteus, avotulen lähellä. Suosittelemme, että et käytä laitetta ulkona.

Pyyhi geeli aina laitteesta seurannan jälkeen.

Älä käytä laitetta, jos siinä on merkkejä vaurioista!

Jos puhdistat laitetta, pidä se aina pois päältä.

Eritelmät

Mitat: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustinen taajuus: 3.0MHz±5%

Tehokas tallennusalue: 7,4 cm²

Hyvä toiminta: 4-6 tuntia

Akku: 9V

Vedenpitävyys: IP22

Käyttöehdot: 5-40 °C

Produkt introduktion


AngelSounds JPD-200S är en lätt och bärbar detektor för att lyssna på hjärtslag hos ett barns foster.

Obs: För korrekt funktion måste fostret vara minst 20 veckor gammalt. Rådgör med din läkare om användningen av enheten.

Paketets innehåll

AngelSounds JPD-200S, jack-jack-kabel, hörlurar, batteri, manuell

Grunderna för användning

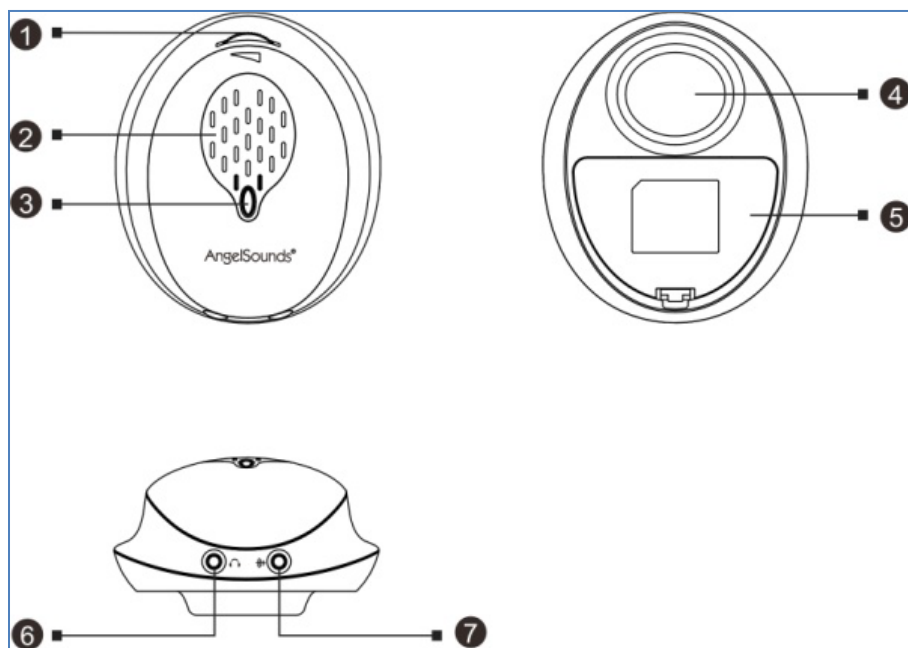

1 - Ström på / av; Volymjustering 2 - Högtalare


3 - Statusindikator

4 - Signalöverföring 5 - Batterilucka 6 - Hörlursanslutning 7 - Anslutning för inspelningskabel

Slå på enheten genom att vrida på ratten (1), lysdioden tänds för att slå på den. Gradvis vridning av hjulet lägger till volym, vridning till motsatt sida minskar ljudet gradvis tills enheten är helt avstängd.


Du kan lyssna på hjärtljud antingen från en högtalare eller genom att ansluta hörlurar till lämpligt uttag (6).

Ljud kan också spelas in. Anslut din enhet och mobiltelefon med en kabel och starta ljudinspelning.

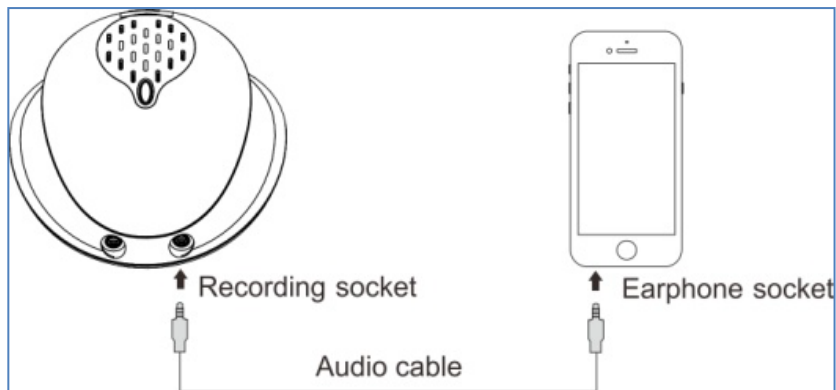

Batteri

Batteri ingår. Den ligger direkt på enheten, men är inte ansluten. Före första användningen måste batteriet anslutas enligt följande bild. Ta bort locket (5) och anslut batteriet.

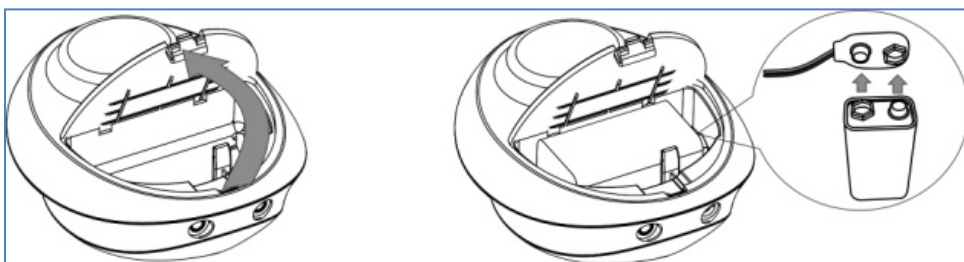


Indikatorstatus

Indikatorns status	Driftstatus
Lyser grönt	Enheten är påslagen
Blinkar grönt	Enheten är påslagen och fångar fostrets ljud
Blinkande orange	Enheten måste laddas

Hur man hittar fostrets hjärta

Applicera lite gel på sonden (4) och placera den på magen. Flytta det långsamt och försök hitta fostrets hjärta. Efter att ha hittat ljudet, fortsätt att flytta sonden långsamt och leta efter den plats där ljudsignalen blir tydligast. Fostrets vanliga position kan ses i följande bild. Fostrets position kan dock variera beroende på graviditetsstadiet och andra tillstånd.

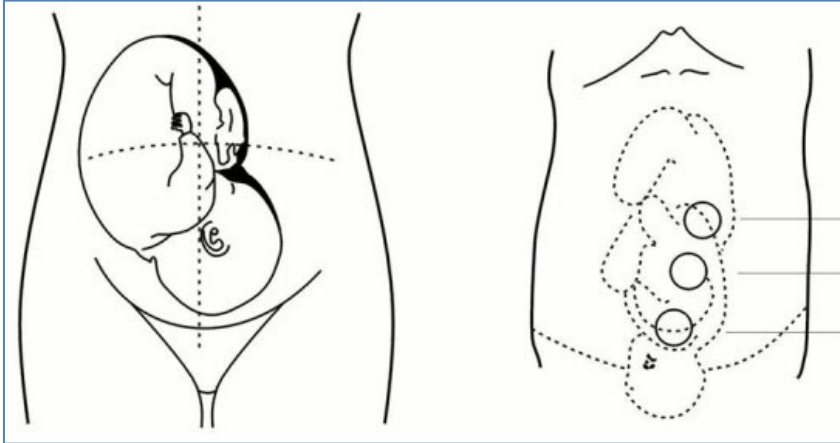

Säkerhetsvarningar

Undvik att använda enheten i en miljö med potentiell explosionsrisk, hög eller mycket låg temperatur eller luftfuktighet, nära öppen låga. Vi rekommenderar att du inte använder enheten utomhus.

Torka alltid bort gelen från enheten efter övervakning.

Använd inte enheten om den visar tecken på skador!

Om du rengör enheten ska du alltid ha den avstängd.

Specifikationer

Mått: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustisk frekvens: 3.0MHz±5%

Effektiv inspelningsyta: 7,4 cm²

Bra drift: 4-6 timmar

Batteri: 9V

Vattentålighet: IP22

Villkor för användning: 5-40 °C

Εισαγωγή προϊόντος


Το AngelSounds JPD-200S είναι ένας ελαφρύς και φορητός ανιχνευτής για την ακρόαση των καρδιακών παλμών του εμβρύου ενός παιδιού.

Σημείωση: Για σωστή λειτουργία, το έμβρυο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εβδομάδων. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

AngelSounds JPD-200S, καλώδιο jack-jack, ακουστικά, μπαταρία, εγχειρίδιο


Βασικά στοιχεία χρήσης

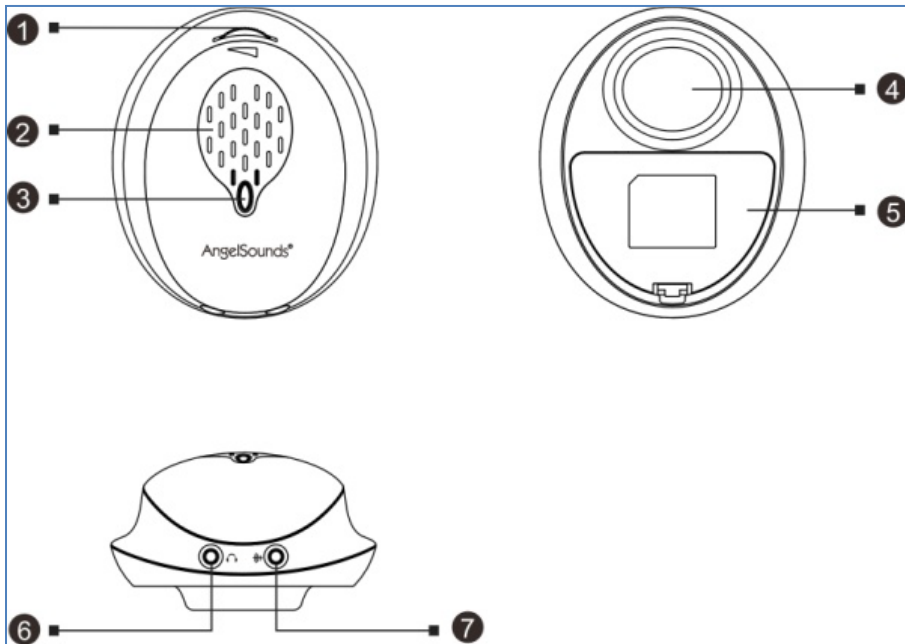

- 1 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Ρύθμιση έντασης
- 2 - Μεγάφωνο
- 3 - Ένδειξη κατάστασης
- 4 - Μετάδοση σήματος
- 5 - Κάλυμμα μπαταρίας
- 6 - Σύνδεση ακουστικών
- 7 - Σύνδεση για καλώδιο εγγραφής


Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας τον τροχό (1), η λυχνία LED ανάβει για να την ενεργοποιήσετε. Η σταδιακή περιστροφή του τροχού προσθέτει ένταση, η στροφή προς την αντίθετη πλευρά μειώνει σταδιακά τον ήχο μέχρι να απενεργοποιηθεί πλήρως η συσκευή.

Μπορείτε να ακούσετε καρδιακούς ήχους είτε από ένα μεγάφωνο είτε συνδέοντας ακουστικά στην κατάλληλη υποδοχή (6). Ο ήχος μπορεί επίσης να εγγραφεί. Συνδέστε τη συσκευή και το κινητό σας τηλέφωνο με ένα καλώδιο και ξεκινήστε την εγγραφή ήχου.

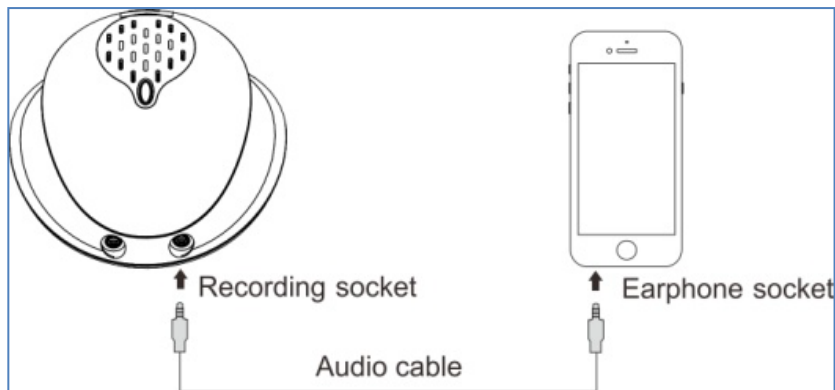

Μπαταρία

Περιλαμβάνεται μπαταρία. Βρίσκεται απευθείας στη συσκευή, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο. Πριν από την πρώτη χρήση, η μπαταρία πρέπει να συνδεθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αφαιρέστε το κάλυμμα (5) και

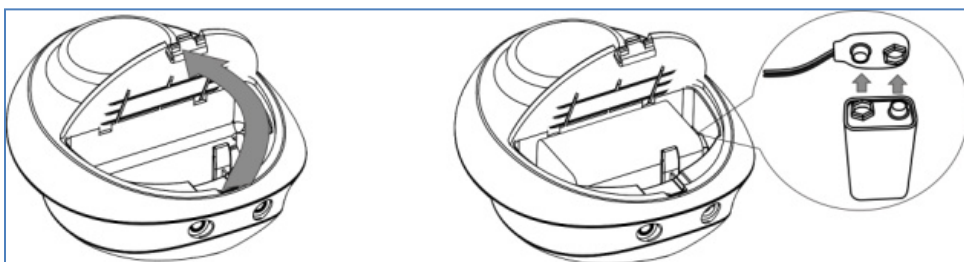


συνδέστε την μπαταρία.

Καταστάσεις δεικτών

Κατάσταση δείκτη	Επιχειρησιακό καθεστώς
Ανάβει πράσινο	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη
Αναβοσβήνει πράσινο	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και καταγράφει τον ήχο του εμβρύου
Αναβοσβήνει πορτοκαλί	Η συσκευή πρέπει να επαναφορτιστεί

Πώς να βρείτε την καρδιά του εμβρύου

Εφαρμόστε λίγο τζελ στον καθετήρα (4) και τοποθετήστε το στο στομάχι σας. Μετακινήστε το αργά, προσπαθώντας να βρείτε την καρδιά του εμβρύου. Αφού βρείτε τον ήχο, συνεχίστε να μετακινείτε αργά τον καθετήρα, αναζητώντας τον τόπο όπου το ηχητικό σήμα θα είναι καθαρότερο. Η συνήθης θέση του εμβρύου μπορεί να φανεί στην παρακάτω εικόνα. Ωστόσο, η θέση του εμβρύου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το στάδιο της εγκυμοσύνης και άλλες συνθήκες.

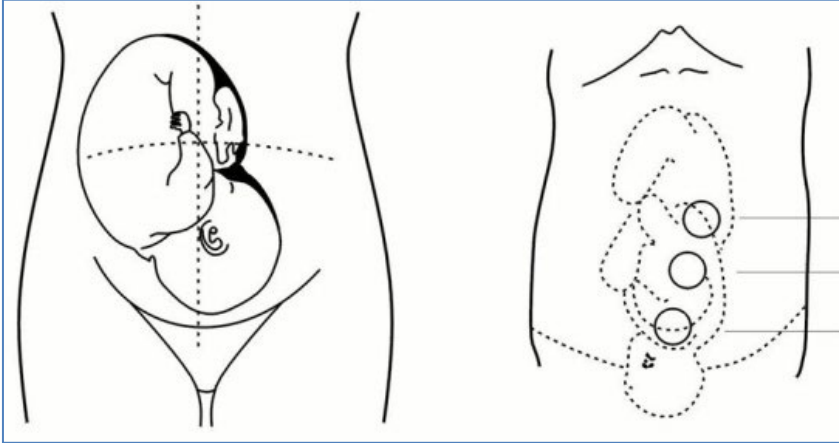

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με πιθανό κίνδυνο έκρηξης, υψηλής ή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας, κοντά σε ανοικτή φλόγα. Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Σκουπίζετε πάντα το τζελ από τη συσκευή μετά την παρακολούθηση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει σημάδια ζημιάς! Αν καθαρίζετε τη συσκευή σας, να την έχετε πάντα απενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Ακουστική συχνότητα: 3.0MHz±5%

Αποτελεσματική περιοχή καταγραφής: 7,4 cm²

Καλή λειτουργία: 4-6 ώρες

Μπαταρία: 9V

Αντοχή στο νερό: IP22

Όροι χρήσης: 5-40 °C

Produkto pristatymas


AngelSounds JPD-200S yra lengvas ir nešiojamas detektorius, skirtas klausytis vaiko vaisiaus širdies plakimo.

Pastaba: Norint tinkamai funkcionuoti, vaisius turi būti bent 20 savaičių amžiaus. Pasitarkite su gydytoju dėl prietaiso naudojimo.

Pakuote sudaro:

AngelSounds JPD-200S, lizdo lizdo laidas, ausinės, akumulatorius, vadovas

Naudojimo pagrindai

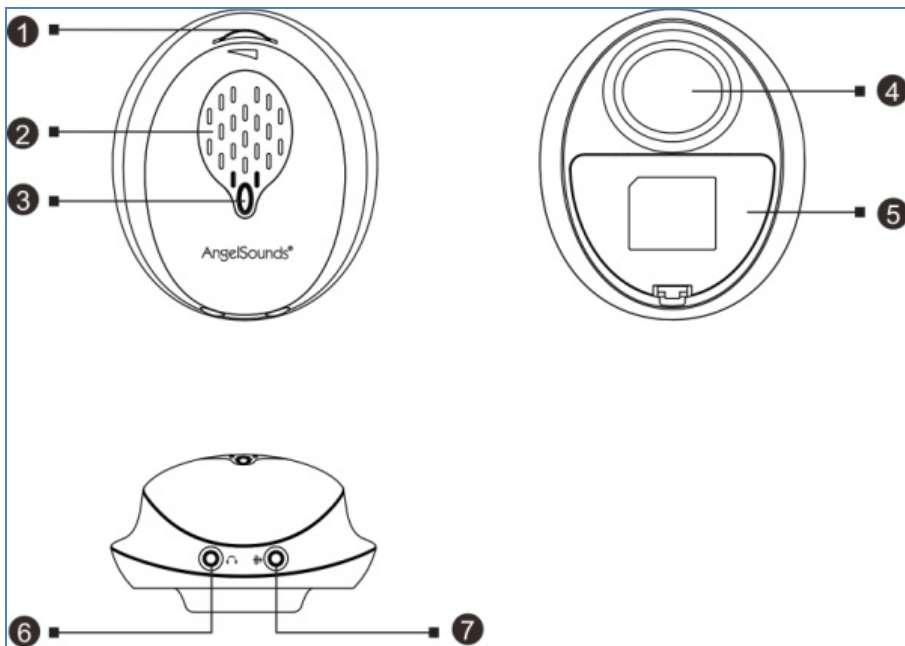

1 - Įjungimas / išjungimas; Garsumo reguliavimas 2 - garsiakalbis

3 - būsenos indikatorius


4 - Signalo perdavimas 5 - Akumulatoriaus dangtelis 6 - Ausinių jungtis 7 -

Kabelio įrašymo jungtis

Įjunkite prietaisą sukdami ratą (1), užsidega šviesos diodas, kad jį įjungtumėte. Palaipsniui sukant ratą padidėja garsumas, pasukus į priešingą pusę palaipsniui sumažėja garsas, kol prietaisas bus visiškai išjungtas.


Galite klausytis širdies garsų per garsų garsiakalbį arba prijungę ausines prie atitinkamo lizdo (6).

Taip pat galima įrašyti garsą. Prijunkite įrenginį ir mobiliąjį telefoną kabeliu ir pradėkite garso įrašymą.

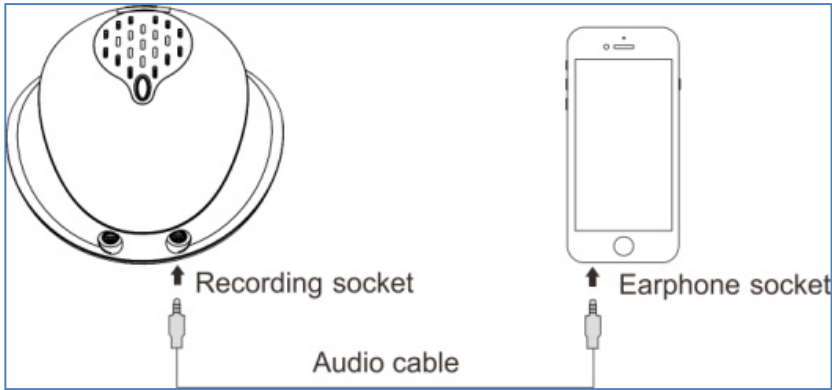

Akumulatorius

Priedama baterija. Jis yra tiesiai ant įrenginio, bet nėra prijungtas. Prieš pirmą kartą naudojant, akumuliatorius turi būti prijungtas, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Nuimkite dangtelį (5) ir prijunkite akumuliatorių.

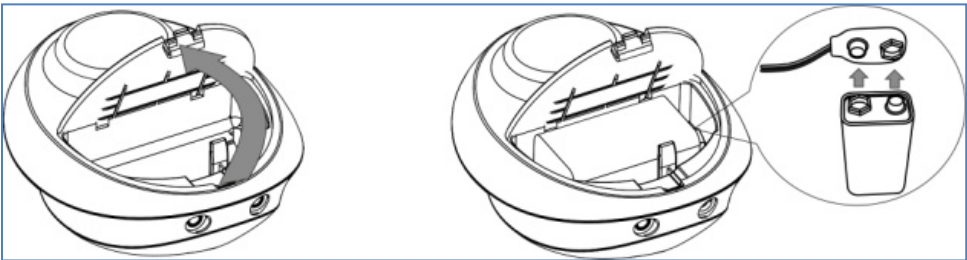


Indikatoriaus būsenos

Indikatoriaus būseną	Veiklos statusas
Užsidega žaliai	Įrenginys įjungtas
Mirksi žalia	Prietaisas įjungtas ir užfiksuoja vaisiaus garsą
Mirksi oranžinė spalva	Įrenginį reikia įkrauti

Kaip rasti vaisiaus širdį

Užtepkite šiek tiek gelio ant zondo (4) ir padėkite jį ant skrandžio. Judėkite lėtai, bandydami rasti vaisiaus širdį. Suradę garsą, toliau lėtai judinkite zondą, ieškodami vietos, kur garso signalas bus aiškiausias.

Įprastą vaisiaus padėtį galima pamatyti šiame paveikslėlyje. Tačiau vaisiaus padėtis gali skirtis priklausomai nuo nėštumo stadijos ir kitų sąlygų.

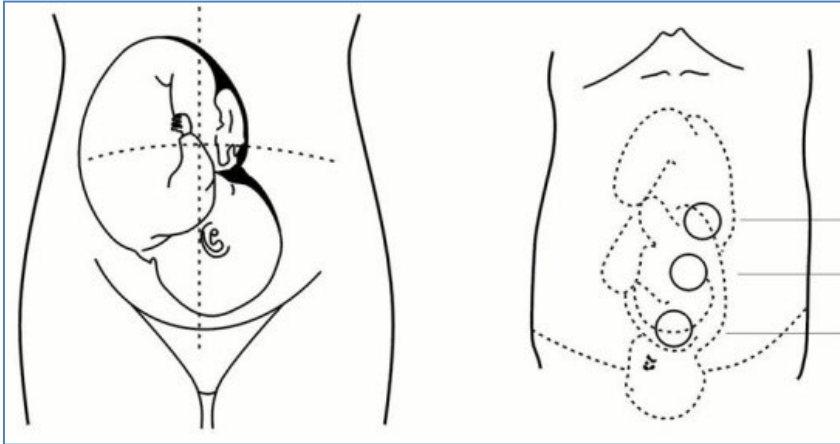

Saugos
įspėjimai

Venkite naudoti prietaisą aplinkoje, kurioje gali kilti sprogo pavojaus, aukšta arba labai žema temperatūra ar drėgmė, šalia atviros liepsnos.

Rekomenduojame nenaudoti prietaiso lauke.

Po stebėjimo visada nuvalykite gelį nuo prietaiso.

Nenaudokite prietaiso, jei jis turi pažeidimo požymių!

Jei valote įrenginį, visada laikykite jį išjungtą.

Specifikacijos

Matmenys: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustinis dažnis: 3.0MHz±5%

Efektyvus įrašymo plotas: 7.4 cm²

Geras darbas: 4-6 valandos

Baterija: 9V

Atsparumas vandeniui: IP22

Naudojimo sąlygos: 5-40 °C

Produktu ieviešana

AngelSounds JPD-200S ir viegls un pārnēsājams detektors, lai klausītos bērna augļa sirdsdarbību.


Piezīme: Pareizai darbībai auglim jābūt vismaz 20 nedēļu vecam.

Konsultējieties ar ārstu par ierīces lietošanu.

Iepakojuma saturs

AngelSounds JPD-200S, ligzdas kabelis, austiņas, akumulators, rokasgrāmata

Lietošanas pamati

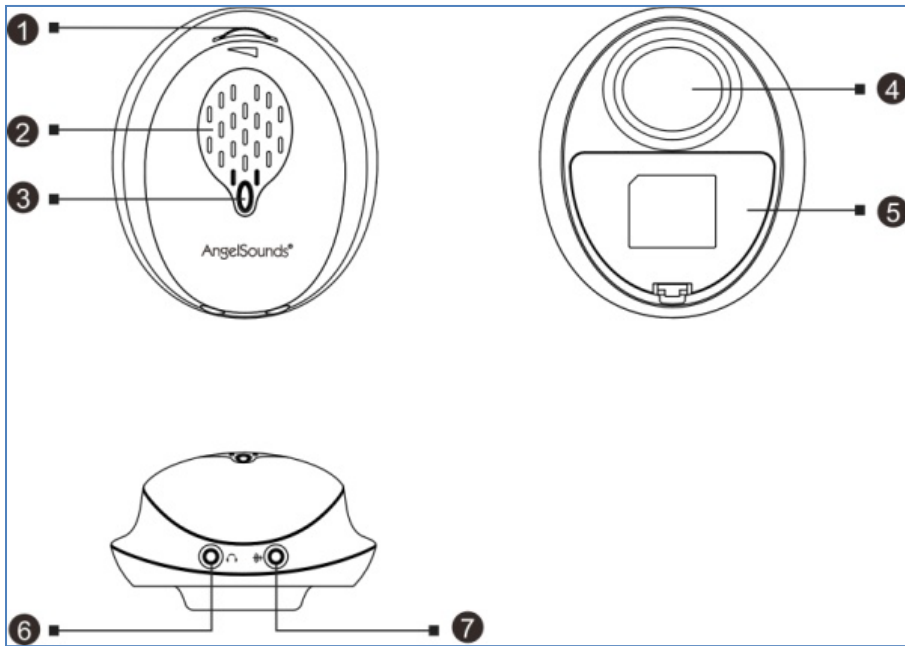

1 - ieslēgšana/izslēgšana; Skaļuma regulēšana 2 - skaļrunis

3 - statusa indikators

4 - Signāla pārraide 5 - Akumulatora vāks 6 - Austiņu savienojums 7 -


Savienojums kabeļa ierakstīšanai

Ieslēdziet ierīci, pagriežot riteni (1), gaismas diode iedegas, lai to ieslēgtu.

Pakāpeniski pagriežot riteni, palielinās skaļums, pagriežoties uz pretējo pusi, pakāpeniski samazinās skaņa, līdz ierīce ir pilnībā izslēgta.


Jūs varat klausīties sirds skaņas vai nu no skaļa skaļruņa, vai savienojot austiņas ar atbilstošo ligzdu (6).

Var arī ierakstīt audio. Savienojiet ierīci un mobilo tālruni ar kabeli un sāciet audio ierakstīšanu.

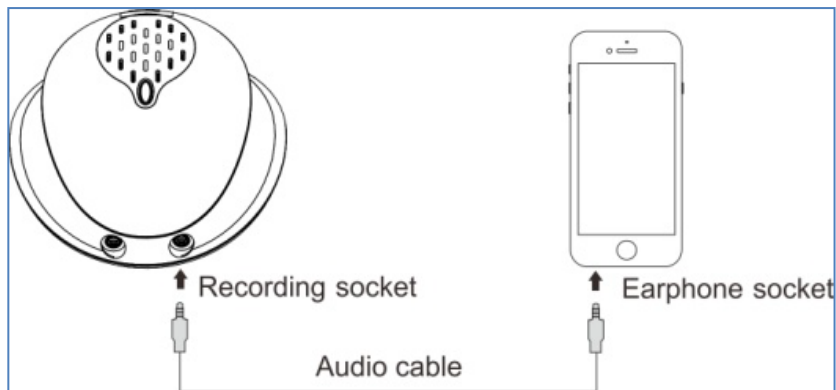

Baterija

Akumulators iekļauts komplektā. Tas atrodas tieši ierīcē, bet nav savienots. Pirms pirmās lietošanas akumulators ir jāpievieno, kā parādīts nākamajā attēlā. Noņemiet vāciņu (5) un pievienojiet akumulatoru.

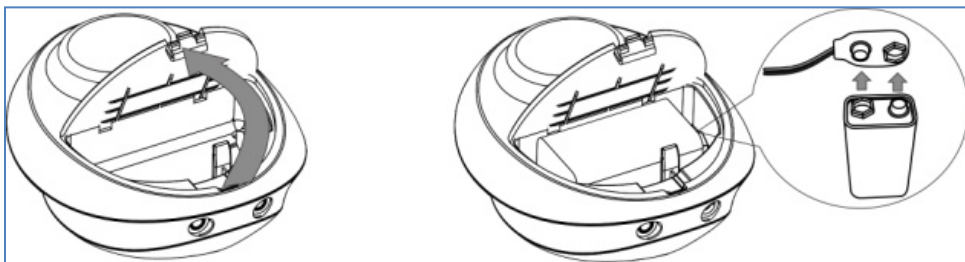


Indikatoru statusi

Indikatora statuss	Darbības statuss
Iedegas zaļā krāsā	Ierīce ir ieslēgta
Mirgo zaļš	Ierīce ir ieslēgta un uztver augļa skaņu
Mirgojošs oranžs	Ierīce ir jāuzlādē

Kā atrast augļa sirdi

Uz zondes (4) uzklājiet nedaudz želejas un novietojiet to uz vēdera. Pārvietojiet to lēnām, mēģinot atrast augļa sirdi. Pēc skaņas atrašanās turpiniet lēnām pārvietot zondi, meklējot vietu, kur skaņas signāls būs skaidrākais. Parastais augļa stāvoklis ir redzams nākamajā attēlā. Tomēr augļa stāvoklis var atšķirties atkarībā no grūtniecības stadijas un citiem apstākļiem.

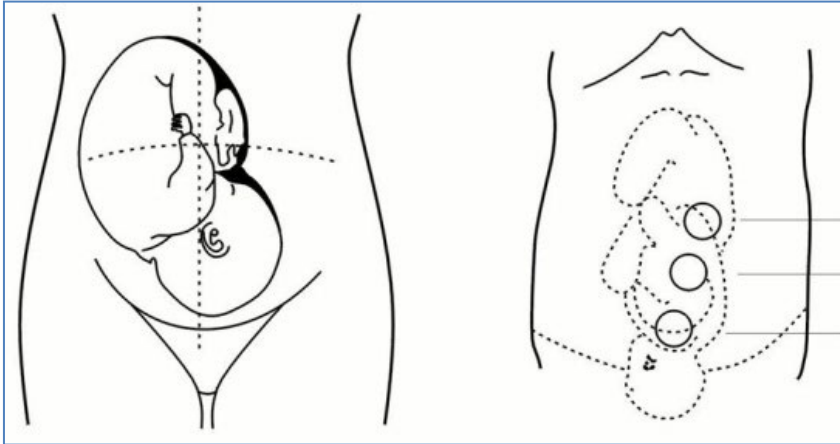

Drošības brīdinājumi

Izvairieties no ierīces lietošanas vidē ar potenciālu eksplozijas, augstas vai ļoti zemas temperatūras vai mitruma risku atklātas liesmas tuvumā. Mēs iesakām nelietot ierīci ārpus telpām.

Pēc uzraudzības vienmēr noslaukiet želeju no ierīces.

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes!

Ja tīrāt ierīci, vienmēr turiet to izslēgtu.

Specifikācijas

Izmēri: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustiskā frekvence: 3.0MHz±5%

Efektīvais reģistrācijas laukums: 7,4 cm²

Laba darbība: 4-6 stundas

Akumulators: 9V

Ūdens izturība: IP22

Lietošanas noteikumi: 5-40 °C

Toote tutvustus


AngelSounds JPD-200S on kerge ja kaasaskantav detektor lapse loote südamelöökide kuulamiseks.

Märkus: Nõuetekohaseks toimimiseks peab loode olema vähemalt 20 nädalat vana. Seadme kasutamise osas pidage nõu oma arstiga.

Pakendi sisu

AngelSounds JPD-200S, pistikupesa kaabel, kõrvaklapid, aku, kasutusjuhend

Kasutamise alused

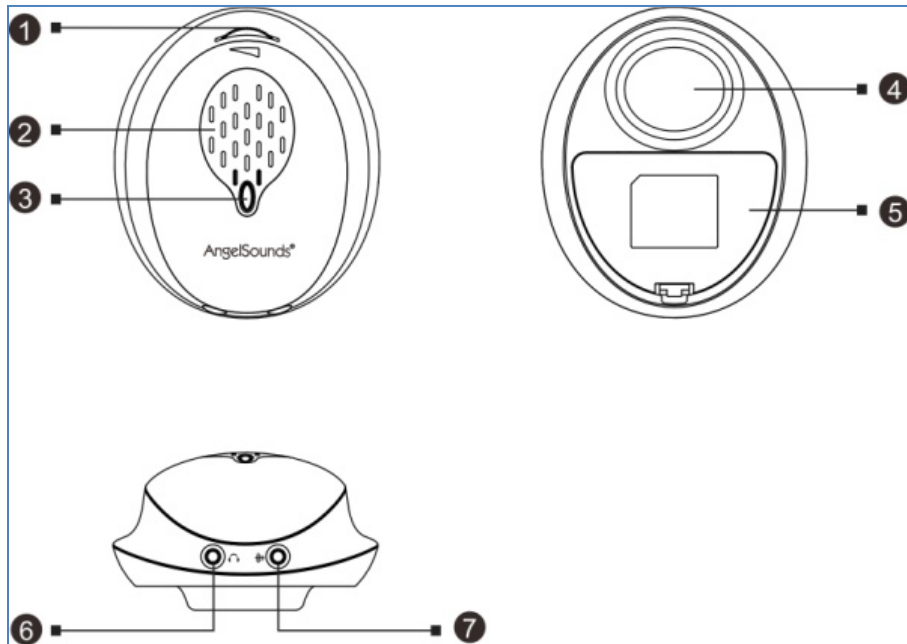

1 – toide sisse/välja; Helitugevuse reguleerimine

2 - valjuhääldi

3 - oleku indikaator

4 - signaali edastamine

5 - aku kate


6 - kõrvaklappide ühendus

7 - ühenduskaabli salvestamiseks

Lülitage seade sisse, keerates ratast (1), LED süttib selle sisselülitamiseks. Ratta järkjärguline pööramine lisab helitugevust, vastasküljele pööramine vähendab heli järkjärgult, kuni seade on täielikult välja lülitatud.

Südamehelisid saate kuulata kas valjuhääldist või ühendades kõrvaklapid sobiva pesaga (6).


Heli saab ka salvestada. Ühendage seade ja mobiiltelefon kaabli abil ning alustage helisalvestust.

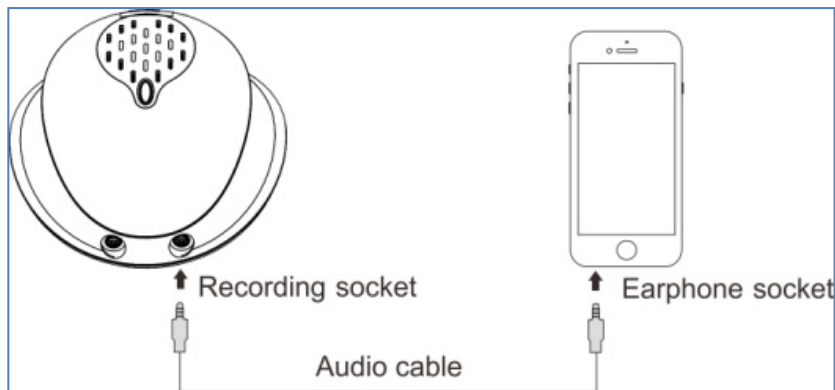

Patarei

Aku komplektis. See asub otse seadmes, kuid pole ühendatud. Enne esimest kasutamist peab aku olema ühendatud järgmisel pildil näidatud viisil.

Eemaldage kaas (5) ja ühendage aku.

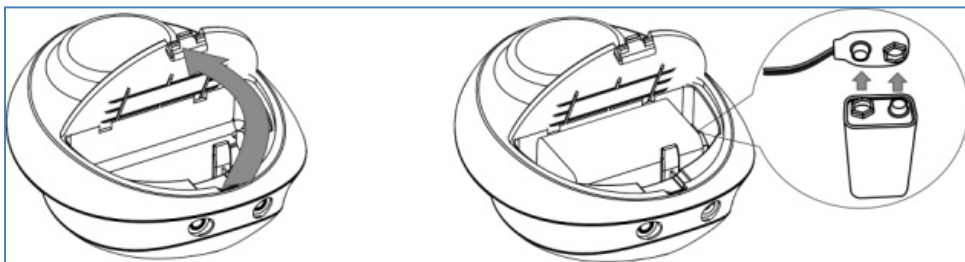


Indikaatorite olekud

Indikaatori olek	Töö olek
Süttib roheliselt	Seade on sisse lülitatud
Vilgub roheliselt	Seade on sisse lülitatud ja salvestab loote heli
Vilgub oranž	Seadet tuleb laadida

Kuidas leida loote süda

Kandke sondile (4) veidi geeli ja asetage see kõhule. Liigutage seda aeglaselt, püüdes leida loote südant. Pärast heli leidmist jätkake sondi aeglaselt liigutamist, otsides kohta, kus helisignaali on kõige selgem.

Loote tavalist asendit võib näha järgmisel pildil. Kuid loote asend võib varieeruda sõltuvalt raseduse staadiumist ja muudest tingimustest.

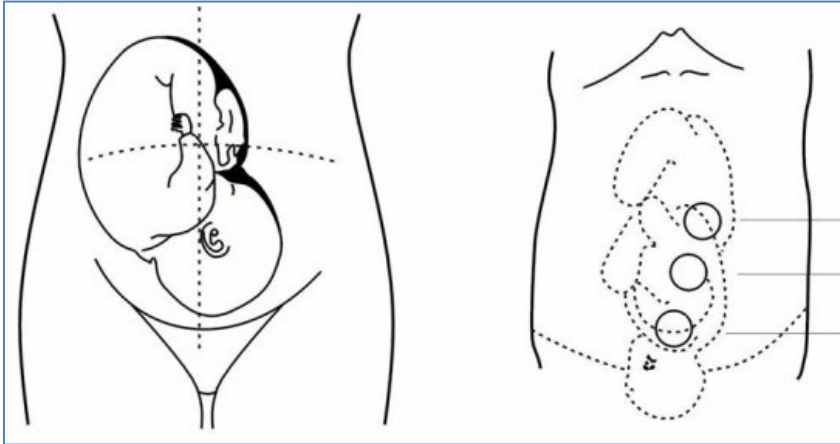

Ohutushoiatused

Vältige seadme kasutamist keskkonnas, kus on võimalik plahvatusoht, kõrge või väga madal temperatuur või niiskus, lahtise leegi lähedal. Soovitame seadet õues mitte kasutada.

Pärast jälgimist pühkige geel alati seadmest ära.

Ärge kasutage seadet, kui sellel on märke kahjustustest!

Kui puhastate seadet, hoidke seda alati välja lülitatud.

Spetsifikatsioonid

Möödud: 100 mm × 85 mm × 50 mm ; 0,15 kg

Akustiline sagedus: 3.0MHz±5%

Efektiivne salvestuspind: 7.4 cm²

Hea töö: 4-6 tundi

Aku: 9V

Veekindlus: IP22

Kasutustingimused: 5-40 °C