

Használati utasítás (HU)
SoftCup™
Speciális babapohár

Rendeltetés

A SoftCup speciális babapohár csecsemők anytejével vagy más, hasonló összetételű folyadékkal történő etetéséhez használható.

Fontos biztonsági információk

Használat előtt tanulmányozza át a használati utasítást

- I A terméket kizárólag a használati utasításban leírt rendeltetési célra használja.
- I Ha több csecsemő is használja megfelelő újrafeldolgozás nélkül, egészségügyi kockázat állhat fenn, és keresztfer-tőzés következhet be.
- I Csak eredeti Medela tartozékokat használjon.
- I Vizsgálja meg minden használat előtt. Ha a károsodás, penész vagy elhasználódás első jeleit tapasztalja, azonnal dobja ki.
- I A csomagolást és az alkatrészeket ne hagyja felügyelet nélkül. Gyermekektől távol tartandó.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁST GONDOSAN ŐRIZZE MEG

Fontos biztonsági előírások

- I A műanyag palackok és alkatrészek fagyasztáskor törékennyé válnak és leejtéskor eltörhetnek.
- I Valamint a palackok és az alkatrészek megsérülhetnek a helytelen használat során, például leejtés, túlfeszítés, vagy fellökés esetén.
- I A palackokat és az alkatrészeket kellő óvatossággal kezelje.
- I Ha a palack vagy az alkatrészek megsérültek, ne használja fel a folyadékot.

Tisztítás

Fontos

- I A tisztításhoz csak ivóvíz minőségű vizet szabad használni.
- I Az első használat előtt minden alkatrészt újrarendelését végezze el (lásd lent).
- I Használat után minden alkatrészt azonnal meg kell tisztítani.
- I A pohár tisztításakor ne fordítsa ki a tartórészt.
- I Ne tisztítsa a tartórészt éles vagy kemény tárggyal (például kefével, fogpiszkálóval vagy éles körömmel).
- I Az alábbi tisztítási utasítások általános utasítások. Az országspecifikus szabályokkal és irányelvekkel kapcsolatban kérdezze a Medela képviselőjét, vagy keresse fel a weboldalunkat (www.medela.com).

Minden használat után

- I Szerelje szét a poharat részekre. Ellenőrizze, hogy a sárga szeleplemez le legyen választva a tartórésztől. A fehér membránt is vegye le a szeleplemezről.

Megjegyzés: A palackban maradt tejet újra felhasználhatja. A tartórészben maradt tejet viszont ki kell dobni. Ehhez tartsa a poharat a mosogató fölé. Óvatosan csavarozza le a fedelet, és távolítsa el a tartórészt és a szeleplemezzel együtt úgy, hogy a tej ne ömöljön ki. A tartórészben lévő maradék tejet ne használja fel.

- I Öblítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C-os). Alaposan öblítse el a tartórész párnáit (illetve a bennük lévő részt), hogy a lehető legtöbb tejmaradékot távolíthassa el.
- I Tisztítsa meg az összes részt bő, meleg (kb. 30 °C-os) szappanos vízzel. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószert, lehetőleg mesterséges illat- és színezőanyagoktól mentes változatot (kórházi használatra: 5–15% anionos felületaktív anyagok, nem ionos felületaktív anyagok, pH-semleges).
- I Öblítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C-os).
- I Törölje szárazra tiszta ruhával, vagy hagyja egy tiszta ruhán száradni.
- I Ezenkívül a terméket mosogatógéppben is elmoshatja. Helyezze az alkatrészeket a felső rácsra vagy az evőeszközrészbe. Használjon kereskedelemben kapható mosogatószert.

Ötthoni használat:

Az első használat előtt, majd naponta egyszer

- I A poharat a „Minden használat után” szakaszban leírtak szerint tisztítsa meg.
- I A poharat a „Fertőtlenítés” szakaszban leírtak szerint fertőtlenítse.

Kórházi használat:

Az első használat előtt – naponta egyszer – a másik csecsemőnek való átadás előtt

- I A poharat a „Fertőtlenítés” szakaszban leírtak szerint tisztítsa meg és fertőtlenítse.
- I Amennyiben nemzeti, regionális vagy belső szabályozások előírják, sterilizálja a poharat a „Sterilizálás” szakaszban leírtak szerint.

Fertőtlenítés

Ötthoni használat:

- I Öntsön a lábába annyi vizet, hogy ellepje az alkatrészeket, és forralja 5 percig.
- I Vagy az utasításoknak megfelelően használjon Quick Clean Microwave Bag tasakot.
- I Törölje szárazra tiszta ruhával, vagy hagyja egy tiszta ruhán száradni.

Kórházi használat:

- I Tisztítsa meg és fertőtlenítse az összes alkatrészt egy mechanikus fertőtlenítő mosogatóban. A kis alkatrészekhez használjon megfelelő betéteket. Használjon szokványos tisztítószert a fertőtlenítő mosogatóban (nitriltriocetsav-, foszfát-, klór- és tenzidmentes, lúgos, pH-érték 11,7–12,7).
- I Fertőtlenítse 5 percig 93 °C-os hőmérsékleten.
- I Válassza ki a megfelelő, szárítást is tartalmazó programot a fenti utasítások alapján. Ha nincs szárítást tartalmazó program, minden alkatrészt töröljön szárazra tiszta ruhával, vagy hagyja azokat egy tiszta ruhán száradni.

Sterilizálás

Kórházi használat:

- I Ellenőrizze, hogy a termék alkatrészei tiszták, szárazak és sértetlenek-e.
- I Csomagolja be a termék alkatrészeit a megfelelő steril csomagolással.
- I Az autoklavban a terméket 134 °C-on 5 percig sterilizálja. A sérülések elkerülése érdekében ne halmozza egymásra az alkatrészeket, és ne alkalmazzon külső nyomást.


Tárolás

A tiszta alkatrészeket tegye tiszta tárolótáskába, vagy tartsa tiszta környezetben. Fontos, hogy minden maradék nedvesség megszáradjon. Ne tartsa az alkatrészeket légmentesen záródó tárolóban/táskában.

A használat módja


- I A SoftCup terméket a pohár alternatívájaként is használhatja.
- I Javasoljuk, hogy az anya a SoftCup termékkel való első szoptatását/szoptatásait professzionális/képzett személyzet felügyelete alatt végezze.
- I Mielőtt a termékhez (az alkatrészekhez) érne, alaposan mosson kezet vízzel és szappannal. Szárítsa meg a kezét tiszta törölközővel vagy egyszer használatos papírtörölközővel.
- I Szoptatás előtt mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét.

A pohár összeszerelése

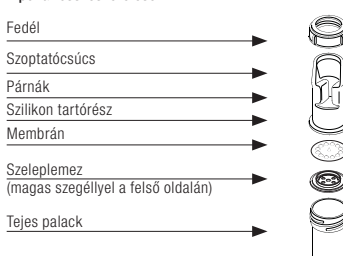

- I Tartsa a szeleplemezt úgy, hogy közben a magas szegély felé nézzen. Helyezze a fehér membránt a szeleplemezre, a szegély belsejébe. A membrán gombját teljesen nyomja át a szeleplemez középső nyílásán.
- I Töltse meg a palackot a szükséges mennyiségű folyadékkal.
- I Helyezze az összeszerelt szelepet a magas szegéllyel felfelé a palack nyílására.
- I Helyezze a tartórészt a szeleplemezre úgy, hogy a szegély a tartórészen belül legyen.
- I Csúsztassa a fedelet a tartórész fölé. Minden alkatrészt szorosan csavarozzon össze a fedéllel.

Az etető cumi megtöltése

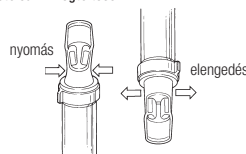

- I Tartsa a poharat felfelé. Nyomja meg közvetlenül a párnák alatt, hogy egy kis levegő távozzon a tartórészből (lásd a lenti képen).
- I Folyamatosan nyomja, amíg a pohár fejfelé tartja.
- I Most engedje el a párnákat. A tartórészbe kis folyadék kerül.
- I Ismétlje meg a fenti lépéseket addig, amíg a tartórész majdnem megtelik.
- Megjegyzés:** Ha a tartórész nem töltődik meg rendszeresen, ellenőrizze, hogy a párnán lévő rés nyitva van-e. A folyadék áramlásának elősegítéséhez erősebb nyomást fejtson ki az ujjával.

Szoptatás

- I A poharat tartsa vízszintesen, kicsit felfelé döntve (lásd a jobb oldali képet). Ha a palackot így tartja, szoptatás közben automatikusan újratöltheti a tartórészt, ha megnyomja a párnák alatti részt.
- I Óvatosan nyomja meg a tartórész két oldalán lévő két párnát, hogy a folyadék a tartórész szoptatócsúcsába jusson.
- I Érintse meg a csecsemő ajkát a tartórész csúcsával, hogy a csecsemő kinyissa a száját.
- I Helyezze a tartórészt a csecsemő alsó ajkára (a szoptatócsúccsal felfelé). Óvatosan koppintson a pohárra, hogy a tartórészben összegyűlt folyadékkal meg lehessen etetni a csecsemőt. Általában a csecsemő automatikusan inni kezdi a folyadékot.
- Megjegyzés:** Ha a pohár szívógör, ellenőrizze, hogy a pohár megfelelően össze van-e szerelve.

Termékváltozatok és pótalkatrészek

Cikksz.	Leírás
820.7004	Tartórész, 1 (kórház)
800.0852	Teljes szeleplemez, 25 (kórház)
810.7066	Fedél, 1 (kórház)
810.0137	Palack, 1 (kórház)

Anyag: Tartórész és szeleplemembrán: szilikon; többi: polipropilén.
Ártalmatlanítás: Az országban érvényben lévő szabályozás szerint.



Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a csomagolás olyan termékeket tartalmaz, amelyek az 1935/2004/EK rendeletnek megfelelően rendeltetésszerűen kerülnek érintkezésbe élelmiszerekkel.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz napfénytől távol tartandó.

