GIO-356

innoGIO




GIOmum Line Handy

viselhető elektromos mellszívó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A viselhető mellszívó használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.


Termék szerkezeti ábra 01

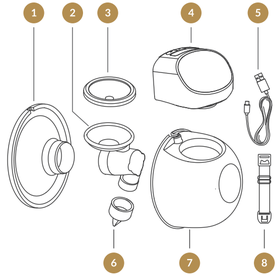

Alkatrészek listája

1. Szilikon mellvédő
2. Összekötő
3. Szilikon membrán
4. Szivattyúmotor/pumpa
5. USB töltőkábel
6. Szelep
7. Gyűjtőedény
8. Melltartó beállítási csat

A led kijelző és a gomb funkció leírása 02

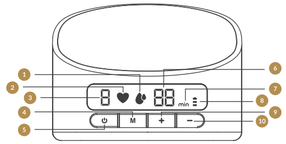

1. Fejés módja
2. Stimulációs mód
3. Szint kijelző
4. Üzemmódválasztó gomb
5. Bekapcsoló gomb
6. Idő kijelző
7. Idő/perc
8. Teljesítmény kijelző
9. Szint feljebb gomb
10. Szint lefelé gomb

Mi van a dobozban

• Mellvédő • szivattyúmotor • szilikon membrán
• USB töltőkábel • tejgyűjtő • szelep • kötőelem
• melltartóbeállító csat

Összeszerelés 03

A mellszívó összeszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

! FIGYELMEZTETÉSEK

- Ügyeljen arra, hogy a mellszívót a jelen használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg. Ne használja a mellszívót, ha az fizikailag sérült és ne helyezzeerős mágneses mezőt keltő készülk közelébe. Tartsa a mellszívót gyermekektől távol. A szivattyú részt ne merítse vízbe.
- Győződjön meg róla, hogy a mellszívót a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szerelte össze.
- A szívárgás elkerülése érdekében összeszerelés előtt távolítsa el a mellvédőn körüli maradványokat.
- A megtisztított alkatrészek összeszerelése előtt alaposan mosson kezet.

1. Helyezze a szilikon membránt a kötőelembe, és kezével nyomja meg, hogy a szélei szorosan rögzítve legyenek, így biztosítva a tökéletes tömítést.




2. Szerelje be a szelepet az összekötő aljába; győződjön meg róla, hogy a megfelelő irányban van beszerelve.



04

3. Helyezze az összeszerelt összekötőt a tejgyűjtőbe úgy, hogy az összekötő "fül" része a tejgyűjtő belső nyílásával egy vonalban legyen, és nyomja meg mindkét kezével az összekötő tárcsa részt, hogy szilárdan rögzítse a széleit a teljes tömítés érdekében.

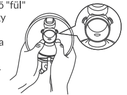

4. Helyezze a mellvédőt a tejgyűjtőre, illessze a mellvédőn lévő nyílást a tejgyűjtőn lévő ugyanilyen nyíláshoz, és mindkét kezével nyomja le a széleket, hogy biztosan a helyére pattanjon.



5. Nyomja rá a mellszívó motort a tejgyűjtőre, és ellenőrizze, hogy szorosan illeszkedik-e a tejgyűjtőbe.




⚠ FIGYELMEZTETÉSEK


A mellszívó nem működik, amikor a készüléket a töltővel töltik. Ügyeljen a beépített akkumulátor élettartamára. Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze az egyes alkatrészeket repedés, törés, elhasználódás, elszíneződés vagy meghibásodás szempontjából, mivel ezek befolyásolhatják a készülék hatékonyságát. Kérjük, az alkatrészek cseréjének pillanatáig hagyjon fel a termék használatával.

A szivattyúzás megkezdéséhez 05

1. Vegyen fel megfelelő testartást és pihenjen. Helyezze a mellvédőt a mellére, ne hagyjon réseket, és ügyeljen arra, hogy a mellbimbója a mellvédő középen legyen. Tartsa egyenesen a mellvédőt. Ügyeljen arra, hogy ne torzítsa el a termék és a mell helyzetét, különben a mellszívó nem fog szívni.

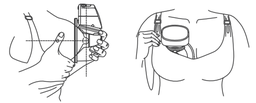


2. A mellszívó elindításához nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

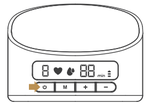


06


3. Nyomja meg röviden az "M" gombot a stimulációs üzemmódba való átkapcsoláshoz. Ennek a módnak 9 fokozata van. A " + " gomb megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő szíváserősséget. Érintse meg a " + " gombot a szívási erő növeléséhez, és a " - " gombot szívási erő csökkentéséhez. A szülés utáni korai időszakban a tejtermelés beindítása néha nem könnyű, ezzel a móddal lehet serkenteni az emlőt és szelektíven elősegíteni a tejelválasztást.

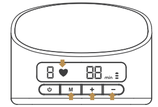

4. Nyomja meg röviden az "M" gombot a fejés módba lépéshez. Ez az üzemmód 9 fokozatú. A "+" gomb rövid megnyomásával a szint növeléséhez, a "-" gombbal pedig a szint csökkentéséhez kiválaszthatja a megfelelő szívó erőt.

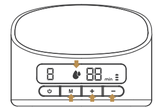

5. Nyomja meg újra röviden az "M" bekapcsológombot az automatikus üzemmódba való átváltáshoz. Ebben az üzemmódban a szivattyú alapértelmezés szerint az 1. fokozaton stimulációs üzemmódba kapcsol, és 15 másodpercenként egy fokozatot emelkedik, egészen a maximális 9-es fokozatig, majd ezen a szinten marad (" ♥ " villog és " 💨 " mindig világít). Ez a folyamat 2 percig tart. Ezután az 1. fokozatnál kapcsoljon fejő üzemmódba, 15 másodpercenként menjen feljebb egy fokozatot, és ezen a szinten marad az automatikus leállásig (" 💨 " villog és " ♥ " mindig világít). Az automatikus kapcsolás funkció leáll, és kézi üzemmódra vált, ha az automatikus üzemmód működése közben megnyom egy gombot. Ha az áramellátás a kézi üzemmódba váltás utána kikapcsolják, a készülék megjegyzi az aktuális üzemmódot.

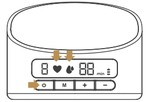

6. A fejés befejezése után nyomja meg röviden a " ⏻ " gombot a pumpa kikapcsolásához.




Tippek:

1. Ez a modell beépített memóriafunkcióval rendelkezik; amikor újra bekapcsolja a mellszívót, az automatikusan belép és felfelé vált a legutóbb használt munkamódba és szívási szintre. Ha kikapcsolja a szivattyút, amikor automatikus üzemmódban van, és újra bekapcsolja, akkor alapértelmezés szerint a stimulációs üzemmód első fokozatáról indul.

2. A mellszívó 20 perc működés után automatikusan leáll.

Szoptatás ülő helyzetben

Lazítson és üljön egy kényelmes székbe, enyhén döljön előre (használjon párnát a háttámaszhoz). Ügyeljen arra, hogy a mellszívó és a mellvédő kehely függőlegesen álljon.

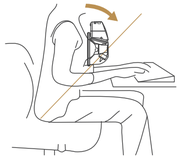

Ülő testtartás

Tisztítás

Tisztítás és karbantartás

	Első használat	Minden használat után
Szivattyútest	Kapcsolja ki a szivattyút a bekapcsológomb megnyomásával.	Szükség szerint törölje le tiszta, nedves ruhával 70%-os etil-alkohollal vagy izopropil-alkohollal. Ne merítse vízbe a szivattyút. A szivattyútest nem sterilizálható.
Mellvédő, szilikon membrán, összekötő, szelep és tejgyűjtő	5 percig vízben forraljuk. Ne tegye mikrohullámú sütőbe a mellvédőt, a szilikon membránt, az összekötőt, a szelepet vagy a tejgyűjtőt	Tisztítsa meg enyhe mosogatószerrel vagy tiszta vízzel. Mossa le az alkatrészeket meleg vízzel, hogy elkerülje a tej szennyeződését és a baktériumok elszaporodását.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

- Legyen óvatos a szelep eltávolításakor és tisztításakor; ha a szelep megsérül, a mellszívó nem fog megfelelően működni.
- A szelep tisztításához óvatosan dörzsölje át meleg vízben néhány csepp mosogatószerrel. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szelepbe, mert ez károsíthatja azt.

Kézzel tisztítsa meg

- Helyezze a mellszívó alkatrészeit tiszta tálba, amelyet csak baba ételeihez használnak. Ne helyezze a mellszívó alkatrészeit közvetlenül a mosogatóba.
- Öntsön néhány csepp mosogatószert a tálban lévő vízbe.
- Tisztítsa meg az alkatrészeket egy kizárólag csecsemőtápszerekre szánt tiszta kefével.
- Öblítse le az alkatrészeket folyó víz alá tartva vagy egy külön tálban tiszta vízbe merítve.
- Alaposan szárítsa meg a levegőn. Helyezze a mellszívó alkatrészeit, a mosogató tálat és a cumisüvegkefét egy tiszta, kizárólag erre a célra használt konyharuhára vagy papírtörlőre egy szennyeződéstől és portól védett helyen. Ne használja a konyharuhát az elemek szárazra dörzsölésére vagy letörlésére.
- Tisztítsa meg a mosogatálat és a cumisüvegkefét. Alaposan öblítse ki őket, és minden használat után hagyja őket a levegőn megszáradni. Néhány nap használat után mossa meg őket is.

Utasítások a melltartóállító csathoz

Állítsa be a melltartópántok hosszát, hogy a fejés kényelmesebb legyen. A melltartóállító csat egyik végének a szoptatós melltartó belső csatja fölött kell lógnia. Állítsa be a melltartócsat hosszát a melltartó állítócsat másik végén.



1. kép



2. kép



3. kép

Az akkumulátor állapotjelző ábrája

Az akkumulátor állapotjelzőjén látható	Maradék fejési idő
A hármas szint jelzőfénye világít	Legalább 100 perc
A kettes szint jelzőfénye világít	Legalább 65 perc
Az egyes szint jelzőfénye világít	Legalább 25 percig
Az első szint fénye villog	Legalább 5 percig

A fejés befejezése

Miután befejezte a fejést, vegye le a mellszívót a melléről. Tartsa a mellszívót függőlegesen, távolítsa el a motoros részt, majd fogja meg a tejgyűjtőt, hogy az anyatejet a cumisüvegbe tudja önteni. Győződjön meg róla, hogy a mellszívó tejgyűjtő része egy vonalban legyen a cumisüveg szájával, hogy megakadályozza az anyatej kiömlését.

1. Amikor befejezte a fejtést, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a pumpa kikapcsolásához, és az ujjával törje fel a mell és a szivattyú tölcsére közötti tömítést, majd óvatosan vegye le a pumpát a mellről.



2. Válassza le a tejgyűjtőt a szivattyú motorjáról; az összegyűjtött tej készen áll az etetésre/tárolásra. Tisztítsa meg a többi használt alkatrészt az utasításoknak megfelelően.



3. Öntse a tejet a tároló üvegbe; győződjön meg arról, hogy a nyílás egy vonalban van az üveggel.



Az anyatej tárolása

Az anyatej tárolása

1. Csak sterilizált mellszívóval gyűjtött anyatejet tároljon. Az anyatejet helyesen kell tárolni és kiolvasztani. Csak így lehet biztos abban, hogy minden fontos tápanyag megmarad és a baktériumok általi fertőzés minimálisra csökken.
2. Az anyatejet tiszta és sterilizált tejtároló zacskóba vagy zárható cumisüvegbe lehet helyezni, és azonnal hűtőbe vagy fagyasztóba kell tenni.

Az anyatej hideg tárolása

1. Az anyatejet nem szabad többször lefagyasztani.
2. Ne keverje össze a friss anyatejet fagyasztott anyatejjel.
3. A kiolvasztás után megmaradt anyatejet feltétlenül öntse ki.
4. A lefejt tejet hűtőszekrényben 48 órán keresztül hűthetjük (a hűtőszekrény alsó, hátsó részében), vagy három hónapig fagyasztva a fagyasztóban tárolhatjuk; a cumisüvegre vagy a tej tárolására szolgáló zacskóra címkét kell ragasztani, amelyen egyértelműen fel kell tüntetni a fejés dátumát és időpontját. Soha ne töltse tele a cumisüveget/zacskót, hogy maradjon tágulái hézag.

Az anyatej kiolvasztása

A fagyasztott anyatejet egy éjszakára tegye a hűtőszekrénybe, hogy kiolvadjon. Ha sürgősen kell kiolvasztania a tejet, akkor egy tál kézmeleg vízben hagyhatja kiolvadni az anyatejet (vagy tartsa az üveget vagy a zacskót meleg max. 37° folyóvíz alatt). Ne olvassza a fagyasztott anyatejet mikrohullámú sütőben vagy forrásban lévő vízzel (égési sérülés veszélye). Kiolvasztás után az anyatejet 24 órán belül el kell fogyasztani.

Az anyatej melegítése

1. Tegye a cumisüveget függőlegesen egy tál meleg vízbe, vagy melegítse fel az anyatejet biztonságosan és gyorsan egy cumisüveg melegítővel.

2. Figyelem! Mielőtt megetetné a babát, mindenképpen ellenőrizze az anyatej hőmérsékletét.
3. Ne használjon mikrohullámú sütőt az anyatej melegítésére, mert ez elpusztíthatja az anyatejben lévő értékes tápanyagokat és antitesteket.
4. Ezenkívül az egyenetlen melegítés a folyadék részleges túlmelegedését okozhatja, ami égési sérüléseket okozhat.
5. Ne merítse a tejtároló cumisüveget forró vízbe melegítés céljából - a cumisüveg megrepedhet vagy eltörhet.

innoGIO

INNOGIO sp. z o.o.
utca. Ostródzka 74H, 03-289 Varsó, Lengyelország

www.innogio.com

@innoGIO.official @innogio_com

CE RoHS